

# Manuel Utilisateur DIANE

## Version 4.11

DIANE | ANESTHESIE

une marque de BOW MEDICAL

DIANE | OBSTÉTRIQUE

une marque de BOW MEDICAL

DIANE | REA

une marque de BOW MEDICAL



# BOW MEDICAL

— EDITEUR DE LOGICIELS —



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

# Avertissement

© (Copyright **BOW MEDICAL**, 1999-2023)

**Tous droits réservés.** Toute reproduction ou diffusion, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de la société **BOW MEDICAL**. Une copie par Xérogaphie, photographie, film, support magnétique ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues notamment par la loi du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la protection des droits d’auteur.

**Marques déposées.** Toutes les informations connues ont été communiquées sur les marques déposées pour les produits, services et sociétés mentionnés dans ce document. Tous les autres noms de marques et de produits utilisés dans ce document sont des marques déposées ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

## Table des matières

1.	Introduction.....	10
1.1	Informations réglementaires relatives au dispositif médical .....	10
1.1.1	Destination du dispositif médical DIANE.....	10
1.1.2	Règlements et normes appliqués au dispositif médical DIANE.....	10
1.1.3	Population cible.....	11
1.1.4	Utilisateurs cibles .....	11
1.1.5	Signaler un évènement indésirable lié au dispositif médical .....	11
1.1.6	Compatibilité des bases de données médicamenteuses .....	11
1.2	Lecture du manuel utilisateur .....	11
1.3	Administration et dépannage .....	13
1.4	Sécurité.....	13
1.5	La traçabilité dans DIANE.....	13
1.6	DIANE Manager .....	14
1.7	Le mode déconnecté et les connexions entre postes .....	15
1.7.1	Le passage en mode déconnecté .....	15
1.7.2	La resynchronisation des données .....	15
2.	Socle commun .....	17
2.1	Démarrage de DIANE .....	17
2.1.1	Identification de l'utilisateur .....	17
2.1.2	Localisation du poste.....	18
2.1.3	Mode Maître versus mode Miroir .....	18
2.1.4	La page d'accueil de DIANE - le Portail DIANE.....	21
2.1.5	Sélection du dossier d'un patient.....	30
2.1.6	La reprise des informations d'un dossier antérieur .....	30
2.1.7	Sortie du patient.....	31



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

2.2	Les différents modes de saisie dans DIANE .....	32
2.2.1	Les champs de saisie simple .....	32
2.2.2	Les menus déroulants .....	32
2.2.3	Les cases à cocher .....	33
2.2.4	Les groupes de cases à cocher .....	33
2.2.5	Les groupes de bouton radio.....	33
2.2.6	Champs Dates et Calendrier .....	33
2.2.7	Les champs de saisie avec liste de référence .....	34
2.2.8	Les boutons .....	36
2.2.9	Les saisies avancées .....	37
2.2.10	Saisie multiple .....	44
2.2.11	Zone d'édition de documents .....	49
2.2.12	Le composant Traitements actuels .....	49
2.2.13	Le composant Allergies .....	52
2.2.14	Le schéma dentaire .....	53
2.2.15	Les onglets communs.....	53
2.3	Lien avec les banques de médicaments .....	61
2.4	L'impression centralisée .....	62
2.4.1	La visualisation et l'impression d'une intervention.....	64
2.5	Le cockpit.....	67
2.5.1	La liste des patient présents.....	70
2.5.2	Information sur les patients .....	72
2.5.3	Liste des soins.....	75
2.5.4	Anonymisation des lits .....	77
2.5.5	La Gestion des refus .....	78
2.5.6	L'indisponibilité de lits.....	80
2.5.7	Le rapport d'impression .....	81
2.5.8	Transmissions médicales .....	82
2.5.9	Statut de l'identité INS .....	83
2.5.10	Affichage du personnel .....	83
2.5.11	Liste des prélèvements à effectuer .....	83
2.6	Le module de Saisie Rapide .....	84
2.7	Gestion du poids dans DIANE .....	86
2.8	Affichage des données lors d'un transfert au bloc opératoire depuis un autre service (réanimation / USC) .....	87
3.	DIANE ANESTHESIE .....	89
3.1	Sélection du dossier patient en anesthésie .....	89
3.1.1	Consultation .....	89
3.1.1	Per-opératoire et Post-opératoire .....	89



3.2	La Consultation pré-anesthésique .....	91
3.2.1	Les boutons de la consultation préanesthésique.....	91
3.2.2	La zone Intervention(s).....	92
3.2.3	La liste des interventions du patient sélectionné.....	92
3.2.4	La programmation d'une nouvelle intervention .....	93
3.2.5	Les onglets principaux de la consultation préanesthésique .....	94
3.2.6	L'onglet Résumé .....	100
3.2.7	L'onglet STAFF / Visite Pré Anesthésique.....	101
3.2.8	Fermeture du dossier de consultation du patient et les champs bloquants à saisir.....	101
3.2.9	L'impression de la consultation.....	102
3.3	Utilisation de DIANE sur ordinateur portable SANS RÉSEAU.....	104
3.3.1	Le pré-chargement des dossiers patients .....	104
3.3.2	La resynchronisation des données .....	104
3.4	Le Per-Opératoire et Le Post-Opératoire.....	105
3.4.1	L'aspect général de l'application .....	105
3.4.2	Actions Importantes.....	114
3.4.3	L'onglet Surveillance - la feuille d'anesthésie .....	118
3.4.4	Les composants rencontrés en per opératoire ou en post opératoire .....	126
3.4.5	L'onglet Evénements .....	128
3.4.6	L'onglet Consultation .....	129
3.5	Les spécificités du Post opératoire .....	129
3.6	La sortie du patient.....	130
3.6.1	La saisie et la signature du médecin responsable .....	131
3.6.2	La signature des prescriptions post opératoires .....	131
3.6.3	La signature de la sortie de la salle de réveil.....	131
4.	DIANE OBSTETRIQUE.....	132
4.1	Sélection du dossier en obstétrique .....	132
4.1.1	Sélection du type de dossier .....	132
4.2	Aspect général de l'application .....	133
4.3	Check-list feuille d'ouverture de salle .....	134
4.4	Onglet administratif.....	135
4.5	Onglet Antécédents.....	136
4.5.1	Sous-onglet : Antécédents .....	136
4.5.2	Sous-onglet : ATCD Obstétricaux .....	137
4.6	Onglet grossesse.....	143
4.6.1	Sous-onglet : Début de grossesse .....	143
4.6.2	Sous-onglet : Surveillance de la grossesse .....	145
4.7	Gestion des ordonnances .....	151
4.7.1	Prescription des médicaments.....	153





4.7.2	Prescription des examens complémentaires et des soins :.....	156
4.7.3	Prescriptions ALD .....	157
4.7.4	Validation d'une prescription.....	157
4.7.5	Impression des ordonnances .....	158
4.8	Hospitalisation .....	159
4.9	Onglet SDN .....	160
4.9.1	Le partogramme.....	160
4.9.2	Prescription en cours de travail.....	170
4.9.3	Résumé d'accouchement .....	172
4.9.4	Sous-onglet : SDN – Nouveau-né .....	174
4.9.5	Sous-onglet : Examen clinique / Réanimation.....	176
4.9.6	Sous-onglet : CR d'accouchement.....	178
4.10	Onglet Post partum .....	180
4.10.1	Sous-onglet : Post partum maternel .....	180
4.10.2	Sous-onglet : Post partum Nouveau-né.....	182
4.10.3	Sous-onglet : Courbes .....	183
4.10.4	Sous-onglet : Prado / sortie précoce.....	184
4.11	Certificat du 8 <sup>e</sup> jour.....	185
4.11.1	Cas des grossesses multiples .....	185
4.12	Onglet Échographies.....	186
4.13	CAS DES ACCOUCHEMENTS SOUS X .....	187
4.14	DOSSIER DE GYNECOLOGIE.....	187
4.14.1	Consultation de Gynéco .....	188
4.14.2	Hospitalisation gynéco.....	188
4.14.3	Cs – Acupuncture gynéco / Cs – colposcopie gynéco .....	189
4.15	DOSSIER D'ORTHOGENIE .....	190
4.15.1	Introduction .....	190
4.15.2	Suivi en orthogénie .....	190
4.16	Fermeture du dossier .....	191
5.	DIANE REA .....	193
5.1	Aspect général de DIANE REA.....	193
5.1.1	Le bandeau supérieur.....	194
5.1.2	Navigation entre les dossiers .....	196
5.2	Admission du patient et sélection du dossier.....	197
5.2.1	Cas de la reprise d'un dossier en transfert.....	199
5.3	Onglet Navigation.....	200
5.3.1	Protocoles médicaux .....	200
5.3.2	Impressions .....	201
5.4	Onglet Admission.....	201



5.4.1	Sous-onglet Admission .....	202
5.4.2	Sous-onglet Correspondants .....	203
5.4.3	Sous-onglet Sortie .....	203
5.5	Onglet Médecin .....	204
5.5.1	Sous-onglet Observations d'entrée en Réa .....	204
5.5.2	Sous-onglet Examens Complémentaires .....	205
5.5.3	Evolutions, Synthèse Réa et Compte-rendu de sortie.....	206
5.5.4	Sous-onglet LATA / engagement thérapeutique .....	207
5.6	<b>MD</b> Onglet Prescription .....	209
5.6.1	La fenêtre de prescription .....	210
5.6.2	Zone de prescription simplifiée .....	212
5.6.3	Iconographie des champs de prescription .....	213
5.6.4	Mise en pause et arrêt des prescriptions.....	215
5.7	<b>MD</b> Exemples de prescriptions .....	216
5.7.1	Prescription de la surveillance clinique .....	216
5.7.2	La prescription médicamenteuse .....	216
5.7.3	Import depuis le traitement personnel .....	236
5.7.4	La prescription par saisie libre (Alimentation, Imagerie...) .....	237
5.7.5	La prescription par appel de saisie avancée (Kinésithérapie, Biologie/bactériologie, ECMO...) ...	237
5.7.6	Prescription des paramètres ventilatoires .....	239
5.7.7	La prescription des dispositifs médicaux (pose et retrait) .....	240
5.7.8	La prescription de saisies multiples.....	243
5.7.9	Prescription liée à un événement .....	245
5.7.10	Les favoris de prescription .....	248
5.7.11	Les protocoles de prescription.....	251
5.7.12	Validation et signature de la prescription.....	255
5.7.13	Le rapport de la banque des médicaments .....	257
5.7.14	Historique des prescriptions .....	259
5.8	Validation pharmaceutique .....	260
5.8.1	Validation ligne à ligne .....	261
5.8.2	Validation globale de la prescription.....	262
5.8.3	Commentaire global sur la prescription .....	262
5.9	<b>MD</b> Onglet Plan de soins.....	262
5.9.1	Iconographie du plan de soins .....	263
5.9.2	Utilisation du plan de soins .....	266
5.9.3	Planification Infirmière.....	286
5.9.4	Bilan des Entrées / Sorties.....	287
5.9.5	Historique du plan de soins.....	291



5.9.6	Cas des administrations demandées par un médecin.....	292
5.9.7	Éléments de soins.....	294
5.10	Plan de cueillette .....	295
5.11	Impression des étiquettes médicamenteuses .....	298
5.12	Impression des ordonnances d'antibiotiques et des indications de l'antibiothérapie.....	300
5.12.1	Ordonnances d'antibiotiques .....	300
5.12.1	Indications de l'antibiothérapie .....	301
5.13	Onglet laboratoire / biologie .....	302
5.14	Onglet Paramédical .....	303
5.14.1	Sous-onglet Macro-cible d'entrée.....	304
5.14.2	Les transmissions ciblées .....	305
5.15	Onglet Scores.....	306
5.15.1	Saisie et validation du score IGS II .....	306
5.15.1	Saisie et validation du score CRIB II .....	308
5.16	Onglets de données croisées : hémodynamique, respiratoire, rénal.....	310
5.16.1	Le journal des alarmes .....	311
5.17	Onglet Germes.....	311
5.17.1	Compléter/ Renseigner la présence d'une infection chez le patient.....	312
5.17.2	Infection COVID.....	313
5.18	Le schéma corporel.....	314
5.18.1	Positionner un dispositif médical.....	315
5.18.2	Choix du dispositif médical .....	318
5.18.3	Saisir le formulaire de pose du dispositif médical .....	319
5.19	L'écran de synthèse .....	330
5.19.1	Données de surveillance .....	330
5.19.2	Éléments importants.....	332
5.19.3	Visualisation des champs de données .....	332
5.19.4	Visualisation des résultats de laboratoire.....	333
5.19.5	Balance liquidienne.....	333
5.19.6	Prescriptions en cours.....	334
5.19.7	Visualisation des conclusions du staff.....	335
5.19.8	Visualisation des transmissions ciblées .....	336
5.19.9	Suivi des dispositifs .....	337
5.20	La sortie du patient.....	337
6.	REQUETES.....	339
6.1	Présentation du module de requêtes.....	339
6.2	Création des filtres et des groupes de filtres.....	339
6.3	Création des colonnes et des groupes de colonnes .....	341
6.4	Création des rapports.....	342



6.5	Exemple de rapport .....	342
7.	CCAM / CIM10 .....	346
7.1	Lancement de l'application CCAMCIM10 .....	346
7.2	Recherche des dossiers patient .....	346
7.2.1	Types de dossiers à rechercher .....	347
7.2.2	Filtres de sélection .....	347
7.3	Formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM .....	348
7.3.1	Codes CIM10 (Classification Internationale des Maladies) .....	349
7.3.2	Codes CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) .....	351
7.3.3	Codes NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) .....	352
7.3.4	Export des données .....	353
7.3.5	Impression des codes .....	353
7.3.6	Codes CCAM automatiques .....	354
7.4	Affectation du praticien (Codes CCAM) .....	363
7.5	Impression des codes CCAM et CIM10 .....	364
8.	Gestion des rendez-vous .....	366
8.1	L'aspect général de l'application de Rendez-Vous .....	366
8.1.1	Le bandeau supérieur du module de gestion des rendez-vous .....	366
8.1.2	Les différentes zones .....	367
8.2	Création d'un nouveau rendez-vous .....	369
8.3	Recherche d'un rendez-vous .....	370
8.4	Modification d'un rendez-vous .....	370
8.5	Gestion des disponibilités des médecins .....	371
8.6	Gestion des indisponibilités des médecins .....	372
8.7	Gestion des couleurs d'affichage .....	373
8.8	Heures de début et Heures de fin .....	374
8.9	Impressions des rendez-vous .....	374
8.10	Gestion de la salle d'attente .....	375
9.	DIANE COMPTA .....	376
9.1	Lancement de l'application DIANE COMPTA .....	376
9.2	Zone Honoraires .....	376
9.3	Zone Paiements .....	377
9.4	Zone située en bas de l'application .....	377
9.5	Ajout d'un honoraire .....	378
9.6	Impression .....	380
10.	DIANE MESSAGERIE .....	381
10.1	Envoi de messages .....	382
10.2	Configuration de la messagerie .....	383
11.	Lexique .....	384





2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 1. Introduction

**DIANE** est une suite logiciel dédiée aux soins critiques en milieu hospitalier. Plusieurs modules sont disponibles et permettent d'assurer un suivi sécurisé des patients tout en étant adapté aux besoins des soignants :

- **DIANE ANESTHÉSIE** permet le suivi des patients de la consultation d'anesthésie jusqu'en salle de surveillance post-interventionnelle en passant par le per-opératoire.
- **DIANE REA** permet le suivi des patients en service de réanimation et en soins continus.
- **DIANE OBSTÉTRIQUE** permet d'assurer le suivi des patientes et des nouveau-nés en obstétrique ainsi que le suivi des femmes en gynécologie et en orthogénie.

Ce manuel traite du fonctionnement de l'ensemble des modules afin de faciliter la prise en main par les utilisateurs.

Le manuel utilisateur est accessible via la touche F1 de votre ordinateur. L'aide est construite pour accéder directement au chapitre du manuel qui correspond à l'onglet dans lequel vous vous situez.

**DIANE** est une suite logicielle paramétrable. Il est donc possible que la présentation, les onglets et les composants soient disposés différemment.

Ce manuel va permettre de voir les différents modes de saisie ainsi que les particularités liées à chaque module.

Les captures d'écran contenues dans ce manuel sont informatives.

### 1.1 Informations réglementaires relatives au dispositif médical

#### 1.1.1 Destination du dispositif médical DIANE

Les données gérées et affichées par le logiciel **DIANE** peuvent amener l'utilisateur à prendre des décisions à des fins thérapeutiques ou diagnostiques, notamment grâce à son moteur de prescription et aux calculs des différents scores que **DIANE** propose.

D'après la réglementation en vigueur, ce moteur de prescription et les calculs permettant de répondre à cette destination sont marqués dispositifs médicaux. Les modules concernés sont tagués **MD** dans le présent manuel.

#### 1.1.2 Règlements et normes appliqués au dispositif médical DIANE

##### 1.1.2.1 Règlements appliqués au dispositif médical DIANE

- Directive 93/42/CEE du conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
- Règlement (UE) sur les dispositifs médicaux 2017/745
- Règlement UE : 2016/679 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
- Règlement d'exécution (UE) 2021/2226 du 14 décembre 2021 : les instructions d'emploi électroniques des dispositifs médicaux



### 1.1.2.2 Normes appliquées au dispositif médical DIANE

- IEC 62304 : 2008 – cycle de vie d'un logiciel dispositif médical
- ISO 13485 : 2016 - exigences des systèmes de management de la qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux.
- ISO 14971 : 2019 - Gestion des risques des dispositifs médicaux
- IEC 62366 :2015 - Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux
- ISO 20417 :2021 – Dispositifs médicaux - Informations à fournir par le fabricant
- ISO 15223-1:2021 - Dispositifs médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant — Partie 1: Exigences générale

### 1.1.3 Population cible

- Anesthésie : tout patient nécessitant une prise en charge anesthésique
- Réanimation : tout patient hospitalisé en service de réanimation peu importe le type de réanimation (adulte, néonatale, chirurgicale, etc...)
- Obstétrique : toute femme enceinte dans le cadre de son suivi obstétrical, toute femme dans le cadre de son suivi gynécologique, tout nouveau-né dans le cadre de son suivi en période néonatale.

### 1.1.4 Utilisateurs cibles

Le dispositif médical **DIANE** est exclusivement destiné à des professionnels de santé. Une utilisation par d'autres personnes n'est pas raisonnablement prévisible.

### 1.1.5 Signaler un évènement indésirable lié au dispositif médical

Le moteur de prescription **DIANE** est un dispositif médical selon la réglementation en vigueur. Tout comportement anormal du dispositif médical **DIANE** provoquant un risque ou un incident ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la dégradation grave de l'état de santé du patient doit être signalé sans délai à Bow Médical et à l'autorité compétente de votre pays.

### 1.1.6 Compatibilité des bases de données médicamenteuses

**DIANE** s'interface avec les bases de données Vidal et BCB.

Version minimale requise pour Vidal : 2020.5.3

Version minimale requise pour BCB : 20180702

## 1.2 Lecture du manuel utilisateur

Le manuel utilisateur aborde les différentes fonctionnalités de la suite logicielle **DIANE**. Les utilisateurs seront concernés par différentes parties selon l'installation présente sur leur site.

Pour faciliter la lecture, voici comment lire ce manuel en fonction du module sur lequel vous avez l'habitude de travailler.



- **DIANE ANESTHESIE :**
  - Chapitre 1 : Généralités (*Introduction*)
  - Chapitre 2 : Socle commun (*Socle commun*). Ce chapitre explique comment démarrer **DIANE** ainsi que les différents modes de saisie.
  - Chapitre 3 : **DIANE ANESTHESIE** (*DIANE ANESTHESIE*) qui traite de la consultation préanesthésique (*Sélection du dossier patient en anesthésie*), du suivi per et post opératoire (*Le Per-Opératoire et Le Post-Opératoire*).
  
- **DIANE REA :**
  - Chapitre 1 : Généralités (*Introduction*)
  - Chapitre 2 : Socle commun (*Socle commun*). Ce chapitre explique comment démarrer **DIANE** ainsi que les différents modes de saisie.
  - Chapitre 5 : **DIANE REA** (*DIANE REA*). Ce chapitre traite de l'ensemble des fonctionnalités du module de réanimation avec un accent sur les prescriptions (*Onglet Prescription, Exemples de prescriptions*), sur le plan de soins (*Onglet Plan de soins*), et sur le schéma corporel (*Le schéma corporel*).
  
- **DIANE OBSTETRIQUE :**
  - Chapitre 1 : généralités (*Introduction*)
  - Chapitre 2 : Socle commun (*Socle commun*). Ce chapitre explique comment démarrer **DIANE** ainsi que les différents modes de saisie.
  - Chapitre 4 : Le chapitre 4 (*DIANE OBSTETRIQUE*) traite de l'ensemble du module d'obstétrique. Néanmoins, le suivi des grossesses est traité dans les chapitres 4.1 à 4.13. Le chapitre 4.14 traite plus particulièrement du suivi gynécologique (*DOSSIER DE GYNECOLOGIE*) et le chapitre 4.15 du suivi en orthogénie (*DOSSIER D'ORTHOGENIE*).

D'autres chapitres traitent de fonctionnalités diverses comme le codage (*CCAM / CIM10*), l'outil de requêtes (*REQUETES*) le module de comptabilité (*DIANE COMPTA*) ou encore du module de rendez-vous (*Gestion des rendez-vous*).

Afin de faciliter la lecture, des règles de typologie ont été mise en place. Elles sont décrites ci-dessous :

Type d'écriture	Fait référence à
<b>DIANE ANESTHESIE</b>	A la suite logicielle concernée
<b>Examens cliniques</b>	A un onglet
<b>Antécédents Médicaux</b>	Un composant portant ce nom
Bouton <b>Arrêter</b>	Un bouton nommé « Arrêter »
<i>Utilisation de DIANE sur ordinateur portable SANS RESEAU</i>	Lien permettant d'accéder directement à un chapitre





### 1.3 Administration et dépannage

Une ou plusieurs personnes sont désignées pour administrer et gérer **DIANE** afin de maintenir la base des listes à jour (créer un utilisateur ou une saisie multiple, ajouter un médicament, etc...)

Votre administrateur de site pourra également vous aider à utiliser le logiciel **DIANE**.

En cas de problème informatique, prévenez votre administrateur de site ou le service informatique de votre centre.

**REMARQUE** : en cas de dysfonctionnement bloquant de l'application, il est possible de fermer toutes les applications relatives à **DIANE** à l'aide de **DIANE MANAGER**. Cela évite de passer par le gestionnaire des tâches de Windows. Pour cela, double-cliquez sur *DianeKiller.exe* puis sur le bouton **Arrêter** tous les processus **DIANE**.

**ATTENTION** : L'utilisation de **DIANE MANAGER** doit rester l'exception quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Le risque de perte des données récemment entrées est réel.

### 1.4 Sécurité

Les droits d'accès sont attribués à chaque utilisateur. Chaque groupe d'utilisateurs, en fonction de son rôle, a des droits dans l'application qui diffèrent. On distingue :

- Droits logiciels : Accès aux différentes applications de **DIANE**,
- Droits applicatifs : Accès aux différentes fonctionnalités des applications,
- Droits administratifs : Accès à la configuration et aux différentes listes de référence.

La sécurité d'utilisation est assurée en cas de perte de liaison de l'ordinateur avec le réseau ou le serveur. Les stations de travail continuent à enregistrer toutes les données sur l'ordinateur et l'envoi de ces données se fera au prochain démarrage dans une situation normale. Ce qui permet une réelle continuité d'exploitation.

### 1.5 La traçabilité dans DIANE

Le logiciel **DIANE** est doté d'une traçabilité des données saisies avec différenciation de leurs auteurs. Une visualisation en temps réel de tous les éléments renseignés successivement dans les différents champs est possible par survol à la souris de ces champs.

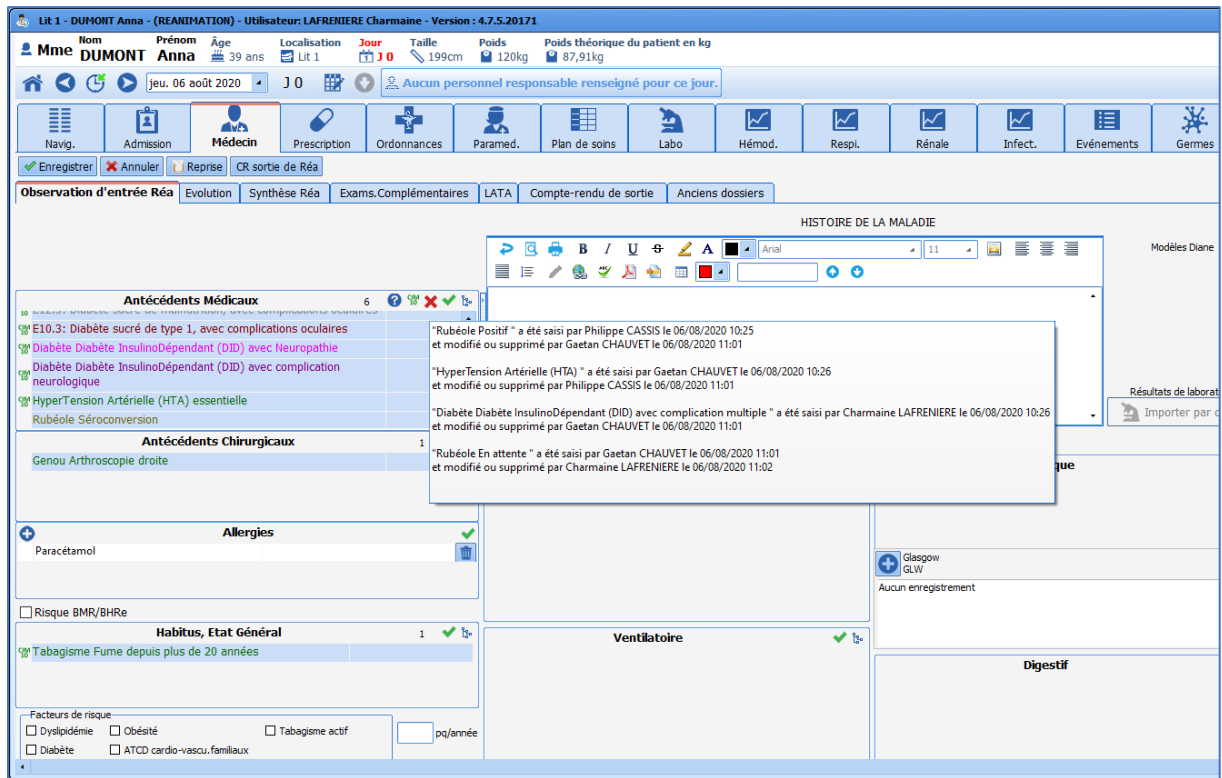
Cette traçabilité est maintenue lors de l'utilisation en mode déconnecté du réseau, tant pour les données déjà acquises que celles complétées à nouveau.

Dans l'application, une couleur est attribuée à chaque utilisateur qui effectue une modification, un ajout ou une suppression sur un dossier patient.

Dans la capture d'écran ci-dessous, on peut voir une croix rouge en haut à droite du champ **Antécédents Médicaux**. Au survol de la souris, un descriptif détaillé de l'ensemble des modifications ou suppressions de données au sein de ce champ est visible.

Cette traçabilité de la saisie est disponible pour l'ensemble des champs, y compris les champs de saisie libre.





**REMARQUE :** Il n'y a pas d'historique sur les examens spécifiques (onglet **Examens cliniques**) et les bilans configurables (onglet **Paraclinique**).

## 1.6 DIANE Manager

En cas de dysfonctionnement bloquant de l'application, il est possible de fermer toutes les applications relatives à **DIANE** à l'aide de **DIANE MANAGER**.

L'utilisation de **DIANE MANAGER** peut provoquer des pertes de données sur le dossier patient pris en charge. Demandez à vos référents des instructions sur l'usage de celui-ci.



Cela évite de passer par le gestionnaire des tâches de Windows.



La fenêtre suivante s'ouvre afin de proposer :

- L'arrêt de **DIANE** : ce qui force l'arrêt complet du logiciel
- La relance de **DIANE** : ce qui entraîne un arrêt complet suivi d'un redémarrage immédiat
- Ne rien faire (qui permet de fermer cette fenêtre et revenir sur le portail).

La relance de **DIANE** redémarre un module en suivant la règle de priorité suivante :

1. DianeRea
2. Visual
3. DianeObst
4. Consultation
5. CCAMCIM10
6. RDV



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

7. DiaCompta
8. Fusion
9. Diane (portail)
10. Configuration
11. UserConfiguration
12. MAIImpression

Si plusieurs sont démarrés simultanément, c'est celui ayant le plus petit numéro dans la liste précédente qui sera redémarré.

## 1.7 Le mode déconnecté et les connexions entre postes

Une continuité d'exploitation est assurée en cas de panne du serveur ou de perte de liaison avec le réseau ou le serveur.

En mode déconnecté, l'enregistrement des données remontées localement par les appareils biomédicaux se poursuit. Il est également possible de créer un nouveau patient et de faire toute la procédure le concernant.

Les changements d'utilisateurs sont possibles en mode déconnecté.

**IMPORTANT :** Ne jamais considérer le mode déconnecté comme un fonctionnement normal de l'application. Ce mode permet simplement de ne pas perdre le travail réalisé lors d'une coupure réseau. Redémarrer **DIANE** dès que la situation est redevenue normale.

**REMARQUE :** Lorsque c'est un problème de serveur, vous garderez la fonction de connexion inter-postes. Lorsque c'est un problème de réseau, vous n'aurez plus accès aux autres postes à partir de l'ordinateur déconnecté. Les autres postes du service n'auront également plus accès au poste déconnecté du réseau.

### 1.7.1 Le passage en mode déconnecté

Le passage en mode déconnecté, que ce soit au lancement de l'application ou en cours d'utilisation, est signalé par le message ci-contre.



Lors du passage en mode déconnecté, le bandeau haut de l'application passe en rouge et une icône s'affiche afin d'indiquer que vous n'êtes plus connecté à la base de données.



### 1.7.2 La resynchronisation des données

A la perte du réseau, toutes les données se stockent sur le poste de travail maître.

Une resynchronisation est tentée lors de la fermeture de l'application. Une resynchronisation est également tentée lors de la sortie du patient.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

A chaque redémarrage, **DIANE** teste l'accès au réseau et transmet les données du ou des patient(s) enregistré(s) localement sur le serveur central. Les données se resynchroniseront automatiquement lors de la prochaine connexion du poste touché.

En cas de passage en mode déconnecté :

- Les autres postes du service sont-ils aussi déconnectés ? si oui, il peut s'agir d'un problème général.
- Le poste a-t-il accès à intranet ? Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un problème de connexion au réseau.
- Le poste a-t-il été mobilisé ? Le câble réseau est-il toujours connecté ?



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 2. Socle commun

### 2.1 Démarrage de DIANE

#### 2.1.1 Identification de l'utilisateur

Pour lancer l'application **DIANE**, sélectionner son nom dans le menu **Démarrer/Programmes/Diane**, ou double-cliquez sur l'icône du même nom, placée sur le bureau de Windows.

**ATTENTION : ne déplacez surtout pas les exécutables originaux sur le bureau.**



L'**Alias**, situé dans la zone **Connexion**, contient les références du serveur.  
**Ne pas modifier le contenu de ce champ.**

Renseignez votre identifiant et votre mot de passe fournis par vos référents.

**REMARQUE :** Lors de la 1<sup>ère</sup> connexion, il faudra inscrire manuellement l'identifiant. Cet identifiant fera ensuite partie de la liste dans le menu déroulant.

**REMARQUE :** Lors de la mise en service du logiciel **DIANE** dans votre centre, c'est **BOW MEDICAL** (ou votre administrateur de site) qui a créé votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour que vous puissiez vous connecter à **DIANE**. De ce fait, lors de votre 1<sup>ère</sup> connexion, un message d'alerte signale que votre mot de passe doit être modifié. Ce message s'affichera tant que vous n'aurez pas enregistré un nouveau mot de passe.

Un changement de mot de passe pourra ensuite vous être demandé tous les ans.



La case à cocher **Forcer la mise en mode déconnecté** permet de démarrer une ou plusieurs applications de **DIANE** en mode déconnecté du réseau. Cette case est utile dans le cas d'une utilisation sur ordinateur portable dans une zone sans réseau. Elle est aussi utilisée en cas de mise à jour du logiciel, ce qui est géré par les référents.

#### 2.1.1.1 Iconographie de la fenêtre de connexion



Il est possible de changer de mot de passe en cliquant sur l'icône **Changer le mot de passe**. En sélectionnant **Changer de mot de passe**, la fenêtre de changement du mot de passe s'ouvre. Saisissez votre ancien mot de passe, le nouveau puis sa confirmation. Cliquez sur **OK**



ou sur la touche **Entrée** du clavier pour enregistrer la modification.

Changer de mot de passe peut se faire via différents accès de l'application **DIANE** :

- Le menu **Configuration** de l'application **RDV**,
- Le bouton **Options** de l'application **Consultation**, via les boutons spécifiques disponibles dans les applications **DIANE ANESTHÉSIE** ou **DIANE REA**
- Le menu ? de l'application **Requêtes...**



Vous pouvez verrouiller la station **DIANE** en cliquant sur l'icône **Verrouiller la station DIANE**.

Vous avez différentes possibilités afin de verrouiller la station **DIANE** :

- Le bouton **Options** de l'application **Consultation**,
- Les boutons spécifiques disponibles dans les applications **DIANE ANESTHÉSIE** ou **DIANE REA**,
- Le menu ? de l'application **Requêtes...**



Cette icône **A propos...** indique la version de **DIANE** qui est installée sur le poste. En cas de défaillance technique, ces informations seront utiles à l'équipe technique de **BOW MEDICAL**.

### 2.1.2 Localisation du poste

A la première connexion, la fenêtre ci-contre vous proposera de référencer la salle dans laquelle se trouve le poste.

Dans les services tels que la réanimation, la salle de réveil... un poste peut gérer plusieurs lits, dans ce cas-là, la localisation du poste se poursuivra en demandant quels lits sont affectés au poste.

Les intitulés **Lit 1**, **Lit 2** et **Lit 3** sont juste indicatifs de ce que vous devez indiquer... les choix se font par les menus déroulants.

### 2.1.3 Mode Maître versus mode Miroir

Le logiciel **DIANE** permet de documenter, historiser et centraliser les informations liées aux patients. Le dossier d'un patient est accessible depuis n'importe quel poste de votre service sur lequel le logiciel **DIANE** est installé.

Le dossier du patient est lié à un seul poste que nous nommons Maître. Le poste Maître est celui qui est



connecté aux appareils biomédicaux (souvent situé au lit du patient). Les postes miroirs représentent l'ensemble des autres postes ayant accès au dossier.

L'admission et la sortie d'un patient ne peuvent se faire qu'à partir du poste Maître. L'ensemble des autres fonctionnalités sont accessibles depuis n'importe quel poste.

### 2.1.3.1 Accès direct au dossier patient et accès à distance

L'accès direct au dossier patient est un accès depuis le poste Maître.

L'accès à distance se définit par un accès au dossier depuis un poste Miroir.

Dans l'illustration ci-contre :

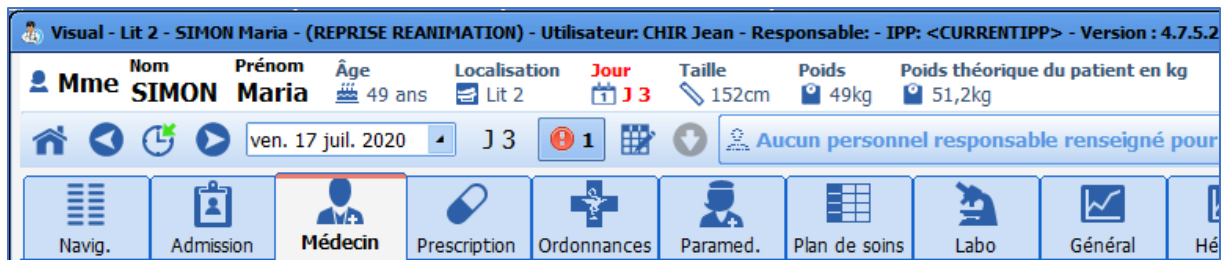
Les dossiers de ANDRE Pierre et de PLANTEROSE Marianne sont sur leur poste Maître.


La ligne horizontale bleue permet de faire le distinguo entre les dossiers gérés en tant que poste Maître et les dossiers visualisés en mode Miroir.

Le dossier de PUTILLE Justine est accessible en mode Miroir.



Le dossier ouvert sur le poste Maître se présente avec un bandeau supérieur comme suit :




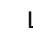
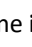

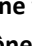
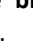
Lorsque l'accès à un dossier se fait à distance, le bandeau supérieur devient teinté de jaune et l'icône  apparaît.



**IMPORTANT :** Les postes Miroirs permettront d'accéder à tous les dossiers du service en mode distant et ne pourront pas servir pour faire l'admission et la sortie des patients.



### 2.1.3.2 Les différentes icônes de connexion

- L'**icône verte**  devant les dossiers indique qu'il est possible de travailler sur ces dossiers.
- L'**icône rouge**  indique que la communication est impossible certainement parce que le poste dans cette chambre est éteint.
- Une **icône jaune**  est un marqueur qui indique qu'une tentative de connexion en cours.
- Une **icône noire**  signifie que la connexion à distance n'est pas activée.
- Une **icône violette**  signifie que le poste n'est pas connecté à la base de données.
- Une **icône bleue**  indique que les versions du poste Maître et du poste Miroir ne sont pas identiques.

### 2.1.3.3 Alertes de modifications de champs Ax

Lorsqu'un dossier est ouvert simultanément sur deux postes, la modification de certains champs associés à un Ax affiche une alerte sur le poste n'ayant pas réalisé la modification. Si l'application n'est pas active, l'alerte ne s'affiche pas : elle s'affiche lors de l'activation.



Les champs calculés et les champs de type **Patient**, **Intervention** et **Séjour** ne sont pas concernés par cette alerte.

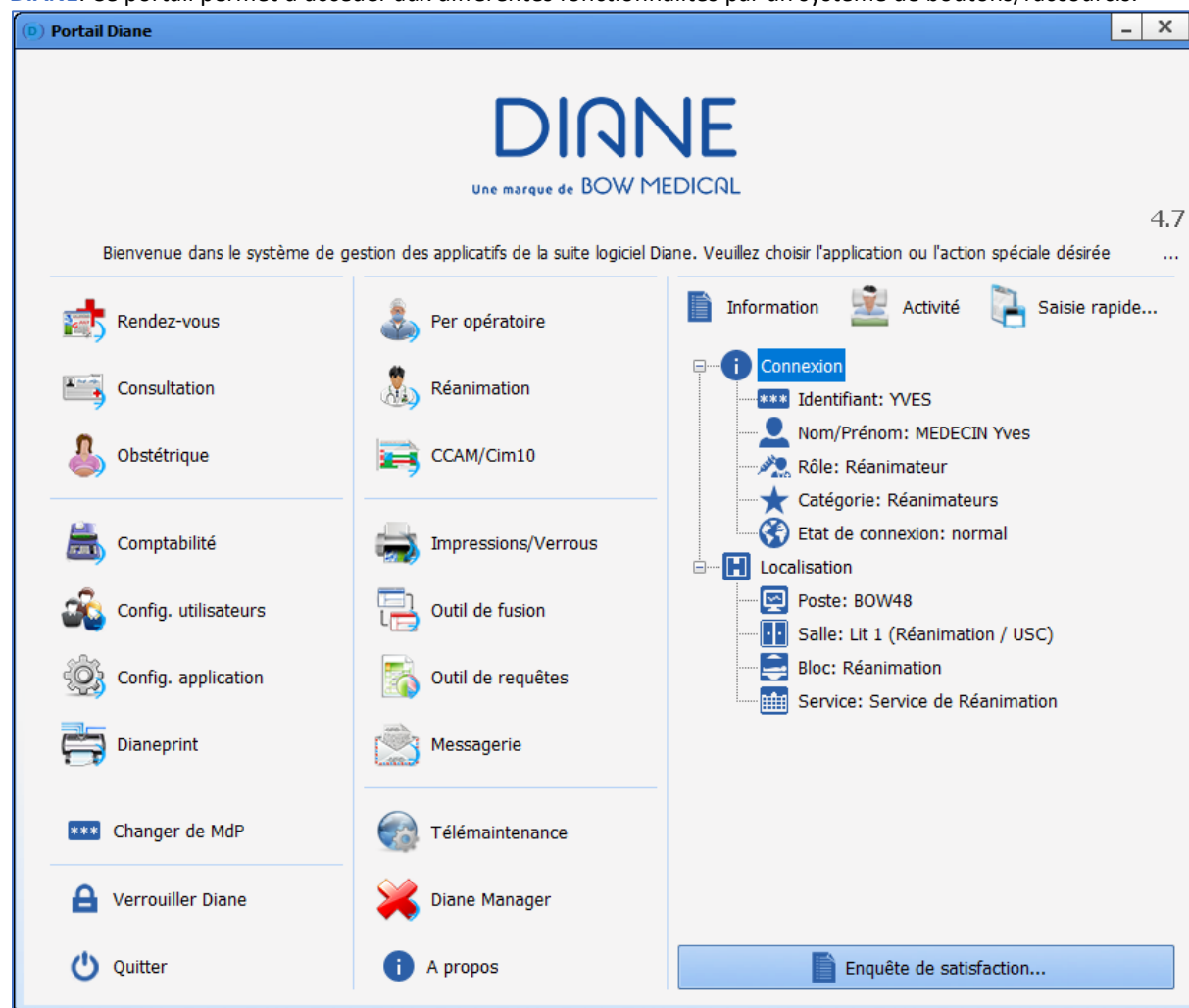
Si plusieurs champs ont été modifiés, ou si un champ a été modifié plusieurs fois, une seule alerte s'affiche et liste les champs concernés.





## 2.1.4 La page d'accueil de DIANE - le Portail DIANE

Après la phase d'identification de l'utilisateur et la confirmation de localisation du poste, s'ouvre le portail **DIANE**. Ce portail permet d'accéder aux différentes fonctionnalités par un système de boutons/raccourcis.



### 2.1.4.1 Iconographie de la page d'accueil

#### Boutons

#### Rôles



Rendez-vous

Permet d'accéder à **DIANE RENDEZ-VOUS**. Voir le chapitre sur la **gestion des rendez-vous** pour savoir comment utiliser l'application.



Consultation

Permet d'accéder au module **Consultation pré-anesthésie** de **DIANE ANESTHÉSIE**. Voir le chapitre sur la **Consultation pré-anesthésique** pour savoir comment utiliser l'application.



Per opérateur

Permet d'accéder aux modules **per opérateur** et **post opérateur** de **DIANE ANESTHÉSIE**. Si l'ordinateur est configuré dans une salle d'opération, c'est le bouton **Per opérateur** qui sera visible. Si l'ordinateur est configuré dans une salle de réveil, c'est le bouton **Post opérateur** qui sera visible. Voir les chapitres sur le **Per opérateur** et le **Post opérateur** pour savoir comment s'utilise l'application.


















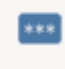




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

 <b>Obstétrique</b>	Permet d'accéder à <b>DIANE OBSTÉTRIQUE</b> . Voir les chapitres sur l' <b>Obstétrique</b> pour savoir comment s'utilise l'application.
 <b>Réanimation</b>	Permet d'accéder à la <b>DIANE REA</b> . Voir le chapitre sur la <b>Réanimation</b> pour savoir comment s'utilise l'application. Si l'ordinateur n'est pas configuré dans une salle de réanimation/USC, c'est le bouton <b>Liste des patients</b> qui sera visible.
 <b>Comptabilité</b>	Permet d'accéder au formulaire de <b>DIANE COMPTA</b> . Voir le chapitre sur la <b>comptabilité</b> pour savoir comment s'utilise l'application. Il peut être en liaison avec un onglet <b>Comptabilité</b> de la consultation : Voir le chapitre sur l' <b>onglet Comptabilité</b> pour savoir comment s'utilise l'application.
 <b>Messagerie</b>	Permet d'accéder à la messagerie inter poste de <b>DIANE MESSAGERIE</b> . Voir le chapitre sur la <b>Messagerie DIANE</b> pour savoir comment s'utilise l'application.
 <b>Activité</b>	Permet de visualiser les interventions terminées ou en cours dans les 24 dernières heures (Interventions en cours, Patients sortis de la salle d'opération et actuellement en transit, Patients en salle de réveil, Interventions terminées dans les dernières 24 heures, Patients en cours de transfert de lit de réveil).
 <b>Information</b>	Permet de visualiser l'identité de la personne connectée et de localiser l'ordinateur sur lequel vous travaillez.
 <b>Saisie rapide...</b>	Permet d'utiliser des requêtes pour rassembler des patients selon des critères correspondant à des contenus des dossiers patients
 <b>CCAM/Cim10</b>	Permet d'accéder au Formulaire de saisie des codes <b>CCAM ET CIM10</b> . Voir le chapitre sur les codes <b>CCAM / CIM10</b> pour savoir comment s'utilise l'application.
 <b>Config. utilisateurs</b>	Permet d'accéder à la configuration des utilisateurs, des droits d'accès et du site. Cet outil est réservé aux référents.
 <b>Config. application</b>	Permet d'accéder à la configuration des listes. Cet outil est réservé aux référents.
 <b>Dianeprint</b>	Permet d'accéder à l'application <b>DIANE PRINT</b> .
 <b>Impressions/Verrous</b>	Permet d'accéder au gestionnaire des impressions et des verrous. Cet outil est réservé aux référents.

 Outil de fusion	Permet d'accéder à l' <b>outil de Fusion des dossiers</b> . Cet outil est réservé aux référents.
 Outil de requêtes	Permet d'interroger la base de données. Cet outil est réservé aux référents.
 Diane Manager	Permet d'accéder à <b>DIANE MANAGER</b> pour fermer toutes les applications <b>DIANE</b> .
 Changer de MdP	Permet de changer le mot de passe de l'utilisateur connecté.
 Verrouiller Diane	Permet de verrouiller la station <b>DIANE</b> .
 A propos	Permet de visualiser la version de <b>DIANE</b>
 Télémaintenance	Permet d'accéder directement à la page Internet de télémaintenance pour que la société <b>BOW MEDICAL</b> puisse prendre le contrôle de votre ordinateur via Internet. Votre service Informatique peut vous limiter à utiliser un autre outil
 Quitter	Permet de fermer l'application <b>DIANE</b> .

**REMARQUE :** Il se peut que certains des boutons soient grisés. C'est le cas lorsque vous ne disposez pas des droits nécessaires à leur utilisation ou qu'ils ne peuvent pas être utilisés (mode déconnecté par exemple).

#### 2.1.4.2 Sélection du patient

Au lancement d'un module de l'application, la fenêtre de sélection du patient s'ouvre automatiquement.

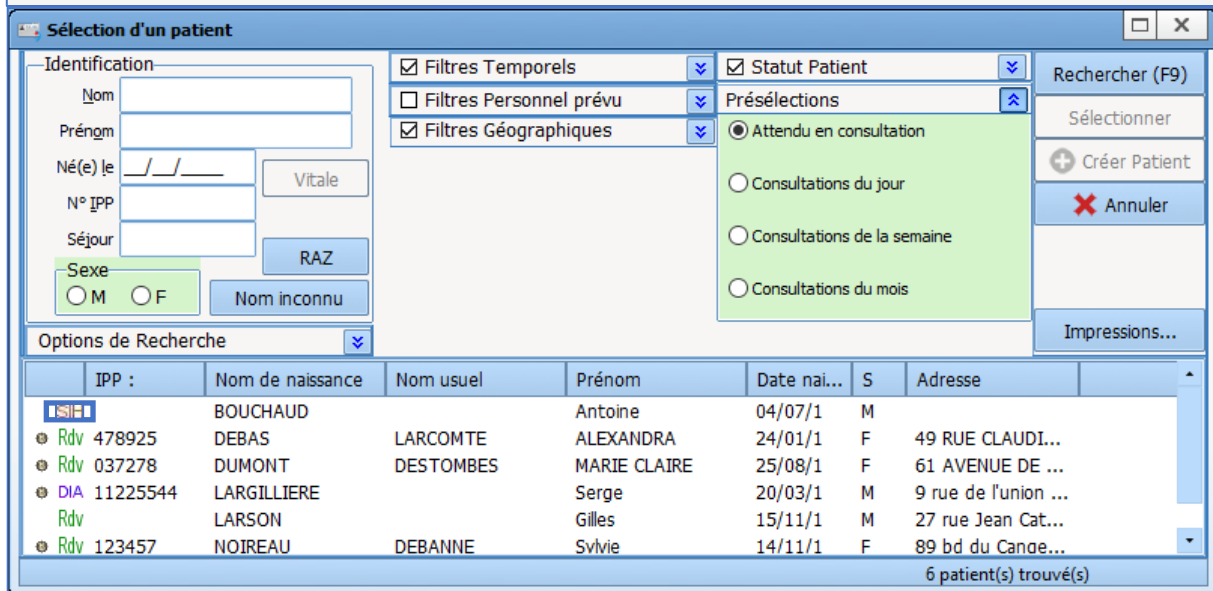
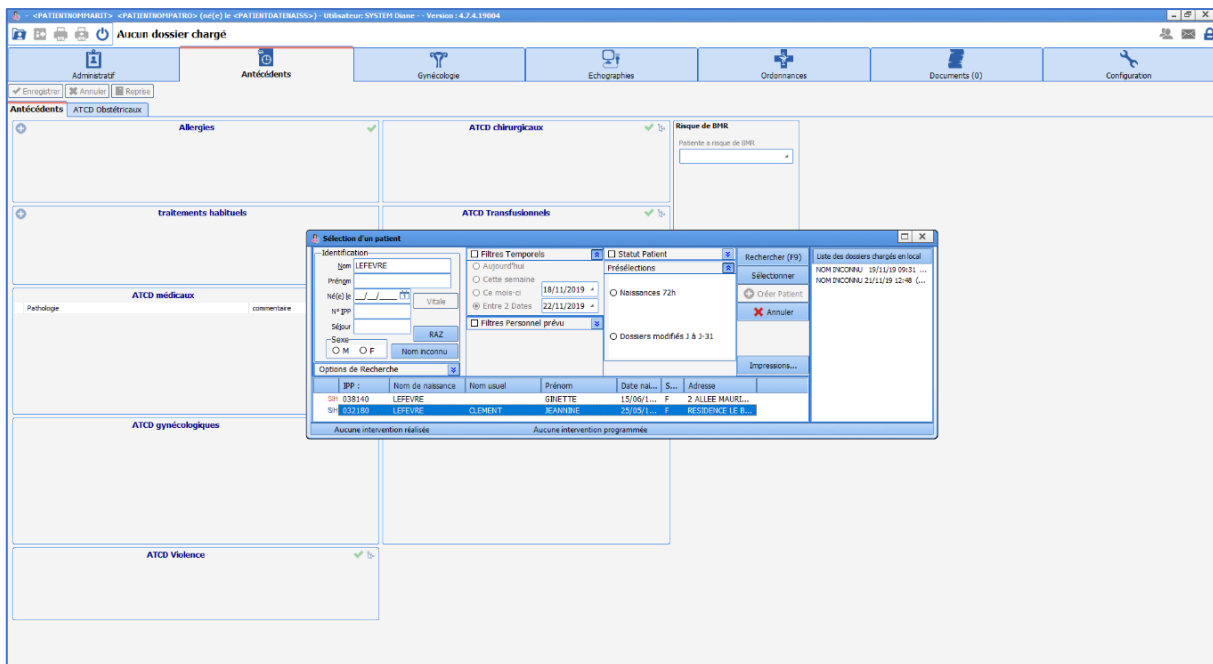


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



Cette fenêtre permet de sélectionner le patient dont le dossier doit être ouvert.

La zone, située en haut à gauche de la fenêtre, permet de rechercher automatiquement un patient aussi bien dans **DIANE (DIA)** que dans le Système d'Information Hospitalier (**SIH**). Cette recherche peut se faire sur le nom patronymique et/ou sur le nom marital. La recherche peut aussi se faire par la date de naissance. Après avoir tapé les premières lettres du nom et/ou du prénom, la liste de tous les patients correspondants à la recherche apparaît.

Chaque ligne correspond à un patient répondant aux critères de recherche. Au début de chaque ligne, un pictogramme donne une indication sur le dossier patient. La liste des pictogrammes est détaillée dans le chapitre « [Iconographie de la liste des patients](#) ».

Le survol à la souris d'un patient présent dans la liste permet d'obtenir quelques informations (Types d'interventions prévues et réalisées avec heures de début d'intervention et heures de fin...)



Une fois le patient trouvé, sélectionnez la ligne du dossier patient puis cliquez sur le bouton **Sélectionner** ou double-cliquez sur son nom.

Dans le cas d'un patient inconnu du logiciel et dont l'entrée administrative n'aurait pas pu être faite, il est possible de créer ce patient. La procédure est décrite dans le chapitre « *Le dossier patient n'existe pas* ».

**A NOTER :** Certains champs de présélection peuvent permettre l'affichage des patients sans avoir à renseigner d'éléments supplémentaires. (Exemple du patient attendu en salle de réveil)  
Les filtres de sélection peuvent être activés par défaut et/ou manuellement. Ils seront détaillés dans les chapitres suivants.

**IMPORTANT :** L'admission d'un patient doit se faire depuis le poste Maître.

### 2.1.4.3 Les boutons particuliers de la fenêtre Sélection d'un patient

Le bouton **RAZ** permet d'effacer les données insérées dans les différents champs de cette zone.




Le bouton **Nom inconnu** permet d'indiquer un nom (NOM INCONNU) et un prénom (Date et heure actuelle de saisie) fictif afin de créer rapidement un patient dont on ne connaît pas encore l'identité.

Le bouton **Impressions** affiche un menu qui permet entre autres :

- D'imprimer la liste des patients sélectionnés dans cette fenêtre (IPP, Nom patronymique, Nom marital, Prénom et Date de naissance).
- De lancer, si vous êtes référent, le gestionnaire d'impression afin de pouvoir imprimer en masse tous les dossiers qui ont été modifiés depuis leur dernière impression.
- De poser ou de retirer les verrous de certains dossiers. (Accessible uniquement aux référents).

### 2.1.4.4 Iconographie de la liste des patients

Des icônes apparaissent devant chaque nom de la liste dans la fenêtre **Sélection d'un patient**.

Symboles	Rôles
RDV	Patient créé dans <b>DIANE</b> lors de la prise d'un rendez-vous (par le biais de l'application RDV.exe). Ce symbole est visible uniquement lorsque le filtre <b>Rendez-vous pris</b> situé dans <b>Statut Patient</b> est coché ou si aucun des filtres n'est coché. Le symbole <b>RDV</b> sera remplacé par <b>DIA</b> dès que la consultation pré-anesthésique de ce patient aura été validée.
VIT	Patient dont l'identité a été récupérée via la carte vitale. Une fois que la consultation pré-anesthésique de ce patient est validée, ce symbole sera remplacé par <b>DIA</b> .
SIH	Patient dont l'identité est connue du Système d'Information Hospitalier.
 DIA	L'identité du patient est connue du logiciel <b>DIANE ET</b> est rattachée à une identité du Système d'Information Hospitalier.
DIA	L'identité a été créée dans <b>DIANE</b> et n'est pas rattachée au SIH
 DIA	Des modifications ont été effectuées dans le SIH et n'ont pas été reportées dans <b>DIANE</b> . A l'ouverture du dossier patient, une fenêtre proposera de mettre à jour les données administratives automatiquement.
 DIA	Le dossier est verrouillé sur un autre poste. Un utilisateur travaille actuellement sur le dossier ou ce dossier a été préchargé sur un ordinateur portable. Le dossier ne peut être ouvert qu'en lecture seule. Il ne pourra pas être modifié.



---

Le simple survol à la souris de ce symbole affiche une info bulle indiquant le nom de l'utilisateur qui a verrouillé ce dossier, la date, l'heure et le poste sur lequel il est verrouillé.

---

**REMARQUE :** Seul un administrateur de site dispose du droit de déverrouiller un ou plusieurs dossiers patient (en cas de perte d'un ordinateur portable par exemple). Dans ce cas, toutes les données insérées lors de la visite seront considérées comme perdues et ne pourront pas être récupérées.

**REMARQUE :** Un clic droit sur un dossier permet de :

- Tenter de rattacher le dossier patient à une identité SIH : Cette option n'est disponible que pour les patients non rattachés à une identité du Système d'Information Hospitalier. Cette commande permet d'accéder directement au module de **Fusion de Dossier** et de rechercher automatiquement si une identité SIH correspond au patient sélectionné.
- Charger en accès complet : Cette option permet de charger en local sur l'ordinateur toutes les données du patient (Consultations et interventions) en lecture et en écriture afin de pouvoir modifier les données du patient en étant déconnecté du réseau. Voir le chapitre « *Utilisation de DIANE sur ordinateur portable SANS RESEAU* ». Cette option pose un verrou sur le patient en base de données, empêchant ainsi les autres utilisateurs de pouvoir modifier les données du patient.
- Charger en lecture seule : Cette option permet de charger en local sur l'ordinateur toutes les données du patient (Consultations et interventions) uniquement en lecture pour pouvoir visualiser les données du patient en étant déconnecté du réseau. Voir le chapitre « *Utilisation de DIANE sur ordinateur portable SANS RESEAU* ». Cette option ne pose pas de verrou sur le patient en base de données.

### 2.1.4.5 Les différents filtres et options de recherche

Ces zones de la fenêtre **Sélection d'un patient** permettent d'affiner la recherche en fonction des filtres sélectionnés.

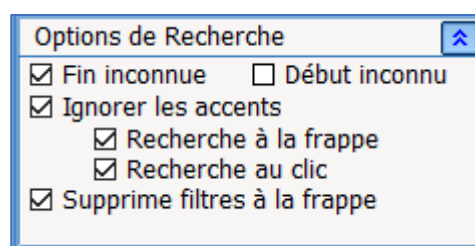
A l'ouverture de la fenêtre de sélection des patients, certains filtres sont activés par défaut. Ils peuvent :

- Être individuellement ouverts ou fermés à l'aide des doubles flèches situées en haut à droite des cadres.
- Être activés ou désactivés à l'aide des cases à cocher situées en haut à gauche des cadres.

#### 2.1.4.5.1 Les options de recherche

Quelques-unes de ces options reposent sur les filtres d'identification relatifs aux éléments d'identité du patient :

- **Fin inconnue** qui permet de renseigner seulement le début du nom et/ou prénom
- **Début inconnu** qui permet de renseigner seulement la fin du nom et/ou prénom
- **Ignorer les accents** afin de ne pas prendre en compte les accents présents dans le nom et/ou prénom du patient.



Si les deux premières options sont cochées, il est possible de ne renseigner que quelques lettres situées au milieu du nom.

La case à cocher **Recherche à la frappe** permet de mettre à jour la liste des patients dès que quelques lettres du nom et/ou prénom ont été insérées.

La case **Recherche au clic** permet de lancer la recherche après avoir activé ou désactivé un filtre.



Si aucune de ces deux options n'est activée, il sera nécessaire de cliquer sur le bouton **Rechercher** (ou sur la touche **F9** du clavier) pour que les noms des patients correspondants aux lettres que vous avez tapées apparaissent.

La case **Supprime les filtres à la frappe** permet d'annuler tous les filtres insérés dès que l'utilisateur commence à saisir du texte dans les champs de recherche (Nom, Prénom...). Ceci permet d'effectuer la recherche du patient en question sur la totalité de la base de données du logiciel. De cette façon, un patient sera retrouvé même lorsque les filtres de sélection choisis sont inappropriés.

#### 2.1.4.5.2 Les filtres sur le statut patient

Cette zone permet d'activer un filtre de recherche portant sur le statut du dossier du patient.

\* **Rendez-vous pris** : correspond aux patients ayant un rendez-vous de prévu par le biais de l'application RDV.exe. Voir le chapitre « [La gestion des rendez-vous](#) ».

\* **Patients du SIH** : correspond aux patients renseignés par le biais du logiciel de l'hôpital.

\* **Patients Admis en urgence** : correspond aux patients qui sont arrivés en urgence et enregistrés au dernier moment.

\* **Patients DIANE** : correspond aux patients ayant déjà une consultation ou une intervention réalisée par le biais de la suite logicielle **DIANE**.

Pour ce dernier filtre, il est possible de rajouter des restrictions.

\* **Consultations réalisées** : permet de rechercher un patient qui a déjà eu une consultation dans **DIANE**,

\* **Interventions** : permet de rechercher un patient qui a :

- une intervention prévue (avec une date prévue),
- une intervention non planifiée (sans date d'intervention prévue),
- un patient qui est actuellement au bloc opératoire ou en salle de réveil,
- un patient en transit entre le bloc et la salle de réveil,
- un patient dont l'intervention a été réalisée.

**REMARQUE** : le Statut Patient ne s'applique pas aux patients connus uniquement du SIH.

#### 2.1.4.5.3 Les filtres temporels

Cette zone permet d'activer un filtre temporel au niveau de la recherche.

Les filtres temporels peuvent être appliqués conjointement avec le filtre **Statut Patient** sauf quand l'item **Interventions Non planifiées** a été sélectionné.

Si les filtres temporels sont activés et que le filtre **Statut Patient** est décoché, les dates portent automatiquement sur les consultations d'anesthésie.



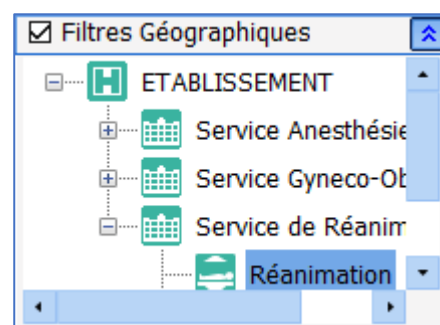


**REMARQUE** : les restrictions temporelles ne s'appliquent pas aux patients du SIH car la recherche par date s'effectue sur les dates clés du dossier **DIANE**.

#### 2.1.4.5.4 Les filtres géographiques

Cette zone permet d'effectuer une recherche sur :

- Les sites de l'établissement,
- L'établissement complet,
- Un service,
- Un bloc opératoire,
- Une salle...




#### 2.1.4.5.5 Les filtres Personnel prévu

Cette zone permet d'activer un filtre en fonction du personnel prévu.

En dépliant les Catégories de personnels vous limitez la recherche aux patients dont la consultation, le Per Opérateur ou le Post Opérateur contient les personnels sélectionnés.

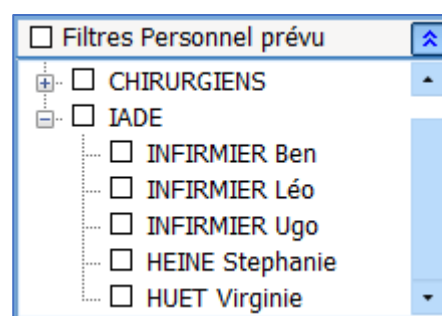Lorsque plusieurs personnels d'une même catégorie sont sélectionnés, il suffit qu'un seul soit renseigné pour que le dossier soit pris en compte.




**REMARQUE** : Les restrictions de Personnels prévus ne s'appliquent pas aux patients du SIH.

#### 2.1.4.5.6 Les Présélections

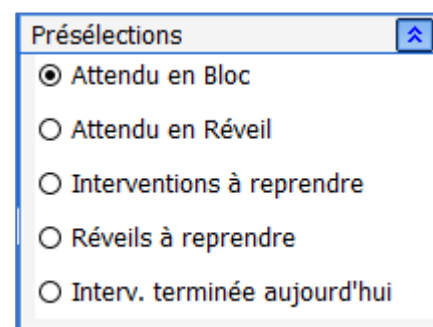Cette présélection permet d'effectuer la recherche en fonction du statut des dossiers patient.

Ce filtre de présélection peut être configuré par un administrateur de site afin que ce soit l'affichage par défaut.

Si l'item **Attendu en Bloc** est pré coché, ce sont automatiquement les patients prévus pour aujourd'hui par le biais de la Consultation qui s'afficheront.



### 2.1.4.6 Les cas de figure possibles

Ce chapitre propose quelques cas particuliers.





#### 2.1.4.6.1 La recherche effectuée n'est pas assez précise

Si la recherche effectuée risque de récupérer un trop grand nombre d'identités patient, un message d'avertissement apparaît. Cela n'empêche pas l'utilisateur de lancer la recherche, il suffit pour cela de valider la fenêtre d'avertissement. Cependant, le chargement pourra prendre plusieurs minutes.

Si l'utilisateur souhaite limiter sa recherche, il suffit de cliquer sur le bouton **Non** de la fenêtre d'avertissement, afin d'insérer des filtres permettant de restreindre la recherche.

Si un nom de patient est saisi et que des filtres sont activés par la suite, il se peut qu'il n'y ait aucun résultat à la recherche. Si tel est le cas, un message d'information propose de désactiver tous les filtres afin de rechercher le patient.

#### 2.1.4.6.2 Le dossier patient n'existe pas

Aucun dossier patient ne correspond à la recherche effectuée. Ce cas de figure est possible si le patient arrive en urgence sans entrée administrative. Il est possible alors de créer une identité temporaire le temps de la prise en charge. Pour cela :

Cliquer sur le bouton **Créer Patient** après avoir rempli les champs de l'identification obligatoire qui sont le **Nom** et le **Prénom** ou après avoir sélectionné le bouton **Nom inconnu**.

Il est possible de réaliser la prise en charge sous cette identité provisoire.

Cette fonctionnalité peut être désactivée.

**REMARQUE :** Il est impératif de prévenir les référents d'une telle procédure afin de rattacher ultérieurement ce dossier à son identité administrative et hospitalière.

**NOTE :** Pensez à vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur dans les éléments que vous avez renseignés, Vous pouvez aussi essayer en effectuant votre recherche via un autre item qu'habituellement (IPP, Date de naissance, nom...).

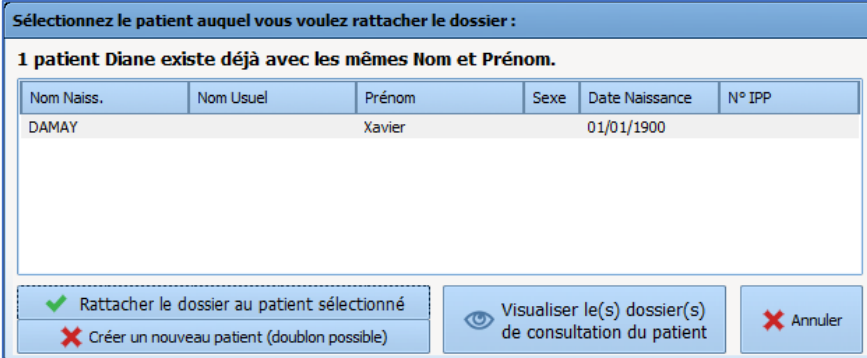
#### 2.1.4.6.3 Le patient qui apparaît dans la liste est un homonyme

Dans le cas où le patient qui apparaît dans la liste des patients est un homonyme :

Cliquer sur le bouton **Créer Patient** après avoir rempli les champs de l'identification obligatoire qui sont le **Nom** et le **Prénom**.


Lors de l'enregistrement, une fenêtre d'**Information** vous avertit de l'existence d'un ou plusieurs patient(s) avec les mêmes Nom et Prénom.

La fenêtre contenant la liste des patients homonymes s'ouvre. Vous allez pouvoir rattacher votre nouveau dossier à un patient déjà existant.




Nom Naiss.	Nom Usuel	Prénom	Sexe	Date Naissance	N° IPP
DAMAY		Xavier		01/01/1900	

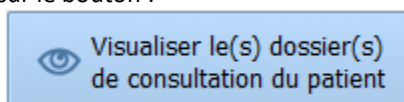
Pour éviter toute erreur de rattachement, il est possible de visualiser le dossier de consultation du patient en le sélectionnant puis cliquez sur le bouton :



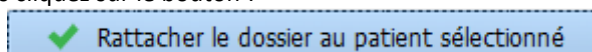Pour rattacher le dossier patient à un patient déjà existant, sélectionner le patient auquel vous souhaitez rattacher le dossier puis cliquez sur le bouton :



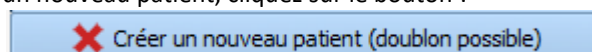Si vous souhaitez créer un nouveau patient, cliquez sur le bouton :



Le logiciel va alors rechercher si une identité SIH correspond au nouveau patient, et proposer ensuite de les rattacher.

## 2.1.5 Sélection du dossier d'un patient

Après avoir choisi le patient via les moyens décrits dans la partie « *Sélection du patient* », il faut alors sélectionner le dossier concerné par la prise en charge qui va débiter.

Cette sélection dépendant du service de prise en charge, veuillez vous référer au chapitre concerné :

- Pour l'anesthésie : « *Sélection du dossier patient en anesthésie* »
- Pour l'obstétrique : « *Sélection du dossier patient en obstétrique* »
- Pour la réanimation : « *Sélection du dossier patient en réanimation* »

## 2.1.6 La reprise des informations d'un dossier antérieur

Après la création d'un nouveau dossier, il est possible de récupérer certaines données du patient s'il a un dossier antérieur dans **DIANE**.

Sélectionnez l'intervention dont vous souhaitez récupérer les antécédents					
Date	Age	Taille	Poids	Intervention	
30/07/2018	57 ans	0 cm	0 Kg		
29/07/2018	57 ans	175 cm	67 Kg	Epaule Coiffe des rotateurs	
23/06/2008	47 ans	175 cm	68 Kg	Septorhinoplastie	
20/09/2005	44 ans	175 cm	65 Kg	Endoscopie digestive Echoendoscopie voie haute	

Une fois l'intervention sélectionnée, cliquez sur Ok pour réintégrer ces éléments dans le dossier en cours



Niveau de reprise :  1  2  3

Il existe deux possibilités pour récupérer les données de dossiers antérieurs :

- Après validation de la fenêtre de **Programmation d'une intervention**, un message propose de reprendre automatiquement les antécédents du dossier précédent.



- En cliquant sur **Oui**, l'onglet **Antécédents / Traitements** se complète avec les antécédents du dossier antérieur.
- En cliquant sur **Non**, seules les interventions et les complications per opératoires et post opératoires antérieures effectivement réalisées et renseignées avec le logiciel **DIANE** seront repris.
- Cliquez sur le bouton **Reprise**. Un menu permet de reprendre les informations du dossier antérieur. Le niveau de reprise 1, 2 ou 3 proposé correspond au nombre d'informations que vous souhaitez récupérer (3 correspondants au niveau de reprise maximal).

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Antécédents chirurgicaux</b>	4 ✓  
<input checked="" type="checkbox"/>	Amygdalectomie Reprise avec Végétations Adénoïdes (AVA)	1986
<input checked="" type="checkbox"/>	Endoscopie digestive Echoendoscopie voie haute	20/09/2005
<input checked="" type="checkbox"/>	Septorhinoplastie	23/06/2008
<input checked="" type="checkbox"/>	Endoscopie ORL pour ablation de corps étranger	2010

Les items récupérés automatiquement sont identifiables par la possibilité de les cocher. Ceci permet de supprimer, modifier ou compléter les informations récupérées.

Les catégories reprises dépendent de votre configuration. Il s'agit d'une action paramétrable par le référent.

### 2.1.7 Sortie du patient

La sortie d'un patient se fait via un bouton dans chaque module. La description du procédé se trouve dans les chapitres concernés.

Veillez-vous référer au chapitre concerné :

- Pour l'anesthésie : « [Sortie du dossier patient en anesthésie](#) »
- Pour l'obstétrique : « [Sortie du dossier patient en obstétrique](#) »
- Pour la réanimation : « [Sortie du dossier patient en réanimation](#) ».

Il faut toutefois noter certaines notions :

- La sortie du patient proposera plusieurs options : le transfert ou la clôture du dossier.

Le transfert concerne un patient qui sera repris dans un module **DIANE**. (Exemples : sortie du bloc vers la salle de réveil, sortie du bloc vers la réanimation équipée de **DIANE REA**, sortie de réanimation vers le bloc opératoire...)

La clôture d'un dossier se fait lorsque le patient sort de l'environnement **DIANE**.

La clôture du dossier peut avoir des actions automatiques liées : impression du dossier, export du dossier vers le dossier du patient informatisé....

#### 2.1.7.1 L'arrêt des chronomètres et des saisies longues en cours (ne concerne pas la Consultation)

A la fermeture du dossier, **DIANE** propose de terminer les saisies longues (PSE) et les chronomètres qui sont en cours.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Il y a 2 chronomètres en cours, cochez ceux à arrêter :			
<input checked="" type="checkbox"/> BLOC OPERATOIRE	Sortie vers la réanimation pédiatrique	04/05/2022	10:24
<input checked="" type="checkbox"/> Intubation(oro) (réa)	Extubation	04/05/2022	10:24
Il y a 2 administrations en cours, cochez celles à arrêter :			
<input checked="" type="checkbox"/> Sérum Salé Isotonique		04/05/2022	10:24
<input checked="" type="checkbox"/> Sévoflurane		04/05/2022	10:24

Cocher tout

OK Annuler

Les dates et heures peuvent être modifiées, toutefois, il n'est pas possible de saisir une date/heure antérieure à celle du début du chronomètre ou du PSE.

03/05/2022	10:24	⚠
------------	-------	---

## 2.2 Les différents modes de saisie dans DIANE

Il existe différentes façons de saisir des informations et des données dans **DIANE**. Les chapitres suivants vont recenser les différentes possibilités.

### 2.2.1 Les champs de saisie simple

Ce composant permet de saisir du texte libre.

Il peut contenir des masques de saisie afin d'orienter l'utilisateur. Dans ce cas, il ne sera accepté que le type de données attendues. (Pas de chiffre pour une ville par exemple.)

Ce composant accepte le copié collé.

*Exemple d'aide à la saisie :*

- Écriture grisée donnant une indication sur le type de données attendues (ville dans l'exemple ci-

Lieu de naissance

ville

dessous)

### 2.2.2 Les menus déroulants

En cliquant sur ce composant, que ce soit la flèche ou la zone textuelle, les options disponibles s'affichent. Chaque ligne dans cette case est une donnée cliquable.

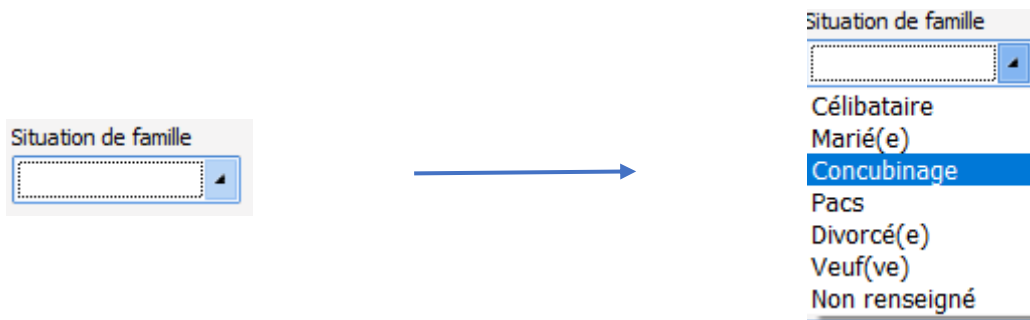


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



**Note :** Il est possible de naviguer parmi les choix proposés de ce composant avec les flèches haut et bas du clavier.

### 2.2.3 Les cases à cocher

 Ce composant permet de valider une information. Il faut cliquer avec la souris dessus pour passer d'un état à un autre. Vous pouvez également changer l'état du composant avec la barre espace lorsque le focus est sur le composant

### 2.2.4 Les groupes de cases à cocher

Le groupe de cases à cocher rassemble plusieurs choix qui peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres. Il est ainsi possible de sélectionner plusieurs cases sur un même groupe.

Critères éligibilité mère

- Absence de situation de vulnérabilité psychologique, sociale, de conduites d'addictions et de dépendances sévères
- Soutien familial et ou social adéquat
- Absence de pathologie chronique mal équilibrée
- Absence de complications ou de pathologies nécessitant une observation ou un traitement médical continu
- Absence d'hémorragie sévère du post partum immédiat
- Absence d'infection évolutive ou de signes d'infection
- Absence de signes thromboemboliques
- Douleurs contrôlées
- Interactions mère enfant satisfaisantes
- Absence de facteurs de risque d'infection ou prélèvements
- Accord de la mère et /ou du couple

### 2.2.5 Les groupes de bouton radio

Le groupe de bouton radio ne permet la sélection que d'un seul item. Si vous cliquez un seconde fois sur un bouton radio déjà sélectionné, il se désélectionne.

Type d'admission

- Chirurgie programmée
- Chirurgie urgente
- Médecine

### 2.2.6 Champs Dates et Calendrier

Les champs dates permettent de renseigner une date complète sous forme : jour/mois/année.  
L'heure peut également y être associée sous forme \_\_:\_\_.



2023-03-17

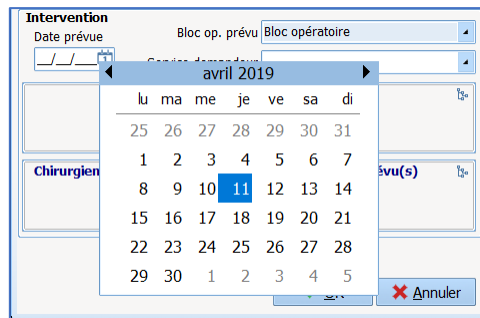
BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Ce champ se renseigne soit :

- Via un double clic qui implémente directement la date du jour.
- En inscrivant les chiffres composant la date sans espace.




- Au survol de la souris, un calendrier apparaît permettant d'aller sélectionner la date voulue.


## 2.2.7 Les champs de saisie avec liste de référence

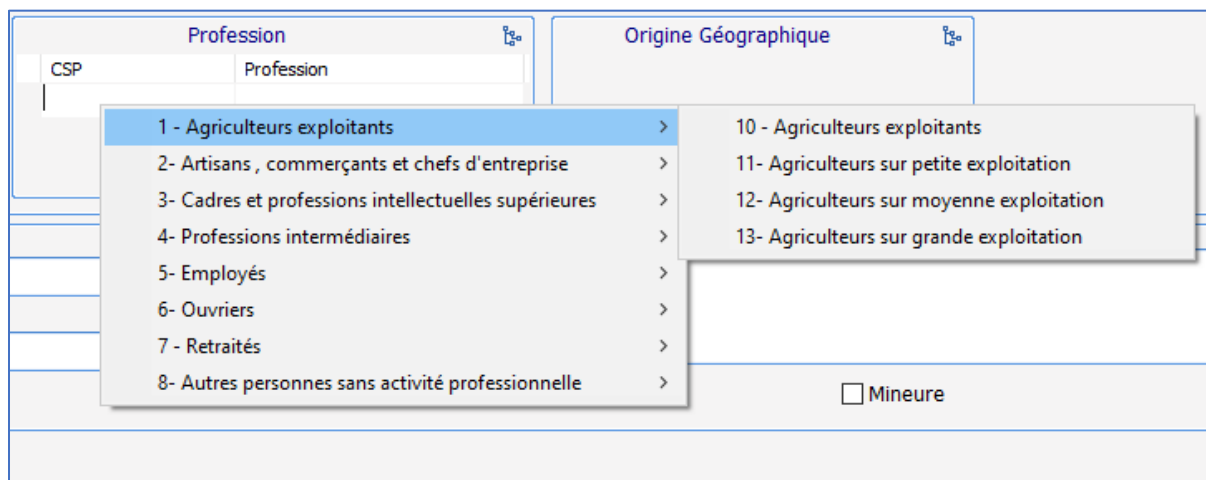Ces champs permettent la saisie d'informations via une liste et/ou par du texte libre. Le texte libre sera utilisé si la donnée recherchée n'est pas préexistante ou pour compléter une information.

Il existe trois méthodes pour accéder aux listes :

- Via un clic droit dans la colonne concernée. Une liste va apparaître. Lorsqu'une flèche est présente en fin de ligne, cela signifie qu'il existe des sous menus. Ceux-ci s'affichent automatiquement lors du passage de la souris. Il ne pourra être saisi qu'une seule donnée à la fois avec ce mode de recherche.



- Via un clic sur l'icône  en haut à droite du cadre. Une fenêtre contenant la liste apparaît. Il est alors possible de cocher un ou plusieurs éléments de la liste. Il est possible d'afficher les sous éléments d'une liste en cliquant sur le signe « + » à gauche des listes.

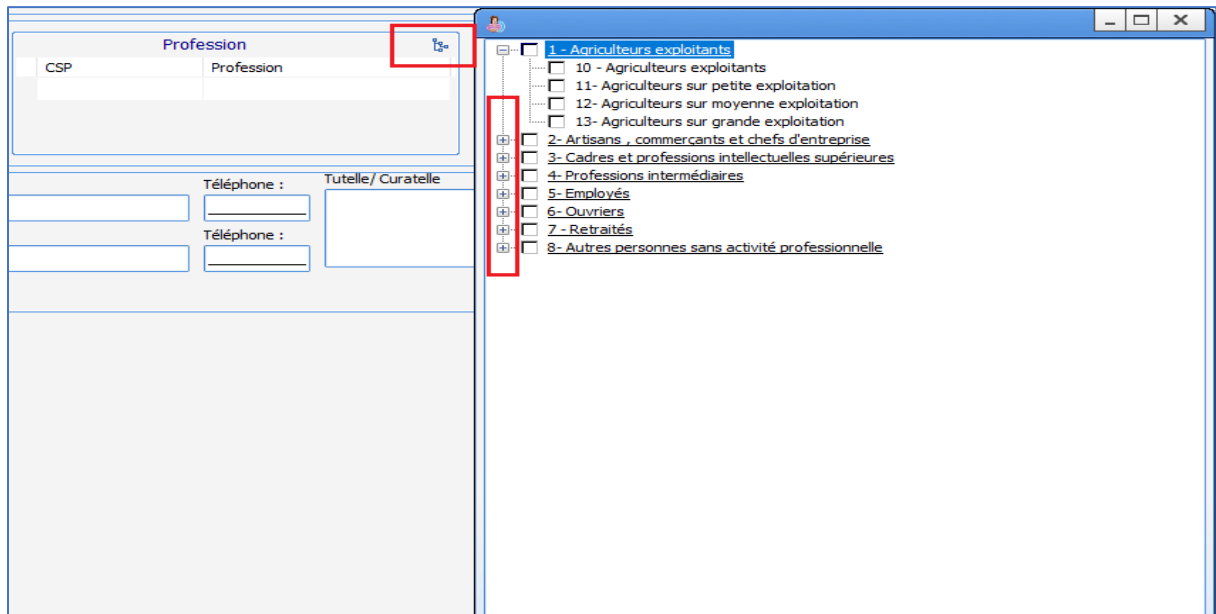


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28




**REMARQUE** : certaines données de la liste sont colorées en violet. Cela signifie que la donnée est liée à un code CIM 10

- Saisie manuelle du texte : Lors de la saisie des  $n$  premières lettres –  $n$  étant paramétrable par les référents, en général 3 ou 4- , une recherche automatique affichera les mots reconnus dans la liste du composant. Vous pourrez alors sélectionner le contenu souhaité via la souris.

Il est possible d'accéder à des éléments qui n'appartiennent pas à la configuration de votre service mais qui ont été créés pour le site hospitalier en cochant la case **Afficher tous les éléments** dans la fenêtre d'affichage des listes

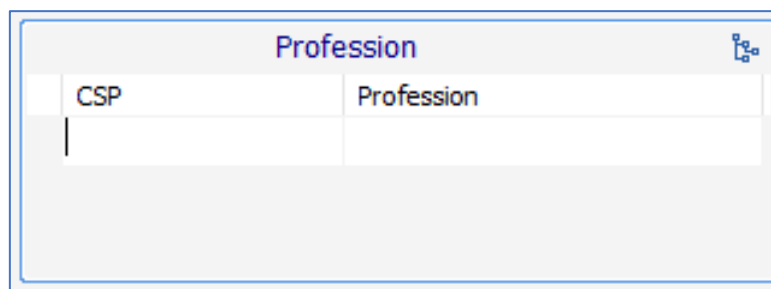Pour activer la saisie libre, il suffit de cliquer immédiatement sous le titre de chaque colonne et de renseigner manuellement le texte voulu.



**REMARQUE** : ces colonnes sont invisibles tant qu'elles ne sont pas saisies

De manière générale :

- Il est possible de signaler visuellement l'importance d'un antécédent en cliquant dans la case de gauche. Ceci fait apparaître une « balle rouge » afin de notifier l'importance de cet antécédent. Un second clic au même endroit fera apparaître une « balle orange ».

Antécédents médicaux		3	?	✓	⌵
<span style="color: red;">●</span>	Drépanocytose homozygote avec séquelles				
<span style="color: orange;">●</span>	Rubéole Positif				
<span style="color: green;">●</span>	HyperTension Artérielle (HTA) traitée équilibrée				




2023-03-17




BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

- Le fait de cliquer sur  permet de noter directement qu'il n'y a pas d'antécédent notable. Exemple : si on clique sur la coche verte dans le champ **Antécédents médicaux**, la mention : « pas d'ATCD médical apparaîtra ». Dans chaque champ, il est possible de définir une valeur par défaut qui s'implémentera par cette coche verte.

**REMARQUE** : Il faut toujours préférer cliquer sur la coche verte plutôt que de ne rien renseigner car cela pourrait laisser supposer que les informations n'ont pas été demandées.

- Lorsqu'un logo  est visible en haut à droite, cela signifie que seules les données qui possèdent un code CIM 10 seront conservées dans la base de données. (C'est-à-dire les données de la liste colorées en violet).
- Lorsqu'un  se trouve en haut à droite d'un composant, cela signifie qu'en cliquant dessus, un accès à une aide est disponible. Par exemple, le clic sur le  du composant **ATCD médicaux** offre un accès direct à Orphanet.

## 2.2.8 Les boutons

Les boutons ont une fonction d'appel dans **DIANE**.

Ainsi, le clic sur un bouton peut appeler :

- Un lien contextuel : il s'agit d'un accès direct à un autre logiciel (exemple : accès direct au logiciel de laboratoire ou d'imagerie voire au DPI).
- Une saisie avancée : cela permet un accès à un formulaire, un score ...
- Une impression : cela permet l'accès à un document qui sera imprimable (exemple : compte-rendu de consultation, certificat du 8<sup>e</sup> jour...).
- Une saisie multiple : il s'agit d'un mode de saisie qui permet de renseigner une série d'actes en un minimum de clics.
- Une liste d'évènements : c'est le cas en per/postopératoire et en salle de naissance où certains boutons donnent accès à une liste d'évènements
- Une liste de traitements : c'est le cas en per opératoire ou en salle de naissance

Quelques exemples de boutons :

<b>Drainage / Elimination</b>	Situé sur le plan de soins, en réanimation, ce bouton donne accès à la liste des évènements qui concerne le drainage et l'élimination : pose d'un drain, retrait d'un drain, pose d'une sonde urinaire à demeure ...
<b>Glasgow</b>	Bouton d'accès au score de Glasgow. Au clic, une fenêtre s'ouvrira permettant de compléter le score de Glasgow.





## SM Induc

Bouton d'accès à la saisie multiple **Induction**. Permet de renseigner l'ensemble des données nécessaires lors de l'intubation d'un patient.

### 2.2.9 Les saisies avancées

Les saisies avancées sont des feuilles de surveillance accessibles de différentes manières : tableau de saisies avancées, composant d'affichage de saisie avancée avec historique, bouton, menu dans la barre de « saisies » de l'onglet **Surveillance** en per et post op ...

Ces feuilles peuvent être utilisées de différentes manières en fonction des situations. Elles peuvent être utilisées comme feuille de consultation, saisie de scores, checklist, etc...

#### 2.2.9.1 Fonctionnement général des saisies avancées

**Fonctionnement général** : exemple de la consultation de suivi d'obstétrique

1 : Nom de la saisie avancée

2 : Liste des enregistrements : Cette colonne regroupe l'ensemble des saisies avancées de même type déjà



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

enregistrées pour ce dossier. Il est possible d'aller visualiser les autres saisies avancées en cliquant sur les enregistrements concernés affichés dans cette colonne. En cliquant sur **Nouveau**, il est possible de saisir une nouvelle consultation. A l'ouverture d'une saisie avancée, c'est une nouvelle saisie qui s'affiche par défaut.

3 : Bouton Ordonnances : permet de générer des ordonnances directement à partir de la saisie avancée.

4 : Nouvel enregistrement à partir des valeurs courantes : permet d'ouvrir une nouvelle feuille de saisie en récupérant l'ensemble des données notées dans la saisie avancée précédente.

5 : Imprimer : permet d'imprimer la saisie avancée.

**REMARQUE** : ce bouton ne génère pas le compte-rendu de consultation mais permet une impression d'écran.

6 : Modifier : Permet de modifier une feuille de consultation ouverte alors que celle-ci a déjà été remplie et validée.

**REMARQUE** : Une feuille de consultation ne peut être modifiée que par le professionnel qui l'a créée.

7 : Validation / annulation : permet la validation ou l'annulation de la saisie en cours.

8 : Date d'occurrence : permet de modifier la date et l'heure de la saisie (dans le cas où la saisie aurait été faite en décalé par rapport à l'examen clinique par exemple).

9 : Menu de choix de l'enfant : Les champs encadrés par une ligne bleu foncé sont des champs « enfant », c'est-à-dire qu'ils concernent des données relatives au fœtus. En cas de grossesse multiple, il est nécessaire de choisir un autre enfant (J2 par exemple si grossesse gémellaire) afin de pouvoir noter les données de l'examen concernant le second fœtus. Ce choix se fait via le menu déroulant. Lorsque l'on change d'enfant, le contour des données enfant changera de couleur pour les champs concernés.

*NB : ce menu n'est disponible que pour le module d'obstétrique*

Visualisation des documents : en bas des feuilles de saisie avancée se trouve une barre bleue marquée de pointillés. En cliquant sur cette barre, une fenêtre contenant les documents apparaît. Celle-ci contient tous les documents scannés, importés depuis d'autres logiciels ou imprimés dans **DIANE**.

The screenshot displays the 'Visualisation des documents' window in the DIANE software. At the top, there are three tabs: 'Discussion' (6 documents), 'Pathologie de la grossesse' (1 document), and 'Traitements habituels' (1 document). Below the tabs is a table with the following columns: 'Descriptif', 'Date', 'Utilisateur', 'Type Fichier', and 'Catégorie'. The table contains two rows of data:

Descriptif	Date	Utilisateur	Type Fichier	Catégorie
Formulaire Genotypage (25/11...	25/11/2019	SYSTEM	Document W...	Inconnu
Formulaire Genotypage (25/11...	25/11/2019	SYSTEM	Document W...	Inconnu

Below the table, there is a toolbar with buttons for 'Visualiser', 'Ajouter', 'Supprimer', 'Scanner', 'Exporter', 'Agrandir', and 'Afficher tout'. There is also a dropdown menu for 'Catégorie à afficher:' set to 'Tout'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Nouvel enregistrement à partir des valeurs courantes', 'Imprimer', 'Modifier', and 'Fermer'.

## 2.2.9.2 Les scores

**DIANE** permet de saisir de nombreux scores. Ceux-ci sont accessibles de la même manière que les saisies avancées et le fonctionnement est similaire.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Exemple du score d'Aldrete :

**Saisie avancée**

**Aldrete**  
Score d'Aldrète et Kroulik  
Saisi par : Diane SYSTEM

Valeur : **8**

Date de saisie : 31/07/2018 11:10:42

**Liste des enregistrements**

Nouveau  
31/07/2018 11:34:55  
31/07/2018 11:10:42

Score d'Aldrète

**Motricité spontanée ou à la demande**

Quatre membres mobiles  
 Deux membres mobiles  
 Immobile

**Respiration**

Ventilation profonde, toux efficace  
 Ventilation superficielle, dyspnée  
 Apnée

**Variation de la PA systolique (écart par rapport au préop)**

Variation de la PAS < ou égale à 20 mmHg  
 Variation de la PAS de 20 à 50 mmHg  
 Variation de la PAS > ou égale à 50 mmHg

**Conscience**

Réveillé  
 Réactif à la demande  
 Aréactif

**Coloration**

Normale  
 Pâle, grisâtre  
 Cyanosé

Nouvel enregistrement à partir des valeurs courantes Imprimer Modifier Fermer

A l'ouverture du score, il suffit de renseigner chacun des champs nécessaires au calcul du score. Une fois fini, la valeur du score s'affiche en haut à droite de la feuille de saisie.

**REMARQUE :** certains scores ne donnent pas comme résultat une valeur numérique mais un autre type de donnée comme la classification dans un groupe à risque. C'est notamment le cas du score d'infection néonatale bactérienne précoce utilisé dans le module **DIANE OBSTETRIQUE**.

Lorsque vous souhaitez imprimer un score, celui-ci doit être enregistré au préalable. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Imprimer** la fenêtre ci-dessous s'ouvre.



**Impression**

Mme **LARDEUR CREPIN Juliette** ETABLISSEMENT  
IPP : 9874532

Date de naissance : 09/02/1982 / Age : 38 ans (Le 14/02/2020 à 17h53)  
Localisation : Service Anesthésie > Bloc opératoire > Consultation

**Score : Aldrete (Score d' Aldrete et Kroulik)**

8  
Réalisée par SYSTEM Diane le 14/02/2020 à 17:53

Score d'Aldrete

Motricité spontanée ou à la demande

**Quatre membres mobiles**

Deux membres mobiles

Immobile

Respiration

**Ventilation profonde, toux efficace**

Ventilation superficielle, dyspnée

Apnée

Variation de la PA systolique (écart par rapport au préop)

Variation de la PAS < ou égale à 20 mmHg

**Variation de la PAS de 20 à 50 mmHg**

Variation de la PAS > ou égale à 50 mmHg

Conscience

**Réveillé**

Réactif à la demande

Aréactif

Coloration

Normale

**Pâle, grisâtre**

Cyanosé

**Configuration d'impression**

Format : A4  
Orientation : Portrait  
Imprimante : Brother MFC-9465CDN Printer  
 Utiliser la configuration système de l'imprimante

**Zoom**

**Actions supplémentaires**

Sauvegarder dans le dossier  
Aldrete (14/02/2020 - 17:53:50)

Exporter le document

Envoyer par email

Exécuter les actions sans imprimer

Exécuter les actions et imprimer

Ouvrir le fichier uniquement

Annuler

Les entrées du score apparaissent en gras pour faciliter la lisibilité.

Vous pouvez, tout comme une lettre type, "sauvegarder" et / ou "exporter" ce document.

- **Exécuter les actions sans imprimer** : vous sauvegardez et / ou exportez le document sans imprimer,
- **Exécuter les actions et imprimer** : vous sauvegardez et / ou exportez et vous imprimez,
- **Ouvrir le fichier uniquement** : vous déclenchez la transcription du document en PDF et vous affichez le document généré,
- **Annuler** : vous renoncez à toute action

### 2.2.9.3 Restriction de la validation par un rôle

Certaines Saisies Avancées nécessitent que l'utilisateur connecté ait un certain Rôle.

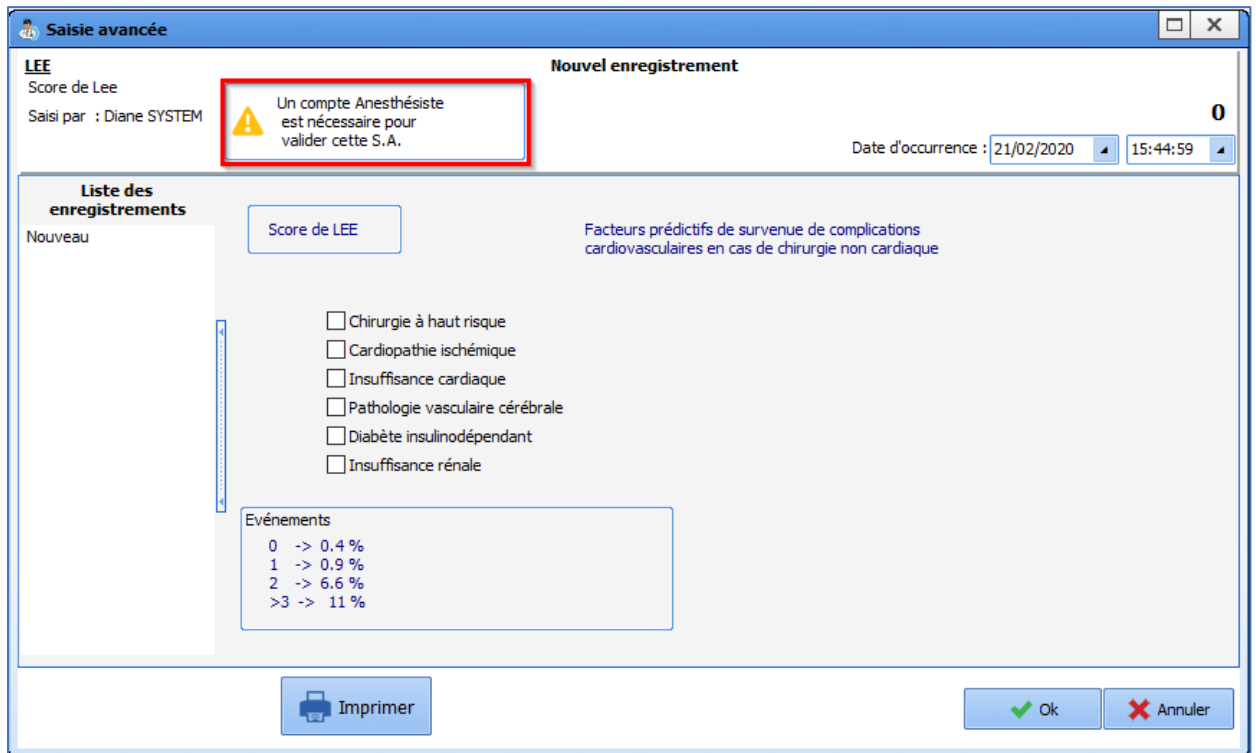


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



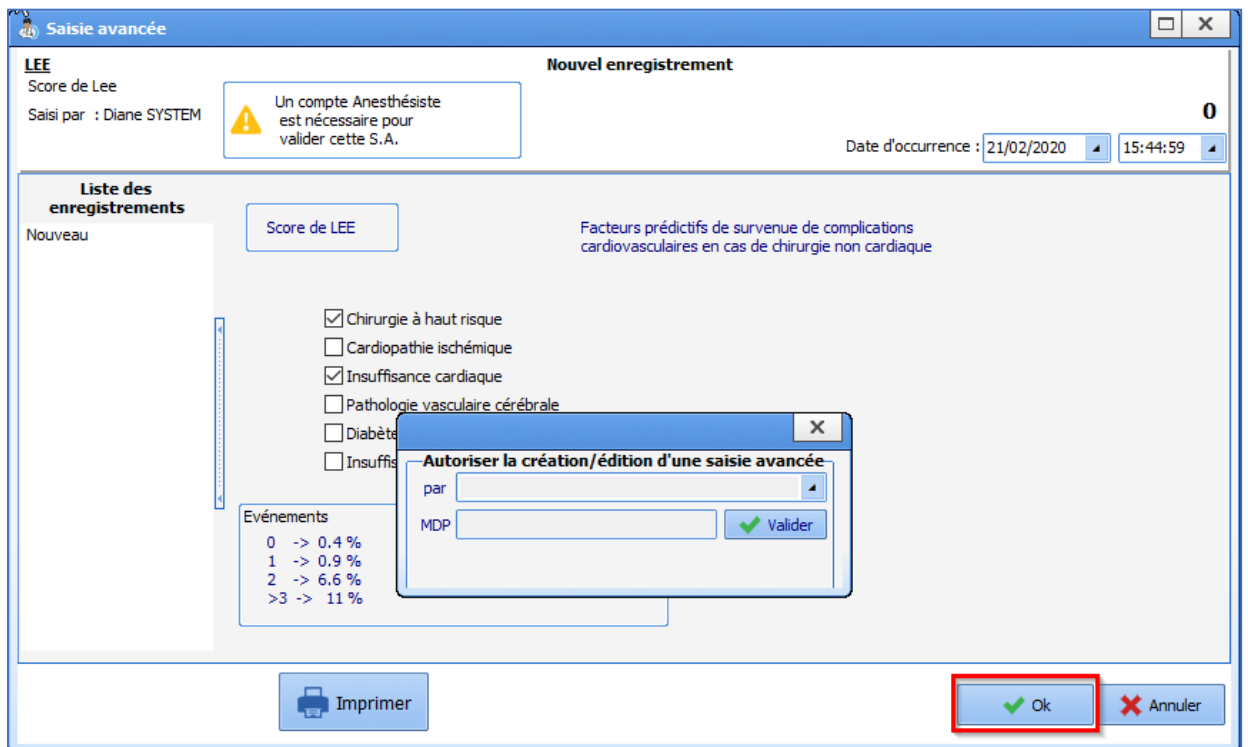La saisie de certains scores est restreinte à un rôle. Sur l'image ci-dessus, une alerte indique que ce score doit être complété par un médecin anesthésiste.



Une fenêtre apparaît permettant au médecin anesthésiste d'indiquer son login et son mot de Passe.



### 2.2.9.4 Affichage de saisie avancée (affichage simple)

Ce composant permet d'afficher saisie avancée sous forme d'un tableau.

ALR_Prescription - 04/01/2023 12:27 Sur KT ALR	
Donnée	Valeur
KT Perinerveux	Oui
Rachi anesthésie	Non
Membre Sup	Axillaire
Membre Inf	Sciatique


### 2.2.9.5 Affichage de saisie avancée avec historique (affichage multiple)

Ce composant permet d'afficher à la fois la saisie avancée elle-même et un résumé des données renseignées.

The screenshot displays a software interface for managing therapy engagements. On the left, a sidebar shows a tree view of engagements, including a selected entry for '17/07/2020 11:27:14 (Jean CHIR)'. The main area on the right shows a detailed view of this engagement, including a table of data and a summary of the engagement details.

Donnée	Valeur
KT Perinerveux	Oui
Rachi anesthésie	Non
Membre Sup	Axillaire
Membre Inf	Sciatique

Aucun enregistrement sélectionné

Pour ajouter un nouvel enregistrement de la saisie avancée, il faut cliquer sur le bouton  au-dessus de la colonne de gauche.

Une fois validé, l'enregistrement s'insère dans la colonne de gauche.

#### Colonne de gauche

Cette colonne est l'historique des enregistrements de la saisie avancée. Il est possible à tout moment de consulter ces différents enregistrements en cliquant sur la ligne correspondante. Au clic sur une ligne dans le passé, la colonne du centre et la colonne de droite s'actualisent.

#### Colonne du centre

Cette colonne affiche la synthèse de la saisie avancée sélectionnée dans la colonne d'historique.

#### Colonne de droite

Cette colonne permet l'affichage de la saisie avancée.

### 2.2.9.6 Affichage de saisies avancées sous forme de liste



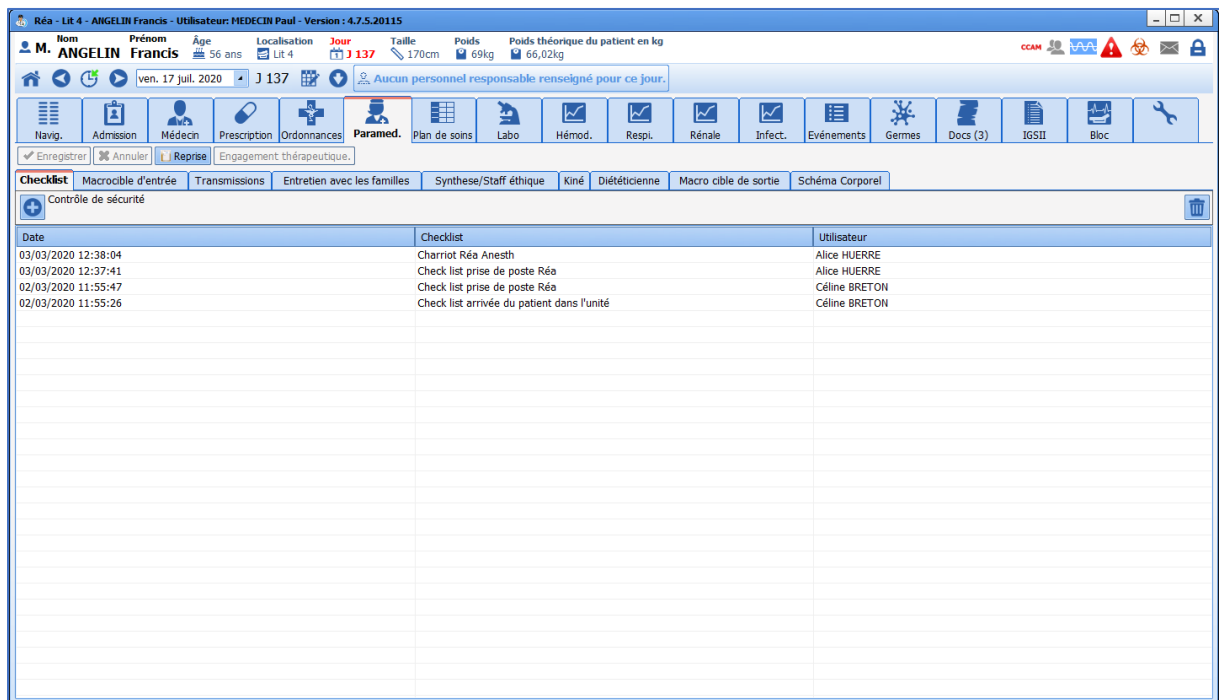
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

L'**Affichage de Saisies Avancées sous forme de liste** est un composant permettant de lister les saisies avancées. Certaines données issues des saisies avancées apparaissent dans le tableau (paramétrage par le référent).



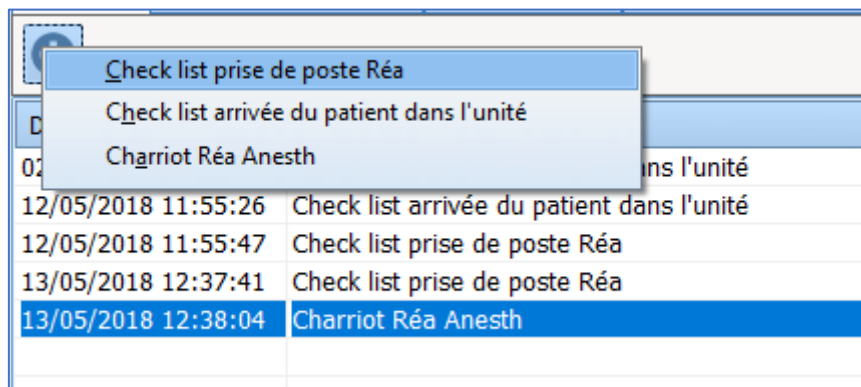Pour appeler une saisie avancée, cliquer sur la croix située en haut à gauche du tableau. Si plusieurs saisies avancées sont disponibles, une liste s'affichera permettant de choisir la feuille de saisie voulue. Exemple : il est possible de lister ainsi différents scores. Cela permet d'avoir un accès facilité à tous les types de scores nécessaires.



- Si vous souhaitez **modifier** une saisie avancée, double cliquez sur la ligne choisie et la Saisie Avancée correspondante s'ouvre pour modification.

- Si vous souhaitez **supprimer une saisie avancée**, cliquez sur la ligne choisie et cliquez sur la corbeille pour effacer la ligne.

Utilisateur
Diane SYSTEM
Céline BRETON
Céline BRETON
Alice HUERRE
Alice HUERRE

**REMARQUE :** **DIANE** garde trace de toutes les entrées. De ce fait, elle peut être retrouvée en cas de besoin.

## 2.2.10 Saisie multiple

La saisie multiple est une méthode permettant de saisir une série d'actes, de médicaments, de consommables, de saisies avancées, etc... de façon simplifiée.

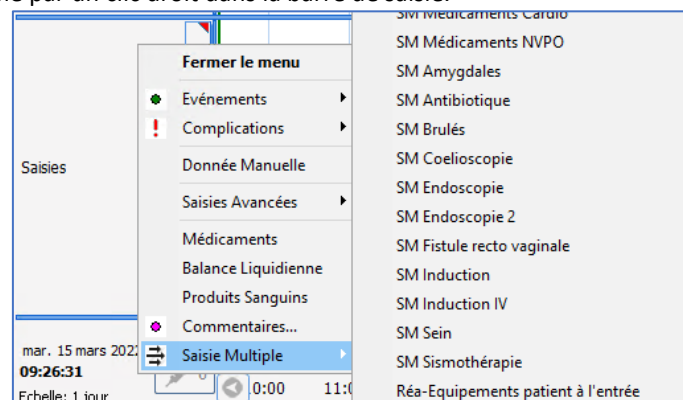
C'est une méthode de saisie particulièrement utilisée en per et post opératoire. Elle est configurée par le référent du centre.

### 2.2.10.1 Déclencher une Saisie Multiple

La saisie multiple peut être associée à un bouton et se trouvera alors en haut de l'écran ...



... ou peut être accessible par un clic droit dans la barre de saisie.



### 2.2.10.2 Utilisation de la saisie multiple

Une saisie multiple peut être courte pour une action très ciblée, type installation du patient. Elle peut aussi être longue avec tous les éléments par exemple de l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie de salle, ce qui est particulièrement intéressant pour les actes courts (IVG, extraction dentaire, coloscopie...).



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



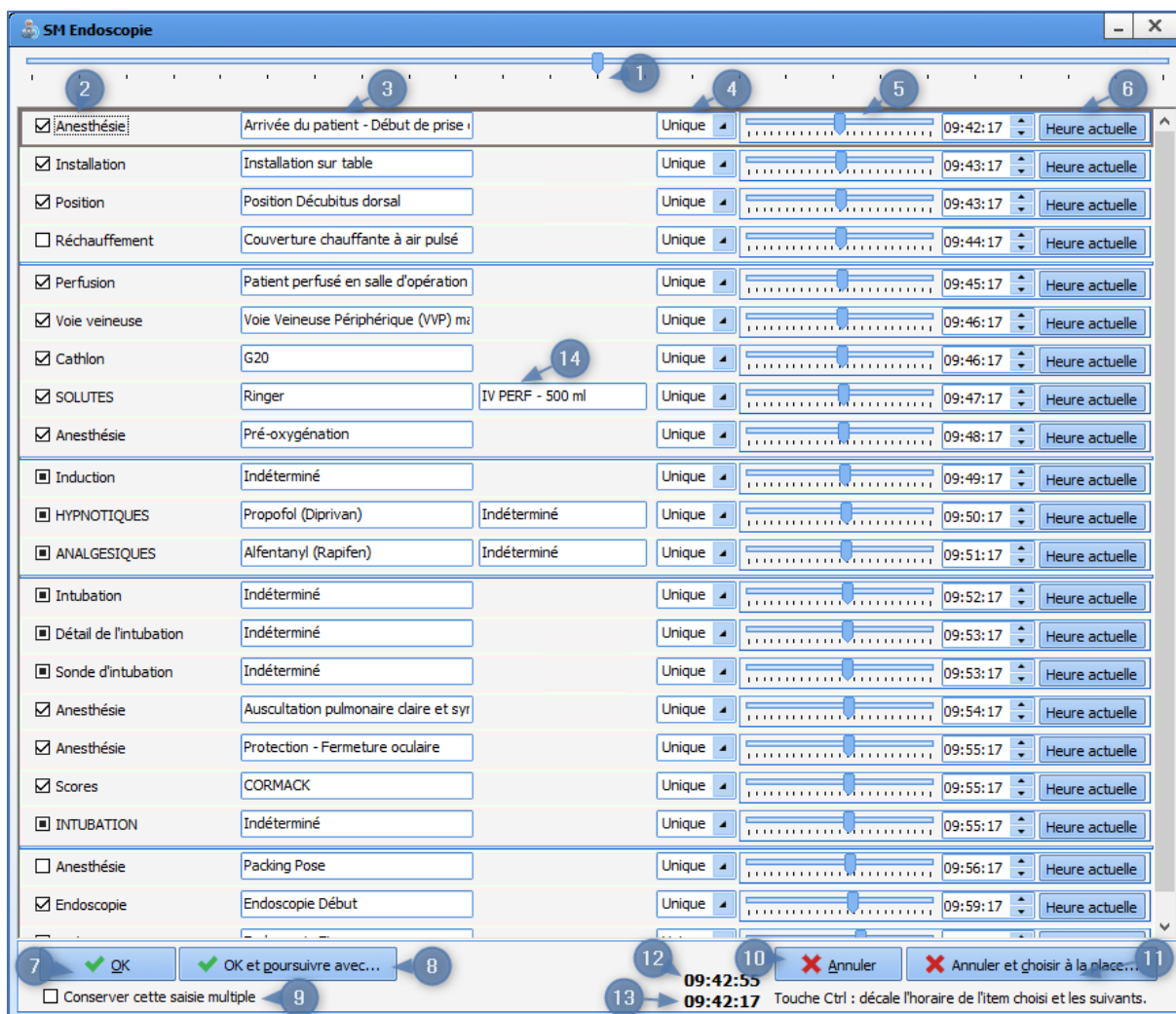
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



Au moment de la saisie, il est possible de choisir d'utiliser tout ou juste une partie de la saisie multiple. Il est possible aussi, par un clic dans les cases, de renseigner les posologies médicamenteuses ou de modifier et/ou de compléter les éléments préselectionnés.


Sur chaque ligne, se trouve une coche qui permettra de sélectionner les actions à valider. En renseignant un élément dans la ligne, la coche s'active.

Il est possible d'agir dans chaque case présente. Le menu de la section sélectionnée sera alors modifiable. Les choix ne se feront qu'autour de ce qui est prévu par la liste prédéfinie à l'origine.




1. Curseur permettant de modifier l'heure de référence de la saisie multiple (13). La modification de l'heure de référence modifie automatiquement l'heure de chaque élément de la saisie multiple.
2. Case à cocher permettant d'ajouter ou non l'élément sélectionné dans le dossier. La case se coche automatiquement si l'utilisateur renseigne des informations sur celle-ci.
3. Libellé de l'élément à ajouter dans le dossier. Le clic droit sur cette zone propose de remplacer l'élément par un autre élément de la même catégorie.
4. **Unique/Multiple** : Permet de choisir si l'ajout de l'élément est unique ou récurrent. Si la clé de paramétrage **SMCanSetOccurrenceMode** est activée, il est possible pour l'utilisateur de choisir le type

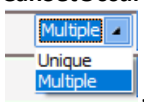de planification :




Sinon, la valeur est définie par la clé **SMOccurrenceMode**.

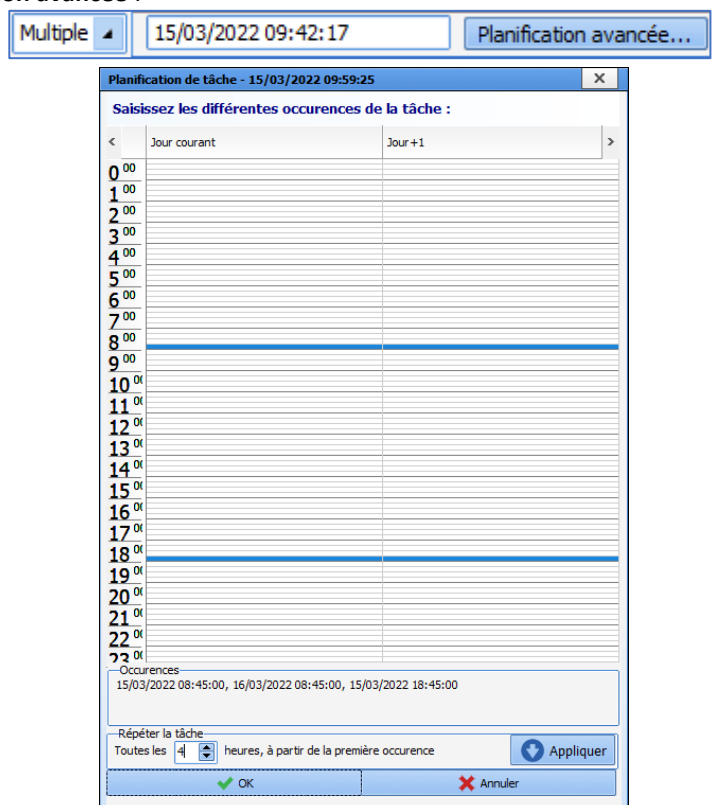Une planification de type multiple permet d'accéder à la fenêtre de planification avancée au clic sur le bouton **Planification avancée** :



Il est possible dans cette fenêtre d'ajouter de façon récurrente dans le dossier un élément à partir d'une date/heure.

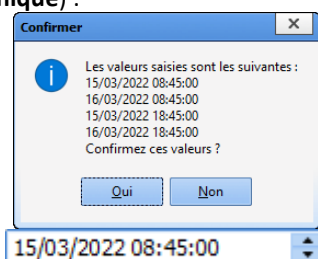
La date/heure de début de planification se sélectionne au clic sur une ligne associée à un horaire. La planification est permise pour le jour courant et le lendemain uniquement. L'intervalle d'ajout de l'élément se configure dans le menu **Toutes les X heures, à partir de la première occurrence**. X permet de choisir la durée en heures entre chaque ajout. **Appliquer** calcule les dates d'ajout des éléments et les affiche dans la zone **Occurrence**. Le clic sur le bouton **OK** ajoute les dates de planification dans le champ date/heure de la zone planification (remplace la zone temporelle du point (5) dans le cas d'une planification **Unique**) :




Pour un élément paramétré de façon unique, la zone temporelle (5) permet en faisant glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite l'heure d'ajout de l'élément. L'heure peut être initialisée avec l'heure courante au clic sur le bouton **Heure actuelle** (6).

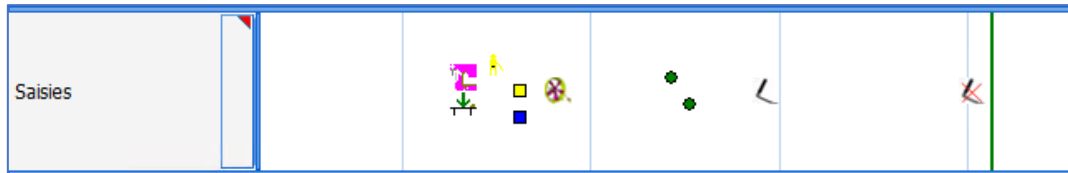- OK** : Le clic sur le bouton affiche à l'utilisateur les saisies avancées / saisies multiples contenues dans la saisie multiple les unes à la suite des autres afin de pouvoir les éditer. Les éléments cochés dans la saisie multiple sont ajoutés automatiquement dans le dossier patient à l'heure définie dans la zone (5). Chaque élément de la saisie multiple ajouté dans le dossier est représenté avec l'icône qui lui est liée habituellement.





8. Même fonctionnement que le bouton **Ok** avec la possibilité de saisir par la suite une autre saisie multiple parmi la liste des saisies multiples enchainées configurées.
9. **Conserver cette saisie multiple** : Case à cocher visible si la clé de paramétrage **AfficheRepriseSM** est activée. Elle permet au clic sur le bouton **OK** d'ajouter les données dans le dossier et de conserver les données saisies dans la saisie multiple afin de pouvoir les renseigner plus tard dans le dossier. Cette reprise de saisie multiple est possible en cliquant sur le bouton lié à la saisie multiple ajouté dans la fenêtre suivante accessible dans le dossier :

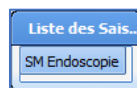

10. **Annuler** : Annule l'ajout de la saisie multiple.
11. **Annuler et choisir à la place** : Annule l'ajout de la saisie multiple avec la possibilité de saisir une autre saisie multiple parmi les saisies multiples alternatives configurés.
12. Heure actuelle.
13. Heure de référence de la saisie multiple.
14. Posologie associée à l'élément.


### 2.2.10.3 Gestion des heures

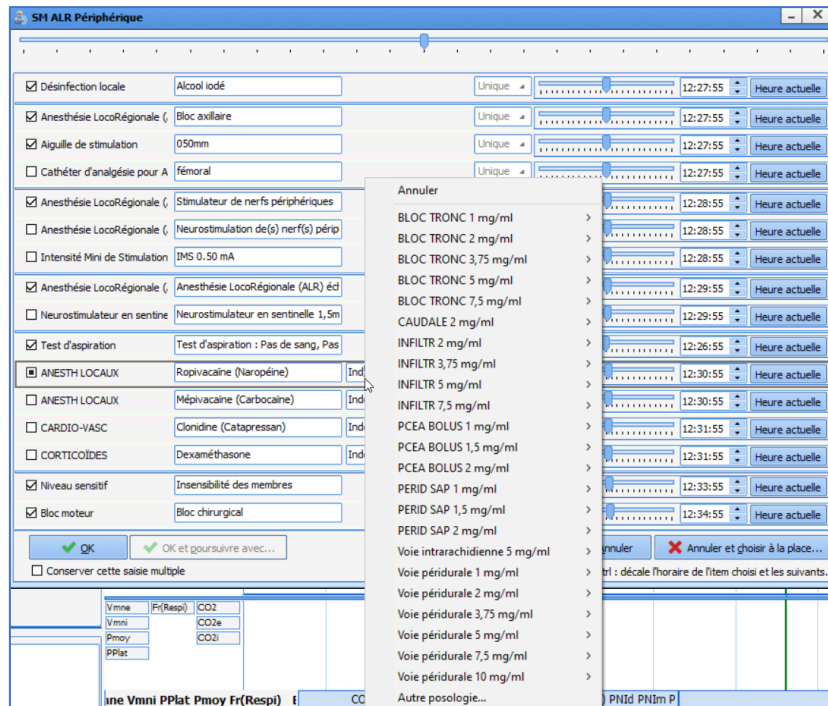Les heures, situées à droite de la fenêtre, sont ajustables :

- soit en complétant directement l'heure voulue,
- soit en faisant glisser le curseur principal (en haut de la fenêtre) : cette action décalera toutes les heures en respectant les décalages de temps pré paramétrés,
- soit en cliquant sur le bouton **Heure actuelle**,
- soit en faisant glisser le curseur d'une seule ligne...

**ASTUCE** : Pour glisser le curseur d'une ligne et faire glisser les suivants tout en conservant les écarts de temps des éléments suivants, maintenir le bouton **CTRL** en faisant glisser le curseur désiré.





**Attention**, le curseur est un outil servant à affiner l'heure d'occurrence. Sa position n'est pas actualisée si l'heure est modifiée directement ou si le bouton **Heure actuelle** a été utilisé : dans ce cas, le curseur peut ne pas refléter le décalage de temps par rapport aux autres lignes.

#### 2.2.10.4 Clore ou annuler une saisie multiple

Une fois la saisie multiple terminée, il est possible de :

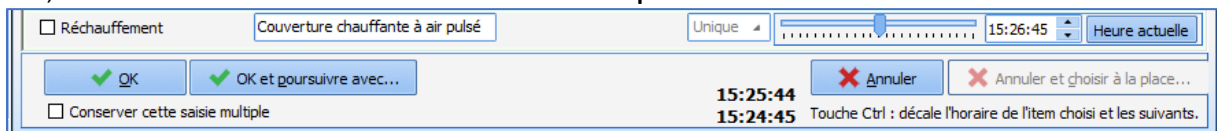
- La valider et la fermer en cliquant sur le bouton **OK**,
- La valider et poursuivre avec une autre saisie multiple (parmi une sélection de saisies multiples paramétrées par votre référent) en cliquant sur le bouton **OK et poursuivre avec ...**

Pour annuler la saisie multiple en cours, il est possible de :


- L'annuler et la fermer en cliquant sur le bouton **Annuler**,
- L'annuler et poursuivre avec une autre saisie multiple (parmi une sélection de saisies multiples paramétrées par votre référent) en cliquant sur le bouton **Annuler et choisir à la place ...**

#### 2.2.10.5 Reprendre le contenu d'une saisie multiple

Dans le cas d'une utilisation répétée de la même saisie multiple, il est possible d'en reprendre le contenu. Pour cela, il suffit de cocher la case **Conserver cette saisie multiple**.



## 2.2.11 Zone d'édition de documents

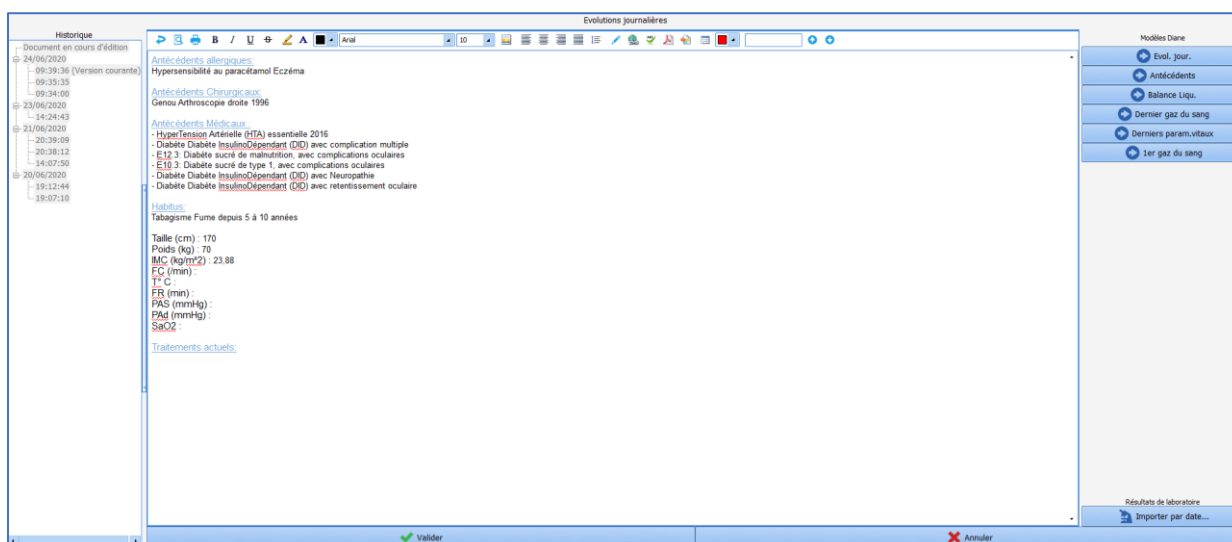

La zone d'édition de documents est utilisée dans différentes situations : synthèse médicale, synthèse paramédicale, compte-rendu d'accouchement ...

Ce composant permet la construction des divers comptes-rendus soit par saisie manuelle, soit par le biais de boutons situés sur la droite de l'écran.

Pour débiter l'édition d'un compte-rendu, il faut au préalable cliquer sur la barre **Ajouter des informations** située en bas du composant.

Il est alors possible de saisir des informations dans le cadre central.

Le plus souvent, des modèles prédéfinis permettent de construire le compte-rendu en récupérant automatiquement les données saisies dans le dossier.

Dans l'exemple ci-dessus, le clic sur le bouton **Evol. jour.** fera apparaître automatiquement dans la partie centrale les antécédents du patient, les allergies et les dernières constantes enregistrées. Il est ainsi possible de construire souhaite récupérer. Les informations viendront s'ajouter à l'endroit où se trouvait le curseur de la souris dans la fenêtre centrale.

Une fois le compte-rendu terminé, il suffit de cliquer sur **Valider** en bas du cadre afin d'enregistrer les modifications.

A droite, une fenêtre d'historique rétractable permet un accès à tous les comptes-rendus préalablement rédigés.

## 2.2.12 Le composant Traitements actuels

Il existe plusieurs composants pour les traitements actuels du patient :

- Le nouveau composant **Traitements et prémédications** détaillé dans le chapitre [L'onglet Traitements / Prémédications](#).
- L'ancien composant **Traitements actuels** détaillés dans ce chapitre

Ce champ agit comme tous les autres champs de saisie avec liste de référence, mais dispose de quelques options complémentaires décrites ci-dessous :

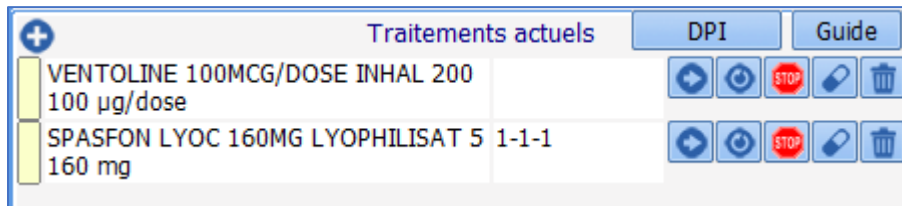


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)








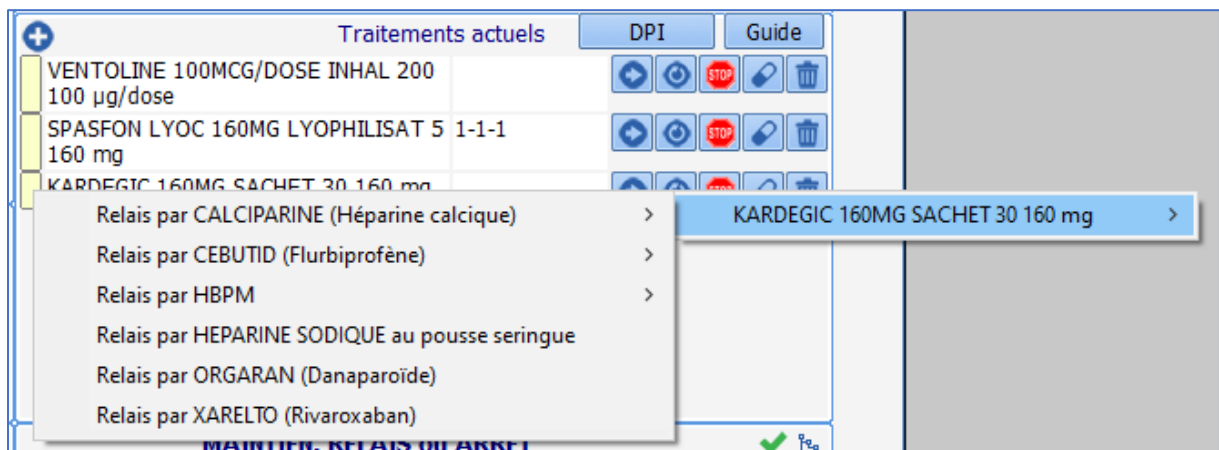
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



Un clic sur le rectangle jaune, à gauche de chaque ligne, permet un accès direct à la banque de médicaments (ainsi qu'au centre de référence des agents tératogènes (CRAT) dans le module d'obstétrique).

Une fonctionnalité de gestion des médicaments peut être activée sur ce composant. Dans ce cas, plusieurs icônes sont disponibles sur la droite :



-  Permet de Maintenir le médicament
-  Permet de Relayer le médicament par un autre
-  Permet d'Arrêter le médicament
-  Permet d'envoyer ce médicament dans les prémédications de l'onglet **Conclusion/Visite**
-  Permet de supprimer la ligne

### 2.2.12.1 Spécificités de l'anesthésie



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Traitements		Vidal
LOXEN (nicardipine chlorhydrate) 20mg	1-0-1	[stop] [info] [print] [trash]
PREVISCAN (fluidione) 20mg		[stop] [info] [print] [trash]
DIAMICRON (gliclazide) 60mg		[stop] [info] [print] [trash]

MAINTIEN, RELAIS ou ARRET		4	✓	ⓘ
LOXEN (nicardipine chlorhydrate) 20mg	à poursuivre			
PREVISCAN (fluidione) 20mg	à remplacer par kargedic 75			
DIAMICRON (gliclazide) 60mg	à arrêter			

Pour un usage complet de ce composant en anesthésie, il est classiquement associé à celui nommé **MAITIEN RELAIS ou ARRET**.

Ces composants communiquent et les décisions prises s'inscrivent dans le deuxième composant. Il est alors possible d'éditer une ordonnance qui reprend strictement ce qui est décidé dans **MAITIEN RELAIS ou ARRET**.

### 2.2.12.2 Spécificités de l'obstétrique : Accès au CRAT

A gauche du traitement se trouve un rectangle de couleur jaune. En cliquant dessus, il permet un **accès direct au CRAT** (le Centre de Référence des Agents Tératogènes) sur la page correspondant à la molécule. Ce clic permet également un accès à la monographie du médicament (que celle-ci provienne de la BCB ou du Vidal).

The screenshot shows a medical software interface for a patient named Mme DURAND Caroline. The top navigation bar includes tabs for 'Antécédents', 'Grossesse', 'SDN', 'Post partum', 'Echographies', 'Ordonnances', 'Anesthésie', and 'Documents (0)'. The main content area is divided into several sections:

- Antécédents:** Includes 'ATCD Obstétricaux' and 'Allergies' (with a list of 'Pénicillines').
- Traitements habituels:** Lists 'LAROXYL 25MG CPR 100 25 mg (Amitriptyline chlorhydrate)'. A yellow button with a magnifying glass icon is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the CRAT page.
- ATCD médicaux:** Includes 'Pathologie' and 'commentaire'.
- ATCD gynécologiques:**

The CRAT page for 'Amitriptyline - Grossesse et allaitement' is displayed, showing search results for 'LAROXYL 25MG CPR 100 25 mg (Amitriptyline chlorhydrate)|1-1'. The page includes a navigation menu (ACCUEIL, RETOUR, IMPRIMER), a search bar, and a list of related medications. The main content area provides detailed information about the medication, including its classification as an antidepressant and its use in pregnancy and breastfeeding.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Lebvre Caroline DURAND (née) le 21/11/1990 - Utilisateur SYSTEME Diane - Version : 4.7.4.19004

1 Mme DURAND Caroline

Age 29 ans Taille 160cm Poids 60kg Groupe sanguin N/R Terme 37SA + 03 Parité 0 Ut. Césarienne Non

Administratif Antécédents Grossesse SDN Post partum Echographies Ordonnances Anesthésie Documents (0)

Enregistrer Annuler Reprise

Antécédents ATCD Obstétricaux

Allergies

Pénicillines

traitements habituels

LAROXYL 25MG CPR 100 25 mg (Amitriptyline chlorhydrate)

ATCD médicaux

Pathologie commentaires

ATCD gynécologiques

Informations sur : LAROXYL 25MG CPR 100 25 mg (Amitriptyline chlorhydrate) | 1-1-1

QR = Vous et votre traitement en cas de vague de chaleur = Mise au point sur le bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur LAROXYL\_20072016\_AVIS\_CT15297

Consommation d'antidépresseurs et risque d'accident de la route : une vigilance particulière est requise lors de l'initiation ou de la modification du traitement - Communiqué de presse

Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l'enfant : Recommandations de bonne pratique - Argumentaire

Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chronique chez l'enfant : Recommandations de bonne pratique - Efficacité des antidépresseurs

Psychiatrie : Livret AFSSAPS Médicaments et Grossesse Version N°4

Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte : Argumentaire

Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte : Recommandations

Le bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent

CRAT Monographie Médicaments susceptibles d'affecter l'adaptation de l'organisme à la chaleur Conservation des médicaments en cas de vague de chaleur

LAROXYL 25 mg, comprimé pelliculé, boîte de 100

Amitriptyline

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Mises en garde spéciales

Suicides/Idées suicidaires ou aggravation clinique

La dépression est associée à un risque accru d'idées suicidaires, d'auto agression et de suicide (comportement de type suicidaire). Ce risque persiste jusqu'à obtention d'une rémission significative. L'amélioration clinique pouvant ne pas survenir avant plusieurs semaines de traitement, les patients devront être surveillés étroitement jusqu'à obtention de cette amélioration. L'expérience clinique montre que le risque suicidaire peut augmenter en tout début de rétablissement.

Les autres troubles psychiatriques dans lesquels LAROXYL est prescrit peuvent également être associés à un risque accru de comportement suicidaire. De plus, ces troubles peuvent être associés à un épisode dépressif majeur. Les mêmes précautions d'emploi que celles mentionnées pour les patients souffrant d'épisodes dépressifs majeurs devront donc être appliquées aux patients présentant d'autres troubles psychiatriques.

Les patients ayant des antécédents de comportement de type suicidaire ou ceux exprimant des idées suicidaires significatives avant de débuter le traitement, présentent un risque plus élevé de survenue d'idées suicidaires ou de comportements de type suicidaire, et doivent faire l'objet d'une surveillance étroite pendant le traitement. Une méta-analyse d'essais cliniques contrôlés versus placebo sur l'utilisation d'antidépresseurs chez l'adulte présentant des troubles psychiatriques a montré une augmentation du risque de comportement de type suicidaire chez les patients de moins de 25 ans traités par antidépresseurs par rapport à ceux recevant un placebo. Une surveillance étroite des patients, et en particulier de ceux à haut risque, devra accompagner le traitement médicamenteux, particulièrement au début du traitement et lors des changements de dose. Les patients (et leur entourage) devront être avertis de la nécessité de surveiller

- Idees suicidaire
- Trouble psychiatrique
- Antécédent de comportement suicidaire
- Adulte de moins de 25 ans
- Bradycardie
- Insuffisance cardiaque (non compensée)
- Insomnie
- Nervosité
- Virage maniaque franc
- Epileptique
- Antécédent d'épilepsie
- Crise convulsive

## 2.2.13 Le composant Allergies

Le champ **Allergies** se compose de deux colonnes. La colonne de gauche permet de renseigner l'allergie. La saisie des premières lettres appelle une liste dans laquelle on pourra choisir l'allergène.

Allergies

peni

Pénicillamine

Benzylpénicilline sodique

Terpéniques dérivés

Phénoxyéthylpénicilline

Procaïne benzylpénicilline

Pénicilline V

Benzathine benzylpénicilline

Dérivés terpéniques

Terpénique alcool

Pénicillamine (classe chimique)

Benzylpénicilline potassique

Pénicillines

Benzylpénicilline bénythamine

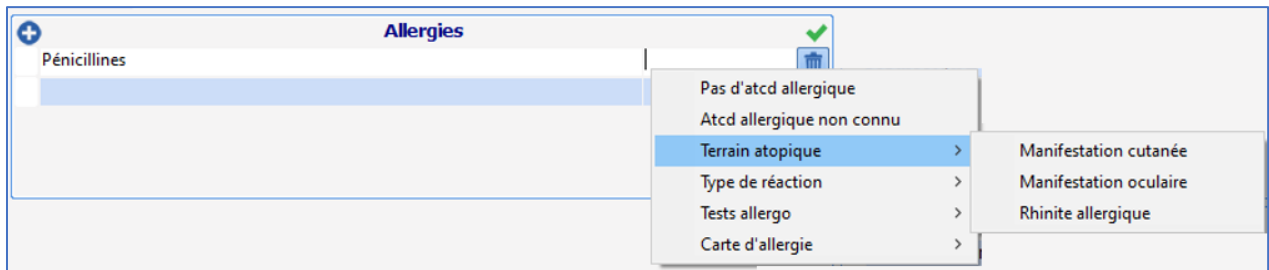
✓

🗑️

🗑️


La colonne de droite permet grâce à un clic droit d'accéder à une liste permettant de renseigner le type de réaction allergique provoqué par la molécule.





**REMARQUE :** Il existe un lien entre le composant **Allergies** et la prescription. Si le traitement prescrit mentionne un allergène renseigné dans le composant **Allergies**, une alerte signalera qu'une allergie a été détectée. La prescription n'est pas bloquée par cette alerte.


### 2.2.14 Le schéma dentaire

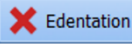Le schéma dentaire est adapté aux adultes et aux enfants en affichant à la fois les dents temporaires et les dents permanentes. Les fonctionnalités des deux types de dentures sont identiques à l'exception de l'usage du bouton  qui ne concerne que les dents permanentes.

La saisie des éléments dans ce composant utilise plusieurs méthodes :

- Au clic sur une dent : il sera possible de faire défiler les différentes options proposées.
- Par un glissé-déposé : en prenant un élément de la légende et en le faisant glisser sur la dent concernée

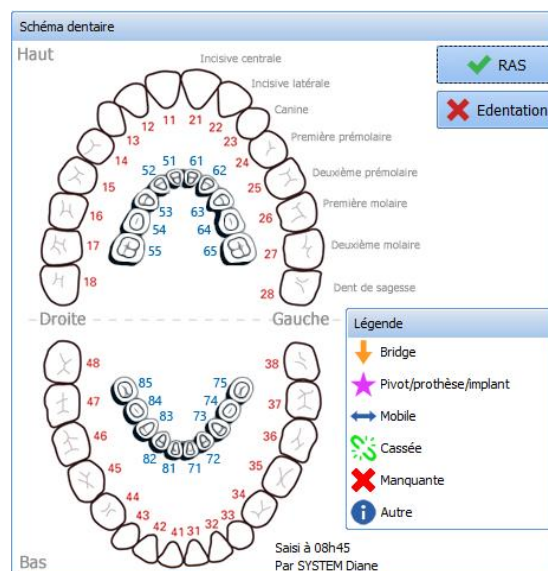Le bouton **RAS** permet de réinitialiser le schéma.



### 2.2.15 Les onglets communs

Certains onglets sont communs à l'ensemble des modules. Le fonctionnement de ces onglets est expliqué ci-dessous.

Selon le profil de l'utilisateur, il est possible que certains onglets ne soient accessibles qu'en lecture seule. Dans



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

ce cas, les onglets concernés apparaissent en « grisé ».



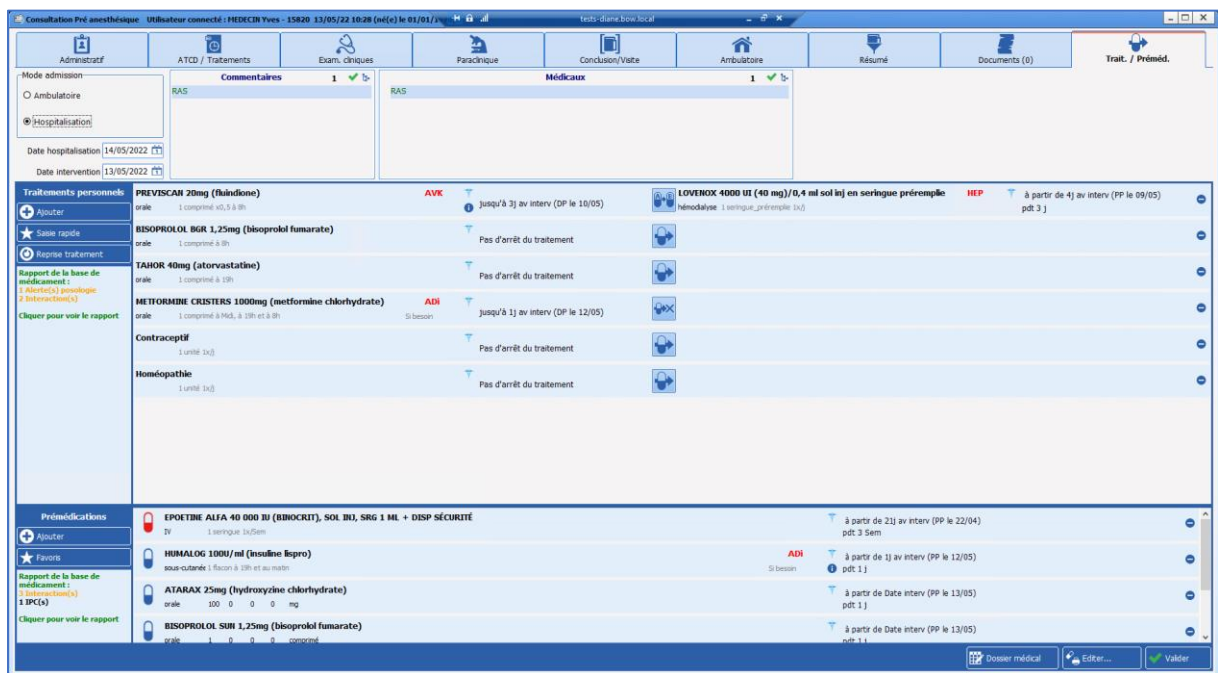
### 2.2.15.1 L'onglet Traitements / Prémédications

Cet onglet permet de remplacer les trois composants **Traitements Actuels**, **Maintien Relais et Arrêt** et **Prémédications**. Il permet de renseigner le traitement actuel du patient et de le gérer.

Il est possible de renseigner ligne par ligne le traitement du patient puis de gérer, grâce à des favoris, les relais, maintien ou arrêt des médicaments.


Il sera alors possible d'une part d'éditer l'ordonnance en conséquence mais aussi de préparer la prescription du post-opératoire.

Le poids, la taille, le sexe et l'âge sont des éléments nécessaires à l'analyse des allergies et interactions par la banque de médicaments. S'ils n'ont pas été renseignés en amont, une fenêtre s'ouvrira automatiquement demandant de les compléter.



#### 2.2.15.1.1 Les boutons

Le bouton  permet d'ajouter une ligne.

Un clic sur le bouton  à droite de la ligne permet de supprimer une ligne.

Un double-clic sur la ligne ouvrira une fenêtre spécifique permettant ainsi de la renseigner de façon simplifiée (la zone active à l'ouverture de la fenêtre est celle pointée lors du double-clic).

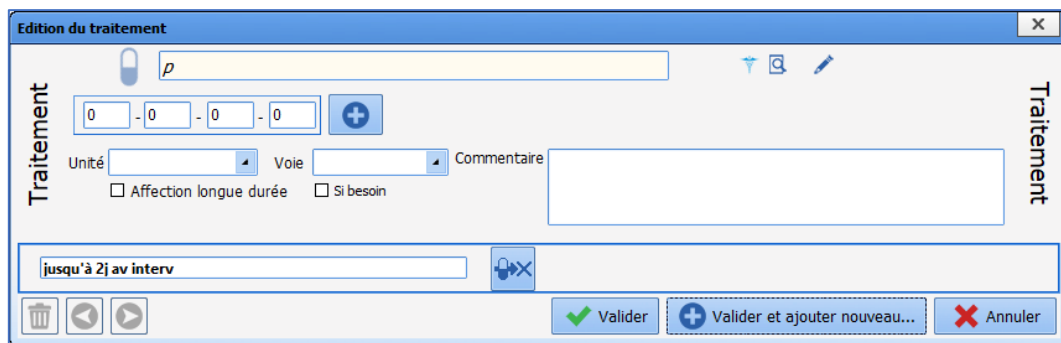


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28





Les cases correspondent à **Matin / Midi / Soir / Coucher**. Le clic sur le bouton  permet d'ouvrir une planification détaillée pour les prises intermédiaires.

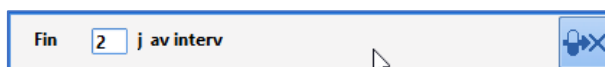Dans la ligne montrant la période d'arrêt, le clic permet d'afficher une zone de saisie pour modifier la date d'arrêt du traitement.



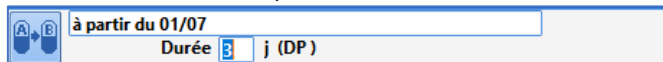Dans la ligne montrant la durée d'un relais, le clic permet d'afficher une zone de saisie pour modifier la durée.



Pour que le renseignement soit plus exhaustif, il est possible de renseigner les informations avec le crayon .



**Metformine chlorhydrate : 1 comprimé à Midi, à 19h et à 8h Si besoin**

Traitement personnel (Non ALD)

**METFORMINE \*** +

METFORMINE CRT 1000MG CPR  
1000 mg/comprimé

Taille : 180 cms  
Poids : 80 Kgs

contenant et dilution

Contenant volumique

Débit de la perfusion

comprimé/h  
 Débit non précisé

Détails ▼

Posologie par administration

1 comprimé /kg /m2 Max.

Posologie par jour

3 comprimé

Débit ▲

comprimé /kg /h /m2 /min

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 3 comprimé**  Hors AMM

Durée d'administration ▲

24h  12h  8h  6h  4h  3h  2h  1h  30min  Autre:

Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie orale

A la demande  
 Apporté par le patient

Planification ▲

Manuelle

Condition Si besoin

Lier à un événement

Administration urgente

Date/Heure de début 00:00 11/05/2022 Demain

Préciser une durée

1 jour(s) Avant date interv  Jusque 00:00 12/05/2022


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 1 1

1 comprimé 1 comprimé 1 comprimé

Remarques du pharmacien

Valid Fermer

Un clic sur la loupe  permet de renseigner la pathologie pour laquelle ce médicament a été prescrit. Cela renseigne dans le même temps le composant **Antécédents Médicaux**. Cette méthode de saisie renseigne les codes CIM10 automatiquement.

Diabète sucré	>		
Diabète non insulino-dépendant	>	E11	Diabète sucré de type 2
1		O24.1	Diabète sucré préexistant, non insulino-dépendant, au cours de la grossesse
		R73	Augmentation de la glycémie

En cliquant sur le bouton gélule, il est possible de faire défiler les différents choix :



Relais :

en cliquant sur le bouton droit de la souris, le menu des relais apparaît :

à partir de 4i av interv (PP le 09/05)

AVK

Copier le substitut dans les prémédications

- Lovenox 40mg (J-3)
- Lovenox 40mg (J-4)
- Lovenox 40mg (J-5)
- Lovenox 40mg (J-6)
- Lovenox 40mg (J-8)



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

La gélule du substitut (B) est rouge si le médicament appartient au livret thérapeutique de l'établissement. Dans le cas contraire, la gélule est bleue (relais hors hôpital).



**Maintien** du médicament



**Arrêt** du médicament

**DP = Dernière Prise**

**PP = Première Prise**

#### 2.2.15.1.2 La conciliation

La zone de conciliation répertorie l'attitude choisie vis-à-vis du médicament : Maintien, relais et arrêts. Dans cette zone, il est possible d'ajuster le nombre de jours d'arrêt avant l'intervention en cliquant directement sur le chiffre proposé. **DIANE** se chargera, si la date d'intervention a été renseignée, de calculer la date de dernière prise (**DP**).

Fin	3	j av interv (DP le 10/05)		à partir de 4j av interv (PP le 09/05)
				pdt 3 j

#### 2.2.15.1.3 La substitution

La zone de substitution permet de renseigner le médicament choisi pour effectuer le relais ainsi que la posologie et la date de première prise (**PP**) exprimée en jour à partir du jour d'intervention. Il est possible de modifier le choix par défaut en cliquant directement sur le nom du médicament ou par le crayon situé à droite du médicament de substitution.

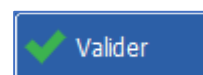
DOLIPRANE 500MG GELULE																								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									1										1					
Unité		gélule		Voie		orale		Commentaire																
<input type="checkbox"/>		Affection longue durée		<input type="checkbox"/>		Si besoin																		

Si la planification n'est pas de type « manuelle » (à heure fixe), il est nécessaire d'utiliser l'édition avancée pour modifier le substitut.

LOVENOX 4000 UI (40 mg)/0,4 ml sol inj en seringue																							
HEP																							
1 seringue_préremplie 1x/j																							
Unité		seringue_préremplie		Voie		hémodialyse		Commentaire															
<input type="checkbox"/>		Affection longue durée		<input type="checkbox"/>		Si besoin																	
Le contenu de la saisie ne peut-être modifiée que via "l'édition avancée" (icône crayon)																							

**IMPORTANT : Il est à noter que tous les médicaments peuvent avoir des favoris créés par les référents.**

#### 2.2.15.1.4 Valider la prescription



Le composant **Traitements et Prémédications** possède un unique bouton de validation. Cette validation équivaut à une signature électronique.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Page : 57 / 386

En signant, vous indiquez avoir pris connaissance des interactions affichées par la banque de médicaments

Identifiant:

Mot de passe:

Copier la conciliation vers Diane prescription

Copier les prémédications vers Diane prescription

Si la case **Copier la conciliation vers Diane prescription** est cochée, toutes les conciliations seront transmises à l'onglet **Prescription** de **DIANE ANESTHESIE** et/ou de **DIANE REA**.

Si la case **Copier les prémédications vers Diane prescription** est cochée, toutes les prémédications seront transmises à l'onglet **Prescription** de **DIANE ANESTHESIE** et/ou de **DIANE REA**.

Après validation et en cliquant sur le bouton **Editer ...**, il est possible d'imprimer.

- Imprimer les traitements/conciliations et prémédications
- Imprimer les traitements seuls
- Imprimer les traitements et conciliations
- Imprimer les conciliations "hors hôpital"
- Imprimer les prémédications complètes
- Imprimer les prémédications hors hôpital
- Imprimer une lettre type...

## 2.2.15.2 Onglet Documents

Cet onglet permet d'enregistrer et de stocker les différents documents du dossier d'un patient que ce soient des documents directement édités dans **DIANE** mais aussi de joindre des pièces extérieures au dossier telles que des images scannées ou importées depuis d'autres logiciels comme des ECG ou des radiographies. Ces documents sont visualisables en cliquant sur la ligne correspondante et éditable, imprimable depuis cet onglet.

Descriptif	Date	Utilisateur	Type Fichier	Catégorie
Courrier CS Guiv (06/12/2019...	06/12/2019	SYSTEM	Document D...	Inconnu
Gestogramme (06/12/2019 - L...	06/12/2019	SYSTEM	Document D...	Inconnu
Formulaire Genocypage (25/11...	25/11/2019	SYSTEM	Document W...	Inconnu
Formulaire Genocypage (25/11...	25/11/2019	SYSTEM	Document W...	Inconnu

Toutes ces informations sont mémorisées dans le dossier du patient et peuvent éventuellement être exportées vers un autre logiciel.

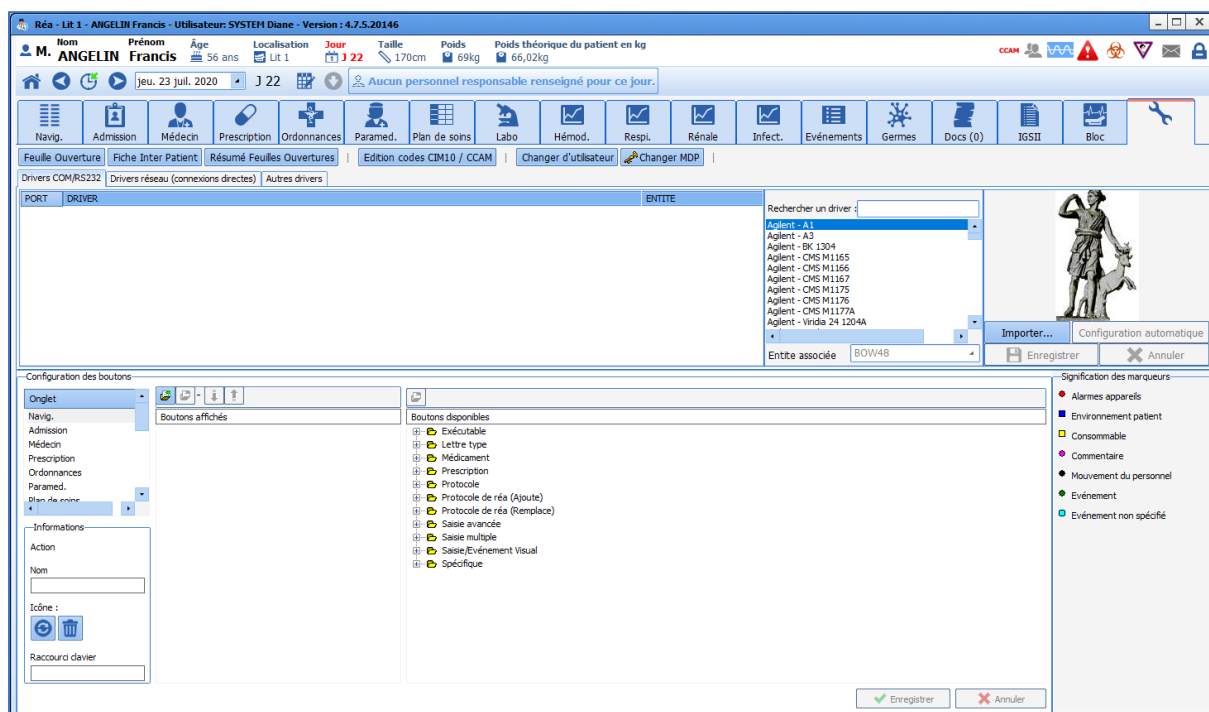
**REMARQUE** : Il est possible de modifier un fichier enregistré dans cet onglet.

### 2.2.15.3 Onglet Configuration

L'onglet **Configuration** permet la **configuration des drivers** des équipements biomédicaux reliés à l'ordinateur ainsi que la **configuration des boutons**.

On retrouve également la signification des marqueurs insérés sur la ligne **Événements** de l'onglet **Surveillance** ou des **pancartes**.

L'onglet **Configuration** permet également, via des boutons, un accès à certaines saisies avancées (checklist, identitovigilance...) et l'édition des codages CIM10 et CCAM.



#### 2.2.15.3.1 Configuration des appareils connectés

Après avoir relié l'équipement biomédical à l'ordinateur à l'aide du câble adapté, il faut le configurer dans **DIANE**. Pour cela, il suffit de sélectionner le nom de l'appareil dans la liste proposée et de le glisser à l'aide de la souris vers le **Port Com** auquel il est relié.

**REMARQUE** : la valeur récupérée de l'équipement biomédical et affichée dans **DIANE** est une médiane de tous les points reçus durant un intervalle de 30 secondes.

Un clic droit sur le moniteur relié à un Port Com affiche un menu permettant de **Relancer**, de **Configurer**, de **Supprimer le driver** ou d'**Activer le mode Debug**.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

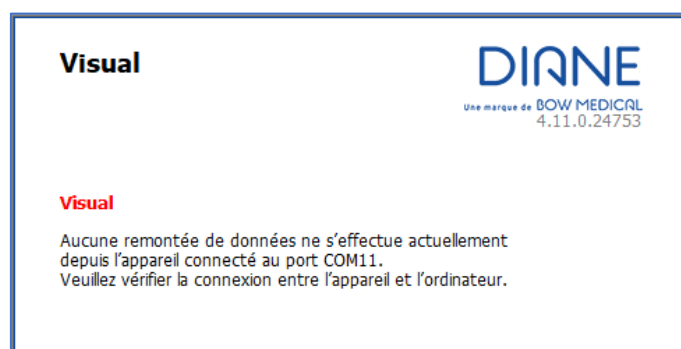
En cas de problème de réception des paramètres d'un moniteur, vous avez la possibilité de **Relancer le driver**. Si le problème persiste, contactez votre administrateur de site qui vérifiera sa configuration.

En cas de changement d'équipement biomédical dans une salle, il est possible de **Supprimer le driver** du Port COM afin de libérer ce dernier pour installer un autre équipement biomédical.

Les drivers sont préconfigurés pour fonctionner avec l'équipement biomédical. Cependant, si l'équipement dispose d'une configuration spécifique, il faut préalablement **configurer le driver** à l'aide de la fenêtre **Configuration du driver**.

Cette fenêtre permet de configurer les **Paramètres de communication** et le **Contrôle de flux** entre l'ordinateur et l'équipement. *Reportez-vous à la documentation du moniteur afin de connaître le paramétrage de chaque zone de cette fenêtre.*

En cas de déconnexion d'un appareil, une fenêtre s'affiche et indique le port sur lequel la remontée de données est interrompue.





### 2.2.15.3.2 Configuration des boutons dans les différents onglets

Il est possible de créer des boutons programmables disponibles dans les différents onglets de l'application. Ces boutons peuvent correspondre à des saisies simples (intubation, incision, fermeture, extubation...), au lancement d'une fenêtre de saisie multiple, à des calculs de scores...

Pour ajouter un bouton dans un onglet, sélectionnez au préalable, dans la zone **Configuration des boutons**, l'**Onglet** dans lequel vous souhaitez insérer votre bouton. Déployez ensuite l'arbre des **Boutons disponibles** et sélectionnez le bouton que vous souhaitez insérer. Glissez-déposez ce bouton à l'aide de la souris vers la liste des **Boutons affichés**.

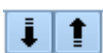Le tableau ci-dessous vous présente la signification des différents boutons de la fenêtre **Configuration**.

Boutons	Rôles
	Ces deux boutons permettent de modifier l'ordre d'affichage
	Quand il est situé au-dessus de la zone des boutons affichés, il permet d'ajouter un séparateur utilisé pour distinguer des groupes de boutons. Les séparateurs sont créés en fin de liste. Il vous suffit de les déplacer ensuite à l'aide des flèches susmentionnées. Quand il est situé à côté d' <b>icône</b> , ce bouton permet d'associer une icône au bouton sélectionné dans la liste des <b>boutons affichés</b> . Indiquez le chemin d'accès de votre icône puis cliquez sur le bouton <b>Ouvrir</b> .





Quand il est situé au-dessus de la zone des **boutons affichés**, ce bouton permet de supprimer un bouton ou un séparateur de l'**onglet** sélectionné.

Quand il est situé au-dessus de la zone des **boutons disponibles**, ce bouton permet de supprimer un bouton de la configuration.

Quand il est situé à côté d'**icône**, ce bouton permet d'effacer l'icône associée au bouton sélectionné.

Au niveau de la zone **Informations**, située sur le côté gauche de la **Configuration des boutons**, il est possible de modifier ou de supprimer le nom d'un bouton après l'avoir sélectionné dans la liste des **boutons affichés**.

## 2.3 Lien avec les banques de médicaments

**DIANE** permet une connexion étroite avec les banques de médicaments (Vidal® et Base Claude Bernard®) et le livret thérapeutique des établissements. Cette connexion sécurise la prescription.

Lorsque l'on renseigne un traitement dans le composant **Traitements actuels**, le clic sur le rectangle jaune en regard de la ligne de saisie offre un accès direct à la monographie du médicament.

The screenshot displays the 'traitements habituels' section of the DIANE software. At the top, a treatment entry is shown: 'LAROXYL 40MG/ML SOL BUV 20ML 40 mg/mL (Amitriptyline) 10 gouttes/J'. A yellow arrow points from this entry to a window titled 'Informations sur : LAROXYL 40% / HL SOL BUV 20PHL 40 mg/ml (Amitriptyline) 10 gouttes/J'. This window shows the monograph for 'LAROXYL 40 mg/ml sol buv AMITRIPTYLINE (chlorhydrate) 40 mg/ml sol buv en gte (LAROXYL)'. The monograph includes sections for 'FORMES ET PRÉSENTATIONS', 'COMPOSITION', 'INDICATIONS', and 'POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION'. A sidebar on the left lists various categories like 'MONOGRAPHIE 2020', 'RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES', and 'Famille / grossesse / allaitement'.

Dans le nouveau composant de saisie du traitement habituel, il est possible de voir la monographie de chaque médicament. Lors de la signature de l'onglet, l'analyse est réalisée pour les interactions mais aussi les allergies. Le lien avec le livret permet de choisir si la prescription est pour l'intra-établissement ou hors structure.

De même, lors de la signature d'une prescription, que celle -ci soit faite depuis l'onglet **Prescription** ou depuis l'édition des ordonnances, un rapport provenant de la banque des médicaments s'affichera automatiquement. Ce rapport synthétise les interactions médicamenteuses potentielles, le lien avec des allergies connues chez le patient ou encore les possibles surdosages.

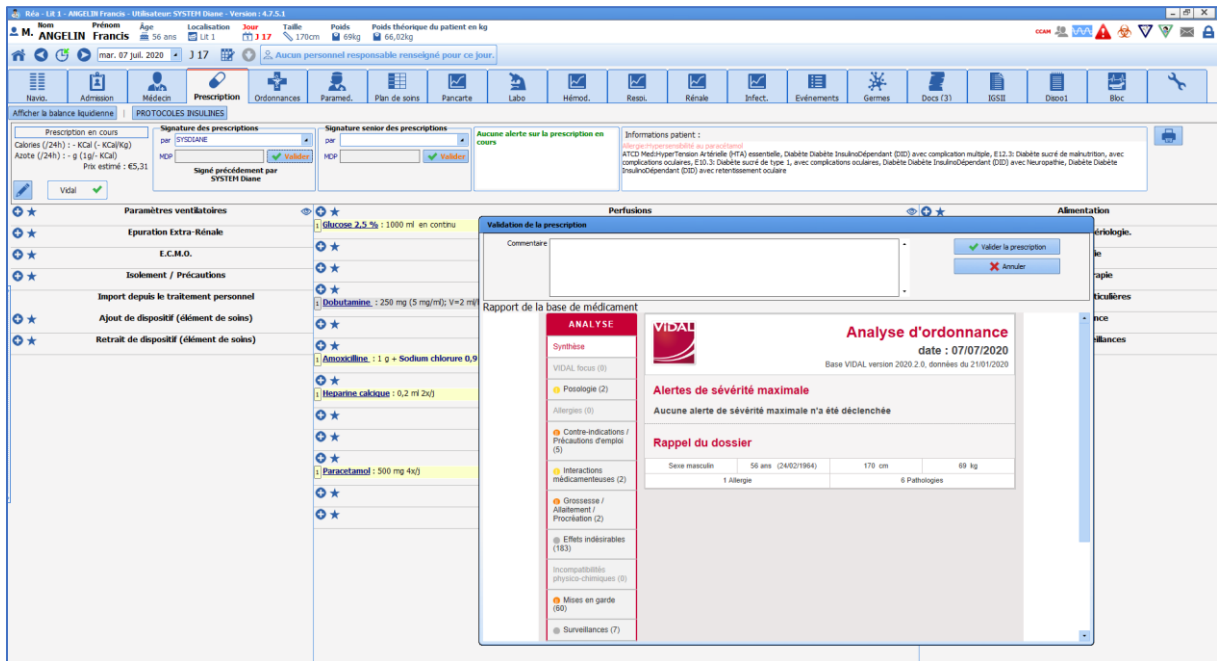


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



**REMARQUE :** ces alertes permettent d'opérer un contrôle sur la prescription mais il n'existe aucun blocage. La prescription sera toujours possible.

## 2.4 L'impression centralisée

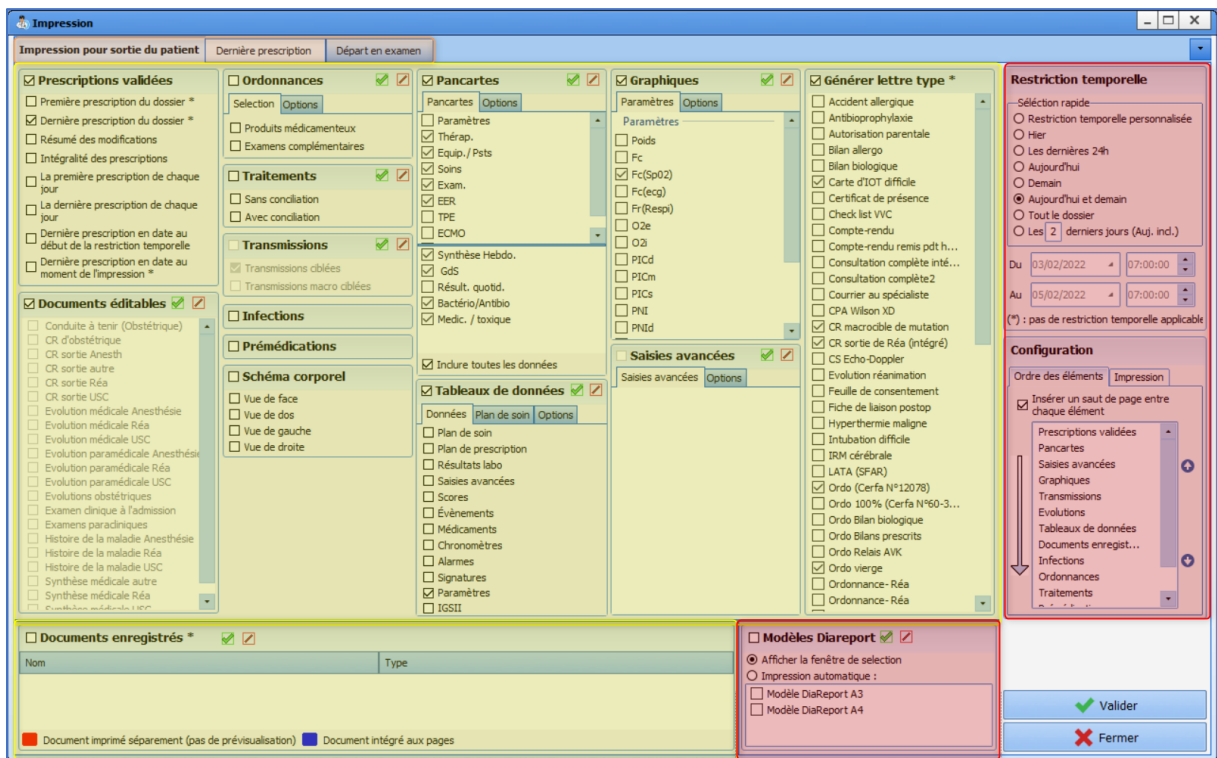Cette page rassemble tous les éléments imprimables du dossier.



Cet outil est organisé en zones illustrées de couleurs ci-dessus.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### \* En Jaune :

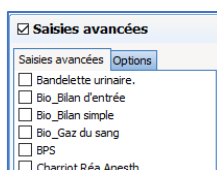La zone Jaune est découpée en plusieurs sections : - **Prescriptions validées, Ordonnances, Traitements, Évolutions, Transmissions, Pancartes, Infections, Prémédications, Schéma corporel, Graphiques, Saisies avancées, Tableaux de données, Générer lettre type, Documents éditables** -

Chacune de ces sections possède une série de case à cocher



Une *case à cocher* se situe à gauche du titre de la section et permet de sélectionner l'ensemble des sous parties de la section.

Il est possible de sélectionner indépendamment chaque item que l'on souhaite imprimer en cliquant sur la case à cocher correspondante.

Certaines cases ont deux onglets, d'autres n'en ont pas et une en possèdent trois.

\* Pancartes (2 onglets) : l'option non modifiable indique la durée d'affichage.

\* Graphiques (2 onglets) : permet de paramétrer la discontinuité des courbes, l'échelle d'impression, la hauteur des graphiques et de différencier les constantes remontées des matériels biomédicaux et des données manuelles.

\* Saisies avancées (2 onglets) : permet d'imprimer l'ensemble des saisies d'une même saisie avancée ou uniquement la dernière saisie. (Exemple : si un score a été rempli plusieurs fois, il est possible d'imprimer l'ensemble des saisies de ce score ou uniquement la dernière).


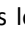
\* Tableaux de données (3 onglets) : dans l'onglet **Plan de soins**, il est possible de filtrer selon l'état du soin (A faire, réalisé, ...), classer les entrées soit par catégorie soit chronologiquement. L'onglet **Autres options** permet de classer les entrées, autre que plan de soins, soit par catégorie soit chronologiquement et de définir quelles valeurs de constantes physiologiques à afficher. L'astérisque indique que les restrictions temporelles vues dans la zone rouge ne s'appliquent pas.

### \* En Rouge :

Cette zone regroupe trois cases : les **restrictions temporelles**, la **configuration** et le **modèle DiaReport**

\* La restriction temporelle : permet de définir la date et l'heure du début et de fin de prise en charge des données. L'heure proposée par défaut est l'heure de début de journée de Réanimation.

\* Configuration : cette case est organisée en deux onglets **Ordre des éléments** et **Impression**

- **Ordre des éléments** : permet d'organiser la priorité d'impression des catégories d'outils entre eux. Cliquez sur une ligne, et cliquez sur la flèche  pour que la catégorie d'outil soit imprimée avant et sur  pour que la catégorie d'outil soit imprimée plus loin dans la liasse. Si vous le souhaitez, vous pouvez insérer un saut de page entre chaque catégorie d'outil différente.

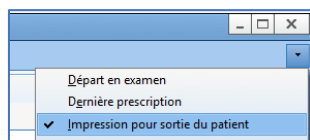
- **Impression** : permet d'agir finement sur l'impression ou l'export du compte-rendu. Dans le sous-onglet **Page**, il est possible de gérer les marges, l'orientation et la taille du papier imprimé ainsi que la police de caractère. Le sous-onglet **Avancé**, permet de choisir une imprimante précise, de paramétrer l'export du document.

### \* En Orange :

Cette zone regroupe des onglets préconfigurés. Chacun de ces onglets est lié à un contexte. Dans notre exemple, trois onglets ont été configurés : **Impression pour sortie du patient**, **Dernière prescription** et **Départ en examen**. Ces trois onglets sont identiques en contenu mise à part les cases cochées.

A droite de la barre contenant les onglets, une case avec une flèche pointant vers le bas : elle permet d'avoir la liste complète des onglets.






## 2.4.1 La visualisation et l'impression d'une intervention

### 2.4.1.1 L'impression du per opératoire et du post opératoire

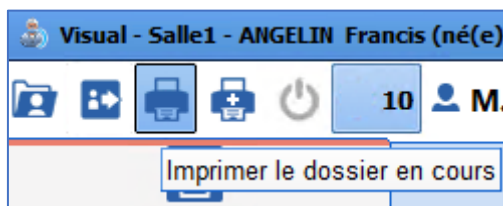
Après avoir cliqué sur le bouton **Imprimer le dossier en cours**, une fenêtre **DIANE Impression** s'ouvre afin d'imprimer par défaut ou de configurer l'impression désirée.



Cette action est réalisable pendant l'intervention, à la fin de celle-ci, au moment de la fermeture du dossier ou en cours de visualisation d'un dossier antérieur.

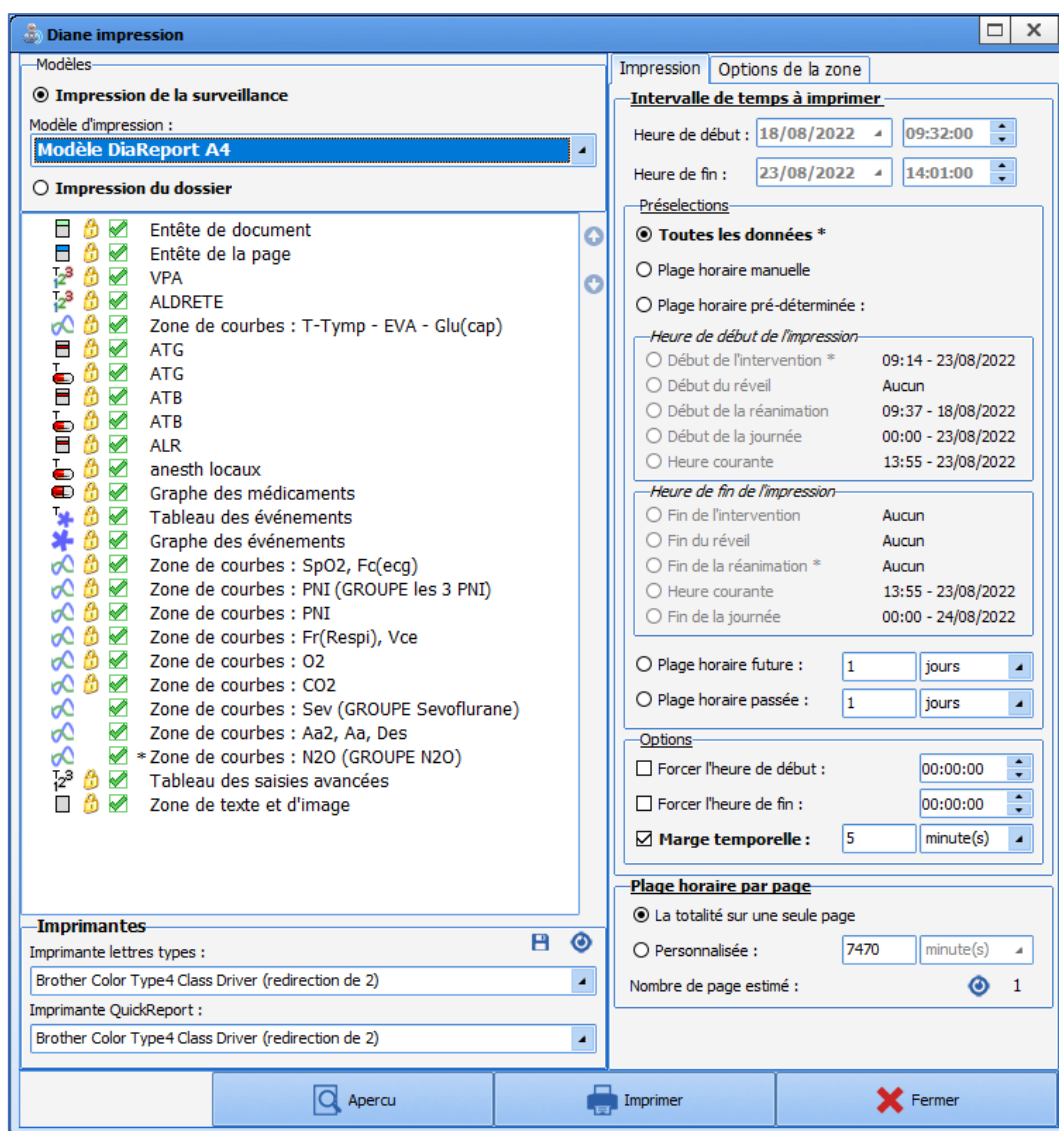La disposition initiale est définie par l'administrateur toutefois certaines modifications peuvent être réalisées par l'utilisateur.





En haut à gauche, il est possible de choisir si l'utilisateur souhaite imprimer la surveillance (au format A3 ou A4) ou le dossier au complet.


L'impression de la surveillance permet d'afficher les données suivantes :

- Entête de la page
- Graphe des médicaments
- Zone verticale
- Tableau des événements : Affiche les événements saisis dans le dossier ainsi que le commentaire associé.
- Graphes des événements
- Zone de courbes
- Tableau des saisies avancées
- Zone de texte et d'image

Chaque zone peut être affichée ou non dans l'impression en cochant / décochant la case à cocher qui les précède. Si un cadenas est présent devant la case à cocher, cette donnée est obligatoirement imprimée, la case à cocher est en lecture seule.





L'ordre d'affichage des éléments peut être modifié à l'aide des flèches . Elles sont grisées si aucune donnée n'est sélectionnée.

La partie de droite présente dans le sous onglet **Impression** permet de personnaliser la plage horaire d'impression et surtout de déterminer la durée qui figure par page. Par défaut, toute l'intervention se trouve sur une page.

Il est aussi possible par la partie de droite de personnaliser la plage horaire d'impression et surtout de déterminer la durée qui figure par page. Par défaut, toute l'intervention se trouve sur une page.

L'imprimante sélectionnée en bas à gauche de la fenêtre est celle définie par défaut pour l'ordinateur. Il est possible, si d'autres imprimantes sont disponibles sur le réseau, d'envoyer, exceptionnellement, le document vers celles-ci par le menu déroulant proposé.

**Consultation complète intégrée**

**Veillez enregistrer les modifications apportées au document avant de valider cette fenêtre**

**Sauvegarder le document généré et ses modifications**

Fichier :


**Exporter le document**

**Envoyer le document par email** à : Adresse email du destinataire

Envoyer au format texte

Document en pièce jointe

Sujet :

 **Fermer**       **Annuler**

Lors du déclenchement final d'une impression, la fenêtre ci-contre s'ouvre. Elle permet d'associer à l'impression une sauvegarde, un export voire un envoi par mail.

### 2.4.1.2 Les boutons

Le bouton **Imprimer** permet de lancer l'impression sans passer par l'aperçu.

Le bouton **Aperçu** permet de visualiser l'impression par le biais de la fenêtre **Prévisualisation**.

La case à cocher **Demander la conservation des documents générés** permet de valider de façon systématique si l'on souhaite conserver ou non le document édité dans l'onglet **Documents** de la consultation d'anesthésie.

Le bouton **Fermer** permet d'Annuler la demande d'impression en cours.

### 2.4.1.3 La visualisation d'une intervention a posteriori

**DIANE** permet de visualiser une intervention déjà effectuée, avec affichage de l'ensemble des paramètres physiologiques récupérés à partir des moniteurs reliés au patient, les données textuelles (patient, intervention, préopératoire, post opératoire), ainsi que toutes les saisies manuelles effectuées pendant l'intervention (médicaments, événements).

Cliquez sur le bouton **Ouvrir Dossier Patient** de l'application per opératoire et/ou post opératoire. Sélectionnez le dossier Patient ainsi que l'intervention voulue puis choisir **Visualiser le dossier**



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)

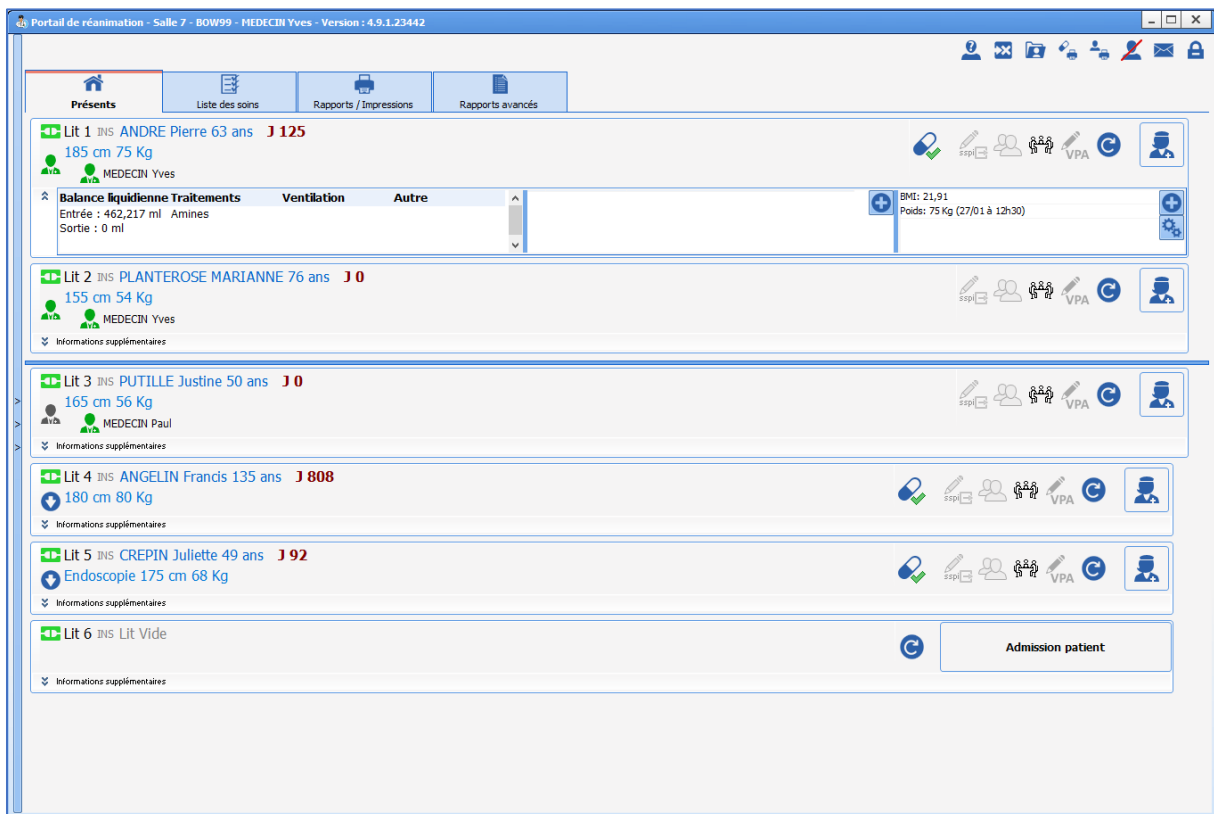


DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**REMARQUE :** Vous pouvez visualiser l'ensemble des rapports d'anesthésie à partir de n'importe quel poste relié au serveur.

## 2.5 Le cockpit

Le cockpit est une vision synthétique de l'ensemble des patients présents dans le service. Il permet d'une part un accès rapide aux dossiers des patients et d'autre part, il offre un visual sur les informations médicales essentielles et facilite ainsi l'accès et l'échange d'informations entre les soignants.



1 – Anonymisation des patients des postes distants.

2 - Gérer les indisponibilités.

3 - Visualiser/Compléter un dossier.

4 – Imprimer :

- la liste des prélèvements à effectuer.

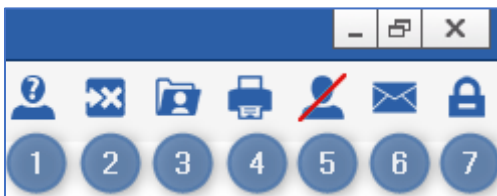
- les prescriptions groupées.

- la liste des patients présents.

5 - Liste des refus.

6 - Ouvrir la messagerie **DIANE**.

7 - Déconnecter l'utilisateur courant (verrouille la station **DIANE** et ferme les dossiers ouverts à distance).



Dans la partie droite du bandeau, l'utilisateur a également accès à différentes fonctionnalités comme « Visualiser/Compléter un dossier », « Changer d'utilisateur », etc.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)





DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

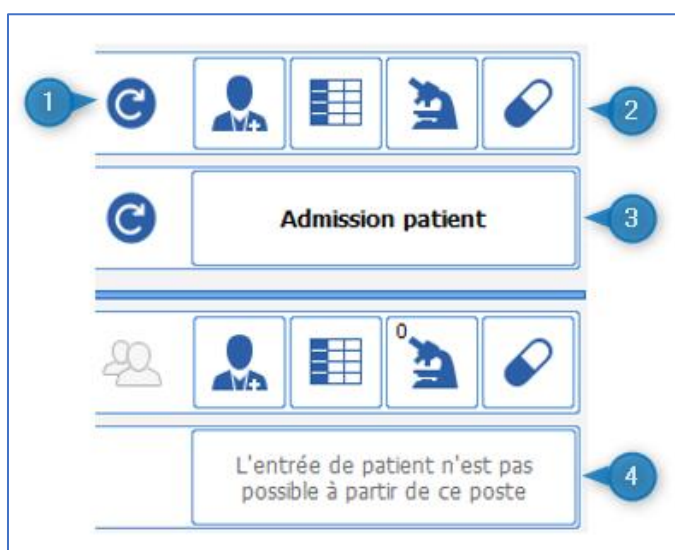


**REMARQUE :** **DIANE** permet un accès à l'ensemble des dossiers du service depuis n'importe quel poste de votre service.

Les différentes lignes représentent les patients avec depuis la gauche jusqu'à la droite, le numéro de son lit, son nom, le nombre de jours d'hospitalisation, la présence potentielle d'une infection.

Les boutons situés à droite permettent un accès aux différents onglets du dossier.

**REMARQUE :** La pastille verte  à côté du lit signifie que le dossier patient est accessible à distance depuis un poste miroir. Si la pastille noire  est présente, cela signifie que l'accès à distance est impossible (cela peut être dû à un problème de matériel ou de réseau).



1 – Relance les applications **DIANE** sur le poste.

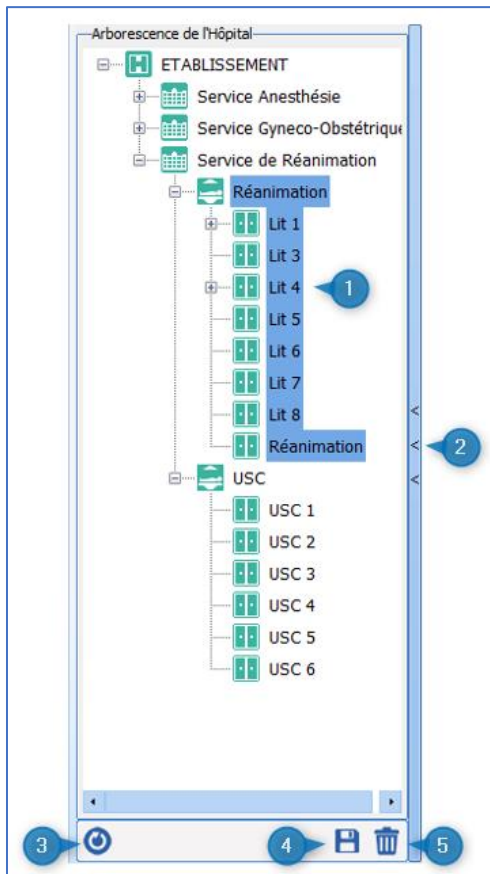
2 – Permet d'accéder directement aux différents onglets du dossier patient.

3 – Permet d'admettre un nouveau patient (ouvre la fenêtre de sélection patient).

4 – L'admission d'un patient n'est possible que sur le poste Maître.

Dans la partie gauche de l'écran, cliquer sur la barre verticale où sont présents trois chevrons, donne accès à l'arborescence de l'hôpital. Par défaut, l'application affiche les patients du service. Cependant, il est possible de modifier cet affichage en cliquant sur les autres éléments de l'arborescence.






1 – Les éléments de la zone surlignée en bleu sont ceux affichés sur le portail.

2 – Un clic sur la barre bleue avec les 3 chevrons ouvre (ou ferme) l’arborescence de l’Hôpital.

3 – Recharge l’emplacement par défaut.

4 – Sauvegarde comme emplacement par défaut.

5 – Supprime l’emplacement par défaut.

Depuis la partie centrale du cockpit, il est possible de « Prendre la responsabilité pour la plage actuelle » pour un(e) patient(e) en cliquant sur ce bouton . Cela signifie que l'utilisateur indique qu'il va s'occuper du patient pour la plage horaire définie (uniquement valable pour les profils **Médecin**, **Infirmier** et **Aide-soignant**).

1 – Transmissions ciblées des dernières 24 heures.

2 – Vous êtes responsable de ce dossier.

3 – Une autre personne est responsable.

4 – Prendre la responsabilité pour la plage actuelle.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Quand une responsabilité est prise l'icône change et devient .

## 2.5.1 La liste des patient présents

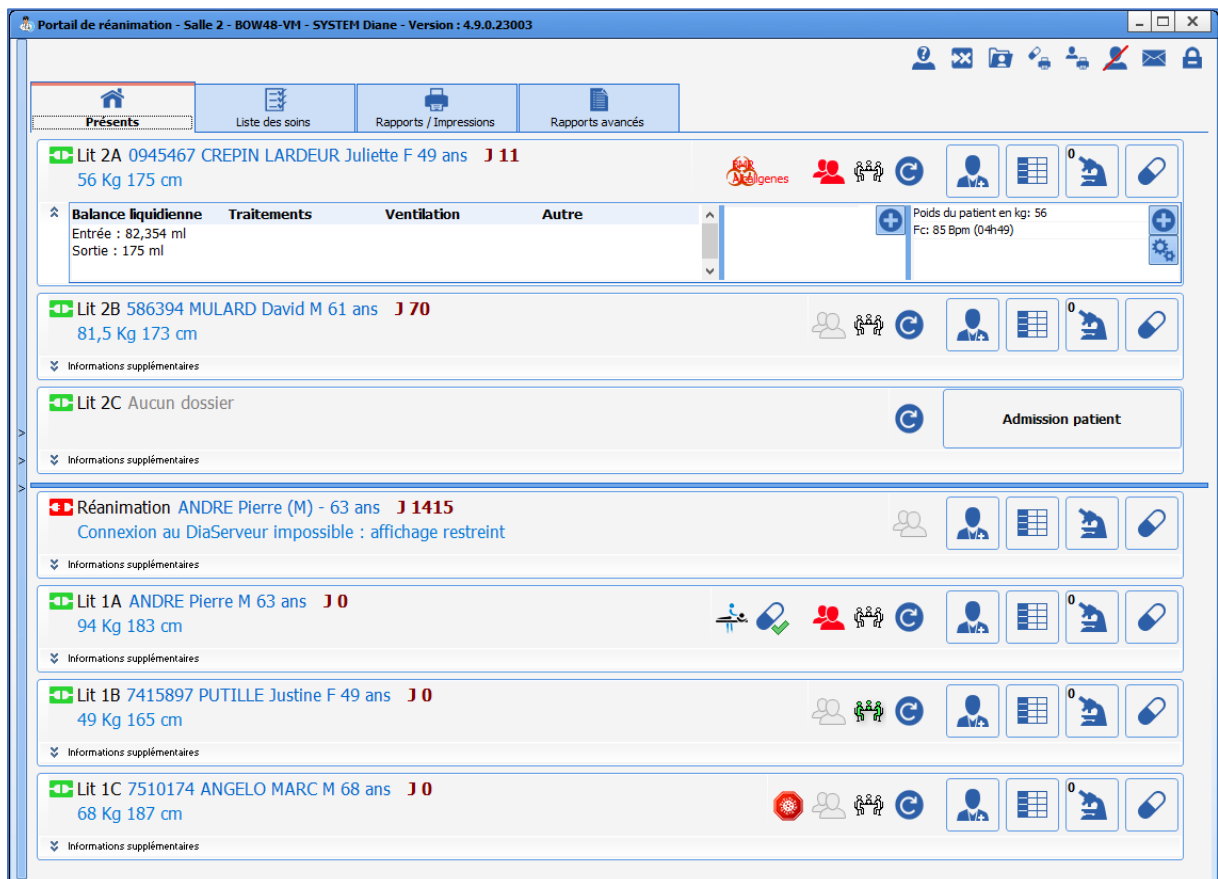Cette page permet d'avoir une visualisation globale de votre service. Les différents boutons donnent accès aux dossiers des patients.

De n'importe quel poste du service, il est possible d'accéder en lecture et en écriture à tous les dossiers des patients.



Balance liquidienne	Traitements	Ventilation	Autre
Entrée : 82,354 ml			
Sortie : 175 ml			

**REMARQUE :** L'icône verte à côté du lit signifie que vous avez accès au dossier du patient à distance. Si cette icône est rouge, cela veut dire que vous n'avez pas accès au dossier (cela peut être dû à un problème matériel ou réseau) ; si elle est jaune, c'est qu'il y a une tentative de connexion au lit et enfin une icône noire signifie que la connexion à distance n'est pas activée.

### Iconographie du Cockpit :



Cette icône permet de savoir si le patient a une infection ou non. Au survol à la souris, l'infection est indiquée. Un clic sur cette icône vous redirige sur l'onglet [Germes](#).



Cette icône permet de savoir si le patient a une infection coronavirus.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Page : 70 / 386

	Cette icône indique que le patient a de la kinésithérapie prévue dans la journée.
	Cette icône indique que la prescription est en cours de modification.
	Cette icône indique que la prescription en cours est signée : qu'il n'y a pas de modification de prescription en cours.
	Cette icône indique qu'une prescription a été signée récemment (durée d'affichage paramétrable dans la configuration de l'onglet <b>Plan de soins</b> ).
	Cette icône indique qu'une administration à la demande d'un médecin a été faite dans le plan de soin mais reste à valider dans l'onglet <b>Prescription</b> .
	L'icône sous le nom du patient indique que la responsabilité du dossier est à prendre. Pour prendre la responsabilité du dossier, il faut cliquer sur cette icône. Deux personnes aux rôles distincts peuvent annoncer la prise de responsabilité sur le patient : les réanimateurs et les IDE.
	L'icône sous le nom du patient indique que la responsabilité du dossier vous appartient.
	L'icône sous le nom du patient indique que la responsabilité du dossier appartient à quelqu'un d'autre. Vous avez le nom de la personne responsable en survolant l'icône.
	L'icône représentant un poste de radio vert est cliquable. Il indique qu'une transmission ciblée ou une transmission macro ciblée est en cours de validité. Lorsque vous cliquez sur l'icône, vous accédez à l'onglet concernant la transmission.
	<p>Ces trois icônes concernent les actions du pharmacien.</p> <p> Le pharmacien accepte sans réserve la prescription : il n'émet ni réserves ou alertes.</p> <p> Le pharmacien accepte une prescription avec des réserves. Pour voir quelles réserves il a émis, visitez l'onglet <b>Prescription</b> : Dès l'instant où une ligne de prescription est associée à une réserve, l'icône préalablement verte passe à l'orange.</p> <p> Le pharmacien alerte d'une incohérence ou d'un danger. Pour voir quelle alerte il a émis, visitez l'onglet <b>Prescription</b> : Dès l'instant où une ligne de prescription est associée à une alerte, l'icône préalablement verte ou orange passe au rouge.</p>
	Lorsqu'un message est noté, l'icône se met automatiquement en rouge et y reste pendant 24h (durée paramétrable).
	Icône des transmissions médicales.
	Icône de la VPA (visite préanesthésique)



Icône de la signature d'autorisation de sortie de SSPI. L'icône s'affiche en bleu avec au survol les informations concernant la personne qui l'a signée et la date de la signature.



Le clic sur ce bouton permet de se rendre dans le dossier médical du patient. (bouton paramétrable)



Bouton d'accès au plan de soins. (bouton paramétrable)



Bouton d'accès à l'onglet **Labo** (paramètres biologiques). (bouton paramétrable)



Bouton d'accès à l'onglet **Prescription**. (bouton paramétrable)

Il se peut que certains boutons soient grisés. Si c'est le cas, c'est que l'utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires à leur utilisation ou qu'ils ne peuvent pas être utilisés (en mode déconnecté par exemple).

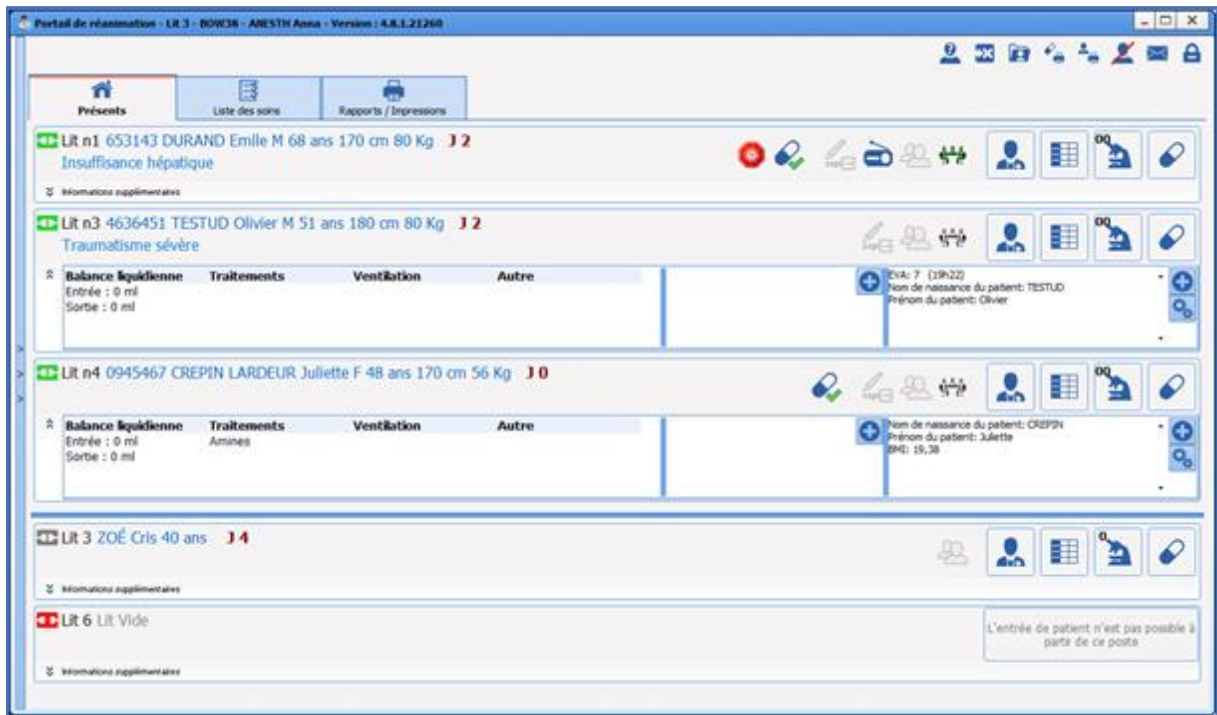
Pour prendre la main sur un patient à distance, il suffit de cliquer sur le nom du patient, le logiciel propose un accès en lecture ou un accès en écriture.

Les flèches à gauche de la liste des patients présents permettent de visualiser tout le service et de prendre la main sur le lit souhaité.


## 2.5.2 Information sur les patients

Le portail de réanimation (ou Liste des patients) permet de visualiser les lits sous le poste maître ainsi que les postes distants.






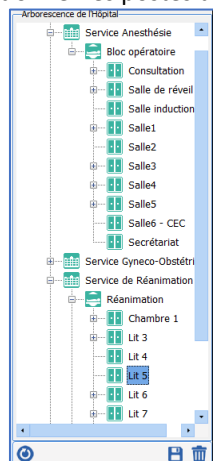La zone rétractable à gauche permet de sélectionner les postes distants à afficher.



Pour chaque patient, une zone rétractable **Informations supplémentaires** permet d'afficher des données. Le

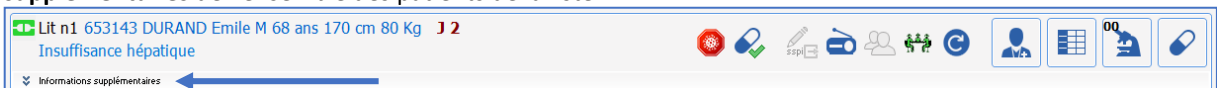double-clic sur le bouton de l'onglet **Présents** permet de déployer la zone **Informations supplémentaires** de l'ensemble des patients de la liste.



Ces données sont réparties en trois zones :

- A gauche, des informations relatives aux **données du dossier** : Mode ventilatoire, Balance liquidienne et Traitements.

Pour la balance liquidienne, 3 plages temporelles sont disponibles :

- o X dernières heures (X paramétrable)
- o Journée de réanimation (en cours)
- o Journée de réanimation précédente

Les traitements affichés dans cette zone peuvent être :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- Les analgésiques
- Les sédatifs
- Les amines
- Les curares

La colonne **Autre** affiche les libellés des saisies avancées prescrites pour lesquelles l’affichage sur la liste des patients a été configuré.

- Au centre, des données saisissables.

La zone 2 permet au clic sur le bouton de saisir les soins à prévoir à travers la fenêtre suivante :

La fenêtre 'Ajout d'une donnée saisissable' contient les champs suivants :

- Libellé affiché sur le portail : [zone de saisie]
- Date / Heure de planification : [format JJ/MM/AA HH:MM]
- Affichage d'une alerte [zone de saisie] minute(s) avant la planification
- Boutons : Enregistrer (avec coche verte) et Annuler (avec croix rouge)

**Libellé affiché sur le portail** est une zone de saisie de type texte qui permet de saisir l’information à afficher sur le portail. Sa saisie est obligatoire et dégrise automatiquement le bouton **Enregistrer**.

La zone de saisie **Date/heure de planification** permet de saisir la date/heure de planification de la donnée. Cette information est optionnelle et est affichée sur le portail :

12/04 12:00 Scanner (dans 12h 55min)

Si l’information n’est pas saisie, seul le libellé sera affiché sur le portail :

A jeun

**Affichage d’une alerte X minutes avant la planification** permet de saisir une durée en minutes à partir de laquelle une alerte s’affiche sur le portail :

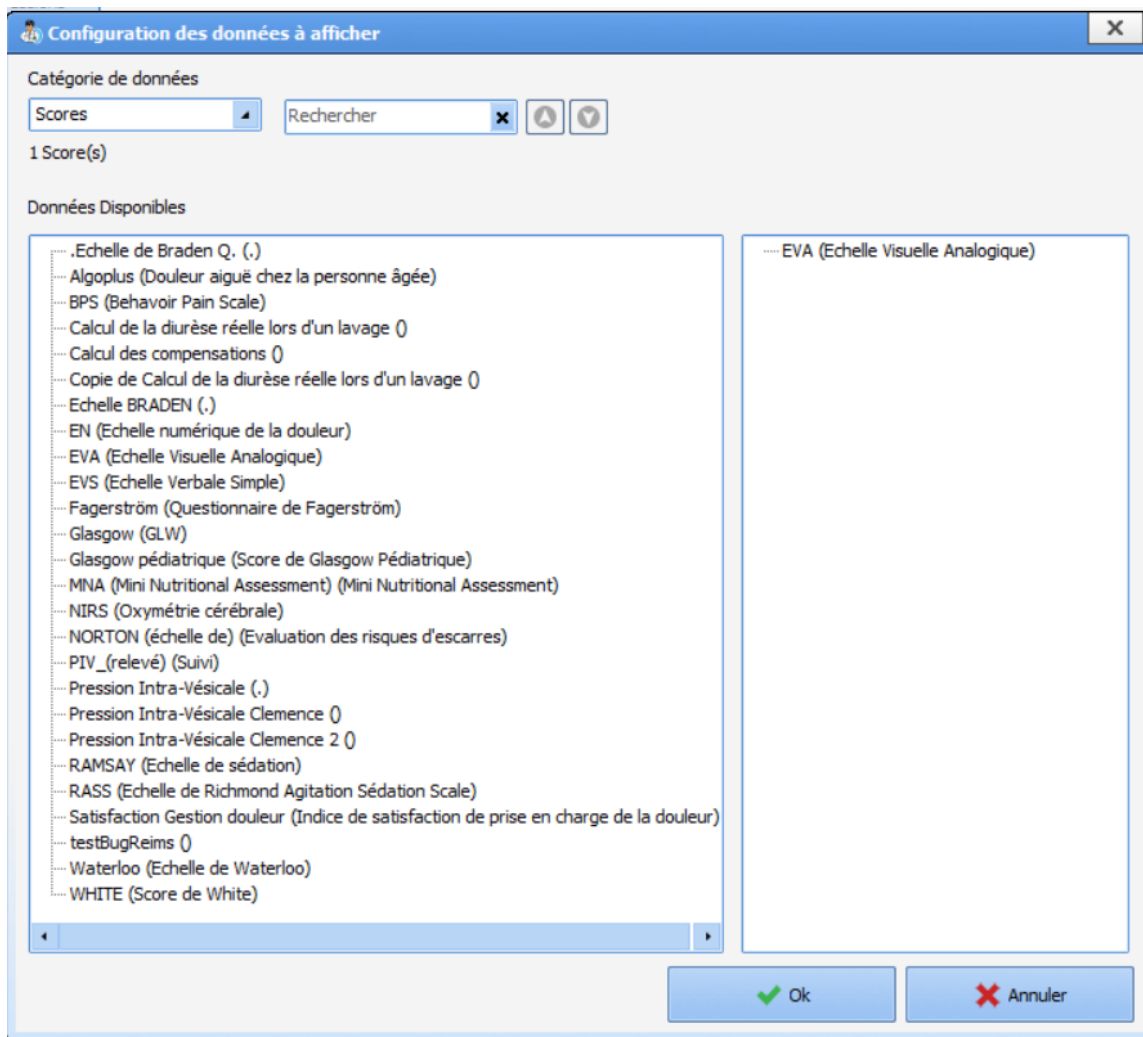
11/04 23:06 Dialyse

Le clic sur chaque élément propose à l’utilisateur de supprimer (=réaliser) l’élément , de l’annuler ou de le replanifier :

La liste affiche : 12/04 12:00 Scanner (dans 12h 51min), A jeun, 11/04 23:06 Dialyse (dans 12h 55min). Le clic sur l'élément avec alerte ouvre un menu contextuel avec les options : Supprimer, Replanifier, Annuler.

Si des favoris d’affichage ont été enregistrés au niveau de la configuration du portail, le clic sur le bouton affiche la liste des favoris. La sélection d’un favori initialise la zone avec les données configurées dans le favori si elles ont été saisies dans le dossier.

Le clic sur le bouton permet d’ajouter et/ou de supprimer les données affichées via la fenêtre **Configuration des données à afficher** :



### 2.5.3 Liste des soins

La liste des soins est accessible depuis l'onglet **Liste des soins** du module **Liste des patients** (ou **Cockpit**). Elle permet aux soignants de visualiser l'ensemble des soins à prodiguer aux patients sélectionnés sur une plage horaire donnée.



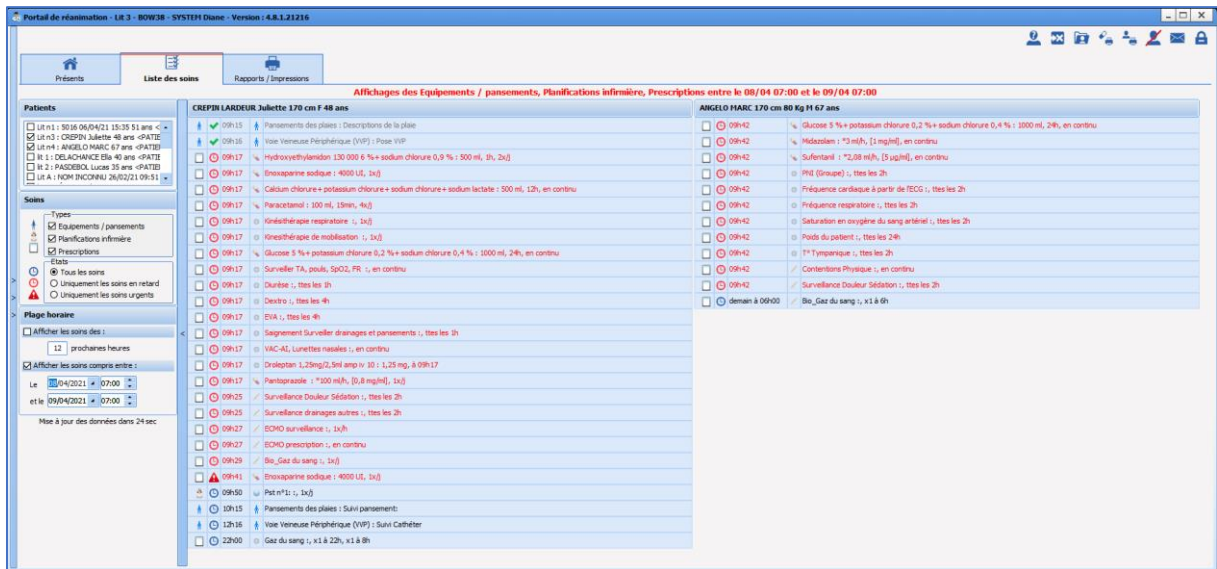
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28





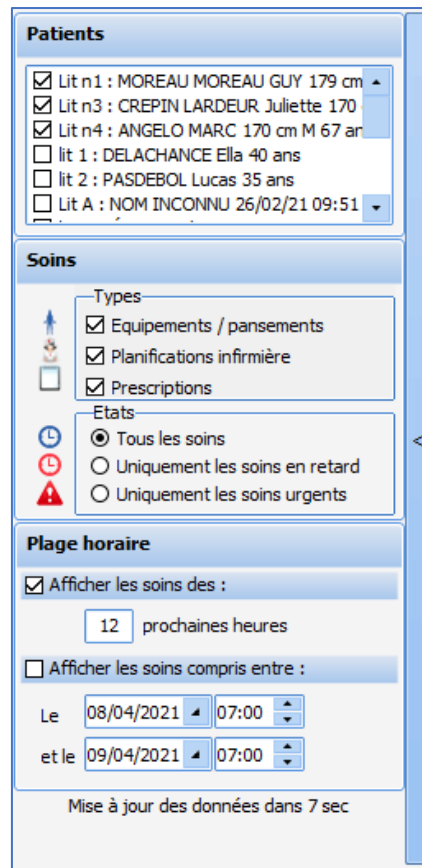Un clic sur l'icône du type de soin d'un élément de cette liste permet d'atteindre directement le soin concerné sur le plan de soins du patient. Les soins sont affichés sur le portail, en revanche leur validation ne peut s'effectuer que sur le dossier du patient.



Cette fenêtre de sélection rétractable permet de filtrer :

- Les patients (par défaut, les patients à la charge du soignant connecté sont affichés)
- Les types de soins à afficher :
  - o Equipements/pansements (dispositifs médicaux du schéma corporel)
  - o Planifications infirmière
  - o Prescriptions
- L'état des soins :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)






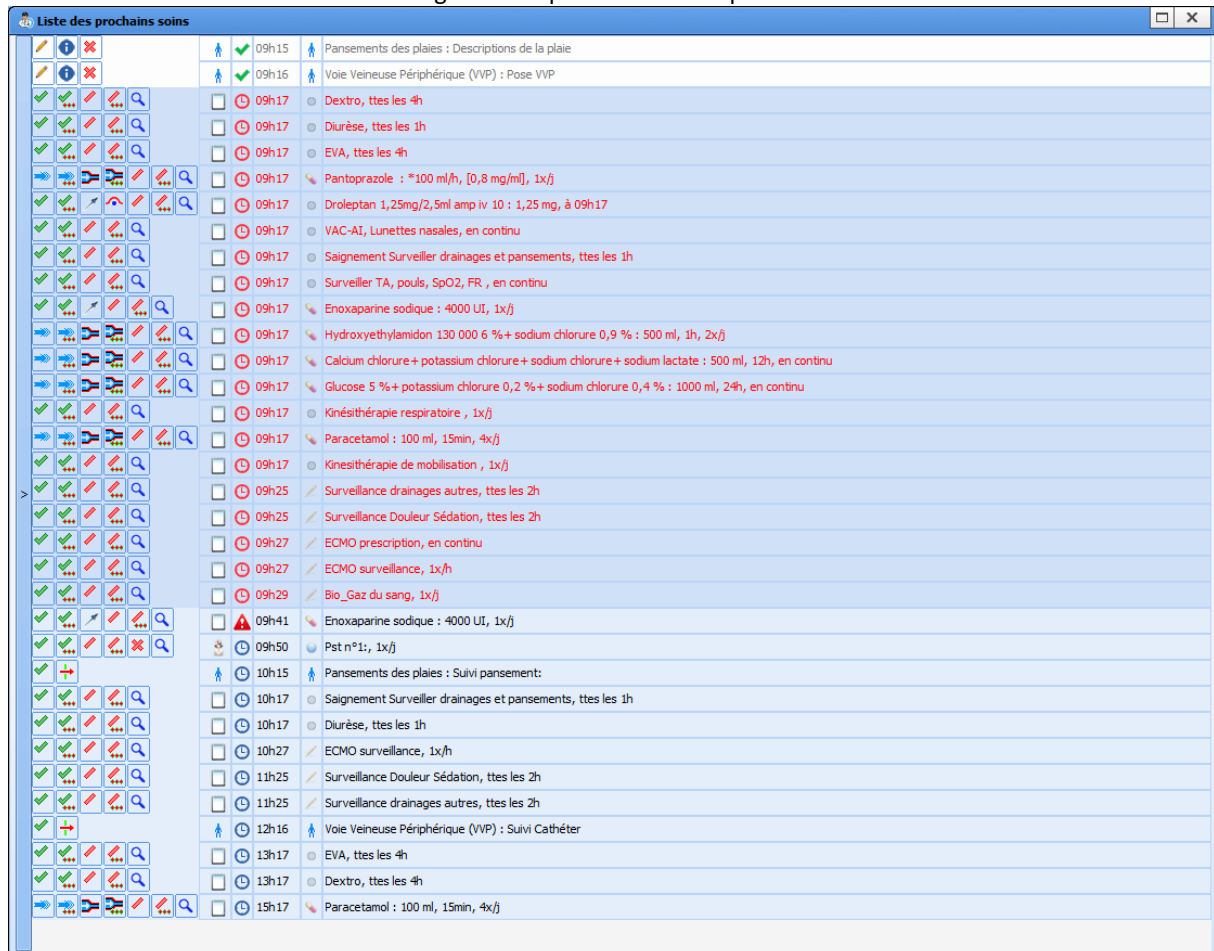
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



- Tous les soins
- Uniquement les soins en retard
- Uniquement les soins urgents
- La plage horaire, 2 solutions sont possibles :
  - Afficher les soins des X prochaines heures
  - Afficher les soins compris entre 2 dates/heures

Quelle que soit la plage horaire sélectionnée, les soins “en retard” sont systématiquement affichés (en rouge).

Dans le dossier du patient, la liste des soins est disponible via un clic sur le bouton . Le clic sur l'un des boutons suivants   affiche l'onglet correspondant dans le plan de soins.




A partir de cette fenêtre, l'utilisateur peut réaliser, ne pas réaliser, démarrer, préciser la dilution, afficher la prescription, ... en cliquant sur les icônes correspondantes. Les icônes varient en fonction du type de prescription de la même manière que dans le plan de soin.

Seule la première validation est possible depuis la liste des soins. Les actions sur un traitement déjà débuté ne peuvent se faire que depuis le plan de soin (modification de débit, etc ...).

Après validation, la ligne blanchit. A ce stade, elle pourra être annulée en cas d'erreur. Le soin validé disparaîtra de la liste de soins après un délai pré paramétré (5 minutes par défaut).

## 2.5.4 Anonymisation des lits

Le bouton  permet d'anonymiser l'identité des patients visibles sur les postes distants.

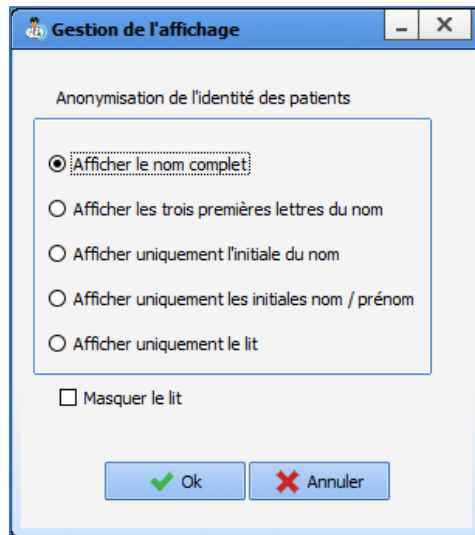


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



Dans cette fenêtre, se trouvent cinq boutons :

- **Afficher le nom complet** : option sélectionnée par défaut

Lit 1 CREPIN Juliette J 33

- **Afficher les trois premières lettres du nom** :

Lit 1 CRE... Juliette J 33

L'ajout des « ... » à la suite des trois premières lettres du nom du patient permet de visualiser que le nom n'est pas affiché entièrement

- **Afficher uniquement l'initiale du nom** :

Lit 1 C. Juliette J 33

- **Afficher uniquement les initiales nom / prénom**

Lit 1 C. J J 33

- **Afficher uniquement le lit** : Si cette option est sélectionnée, la case à cocher **Masquer le lit** est grisée, non cochée et non modifiable.

Lit 1 J 33

**Attention** : L'anonymisation ne touche pas le ou les patients du poste maitre.

## 2.5.5 La Gestion des refus

Le bouton (gestion des refus en haut à droite du portail patient) ouvre la fenêtre ci-dessous, vous avez alors la liste de tous les refus de prise en charge dans votre service, la date et le motif. Vous pouvez ajouter un refus en cliquant sur le bouton **Saisir un nouveau refus ...** et choisir le motif.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Liste des refus**

Afficher les refus du service  entre le  et le

Refusé le/par	Service concerné	Diagnostic	Motif	Détails du refus
Le 23/03/2020 par Diane SYSTEM (poste BOW36)	Service de Réanimation	Patient avec des douleurs au bras gauche	Pas de place	Pas important

+ Saisir un nouveau refus...

**Saisir un nouveau refus :**

**Nouveau refus**

Date du refus


Service concerné


Diagnostic

Motif du refus

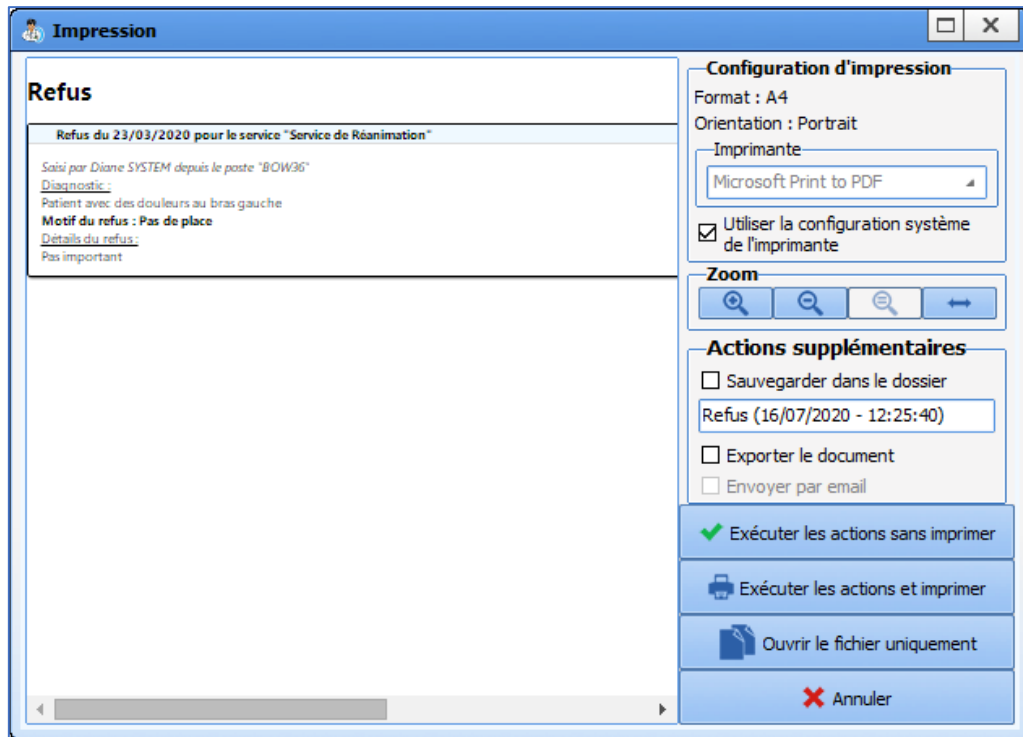
Détails du refus

**Supprimer** : pour supprimer une ligne de motif de refus, cliquez sur le bouton droit de votre souris et choisissez **Supprimer**. Il n'est pas possible de modifier un motif de refus. Celui-ci doit être supprimé puis un nouveau motif devra être recréé.

**Actualiser** : pour actualiser la liste des refus, cliquez sur . Ce bouton est utile pour être certain d'avoir toutes les informations. Ainsi, chaque poste a la capacité de créer un motif de refus.


**Imprimer** : pour imprimer la liste des refus, cliquez sur , vous déclenchez l'ouverture de la fenêtre suivante :






## 2.5.6 L'indisponibilité de lits

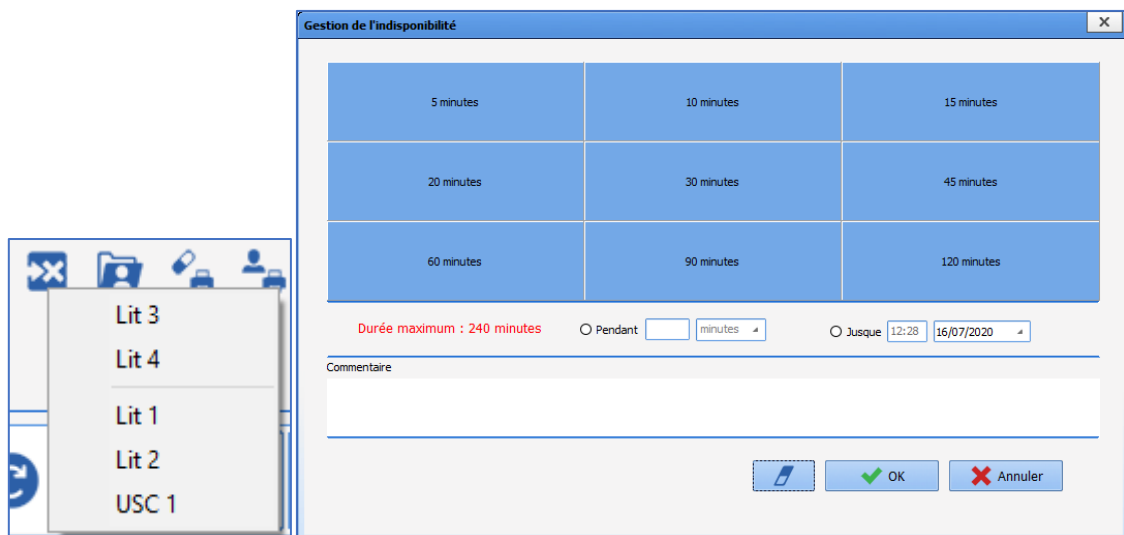En appuyant sur le bouton d'indisponibilité de  lits , un menu apparaît et donne la possibilité de rendre momentanément un lit indisponible ce qui permet par exemple de gérer le délai de réfection de la chambre entre 2 patients.



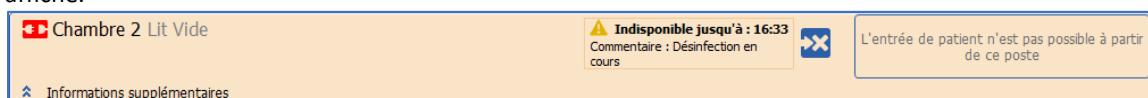Dans le cockpit, l'indisponibilité du lit est facilement identifiable. Si un commentaire a été saisi, il est affiché.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 2.5.7 Le rapport d'impression

Cette page permet d'avoir la visualisation et l'impression de rapports concernant les informations des dossiers patient.

The screenshot shows the 'Portail de réanimation' interface. The main window is titled 'Portail de réanimation - USC 4 - BOW48 - ANESTH Luc - Version : 4.7.5.20115'. The 'Rapports / Impressions' tab is active. On the left, there is a 'Selection' panel with various radio button options for filtering reports. Below it are sections for 'Restriction temporelle' (temporal restriction) and 'Restriction géographique' (geographical restriction). At the bottom left, there is an 'Actualisation automatique' (automatic update) section. The main content area displays patient information for 'Monsieur ANGELO Marc' (born 30/05/1994, 26 years old) and 'Madame PUTILLE Justine' (born 12/11/1982, 37 years old). For each patient, it shows the start of resuscitation, location, and a list of signed prescriptions with their details, including drug names, dosages, frequencies, and administration routes.

On peut sélectionner le type d'information que l'on veut visualiser dans la colonne de gauche.

- Dernière(s) prescription(s) validée(s)...
- Dernière(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Première(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Toutes les prescriptions validées...
- Les prescriptions médicamenteuses...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (liste chronologique)...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (tableau chronologique par patient)...
- Les transmissions...
- Les synthèses...
- Les évolutions...

**1 : Les dernière(s) prescription(s) validée(s) ... (par défaut)** - Cette option permet d'afficher la dernière prescription en date de chaque patient concerné par les autres filtres.

**2 : Les dernière(s) prescription(s) validée(s) par jour** - Cette option permet d'afficher la dernière prescription de chaque patient.

**3 : Les première(s) prescription(s) validée(s) par jour** - Cette option permet d'afficher la première prescription de chaque patient.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**4 : Toutes les prescriptions validée(s)** - Cette option permet d'afficher toutes les prescriptions sauf celles en cours de rédaction.

**5 : Les éléments à réaliser du plan de soins (liste chronologique)** - Cette option permet d'afficher les éléments du plan de soin qui n'ont pas encore été réalisés (affichage sous forme de liste).

**6 : Les éléments à réaliser du plan de soins (tableau chronologique par patient)** - Cette option permet d'afficher les éléments du plan de soins qui n'ont pas encore été réalisés (affichage sous forme de tableau).

**7 : Les transmissions** - Cette option permet d'afficher les transmissions entre personnels paramédicaux (IDE, Kinés, Diététiciennes ...).

**8 : Les synthèses** - Cette option permet d'afficher les synthèses des patients.

**9 : Les évolutions** - Cette option permet d'afficher les évolutions des patients.

Il est également possible d'afficher les données précédentes pour tout le service, pour un patient, pour une unité de réanimation ou pour les patients dont on a pris la charge.

...d'un service  
 ...d'un patient  
 ...d'une réanimation  
 ...des patients en charge


## 2.5.8 Transmissions médicales

Il est possible de saisir les transmissions médicales sur le portail en cliquant sur le bouton  :

Transmissions médicales

Lit n3 - 4636451 TESTUD Olivier M 51 ans 180 cm 80 Kg

Ok Annuler

Une fois que des transmissions ont été saisies, l'icône devient verte . Le survol à la souris indique qui a effectué la saisie et à quelle date.

Transmissions médicales  
Par Anna ANESTH  
Le 09/04/2021 à 14:28:47

## 2.5.9 Statut de l'identité INS

Le statut de l'identité du patient est identifiable sur le portail via le texte **INS** de couleur située après le numéro de lit :

- INS gris = Identité inconnue
- INS rouge = Identité provisoire
- INS bleu = Identité récupérée
- INS jaune = Identité validée
- INS vert = Identité qualifiée

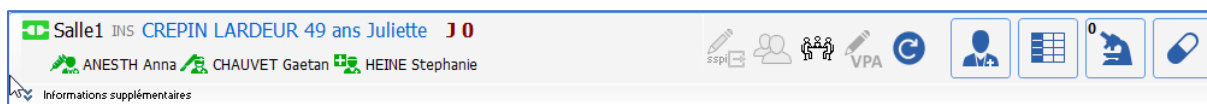
Le survol du **INS** affiche le statut de l'identité.

## 2.5.10 Affichage du personnel

### 2.5.10.1 Anesthésie

En anesthésie (Bloc ou Réveil), le cockpit affiche le personnel présent suivant :

- Anesthésiste
- Chirurgien
- Infirmier anesthésiste




L'anesthésiste responsable est représenté par une icône bleue

Si plusieurs personnes de ces catégories sont présentes, seule la première personne ayant saisi sa présence est affichée.

### 2.5.10.2 Réanimation

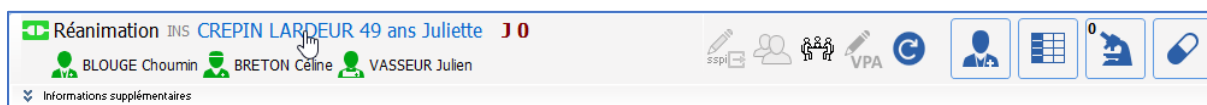En réanimation, le cockpit affiche le personnel responsable suivant :

- Réanimateur
- Infirmier
- Aide-soignant



## 2.5.11 Liste des prélèvements à effectuer

Il est possible d'imprimer une liste éditable depuis le cockpit permettant de lister les bilans à réaliser et les prélèvements sanguins à effectuer.



Deux filtres sont disponibles :

- Le premier permet de définir la plage horaire à afficher (24 prochaines heures, journée de réanimation en cours et prochaine journée de réanimation). Si des demandes d'examen sont en retard, elles seront affichées même si elles ne sont pas dans la plage horaire sélectionnée.
- Le deuxième permet de filtrer les patients : patients pris en charge par l'utilisateur connecté ou patients du service.

## 2.6 Le module de Saisie Rapide

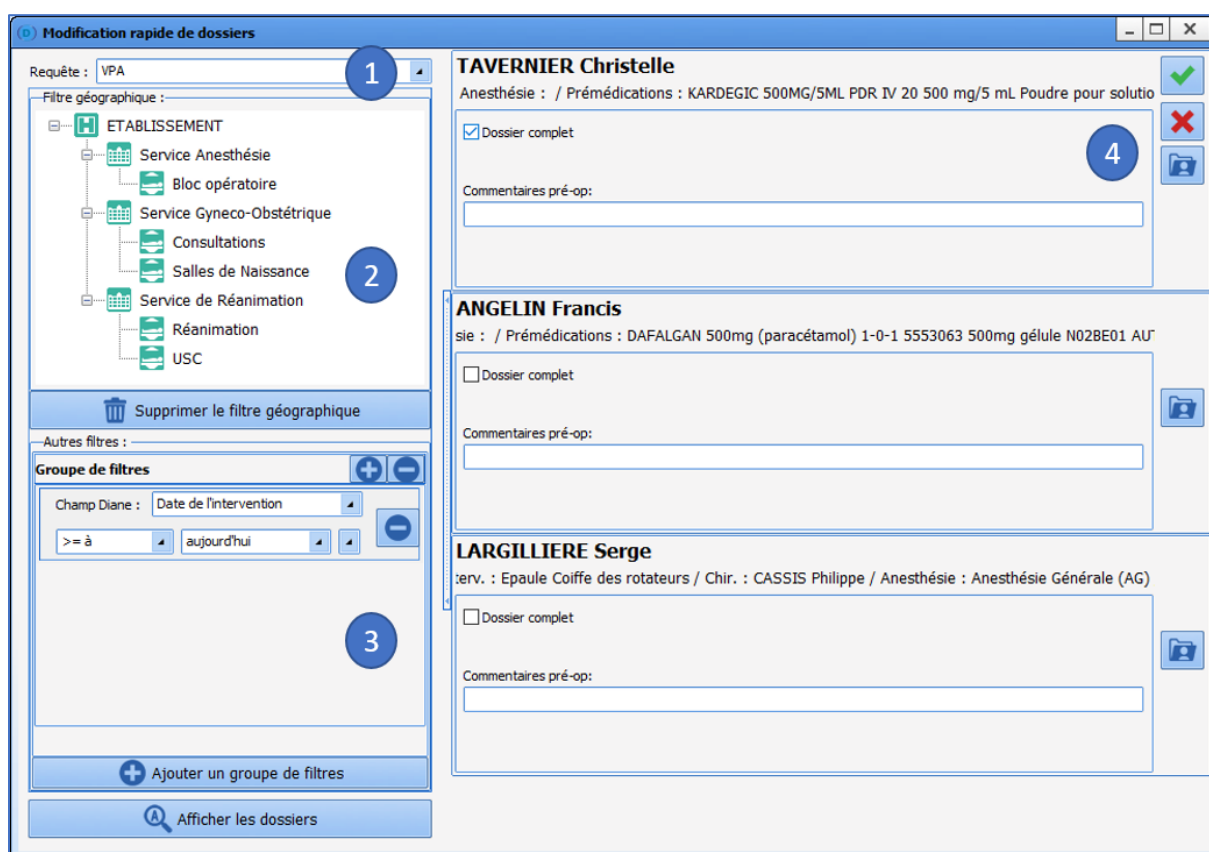
Le module de **Saisie rapide** du **Portail DIANE** permet de lister et d'interagir directement avec les dossiers des patients.

La visite pré-anesthésie est une requête classique de ce module : il est possible par exemple de lister tous les patients devant être opérés aujourd'hui et compléter la Visite Pré-anesthésie à partir de cette liste.

Pour accéder au module de **Saisie Rapide**, cliquez sur le bouton **Saisie rapide** du **Portail DIANE**







1 / Menu déroulant des différentes requêtes patient configurées. La première est celle proposée par défaut.

2 / Filtres géographiques permettant de restreindre la liste à certains services ou blocs.

3 / Les filtres portant sur les données des dossiers de patients. Vous avez la possibilité de modifier ces filtres pour adapter une date ou un chiffre. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez indiquer **Hier** à la place d'aujourd'hui.



2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

4 / Lorsque la requête est sélectionnée, que les filtres sont affinés si nécessaire, les résultats apparaissent en cliquant sur **Afficher les dossiers**.

La liste apparaît dans la partie de droite. Il est alors possible d'agir sur ces dossiers :

- Soit en remplissant directement les items proposés,
- Soit en cliquant sur , ce qui aura pour effet d'ouvrir le dossier et ainsi voir des éléments complémentaires avant de la compléter.

A la fermeture du dossier, le retour se fait automatiquement dans la liste.

## 2.7 Gestion du poids dans DIANE

**DIANE** permet de distinguer plusieurs poids pour un même patient : le poids de naissance, le poids d'admission au début d'une intervention et le poids courant au cours d'une intervention.

### Poids de naissance

Il s'agit du poids du nouveau-né. Cette donnée peut être affichée dans le bandeau supérieur. Cette donnée est affichée en grammes. La saisie du poids de naissance génère automatiquement la création d'une donnée manuelle à la même date et heure.

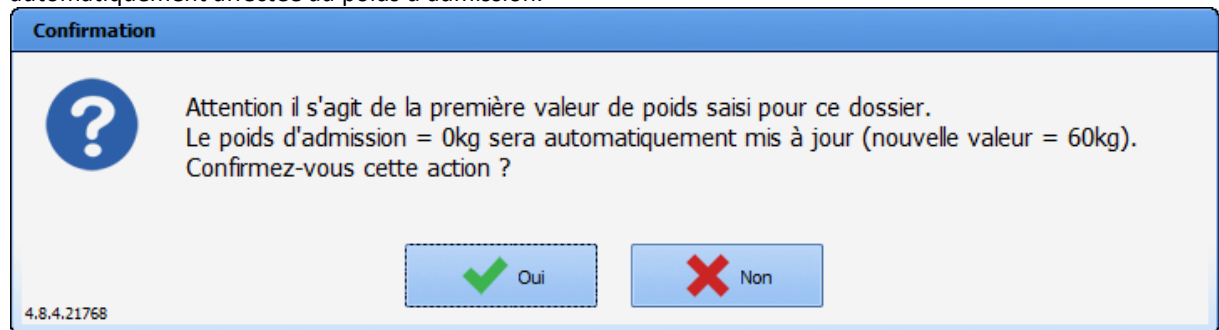
### Poids d'admission (ou Poids initial)

Il s'agit du poids du patient à l'admission, c'est-à-dire le premier poids renseigné lors d'une nouvelle intervention. Cette donnée peut être affichée dans le bandeau supérieur. Par défaut, la valeur de ce poids est à 0. La saisie du poids d'admission génère automatiquement la création d'une donnée manuelle à la même date et heure.

### Poids courant


Le poids courant est un paramètre physiologique (donnée manuelle).

Si le poids courant est saisi alors que le poids d'admission ne l'a pas encore été, la valeur saisie sera automatiquement affectée au poids d'admission.



Si la date/heure d'occurrence d'une saisie de poids courant est antérieure à celle du poids d'admission, celui-ci sera automatiquement mis à jour.

**Confirmation**


 Attention il s'agit de la première valeur de poids saisi pour ce dossier.  
Le poids d'admission = 80kg sera automatiquement mis à jour (nouvelle valeur = 82kg).  
Confirmez-vous cette action ?

Oui  Non

4.8.4.21776

Si saisie de poids correspondant au poids d'admission est supprimée, le poids d'admission sera automatiquement mis à jour avec la saisie de poids la plus ancienne du dossier, s'il en existe une. S'il n'y a plus aucune saisie de poids, le poids d'admission est alors réinitialisé et le bandeau affiche **N/A**.

**Confirmation**

 Attention il s'agit de la première valeur de poids saisi pour ce dossier.  
Le poids d'admission = 80kg sera automatiquement réinitialisé.  
Confirmez-vous cette action ?

Oui  Non

4.8.4.21776

Les poids inférieurs à 10 kg sont affichés en grammes dans le bandeau.

#### Poids de prescription

Il s'agit du poids du patient lors de la dernière signature de prescription.

#### Indice de masse corporelle (IMC ou BMI)

Il existe 2 données de BMI dans **DIANE** : le **BMI initial** qui se base sur le poids d'admission et le **BMI** (courant). Le BMI est mis à jour automatiquement en cas de modification du poids courant et/ou de la taille.

#### Surface corporelle

La surface corporelle peut-être calculée selon plusieurs méthodes (paramétrée par les référents). Elle est mise à jour automatiquement en cas de modification du poids courant et/ou de la taille.

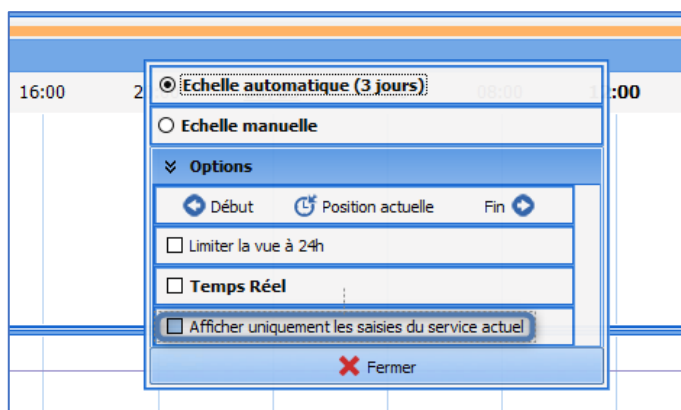
## 2.8 Affichage des données lors d'un transfert au bloc opératoire depuis un autre service (réanimation / USC)

Lorsqu'un patient est transféré dans un autre service, par exemple un patient hospitalisé en réanimation qui subit une intervention en anesthésie, l'affichage des données liées au dossier de réanimation peut nuire à la lisibilité du dossier d'anesthésie.

La pancarte d'anesthésie permet de fixer la visualisation des saisies réalisées au bloc opératoire afin d'optimiser la prise en charge du patient.

Il est possible de modifier l'affichage en cochant ou décochant la case **Afficher uniquement les saisies du service actuel**.





Les saisies de réanimation peuvent être affichées dans un autre onglet, paramétré par exemple pour trouver facilement l'heure d'administration des dernières injections itératives de type analgésie, antalgie et antibiothérapie.

Ceci permet à l'équipe d'anesthésie de garder son ergonomie de travail et de conserver la possibilité de visualiser à quel moment a eu lieu un événement, a été renseigné une saisie avancée ou une administration médicamenteuse.




### 3. DIANE ANESTHESIE
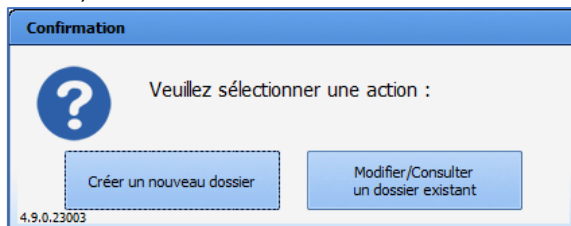
#### 3.1 Sélection du dossier patient en anesthésie

##### 3.1.1 Consultation

Si le patient n'a pas encore d'intervention, la fenêtre **Nouveau dossier** s'affiche et permet de saisir les informations du patient et de l'intervention (cf. [La programmation d'une nouvelle intervention](#)).

Si le patient a déjà des interventions, la fenêtre de confirmation ci-dessous s'affiche.




Le clic sur le bouton **Créer un nouveau dossier** affiche la fenêtre **Nouveau dossier** (cf. [La programmation d'une nouvelle intervention](#)).

Le clic sur le bouton **Modifier/Consulter un dossier existant** ouvre automatiquement sa dernière consultation pour laquelle l'intervention planifiée n'a pas été réalisée et pour laquelle la date limite de reprise n'a pas été atteinte. Si le patient a plusieurs interventions planifiées et non réalisées, c'est la plus récente qui est chargée.

##### 3.1.1 Per-opératoire et Post-opératoire

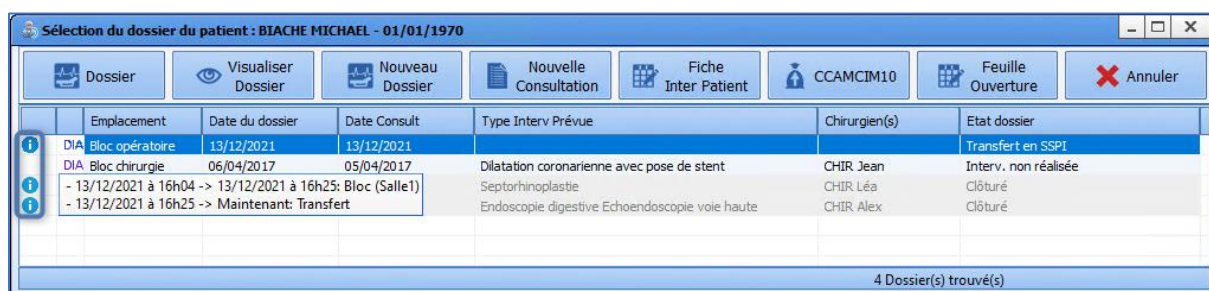Après avoir sélectionné le patient, la fenêtre suivante s'ouvre afin de sélectionner l'action que vous souhaitez avoir sur le dossier du patient.



Par défaut, les dossiers du patient sont triés d'une manière définie, avec en première position les interventions non réalisées. Les dossiers suivants se trient par lieu et par date en tenant compte du statut du dossier.

L'intervention sélectionnée par défaut est celle qui se trouve dans le bloc ou le service actuel, et qui a une heure de début prévue la plus proche de l'heure actuelle.

A partir de cette fenêtre, et via les boutons situés dans son en-tête, il est possible de :

- **Démarrer Intervention** : Ce bouton permet de démarrer l'intervention non-réalisée sélectionnée dans cette fenêtre. Vous pouvez démarrer l'intervention en double-cliquant sur la ligne qui vous intéresse.




- **Reprendre Intervention** : Ce bouton permet de redémarrer une intervention qui a débuté il y a moins de 24 heures.
- **Visualiser Intervention** : Ce bouton permet de visualiser une intervention terminée.
- **Nouvelle intervention** : Ce bouton permet de démarrer une nouvelle intervention sans consultation associée.
- **Nouvelle Consultation** : Ce bouton permet de créer une nouvelle consultation.
- **Fiche Inter Patient** : Ce bouton permet d'atteindre la feuille inter patient.
- **CCAMCIM10** : Ce bouton permet d'accéder au formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM.
- **Feuille Ouverture** : Ce bouton permet d'accéder à la feuille d'ouverture de salle.

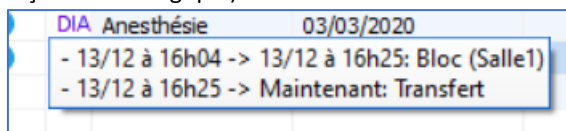
Si le patient sélectionné n'a pas d'intervention prévue ou réalisée, il sera proposé à l'utilisateur de créer une nouvelle intervention.

Avec un double-clic sur une intervention qui a moins de 24 heures (durée paramétrable), un message proposera soit de reprendre cette intervention, soit de la visualiser.

Par un clic droit sur une des lignes correspondant à une intervention, un menu permet de **Lancer la consultation rattachée à cette intervention**.

Pour chaque intervention, on retrouve :


-  : icône affichée uniquement si l'état du dossier est différent de **Interv. non réalisée**. Son survol affiche la chronologie du dossier (celle que l'on retrouve dans l'onglet **Bloc** mais ici au format texte uniquement et classé de façon chronologique).



- **Icône DIA / SIH** : indique l'origine de l'intervention.
- **Bloc** : bloc prévu en consultation.
- **Date Interv Prévue** : date intervention planifiée lors de la consultation.
- **Date Consult** : date de la consultation liée à l'intervention.
- **Type Interv Prévu** : type d'intervention prévu durant la consultation.
- **Chirurgien(s)** : chirurgien(s) planifié(s) durant la consultation.
- **Etat dossier** : état du dossier (Interv. Non réalisée, Clôturé, Transfert en SSPI ...).

Le survol d'une intervention affiche les informations suivantes :

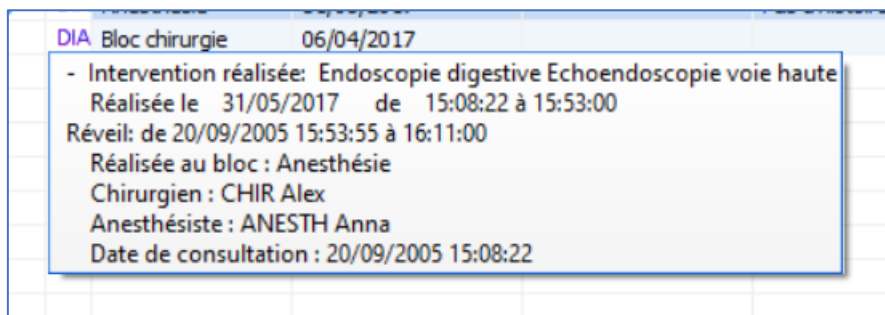- **Intervention prévue**
- **Anesthésies prévues** (Si non renseignée dans la consultation : **Pas de type d'anesthésie prévu**)
- **Date prévue + statut** (réalisée ou non réalisée)
- **Réalisée au bloc**
- **Chirurgien** (si renseigné en consultation)
- **Anesthésiste** (si renseigné en consultation)
- **Date de consultation**



Le clic droit sur l'intervention propose de :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)











DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- Lancer la consultation liée au dossier
- Compléter le dossier si l'état du dossier est clôturé (ouverture du dossier avec droit d'écriture)

## 3.2 La Consultation pré-anesthésique

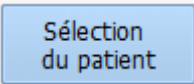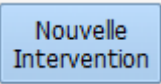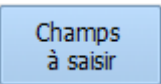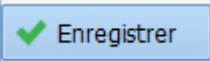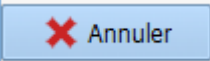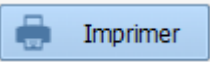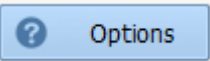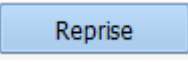


### 3.2.1 Les boutons de la consultation préanesthésique


Boutons	Rôles
	Permet de sélectionner le dossier d'un patient. Cf. chapitre : « <a href="#">Sélection du patient</a> ».
	Permet de démarrer une nouvelle consultation pour une nouvelle intervention pour le patient sélectionné. Cf. chapitre : « <a href="#">La programmation d'une nouvelle intervention</a> ».
	Ouvre la fenêtre <b>Champs à saisir</b> qui met en exergue les champs considérés comme importants avant la fermeture de l'application. Cf. chapitre : « <a href="#">Les éléments importants et les éléments bloquants</a> ».
	Permet d'enregistrer toutes les informations saisies (les nouveaux éléments, les modifications ou les suppressions apportées au dossier du patient sélectionné). L'enregistrement de la consultation se fait de façon automatique lors de l'impression ou lors de l'édition des codes CCAM et CIM10.
	Permet de fermer le dossier du patient si le bouton <b>Enregistrer</b> est grisé au moment où vous cliquez sur <b>Annuler</b> . Si le bouton <b>Enregistrer</b> est actif au moment où vous cliquez sur <b>Annuler</b> , vous aurez la possibilité d'annuler toutes les informations saisies depuis le dernier enregistrement du dossier patient. Une fenêtre d' <b>Avertissement</b> vous permet de confirmer votre choix. Le bouton <b>Oui</b> de cette fenêtre permet de conserver les données que vous vous apprêtez à effacer. Le bouton <b>Non</b> permet d'annuler toutes les modifications que vous avez insérées dans le dossier de votre patient depuis le dernier enregistrement. Le bouton <b>Annuler</b> annule votre demande d'annulation.
	Permet d'imprimer la consultation du patient sélectionné. Une fenêtre de <b>Prévisualisation d'impression</b> s'ouvre au préalable. Cf. chapitre : « <a href="#">L'impression de la consultation</a> ».
	Ouvre un menu contextuel qui vous permet de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verrouiller la station DIANE.</b></li> <li>- <b>Changer d'utilisateur.</b></li> <li>- <b>Resynchroniser.</b></li> <li>- <b>Changer de mot de passe.</b></li> <li>- Consulter l'<b>Aide de la consultation.</b></li> <li>- Consulter la fenêtre <b>A Propos.</b></li> <li>- <b>Quitter</b> l'application Consultation.</li> </ul>
	Ouvre la fenêtre <b>Reprise</b> qui permet de récupérer toutes les données de l'onglet sélectionné à partir d'une consultation antérieure, sélectionnable au choix parmi la liste des différentes consultations réalisées pour un patient donné.



### 3.2.2 La zone Intervention(s)







Cette zone, située en haut de l'application, permet de visualiser la liste de toutes les interventions que le patient sélectionné a déjà subi lors de précédentes prises en charge dans le logiciel **DIANE** et de lui programmer une nouvelle intervention via le bouton **Nouvelle Intervention**.

Intervention(s)		Date	Age	Taille	Poids	Intervention
<input type="button" value="Nouvelle Intervention"/>  <input type="button" value="Champs à saisir"/>		29/07/2018	57 ans	175 cm	67 Kg	Epaule Coiffe des rotateurs
		27/07/2018	57 ans	145 cm	52 Kg	Chirurgie de la cornée Kératoplasti...
		23/06/2008	47 ans	175 cm	68 Kg	Septorhinoplastie
	<input checked="" type="checkbox"/>	20/09/2005	44 ans	175 cm	65 Kg	Endoscopie digestive Echoendosc...

Lorsqu'un dossier est terminé  vous pouvez, au clic droit sur la ligne, accéder à une visualisation complète de l'intervention.

### 3.2.3 La liste des interventions du patient sélectionné

La liste des interventions du patient sélectionné apparaît dans la zone **Intervention(s)**. On retrouve, dans cette zone, l'**Age**, la **Taille** et le **Poids** du patient à la date de l'intervention ainsi que le motif et la **Date** de l'intervention.

Icône	Colonne <b>Date</b>	Colonne <b>Intervention</b>
 Dossier ouvert  <i>L'intervention n'a pas eu lieu ou est en cours. La consultation peut alors être modifiée.</i>	Date prévue de l'intervention si celle-ci a été indiquée.  OU  Date de la consultation si la date d'intervention n'a pas été indiquée.	Intervention prévue.
 Dossier fermé  <i>L'intervention est terminée, le patient est passé en salle de réveil. La consultation ne peut plus être modifiée (sauf droits d'accès exceptionnels).</i>	Date réelle de l'intervention.	Intervention réalisée.
 Dossier verrouillé  Réveil en cours  Bloc en cours  Induction en cours	Date prévue de l'intervention si celle-ci a été indiquée.  OU  Date de la consultation si la date d'intervention n'a pas été indiquée.  OU  Date réelle de l'intervention si elle a eu lieu.	Intervention prévue ou réalisée.
<i>Ce dossier est verrouillé sur un autre poste (dossier déjà ouvert ou préchargé sur un outil mobile), vous ne pouvez consulter ce dossier qu'en lecture seule.</i>	Date réelle de l'intervention si elle a eu lieu.	



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28





Dossier non accessible

*L'intervention a été effectuée ou programmée dans un service différent de celui dans lequel vous trouvez. Vous ne pouvez pas visualiser ce dossier (sauf droits d'accès exceptionnels).*

Date prévue de l'intervention si celle-ci a été indiquée.

OU

Date de la consultation si la date d'intervention n'a pas été indiquée.

OU

Date réelle de l'intervention si elle a eu lieu.

Intervention prévue ou réalisée.

Il est possible de trier la liste des interventions en cliquant sur les intitulés des colonnes (**Date, Age, Taille, Poids, Intervention**).

Si ce n'est pas la dernière consultation réalisée qui est sélectionnée, la couleur de fond de cette liste sera teintée en orange.

Il est possible de visualiser l'intervention associée à une consultation en faisant un clic droit sur l'intervention et en sélectionnant **Voir l'intervention associée**.

### 3.2.4 La programmation d'une nouvelle intervention

Lorsqu'un dossier patient est sélectionné, cliquez sur le bouton **Nouvelle Intervention**.

Lors de la création d'un nouveau patient, la fenêtre **Programmation d'une intervention** s'ouvre automatiquement.

The screenshot shows a software window titled "Nouveau dossier" with the following fields and values:

- Informations patient:**
  - Nom de naissance: LARGILLIERE
  - Prénom: Serge
  - Nom usuel: (empty)
  - Né(e) le: 20/03/1961
  - N° IPP: 11225544
  - Sexe:  M  F
  - Taille: 175
  - Poids: 65
  - BSA: 1,774
  - BMI: 21,224
- Intervention:**
  - Date prévue: 30/07/2018
  - Bloc op. prévu: Réanimation
  - Service demandeur: (empty)
  - Type d'intervention(s) prévue(s): Endoscopie ORL (1)
  - Chirurgien(s) prévu(s): LAFRENIERE Charmaine (1)
  - Anesthésiste(s) prévu(s): ANESTH Luc (1)

Buttons at the bottom:  and

Dans cette fenêtre, il est possible de compléter les premiers champs. (Le **BSA (Body Surface Area)** et le **BMI (Body mass index)** sont calculés automatiquement).

A l'ouverture de cette fenêtre, le bloc opératoire est, par défaut, préconfiguré comme étant celui où se trouve l'ordinateur.

La modification de ce champ sera conservée durant la même session pour les programmations d'interventions suivantes durant la même session.

Cliquez sur le bouton **OK** ou sur la touche **Entrée** du clavier pour valider cette fenêtre.

Les éléments s'implémentent à leur place.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Après validation de cette fenêtre, un message de confirmation propose de reprendre automatiquement les antécédents du dossier précédent.

Un clic sur **Oui** réalisera l'action proposée : l'onglet **Antécédents / Traitements** se préremplit avec les antécédents provenant des dossiers précédents.

Un clic sur **Non** et seules les complications per opératoire et post opératoire antérieures ainsi que les interventions effectivement réalisées avec le logiciel **DIANE** seront reprises dans l'onglet **Antécédents / Traitements**.

### 3.2.5 Les onglets principaux de la consultation préanesthésique

Les données anesthésiques, relatives à l'intervention sélectionnée, sont accessibles via un classeur à onglets et sont regroupées, par défaut, en neuf grands thèmes : **Administratif, Antécédents / Traitements, Examens cliniques, Paraclinique, Conclusion / Visite, Ambulatoire, Comptabilité, Résumé** et **Documents**.

**REMARQUE** : Si vous essayez de modifier un ancien dossier de consultation, un message d'information vous l'indique. Par défaut, cette limite est configurée à 240 jours.

#### 3.2.5.1 L'onglet Administratif

Cet onglet regroupe toutes les données administratives concernant le patient ainsi que les détails de l'intervention prévue.

Le remplissage de ces champs se fait suivant les différentes méthodes vues dans le chapitre « *Les différents modes de saisie dans DIANE* ».

**REMARQUE** : Si une interface est en place, il est possible que les champs administratifs se complètent automatiquement. Il est possible aussi que ces champs ne soient pas accessibles en écriture.

##### 3.2.5.1.1 Le composant Intervention(s) réalisée(s)

Le champ **Intervention(s) réalisée(s)** n'est pas à compléter. Il sera mis automatiquement à jour lors du passage de votre patient en per opératoire.

Cela permettra de visualiser la différence entre l'intervention prévue et l'intervention effectivement réalisée.

##### 3.2.5.1.2 Les composants personnels prévus

Remplir les champs **Anesthésiste(s) prévu(s)** et **IADE(S) prévu(s)** lors de l'intervention, permettra de les inscrire automatiquement comme présents en salle.

##### 3.2.5.1.3 Le bouton CCAM/CIM10

Un bouton **CCAM/CIM10** permet d'accéder au formulaire de saisie des codes CCAM et CIM10 directement à partir de cet onglet. Voir le chapitre « *CCAM / CIM10* ». Pour que les codes récupérés s'affichent dans la zone qui leur est réservée, vous devez cliquer sur le bouton **CCAM/CIM10**.



### 3.2.5.2 L'onglet Traitement / Prémédication

Cet onglet peut être utilisé dans les autres modules. Il est donc traité dans le chapitre « [Onglet Traitement / Prémédication](#) ».

### 3.2.5.3 L'onglet ATCD

Cet onglet regroupe généralement ce qui est afférent aux antécédents du patient.

Pour rappel, les cases vertes  permettent d'indiquer un élément défini comme étant par défaut pour ce champ. (Exemples : RAS, pas d'antécédents chirurgicaux...) En effet, Il est préférable d'avoir un élément de type RAS plutôt qu'aucune information, ce qui pourrait laisser le doute sur l'interrogatoire.

Il est possible d'envoyer les données vers le champ **Éléments importants** dans l'onglet [Conclusion/Visite](#) en effectuant un clic droit sur l'élément désiré.

#### 3.2.5.3.1 Les composants Antécédents chirurgicaux, Complications opératoires

Les composants **Antécédents chirurgicaux**, **Complications opératoires antérieures** et **Antécédents anesthésiques** sont des composants particuliers. En effet, ils peuvent être complétés de façon classique mais ils récupèrent aussi de façon automatique les données des interventions précédemment effectuées dans **DIANE**.

#### 3.2.5.3.2 Le bouton RAS

La case à cocher **RAS** permet de renseigner tous les champs par un élément déterminé en amont comme étant un élément par défaut pour un patient ayant pas ou peu d'antécédent.




Administratif	ATCD / Traitements	Exam. cliniques	Paraclinique	Conclusion/Visite	Ambulatoire	Résumé	Documents (0)	Trait. / Préméd.
<b>Antécédents chirurgicaux</b> 2 ✓ Endoscopie digestive Coloscopie Vitrectomie bilatérale		<b>Antécédents anesthésiques</b> 3 ✓ Agitation au réveil Frissons postopératoires Intubation difficile Cormack 3 : Seuls petite partie de glotte et cartilages arythénoïdes visibles		<b>Antécédents médicaux</b> 2 ✓ Entérites Migraine avec signes associés				
<b>Antécédents familiaux</b> 1 ✓ Pathologie Parenté Pas d'atcd familial		Allergies ✓ Aspirine		<b>Traitements actuels</b> DPI Guide VENTOLINE 100MG/DOSE INHAL 200 100 µg/dose SPASFON LYOC 160MG LYOPHILISAT 5 1-1-1 160 mg KARDEGIC 160MG SACHET 30 160 mg				
<b>Etat général, Habitus</b> 2 ✓ Tabagisme < 5 cigarettes par jour Consommation d'alcool mondaine		<b>Antécédents obstétricaux</b> 1 ✓ Pas d'atcd obstétrical		<b>MAINTIEN, RELAIS ou ARRET</b> 2 ✓ KARDEGIC 160MG SACHET 30 160 mg Relais par HBPM FRAXIPARINE (Nadroparine) Sol inj 2850 UIAXa/0,3ml				
<b>Antécédents transfusionnels</b> 1 ✓ Pas d'atcd transfusionnel		<b>Complications opératoires antérieures</b> 3 ✓ Diffusion extravasculaire de la perfusion Compression oculaire Douleur à la perfusion		<input type="checkbox"/> RAS Dossier médical Ordonnances				

### 3.2.5.4 L'onglet Examens cliniques

Cet onglet permet de renseigner l'examen clinique du patient au jour de la consultation.

Il est possible d'utiliser tous les types de composant de la consultation. Cf. chapitre « *Les différents modes de saisie dans DIANE* ».

Les saisies avancées sont personnalisables et s'activent en cliquant sur le  de l'onglet concerné. Au préalable, il sera demandé un enregistrement de la consultation.

Administratif	Trait. / Préméd.	ATCD	Exam. cliniques	Paraclinique	Conclusion/Visite	STAFF / VPA
<b>Généralités</b> Taille 170 Poids 60 SC 1,68 IMC 20,76 Poids Idéal 66,02		<b>Intubation</b> Mallampati: normal Ouverture de la bouche Distance ThyroMentonnière Mobilité cervicale Profil du patient		<b>Etat et prothèse dentaire</b> ✓ <b>Prothèses - Piercing - Pilosité</b> ✓ <b>Abord veineux / Varices</b> ✓		
<b>Appareil cardio-respiratoire</b> FC PA systo PA diasto Dyspnée		<b>Accès aux voies aériennes</b> ✓ Abord veineux Abord Rachis Apné		<b>Schéma dentaire</b> Haut Incisive centrale Incisive latérale Canine Première prémolaire Deuxième prémolaire Première molaire Deuxième molaire Dent de sagesse Droite Gauche Bas Non saisi		
<b>Examens cardio-respiratoires</b> ✓ <b>Examens généraux</b> ✓ <b>Etat général, Habitus</b> ✓		CORMACK LEE FAGERSTRÖM WILSON Prédiction VAM CORMACK Classification de Cormack et Lehane Aucun enregistrement		Légende Bridge Pivolet/prothèse/implant Mobile Cassée Manquante Autre		

#### 3.2.5.4.1 Le score d'intubation

Ce score est calculé à l'aide des champs situés sur le côté : **Mallampati, Ouverture de la bouche, Distance**



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

### Thyro-Mentonnière, Mobilité cervicale et Profil du patient.

Le score est compris entre 5 (score minimal qui s'obtient en cliquant sur le bouton **Normal**, situé sur le côté de **Mallampati**) et 14. Lorsque ce score s'inscrit en rouge, c'est qu'il a dépassé le seuil critique de 7.

#### 3.2.5.5 L'onglet Paraclinique


Cet onglet est prévu pour renseigner et faire les demandes d'examens biologiques et de consultations d'avis spécialisés.

Il est possible d'utiliser tous les types de composant de la consultation. Cf. chapitre : « *Les différents modes de saisie dans DIANE* ».


Les bilans les plus récurrents sont proposés (configuration faite par le référent du site) et accessibles via des cases à cocher. Une fois la sélection faite, le bouton **Édition** permet de générer l'ordonnance de prescription des bilans en fonction de ce qui a été coché.


Il est aussi possible d'éditer les courriers pour les avis spécialisés.

Il est possible d'inclure un bilan qui ne serait pas configuré sur la configuration que vous utilisez, en cliquant sur

le bouton  situé en haut à droite de la zone **Autres bilans**. Dès qu'un bilan, qui n'appartient pas à votre configuration, est complété, il sera toujours visible à partir de la consultation du patient.

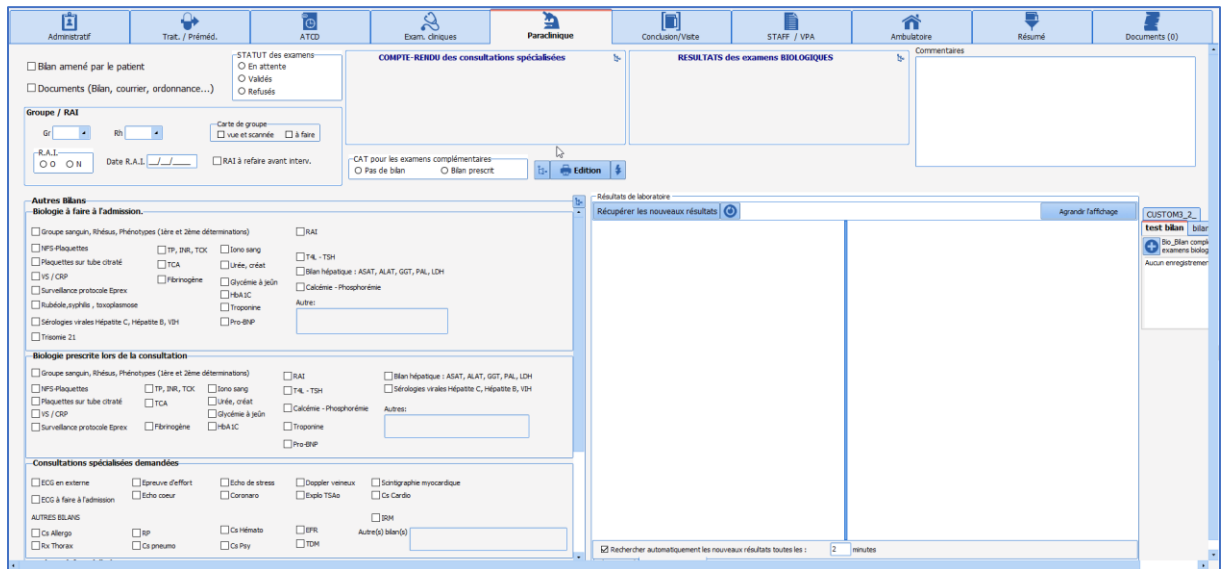
##### 3.2.5.5.1 Le bouton Édition

Le clic sur le bouton , permet d'imprimer directement la lettre sélectionnée sans passer par la fenêtre de prévisualisation.

Le bouton  permet de pouvoir imprimer plusieurs lettres en même temps. Sélectionnez les courriers que vous souhaitez imprimer en cochant les cases puis cliquez sur le bouton **Aperçu** si vous voulez prévisualiser au préalable ces courriers ou sur **Imprimer** pour lancer l'impression sans prévisualisation.

**REMARQUE** : les résultats de bilan biologique peuvent être récupérés automatiquement du serveur de résultat du laboratoire si une interface est mise en place.

**Note** : Tous les bilans et courriers d'ordonnances type sont entièrement configurables par votre administrateur de site. Leur paramétrage s'effectue par service, par bloc opératoire, par salle...



### 3.2.5.6 Onglet Conclusion/Visite

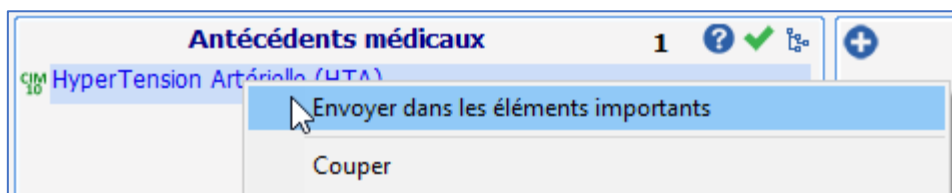
Dans cet onglet, il est d'usage de renseigner tous les éléments afférents à la stratégie d'anesthésie mais aussi tout ce qui concerne les autorisations d'opérer, les informations Bénéfices/Risques...

Il existe sur cet onglet un bouton d'édition nommé **Impressions** permettant de gérer l'impression des autorisations d'opérer mais aussi tout type de documents tels que les documents informatifs, de consentement... ils sont gérés et mis à disposition par votre référent. Le comportement du bouton d'édition est strictement le même que celui de l'onglet précédent. (Cf. chapitre : « [Le bouton édition](#) »)

#### 3.2.5.6.1 Le composant SYNTHÈSE / Eléments importants

Le composant **SYNTHÈSE / Eléments importants** permet de synthétiser tous les éléments qui auraient été relevés au cours de la consultation et jugés comme importants. En effet, chaque composant de la consultation permet via un clic droit d'envoyer des éléments dans cet onglet **Conclusion/Visite**.

Il est possible d'envoyer un examen spécifique complet ou un bilan complet dans le tableau des éléments importants en cliquant droit directement sur le nom de l'examen (onglet **Exam. cliniques**) ou du bilan (onglet **Paraclinique**).



#### 3.2.5.6.2 Le composant Dossier modifié par

Une zone **Dossier modifié par** permet de voir le nom de tous les intervenants sur le dossier de consultation. Une couleur différente est affectée pour chaque nouvelle session ouverte. Cette zone se complète automatiquement.

Un numéro de version, également présent sur l'impression de la feuille d'anesthésie, permet de savoir si la version imprimée est la même que celle consultable et modifiable sur l'ordinateur.



### 3.2.5.7 Onglet Comptabilité

Cet onglet permet de renseigner le paiement des consultations par les différents patients. Pour ce faire, le médecin doit indiquer le barème de l'acte, puis le type d'assuré et enfin le montant à facturer.

Une fois la partie supérieure renseignée, vous devez cliquer sur le bouton **Ajouter honoraire** afin d'enregistrer cet honoraire dans le module de Comptabilité pour l'ajouter dans la liste des patients qui doivent vous payer.

Si vous modifiez les informations notées dans cet onglet, vous devrez cliquer sur le bouton **Modifier**



**honoraire** pour enregistrer les nouvelles informations que vous avez cochées.

Si le patient paie directement dans le bureau du médecin, il lui suffira d'indiquer le mode de paiement en bas de l'onglet et de cliquer sur le bouton **Effectuer Paiement**.

**REMARQUE :** Toutes les zones de cet onglet sont entièrement configurables par les administrateurs de site. Si une de ces zones est modifiée, il faudra reporter la même modification dans l'application **DIANE COMPTA**.

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Lancer la compta**, vous démarrez le module de comptabilité. (Cf. chapitre : « **DIANE COMPTA** »).

### 3.2.6 L'onglet Résumé

Cet onglet permet de visualiser sur une seule page tous les composants de la consultation. Il est entièrement configurable.

Ces composants sont des miroirs de ceux utilisés dans tous les autres onglets.

Administratif	ATCD / Traitements	Exam. cliniques	Paraclinique	Conclusion/Visite	Ambulatoire	Résumé	Documents (0)	Trait. / Préméd.	
<b>Antécédents chirurgicaux</b> 2 ✓ Médecine nucléaire sous Anesthésie générale 2000 (AG) Scintigraphie MétaIodoBenzyl Guanidine (MIBG) Curethérapie à haut débit de dose (HDR) Bronche 2002		<b>Antécédents anesthésiques</b> 2 ✓ Agitation au réveil ALR périmédullaire sans problème		<b>Complications opératoires antérieures</b> 4 ✓ Erythème 23/06/2008 Nausées 23/06/2008 Aucune complication survenue en période périopératoire <b>Vomissements sans inhalation</b> 20/09/2005					
<b>Antécédents médicaux</b> 1 ✓		<b>Antécédents allergiques</b> 1 ✓ Asthme allergique + Crises saisonnières		<b>Antécédents familiaux</b> 1 ✓ Pathologie Parenté Pas d'atcd familial					
<b>Etat général, Habitus</b> 1 ✓ Tabagisme Consommation avant grossesse 1 paquet par jour		<b>Antécédents obstétricaux</b> 1 ✓ Pas d'atcd obstétrical		<b>TRAITEMENTS ACTUELS</b> 3 ✓ Molécule Posologie VENTOLINE 100µg/d suspension pour inhalation SPASFON LYOC 160mg lyophilisat oral 1-1-1 KARDEGIC 160mg poudre pour solution buvable					
<b>Antécédents transfusionnels</b> 1 ✓ Pas d'atcd transfusionnel		<b>Abord veineux / Varices</b> 1 ✓ CAPITAL VEINEUX CORRECT : Pas de difficultés de perfusion à priori		<b>MAINTIEN, RELAIS ou ARRÊT</b> 3 ✓ KARDEGIC 160mg poudre pour solution buvable Relais par HEPARINE SODIQUE au pousse seringue VENTOLINE 100µg/d suspension pour inhalation à arrêter SPASFON LYOC 160mg lyophilisat oral à poursuivre					
<b>Examens cardio-respiratoires</b> 1 ✓ Râles bronchiques perçus à droite		<b>Accès aux voies aériennes</b> 1 ✓ Intubation OroTrachéale (IOT) avec sonde préformée		<b>INFO - Bénéfices / Risques</b> 1 ✓ Séjour en unité de soins intensifs post-opératoire seul					
<b>Examens généraux</b> 1 ✓		<b>CONSIGNES données au patient</b> 1 ✓ ARRETEZ de fumer les jours qui précèdent l'intervention		<b>PREMEDICATION</b> 2 ✓ VENTOLINE 100µg/d suspension pour inhalation SPASFON LYOC 160mg lyophilisat oral					
<b>SYNTHESE / Eléments importants</b> 7 Antécédents chirurgicaux= - Médecine nucléaire sous Anesthésie générale (AG) Scintigraphie MétaIodoBenzyl Guanidine (MIBG) 2000 Complications opératoires antérieures= - Vomissements sans inhalation 20/09/2005 Eprouve d'effort= Oui Echo coeur= Oui Explo TSAo= Oui		<b>PROTOCOLE D'ANESTHESIE proposé</b> 1 ✓ AG + ALR		<b>Stratégie transfusionnelle</b> 1 ✓ Pas de stratégie transfusionnelle particulière					
		Taille 175 Poids 65 IMC 21,22 FC 85 PASysto 120 PADIasto 92 ASA 2							

**REMARQUE :** Il est possible de noter vos informations directement à partir de cet onglet.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



### 3.2.7 L'onglet STAFF / Visite Pré Anesthésique

Il est possible d'avoir un onglet consacré au staff et/ou à la VPA.

#### 3.2.7.1 Le Staff d'anesthésie

Cette partie permet de tracer les éléments du staff (le motif du staff ainsi que la conclusion de celui-ci).

Via le module de saisie rapide, il sera possible, si la validation de l'intervention a été renseignée sur le statut **Dossier à staffer**, de trouver les dossiers nécessitant d'être revus par l'équipe.

Il faudra alors penser à changer le statut en **Dossier staffé et validé** afin que ces dossiers ne soient plus extraits lors de la prochaine requête.

#### 3.2.7.2 La Visite Pré Anesthésique (VPA)

La Visite Pré Anesthésique peut être renseignée de différentes façons. Il s'agit d'un choix d'organisation mis en place ensuite par le référent.

Quand cette partie est renseignée via les champs dédiés (**Dossier complet**, **RAS depuis la CPA**, **Commentaires**, **A jeun à partir de...** Les composants **Fait par** et **Le** s'implémentent automatiquement avec le nom du médecin ayant réalisé ces saisies ainsi que la date au moment de la saisie.

### 3.2.8 Fermeture du dossier de consultation du patient et les champs bloquants à saisir

#### 3.2.8.1 Validation et statut du dossier

La validation de l'intervention dispose de six possibilités.

Chaque possibilité est associée à une icône visuelle.

Cette validation permettra de retrouver ces dossiers via le module de saisie rapide afin de les compléter le cas échéant (dossier à staffer) mais gère aussi des alertes au moment de l'ouverture du dossier en salle d'intervention.

Etat	Icône	Effet en Per opérateur
Date validée		
Date différée		



Intervention annulée	Valid. interv Intervention annulée	
A staffer	Valid. interv A staffer	
Dossier staffé et validé	Valid. interv Dossier staffé et validé	Une fenêtre informe que le dossier a été staffé.
Patient récusé	Valid. interv Patient récusé	Une fenêtre apparaît pour indiquer que le patient a été récusé.

Le choix de l'état peut s'effectuer de deux manières :

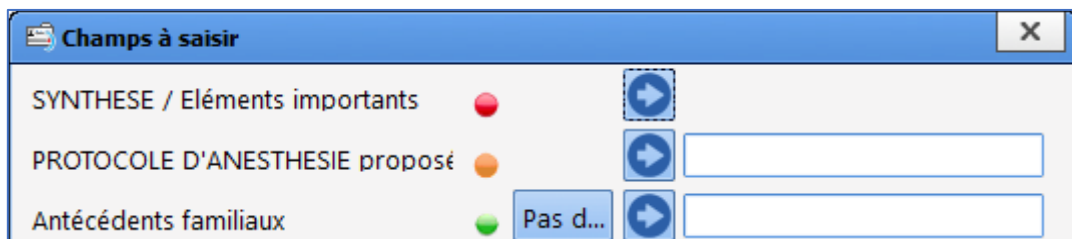
- Soit en choisissant parmi les propositions du menu déroulant **Valid. interv**,
- Soit en cliquant sur l'icône : l'ordre est alors le suivant : pas d'état ⇒ **Date validée** ⇒ **Date différée** ⇒ **A staffer** ⇒ **Dossier staffé et validé** ⇒ **Intervention annulée** ⇒ **Patient récusé** ⇒ Pas d'état ⇒ ...

### 3.2.8.2 Les éléments importants et les éléments bloquants

Lors de l'enregistrement de la consultation ou en cliquant sur le bouton **Champs à saisir**, une fenêtre s'ouvre.

Cette fenêtre répertorie les champs considérés comme importants ou bloquants. Un système de couleur permet de distinguer les champs peu importants (rond vert), importants (rond orange) ou très importants (rond rouge). Si des ronds rouges apparaissent dans la fenêtre **Champs à saisir**, le dossier ne pourra pas être fermé sans que ces champs soient complétés.

**REMARQUE** : cette notion d'importance est configurable. Seul un administrateur de site dispose du droit de modifier l'intitulé des champs à saisir et leur ordre d'importance.



En cliquant sur , l'onglet où se trouve ce champ va être affiché à l'écran afin de le compléter normalement.

Il est possible aussi de sélectionner l'item désiré directement dans le menu déroulant de la fenêtre.

Le bouton situé devant permet d'insérer une valeur de façon rapide. Ces valeurs de saisie rapides sont entièrement configurables.

### 3.2.9 L'impression de la consultation

Une fois la consultation terminée, la génération du **Compte-Rendu d'Anesthésie** dépend du paramétrage fait par les référents.

Il est possible d'imprimer directement le compte-rendu, d'afficher l'aperçu avant impression ou de l'envoyer directement dans le Dossier Patient.

Vous aurez à cliquer sur le bouton pour imprimer :

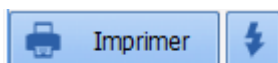


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



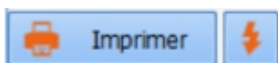Dès que le document est généré, la couleur du bouton change du bleu à l'orange. De plus, au survol, vous lisez la dernière date de génération.



A chaque demande d'impression, la fenêtre ci-dessous s'ouvre. Cela permet de voir quel document va être imprimé. Il est possible de choisir de sauvegarder le document, il sera alors stocké dans l'onglet **Documents**. Il est possible aussi qu'il soit exporté.

Si cette fenêtre apparaît, l'export ou la sauvegarde se font après avoir cliqué sur le bouton **Effectuer les opérations sélectionnées et continuer**.

**Compte-rendu**


**Veillez enregistrer les modifications apportées au document avant de valider cette fenêtre**

**Sauvegarder le document généré et ses modifications**

Fichier

**Exporter le document**

**Effectuer les opérations sélectionnées et continuer** **Annuler**

La partie droite - le bouton  - envoie l'impression du compte-rendu directement vers l'imprimante puis ouvre la fenêtre ci-dessus.



### 3.3 Utilisation de DIANE sur ordinateur portable SANS RÉSEAU

Il est possible que vous ayez besoin de voir un patient dans un lieu déporté, de faire une anesthésie sur un site non-équipé du logiciel. Pour cela, avec un ordinateur portable équipé du logiciel **DIANE**, il est possible de charger le dossier sur l'ordinateur, de réaliser la consultation, la Visite Pré Anesthésique, l'intervention... puis de le remettre sur le réseau.

Pour cela, différentes étapes doivent être réalisées :


- Pré-chargement des dossiers patients sur l'ordinateur.
- Réalisation des procédures désirées.
- Resynchronisation des données.

#### 3.3.1 Le pré-chargement des dossiers patients

Avant de travailler en mode déconnecté du réseau, il est nécessaire de charger sur l'ordinateur les dossiers des patients concernés.

Pour réaliser cela, il faut chercher le dossier patient puis, via un clic droit, sélectionner **Charger en accès complet**.

Cette action a pour effet de charger toutes les données du dossier sur l'ordinateur en posant un verrou. Ce dossier sera accessible uniquement depuis cet ordinateur en lecture et écriture tout en étant déconnecté du réseau.

Le verrou : cette option pose un verrou sur le patient en base de données, empêchant ainsi les autres utilisateurs de pouvoir modifier les données dans le dossier patient. Les dossiers verrouillés sont symbolisés par un verrou  dans la fenêtre **Sélection d'un patient**.

Les dossiers sélectionnés apparaissent maintenant dans la zone **Liste des dossiers chargés en local**.

Lorsque le chargement est terminé, vous pouvez fermer cette fenêtre afin d'aller effectuer la procédure désirée. L'ordinateur peut être débranché du réseau.

Exécutez l'application désirée en cochant **Forcer la mise en mode déconnecté** dans la fenêtre de connexion. Forcer l'application à travailler dans ce mode évite que le logiciel cherche le réseau.

En mode déconnecté, l'application est teintée en rouge. Voir le chapitre « [Le mode déconnecté et les connexions entre postes](#) ».

Il est maintenant possible de réaliser les actions voulues : une visite pré anesthésique, une consultation, une intervention complète...

#### 3.3.2 La resynchronisation des données

Lorsque la procédure est terminée, il faut rebrancher l'ordinateur sur le réseau. Une resynchronisation des données est proposée.

Lorsque vous démarrez une application **DIANE**, la bascule des dossiers présents dans le portable se fait de façon automatique vers le serveur central.

Seul un administrateur de site dispose du droit de déverrouiller un ou plusieurs dossiers patient (en cas de perte de l'ordinateur portable par exemple). Dans ce cas, toutes les données insérées lors de la procédure seront considérées comme perdues.

**REMARQUE** : Pour charger et décharger les patients du portable, il est important que la connexion réseau soit valide.



### 3.4 Le Per-Opérateur et Le Post-Opérateur

Les modules **Per opératoire** et **Post opératoire** de **DIANE ANESTHÉSIE** permettent de documenter l'intervention en induction, bloc ou salle de réveil. L'onglet le plus important de ces modules est l'onglet **SURVEILLANCE** dans lequel se retrouvent la totalité des éléments renseignés dans le dossier.

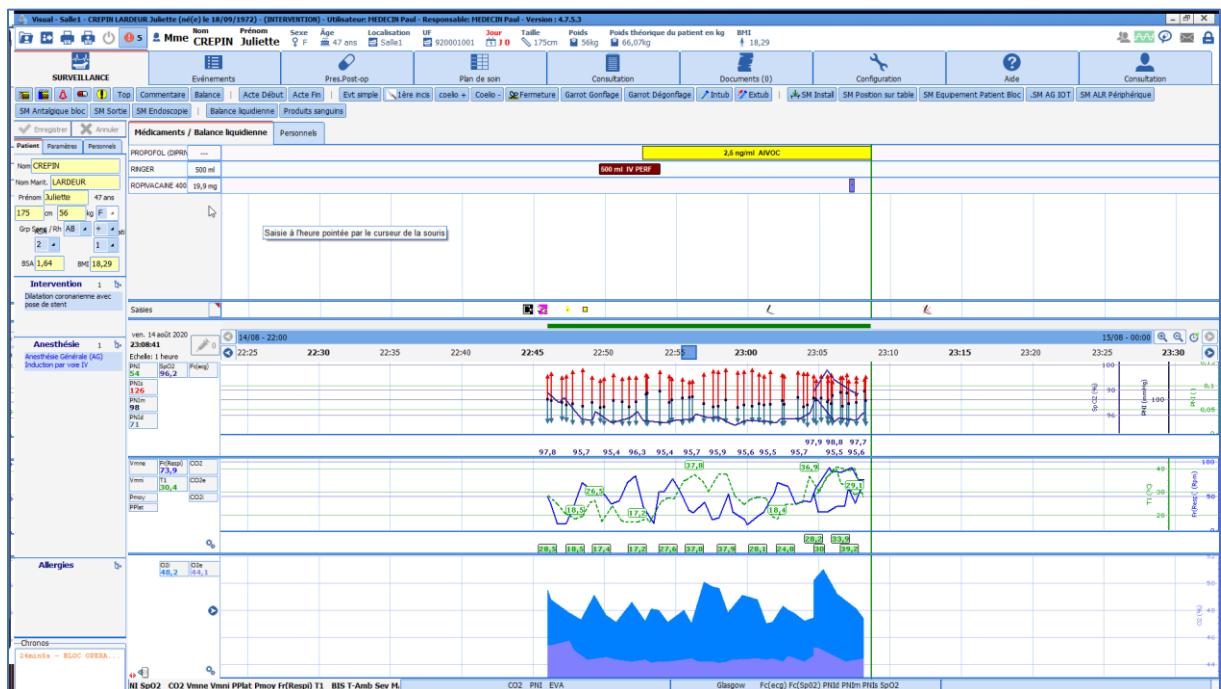
L'usage de ce module est similaire en induction, en salle d'ALR, en salle d'opération et en salle de réveil. Les différences seront vues en fin de chapitre.

Le visuel est adapté à la zone de travail où se trouve l'ordinateur.

La gestion des prescriptions pour la salle de réveil et les services en post opératoire bénéficie maintenant des évolutions faites pour la réanimation permettant de générer des prescriptions structurées. (Cf. chapitre : « *Onglet Prescription* »).

#### 3.4.1 L'aspect général de l'application


L'application se présente sous forme d'onglets, l'onglet principal étant celui nommé **SURVEILLANCE**.



Au-dessus des onglets, se trouve un bandeau dans lequel sont insérés différents renseignements concernant le patient (état civil, âge, poids, taille, BMI ...).

Nom	Prénom	Sexe	Âge	Localisation	UF	Jour	Taille	Poids	Poids théorique du patient en kg	BMI
Mme CREPIN	Juliette	F	47 ans	Salle1	920001001	J 0	175cm	56kg	66,07kg	18,29

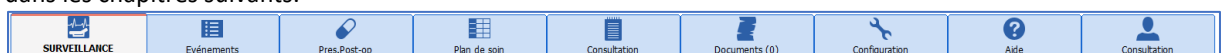Juste en-dessous, se trouve une série d'onglets permettant d'accéder à différentes informations détaillées dans les chapitres suivants.



En-dessous des onglets, se trouve la zone de boutons permettant des accès rapides pour les saisies.

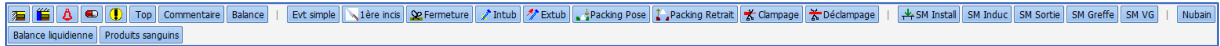


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28







Sur la gauche, se trouve une zone avec d'autres types d'onglets. Et enfin, au milieu, se trouve la feuille d'anesthésie.






### 3.4.1.1 Les boutons du Per opératoire et du Post Opératoire

Le tableau ci-dessous présente la signification des différents boutons de l'application.

Sur la gauche, des boutons permettent l'ouverture ou la fermeture du dossier.

	Bouton d'ouverture du dossier
	Bouton de fermeture du dossier
	Alerte indiquant que des actions importantes n'ont pas été réalisées. Bouton de rappel des éléments importants
	Une ou deux imprimantes permettant de gérer l'impression par défaut, mais aussi les impressions particulières (Cf. chapitre : « <i>L'impression centralisée</i> »)

Sur la droite, d'autres boutons sont présents :

	Messagerie orientée patient
	État des transmissions de données entre les appareils biomédicaux et le logiciel
	Alerte indiquant si des prescriptions sont en attente de validation
	Messagerie interne
	Bouton pour se déconnecter tout en laissant le dossier patient ouvert



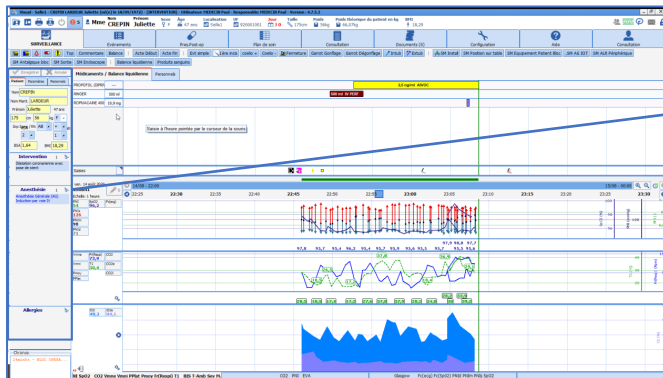
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 3.4.1.2 Le sous-onglet Patient



Patient	Paramètres	Personnels
Nom	CREPIN	
Nom Marit.	LARDEUR	
Prénom	Juliette	47 ans
	175 cm	56 kg F
Grp Sangu / Rh	AB	
	2	1
BSA	1,64	BMI 18,29
<b>Intervention</b> 1		
Dilatation coronarienne avec pose de stent		
<b>Anesthésie</b> 1		
Anesthésie Générale (AG) Induction par voie IV		
<b>Allergies</b>		
Chronos		
49min15s BLOC OPERAT...		

Cet onglet résume les informations importantes concernant le patient. Ces données sont récupérées de la consultation.

Ces champs sont accessibles en écriture en per et post opératoire afin de pouvoir réajuster ce qui était prévu.

L'intitulé de l'intervention vient du champ **Intervention prévue** de la consultation. Quand le dossier sera clôturé, il complètera le champ **intervention réalisée**.

**REMARQUE :** en quittant le logiciel, ou en clôturant le dossier, cet onglet s'enregistre automatiquement. Il est aussi possible d'enregistrer manuellement en cliquant sur le bouton **Enregistrer** situé au-dessus des onglets **Patient** et **Paramètres**.

### 3.4.1.3 Le sous-onglet Paramètres

Cet onglet permet de visualiser les données remontées des appareils biomédicaux mais aussi les données saisies manuellement, les données de laboratoire et les classes ATC.

Seules les classes ATC liées aux médicaments (Plan de soin et Onglet surveillance) administrés au patient avec un débit sont affichées. Comme pour les autres éléments présents dans l'onglet, il est possible de glisser une classe ATC dans une zone de graphe. Si aucun médicament n'a été saisi pour la classe ATC configurée, on affiche le libellé de la classe ATC. Si un médicament a été saisi pour la classe ATC configurée, on affiche le nom du médicament. Attention, si plusieurs médicaments ont été saisis pour la classe ATC configurée, plusieurs zones de paramètres doivent être

Patient	Paramètres	Personnels
Paramètres physiologiques		
- du 14/08/20 à 21:55		
- au 15/08/20 à 01:05		
Donnée manuelle		
...Poids	: 56	
SimulateurCOM 11		
...Fc	: 121,9	
...Fc(SpO2)	: 95	
...Fr(Respi)	: 31	
...O2e	: 44,3	
...O2i	: 47,8	
...PNI	: 9	
...PNIId	: 71	
...PNIIm	: 94	
...PNIIs	: 128	
...SpO2	: 95,4	
...T1	: 24	
SimulateurCOM 4		
...Fc	: 126,8	
...Fc(SpO2)	: 121	
...Fr(Respi)	: 56	
...O2e	: 44,2	
...O2i	: 47,4	
...PNI	: 23	
...PNIId	: 73	
...PNIIm	: 105	
...PNIIs	: 133	
...SpO2	: 95,6	
...T1	: 35,5	

PNI	SpO2	Fc(eq)
78	95,4	
PNIIs		
130		
PNIIm		
102		
PNIId		
76		
Vmne	Fr(Respi)	CO2
	83	
Vmni	T1	CO2e
	21,6	
Pmoy		CO2i
PPlat		
O2i	O2e	
49,5	44,2	



BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



iteur **DIANE**

cal : 3.28

ajoutées.

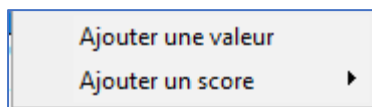
L'affichage d'un médicament dans la zone de graphe est fait en fonction du débit du médicament.

C'est cet onglet qui va permettre à l'utilisateur de personnaliser sa feuille d'anesthésie. En effet, par un système de glisser-déposer, il est possible de ramener les éléments souhaités à la place adéquate. Ils s'affichent alors avec la configuration graphique paramétrée par défaut.


Une fois en place, via un clic droit sur l'élément, il sera possible de configurer le type d'affichage (courbe, aire, flèche ...) mais aussi la vision en tabulaire (= numérique) ou encore la couleur...

Il ne faut pas hésiter à personnaliser sa feuille d'anesthésie. En effet, l'enregistrement des données ne dépend pas du visuel utilisé. Ainsi, chaque utilisateur peut mettre à l'écran les données dont il a besoin en fonction de l'intervention, du patient, des conditions.


Via un clic droit dans la zone, il est possible



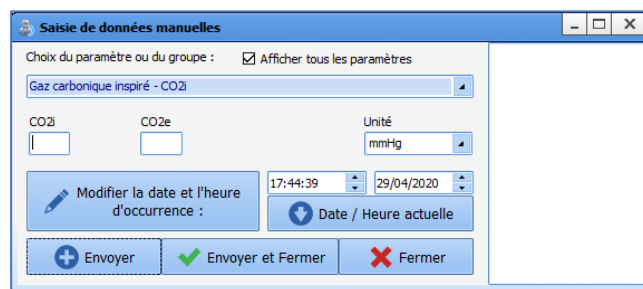d'ajouter un score ou une valeur manuellement.



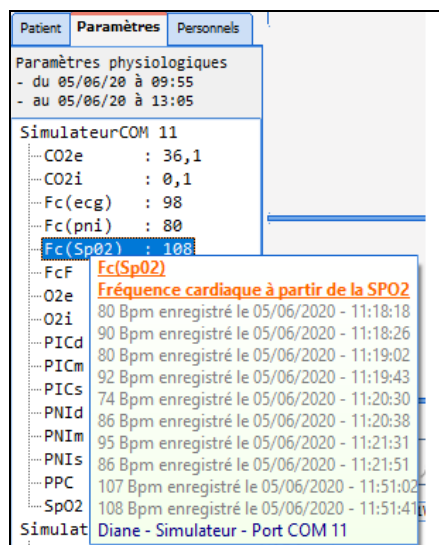Au survol de la souris, il est possible de visualiser les 10 dernières valeurs transmises.



Le clic droit sur chaque donnée présente dans cet onglet propose de saisir une nouvelle valeur sauf pour les classes ATC.

Toutes ces données saisies peuvent être affichées dans la feuille d'anesthésie :



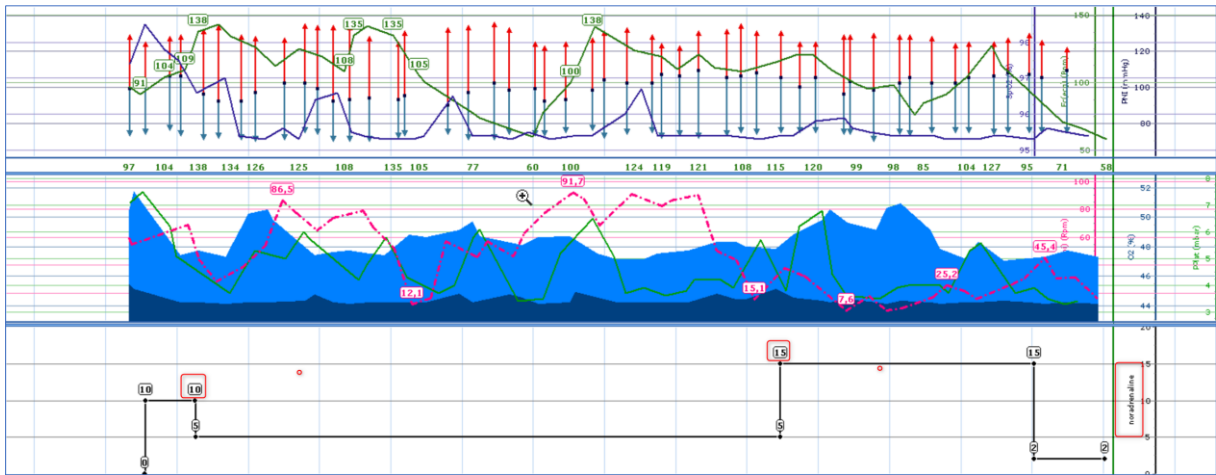
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28





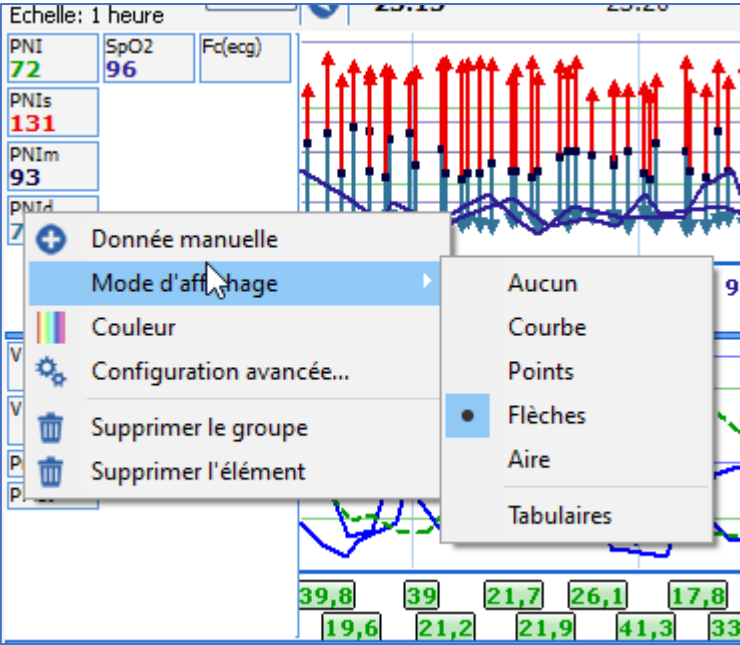Un système de glisser-déposer permet de choisir quels paramètres seront affichés dans cette zone. L'élément déposé est ajouté dans la marge et les valeurs saisies sont reportées sur le graphe. Le clic droit sur un élément permet de configurer son affichage (Mode d'affichage, Type de graphique, Echelle, Couleur ...).



Il est possible d'avoir plusieurs graphiques d'affichage des paramètres dans un seul onglet de surveillance grâce à un fonctionnement de sous-onglets :




Par défaut, le nom des sous-onglets reprend le nom des paramètres physiologiques qui y sont glissés.

### 3.4.1.4 Les chronomètres

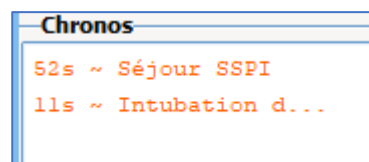Cette zone affiche les chronomètres déclenchés par les évènements qui leur sont dédiés. Il en existe deux types :

- Les chronomètres automatiques configurables, avec ou sans alerte.
- Les chronomètres manuels.



#### 3.4.1.4.1 Intérêt des chronomètres

Le chronomètre peut couvrir deux besoins :

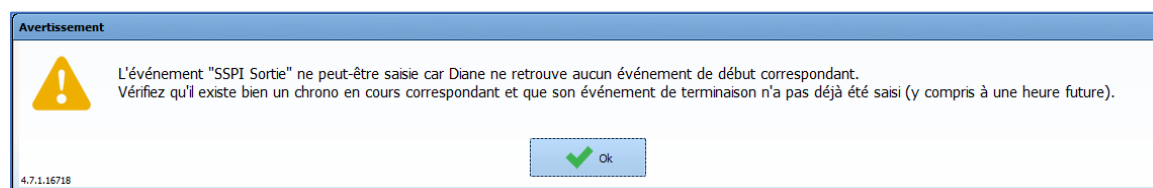
- Le rappel d'une action à réitérer (réinjection d'antibiotique, temps de garrot...) via une fenêtre pop-up d'alerte.
- Simplification de saisie d'une fin d'action.

En effet, le déclenchement d'une action associée à un chronomètre permettra d'avoir accès à l'évènement de clôture de façon aisée. (Cf. chapitre : « [Les différentes méthodes de saisies au cours de la surveillance](#) »)

#### 3.4.1.4.2 Les chronomètres automatiques

Trois éléments caractérisent un chronomètre automatique : son nom, ses conditions de départ et d'arrêt. Le chronomètre **Intubation** est déclenché par l'évènement **Intubation** et sera stoppé par l'évènement **Extubation**. Une alarme peut être générée avec un chronomètre automatique.

**REMARQUE :** Un message **Avertissement Chronomètre** est généré lorsque l'évènement de fin du chronomètre est saisi avant l'évènement de déclenchement du chronomètre.



#### 3.4.1.4.3 Les chronomètres manuels

Un clic droit dans la zone **Chronos**, en bas à gauche de l'onglet **SURVEILLANCE**, affiche un menu qui permet de démarrer un nouveau chrono manuellement. La fenêtre **Nouveau Chrono** s'ouvre afin que vous indiquiez le nom du chrono et l'intervalle de temps entre les avertissements, si vous souhaitez que des avertissements soient générés sur votre chronomètre.

Un clic droit sur un chronomètre manuel ouvre un menu qui vous permet d'**Arrêter**, de **Démarrer le chrono** ou de configurer l'intervalle de temps entre les avertissements.

Cet usage sera particulièrement intéressant pour gérer les réinjections d'antibiotiques ou pour les temps de clampage par exemple.

### 3.4.1.5 Personnels en salle / Médecin responsable



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



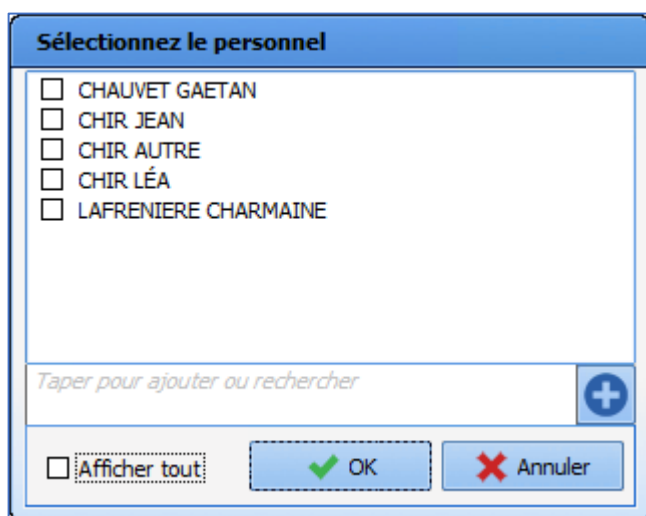
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Cet onglet permet de renseigner le personnel présent en salle d'intervention.

Le bouton **Personnel du jour**, en haut, permet de déterminer que le personnel saisi actuellement sera le personnel pour la journée en cours. Le personnel sera alors rempli automatiquement pour les prochains dossiers.

En bas de cet onglet, se trouve un bouton **Désigner/Valider Responsable** permettant de désigner le médecin responsable de l'anesthésie.


L'ajout du personnel peut être fait en cliquant sur les intitulés des rôles. Cela affiche une fenêtre comme ci-dessous :



Une fenêtre intitulée "Sélectionnez le personnel" avec une liste de noms à cocher : CHAUVET GAETAN, CHIR JEAN, CHIR AUTRE, CHIR LÉA, LAFRENIERE CHARMAINE. En dessous, un champ de recherche avec le texte "Taper pour ajouter ou rechercher" et un bouton "+" à droite. Au bas, un bouton "Afficher tout" avec un bouton "OK" et un bouton "Annuler".

L'écriture dans le champ de recherche mettra en surbrillance les éléments correspondants : il faudra ensuite sélectionner via la case à cocher l'élément voulu. Si la personne n'est pas dans la liste, il se peut qu'elle ne soit pas du secteur, il faudra peut-être cliquer sur la case **Afficher tout**. Enfin, si la personne n'est toujours pas référencée, un clic sur le "+" permettra de valider sa présence sans référence dans les listes.

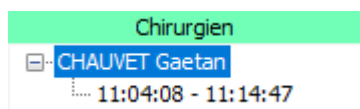Dans la mesure du possible il faudra utiliser préférentiellement les listes afin d'avoir des statistiques fiables.




Un extrait de la liste de personnel montrant le rôle "Chirurgien" en surbrillance. Le nom "CHAUVET Gaetan" est sélectionné, avec une plage horaire de présence indiquée : "11:04:08 - 11:14:47".

Pour chaque personnel, la plage horaire de présence est précisée.

Les rôles affichés dans cet onglet sont paramétrables.

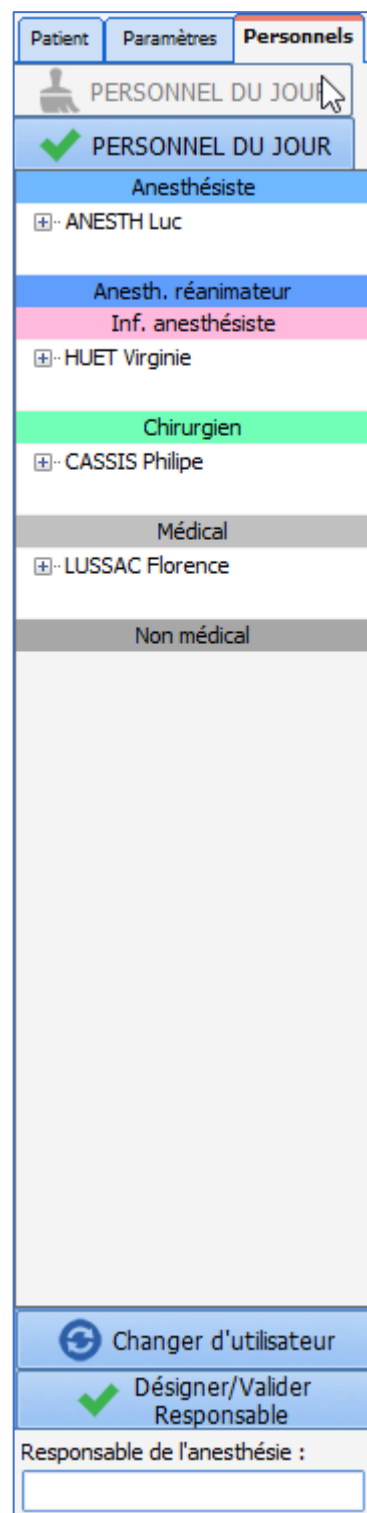
Ces informations sont aussi visibles via l'onglet **Personnels**, permettant une vue différente de la présence des personnels.




L'onglet "Personnels" de l'interface. En haut, des onglets "Patient", "Paramètres" et "Personnels". Le bouton "PERSONNEL DU JOUR" est cliqué. Une liste de rôles est affichée : Anesthésiste (avec ANESTH Luc), Anesth. réanimateur (avec Inf. anesthésiste et HUET Virginie), Chirurgien (avec CASSIS Philippe), Médical (avec LUSSAC Florence), et Non médical. En bas, des boutons "Changer d'utilisateur", "Désigner/Valider Responsable", et un champ "Responsable de l'anesthésie :".

Médicaments / Balance liquidienne	Personnels
LUSSAC Florence	
HUET Virginie	
CASSIS Philippe	
ANESTH Luc	
HEINE Stephanie	

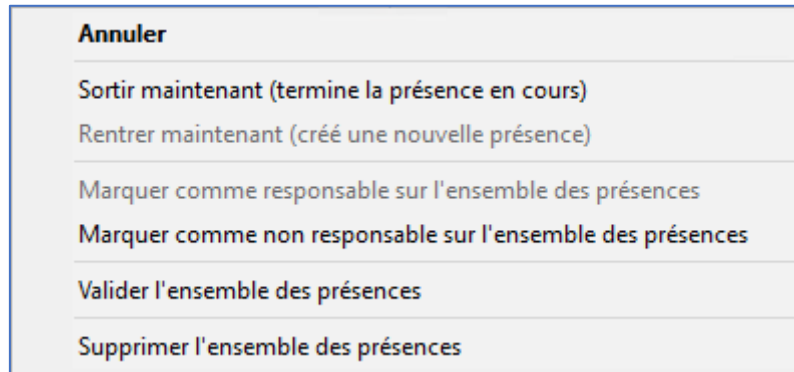
Le clic droit sur le nom de la personne affiche le menu ci-dessous, permettant d'effectuer certaines actions : Sortir/Rentrer, Marquer comme responsable ou non-responsable, Valider les présences ou Supprimer les présences.



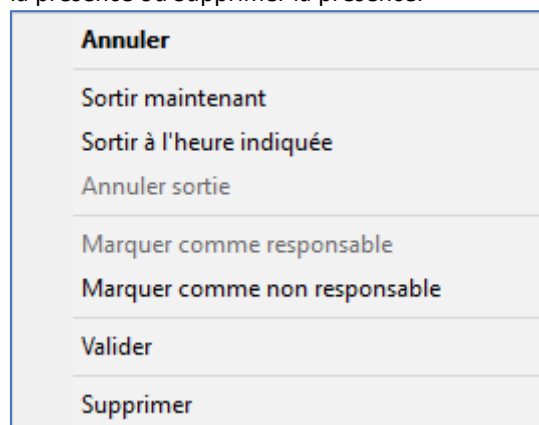Le clic droit sur la ligne représentant la présence affiche le menu ci-dessous, permettant d'effectuer des actions relatives à la présence sur laquelle a été fait le clic : Sortir ou Annuler la sortie, Marquer comme responsable ou non, Valider la présence ou Supprimer la présence.



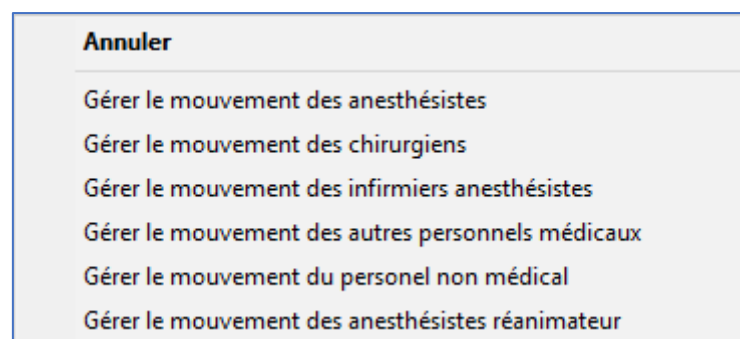Dans cette zone, il est également possible de gérer les mouvements du personnel via un clic droit.





### 3.4.1.6 Le bandeau Médicaments / Balance liquidienne

Le bandeau **Médicaments / Balance liquidienne** permet de renseigner l'administration de produits mais aussi les pertes liquidiennes telles que les saignements, les pertes insensibles, la diurèse...

La barre verte verticale représente l'heure actuelle.

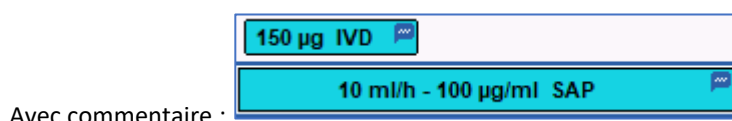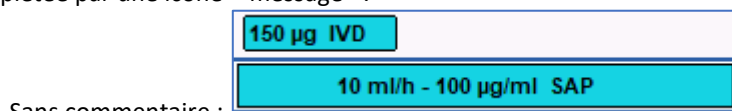Lorsqu'un commentaire est associé à un médicament, un produit sanguin ou une balance liquidienne, la saisie est complétée par une icône « message ».



Les différentes méthodes pour saisir un produit ou une sortie seront vues dans le chapitre « *Les différentes méthodes de saisies au cours de la surveillance* »

Médicaments / Balance liquidienne		Personnels	
DIURÈSE	75 ml		75 ml SONDE
OXYGÈNE (O2)	---	70 % Voie respiratoire	
PROPOFOL (DIPRN)	0,678 mg		2 ml/h - 10 mg/ml SAP
ULTIVA PDRE 2 MG	4,86 µg		5 ml/h - 10 µg/ml SAP
RINGER	500 ml		500 ml IV PERF

### 3.4.1.7 La zone de saisie des évènements

Située entre le bandeau **Médicaments / Balance liquidienne** et la zone de représentation graphique des paramètres, cette zone recueille, sous forme d'icônes, tous les événements, consommables, scores ayant été saisis.

Classiquement, cette zone est fine. Lorsque deux éléments sont saisis sur le même horaire, ils se superposent et un chiffre remplace les icônes. Un clic sur le chiffre tout en maintenant la touche **CTRL** permettra de les dissocier.

Il est possible également d'élargir la zone en se positionnant sur la ligne bleue supérieure ou celle inférieure.


Le survol à la souris d'un marqueur, situé sur la ligne, affiche une bulle d'information indiquant l'événement saisi et son heure d'occurrence. Il en est de même pour les médicaments.

Il est possible de modifier l'heure d'occurrence d'une saisie par un glisser-déposer du marqueur à l'heure souhaitée dans la zone des saisies. Une fenêtre de validation de votre modification vous est demandée. Vous pouvez également supprimer une saisie en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.



Lorsqu'un commentaire est associé à un événement, l'icône est complétée par une pastille rose.

Sans commentaire : 


Avec commentaire : 

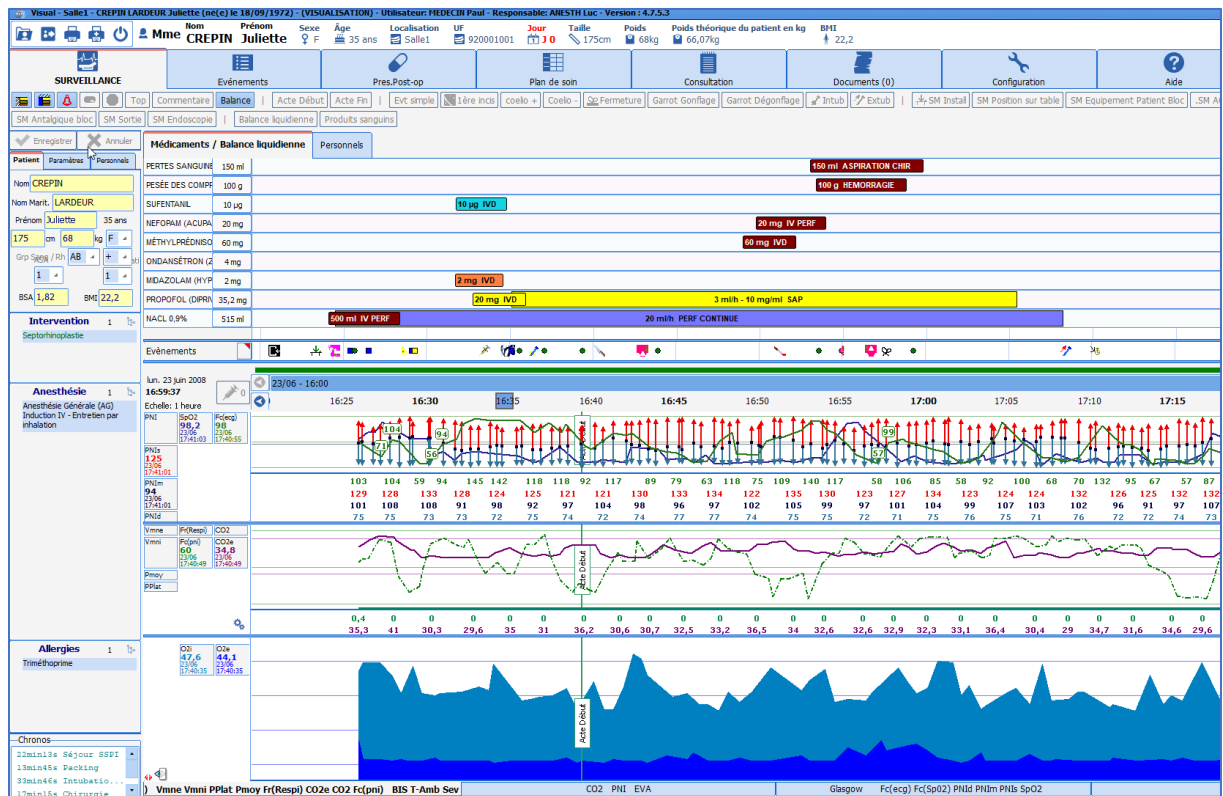
Les différentes méthodes pour saisir un produit ou une sortie seront vues dans le chapitre « *Les différentes méthodes de saisies au cours de la surveillance* ».

### 3.4.1.8 La représentation graphique des paramètres

La représentation graphique des paramètres est synchronisée avec la barre des temps. Les paramètres peuvent être renseignés automatiquement en connectant les appareils biomédicaux à l'ordinateur ou saisis manuellement.

Une zone de graphique comprend autant de paramètres que souhaités. Il existe 3 pages différentes accessibles à l'aide des onglets placés en bas de page.

La taille des 3 zones de graphique est modifiable. Pour cela, glisser-déposer le **Trait bleu** séparant chacune des zones afin de donner la taille que vous souhaitez à la zone de graphiques. Votre curseur doit avoir la forme .




### 3.4.2 Actions Importantes

Lors du paramétrage du logiciel, certains éléments peuvent être configurés comme étant obligatoires. Ainsi la **Feuille d'ouverture de Salle** (ou checklist d'ouverture) est adaptée à chaque site d'anesthésie et, il est proposé de la renseigner dès l'ouverture du logiciel. Par le même mécanisme, des fiches inter patient peuvent être proposées.

### 3.4.2.1 La saisie et la validation de la Feuille d'Ouverture de Salle Opératoire (FOSO)

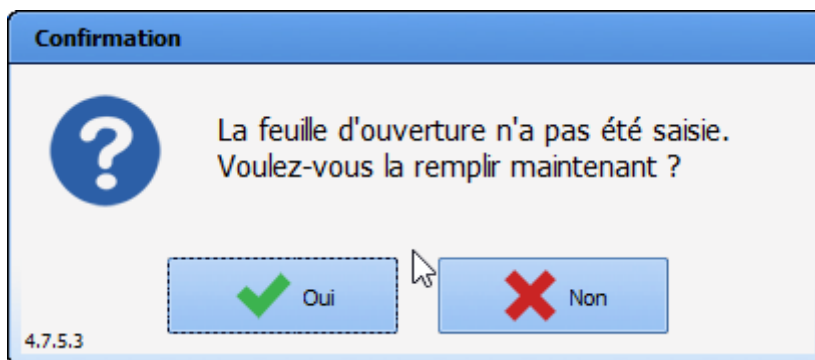Dès l'ouverture du logiciel, il est proposé de saisir la feuille d'ouverture de salle (FOSO).



En cas d'urgence, il est tout à fait possible de passer cette étape en cliquant sur **Non**. Elle pourra être remplie plus tard pendant l'intervention et sera proposée automatiquement à l'ouverture du dossier suivant, jusqu'à ce qu'elle soit complétée. Pendant l'intervention, elle est accessible via le bouton de rappel des éléments importants. (Cf. chapitre : « *Les boutons du per opératoire et/ou post opératoire* »). Elle est également accessible via un le bouton **Feuille Ouverture** dans l'onglet **Configuration** Bouton et dans la fenêtre de sélection du dossier du patient.

Le remplissage de cette fiche est simplifié par un paramétrage proposant des cases à cocher et un bouton associé nommé **Cocher tout**.

The screenshot shows the "Feuille ouverture" form. At the top, it displays "Service : Service Anesthésie", "Bloc : Bloc opératoire", and "Salle : Salle 1". The title "Feuille ouverture" is centered. On the right, it shows the date and time "14/08/2020 - 22:43:34" and a "Page" field. A "Cocher tout" button with a green checkmark is visible. The form is divided into several sections with checkboxes:

- BRANCHER SOURCES**
  - Brancher l'oxygène, le protoxyde d'azote, l'air, le vide, l'électricité, le monitoring sur veille.
  - Mettre l'interrupteur général sur "ON", le débit d'O2 attend 150 ml/mn.
  - Vérifier le fonctionnement de l'aspiration (bocal, vide, sondes).
  - Présence d'une bouteille d'oxygène de secours. Etat de remplissage (> 200 bar).
  - Etalonner la cellule d'oxygène du ventilateur.
  - Vérifier la présence de chaux et le blocage du canister.
  - Brancher le vaporisateur chauffant (selon le protocole anesthésique retenu).
- CIRCUIT D'INDUCTION : BALLON D'INDUCTION, VALVE ET MASQUE**
  - Diriger les gaz frais vers le circuit d'induction, vérifier l'étanchéité.
- CIRCUIT MANUEL : GAZ FRAIS VERS LE BALLON "MACHINE"**
  - Vérifier la montée en pression. Quand la pression > 30 cm H2O, ajuster la valve APL à cette valeur.
  - Fermer le débit de gaz. Si le ballon ne se dégonfle pas : Fuite < 150 ml/mn.
- CIRCUIT VC : DIRIGER LES GAZ FRAIS VERS LE SOUFFLET**
  - Couper les gaz frais. Si le soufflet ne descend pas : Fuite < 150 ml/mn.
  - Mettre la machine en marche, vérifier le déplacement du soufflet.
- DIVERS**
  - Présence d'un ballon autoremplisseur et de sa valve unidirectionnelle.
  - Présence du matériel d'intubation : sondes, masques, filtres antibactériens.
  - Présence d'un laryngoscope fonctionnel et de lames adaptées.
- EVAPORATEUR**
  - Vérifier le remplissage, la limpidité de la solution, la connexion, la rotation de la bague.
- MONITORAGE**
  - Vérifier le branchement, la présence de capteurs et l'état de propreté.
- VÉRIFIER LE BLOC DEBIMETRIQUE (ROBINET 3 VOIES)**
  - Tester l'alarme de manque d'oxygène : Ouvrir l'oxygène et le N2O à fond. Vérifier le ratio O2/N2O.
  - Débrancher le tuyau d'O2. Vérifier l'arrêt de l'administration du N2O et l'émission sonore.
  - Rebrancher l'O2, vérifier l'oxygène rapide.
  - Vérifier le fonctionnement de l'air. Choisir le mélange anesthésique voulu (air ou proto).
  - Vérifier la pression d'alimentation des 3 gaz.
  - Permuter sur air, vérifier le fonctionnement débit litre.

At the bottom, there are fields for "Vérifié par : PAUL" and "Mot de passe :", and buttons for "Imprimer", "Enregistrer", "Enregistrer et fermer", and "Fermer". A checkbox "Prendre en charge la responsabilité de l'anesthésie" is also present.

Pour valider la saisie, la personne connectée doit retaper son mot de passe au niveau de la zone **Vérifié par**. La validation sera faite par un profil médical dans la partie **Validé par**.

Les droits sont gérés par le référent du site.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

La FOSO est à remplir une fois par 24h. Il est possible de paramétrer l'heure à partir de laquelle elle se propose. (Heure de démarrage des blocs opératoires par exemple)

**REMARQUE :** La Feuille d'Ouverture est entièrement configurable par l'administrateur de site. Son paramétrage s'effectue par service, par bloc opératoire, par salle, par lit.

### 3.4.2.2 La saisie et la validation de la Fiche Inter Patient (FIP)

Entre chaque patient, un message propose de saisir la fiche inter patient.

Le remplissage, la validation et l'impression de cette fiche s'effectuent de la même manière que pour la FOSO.

Il est impératif de

The screenshot displays the 'Fiche inter-patient' window. At the top, it shows the service 'Service Anesthésie', the operating block 'Bloc opératoire', and the room 'Salle 1'. The patient's name is 'CREPIN Juliette' and the date/time is '14/08/2020 - 22:52:00'. The main content area is divided into two sections: 'CONTROLE INTER-PATIENT, PAS DE CHANGEMENT DE MONITEUR OU DE VENTILATEUR' and 'CHOISIR LE MELANGE GAZEUX DESIRE'. Each section contains a list of tasks with checkboxes. The 'COMMENTAIRES' section has a text input field. The bottom section, 'SSPI FICHE INTER-PATIENT', also contains a list of tasks with checkboxes. At the bottom of the window, there are fields for 'Vérifié par' (PAUL) and 'Validé par', both with password prompts, and buttons for 'Imprimer', 'Enregistrer', 'Enregistrer et fermer', and 'Fermer'. A checkbox 'Prendre en charge la responsabilité de l'anesthésie' is also present.

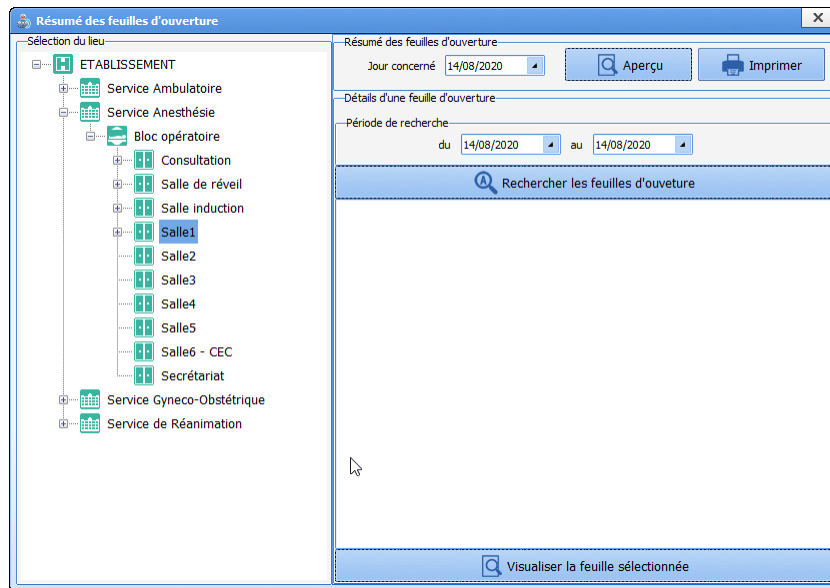
### 3.4.2.3 Résumé des feuilles d'ouverture

Dans l'onglet configuration, se trouve un bouton permettant d'accéder à un moteur de recherche des feuilles d'ouverture de salle.

Il sera possible de chercher les FOSO (Feuille d'ouverture de salle d'opération) en fonction du site, de la date...








### 3.4.2.4 Les autres actions importantes

D'éventuels éléments bloquants peuvent être mis en place par vos référents. Souvent, ces éléments sont choisis parmi les critères IPAQSS afin de s'assurer que les éléments médico-légaux soient bien renseignés. (Score de sortie de SSPI, Complications, Évaluation de la douleur, nom du médecin responsable, saisie de la VPA...).

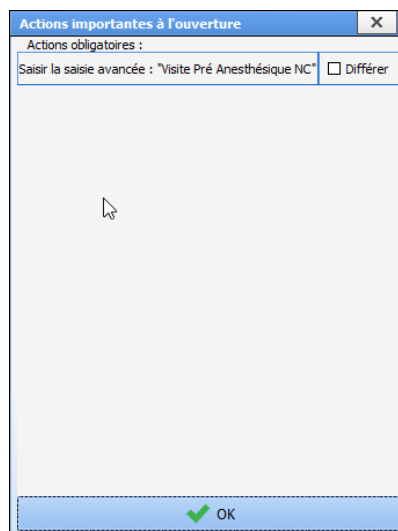Il est possible de déterminer qu'une saisie avancée sera à réaliser dès le démarrage d'une intervention (exemple de la Visite Pré Anesthésique quand elle est remplie en per opératoire). Dans ce cas, la saisie est proposée dès l'ouverture du dossier patient. L'action est différable. Elle sera accessible dans le bouton de rappel des événements importants.




Pour renseigner la saisie avancée, il suffit de cliquer sur la ligne concernée.

Si la case **Différer** est active, il est possible de reporter la saisie de cet élément en cliquant sur le bouton **OK**.

Si la Saisie avancée n'est pas renseignée, un rappel se fera dans le bouton de rappel des éléments

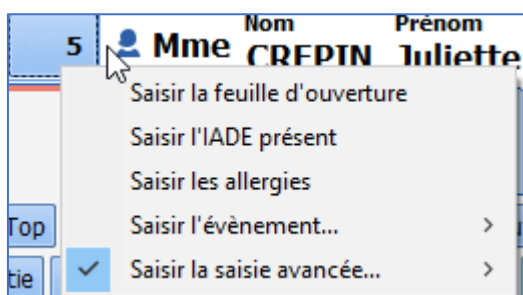importants à saisir. Un clic sur le bouton permet de voir puis de saisir les éléments jugés importants.



Ces éléments, s'ils ne sont toujours pas saisis seront rappelés au moment de la fermeture du dossier.

**Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?**

**Fermer le dossier du patient Juliette CREPIN ?**

**Il reste 2 action(s) bloquante(s) non renseignée(s) :**

- Saisir la feuille d'ouverture
- Saisir la saisie avancée...

**Il y a 5 avertissement(s) :**

- Saisir l'IADE présent
- Saisir le risque ASA
- Saisir le type d'anesthésie
- Saisir les allergies
- Saisir l'évènement...

**Choisissez les actions à effectuer pour le dossier**

Cloturer le dossier

Transférer : Réveil

Heure de fin d'intervention: 12:30:37 17/08/2020

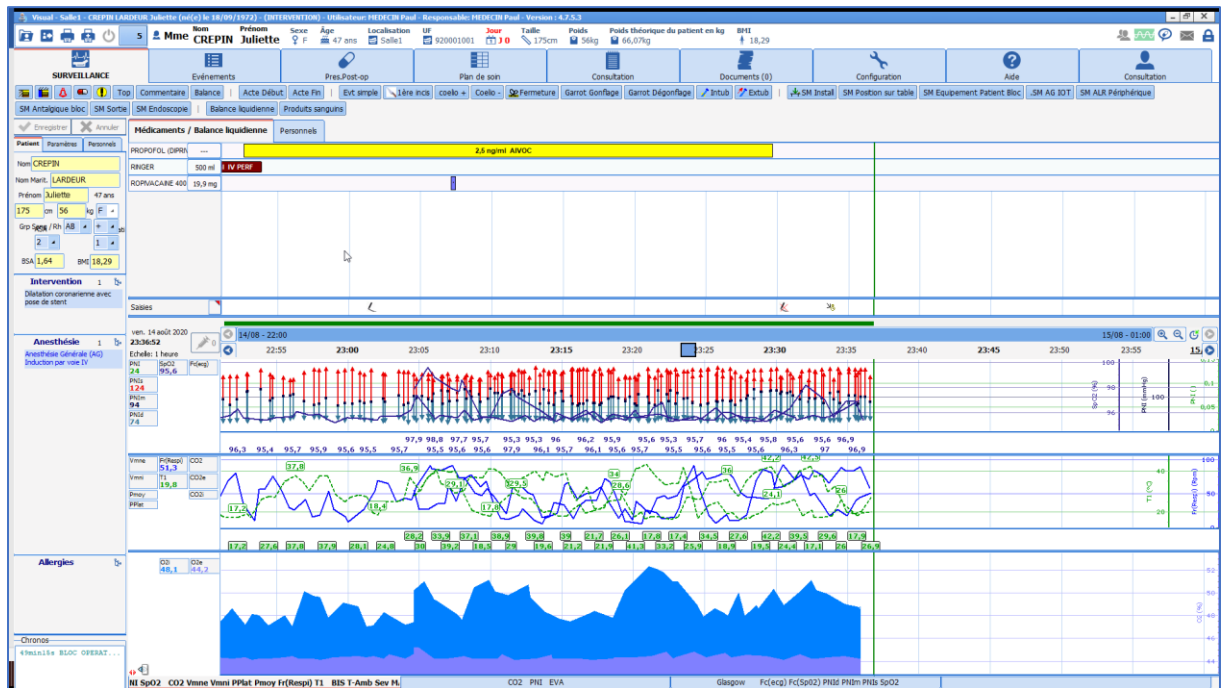
Imprimer le dossier

### 3.4.3 L'onglet Surveillance - la feuille d'anesthésie

La surveillance de Per Opérateur et Post Opérateur permet à l'utilisateur de documenter le dossier au fur et à mesure de l'intervention.

Toutes les saisies peuvent être faites en choisissant l'entrée correspondante dans le menu apparaissant au clic droit dans la bande d'évènements.





Le survol à la souris d'un marqueur, situé sur la ligne, affiche une bulle d'information indiquant l'événement saisi et son heure d'occurrence. Il en est de même pour les médicaments.

**REMARQUE :** La feuille de surveillance est préconfigurée par les référents. Elle est adaptable par l'utilisateur en cours de procédure.

Toutes les données saisies et enregistrées seront associées au dossier même si elles ne sont pas paramétrées pour le visuel au moment de la procédure.

### 3.4.3.1 Les différentes méthodes de saisies au cours de la surveillance

Pour chaque élément, il existe différentes méthodes de saisies. Chaque méthode amènera l'élément à la place attendue. Ces différentes méthodes de saisie sont détaillées dans les prochains chapitres. Elles seront utilisées en fonction de la situation.

La saisie des événements et des médicaments peut s'effectuer en temps réel, a posteriori ou de façon anticipée.

Il est possible de modifier l'heure d'occurrence d'une saisie en cliquant-glissant le marqueur à l'heure souhaitée dans la zone des saisies. Une fenêtre de validation de la modification apparaît. Il est également possible de supprimer une saisie en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris.

Vous pouvez également modifier l'heure d'occurrence de la saisie ou la supprimer par le biais de l'onglet **Événements** (Cf. chapitre : « *L'onglet Événements* ») ou à l'aide des boutons spécifiques **Modifier un événement**, **Supprimer un événement**, **Modifier un médicament** et **Supprimer un médicament**

#### 3.4.3.1.1 LES événements, environnements patient, complications et consommables

Ces éléments sont accessibles via un clic droit dans la barre de saisie des événements.

**Événements :** On retrouve dans cette rubrique les événements qui ont trait à l'anesthésie (Induction, Intubation...), à la chirurgie (1<sup>re</sup> incision, Clampage...) ... Les événements sont symbolisés par un marqueur

■. La saisie des événements est simple. Elle consiste à naviguer dans le menu contextuel déroulant. Déplacez le curseur de la souris sur **Événements**, puis glissez sur l'événement que vous souhaitez saisir. Seul le dernier item de chaque branche sera enregistré.

**Environnements Patient** : Vous avez la possibilité d'insérer tous les éléments qui concernent le patient comme sa posture, son type de ventilation, son type de voie veineuse... Les environnements patients sont symbolisés par un marqueur ■ où l'on insère la posture du patient. La saisie des environnements patients est identique à celle des événements.

**Complications** : Toutes les complications, qu'elles soient allergiques, cardio-vasculaires... peuvent être insérées. Les complications sont symbolisées par un marqueur !. Les complications que vous aurez insérées pendant l'intervention seront automatiquement reprises lors de la programmation de la prochaine intervention de votre patient. La saisie des complications est identique à celle des événements.

**Consommables** : Vous avez la possibilité d'indiquer tous les consommables utilisés pendant l'intervention comme les compresses, les aiguilles, les sondes... Les consommables sont symbolisés par un marqueur ■. La saisie des consommables est identique à celle des événements, mis à part le fait que les deux derniers items seront enregistrés, contre le dernier pour les autres.

Vous avez la possibilité d'insérer un événement, un environnement patient, une complication ou un consommable qui ne se trouve pas dans les listes configurées de votre service, votre bloc opératoire, votre salle... mais qui a été créé dans la configuration de l'hôpital en cliquant sur **Autre choix...**

Il est possible de configurer des saisies automatiques d'événements dans l'outil de configuration lors des phases d'ouverture/fermeture de dossiers (entrées en bloc, sorties du bloc, entrées en réveil, sorties de réveil, repris en bloc, etc...) à partir de la section **Événements automatiques lors de l'ouverture et la fermeture d'un dossier** de l'onglet **Paramétrage de Visual** dans l'outil de configuration.

**Remarque : Toutes ces listes sont entièrement configurables par votre administrateur de site. Leur paramétrage s'effectue par service, par bloc opératoire, par salle.**

#### 3.4.3.1.2 Les tops

Il est possible d'insérer un top par le biais du bouton spécifique **Saisie d'un top.**



Un **Top** est un événement non spécifié qui peut être saisi afin de marquer l'horaire d'un événement important. Cela vous permet de repérer l'heure exacte d'un problème, comme une complication par exemple, et de continuer à vous occuper de votre patient. Le Top est symbolisé par un ? sur la ligne des marqueurs. Vous devez ensuite affecter à ce top l'événement qui lui correspond en cliquant droit dessus.

Attention, si le top n'est pas renommé avant la fermeture du dossier patient, celui-ci ne sera pas enregistré.

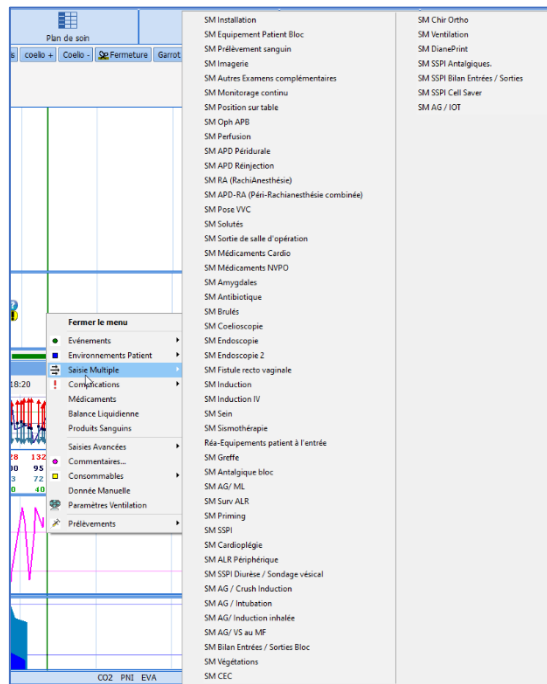
#### 3.4.3.1.3 Les saisies multiples

Les saisies multiples sont particulièrement utilisées à certains moments-clés de l'anesthésie (arrivée du patient, induction, réveil en salle du patient...), pour lesquels de nombreuses saisies sont à réaliser sur un temps court.

Elles sont accessibles via des boutons en haut de l'application et/ou via un clic dans la barre **Saisies >> Saisie Multiple.**

Pour l'utilisation de la saisie multiple, se référer au chapitre « **Saisie multiple** ».








### 3.4.3.1.4 Les médicaments, balances liquidiennes et produits sanguins

#### 3.4.3.1.4.1 Sélectionner un médicament ou une perte liquidienne

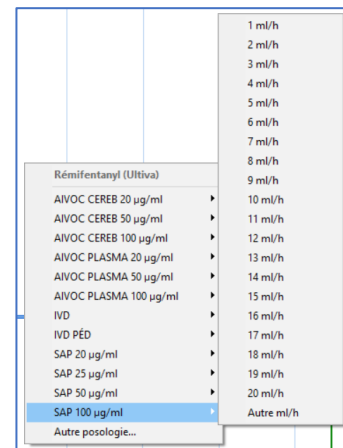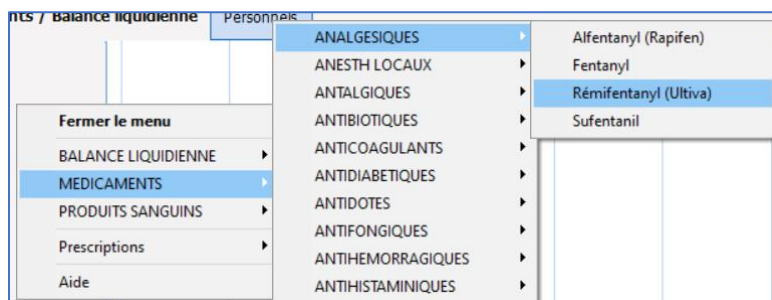Pour renseigner une administration et/ou une perte liquidienne, un clic dans la zone **Médicaments / Balance liquidienne** ouvre un menu. Les médicaments sont classés par classe thérapeutique. Une fois le médicament sélectionné, il faudra choisir la voie d'administration et la posologie désirée.





Il est possible aussi d'utiliser le bouton spécifique . Taper les premières lettres du médicament permettra une recherche rapide de celui-ci. Les médicaments correspondant aux lettres renseignées s'affichent dans la fenêtre inférieure du côté gauche. Il faudra alors le sélectionner, ce qui fera apparaître dans la partie de droite son emplacement dans l'arbre vu ci-dessus et vous pourrez ensuite sélectionner sa voie d'administration et sa posologie.


Si le médicament, la voie d'administration ou la posologie ne sont pas affichés dans la liste, cliquez sur **Autres médicaments** ou **Autre posologie**. La fenêtre ci-dessous s'affiche.

Indiquez le nom du médicament, en bas à gauche de la fenêtre, si c'est nécessaire. Sinon, sélectionnez-le dans la liste. Indiquez également la **Voie d'administration**, la **Posologie**, l'**Unité** et la **Concentration** de votre produit.

Si vous souhaitez réaliser une conversion en fonction du poids de votre patient, vous allez pouvoir utiliser les différents boutons prévus à cet effet dans la fenêtre.

Si vous cliquez sur le bouton , vous allez pouvoir calculer la posologie massique en fonction de la posologie et de la concentration. Pour ce faire, vous devez indiquer la posologie, la concentration et l'unité de la conversion.

Si vous cliquez sur le bouton , vous allez pouvoir calculer la concentration en fonction de la posologie et de la posologie massique. Pour ce faire, vous devez indiquer la posologie, la conversion et l'unité de la concentration.

Si vous cliquez sur le bouton , vous allez pouvoir calculer la posologie en fonction de la posologie massique et de la concentration. Pour ce faire, vous devez indiquer la concentration, la conversion et l'unité de la posologie.

Vous pouvez modifier l'heure d'occurrence avant de valider la fenêtre en cliquant sur le bouton **OK**.


On peut noter trois modes d'injection et d'affichage des médicaments différents : les médicaments de type seringue auto pulsée (injection en continu), les médicaments de type respirateur et les injections flash.

**Les injections de type Seringue Auto Pulsée (SAP)** peuvent être saisies manuellement ou récupérées automatiquement : une barre d'évolution est utilisée pour représenter les injections en continu. Elle est synchronisée avec la barre des temps.


Lorsque le débit change ou qu'il est stoppé, la couleur de la barre représentant l'ancien débit change également. *Vous pouvez constater dans l'image ci-dessous que l'Ultiva a été injecté en SAP avec une concentration de 20µg/ml. L'injection a démarré avec une posologie de 10ml/h, puis de 5ml/h. L'évolution de ce nouveau débit continue sous la même forme que la précédente barre d'évolution. Le total injecté est indiqué dans la case prévue à cet effet, sur la droite du nom du médicament.*

Vous pouvez saisir un médicament en SAP sans préciser de concentration, auquel cas le volume injecté sera calculé automatiquement.


Médicaments / Balance liquidienne		Personnels	
RÉMIFENTANYL (U)	12,4 µg	10 ml/h - 20 µg/ml SAP	5 ml/h - 20 µg/ml SAP
AMOXICILLINE (CL)	1 g		1 g IVD
CEFAZOLINE	3 g		3 g - IVD - 2 Saisies
CISATRACURIUM (C)	3,08 mg	3 mg IVD	ml/h - 2 mg/ml SAP
DIPRIVAN	9,77 mg		3 mg/ml TCI plasmatique - 20SIM

Il est possible de récupérer de façon automatique les données d'un pousse-seringue. Pour ce faire, mettez le pousse-seringue en marche. Installer la seringue et indiquez votre débit directement sur le pousse-seringue. Une fois que vous avez validé votre débit (les flèches vertes du pousse seringue clignotent), vous allez pouvoir visualiser à l'écran l'évolution de votre SAP. Selon le type d'équipement sur lequel vous êtes connecté, il vous faudra parfois renseigner le nom du produit en cliquant sur le bouton  1, situé en dessous de **Saisies**. Vous pouvez constater que le **Diprivan** a été injecté en SAP avec une posologie de 3mg/ml.

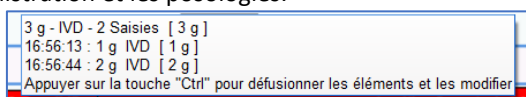Quand deux saisies sont trop rapprochées et risquent de se superposer, le système les cumule comme vous pouvez le constater. Un simple survol à la souris affiche une info bulle vous indiquant les heures d'injection, les voies d'administration et les posologies.



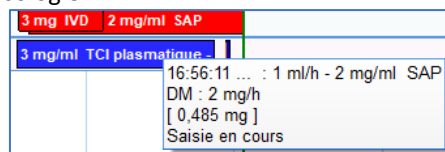Pour les défusionner, il suffit d'appuyer sur la touche **CTRL**. De même, si une SAP et une injection flash se superposent, il vous suffit de survoler la SAP à la souris pour qu'une info bulle affiche l'heure de début de la SAP, sa concentration et sa posologie.



#### 3.4.3.1.4.2 Gestion d'une réinjection

Quand un médicament a déjà été renseigné au cours de l'intervention, il est possible de saisir une nouvelle posologie en cliquant directement sur la ligne du médicament.

- Si vous cliquez sur le nom du médicament, l'heure d'injection sera l'heure actuelle.
- Si vous cliquez sur la ligne du médicament, l'heure d'injection sera celle de l'endroit où vous avez cliqué.

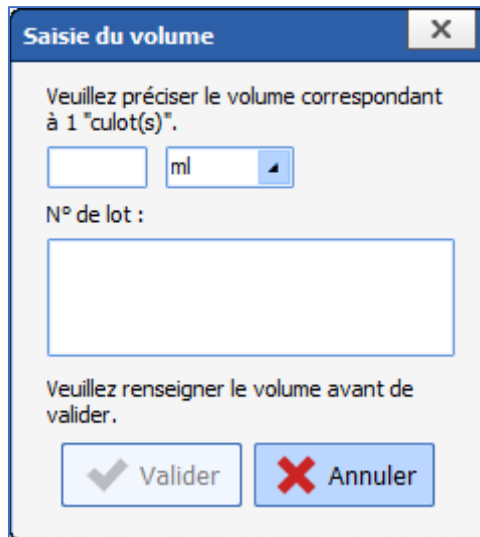
Lorsque vous cliquez sur le marqueur représentant le médicament injecté ou sur la ligne du médicament, vous avez la possibilité d'insérer une **Autre posologie**, de **Reprendre** ou d'**Arrêter la SAP** ou de la **Supprimer**.

**REMARQUE :** Vous pouvez visualiser un certain nombre d'informations en survolant les saisies à l'aide de la souris.


#### 3.4.3.1.4.3 Saisie du volume des culots et des poches

Lorsqu'un médicament est administré en culot ou en poche, une fenêtre de saisie du volume s'affiche si le médicament a été configuré avec la demande de saisie du volume.





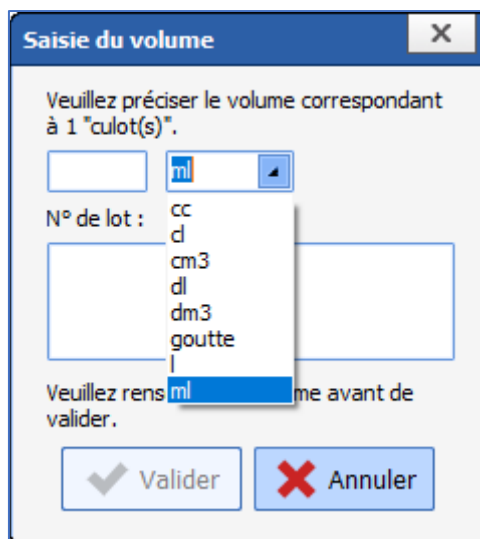Le champ **N° de lot** permet la saisie de la référence du culot. Il est également possible de scanner le code barre du culot.




Il est possible de modifier l'unité du volume, qui est en **ml** par défaut.

Selon le paramétrage, la saisie du numéro de lot peut être obligatoire : dans ce cas, le bouton Ok n'est activé que si le volume ET le numéro de lots sont saisis.



#### 3.4.3.1.5 Les commentaires écrits


Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur **Commentaires** : La fenêtre **Saisie d'un commentaire** s'ouvre. Écrivez dans la zone prévue à cet effet.

Les commentaires écrits sont symbolisés par un  sur la ligne des marqueurs.

#### 3.4.3.1.6 Les paramètres de ventilation

Si votre respirateur ne dispose pas de liaison RS232, d'HL7 locale ou d'HI7 réseau pour la récupération automatique des paramètres, il est possible de saisir ces paramètres de ventilation manuellement.

Dans le menu contextuel, déplacez le curseur de la souris sur **Paramètres Ventilation**. Une fenêtre **Paramètres de Ventilation** s'ouvre. Saisissez les différents éléments des paramètres de ventilation à l'aide des listes déroulantes prévues à cet effet (Ventilation, vt(-), FR, Rapport i/e, FiO2, Pep, Pression, Ai, No, DV). La date et l'heure d'occurrence peuvent être modifiées. Cliquez sur le bouton **OK** pour valider votre saisie.

Les paramètres de ventilation sont symbolisés par un  sur la ligne des marqueurs.

Vous avez également la possibilité d'insérer un paramètre de ventilation par le biais du bouton spécifique **Paramètres de ventilation**.

**REMARQUE** : les paramètres de ventilation sont configurables par votre référent de site.

#### 3.4.3.1.7 Les données manuelles

Il est possible de saisir des données manuellement.

Dans le menu de la barre de saisie, déplacez le curseur de la souris sur **Donnée Manuelle**. Une fenêtre **Saisie de données manuelles** s'ouvre. Choisissez le paramètre ou le groupe de paramètres que vous souhaitez saisir manuellement à l'aide de la liste déroulante. Vous devez ensuite remplir les différents champs qui vous sont proposés en fonction du paramètre choisi précédemment. La date et l'heure d'occurrence peuvent être modifiées.

Cliquez sur le bouton **Envoyer** afin que votre saisie manuelle soit prise en compte. Le bouton **Envoyer et fermer** permet de fermer la fenêtre **Saisie de données manuelles** sans être obligé de cliquer sur le bouton **Fermer**.

Cette saisie s'affiche dans la zone des **Valeurs Actuelles** du sous-onglet **Paramètres** (Cf. chapitre : « [Le sous-onglet Paramètres](#) »). Tout comme les autres paramètres, ce paramètre peut être inséré dans la zone des graphiques afin d'en suivre son évolution (Cf. chapitre : « [L'ajout ou la suppression d'un paramètre dans la zone graphique](#) »).

Vous avez également la possibilité d'insérer une donnée manuelle par le biais du bouton spécifique



2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Donnée Manuelle.



### 3.4.3.1.8 Les artefacts

Vous pouvez indiquer la présence d'un artefact par le biais du bouton spécifique **Saisie d'artefact**. Les artefacts sont symbolisés par un  sur la ligne des marqueurs.

## 3.4.4 Les composants rencontrés en per opératoire ou en post opératoire

Présentation rapide des composants habituellement rencontrés en **per opératoire** et en **post opératoire**. La feuille d'anesthésie est pré-paramétrée par le référent du site. Toutefois, elle est personnalisable par l'utilisateur en temps réel afin de prendre en compte les particularités de la procédure en cours.

### 3.4.4.1 L'ajout ou la suppression d'un paramètre dans la zone graphique

Pour visualiser un paramètre sous forme graphique, glisser-déposer ce paramètre, à l'aide de la souris, de la zone **Valeurs Actuelles** vers la zone des **Graphiques**. Tant que le curseur de la souris représente un , ne lâchez pas le clic gauche de votre souris. Pour que le paramètre soit pris en compte, votre curseur de souris doit avoir la forme . Dès que vous relâchez le clic gauche de votre souris, le paramètre, symbolisé par son abréviation et sa ou ses valeurs instantanées, s'affiche sur la zone de courbes. Un clic droit de souris sur le paramètre situé dans la zone des graphiques affiche un menu qui vous permet de supprimer ce paramètre de la zone des graphiques.

### 3.4.4.2 Les modes d'affichage des paramètres

Les paramètres peuvent être affichés selon plusieurs modes, le tableau ci-dessous indique les différents modes d'affichage et nos conseils d'utilisation :

Modes d'affichage	Conseil d'utilisation
<b>Aucun</b>	N'affiche pas graphiquement le paramètre. Utile en conjonction avec le mode <b>Tabulaire</b> .
<b>Courbe</b>	Convient pour l'ensemble des paramètres.
<b>Tabulaire</b>	Convient pour l'ensemble des paramètres.
<b>Flèche</b>	Ne concerne que les paramètres mesurés de manière discontinue ( <i>par exemple la PNI</i> ). Seul un paramètre à 3 entrées physiologiques va apparaître dans la zone graphique dans ce cas.
<b>Aire</b>	S'applique aux zones de courbes ne comportant qu'un paramètre à deux entrées (par exemple un gaz inspiré et expiré) ou deux paramètres à une seule entrée mais ne se croisant pas.
<b>Zoom d'un paramètre</b>	Double-cliquez, à partir de la zone <b>Valeurs Actuelles</b> , ( <i>Colonne gauche onglet Paramètres</i> ) sur un ou plusieurs paramètres afin d'en obtenir un zoom continuellement visible à l'écran. Ce gros nombre peut être repositionné par l'utilisateur. <i>Voir l'exemple de la Fc(SpO2)</i> .  Ce mode de visualisation est très utile pour la surveillance rapprochée d'un paramètre particulier.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 3.4.4.3 Le choix de l'échelle des temps

Un clic droit sur la barre des temps (entre la ligne des marqueurs et la zone des graphiques), fait apparaître un menu contextuel permettant de choisir l'échelle des temps souhaitée.

Vous avez la possibilité d'afficher vos graphiques sur une période de 15 minutes ou de 30 minutes pour les petites interventions, sur une période d'une, de deux, de quatre ou de huit heures en fonction de la durée de l'intervention que vous êtes en train de réaliser. Si vous sélectionnez l'échelle automatique, l'échelle se modifiera d'elle-même en fonction de la durée de l'intervention.

**REMARQUE :** Le temps réel permet simplement de visualiser en temps réel les données issues des moniteurs biomédicaux, et ceci dans l'échelle choisie précédemment. L'option **Temps réel** n'est pas visible en mode **Visualisation**.

### 3.4.4.4 Le changement des couleurs d'affichage

**Au niveau des zones de courbes :** Un clic droit de souris sur la valeur instantanée du **Paramètre**, dans la zone des graphiques affiche la fenêtre **Configurer l'affichage du Paramètre**. Pour changer la couleur, cliquez sur la zone **Couleur** et choisissez la couleur que vous souhaitez à partir de la palette. Cette palette de couleurs s'utilise de la même manière que celle de Windows. Vous pouvez également choisir l'**Épaisseur** et le **Style** du trait (Continu, Pointillés...).

Par défaut, l'item **Échelle automatique** est précoché. Il vous est possible de définir manuellement l'**Échelle** du paramètre en indiquant l'échelle **Min** et **Max** dans les cases respectives. Nous conseillons d'ailleurs aux utilisateurs d'indiquer ces échelles minimales et maximales plutôt que d'utiliser l'échelle automatique. En effet, en cas d'Artefact lors de la récupération des données physiologiques des équipements biomédicaux, les courbes risquent d'être illisibles (lors de l'impression, les artefacts sont systématiquement supprimés). Il est également possible de modifier le mode d'affichage des paramètres (graphique, tabulaire...) pour la session qui est ouverte.


Un clic droit dans la zone des paramètres permet de changer la couleur du fond des différentes zones de graphiques. Cette palette de couleurs s'utilise de la même manière que celle de Windows.

**REMARQUE :** La couleur d'impression des courbes est celle qui est configurée sur le poste duquel vous lancez l'impression de l'intervention de votre patient.



### 3.4.4.4.1 Les alarmes

Il est possible d'activer ou non l'affichage des alarmes sur la ligne des marqueurs et au travers de la fenêtre **Alarmes !** par le biais du bouton spécifique **On/Off Alarmes**.

Un symbole , situé à côté de la zone de **Saisies** vous signalera le fait que les alarmes sont affichées sur la ligne des marqueurs.

## 3.4.5 L'onglet Événements

Événement	H.Occurrence	H.Saisie	Catégorie	Saisi par	Commentaire	Alarme	H.Début	H.Fin
Alérette [10]	31/07 11:34:55	11:35:09	Score	Diane SYSTEH				
Alérette [8]	31/07 11:10:42	11:33:15	Score	Diane SYSTEH				
Installation sur table	31/07 10:56:42	11:01:03	Environnements ...	Diane SYSTEH				
Position Décubitus dorsal	31/07 10:54:42	11:01:03	Environnements ...	Diane SYSTEH				
Sortie vers la SSIPI	31/07 10:50:33	11:02:01	Événements	Diane SYSTEH				
Arrivée du patient - Dé...	31/07 10:48:49	11:01:03	Événements	Diane SYSTEH				
Début O2 Nasque	31/07 10:39:09	11:02:01	Événements	Diane SYSTEH				
Nasque Facial Retrait	31/07 10:37:10	11:02:00	Événements	Diane SYSTEH				
Attente place en SSIPI	31/07 10:37:05	11:02:01	Événements	Diane SYSTEH				
Reprise Ventilation Spa...	31/07 10:34:25	11:01:59	Événements	Diane SYSTEH				
Changement de position	31/07 10:33:47	11:01:56	Événements	Diane SYSTEH				
Acte Fin	31/07 10:33:36	11:01:12	Événements	Diane SYSTEH				
Position Décubitus dorsal	31/07 10:33:03	11:01:56	Environnements ...	Diane SYSTEH				
Acte Début	31/07 10:29:17	11:01:12	Événements	Diane SYSTEH				
Acte Fin	31/07 10:28:55	11:01:56	Événements	Diane SYSTEH				
Protection - fermeture ...	31/07 10:28:22	11:01:03	Événements	Diane SYSTEH				
Lésion trachéale	31/07 10:28:00	11:01:12	Complications	Diane SYSTEH				
CORHACK [2]	31/07 10:26:54	11:02:13	Score	Diane SYSTEH				
Intubation par mandrin...	31/07 10:26:27	11:01:03	Environnements ...	Diane SYSTEH				
Auscultation pulmonaire...	31/07 10:26:27	11:01:03	Événements	Diane SYSTEH				
Sonde d'intubation: 6,5	31/07 10:25:48	11:01:03	Consommables	Diane SYSTEH				
Pré-oxygénation	31/07 10:19:56	11:01:03	Événements	Diane SYSTEH				
Voie Veineuse Périphériq...	31/07 10:18:22	11:01:03	Environnements ...	Diane SYSTEH				
Cathon: G20	31/07 10:17:27	11:01:03	Consommables	Diane SYSTEH				
Patient perfusé en salle...	31/07 10:16:21	11:01:03	Événements	Diane SYSTEH				
Fonction d'un épanche...	31/07 10:06:36	10:07:08	Événements	Diane SYSTEH				
Intubation difficile Fin	31/07 10:02:32	10:03:03	Complications	Diane SYSTEH				
Intubation difficile Début	31/07 10:01:11	10:01:11	Complications	Diane SYSTEH				
SSIPI Arrivée	31/07 10:00:30	10:00:30	Événements	Diane SYSTEH				
Entrée de CHR3 Jean	31/07 09:48:08	09:48:08	Mouvement Pers...	Diane SYSTEH				
Entrée de AM3TH Bruc	31/07 09:48:08	09:48:08	Mouvement Pers...	Diane SYSTEH				
Entrée de SYSTEH Diane	31/07 09:48:07	09:48:07	Mouvement Pers...	Diane SYSTEH				

Médicament	Voie	Numéro S...	Poso	Unité	Concen	Unité C.	H.Occurrence	H.Fin	H.Saisie	Total	Unité T.	Bal. Liq.	Saisi par	Commentaire
Surbe	SUBP		75	ml			31/07 10:54:03		10:58:11	75	ml	-75 ml	Diane SYSTEH	
Ringer	IV PERF		500	ml			31/07 10:49:35		11:01:03	500	ml	+500 ml	Diane SYSTEH	
ULTIVA PORE 2 HG (...)	SAP		5	ml/h	10	µg/ml	31/07 10:44:50	10:57:24	10:52:34	10,473	µg	+1,047 ml	Diane SYSTEH	
Ringer	IV PERF		500	ml			31/07 10:35:41		10:57:48	500	ml	+500 ml	Diane SYSTEH	
Propofol (Diprivan)	SAP		2	ml/h	10	mg/ml	31/07 10:31:52	11:01:12	10:57:05	9,886	mg	+0,989 ml	Diane SYSTEH	
Oxyptne (O2)	Voie resp...		70	%			31/07 10:13:57	11:02:17	10:51:08	0	%		Diane SYSTEH	

Il est possible de trier la liste des événements, des médicaments et des alarmes en cliquant sur les intitulés des colonnes de la fenêtre.

### 3.4.5.1 Le journal des événements

On retrouve la liste de tous les **Événements** (*Événements, Environnements Patient, Complications, Consommables, Commentaires et Paramètres de ventilation*) saisis tout au long de l'intervention, avec les heures d'**Occurrence** et de **Saisie**.

Ces événements apparaissent dans l'ordre d'occurrence décroissant afin que le dernier événement inséré soit toujours noté en haut du **Journal des événements**.

Si vous cliquez sur l'une des saisies, un menu vous permet de supprimer cet événement ou de modifier son heure d'occurrence. Un message de **Confirmation** vous proposera de valider chaque fois votre modification ou votre suppression.

**REMARQUE** : Si cette saisie a été effectuée au cours d'une session précédente, vous ne pouvez plus la modifier, ni la supprimer.

À partir de l'onglet **SURVEILLANCE**, vous avez la possibilité de modifier l'heure d'occurrence d'un événement en le cliquant glissant sur la ligne des marqueurs ou de le supprimer en cliquant droit sur le marqueur. Vous pouvez aussi supprimer ou modifier un événement à l'aide des boutons spécifiques prévus à cet effet.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 3.4.5.2 Le journal des alarmes

On retrouve la liste des alarmes transmises par les équipements biomédicaux avec leurs heures de **Début** et de **Fin**. Plus de 500 alarmes, provenant des équipements biomédicaux reliés via la liaison RS232, sont reconnus. Ces alarmes apparaissent dans l'ordre d'occurrence décroissant afin que la dernière alarme déclenchée soit toujours notée en haut du **Journal des alarmes**.

**REMARQUE** : Les alarmes ne peuvent pas être modifiées ni supprimées.

### 3.4.5.3 Le journal des médicaments

On retrouve la liste de tous les médicaments (*Médicaments, Balances liquidiennes et Produits sanguins*) saisis tout au long de l'intervention, avec leur **Voie** d'administration, le **Numéro de série** de l'équipement si c'est un produit récupéré de façon automatique, leur **Posologie**, leur **Unité**, leur **Concentration** et **Unité de concentration** s'il s'agit d'une SAP ainsi que les heures d'**injection**, de **fin** (s'il s'agit d'une SAP) et de **saisie**. Ces médicaments apparaissent dans l'ordre d'occurrence décroissant afin que le dernier médicament injecté soit toujours noté en haut du **Journal des médicaments**.

Si vous cliquez sur l'un des médicaments, un menu vous permet de supprimer ce médicament, de modifier son heure d'occurrence ou d'arrêter le débit quand le médicament sélectionné est injecté en continu. Un message de **Confirmation** vous proposera de valider votre modification ou votre suppression.

**REMARQUE** : Si ce médicament a été saisi au cours d'une session précédente, vous ne pouvez plus le modifier, ni le supprimer.

A partir de l'onglet **SURVEILLANCE**, vous avez la possibilité de modifier l'heure d'occurrence d'un médicament en le glisser-déposer ou de le supprimer en cliquant droit dessus. Vous pouvez aussi supprimer ou modifier un médicament à l'aide des boutons spécifiques prévus à cet effet.

### 3.4.6 L'onglet Consultation

Cet onglet affiche la fenêtre de consultation pré-anesthésique relative à l'intervention en cours. Les informations y figurant (que vous pouvez consulter ou modifier en fonction de vos droits) complètent le sous-onglet **Patient** de l'onglet **SURVEILLANCE**.

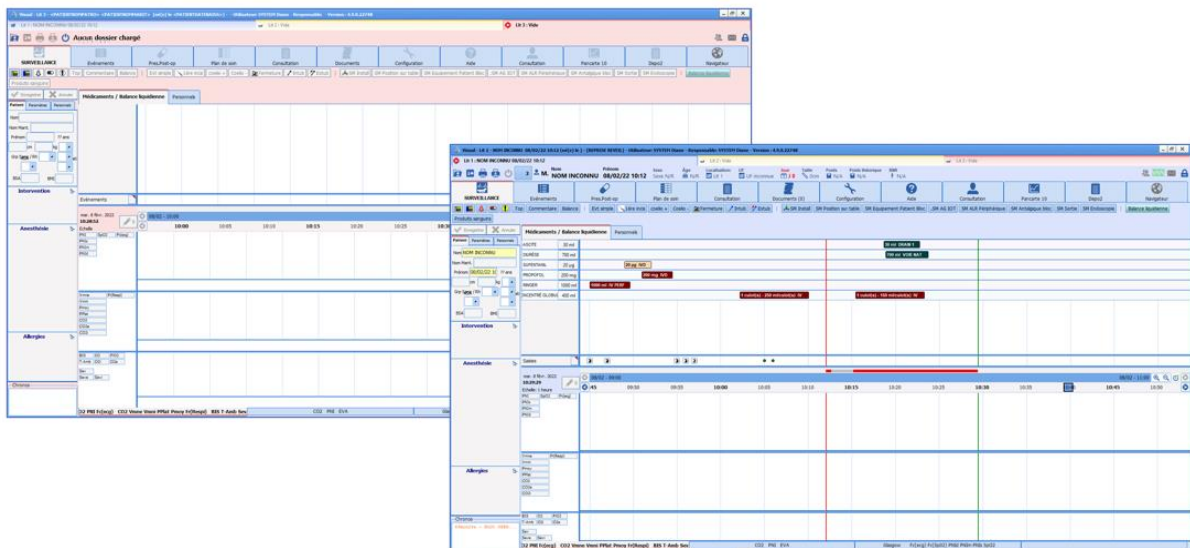
Vous avez bien évidemment la possibilité de visualiser ou de compléter la consultation d'un autre patient en le sélectionnant à l'aide du bouton **Sélection du patient**. Consultez le chapitre « *La consultation pré-anesthésique* » pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application **Consultation**.


Pour retourner à l'onglet **SURVEILLANCE**, sélectionnez la barre de titre que vous voyez affichée au-dessus de l'application **Consultation**.


## 3.5 Les spécificités du Post opératoire

L'application **Post opératoire** est identique au **Per opératoire** dans les types d'outils mis à disposition.




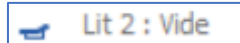


Les lits disponibles et les lits occupés sont affichés en haut de l'application sous forme de boutons. Le lit actuellement actif est identifié avec une icône rouge . Dans cet exemple, on constate qu'un dossier est chargé sur le lit 1. Les lits 2 et 3 sont, quant à eux, vides. Le lit 3 est affiché sur fond rouge car cette couleur lui a été attribuée dans la configuration des utilisateurs.

Si un lit est occupé, le nom du patient est affiché avec l'icône « lit occupé » .



Si un lit est vide, la mention « Vide » est affichée avec l'icône « lit vide » .



Ces boutons permettent de passer rapidement et facilement d'un lit à un autre en salle de réveil. Sur ces boutons sont inscrits le nom du lit et le nom du patient en cours.

Un trait vertical rouge délimite le passage en salle de réveil.

Avant de sortir un dossier patient de l'application, il est nécessaire qu'une personne disposant du droit de signer l'autorisation de sortie indique son identifiant et son mot de passe. Cette autorisation de sortie de réveil des patients peut être activée ou non par vos référents.

**REMARQUE** : il est possible de transférer le patient vers un autre lit de réveil. Pour ce faire, il faut fermer le dossier et choisir l'item **Transférer en Réveil** dans la fenêtre **Quitter**. Ouvrez le bon lit et accueillez de nouveau le patient.

### 3.6 La sortie du patient

La sortie du patient d'une salle nécessite de fermer le dossier. A ce moment-là, plusieurs choix sont proposés :

- Transférer le patient.
- Clôturer le dossier.

Le transfert sera à utiliser lorsque le patient part vers un secteur/service où le patient sera suivi via le logiciel **DIANE**.



La clôture du dossier est à utiliser lorsque le patient sort du périmètre du logiciel **DIANE**.

Des actions importantes, si elles n'ont pas été saisies en amont peuvent être rappelées dans la fenêtre de sortie et renseignées directement de cet espace. Cf. chapitre : « *Actions importantes* ».

### 3.6.1 La saisie et la signature du médecin responsable

Il est possible d'indiquer le nom d'un médecin responsable de l'intervention. Si c'est un anesthésiste qui s'est connecté au logiciel, il sera automatiquement considéré comme étant le responsable de l'intervention. Il est possible d'indiquer le nom du médecin qui est responsable s'il ne s'est pas connecté, mais dans ce cas, il devra valider sa responsabilité en indiquant son mot de passe.

Pour indiquer le nom du médecin responsable, vous pouvez utiliser le bouton situé en haut à gauche de l'application ou le bouton **Désigner/Valider responsable** du sous-onglet **Personnels** de l'onglet **SURVEILLANCE** (Cf. chapitre : « *Personnels en salle / Médecin responsable* »).

Il peut y avoir plusieurs médecins responsables pour une intervention.

### 3.6.2 La signature des prescriptions post opératoires

Lorsque des prescriptions post opératoires ont été renseignées dans l'onglet **Prescription** de l'application, un médecin doit signer ces prescriptions en indiquant son nom et son mot de passe.

Il est possible de signer ces prescriptions par le biais du bouton situé en haut à gauche de l'application ou par le biais de l'onglet **Prescription** (Voir le chapitre « *Onglet Prescription* »).

### 3.6.3 La signature de la sortie de la salle de réveil

Lors de la sortie d'un patient de la salle de réveil, la validation de sortie de salle de réveil peut se faire dans le logiciel **DIANE**.

Il est possible de signer la sortie de réveil par le biais du bouton situé en haut à gauche de l'application ou par le biais de l'onglet **Prescription** (Voir le chapitre « *Onglet Prescription* »).



## 4. DIANE OBSTETRIQUE

**DIANE OBSTÉTRIQUE** permet d'assurer le suivi médical des patientes en obstétrique, en gynécologie et en orthogénie.

À l'ouverture d'un nouveau dossier, il vous sera demandé si vous souhaitez ouvrir un dossier de gynécologie, d'obstétrique ou d'orthogénie. La configuration du logiciel changera en fonction de votre choix permettant ainsi un suivi adapté.

### 4.1 Sélection du dossier en obstétrique

Afin de sélectionner le dossier du patient, se reporter à la partie : [Sélection du patient](#).

#### 4.1.1 Sélection du type de dossier

Début de g...	Type de grossesse	Etat dossier	Date début suivi	Date fin suivi	Type de dossier
DIA	27/06/2019	Singleton	En transfert	08/03/2020	Obstétrique

Lorsque le dossier a été sélectionné, une nouvelle fenêtre s'ouvre et permet plusieurs choix :

- **Reprendre accouchement** : permet de poursuivre le suivi d'une patiente déjà connue dans le service.
- **Nouvel accouchement** : permet de débiter le suivi d'une nouvelle grossesse.

**Lors de la première ouverture d'un dossier**, une fenêtre apparaîtra afin de renseigner le type de dossier. Trois choix sont possibles et vont modifier la configuration du logiciel (dossier d'obstétrique, de gynécologie ou d'orthogénie). Certains onglets apparaîtront ou disparaîtront en fonction du choix qui aura été fait.

**REMARQUE** : Il est obligatoire de renseigner la Date de début de grossesse pour les dossiers d'obstétrique et d'orthogénie. Elle sera modifiable par la suite.





### Sélection du type de dossier

Type de dossier

Obstétrique

Gynécologique

Orthogénie

La date de début de grossesse doit être renseignée

Date de début de grossesse

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## 4.2 Aspect général de l'application

L'application se présente sous forme d'onglets. Chaque onglet correspond aux différentes phases du suivi d'une grossesse.

Lefebvre Caroline DURAND (né(e) le 21/11/1990) - Utilisateur: SYSTEM Diane -- Version : 4.7.4.1999

Mme Lefebvre (DURAND) Caroline

Age: 29 ans, Taille: 165cm, Poids: 65kg, Groupe sanguin: A+, Terme: 39SA + 4J, Parité: 1, Ut. Cicatrice: Unicicatriciel

Administratif | Antécédents | Grossesse | SDN | Post partum | Echoographies | Ordonnances | Anesthésie | Documents (4) | Configuration

Administratif

Informations patiente

Nom marital: Lefebvre, Nom patronymique: DURAND, Prénom: Caroline, Né le: 21/11/1990, Lieu de naissance: PARIS

Adresse (ordre de saisie séparé par des espaces: N° / bis / nom de la voie / complément): 12 allée des enfants, Code postal: 53100, Ville: MAYENNE

Téléphone: 0626151526, Mobile: 0623562356, Adresse email: caroline.durand@gmail.com, N° PIP: 800256659656, N° de S.S.: 2535948563225

Sexe:  M  F

Origine géographique: Caucasienne

Niveau d'études: Non renseigné, Situation de famille: Non renseigné

CSP: Profession

Conjoint

Nom: LEFEBVRE, Prénom: Jean, Né le: 25/05/1985, Age: 35, Téléphone: 0626595926, Niveau d'études: Etudes supérieures

Profession: 10 - Agriculteurs exploitants, Producteur laitier

Origine Géographique: Asiatique

Correspondants

Docteur DEMAILLY Françoise - Paris - Pneumologue

Personne à prévenir: Nom Prénom: , Téléphone: 00 00 00 00 00

Personne de confiance: Lefebvre Jean, Téléphone: 0626595926

Tutelle/ Curatelle:  Mineure, Autorisation d'opérer:

Numéro d'archivage:

Au-dessus des onglets, se trouve un bandeau dans lequel sont insérés différents renseignements concernant la patiente (état civil, âge, poids, terme, cicatrice utérine, parité, ...).



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

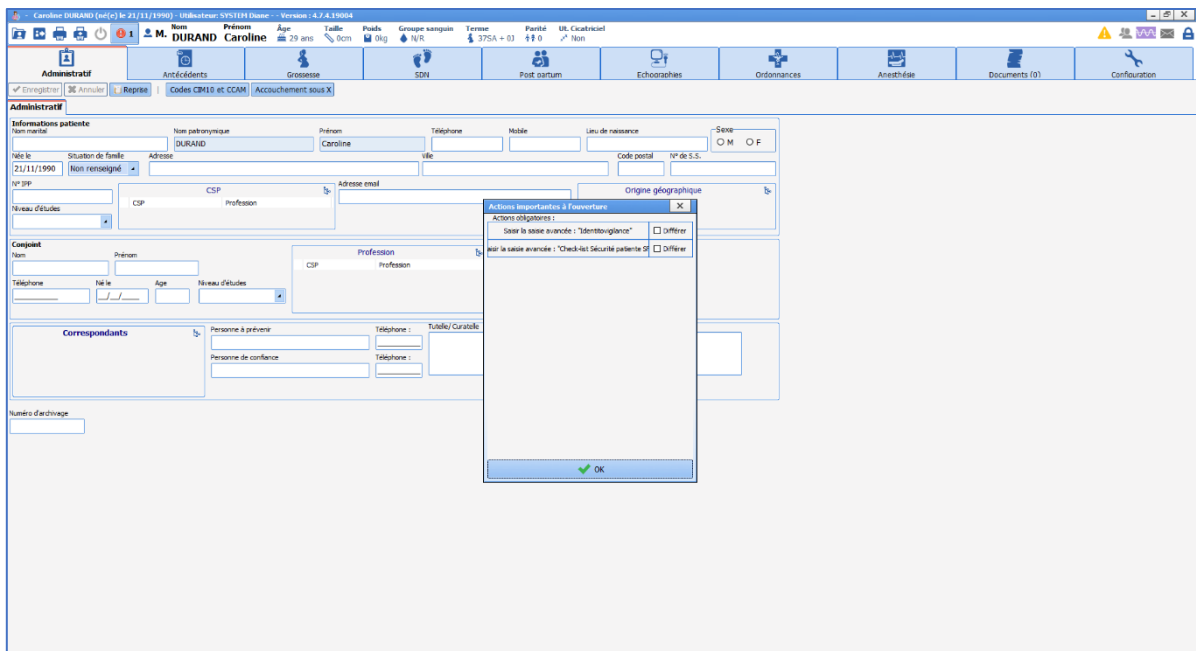
Mme	<b>Nom</b> Lefebvre (DURAND)	<b>Prénom</b> Caroline	<b>Âge</b> 29 ans	<b>Taille</b> 165cm	<b>Poids</b> 85kg	<b>Groupe sanguin</b> A+	<b>Terme</b> 39SA + 4J	<b>Parité</b> 1	<b>Ut. Cicatriciel</b> Unicatriciel
-----	---------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------	--

Sur la droite, des boutons permettent l'ouverture ou la fermeture du dossier.

	Bouton d'ouverture du dossier
	Bouton de fermeture du dossier
	Alerte indiquant que des check-lists (actions importantes) n'ont pas été réalisées
	Alerte signalant que les sérologies ne sont pas renseignées

### 4.3 Check-list feuille d'ouverture de salle

Les **check-lists** sont obligatoires à remplir. Celles-ci apparaissent en fonction de la localisation du poste. Il existe par exemple deux check-lists à remplir à l'admission en **Salle De Naissance** mais aucune pour les postes situés en consultation. Il est possible de différer leur remplissage. Cependant, elles empêchent la fermeture du dossier. Elles devront être remplies dans tous les cas.



La capture d'écran ci-dessous montre que les check-lists n'ont pas été remplies. Il suffit de cliquer sur **Saisir les 3 saisies avancées** et d'aller saisir les données. Il sera ensuite possible de fermer le dossier.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?**

**Fermer le dossier du patient Caroline DURAND ?**

**Il reste 3 action(s) bloquante(s) non renseignée(s) :**  
- Saisir les 3 saisies avancées...

**Choisissez les actions à effectuer pour le dossier**

**Sortir de la salle de naissance**

**Transférer :**

Heure de fin d'intervention  
15:40:08 21/11/2019

Imprimer le dossier

Les champs dont le titre présente une étoile en indice (capture d'écran ci-dessous) sont des champs obligatoires qui empêchent la fermeture de la check-list s'ils ne sont pas remplis.

#### 4.4 Onglet administratif

Les informations administratives proviennent du dossier patient informatisé (DPI) et se renseignent automatiquement. Dans ce cas, il est impossible de les modifier depuis **DIANE**.

Dans le cas où un dossier serait directement créé sur **DIANE**, il faut remplir l'intégralité des données.

**REMARQUE :** les données administratives renseignées sur **DIANE** ne sont pas transmises au DPI, il est donc préférable dans tous les cas de remplir ou modifier ces informations dans le DPI afin d'éviter des possibles incohérences.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Cet onglet permet de noter des informations sur la patiente, le conjoint, les correspondants (médecin traitant, gynécologue de ville, sage-femme de ville...) et la personne de confiance.

Comportements particuliers :

- Le sexe du patient est par défaut : « F » mais il est possible de le changer via la case à cocher **Sexe** en haut à droite du cadre **Information patiente**.
- Il existe un calcul automatique qui coche la case **Mineure** (en bas de l'onglet) en fonction de la date de naissance qui aura été renseignée.

## 4.5 Onglet Antécédents

### 4.5.1 Sous-onglet : Antécédents

Le sous-onglet **Antécédents** permet de renseigner l'historique médical de la patiente à l'exception des antécédents obstétricaux. L'onglet est composé de champs de saisie avec liste de référence. Les champs **Allergies** et **Traitements habituels** ne possèdent pas de liste à proprement parler. La liste est appelée directement lors de la saisie manuelle.

**Traitements habituels : accès au centre de référence des agents tératogènes (CRAT) :**

A gauche du traitement se trouve un rectangle de couleur jaune. En cliquant dessus, il permet un **accès direct au CRAT** sur la page correspondant à la molécule ainsi qu'un accès à la monographie du médicament (que celle-ci provienne de la BCB ou du Vidal).

Les autres champs du sous-onglet **Antécédents** n'ont pas de fonctionnement particulier. Ils permettent de renseigner les antécédents médicaux, gynécologique, chirurgicaux, transfusionnels, familiaux et médicaux de la patiente mais aussi du conjoint. Le mode de saisie de ces différents composants est décrit dans le chapitre *Les différents modes de saisie DIANE*.

Le cadre **Risque de BMR** permet d'évaluer les mesures à prendre en cas de risque. Les champs sont



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

invisibles si la patiente n'est pas à risque de BMR. Les champs concernant les mesures préventives apparaissent si l'on renseigne que la patiente est à risque de BMR dans le menu déroulant.



The image shows two screenshots of a web form titled "Risque de BMR".

The left screenshot shows the "Patiente a risque de BMR" dropdown menu set to "Non".


The right screenshot shows the "Patiente a risque de BMR" dropdown menu set to "Séjour hospitalier < 1 an". This selection reveals additional fields: "Date séjour à l'étranger", "Mesures préventives" (with checkboxes for "EOHH prévenu", "Isolement contact", and "Dépistage microbiologique"), and a "Commentaire" text area.

#### 4.5.2 Sous-onglet : ATCD Obstétricaux

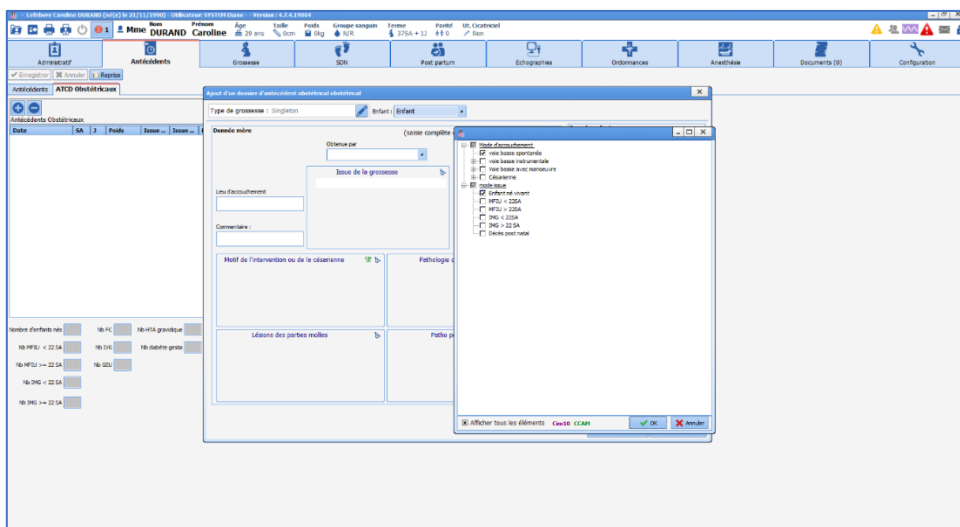
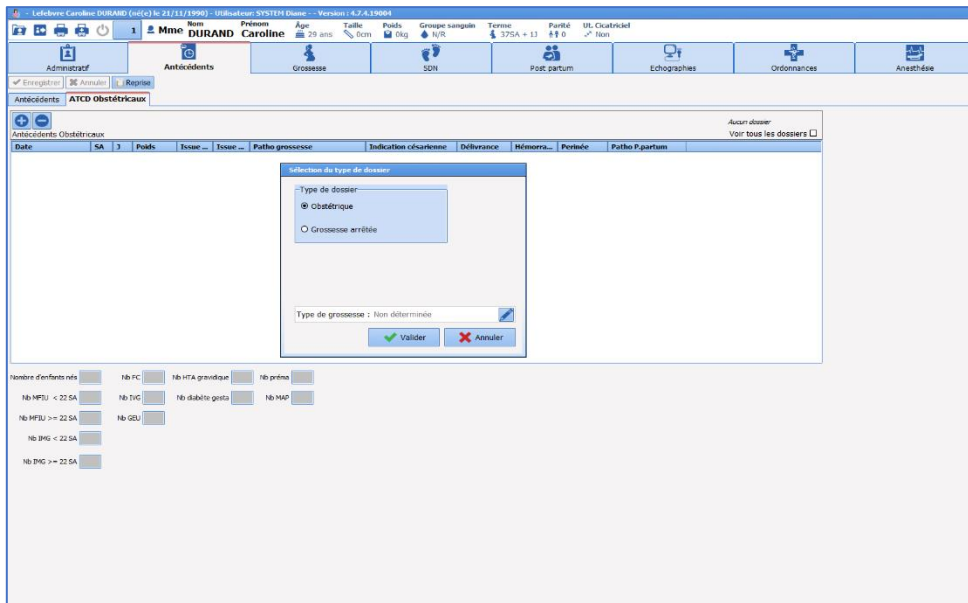
Le sous-onglet **ATCD obstétricaux** permet de renseigner les grossesses précédentes quelles que soit leurs issues. C'est à cet endroit que seront notés les **antécédents** d'accouchement, de MFIU, d'IMG, de fausse couche ou encore d'IVG.

Le mode de saisie se présente sous la forme d'un tableau. Un clic sur le  signe situé en haut à gauche permet la création d'un antécédent. Pour supprimer un **antécédent**, sélectionnez l'antécédent dans le tableau puis cliquez  sur le signe

**REMARQUE** : Les antécédents qui concernent les grossesses qui auront déjà été suivies dans **DIANE** se créent automatiquement et leur suppression n'est pas permise par le logiciel.

- **Création d'un antécédent de grossesse** : lorsque l'on clique sur le signe  , une fenêtre apparaît permettant soit la création d'un antécédent de grossesse (incluant les enfants nés vivants, MFIU et IMG), soit la création d'un antécédent qui concerne une grossesse arrêtée (incluant FCS, FCT, IVG et Môle). Si l'on clique sur **Obstétrique** dans la fenêtre **Sélection du type de dossier**, un composant apparaît permettant de choisir le type de grossesse (singleton, gémellaire, ...). Ce choix peut également être fait à l'intérieur de la fenêtre de création de l'antécédent qui apparaît lorsqu'on a validé le type d'antécédent que l'on souhaite créer.





Fonctionnement des champs particuliers de la fenêtre de création d'un antécédent obstétrical :

- Champ **Issue de la grossesse** : ce champ est le même que celui qui se trouve dans le résumé de la grossesse.

La liste comprend deux sous parties : 1 partie **Mode d'accouchement** et une partie **Issue** :



Il est **ESSENTIEL** de compléter les 2 informations (De cette liste découle les calculs qui permettent de renseigner la parité et le nombre de cicatrices utérines dans le bandeau supérieur). **Le mode d'accouchement ET l'issue** doivent donc être systématiquement remplis. En cas de grossesse multiple, les informations doivent être remplies pour chaque enfant.

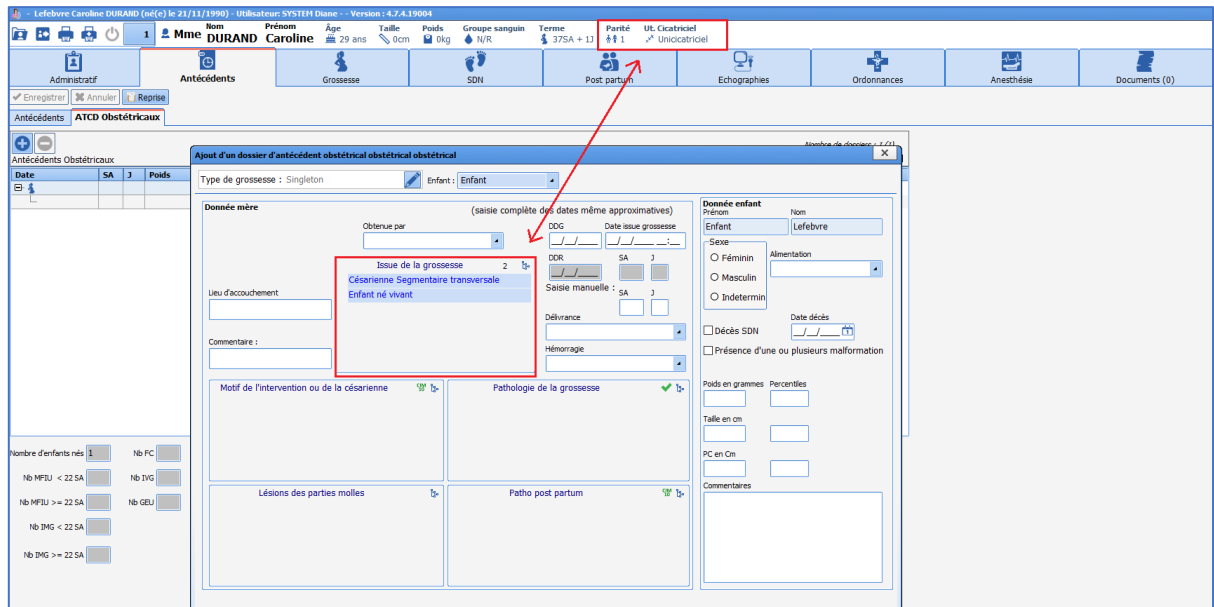


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



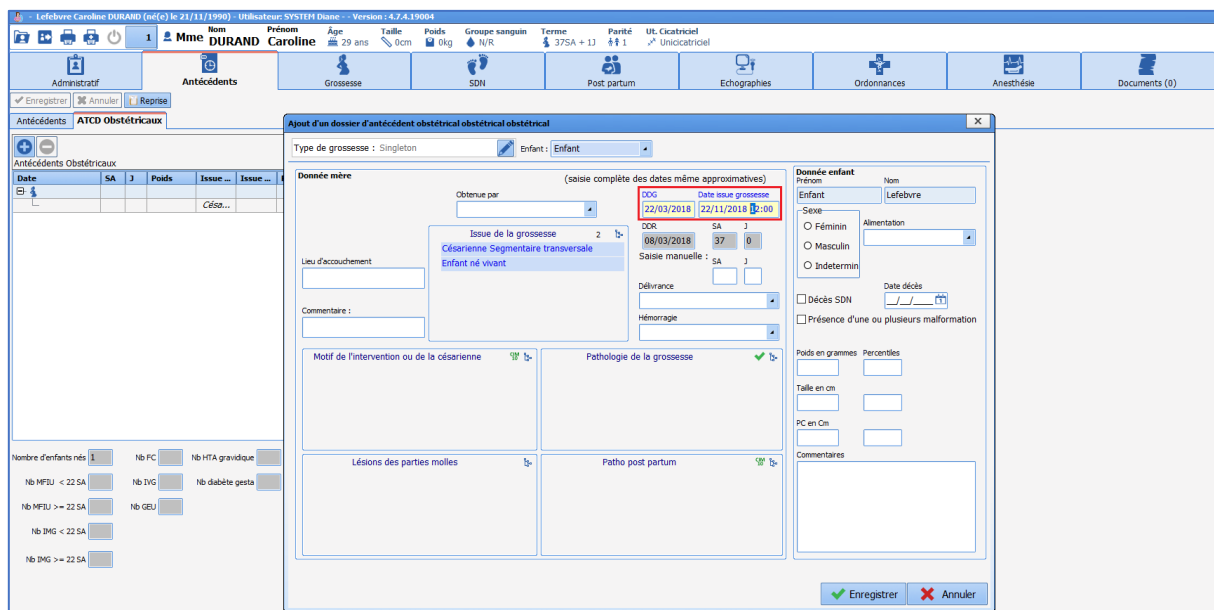- Saisie du terme d'accouchement : deux options sont possibles
    - o Si la date de début de grossesse et la date de l'accouchement sont connues, il suffit de les renseigner et le calcul du terme de l'accouchement se fait automatiquement.
- REMARQUE** : la date et l'heure de l'accouchement doivent être saisies même si elles ne sont connues que de manière approximative.



- o Il est également possible de renseigner manuellement le terme d'accouchement directement dans les champs de saisie manuelle SA et J



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Le screenshot montre l'interface de l'utilisateur pour l'ajout d'un dossier d'antécédent obstétrical. Le patient est Mme DURAND Caroline. Le type de grossesse est 'Singleton'. Les dates de grossesse sont indiquées comme 22/03/2018 (DGG) et 22/11/2018 (Date issue grossesse). L'issue de la grossesse est 'Césarienne Segmentaire transversale'. Le champ 'Saisie manuelle' est mis en évidence par une case à cocher. Les données de l'enfant sont renseignées avec le nom 'Lefebvre'.

- Les mensurations : le calcul des percentiles est automatique. Les données des mensurations et le terme doivent être remplis au préalable pour permettre ce calcul.
- Le champ **Motif de l'intervention ou de la césarienne** concerne les césariennes mais également les extractions instrumentales ou les manœuvres obstétricales.
- En cas de grossesse multiple, il suffit de sélectionner dans le menu déroulant, situé en haut de la fenêtre, à quel enfant appartient les données. Les données concernant la mère restent affichées. Seules les données propres à chaque enfant peuvent être ressaisies.

Le screenshot illustre la configuration pour une grossesse gémellaire (BCBA). Le menu déroulant 'Enfant' est ouvert, permettant de sélectionner 'Enfant' ou 'Enfant 2'. Le champ 'Issue de la grossesse' est actuellement vide. Le champ 'Saisie manuelle' est à nouveau mis en évidence par une case à cocher.

**REMARQUE :** il faut penser à bien **renseigner le champ Issue de grossesse pour les deux enfants** car le mode d'accouchement et l'issue peuvent être différentes pour chaque enfant en cas de grossesse multiple. Les données doivent être ressaisies même si elles sont identiques pour les 2 enfants. (En pratique, si les deux enfants sont nés vivants par voie basse : il faudra le saisir pour chaque enfant).



2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)

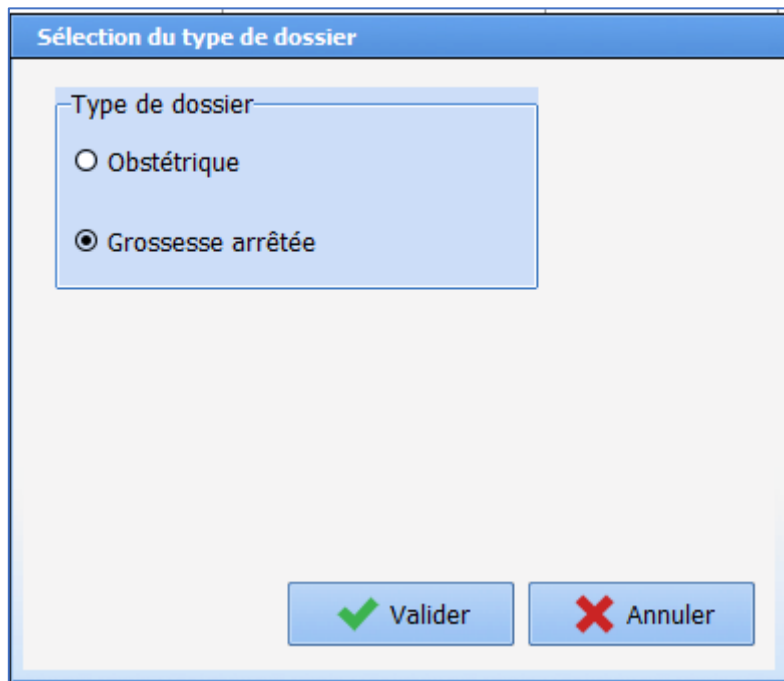


DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



- **Création d'un Antécédent « Grossesse arrêtée » : IVG, FCS, FCT, Môle**

Le fonctionnement est identique à celui des Antécédents obstétricaux. Le choix **Grossesse arrêtée** est possible après avoir cliqué sur le signe  situé en haut à gauche du tableau récapitulatif des antécédents et entraîne l'ouverture d'une fenêtre spécifique permettant de renseigner un antécédent de grossesse arrêtée. Cette fenêtre n'a pas de fonctionnement particulier. De la même manière qu'en obstétrique, un antécédent d'orthogénie renseigné dans **DIANE** lors d'un précédent séjour sera automatiquement repris dans ce tableau.




**Sélection du type de dossier**

Type de dossier

Obstétrique

Grossesse arrêtée

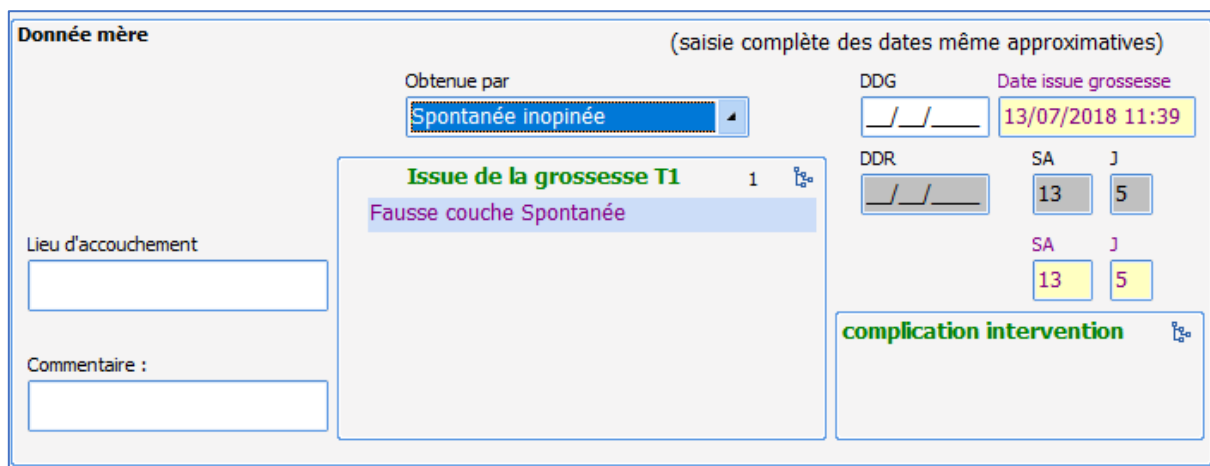✓ Valider    ✗ Annuler



**Donnée mère** (saisie complète des dates même approximatives)

Obtenue par: Spontanée inopinée

DDG: [ ] [ ] [ ]    Date issue grossesse: 13/07/2018 11:39

DDR: [ ] [ ] [ ]    SA: 13    J: 5

SA: 13    J: 5

Issue de la grossesse T1 1

Fausse couche Spontanée

Lieu d'accouchement: [ ]

Commentaire: [ ]

complication intervention

Les antécédents se rempliront au fur et à mesure dans le tableau récapitulatif et il suffit de cliquer sur un antécédent pour pouvoir aller le consulter ou le modifier.

#### 4.5.2.1 Champs calculés

Sous le tableau récapitulatif des antécédents, plusieurs champs sont présents. Ceux-ci sont des calculs



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

automatisés et ne sont pas modifiables à la main :

**Nombre enfants nés** : Comptabilise le nombre d'enfants nés vivants (Dialistmém **Issue de grossesse**)

**Nb MFIU < 22 SA** : Comptabilise le nombre de MFIU < 22 SA (Dialistmém **Issue de grossesse**)

**Nb MFIU > 22 SA** : Comptabilise le nombre de MFIU > 22 SA (Dialistmém **Issue de grossesse**)

**Nb IMG < 22 SA** : Comptabilise le nombre de d'IMG < 22 SA (Dialistmém **Issue de grossesse**)

**Nb IMG > 22 SA** : Comptabilise le nombre de d'IMG > 22 SA (Dialistmém **Issue de grossesse**)

**Nb FC** : Comptabilise le nombre de FC totales = FCS + FCT (Dialistmém **Issue de la grossesse T1**)

**Nb IVG** : Comptabilise le nombre d'IVG (Dialistmém **Issue de la grossesse T1**)

**Nb GEU** : Comptabilise le nombre de GEU (Dialistmém **Issue de la grossesse T1**)

**Nb HTA Gravidique** : Comptabilise le nombre HTA gravidique + prééclampsie (Dialistmém **Pathologie de la grossesse**)

**Nb diabète gesta** : Comptabilise le nombre de diabètes gestationnels. Les diabètes préexistants à la grossesse sont exclus de ce calcul. (Dialistmém **Pathologie de la grossesse**)

**Nb préma** : Calcul automatisé effectif si les renseignements suivants sont saisis : Enfant né vivant (Dialistmém **Issue de grossesse**) et terme < 37 SA (SA + J renseigné dans la fenêtre des antécédents)

**Nb MAP** : Comptabilise le nombre menaces d'accouchement prématuré (Dialistmém **Pathologie de la grossesse**)

Antécédents

Date	SA	J	Poids	Issue de la grossesse	Issue ...	Patho grossesse	Indication césarienne	Délivrance	Hémorra...	Perinée	Patho P.partum
25/11/201...	6				Môle						
22/11/201...	37		3250	Césarienne Segmentaire ...		RAS	Stagnation de la dib...	Spontanée			Baby blues

Nombre d'enfants nés  Nb FC  Nb HTA gravidique  Nb préma   
Nb MFIU < 22 SA  Nb IVG  Nb diabète gesta  Nb MAP   
Nb MFIU >= 22 SA  Nb GEU   
Nb IMG < 22 SA   
Nb IMG >= 22 SA



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 4.6 Onglet grossesse

### 4.6.1 Sous-onglet : Début de grossesse

#### 4.6.1.1 Généralités

Ce sous-onglet permet de renseigner les éléments du début de grossesse recueillis habituellement lors du premier contact avec la patiente en consultation. Il permet de renseigner le terme, le type de grossesse, le groupe sanguin, les sérologies, les données de l'échographie T1 et les informations potentielles concernant le DAN, le contexte psycho-social et les addictions.

#### 4.6.1.2 Calcul du terme de la grossesse

À l'ouverture d'un dossier d'obstétrique ou d'orthogénie, il est obligatoire de noter la DDG. Celle-ci sera reportée automatiquement en haut à gauche de l'écran. Le calcul de la DDR, 41 SA, date du congé maternité se fait automatiquement en fonction de la DDG. Il est possible de modifier la DDG par saisie simple.

Le menu déroulant **Déterminé par** permet de renseigner le mode de calcul de la DDG. Dans ce menu, lorsque les items choisis sont : **Echographie < 20 SA**, **DDR**, **Incertaine** ou **Date de la FIV**, le DDG doit être renseigné manuellement.

The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Debut de grossesse' (active) and 'Surveillance de la grossesse'. Below the tabs, there are five input fields and one dropdown menu:

DDR	DDG	41 SA	Date du congé maternité	Déterminé par :
30/12/2019	13/01/2020	12/10/2020	31/08/2020	DDR

**Datation en fonction de l'échographie T1** : dans le menu déroulant **Déterminé par** si l'on sélectionne **LCC < 14 SA**, alors le calcul du terme est automatisé en fonction des données de l'échographie saisies dans le cadre **Echographie 1<sup>er</sup> Trimestre**.

Il suffit de renseigner la date de l'échographie et la LCC, de noter que le **Terme de la grossesse** est déterminé par **LCC < 14 SA**. Le calcul du terme est automatisé en fonction de la mesure échographique de la LCC.



En rouge : données à saisir

En orange : Calculs automatisés

#### 4.6.1.3 Sang

Le cadre **Sang** permet de renseigner le groupe sanguin de la patiente et de son conjoint, et les RAI. Si une patiente est de Rhésus négatif, des champs concernant le génotypage foetal et l'injection potentielle de *Rhophyllac* vont apparaître.

#### 4.6.1.4 Morphologie

Ce cadre permet de noter le poids et la taille de la patiente en début de grossesse. Pour saisir le poids, il faut cliquer sur le bouton **Saisir** en bleu. Une fenêtre s'ouvre et permet de renseigner le poids initial de la patiente qui sera reporté dans le champ attenant. L'indice de masse corporelle se calcule automatiquement sur le champ situé sur sa droite. Cliquer sur **Editer** pour modifier les données.



2023-03-17

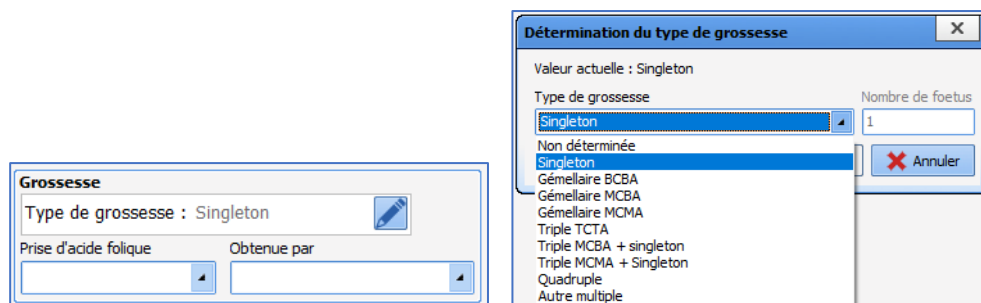
BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)





DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

#### 4.6.1.5 Type de grossesse

Dans le cadre **Grossesse** situé en haut à gauche du sous-onglet, un composant spécifique permet de sélectionner le type de grossesse en cliquant sur le signe représentant un crayon. Une fenêtre s'affiche alors permettant de sélectionner s'il s'agit d'une grossesse unique, gémellaire, triple ...



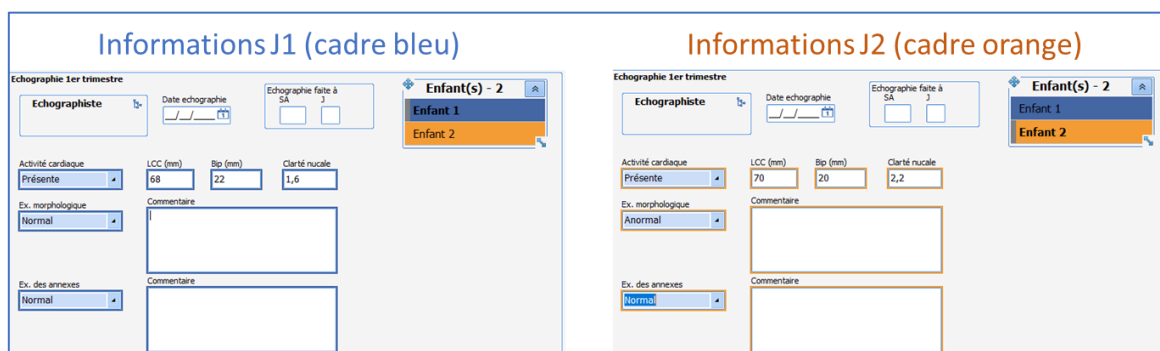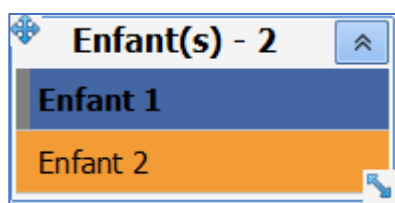En cas de grossesse multiple, une fenêtre spécifique permet tout a long du dossier de choisir à quel enfant se rapporte les informations saisies en cliquant sur **Enfant 1** ou **Enfant 2**.



Les données entourées de bleu concernent le premier enfant. Si on clique sur **Enfant 2**, on remarque que les champs concernés se vident et sont entourés d'orange, indiquant qu'il s'agit de données concernant le second enfant et qui doivent donc être saisies.

Le reste des champs de cette fenêtre ne présente pas de fonctionnement particulier.

#### 4.6.2 Sous-onglet : Surveillance de la grossesse

Ce sous-onglet va permettre d'assurer le suivi des parturientes tout au long de la grossesse et présente plusieurs parties :

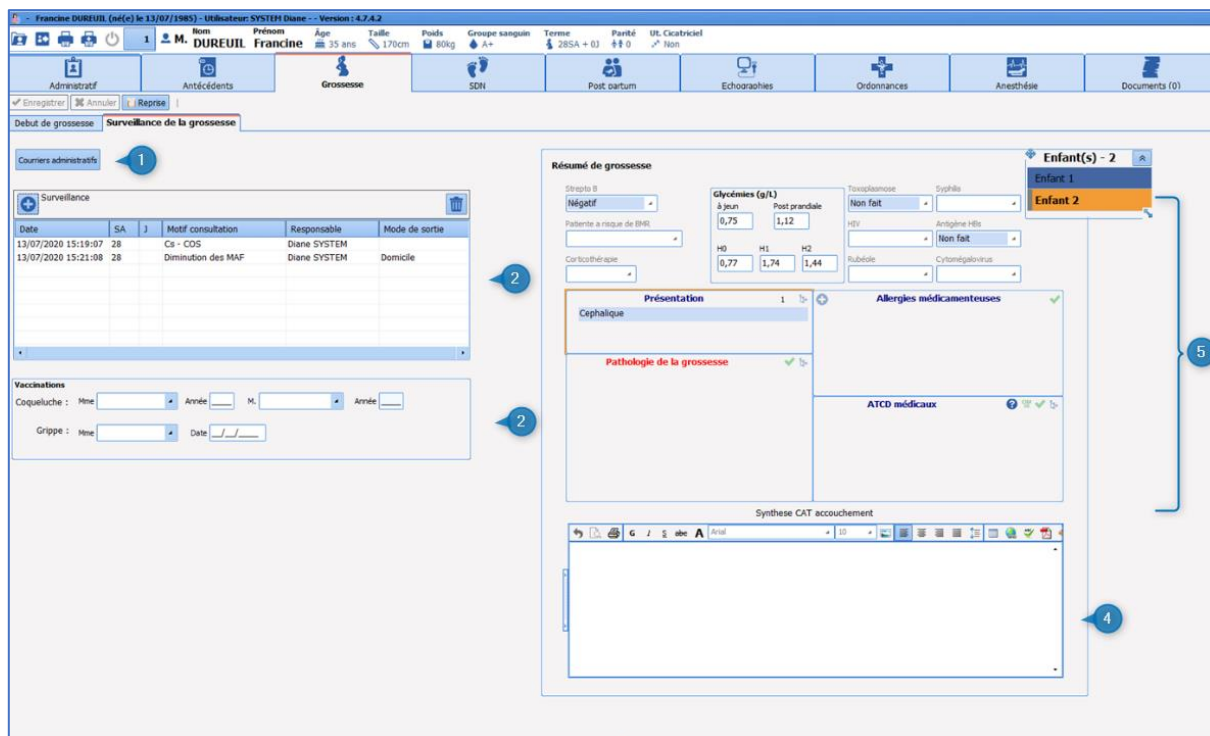


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28




- 1 **Courriers administratifs** : bouton appelant différents courriers imprimables :
  - Grossesse et groupe Rhésus : courrier d'Informations pour les patientes de rhésus négatif.
  - Gestogramme : courrier d'information permettant de planifier le suivi de la grossesse (consultations et échographies).

**REMARQUE** : Il est possible d'intégrer n'importe quel type de courrier depuis ce bouton.

- 2 **Surveillance** : permettant d'appeler les différents types de consultation.
- 3 **Vaccination** : cadre permettant de renseigner les données sur les vaccinations coqueluche et grippe en cours de grossesse.
- 4 **Synthèse CAT accouchement** : permet de saisir les conduites à tenir ou les événements particuliers liés à la grossesse.
- 5 **Résumé de grossesse** : ce cadre permet d'avoir un visuel sur tous les événements marquants au cours d'une grossesse. Ces éléments sont en lecture seule et permettent rapidement de connaître les sérologies, la présentation ou encore la présence streptocoque B.

#### 4.6.2.1 Tableau de suivi des consultations

Plusieurs types de consultations sont disponibles. Un clic sur le signe  situé en haut à gauche du tableau permet d'appeler les différents modèles.

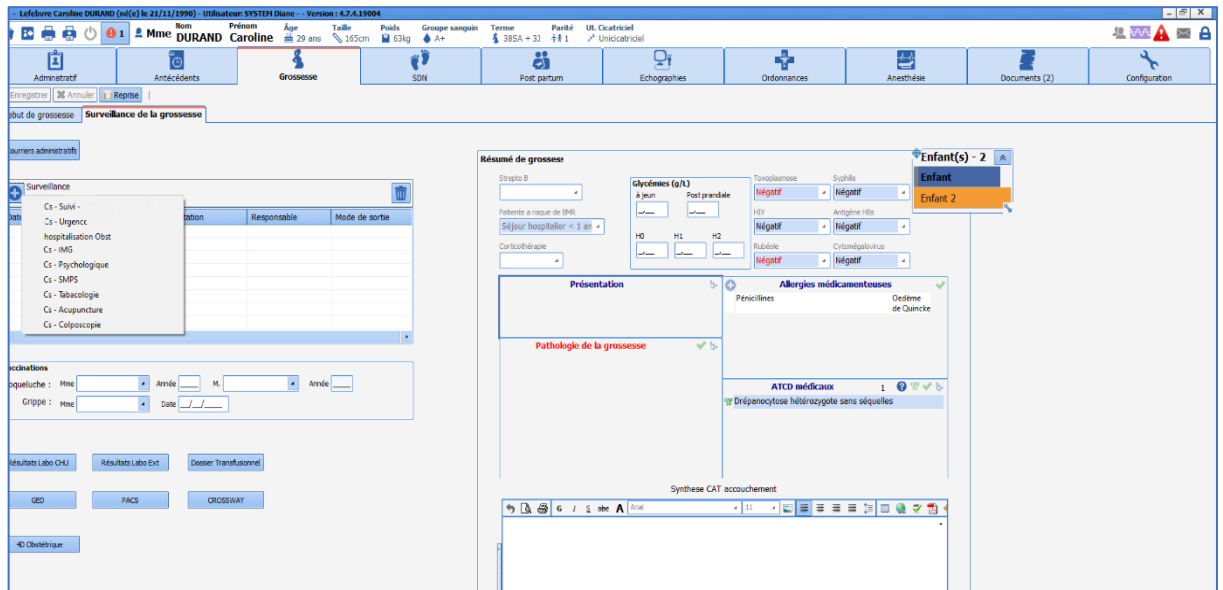


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



L'appel de l'une de ces consultations ouvre une nouvelle feuille appelée : **saisie avancée** (Le fonctionnement de ces feuilles de saisie est expliqué dans le chapitre « *Les saisies avancées* »).

#### 4.6.2.2 La consultation

Elle se décompose en 3 parties :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

1 Partie supérieure : cette partie comprend les informations générales, l'interrogatoire et les données de l'examen clinique.

Fonctionnements particuliers :

- Les tensions artérielles (systoles et diastoles) doivent être remplies en mm Hg
- Si le toucher vaginal n'est pas réalisé en consultation, il faut saisir la case à cocher **TV non indiqué**. Cette action va masquer le score de bishop
- Saisie de la rupture de la PDE (Poche des Eaux) : en cas de rupture de la poche des eaux, cliquer sur le

bouton **Saisir** situé en bas du cadre **Rupture de la PDE**. Puis sélectionnez **rupture artificielle** ou **rupture spontanée**. Une fenêtre s'ouvre afin de renseigner la date et l'heure exacte de la rupture.

**REMARQUE** : La saisie de la rupture de la PDE enclenche un chronomètre **Durée d'ouverture de l'œuf** qui sera arrêté par la saisie de la naissance.



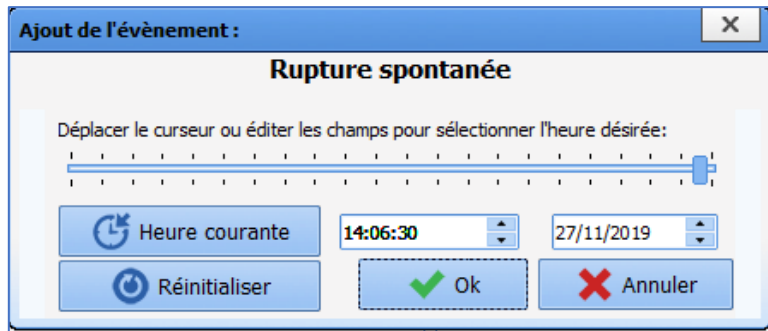
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28






2 Partie centrale : permet de préciser l'examen clinique et le diagnostic posé

- Champ **Discussion** : ce champ est dédié à la saisie d'examen clinique particulier. La liste associée est un listing des éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique adapté à différentes pathologies.

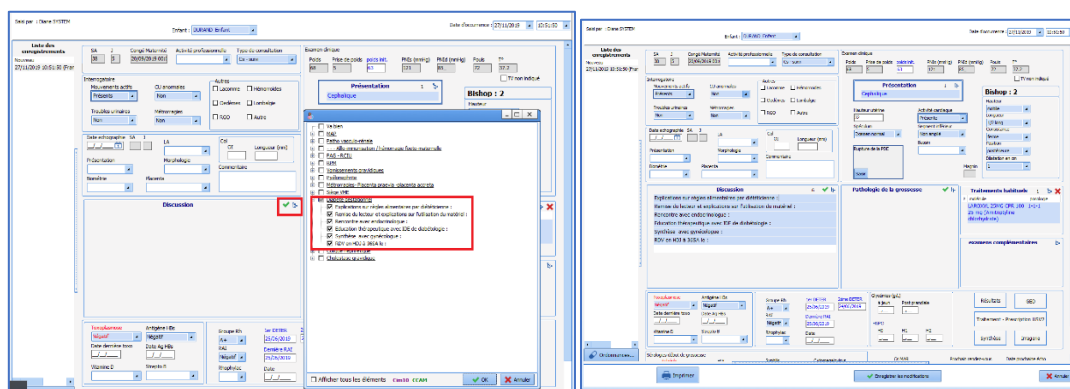Exemple : en cliquant sur l'élément **Diabète gestationnel**, la liste des sous éléments va automatiquement se cocher. Puis en cliquant sur **OK** en bas de la liste, les différents éléments vont s'afficher dans le cadre dédié.




Il est possible ensuite de compléter les données par saisie simple dans le cadre

- Le champ **Pathologie de grossesse** : ce champ permet de renseigner le diagnostic retenu lors de la consultation
  - Le champ **Traitements habituels** : ce champ est le même que celui présent dans les antécédents. Il permet d'avoir un visual direct sur les traitements en cours chez la patiente.
- 2 Partie inférieure : cette partie comprend un rappel des sérologies, des glycémies et de la carte de groupe sanguin. Ces données sont possibles à compléter sur cette feuille de saisie et seront transmises automatiquement dans la partie **Résumé de grossesse** et dans le sous-onglet **Début de grossesse**.

#### 4.6.2.3 Édition du courrier de consultation :

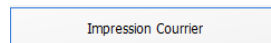Le courrier de consultation est accessible depuis le bouton



situé en bas de la feuille de consultation.

Un clic sur le bouton appelle le modèle qu'il suffit ensuite d'imprimer. Celui-ci est prévu pour doubler les informations en cas de grossesses multiples. Il mentionne également les traitements et les examens complémentaires qui auront été prescrits lors de la consultation.

**NB** : Les données présentes dans le courrier de consultation sont directement issues des données saisies dans la feuille de consultation. Ceci est automatisé, mais cela ne dispense en aucun cas les utilisateurs de contrôler les données du courrier.

**NB** : l'édition du courrier de consultation impose la fermeture de la saisie avancée. Celui-ci doit donc être imprimé en dernier afin de limiter le nombre de manipulations. Néanmoins, il est possible de rouvrir et de modifier la consultation a posteriori.

#### 4.6.2.4 La consultation d'urgence :

La consultation d'urgence permet de saisir des données adaptées au contexte de l'urgence obstétricale avec notamment la possibilité de saisir un motif de consultation et un diagnostic nommé « diagnostic évoqué » du fait de sa potentielle incertitude dans ce contexte d'urgence. Il est également possible de saisir les prélèvements sanguins qui ont été fait ainsi que les résultats de la bandelette urinaire (sous forme de score).

De même que pour la consultation de suivi, il est possible d'imprimer un courrier de consultation via le bouton situé au bas de celle-ci.



Les autres types de consultation ne présentent pas de fonctionnement particulier.

À chaque consultation, les informations sont envoyées à la fois dans le résumé de grossesse et dans le tableau récapitulatif des consultations. Celui-ci permet un suivi simplifié et un accès facilité aux différentes consultations en cours de grossesse.

## 4.7 Gestion des ordonnances

Il existe 2 possibilités permettant d'éditer une ordonnance :

- Via le bouton **Ordonnances ...** présent dans chaque consultation (situé en bas à gauche).



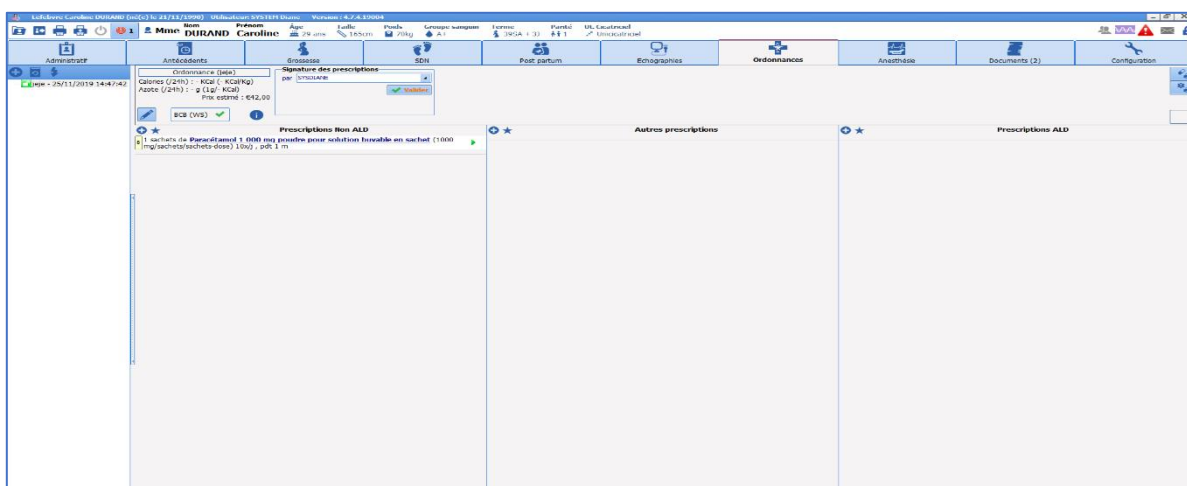
2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- Directement via l'onglet **Ordonnances** :



Lorsque l'on accède au module de prescription via une saisie avancée, il est possible de saisir directement les prescriptions. Depuis l'onglet **Ordonnances**, il est au préalable nécessaire de créer une nouvelle ordonnance en cliquant sur le  situé en haut à droite de la fenêtre de prescription. Une fenêtre s'ouvre alors demandant de nommer la nouvelle ordonnance.

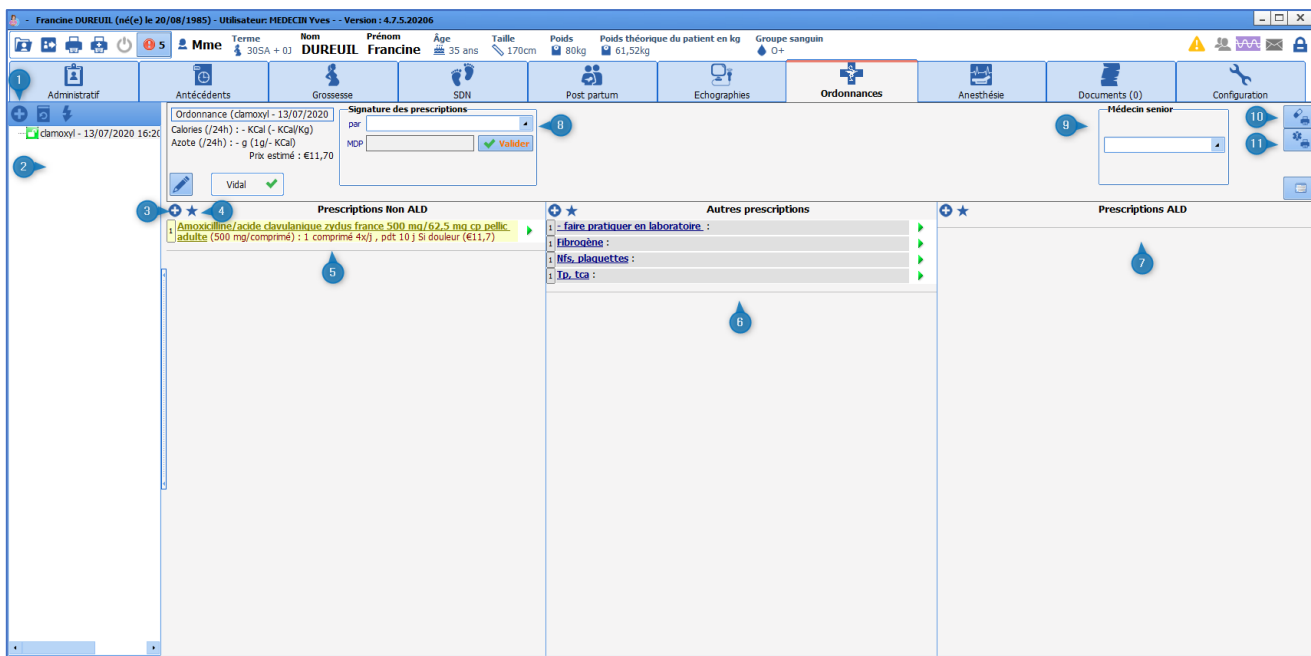Ci-dessous, légende des principales fonctionnalités du module de prescription.



- 1 Nouvelle ordonnance : permet de créer une nouvelle ordonnance.
- 2 Zone d'historique : permet de visualiser l'ensemble des ordonnances prescrites en cours de grossesse.
- 3 Nouveau traitement : bouton d'ouverture de la fenêtre de prescription.
- 4 Favoris : bouton d'appel des favoris de prescription.



2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- 5 Zone de prescription des traitements Non-ALD.
- 6 Zone de prescription des examens complémentaires et des soins.
- 7 Zone de prescription des traitements ALD.
- 8 Signature des prescriptions.
- 9 Médecin sénior : permet de renseigner le nom du médecin responsable (en cas de prescription par un interne en médecine).
- 10 Bouton d'impression de l'ordonnance des traitements.
- 11 Bouton d'impression de l'ordonnance des soins et examens complémentaires.

## 4.7.1 Prescription des médicaments

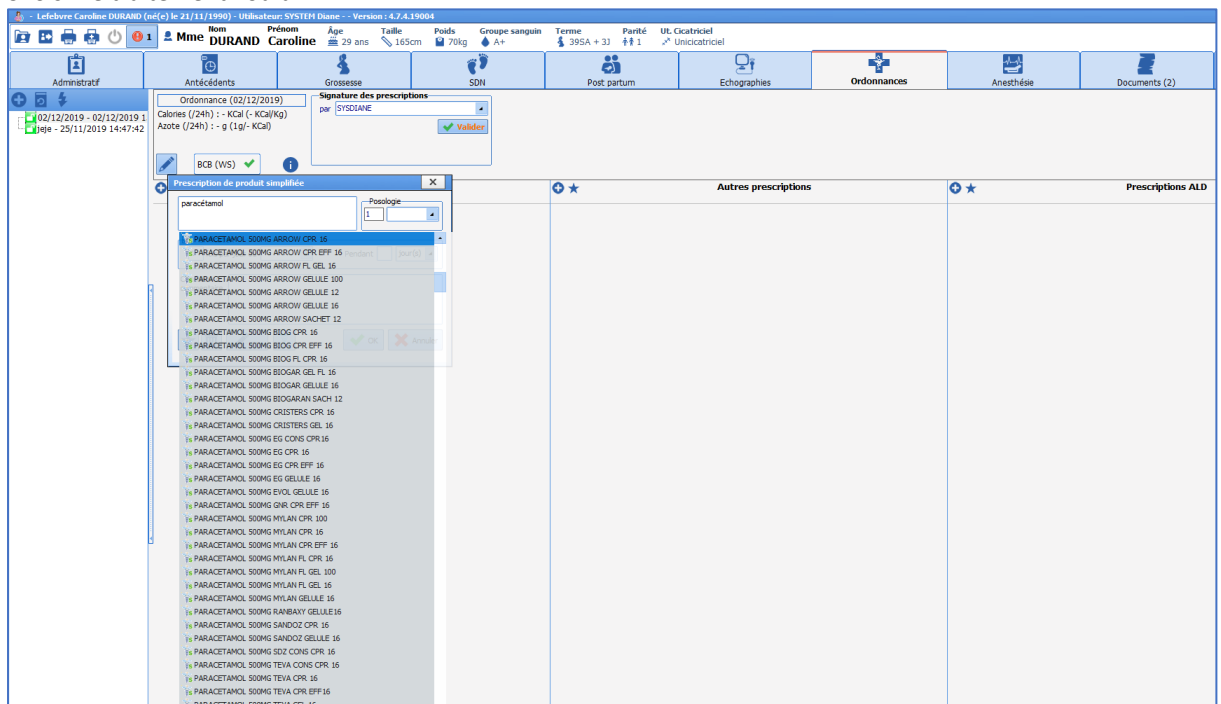Cliquer sur le bouton  situé en haut à gauche de la colonne **Prescription Non-ALD**. Une fenêtre de prescription apparaît.

- Taper le nom du médicament (DCI ou nom commercial) dans le cadre du haut. Une liste apparaît connectée à la banque de médicaments.
- Choisir le traitement voulu.



The screenshot shows the medical software interface for patient Mme DURAND Caroline. The patient's details include age (29), height (165cm), weight (70kg), and blood group (A+). The interface is divided into several sections: 'Administratif', 'Antécédents', 'Grossesse', 'SDN', 'Post partum', 'Echographies', 'Ordonnances', 'Anesthésie', and 'Documents (2)'. The 'Ordonnances' section is active, showing a list of prescriptions. A 'Signature des prescriptions' window is open, displaying the name 'SYDIZIANE' and a 'Validé' status. A 'Prescription de produit simplifiée' window is also open, showing a search for 'paracetamol' and a list of various paracetamol formulations, such as 'PARACETAMOL 500MG ARROW CPR 16', 'PARACETAMOL 500MG ARROW FL GEL 16', etc.

- Dans le cadre **Posologie**, choisir la posologie adaptée.

**REMARQUE** : Une posologie est proposée par défaut ainsi que la forme galénique en fonction du choix qui aura été fait dans la banque de médicaments. Si l'écriture du traitement est faite en dehors des propositions de la banque de médicaments, la posologie et la forme galénique ne pourront être prescrits convenablement.

**En résumé, le choix du traitement DOIT être fait parmi les traitements proposés par la banque de médicament**

- Le cadre **Planification** permet de choisir la fréquence et la durée d'administration du traitement
- Le cadre **Condition** permet d'annoter le traitement (préciser les conditions de prise du traitement, une indication particulière... (ex : si douleur)



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Prescription de produit simplifiée**

PARACETAMOL 500MG ARROW CPR 16

Posologie  
1 comprimés

Planification  
3 fois par jour ou pendant 1 mois

Condition ou commentaire  
Si douleur

★ 🗑️ ✎ ... 🏥

OK Annuler

- Cliquer sur **OK** : Une ligne de prescription apparaîtra dans la colonne correspondante.

- Lefebvre Caroline DURAND (né(e) le 21/11/1990) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Version : 4.7.4.19004

Mme **DURAND Caroline** 29 ans 165cm 70kg A+ 39SA + 3J

Administratif Antécédents Grossesse SDN Post partum

Ordonnance (02/12/2019)  
Calories (/24h) : - KCal (- KCal/Kg)  
Azote (/24h) : - g (1g/- KCal)  
Prix estimé : €6,30

Signature des prescriptions  
par SYSDIANE **Valider**

BCB (WS) ✓


**Prescriptions Non ALD**

1 comprimés de **Paracétamol 500 mg comprimé** (500 mg/comprimés) 3x/j , pdt 1 m Si douleur

- Cliquer sur le bouton  pour ajouter un autre médicament.

**Les favoris** : Certains traitements et examens complémentaires fréquemment utilisés en Obstétrique ont été préalablement paramétrés et sont disponibles dans les favoris.

Pour y avoir accès :

- Cliquer sur le bouton  situé en haut à gauche de la colonne souhaitée.
- Une liste apparaît : sélectionner le traitement approprié.

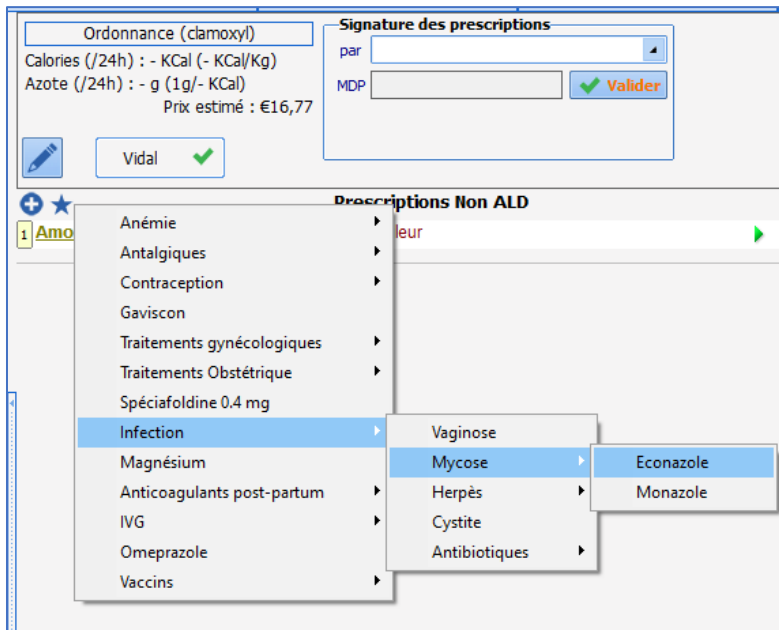


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)





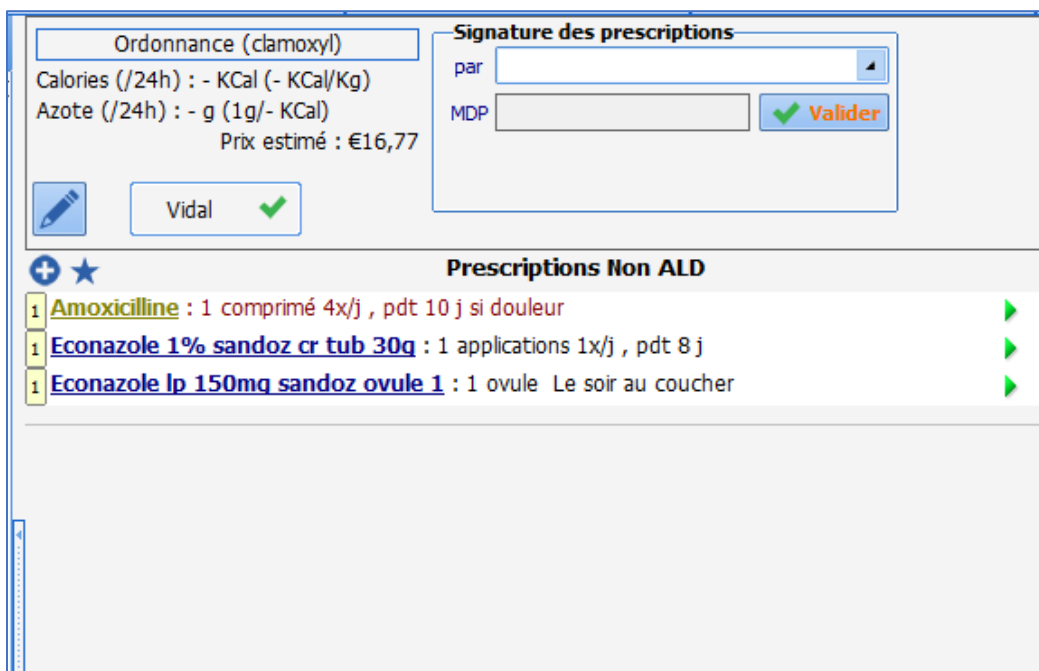DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



- Cliquer sur le traitement souhaité. La ligne de prescription apparaît automatiquement avec les posologies, fréquence et durée d'administrations préprogrammées.



Il est possible de créer ses propres favoris en cliquant sur le bouton  situé en bas de la fenêtre de prescription. Choisir **Privé** (Le favori ne sera disponible que pour son créateur). Le favori sera ensuite disponible en cliquant sur .



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Prescription de produit simplifiée**

CLAMOXYL 1 g cp dispers

Posologie: 1 comprimé

Planification: 4 fois par jour ou Pendant 10 jour(s)

Condition ou commentaire: si douleur

OK Fermer

**Création d'un favori de prescription**

Choix de la catégorie du favori: Pas de parent

Visibilité du favori (Un favori public sera accessible par tous les utilisateurs, un privé ne sera accessible que par son créateur)


Public  
 Privé

Nom du favori: Amoxicilline : 1 comprimé 4x/j , pdt 10 j si douleur

Valider Annuler

#### 4.7.2 Prescription des examens complémentaires et des soins :

Ces prescriptions se font via la colonne **Autres prescriptions**.

- Cliquer sur le bouton  en haut à gauche de la colonne **Autres prescriptions**.
- Dans la fenêtre du haut, noter l'examen souhaité puis cliquer sur **Valider**.

**Autres prescriptions**

Faire pratiquer en laboratoire : NFS, CRP, TP TCA :

Autres prescriptions: Faire pratiquer en laboratoire : NFS, CRP, TP TCA | Poids : 80 Kgs Taille : 170 cms

Planification ▲: Unique

Administration urgente  
 Heure non définie

Condition: J1

Date/Heure: 16:48 13/07/2020 Demain

Commentaire:

13-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 14-07-2020 15-07-2020 15-07-2020

16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00

Valider Annuler


Une ligne avec la prescription apparaît alors dans la colonne **Autres prescriptions**.

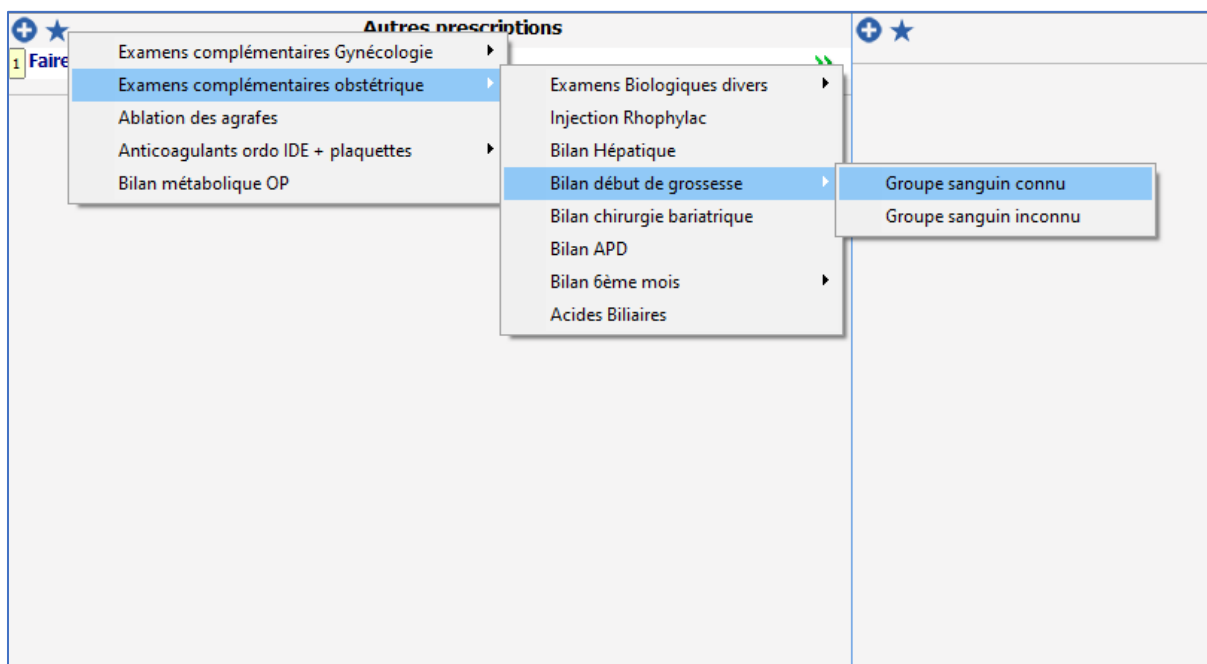
**Autres prescriptions**

Faire pratiquer en laboratoire : NFS, TP, TCA :





De la même manière que pour les prescriptions médicamenteuses, des favoris ont été créés et sont accessibles depuis le bouton .



### 4.7.3 Prescriptions ALD

Le fonctionnement est le même que pour les prescriptions Non-ALD mais concerne les traitements spécifiques des affections longue durée.

### 4.7.4 Validation d'une prescription

Une fois la prescription rédigée, il faut la valider au moyen du cadre **Signature des prescriptions** (situé en haut à gauche de la fenêtre). Le prescripteur devra signer sa prescription en notant son identifiant et mot de passe dans ce cadre puis en cliquant sur **Valider**.

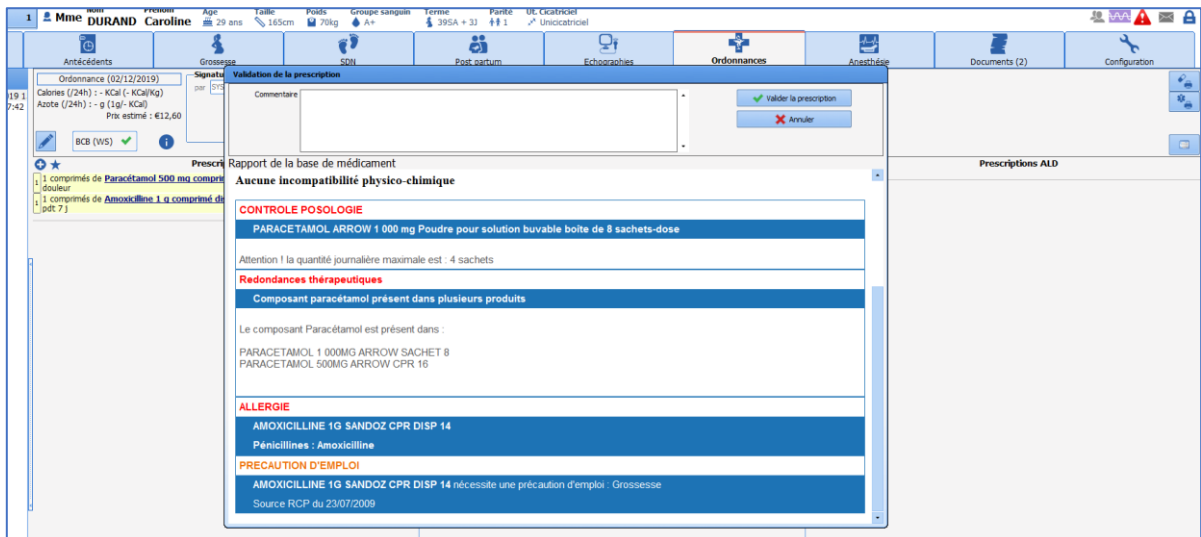
**REMARQUE** : pour les sage-femmes, un message d'alerte apparaîtra en cas de prescription en dehors du champ de prescription.



Pour les internes en médecine, il faut renseigner le cadre **Médecin sénior** qui permet de définir le sénior responsable de la prescription.

Analyse de la banque de médicaments : chaque prescription est analysée par la banque du médicament. Une alerte apparaît en cas d'interaction médicamenteuse, de posologie erronée ou encore de risque allergique.


Ci-dessous, un exemple d'alerte pour une prescription de Clamoxyl chez une patiente dont une allergie à la pénicilline avait été renseignée dans les antécédents médicaux.




#### 4.7.5 Impression des ordonnances

Deux boutons situés en haut à droite de la fenêtre permettent l'impression des ordonnances.

Le bouton en haut  permet d'imprimer des ordonnances médicamenteuses.

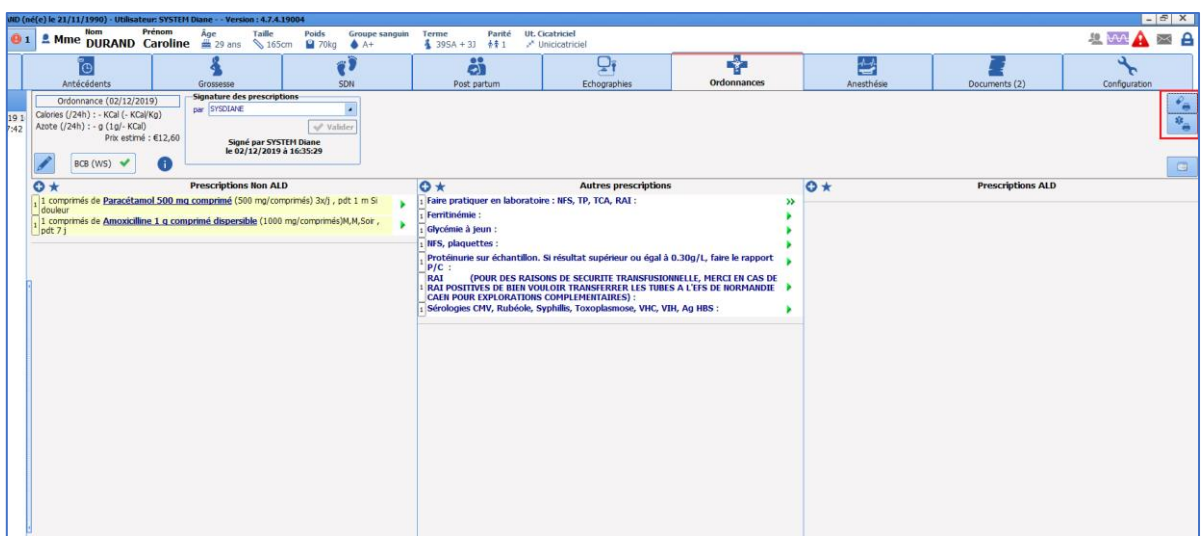Le bouton inférieur  permet d'imprimer les ordonnances d'examen complémentaires et soins.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**REMARQUE** : lors des consultations, les traitements apparaissent automatiquement sur le courrier de consultation uniquement s'ils sont prescrits via le bouton **Ordonnances ...** présent dans la saisie avancée.

## 4.8 Hospitalisation

Les hospitalisations seront suivies sur le dossier patient informatisé. **DIANE** permet de remplir une feuille d'hospitalisation et une feuille de sortie (située dans le tableau **Surveillance de la grossesse**).

La feuille d'hospitalisation est sous le même format que la consultation d'urgence et se remplit de la même manière.

- Le champ **Type**, situé en bas de la saisie avancée, permet de renseigner s'il s'agit d'une hospitalisation de jour, d'une entrée en hospitalisation ou d'une sortie. En cliquant sur **Entrée**, un cadre va apparaître permettant de noter les informations de l'entrée en hospitalisation.

- Lors de la sortie, il faut ouvrir la même feuille et cliquer sur **Sortie** dans le cadre **Type**. Cette action fait

apparaître un cadre permettant de noter les informations de sortie.

SA	J	Motif consultation
08	38	5 Contractions utérines
50	38	5 Ce - suivi

Prescrite: Année 2019  
Faite: Date 02/10/20

Résultats Labo Ext. Dossier  
PACS CS

Ex. morphologique: LA PGC DO  
Col: Longueur OI (mm) Placenta Manning

Examen biologique: NFS Bilan rénal PLA  
CRP Kleihauer ECRU  
RAT Ac. biliaires Gr Rh  
Bilan Hépatique PV Autre

Examen complémentaire

Diagnostic évoqué

Mode de sortie  
Prochain rendez-vous  
Prochain RDV écho  
Courrier

Type:  Entrée  De jour  Sortie

Date d'entrée: / /

Motif d'hospitalisation:  Programmée  Urgence  Autre

Maternité de provenance

Corticothérapie: Date cortico Mg/Jour

Commentaires Néonatalistes

Néonatalistes:  Bilan lactarium

Sortie: Date: / / Nb jours hospit:

Destination:  Domicile  Autre service  SSR  Autre établissement  Décès

Événement indésirable:  Oui  Non

Etablissement Diagnostic

Imprimer Ok Annuler

- Les ordonnances sont éditables depuis cette feuille d'hospitalisation via le bouton **Ordonnance**.
- Il est possible d'éditer le courrier de liaison en cliquant sur le bouton **Courrier de liaison**.

## 4.9 Onglet SDN

### 4.9.1 Le partogramme

#### 4.9.1.1 Saisie dans le partogramme

Le partogramme est accessible depuis l'onglet **SDN**, sous-onglet **Accouchement**.

Afin de noter les données du suivi de la patiente au cours du travail et de l'accouchement, différents boutons sont présents sur le bandeau supérieur du sous-onglet.

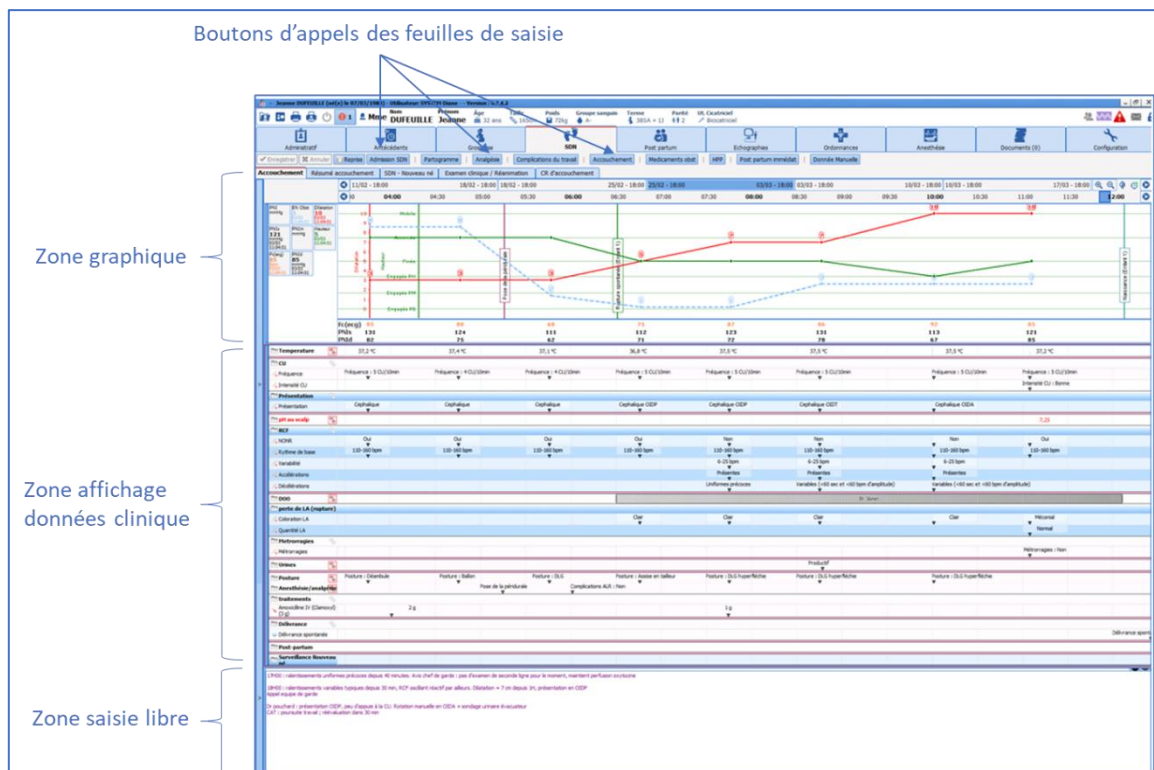


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



- Bouton **Admission en SDN** :

La saisie avancée **Admission en SDN** est à considérer comme une check-list permettant de saisir les éléments principaux de l'examen clinique à l'entrée en salle de naissance ainsi que de vérifier certains éléments type sérologies, carte de groupe, etc...

En haut à droite se trouvent 2 scores permettant de renseigner l'EN et la BU à l'admission.

L'évènement **Début du travail** est un élément majeur qui doit être renseigné. Il est à l'origine du calcul des différentes phases du travail qui seront faites durant le travail.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Saisie avancée**

**DEMO - Admission SDN**  
Admission accouchement  
Saisi par : Diane SYSTEM

Enfant : DUFEUILLE Enfant 1

Date d'occurrence : 03/03/2020 02:45:02

**Liste des enregistrements**  
Nouveau  
03/03/2020 02:45:02

**Motif d'admission** 1  
Travail spontané

SA 38 J 1

paramètres maternels  
Poids 72 Prise de poids Poids initial 72 HU(cm) 32  
PNI(s) (mmHg) 121 PNI(d) (mmHg) 68  
FC 85 SpO2 (%) T\*

**EN Obst : N/R**  
EN  
Score : Obst Band  
Valeur : Invalide

Provenance  
Domicile

Carte de groupe RAI Strepto B  
Complete Positif

Toxo < 10jours si Neg  
Oui Non Ce jour

Bilan pré anesthésique vu  
Oui Non

Résultat Antigène HBs vu  
Oui Non Ce jour

Cs pré-anesthésique faite  
Oui Non

Pose VVP  
Oui non

**Bishop : N/R**  
Hauteur  
Longueur  
Consistance  
Position  
Dilatation en cm

Activité cardiaque  
Oui Non

**Présentation** 1  
Céphalique

RCF à l'admission Normal Fréquence par 10 min (CU) 4

Mouvements actifs  
Présents  
Métrorragies  
Non  
LA à la rupture  
2

Début de travail le 03/03/2020 à 00:45:30  
Rupture spontanée le 03/03/2020 à 06:30:00

Dernière échographie  
Date 23/02/2020 SA 37 J  
Biométrie Normale Ex.morphologique Normal  
Placenta Fundique  
LA Normal

**Pathologie de la grossesse** 1  
Diabète gestationnel Traité par régime

Commentaire

Nouvel enregistrement à partir des valeurs courantes Imprimer Modifier Fermer

**REMARQUE :** les données notées dans cette feuille de saisie ne sont pas affichées dans le partogramme. Il est nécessaire de saisir une feuille **Partogramme** à la suite de la feuille d'admission en SDN.

- Bouton **Partogramme** :

Ce bouton appelle la saisie avancée permettant de renseigner les éléments de l'examen clinique.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Saisie avancée**

**DEMO - Partogramme**  
Partogramme  
Saisi par : Diane SYSTEM

Enfant : **DUFEUILLE Enfant 1**      Date d'occurrence : 03/03/2020 07:45:27

**Liste des enregistrements**

Nouveau

- 03/03/2020 03:45:35
- 03/03/2020 04:45:34
- 03/03/2020 05:45:50
- 03/03/2020 06:45:40
- 03/03/2020 07:45:27
- 03/03/2020 08:45:31
- 03/03/2020 10:00:04
- 03/03/2020 11:04:51

Constantes						Score : EN 01 Valeur : 1 EN : 1	Afficher
PNis (mmHg)	PNid (mmHg)	Fc	T°	Glycemie (g/l)	SpO2 (%)		
123	72	87	37,5				

CU	Fréquence	Intensité CU	Relâchement
	5 CU/10min		

Toucher vaginal - Col	
<p><b>Présentation</b> 1</p> <p>Cephalique OIDP</p>	<p>Consistance</p> <p>Position</p> <p>Longueur</p> <p>Flexion de tête</p>
<p><b>Dilatation : 7</b></p> <p>Ouverture du col</p> <p>7</p>	<p><b>Hauteur : 5</b></p> <p>Hauteur</p> <p>Fixée</p>

Rythme cardiaque foetal (RCF)				
NONR	Rythme de base	Variabilité	Accélérations	Ph au scalp
Non	110-160 bpm	6-25 bpm	Présentes	
<p>Décélérations</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Uniformes précoces    <input type="checkbox"/> Variables (&lt;60 sec et &lt;60 bpm d'amplitude)    <input type="checkbox"/> Prolongée &gt; 3 min</p> <p><input type="checkbox"/> Uniformes tardives    <input type="checkbox"/> Variables (&lt;60 sec et &gt;60 bpm d'amplitude)</p>				

<p>Diurèse</p> <p>Productif le 03/03/2020 à 08:47:30</p> <p>Saisir</p> <p>Sonde urinaire SAD</p> <p>Saisir</p> <p>Coloration des urines</p>	<p>Autres thérapeutiques</p> <p><b>Posture</b> 1</p> <p>DLG hyperfléchie</p> <p><input type="checkbox"/> Acupuncture</p> <p>Autre</p>
---	---

Liquide
Rupture spontanée le 03/03/2020 à 06:30:00
Saisir
Complément rupture
Saisir
Coloration LA
Clair
Quantité LA
Métrorragies
Appel le 03/03/2020 à 08:47:00
Saisir

+ Nouvel enregistrement à partir des valeurs courantes
Imprimer
Modifier
Fermer

**ATTENTION : Si la saisie est remplie en décalé par rapport à l'heure réelle de l'examen clinique, il est indispensable de modifier l'heure dans la case Date d'occurrence située en haut à droite.**

Date d'occurrence : 03/12/2019 08:30:41

Plusieurs cadres sont présents dans cette feuille de saisie :

**Constantes** : les données des constantes reviennent automatiquement depuis les moniteurs. Il n'est pas nécessaire de les modifier sauf en cas de désaccord avec les données notées.

**Contractions utérines** : permet de renseigner les données relatives à la dynamique utérine

**Toucher vaginal – col** : permet de renseigner les données de l'examen clinique

**Rythme cardiaque foetal** : Permet de renseigner le caractère Normo oscillant / normo réactif (NONR) du



RCF ainsi que le rythme de base. Dans le menu déroulant **NONR**, si le choix est **NON**, alors de nouveaux champs permettant de noter les caractéristiques du RCF apparaissent.

Les critères d'analyse du RCF correspondent à la classification du *collège national des gynécologues et obstétriciens Français*.

Rythme cardiaque foetal (RCF)

NONR	Rythme de base	Ph au scalp
<input type="button" value="Oui"/>	<input type="button" value="100-110 bpm"/>	<input type="text"/>

Rythme cardiaque foetal (RCF)

NONR	Rythme de base	Variabilité	Accélérations	Ph au scalp
<input type="button" value="Non"/>	<input type="button" value="100-110 bpm"/>	<input type="button" value="3-5 bpm"/>	<input type="button" value="Absentes"/>	<input type="text"/>

Décélérations

<input type="checkbox"/> Uniformes précoces	<input checked="" type="checkbox"/> Variables (<60 sec et <60 bpm d'amplitude)	<input type="checkbox"/> Prolongée > 3 min
<input type="checkbox"/> Uniformes tardives	<input checked="" type="checkbox"/> Variables (<60 sec et >60 bpm d'amplitude)	

**Diurèse** : permet de noter les sondages évacuateurs ou la pose d'une sonde urinaire à demeure ainsi que la coloration des urines.

**REMARQUE** : Par défaut, le dernier enregistrement reste affiché mais ceci n'empêche pas la saisie d'un nouveau sondage évacuateur par exemple.

**Autres thérapeutiques** : permet de renseigner les postures et thérapeutiques non médicamenteuses.

**Liquide** : permet de renseigner la rupture de la PDE (spontanée ou artificielle), un éventuel complément de rupture et la coloration du liquide.

**REMARQUE** : il est impossible de saisir deux fois l'événement **rupture de la PDE** : celui-ci est pré-paramétré pour que sa saisie soit unique.

**ATTENTION** : l'heure de l'occurrence et l'heure de saisie d'un événement sont différentes. Il est important de contrôler l'heure de l'événement. (En cas d'erreur, ceci est modifiable).

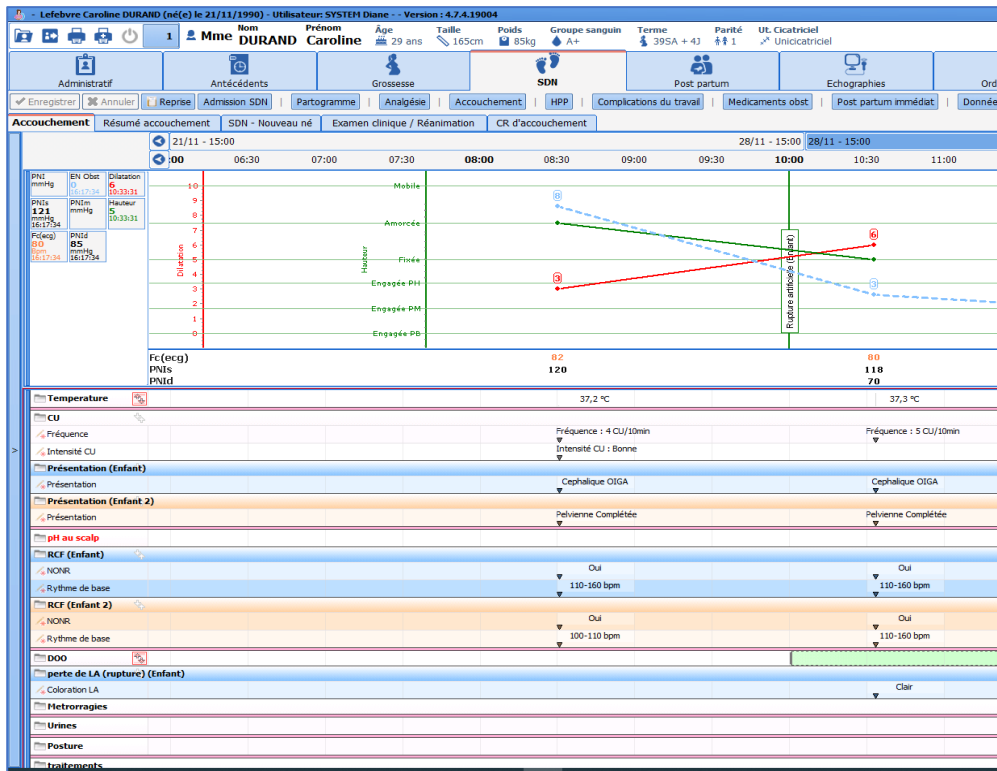




Une fois la saisie avancée nommée **Partogramme** remplie, cliquez sur **OK**. Le partogramme se remplira alors automatiquement. En cas de grossesse multiple, les données concernant le(s) fœtus se doubleront automatiquement.

Au fur et à mesure des saisies, le partogramme se construira tout au long du travail et des différents examens cliniques.





### Les chronomètres :

La saisie de l'évènement **Rupture de la poche des eaux** enclenche un chronomètre. Celui-ci s'affiche en vert sur le partogramme sous le nom **DOO** (durée d'ouverture de l'œuf). La saisie de l'évènement **naissance** stoppe le chronomètre.

Une Alerte sera visible au bout de 12 heures de DOO.

### - Bouton **Complications** :

Ce bouton appelle une liste de complications du travail permettant une saisie rapide en cas d'urgence. La sélection d'une de ces complications permet un affichage immédiat.

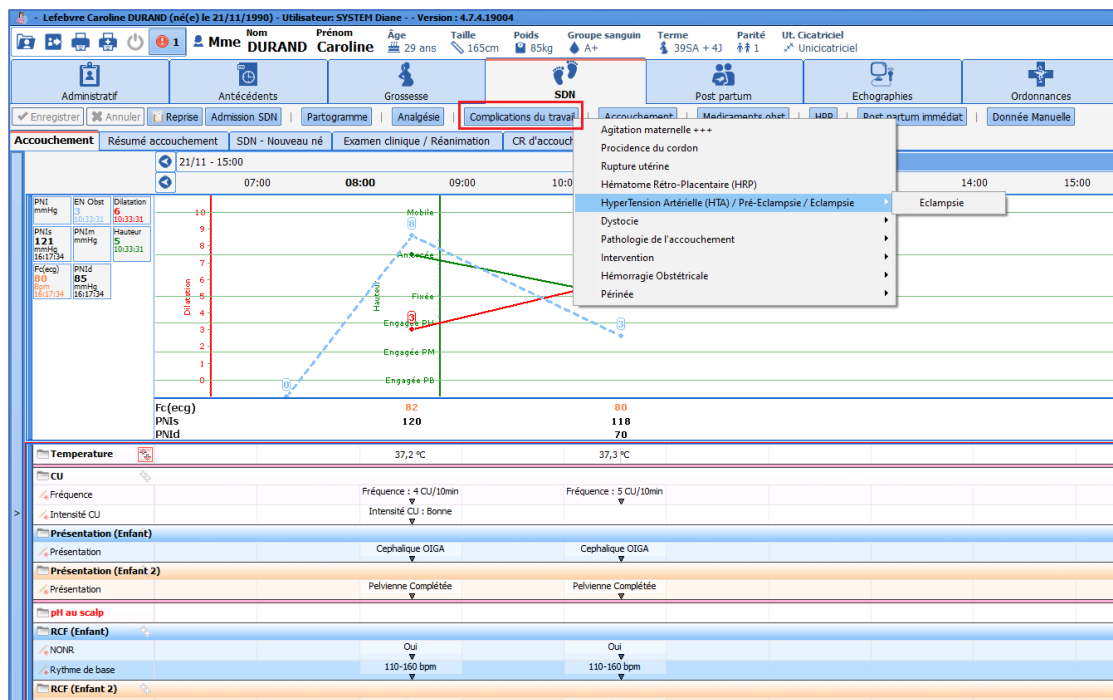


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



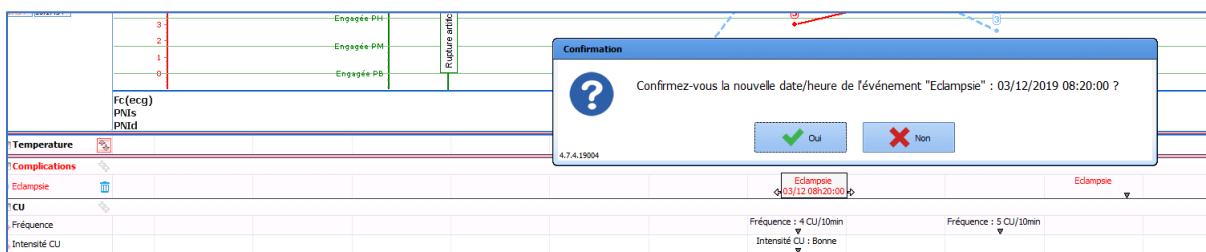Il est possible de modifier l'heure de survenue de la complication en cliquant dessus et en la déplaçant de gauche à droite sur sa ligne d'affichage.



- Bouton **Accouchement** :

Le bouton **Accouchement** permet de noter les informations concernant l'accouchement.

Le cadre **Voie basse** permet de noter la posture d'accouchement et l'heure de début des efforts expulsifs.

Le cadre **Césarienne** permet de noter l'heure de décision de la césarienne et l'heure de passage au bloc opératoire.

Le cadre **Urine** permet de noter le sondage urinaire évacuateur ou l'heure de pose d'une sonde urinaire à demeure si nécessaire.

Le cadre **APO** (Administration prophylactique d'oxytocine) permet de renseigner le professionnel responsable de l'APO, le moment de l'injection, la quantité d'oxytocine, l'heure et le mode d'administration.

À droite de la feuille, il est possible de noter l'heure de naissance de l'enfant, l'heure et le mode de délivrance, la réalisation d'une révision utérine et l'heure d'appel de l'équipe si nécessaire.

**REMARQUE** : en cas de grossesse multiple, il est impératif de penser à noter l'heure de naissance de chaque enfant en changeant l'enfant concerné dans le menu déroulant situé en haut de la feuille.



- Bouton **HPP** : La feuille **HPP** (hémorragie du post partum) permet de noter l'heure de diagnostic, les actes pratiqués, la quantité ou encore l'étiologie de l'HPP.
- Bouton **Post partum immédiat** : Permet de noter le suivi des patientes après l'accouchement jusqu'à la sortie de salle de naissance.




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

### 4.9.1.2 Le défilement du temps

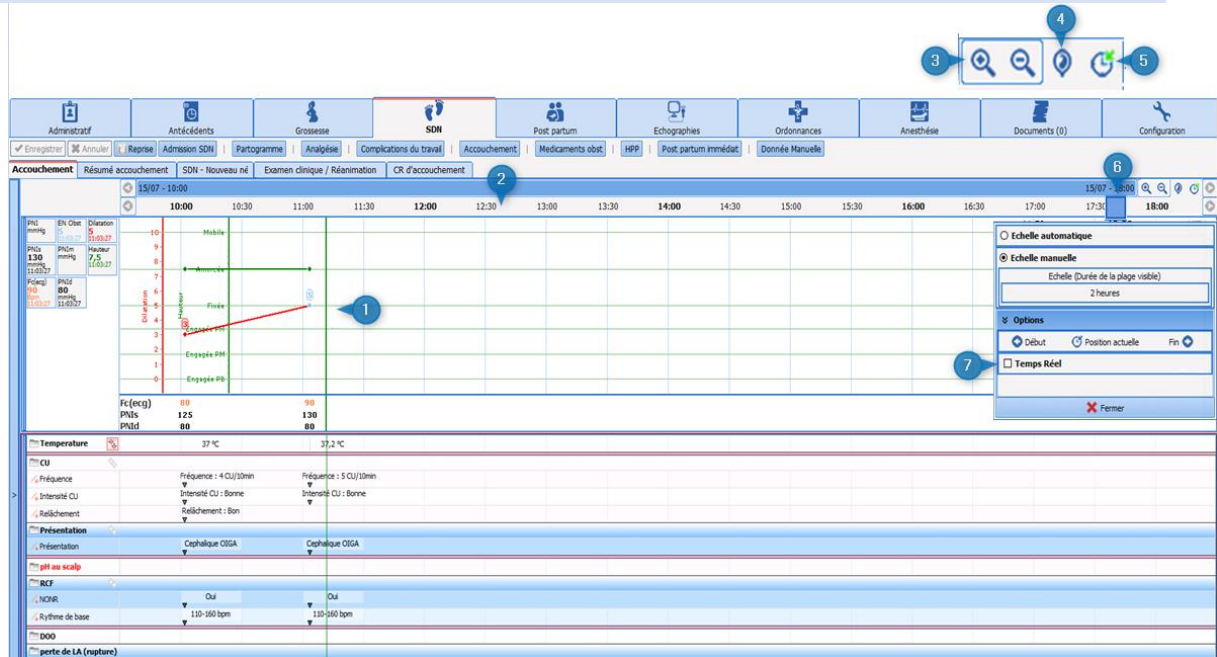

- 1 Zone de défilement du temps.
- 2 Le défilement du temps est matérialisé par une barre verte progressant le long du partogramme.
- 3 Zone de zoom / dézoom : permet de zoomer ou de dézoomer la zone graphique.
- 4 Permet de revenir 6H avant l'accouchement.
- 5 Aller à la position actuelle : permet de revenir au temps présent.
- 6 Curseur bleu : permet de se positionner à l'instant voulu : il suffit d'effectuer un clic gauche sur le curseur, de maintenir le clic et de déplacer le curseur.
- 7 Bloquer le défilement du temps : Un clic droit sur le bandeau supérieur de défilement du temps ouvre une fenêtre. La case **Temps réel** est précochée ce qui signifie que le graphique du partogramme s'écoule en temps réel. Le fait de décocher la case arrête le défilement du temps. Il est également possible de modifier la plage d'affichage via cette fenêtre.

### 4.9.1.3 Zone de saisie libre

Une zone située en bas du partogramme permet de saisir des commentaires en saisie libre afin de préciser les évènements du déroulement du travail si nécessaire.

perte de LA (rupture) (Enfant)	
Coloration LA	Clair
Hémorragies	
Urines	
Position	
traitements	
Délivrance	
<input checked="" type="checkbox"/> Délivrance spontanée	Délivrance spontanée
Post-partum	
<small>           12030 : Anomalies du RCF depuis 40 min. Ralentissements variables atypiques sur J1. LA clar Appel équipe de Garde            12045 : Dr Gibon / ARCF depuis 40 min. Dilatation complète, présentation partie haute. Installation DEE            12040 : Aggravation du RCF, Pose forceps de Tarnier partie moyen. Pose symétrique, traction douce         </small>	



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

## 4.9.2 Prescription en cours de travail

Les traitements administrables en cours de travail sont accessibles de deux manières :

Soit via le bouton **Médicaments obst** situé en haut du partogramme. Ce bouton appelle une liste de traitements.

Soit en effectuant un double-clic sur l'icône « dossier » à gauche de la ligne **Traitements** située sur la zone d'affichage des examens cliniques.

The screenshot shows a medical software interface with a partogram on the left and a list of medications on the right. The partogram displays various physiological parameters over time, including temperature, complications, and fetal heart rate. The medication list includes items like Oxytocine, Amoxicilline IV, and Trinitrate de Glycérine (Nitronal).

### 4.9.2.1 Prescription des traitements IVL / SAP : exemple de l'oxytocine

- Cliquer sur « Oxytocine » dans la liste de médicaments.

The screenshot shows a medical software interface with a patient's profile at the top and a list of medications below. The patient's name is Mme DURAND Caroline. The medication list includes Oxytocine (Syntocinon) and other items.

- Dans la fenêtre qui s'affiche, choisir la posologie adaptée

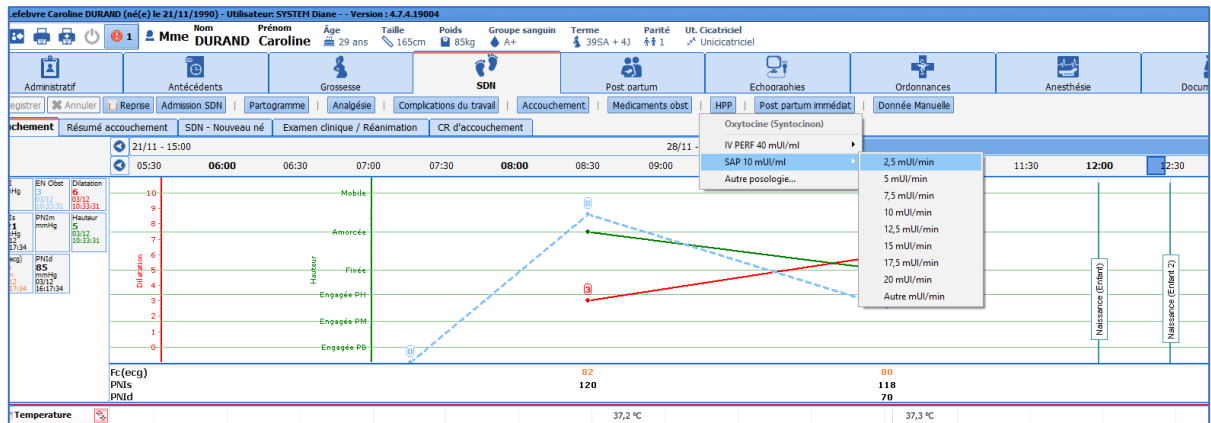


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



■ Le traitement s'affiche alors dans la ligne **Traitements**.

Métrorragies	
Urines	
Posture	
Traitements	Oxytocine (Syntocron) 2,5 mUI/min // 547,577 mUI
Délivrance	
Délivrance spontanée	
Post-partum	

- Pour modifier l'heure de début, il suffit de saisir l'extrémité gauche de la prescription et de la faire glisser jusqu'à l'heure voulue.
- Pour modifier le débit : cliquer sur la ligne du traitement voulue à l'heure où le débit a été modifié. Choisir le nouveau débit.

Le screenshot illustre la modification du débit. Le menu contextuel est ouvert sur la ligne de traitement, et l'option 'Modifier' est sélectionnée. Une légende indique : 'Cliquer à l'heure de la modification de débit'.

- La perfusion avec l'ancien débit se grise, et le nouveau débit se poursuit en vert.

DOO	
perte de LA (rupture) (Enfant)	
Coloration LA	
Métrorragies	
Urines	
Posture	
Traitements	Oxytocine (Syntocron) 2,5 mUI/min // 537,438 mUI 5 mUI/min // 833,136 mUI
Délivrance	
Délivrance spontanée	
Post-partum	

- Pour stopper la perfusion, effectuer un double clic gauche sur la ligne de perfusion (en vert). Choisir **arrêter** pour stopper la perfusion immédiatement. Choisir **arrêter ici** pour stopper la perfusion à l'endroit du clic de la souris. Choisir **modifier** pour noter une heure précise d'arrêt de la perfusion.



## 4.9.2.2 Prescription ponctuelle d'un traitement : exemple du Clamoxyl en cours de travail

- Choisir Clamoxyl dans la liste de médicaments puis choisir la posologie adaptée

- Le traitement viendra s'afficher automatiquement dans la ligne **Traitements**.

**REMARQUE 1 :** Il est possible de modifier l'heure d'administration du traitement en cliquant sur la flèche située sous la posologie (2 g dans l'exemple ci-dessus) et en la déplaçant de gauche à droite.

**REMARQUE 2 :** les données renseignées dans le partogramme sont automatiquement visibles dans l'onglet **Anesthésie** de sorte que la communication est optimisée entre les 2 spécialités. De plus, lorsque la pose d'une analgésie péridurale est notée dans l'onglet **Anesthésie** par le médecin anesthésiste, celle-ci s'affiche automatiquement dans le partogramme.

## 4.9.3 Résumé d'accouchement

Le résumé d'accouchement est structuré en 4 colonnes :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



- Début du travail
- Déroulement du travail
- Déroulement de l'accouchement
- Post-partum immédiat

#### 4.9.3.1 Début du travail

Des champs apparaissent en fonction du mode de début du travail. (ex : si déclenchement, des champs **Motif** et **Méthode de déclenchement** apparaissent).

Le champ **Analgésie / anesthésie** : permet de renseigner le mode d'anesthésie en cours de travail ou après l'accouchement si nécessaire

#### 4.9.3.2 Suivi du travail

Permet de noter les éléments concernant la surveillance foetale, le liquide amniotique et les traitements en cours de travail

#### 4.9.3.3 Accouchement

Permet de noter les renseignements sur le mode d'accouchement.

Comportements particuliers :

- **Issue de la grossesse** : de la même manière que dans l'onglet **ATCD obstétricaux**, il est nécessaire de renseigner à la fois le mode **d'accouchement ainsi que l'issue** et ce, pour tous les enfants en cas de grossesse multiple.

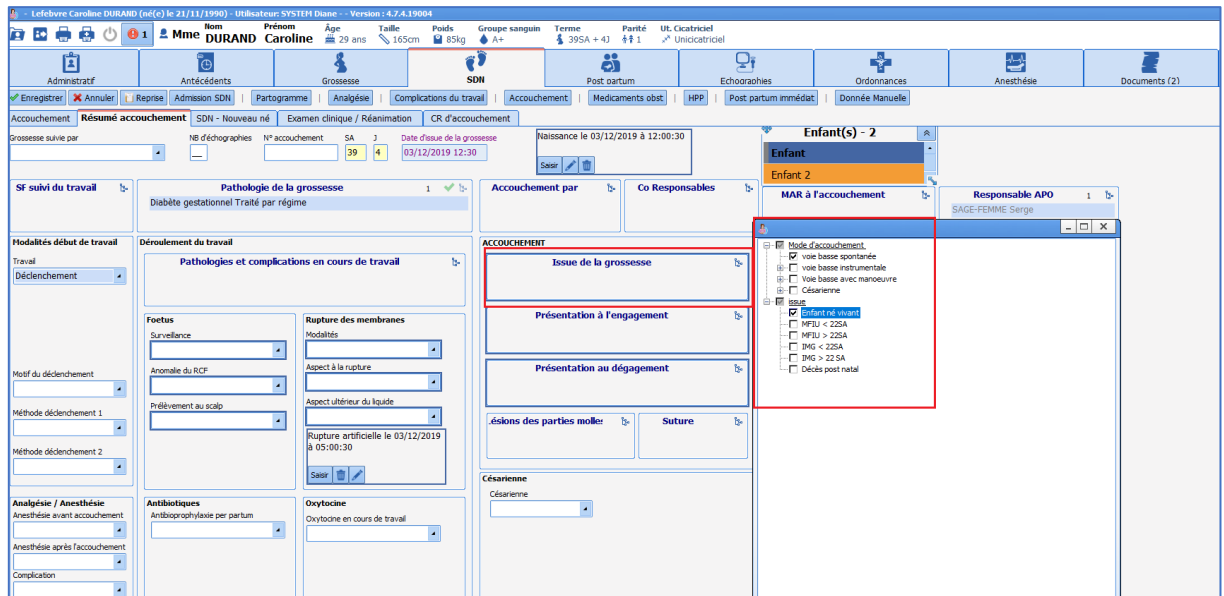


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



- **Présentation à l'engagement et au dégage** : en cas de césarienne, c'est la présentation au dégage qui sera prise en compte dans l'élaboration des comptes rendus. Il est tout à fait possible de noter uniquement « céphalique » sans préciser l'orientation de la présentation.
- **Menu déroulant Césarienne** : permet d'afficher des champs supplémentaires en cas de césarienne comme le « type d'incision », les potentielles interventions complémentaires ou les complications.
- **Motif de l'intervention ou de la césarienne** : ce cadre doit être rempli en cas de manœuvre, d'extraction instrumentale ou de césarienne.

#### 4.9.3.4 Post-partum immédiat

Il permet de renseigner les modalités de la délivrance. En cas d'**hémorragie du post-partum**, des champs apparaissent permettant de préciser les modalités de prise en charge.

Le cadre **APO (Administration Prophylactique d'Oxytocine)** se remplit automatiquement depuis la saisie avancée **Accouchement** remplie au préalable. Il est cependant possible de remplir les champs dans le résumé d'accouchement.

#### 4.9.3.5 Calcul des phases du travail

Le calcul des différentes phases du travail est automatisé. Pour que les calculs puissent se faire, les évènements suivants doivent obligatoirement être renseignés : Début du travail (dans **Admission accouchement**), dilatation à 10 cm (dans **Partogramme**), Naissance (dans **Accouchement**), délivrance (dans **Accouchement**).

### 4.9.4 Sous-onglet : SDN – Nouveau-né

Le sous-onglet **SDN – Nouveau-né** permet de renseigner les données néonatales des conditions de naissance :

Le bandeau supérieur permet de renseigner l'identité de l'enfant et son sexe.

**Apgar** : Le score d'Apgar se présente sous la forme de multiples menus déroulants rassemblant tous les critères de calcul du score. Il est possible d'accélérer la saisie en cliquant sur le bouton **10** situé en bas de chaque colonne.

Cadre **Prélèvements** : ce cadre permet de noter les différents prélèvements réalisés au nouveau-né.




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Le composant **Risque INBP** (risque d'Infection Néonatale Bactérienne Précoce) permet de classer l'enfant dans un groupe à risque d'Infection néonatale bactérienne précoce. Cliquer sur le  en haut à gauche du composant. Dans la fenêtre qui s'affiche, noter les informations. Le composant affichera dans quel groupe à risque d'INBP se trouve l'enfant.

The screenshot shows a software window titled "Saisie avancée" with a sub-header "Risque INBP" and "Nouvel enregistrement". The user is identified as "Diane SYSTEM". The date and time of occurrence are "04/12/2019" and "16:44:54". The group is set to "Groupe B". On the left, there is a "Liste des enregistrements" with a "Nouveau" button. The main area contains a form for "Risque d'Infection Néonatale Bactérienne Précoce" with the following options:

- colonisation streptocoque B
- ATCD d'INBP à strepto B
- RPM > 12H
- prématurité < 37 SA inexpliqué
- Antibio prophylaxie adéquate
- Antibio prophylaxie inadéquate
- fièvre maternelle > 38°C

At the bottom, there are buttons for "Imprimer", "Ok", and "Annuler".

The screenshot shows a window titled "Risque INBP - 04/12/2019 16:44:54 [Groupe B]". The main text reads: "Risque d'Infection Néonatale Bactérienne Précoce : colonisation streptocoque B, colonisation streptocoque B, Antibio prophylaxie inadéquate".

#### Cadre **Mensurations et percentiles** :


Pour saisir le poids, cliquer sur **Saisir** dans le cadre

The screenshot shows a small input field with the label "Poids g" and the value "0". A "Saisir" button is located next to the input field.


Une fenêtre s'ouvre où il est possible de saisir et de modifier le poids en cas d'erreur.



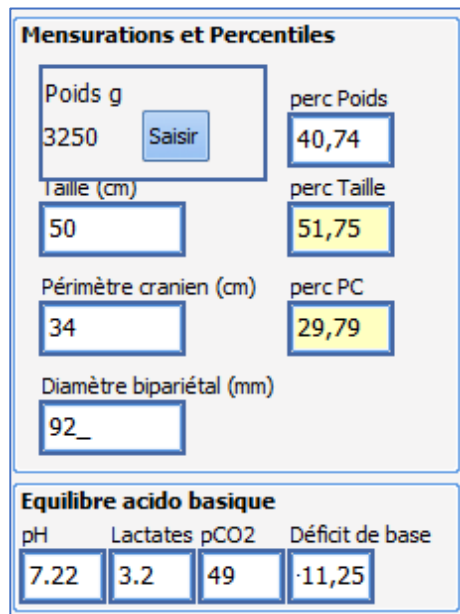La taille, le périmètre crânien et le diamètre bipariétal se renseignent simplement à l'intérieur des champs. Le calcul des percentiles est automatisé.



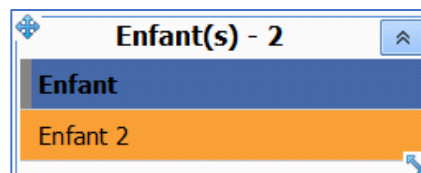Comme dans tout le dossier, il est nécessaire de remplir les données pour tous les enfants en cliquant sur le composant :



#### 4.9.5 Sous-onglet : Examen clinique / Réanimation

La saisie des données de l'examen clinique néonatal se fait simplement via des cases à cocher. Un cadre **Réanimation** est présent en bas de la feuille. Dans le menu déroulant **Réanimation**, si la donnée **Oui** est notée, des champs apparaissent permettant de noter le score de Silverman, les actes réalisés en cours de réanimation ou encore les conduites à tenir.

Ex : Examen clinique Jumeau 1 :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

LeFebvre Caroline DURAND (né(e) le 21/11/1990) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Version: 4.7.4.19004

Mme DURAND Caroline

Administratif | Antécédents | Grossesse | SDN | Post partum | Echoographies | Ordonnances | Anesthésie | Documents (2)

Enregistrement | Annuler | Reprise | Admission SDN | Partogramme | Analgésie | Complications du travail | Accouchement | Médicaments obst | HPP | Post partum immédiat | Donnée Manuelle

Accouchement | Résumé accouchement | SDN - Nouveau né | **Examen clinique / Réanimation** | CR d'accouchement

NOM: DURAND Prénoms: Enfant Naissance le 03/12/2019 à 12:00:30 Sexe: F SA: 39 J: 4 Rang de naissance: 2

**Examen cardio-respiratoire**  
 -Auscultation cardiaque normale:  Oui  Non  
 -Auscultation pulmonaire normale:  Oui  Non  
 -Anomalies à l'auscultation:  
 Souffle  Trouble du rythme  Tachycardie  Bradycardie  Autre  
 -Pouls fémoraux perçus:  oui  Non

**Examen neurologique**  
 Cri normal:  Oui  Non  
 Suction normale:  Oui  Non  
 Tonus axial normal:  Oui  Non  
 Tonus périphérique normal:  Oui  Non

**Abdomen**  
 Abdomen souple:  Oui  Non  
 -Ombilic normal:  Oui  Non  
 Hépatomégalie:  Oui  Non  
 Splénomégalie:  Oui  Non  
 Reins normaux:  Oui  Non

**Face et cou**  
 Cavité buccale normale:  Oui  Non  
 Examen oculaire normal:  Oui  Non  
 Choanes perméables:  Oui  Non  
 Fontanelles normales:  Oui  Non

**Malformation**  
 Présence d'une ou plusieurs  
 Commentaire:

**Sortie salle de naissance**  
 Réanimation:  Oui  Non  
 Age au moment du transfert (min):  
  
 Décès SDN

**Actes réa**  
 Aspiration 18h30

**TTT Nné en SDN**

Réanimation en salle de naissance  
 Réanimation:  Oui  Non  
 Responsable réanimation:  
  
 Appel pédiatrique: Antenatal  
 Transfert: Réa

Consignes du STAFF

### Examen clinique Jumeau 2 :

LeFebvre Caroline DURAND (né(e) le 21/11/1990) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Version: 4.7.4.19004

Mme DURAND Caroline

Administratif | Antécédents | Grossesse | SDN | Post partum | Echoographies | Ordonnances | Anesthésie | Documents (2)

Enregistrement | Annuler | Reprise | Admission SDN | Partogramme | Analgésie | Complications du travail | Accouchement | Médicaments obst | HPP | Post partum immédiat | Donnée Manuelle

Accouchement | Résumé accouchement | SDN - Nouveau né | **Examen clinique / Réanimation** | CR d'accouchement

NOM: DURAND Prénoms: Enfant 2 Naissance le 03/12/2019 à 12:30:00 Sexe: F SA: 39 J: 4 Rang de naissance: 2

**Examen cardio-respiratoire**  
 -Auscultation cardiaque normale:  Oui  Non  
 -Auscultation pulmonaire normale:  Oui  Non  
 -Anomalies à l'auscultation:  
 Souffle  Trouble du rythme  Tachycardie  Bradycardie  Autre  
 -Pouls fémoraux perçus:  oui  Non

**Examen neurologique**  
 Cri normal:  Oui  Non  
 Suction normale:  Oui  Non  
 Tonus axial normal:  Oui  Non  
 Tonus périphérique normal:  Oui  Non

**Abdomen**  
 Abdomen souple:  Oui  Non  
 -Ombilic normal:  Oui  Non  
 Hépatomégalie:  Oui  Non  
 Splénomégalie:  Oui  Non  
 Reins normaux:  Oui  Non

**Face et cou**  
 Cavité buccale normale:  Oui  Non  
 Examen oculaire normal:  Oui  Non  
 Choanes perméables:  Oui  Non  
 Fontanelles normales:  Oui  Non

**Malformation**  
 Présence d'une ou plusieurs  
 Commentaire:

**Sortie salle de naissance**  
 Réanimation:  Oui  Non  
 Age au moment du transfert (min):  
  
 Décès SDN

**TTT Nné en SDN**

Réanimation en salle de naissance  
 Réanimation:  Non  Oui

Consignes du STAFF

Le composant **TTT Nné en SDN** permet de renseigner les traitements administrés. Il possède 2 colonnes. La colonne de gauche permet de choisir le traitement administré et la colonne de droite permet de noter la posologie et l'enfant auquel a été administré le traitement en cas de grossesse multiple.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



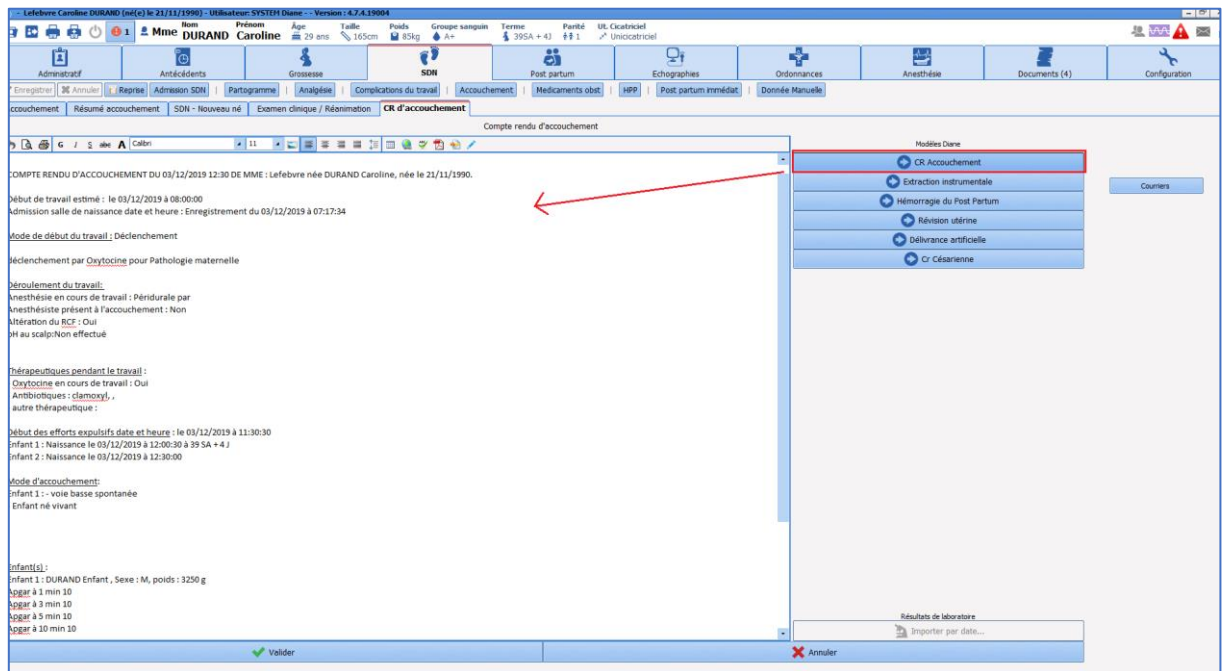
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



#### 4.9.6 Sous-onglet : CR d'accouchement

Cette partie permet la construction des différents comptes rendus et certificats d'accouchement. Le sous-onglet contient une grande fenêtre de saisie, des boutons sur la droite de la fenêtre permettant d'élaborer le compte-rendu d'accouchement et un bouton courrier (à droite) permettant l'impression des différents comptes rendus.

Exemple d'un accouchement voie basse : en cas d'accouchement voie basse, Il suffit de cliquer sur le bouton **CR accouchement**. Le compte-rendu s'affiche automatiquement dans la fenêtre de saisie. Dans la plupart des cas, il suffira d'imprimer le compte-rendu en cliquant sur le bouton **Courriers** et de choisir : « Compte-rendu d'accouchement ».




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



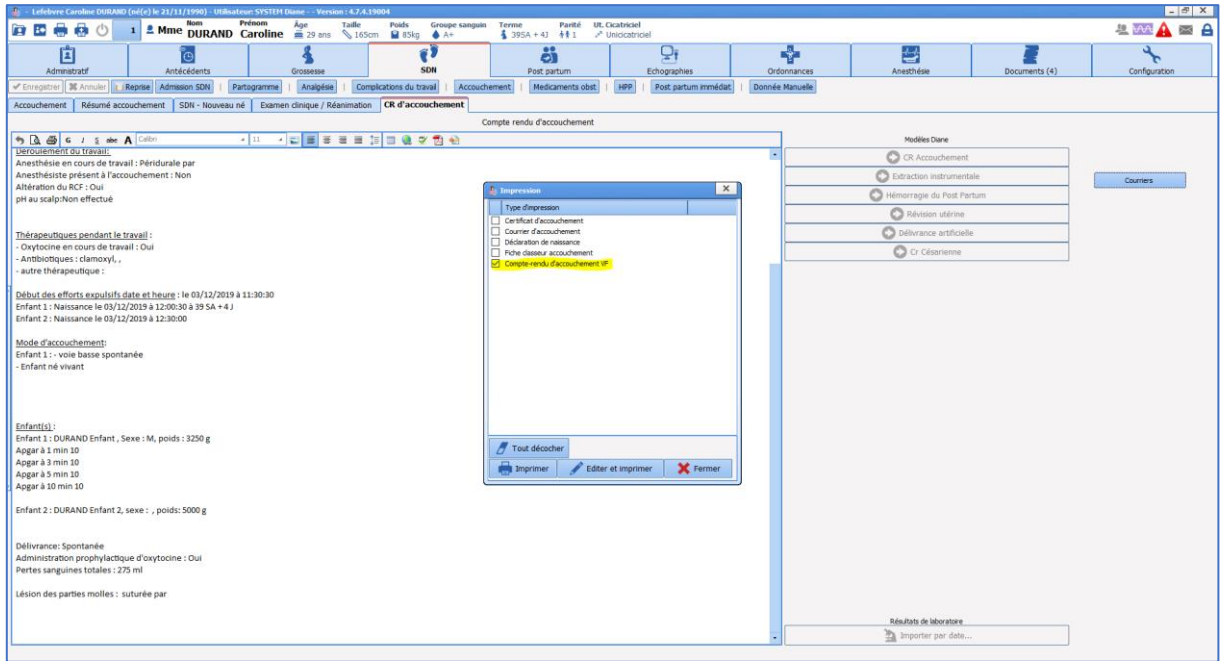
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



En cas d'extraction instrumentale, d'HPP, de révision utérine ou de délivrance artificielle, les boutons correspondants permettent d'ajouter des informations spécifiques relatives à ces évènements.

**Exemple d'une révision utérine :** Cliquer sur la fenêtre de saisie à l'endroit où vous souhaitez que les données soient ajoutées. Puis cliquez sur le bouton **Révision utérine**. Les données s'afficheront alors à l'endroit souhaité au sein du compte-rendu.

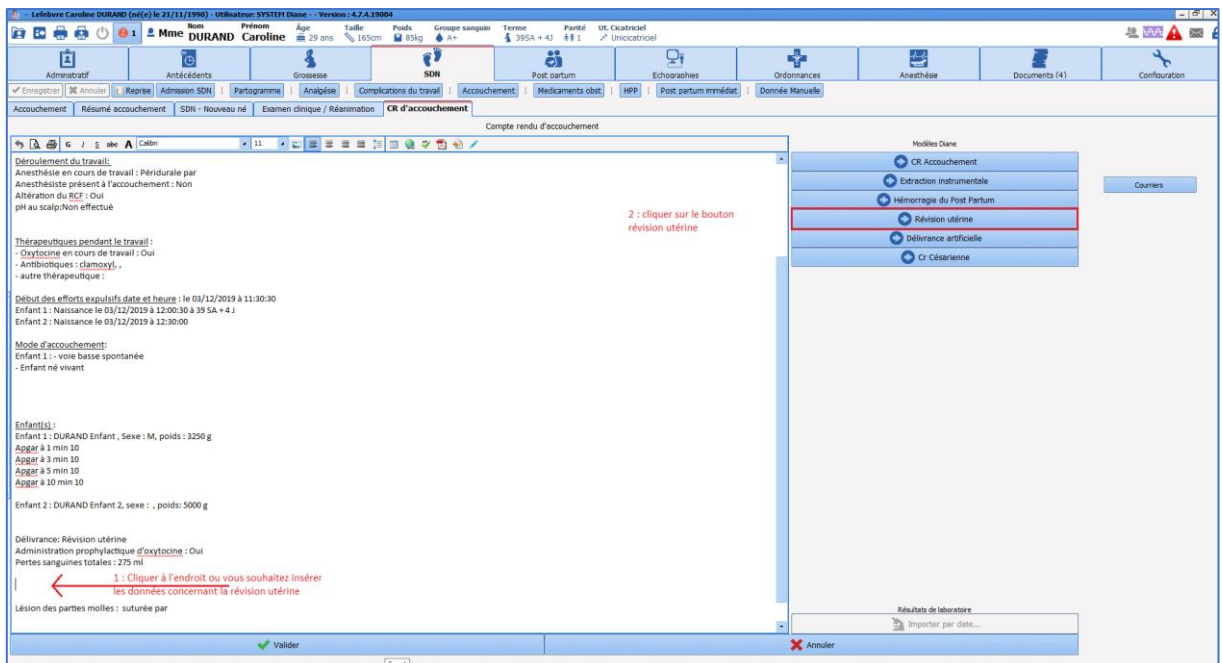Il suffit ensuite d'imprimer le compte-rendu.




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



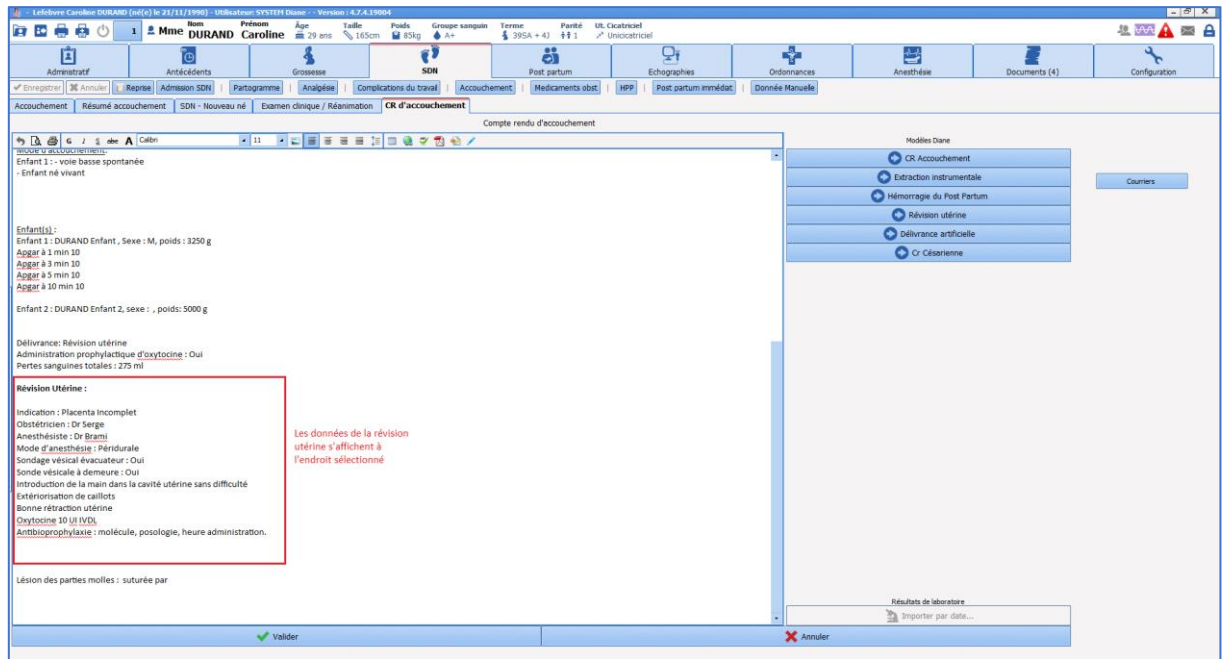DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28






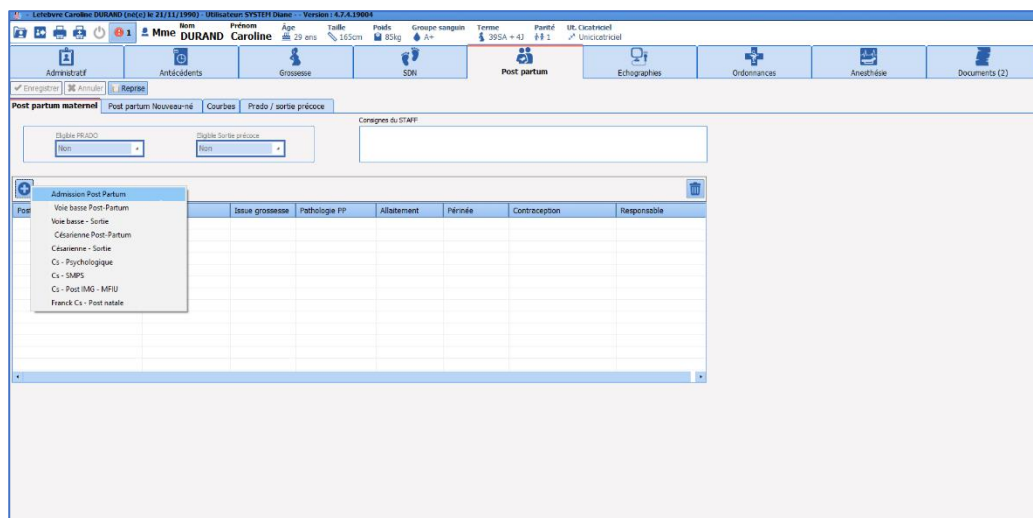
Il est également possible d'imprimer la déclaration de naissance ou encore le compte-rendu d'accouchement depuis le bouton **Courriers**.

**REMARQUE : L'édition automatisée des comptes-rendus ne dispense pas de la vérification des données qui sont sous la responsabilité du professionnel de santé.**

## 4.10 Onglet Post partum

### 4.10.1 Sous-onglet : Post partum maternel

Ce sous-onglet permet d'assurer le suivi des patientes durant le séjour en **Post Partum**. Ce sous-onglet se compose d'un tableau permettant de saisir chaque jour les différents paramètres de surveillance des patientes. Les différentes saisies avancées sont disponibles en cliquant sur le  bouton en haut à gauche du tableau.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



#### 4.10.1.1 Admission post-partum

Cette feuille de surveillance doit être ouverte pour chaque patiente. Elle permet d'avoir le résumé du dossier de la patiente. La plupart des informations sont préremplies et proviennent du résumé d'accouchement.

The screenshot shows a software window titled 'Saisie avancée' with a sub-header 'Admission Post Partum' and 'Nouvel enregistrement'. The user is 'Diane SYSTEM' and the patient is 'DURAND Enfant'. The date of occurrence is '05/12/2019' at '11:52:46'. The interface is divided into several sections:

- Liste des enregistrements:** A sidebar on the left showing 'Nouveau'.
- Groupes sanguins:** 'Groupe RH' (A+), 'Rhésus enfant', 'Rhophylac', and 'Kleihauer'.
- Antécédents médicaux:** 'Drépanocytose hétérozygote sans séquelles' and 'pas de suivi particulier; conjoint non porteur'.
- Allergies:** 'Pénicillines' and 'Oedème de Quincke'.
- Pathologies de la grossesse:** 'Diabète gestationnel Traité par régime'.
- Accouchement:** 'Date et heure de l'accouchement' (03/12/2019 12:30), 'SA' (39), 'J' (6), 'Nb Heures' (47), and 'Transfert post-natal'.
- Issue de la grossesse:** 'voie basse spontanée' and 'Enfant né vivant'.
- Motif de l'intervention ou de la césarienne:** Empty field.
- Lésion des parties molles:** Empty field.
- Pathologies en cours de travail:** 'Anomalies du RCF'.
- Modalités de délivrance:** 'Spontanée', 'Hémorragie' (Non), 'Pertes sanguines en mL' (275), and 'transfusion' (Non).
- Enfant:** 'Nom' (DURAND), 'Prénom' (Enfant), 'Localisation à l'entrée', and 'Type d'alimentation'.
- Vaccination cocqueluche:** 'Mme' (Prescrite) and 'Mr' (À prévoir).
- Evènement indésirable:** Radio buttons for 'Oui' and 'Non'.
- Commentaires:** A text area for notes.

At the bottom, there are buttons for 'Imprimer', 'Ok', and 'Annuler'.

#### 4.10.1.2 Surveillance Voie basse post-partum et Césarienne post-partum

Ces feuilles permettent d'assurer la surveillance des patientes durant leur séjour. La saisie avancée **Voie basse** sera utilisée pour le suivi des accouchements par voie basse (spontanée et extraction instrumentale) et la saisie avancée **Césarienne** pour les accouchements par césarienne.

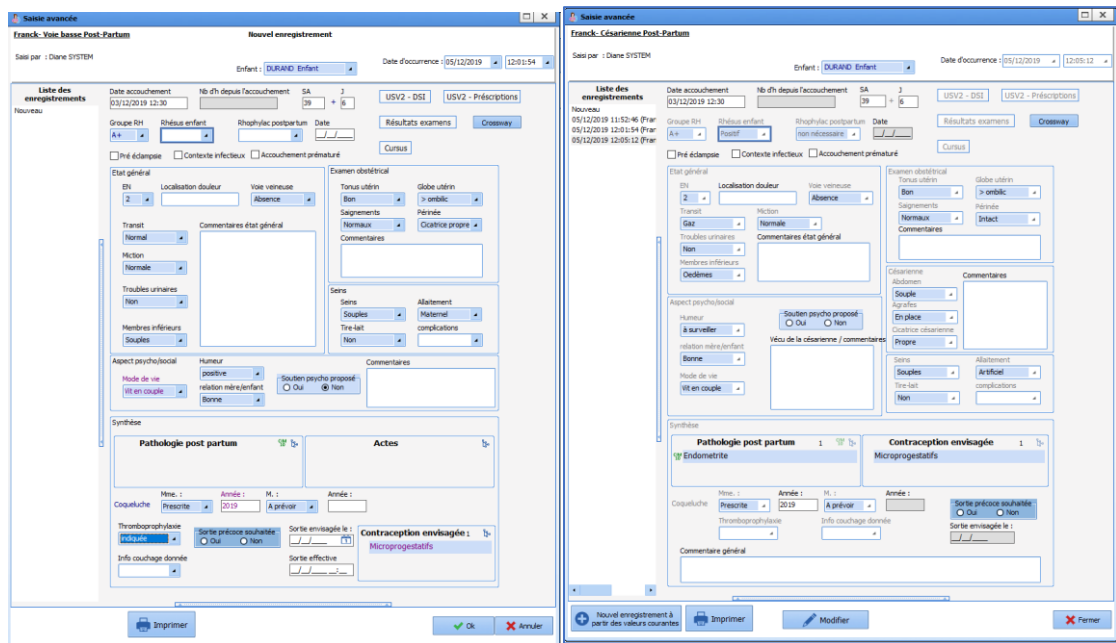


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



Les éléments importants de chaque saisie avancée sont regroupés dans le tableau des saisies avancées permettant un visual synthétique et rapide. On peut accéder aux saisies avancées en cliquant dessus.  
**REMARQUE** : afin de pouvoir modifier une saisie avancée déjà existante, il faut cliquer sur le bouton **Modifier** situé en bas de la saisie avancée. Cependant, une saisie avancée ne peut être modifiée que par son créateur.

#### 4.10.1.3 Feuille de sortie Voie-basse et césarienne

Les feuilles de sortie **Voie basse** et **Césarienne** doivent être remplies lors de la sortie de la patiente. Elles sont conçues sur le même modèle que les feuilles de suivi du post partum mais présentent un cadre **Sortie** supplémentaire qui permet de renseigner la date de sortie, les évènements indésirables et d'éditer les courriers. Depuis cette feuille, il est possible d'éditer le courrier de liaison à destination du médecin traitant. L'édition des ordonnances de sortie se fait quant à elle via le bouton **Ordonnance**.

#### 4.10.1.4 Consultation post natale :

La consultation post-natale est accessible depuis ce même onglet. De la même manière que pour les autres saisies avancées, il est possible d'éditer le compte-rendu de consultation et les ordonnances depuis cette feuille de consultation. La consultation permet de renseigner les données de l'examen clinique et également le score d'Edimbourg. Il sera possible de clôturer le dossier à la suite de cette consultation.

### 4.10.2 Sous-onglet : Post partum Nouveau-né

Ce sous-onglet est principalement destiné aux pédiatres. Il permet d'avoir un visual synthétique et rapide sur tous les évènements de la grossesse et de l'accouchement concernant le nouveau-né.

Lefebvre Caroline DURAND (né(e) le 21/11/1990) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Version : 4.7.4.19004

Mme DURAND Caroline 29 ans 165cm 85kg A+ 39SA + 4j 1 Parité 1 Ut. Cicatriciel Unicoatriciel

Administratif Antécédents Grossesse SDN Post partum Echographies Ordonnances Anesthésie

Post partum maternel Post partum Nouveau-né Courbes Prado / sortie précoce

Antécédents de la mère

Allergies me de Quincke

Contexte psychosocial 25/11/2015 11:28

Antécédents médicaux 1 Drépanocytose pas de suivi hétérozygote sans séquelles Addictions 1 Tabac Consommation hors grossesse occasionnel

Antécédents obstétricaux

Date issue grossesse	Issue de la grossesse	SA	Poids nouveau né
22/11/2018 15:05	37		3250 g
25/11/2015 11:28	6		0
	0		

traitements habituels LAROXYL 25MG CPR 100 25 mg (Amirprytline chlorhydrate) 1-1-1

Suivi prévu

Sérologie

Toxoplasmose Rubéole Négatif Négatif

Antigène HbS HIV Négatif Prescrit

Syph/s Cytomégalo virus Négatif Négatif

GS/h maternel A+

Suivi DAN Oul Non

Vaccins

Vaccination coqueluche Monsieur A prévoir

Vaccination coqueluche madame Prescrite

Vaccination contre la grippe A jour 02/10/20

Atcd d'allergie(Asthme)Eczéma

Résumé de l'accouchement

Déroulement de l'accouchement

Issue de la grossesse 2 voie basse spontanée Enfant né vivant

Motif de l'intervention ou de la césarienne

Anomalie du RCF Oui Colostron LA Clair

Nouveau-né

Poids en gr	Taille en cm	PC en cm
3250	50	34
99,06	51,75	29,79

Appar à 1 min 10 Appar à 3 min 10 Appar à 5 min 10 Appar à 10 min 10

pH 7.22 Lactates 3.2 Prélèvement gastrique Non Glycémies capillaires Non

Méconium Miction

Risque d'Infection Néonatale Bactérienne Précoce : colonisation streptocoque B, colonisation streptocoque B, Antibiothérapie inadéquate

Alimentation en SDN Oui Type d'alimentation

Examen clinique Nouveau né

Venue pour	Date	Responsable	Commentaires

Un tableau en bas du sous-onglet permet d'accéder à 2 saisies avancées : **Examen clinique du nouveau-né** (permettant de renseigner les éléments de l'examen si celui-ci est nécessaire en cours de séjour) et **Examen de sortie** permettant au pédiatre de noter son examen avant la sortie de l'enfant. Les courriers et ordonnances sont accessibles depuis ces saisies avancées.

#### 4.10.3 Sous-onglet : Courbes

Dans cette fenêtre, il est possible de renseigner le poids journalier ainsi que les valeurs de bilirubinémie.

Pour renseigner une valeur :

- noter la valeur souhaitée dans la case **Valeur**,
- cliquer sur la touche **Envoyer** qui permet de valider la valeur et de l'afficher sur la courbe.
- il est possible de modifier l'heure et la date de saisie en cliquant sur **Modifier la date et l'heure d'occurrence** ou directement sur les champs de date et heure.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

#### 4.10.4 Sous-onglet : Prado / sortie précoce

Deux cadres composent cet onglet : cadre **Prado** et cadre **Sortie précoce**. Ces deux cadres sont composés de cases à cocher relatant l'ensemble des critères à remplir pour être éligible à une sortie précoce. Après avoir coché l'ensemble des cases (si la patiente correspond aux critères), les menus déroulants **Eligibilités** seront automatiquement notés **Oui**. Cette information sera reportée en haut de l'onglet **Post-partum maternel**.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

## 4.11 Certificat du 8<sup>e</sup> jour

L'édition du certificat du huitième jour est accessible via le bouton **CERFA** situé dans le sous-onglet **Post-partum maternel**.

Le clic sur ce bouton ouvre la fenêtre de génération du document CERFA. La plupart des informations sont préremplies et proviennent directement du dossier de la patiente.

The screenshot shows the 'Cerfa Generator' window. At the top, there are navigation buttons: 'Imprimer', 'Page précédente', and 'Page suivante'. The 'Numero de page' is 1/2. A 'Zones' dropdown menu is set to 'Remplir le nom' with a 'Texte' input field below it. The main form is divided into three sections:

- Enfant:** Nom: D U F E U I L L E; Prénom: E n f a n t 1; Date de naissance: 0 3 0 3 2 0 0 9; N° FINES: 1 4 0 0 0 0 2 0 9; Lieu de naissance: C H U D E C A E N; Adresse: N A C R E 1 4 0 0 0 C A E N.
- Enfant's mother:** Nom de naissance de la mère: D U F E U I L L E; Prénom: J e a n n e; Date de naissance: 0 7 0 3 8 8; Niveau d'études de la mère: Ecole primaire; Couverture sociale: Sécurité sociale (checked), AME (unchecked); Activité professionnelle: Mère (1 Activité salariée, 2 Autre activité, 3 Retraité, 4 Au foyer).
- Examen médical:** Examen effectué par un: Pédiatre (checked), Autre (unchecked); L'enfant nécessite une surveillance médicale particulière: Non (checked), Oui (unchecked); Je demande une consultation médicale spécialisée: Non (checked), Oui (unchecked); Je souhaite être contacté par le médecin de PMI: Non (checked), Oui (unchecked); Conclusions, précisions et commentaires: (empty grid).

Lorsqu'une information est manquante :

- Case à cocher non saisie : pour remplir une case à cocher, il suffit de cliquer sur la case correspondante.
- Champ de saisie : pour saisir une information manuellement, cliquer sur la zone que l'on souhaite compléter sur le document CERFA puis compléter les informations voulues dans la case **Texte** en haut de la fenêtre.

**REMARQUE** : Pensez à bien remplir les 2 feuillets (recto/verso) du certificat du 8<sup>e</sup> jour.

Une fois le certificat complété, cliquer sur le bouton **Imprimer**.

### 4.11.1 Cas des grossesses multiples

Pour Ouvrir le certificat du 8<sup>e</sup> jour du premier jumeau, cliquer sur **Enfant 1** dans l'encart de choix des enfants à côté du bouton **CERFA**, puis cliquer sur le bouton **CERFA**.

Pour ouvrir le certificat du second enfant, cliquer sur **Enfant 2** dans l'encart de choix des enfants à côté du bouton **CERFA**, puis cliquer sur le bouton **CERFA**.

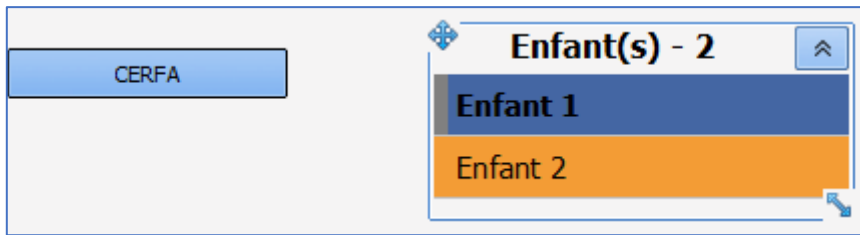


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




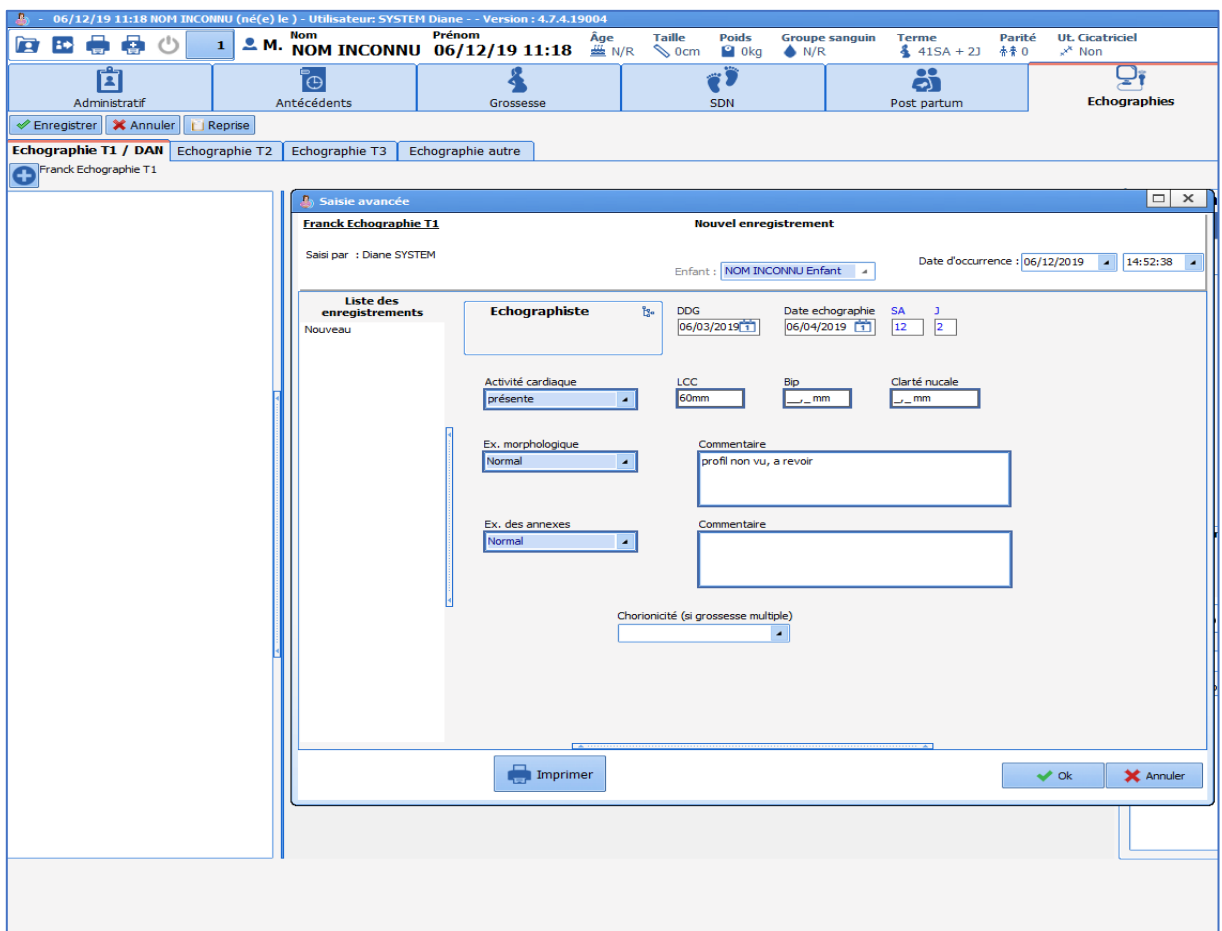
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



## 4.12 Onglet Échographies

Cet onglet permet de noter les informations des différentes échographies. Il se compose de 4 sous-onglets permettant de saisir respectivement les échographies du 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> trimestre ou d'autres échographies intercurrentes.

Pour noter les données d'une échographie : cliquer sur le sous-onglet de l'échographie correspondante. Cliquer sur le signe . Une fenêtre permettant de noter les données apparaît. Il suffit de la compléter et de cliquer sur **OK** en bas de la feuille de saisie.



Dans la colonne de droite, la liste des échographies apparaît. Cliquez sur l'échographie concernée pour faire apparaître les données saisies.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**REMARQUE :** l'échographie T1 située dans l'onglet **Echographie** est la même que celle notée dans l'onglet **Début de grossesse**. Le calcul du terme via la LCC étant tributaire de la saisie de la LCC, celle-ci peut être notée indifféremment dans l'un ou l'autre des onglets.

**REMARQUE :** Il est possible de scanner les échographies faites à l'extérieur de la maternité. Celles-ci seront alors stockées dans l'onglet **Documents**.

#### 4.13 CAS DES ACCOUCHEMENTS SOUS X

Dans le cas d'un accouchement sous X, la législation impose un anonymat complet. Ainsi, il est nécessaire de créer un nouveau dossier au sein duquel il conviendra d'anonymiser les données administratives. L'anonymat n'étant possible qu'à partir du début du travail, les patientes souhaitant accoucher sous X devront être suivies sous leur nom pendant toute la durée de la grossesse. **À l'admission en Salle De Naissance, il conviendra de créer un nouveau dossier anonymisé** sans reprise des données du dossier de la patiente.

#### 4.14 DOSSIER DE GYNECOLOGIE

La configuration de gynécologie permet de gérer les consultations, les feuilles d'admission et de sortie d'hospitalisation, les comptes rendus d'hospitalisation et d'interventions. À l'ouverture d'un dossier, choisissez Gynécologie.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Dans cette configuration, les onglet **Administratif**, **Antécédents**, **Gynécologie**, **Échographies**, **Ordonnances**, **Documents** et **Configuration** sont présents.

Le fonctionnement des onglets **Administratif**, **Antécédents**, **Échographie** et **Ordonnances** sont identiques entre les différentes configurations.

Nous ne verrons donc que le fonctionnement de l'onglet **Gynécologie** dans cette partie.

L'onglet **Gynécologie** se compose de 2 boutons en haut de la feuille de saisie. Le bouton **CRO** permet l'édition des différents comptes rendus opératoires.

**Morphologie** : ce cadre permet de renseigner la morphologie de la patiente de la même manière que dans la configuration d'obstétrique.

**Sang** : Ce cadre permet de saisir le groupe sanguin et la date des 2 déterminations de groupe.

**Tableau de saisies avancées** : Ce tableau permet d'appeler les différents types de consultation. Plusieurs modèles sont disponibles.

#### 4.14.1 Consultation de Gynéco

La consultation de gynécologie est une saisie avancée simple qui permet de saisir l'ensemble des données de l'examen clinique. Un composant particulier **Antécédent obstétrical** permet d'avoir un visuel rapide sur les antécédents.

La structure de la consultation s'organise de haut en bas avec des parties : Antécédents, Interrogatoire, examen clinique, échographie pelvienne, diagnostic.

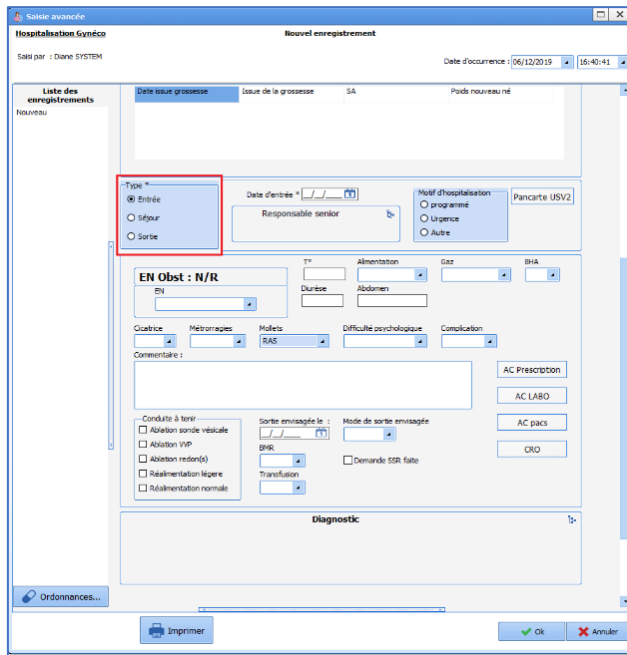
Il est possible d'éditer des ordonnances depuis le bouton **Ordonnance** au sein de la consultation.

#### 4.14.2 Hospitalisation gynéco


Cette feuille permet de renseigner les données à l'entrée et à la sortie de la patiente. Lors de l'entrée, sélectionner **Entrée** dans le champ **Type** puis renseigner les données.







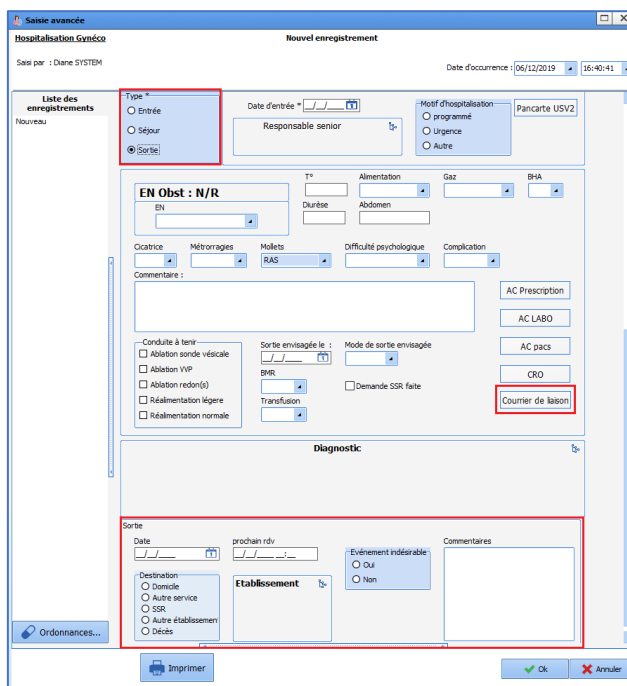Lors de la sortie, reprendre la même feuille d'hospitalisation et noter **Sortie** dans le champ **Type**. Un nouveau cadre apparaîtra en bas de la feuille permettant de noter les informations sur la sortie de la patiente. Le bouton **Courrier de liaison** apparaîtra permettant l'édition du courrier d'hospitalisation.



#### 4.14.3 Cs – Acupuncture gynéco / Cs – colposcopie gynéco

Ces deux feuilles de saisie fonctionnent selon le même mode que les autres saisies avancées avec des données orientées sur l'acupuncture et la colposcopie. Elles ne présentent pas de fonctionnalité particulière.

À la sortie de la patiente ou à la fin de la consultation, il convient de clôturer le dossier si un suivi régulier




et rapproché n'est pas prévu.

## 4.15 DOSSIER D'ORTHOGENIE

### 4.15.1 Introduction

La configuration d'orthogénie permet la gestion intégrale des IVG depuis la consultation pré-anesthésie jusqu'au contrôle post-IVG.

À l'ouverture d'un dossier, choisissez **Orthogénie**. Il est nécessaire à cette étape de renseigner la date de début de grossesse (celle-ci sera modifiable ultérieurement).



Dans cette configuration, les onglets **Administratif**, **Antécédents**, **Orthogénie**, **Échographies**, **Ordonnances**, **Documents** et **Configuration** sont présents.

Le fonctionnement des onglets **Administratif**, **Antécédents**, **Échographie** et **Ordonnances** sont identiques entre les différentes configurations.

Nous ne verrons donc que le fonctionnement de l'onglet **Orthogénie** dans cette partie.


### 4.15.2 Suivi en orthogénie

La feuille d'orthogénie permet dans sa partie supérieure de renseigner des données administratives et notamment des informations sur l'accompagnant en cas de patiente mineure.

Cette partie permet également de noter l'issue de la grossesse dans le champ **Issue de la grossesse T1**. Les données renseignées dans cet onglet seront transférées automatiquement dans les antécédents obstétricaux lors d'une grossesse ultérieure.




The screenshot displays the 'Orthogénie' module in the DIANE software. At the top, there is a header with patient information: 'M. M. durand nadine', age 'N/R', height '0cm', weight '0kg', blood group 'A+', and other details. Below this, there are tabs for 'Administratif', 'Antécédents', 'Orthogénie', 'Echographies', 'Ordonnances', and 'Documents (0)'. The 'Orthogénie' tab is active, showing a form with various input fields and checkboxes. A dropdown menu is open, listing consultation types: 'Cs - Pré IVG', 'Protocole IVG médicamenteuse', 'Protocole IVG chirurgicale', 'Cs - Post IVG', 'Cs - Psychologique', 'Cs - SMPS', and 'Cs - Assistante sociale'. At the bottom of the form, there is a 'Courriers orthogénie' button.

Dans le tableau de saisie avancée, cliquer sur le signe  pour faire apparaître la liste des saisies avancées disponibles.


**Cs-pré IVG** : L'objectif principal de cette feuille est de recueillir les données de l'interrogatoire, de l'examen clinique et de s'assurer et de recueillir le consentement de la patiente.

- Protocole IVG médicamenteuse / IVG chirurgicale : Ces 2 feuilles permettent de noter les traitements prescrits en vue de préparer l'IVG chirurgicale ou de pratiquer l'IVG médicamenteuse.

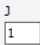**Cs – post IVG** : Cette consultation permet de renseigner les données du contrôle post-IVG.


Le champ  est un calcul automatique du nombre de jours depuis l'IVG (noté dans le cadre **Date issue de grossesse**).

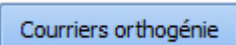D'autres consultations sont disponibles : Cs psychologue, SMPS et assistante sociale.

Sous le cadre des consultations se trouve un bouton d'appel  permettant l'édition des différents courriers d'orthogénie.

Lors de la fermeture d'un dossier d'IVG, cliquer sur la case à cocher **Clôturer le dossier**. Le dossier sera ainsi finalisé. L'antécédent d'IVG ainsi créé sera rempli automatiquement dans le champ **ATCD obstétricaux** lors d'une grossesse ultérieure.

## 4.16 Fermeture du dossier

La fermeture d'un dossier se fait en cliquant sur le signe  situé en haut à gauche de l'écran.

- **En consultation et en post partum**, une fenêtre s'ouvre permettant de quitter le dossier. Cliquer sur **Oui** pour fermer simplement le dossier. La case à cocher **Clôturer le dossier** permet de fermer définitivement le dossier.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?

Choisissez les actions à effectuer pour le dossier

Cloturer le dossier

- **En salle de naissance**, la même manipulation conduit à l'ouverture de la fenêtre suivante :

Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?

**Fermer le dossier du patient Caroline DURAND ?**

**Il reste 3 action(s) bloquante(s) non renseignée(s) :**  
- Saisir les 3 saisies avancées...

Choisissez les actions à effectuer pour le dossier

**Sortir de la salle de naissance**

**Transférer :** Autre

Heure de fin d'intervention  
10:10:36 06/12/2019

Imprimer le dossier

En rouge, des actions bloquantes empêchent la fermeture du dossier. Ces actions représentent les check-lists dont le remplissage est obligatoire (Identitovigilance et check-list matérielle de salle de naissance). La case **Sortir de la salle de naissance** permet de fermer simplement le dossier. La case **Transférer** permet le transfert du dossier qui pourra être ouvert dans un autre service (Hospitalisation en post-partum par exemple). Cette case doit être cochée après un accouchement lors du transfert d'une patiente dans le service de suite de couche.



## 5. DIANE REA

Le module de réanimation permet de recueillir et de renseigner le dossier patient dans son intégralité par l'ensemble des corps de métiers. Il est constitué d'onglets et de sous-onglets correspondants aux différentes phases de la prise en charge médicale et paramédicale.

### 5.1 Aspect général de DIANE REA

Les différentes parties du logiciel permettent un suivi adapté à chaque type de pathologie. Des composants différents vont offrir des fonctionnalités spécifiques afin de faciliter le recueil de données et de sécuriser la prise en charge.

Certains sous-onglets permettent le recueil du dossier administratif, médical et paramédical. Des modes de saisis spécifiques facilitent la transcription des évolutions et comptes-rendus grâce à la possibilité d'alimenter nombre de modèles prédéfinis. Un composant spécifique permet en plus de noter rapidement les transmissions ciblées.

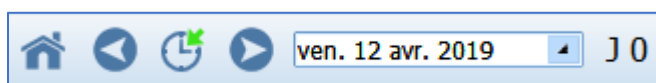
Le plan de soins permet de renseigner les différentes actions menées auprès du patient tout au long de la journée de réanimation. Il permet également l'affichage des différents paramètres physiologiques et biologiques recueillis.

Un outil de prescription exhaustif permet de gérer l'intégralité des prescriptions utilisées en réanimation. Des pancartes hybrides permettent de combiner un affichage graphique des données physiologiques (constantes, paramètres ventilatoires ...) et offrent ainsi la possibilité visuelle d'effectuer une fine analyse de l'état clinique du patient.


La navigation dans **DIANE REA** se base sur les différents onglets paramétrés. Vous pouvez visualiser les informations contenues dans le dossier patient en cliquant d'un onglet à l'autre. Suivant la configuration paramétrée, vous n'aurez pas forcément accès à tous les types d'onglets présentés ci-dessous et il se peut que leurs appellations soient différentes.

#### Déplacement dans le temps


Sur l'ensemble des onglets de l'application, vous pouvez vous déplacer dans le temps grâce au bandeau ci-dessous.



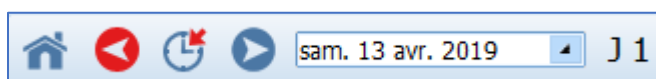Le clic sur les **deux flèches** bleues permet de se déplacer d'un jour et donc de visualiser les données du patient du jour indiqué (ici, le vendredi 12 avril 2019).




Si vous avez cliqué sur le bouton flèche-bleue dirigé à droite, vous affichez les informations du lendemain soit le samedi 13 avril 2019.

Le clic sur le **bouton**  permet de se situer sur le jour courant. En faisant un clic droit sur ce bouton, l'application vous amène au jour de l'admission patient.

Le déploiement du menu déroulant permet de choisir un jour précis à l'aide d'un calendrier.

Les éléments en rouge vous permettent de revenir vers le présent



Le bouton  permet de retourner sur la liste des patients du service.

**REMARQUE** : Lorsque vous modifiez l'affichage sur un onglet, les autres onglets se décalent également.

### 5.1.1 Le bandeau supérieur



Le bandeau supérieur est visible en permanence sur l'écran et donne un retour permanent sur certaines informations comme

- Le nom patronymique, le nom marital, le prénom, le sexe, l'âge
- La localisation, l'unité fonctionnelle
- La durée du séjour
- La taille, le poids, le poids théorique, l'indice de masse corporelle, etc...






Sur la droite du bandeau, différentes icônes sont présentes.




- 1 Codes CCAM <sup>CCAM</sup> : permet de voir au survol à la souris les codes enregistrés en fonction des éléments renseignés dans le dossier. En double-cliquant dessus, vous avez accès au formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM
- 2 Messagerie orientée patient  : en cliquant sur l'icône, il est possible de rédiger un message concernant le patient qui sera visible au survol à la souris (également présent sur le portail). L'icône devient rouge lorsqu'un message est présent sur le dossier et redevient gris au bout de 24 heures.
- 3 Acquisition des données  : Icône dynamique (ondulation) qui indique si l'acquisition des données provenant des appareils biomédicaux est effective ou non.
- 4 Icône allergie : permet de visualiser les allergies au survol de la souris. D'autres informations peuvent également être affichées au survol de cette icône.
- 5 Icône Coronavirus : s'affiche si l'information **Coronavirus** est saisie dans le composant de saisie des infections présent dans l'onglet **Germes**.
- 6 Icône isolement contact : permet de visualiser le type au survol de la souris.
- 7 Icône isolement aérien : permet de visualiser le type au survol de la souris.
- 8 Icône isolement gouttelettes : permet de visualiser le type au survol de la souris.
- 9 Icône isolement protecteur : permet de visualiser le type au survol de la souris.





- 10 Icône colonisation : permet de visualiser le type au survol de la souris.
- 11 **DIANE MESSAGERIE**  : en cliquant sur l'enveloppe vous avez accès à la messagerie **DIANE**, vous pouvez rédiger des messages
- 12 Changer d'utilisateur  : en cliquant sur le cadenas vous verrouillez l'application, vous, ou un autre utilisateur, vous pouvez vous reconnecter en renseignant votre mot de passe dans la fenêtre de connexion située dans la barre des tâches ou bien en cliquant sur le bouton **Changer utilisateur** sur la fenêtre verte apparue


Données estimées  : cette icône apparaîtra dès lors qu'une case aura été cochée dans la fenêtre de renseignement à l'ouverture d'un dossier patient. En double-cliquant sur cette icône vous pourrez visualiser ces données estimées et/ou les modifier

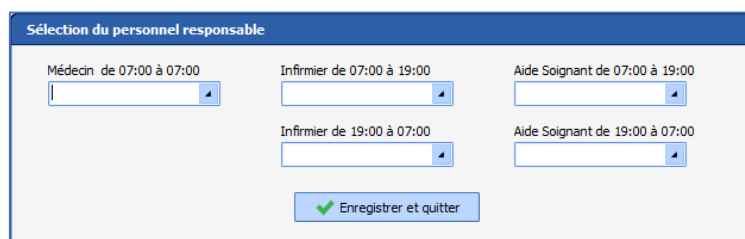
#### Autres fonctionnalités du bandeau supérieur :

Date du jour  Zone affichant par défaut la date du jour. En changeant la date, on peut se déplacer à une date précise.  L'encart devient rouge si la date sélectionnée n'est pas la date courante.

Durée du séjour  Compteur de la durée du séjour du patient depuis son admission dans **DIANE**.

Prendre la responsabilité  Renseigne directement l'utilisateur connecté (ayant au choix un rôle de médecin, infirmier ou aide-soignant) comme responsable. Cette fonctionnalité est aussi directement accessible depuis le portail de réanimation. Quand une responsabilité est prise l'icône change et devient verte  sur le portail.

Zone personnel responsable  **Aucun personnel responsable renseigné pour ce jour.** Ouvre une fenêtre permettant de définir l'équipe en charge (médecin, infirmier, aide-soignant) du patient pour la plage horaire de la prise de poste (en fonction de la journée de réanimation paramétrée : par exemple, de 07h00 à 19h00).



Si des responsabilités ont été saisies, affiche la fonction, la plage horaire correspondante ainsi que le nom et prénom des personnes renseignées comme responsable pour le patient (pour les catégories médecin, infirmier et aide-soignant).



Le clic affiche à nouveau la fenêtre de sélection du personnel responsable.

Si le dossier est transféré entre 2 services, le personnel responsable est remis à zéro afin de pouvoir saisir les personnels responsables dans le nouveau service.



Certaines icônes consacrées aux mesures de confinements peuvent apparaître à droite de la barre :



Voici leur signification :



**Aérien**

Port du masque obligatoire



**Gouttelettes**

Port du masque et de lunettes



**Contact**

Port de gants



**Contact IG**



**Contact ICD**




**Contact BHRE**



**Protecteur**

### 5.1.2 Navigation entre les dossiers

La navigation entre les différents dossiers est facilitée à partir d'un poste miroir. Le bouton  permet d'afficher le menu suivant :



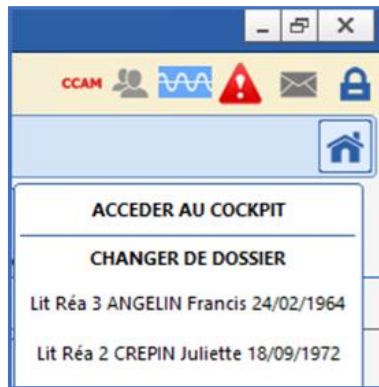
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28






Il est ainsi possible de retourner sur le cockpit ou d'ouvrir directement l'un des dossiers chargés sur l'un des postes visibles depuis le cockpit. Dans ce cas, le dossier s'affiche sur le même onglet.

## 5.2 Admission du patient et sélection du dossier

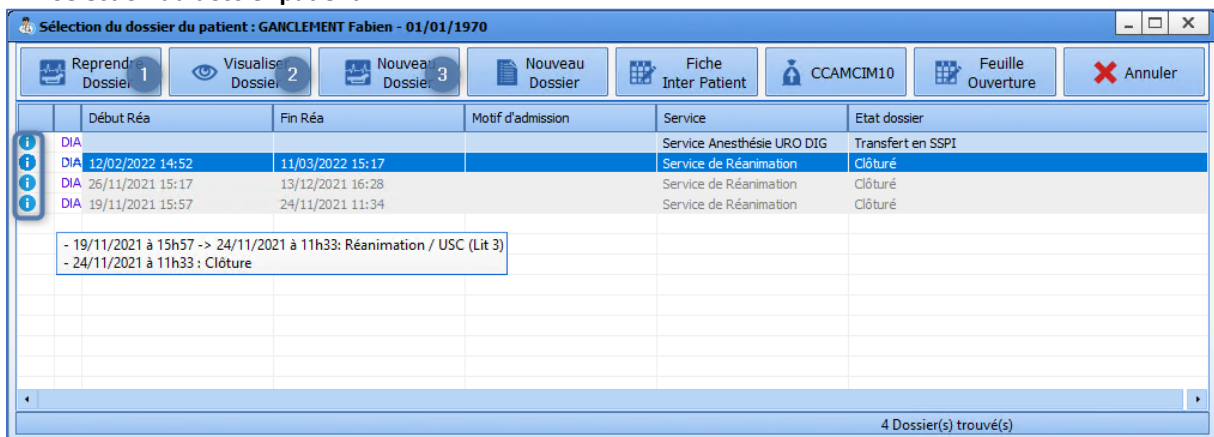L'admission du patient peut être réalisée à partir du poste maître ou d'un poste distant.

Cliquez sur le bouton **Admission patient**.

Sélectionnez le patient (Cf. chapitre : « *Sélection du patient* »). Cette action ouvre la fenêtre de **Sélection du dossier patient**.



À partir de cette fenêtre, et via les boutons situés dans son en-tête, il est possible de :

- 3. Nouveau Dossier** : permet de démarrer un nouveau séjour en réanimation. D'ouvrir un nouveau dossier.
- 1. Reprendre Dossier** : permet de reprendre un dossier déjà en cours. Par exemple : le patient sort de réanimation vers l'USC, afin d'assurer la continuité du dossier, il est important de cliquer sur **Reprendre Dossier**. Si le dossier est clôturé depuis trop longtemps pour être repris (la durée pendant laquelle un dossier peut être repris est paramétrable), le bouton est désactivé.
- 2. Visualiser dossier** : permet de visualiser l'ancien dossier du patient dans son intégralité.

Lorsque le patient a déjà plusieurs dossiers dans **DIANE**, la fenêtre affiche en tête de liste le séjour prévu dans l'unité dans laquelle vous vous trouvez ; le tri s'effectue ensuite par date puis par l'Etat du dossier : clôturé, non réalisé...

Les dossiers clôturés sont grisés : ils peuvent être visualisés ou repris si la date de clôture est comprise dans l'intervalle de temps permettant la reprise.

Pour chaque séjour de réanimation, on retrouve :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



- patient...
- Saisir les données manquantes.
  - Cocher la case à cocher **Données estimées** lorsque celle-ci est incertaine. Les données estimées pourront être complétées ultérieurement dans le dossier.
- Cliquer sur le bouton **Valider**
- Chargement et ouverture du dossier
- Le patient est admis, la prise en charge peut débuter.

**Remarque :** Si lors de son précédent séjour, le patient était porteur d'une infection non clôturée, l'information sera reprise dans cette fenêtre.

Veuillez saisir les informations du patient "ANGELIN Jean" manquantes :

	Donnée estimée ?
Taille : <input style="width: 60px;" type="text" value="154"/> cm	<input type="checkbox"/>
Poids : <input style="width: 60px;" type="text" value="56"/> kg	<input type="checkbox"/>
Date de naissance : <input style="width: 80px;" type="text" value="20/12/1965"/>	<input type="checkbox"/>
Sexe : <input style="width: 80px;" type="text" value="Homme"/>	<input type="checkbox"/>
Date d'entrée : <input style="width: 80px;" type="text" value="11/04/2019"/>	
Heure d'entrée : <input style="width: 80px;" type="text" value="16:34"/>	

Une infection était en cours sur le séjour précédent !  
 Pour plus d'information, consultez les dossiers antérieurs.

✓ Valider

### 5.2.1 Cas de la reprise d'un dossier en transfert

Dans le cas d'un dossier en transfert, deux cas sont possibles à la reprise en réanimation/USC :

- Le **retour du patient dans le service** : dans ce cas, les données du dossier sont conservées
- L'**admission du patient dans un nouveau service** : dans ce cas, les données des composants de type **Evolution médecin**, le score **IGSII** et les composants **AX** dont l'option **Remise à zéro** a été configurée (cases à cocher, menus déroulant, champs de saisie simple et multiligne, groupes de cases à cocher ou de boutons radio) sont réinitialisés. Ceci permet de conserver les informations comme les prescriptions, plan de soin ou les prescriptions mais remet à zéro les champs qui doivent être réévalués comme l'examen clinique d'admission dans le service.

**Avertissement**

Vous allez reprendre un dossier en transfert. Quelle action souhaitez-vous effectuer ?

Retour du patient dans le service

Admission du patient dans un nouveau service

4.9.0.22979

## 5.3 Onglet Navigation

L'onglet **Navigation** donne accès à l'ensemble des onglets de l'application. Ces onglets sont également accessibles directement en cliquant dessus.

Les boutons de l'onglet **Navigation** sont partagés en cinq grandes parties, **Dossiers Médicaux**, **Prescriptions**, **Dossier infirmier**, **Impressions** et **Administration**.

The screenshot shows the 'Navigation' tab in a medical software interface. At the top, there is a header with patient information: 'Lit 1 - ANGELIN Francis - (REPRISE REANIMATION) - Utilisateur: MEDECIN Yves - Version : 4.7.5.2'. Below this, a sub-header displays 'M. ANGELIN Francis', '56 ans', 'Lit 1', 'J 37', '170cm', '69kg', and 'Poids théorique du patient en kg 66,02kg'. A date 'ven. 07 août 2020' and a time 'J 37' are also visible. A notification bar states 'Aucun personnel responsable renseigné pour ce jour.' The main interface is divided into five colored panels: 'Dossier Médical' (pink), 'Prescriptions' (yellow), 'Dossier Infirmiers' (green), 'Impressions' (blue), and 'Administration' (purple). The 'Prescriptions' panel is active, showing 'Prescription' and 'Protocoles Médicaux' with 'BCB (WS)' selected and a green checkmark. The 'Impressions' panel shows 'Impressions centralisées' and a list of 'Lettres types' including 'Ordonnance-Réa', 'Bilan biologique', 'Scanner', 'Résumé de séjour de réanimat', 'CR macrocible de mutation', 'CR -Courrier de sortie Réa', 'Ordonnance- Réa', 'CR -Courrier de sortie Réa', and 'CRO Type'. The 'Administration' panel shows 'Correspondants' and 'Paramétrage'. At the bottom of the 'Impressions' panel, there is a 'Rapport infectieux' button.

**REMARQUE :** en fonction de la configuration de votre centre, il est fort probable que vous n'ayez pas les mêmes onglets d'affichés. Il est également possible que vous arriviez sur un autre onglet.

**REMARQUE :** l'onglet **Navigation** est le seul onglet dans lequel vous pouvez sortir le patient. Pour fermer le dossier patient, cliquez sur le bouton **Sortie du patient** (Cf. chapitre : « [La sortie du patient](#) »).

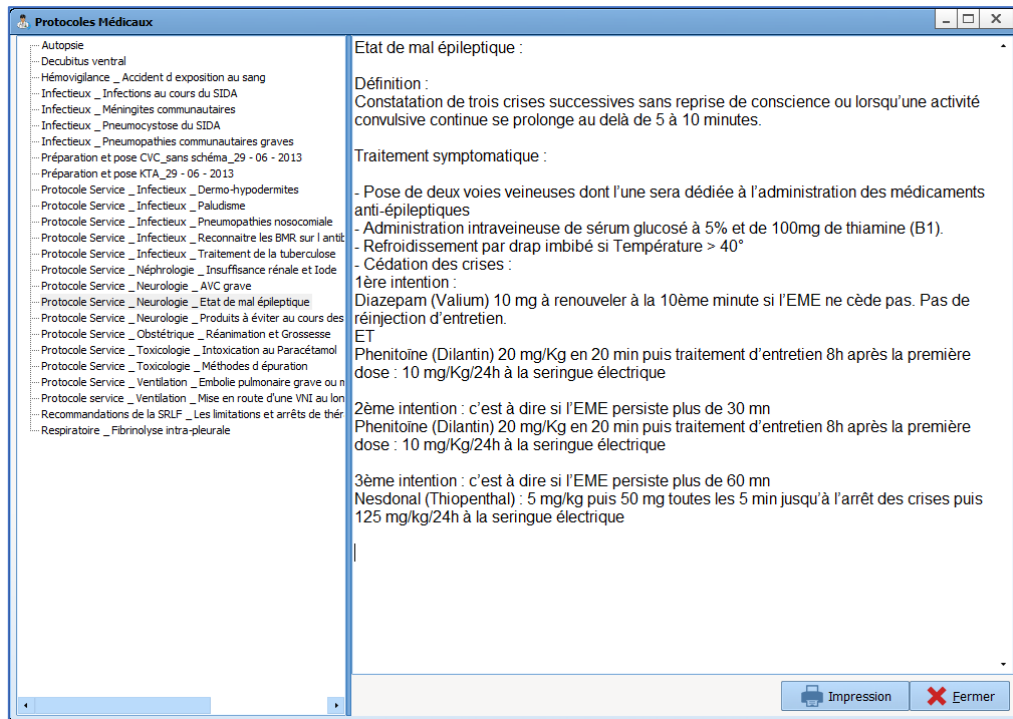
Certaines fonctionnalités ne sont accessibles que depuis l'onglet **Navigation** comme l'accès aux protocoles médicaux, à l'impression centralisée ou encore la sortie du patient.

### 5.3.1 Protocoles médicaux


Cet outil permet de centraliser les protocoles utilisés dans le service.

En cliquant sur **Protocoles médicaux**, une fenêtre s'ouvre regroupant l'ensemble des protocoles médicaux du service. On peut alors sélectionner le protocole voulu dans la colonne de gauche. Il sera alors affiché dans la colonne de droite.





### 5.3.2 Impressions

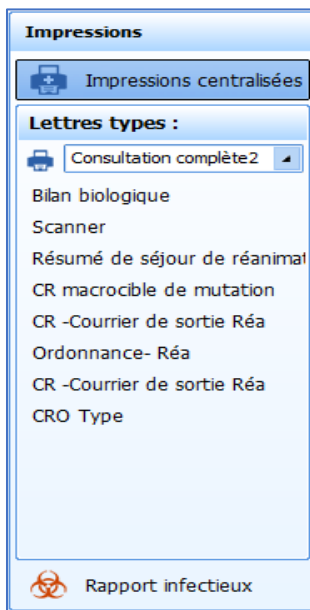

La colonne **Impressions** permet un accès à l'impression centralisée (Cf. chapitre : « *L'impression centralisée* »).

Il est également possible d'éditer et d'imprimer certains comptes-rendus ou courriers directement en cliquant dessus.

Le rapport infectieux permet d'éditer un document synthétisant l'ensemble des patients ayant présentés une infection en cours de séjour comme des pneumopathies, colonisation de cathéter ou encore bactériémie.

### 5.4 Onglet Admission

Cet onglet rassemble les aspects administratifs du dossier patient : de l'admission à la sortie.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Titre : LIT 1 - CREPIN Juliette - (REPRISE REANIMATION) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Version : 4.8.4.21830

Nom : Mme CREPIN Juliette, Âge : 48 ans, Localisation : Jour, Taille : 180cm, Poids : 80kg, Poids théorique : 70,62kg

mer. 18 août 2021, J 0, Aucun personnel responsable renseigné pour ce jour.

Navigation : Admission, Médecin, Prescription, Ordonnances, Paraméd., Plan de soins, Labo, Général, Hémod., Resol., Rénale, Infect., Evénements, Germes, Docs (0), IGSII, Bloc

Enregistrer, Annuler, Reprise, Loggrem Poids estimé

Admission | Correspondants | Sortie

Sexe :  M  F, Nom Patronimique : CREPIN, Nom Marital : LARDEUR, Prénom : Juliette, Poids (kg) : 80, Date d'admission : 18/08/2021

Date de naissance : 18/09/1972, Lieu de naissance : [vide], Situation familiale : Non renseigné, IPP : 0945467, Taille : 180, IMC : 24,69, SC : 2,01

Provenance : [vide]

Numéro de SS : [vide], Couverture Sociale :  Assuré(e) social(e),  Sans prise en charge,  Prise en charge 100%,  Patient non résident payant,  Mutuelle,  Autre

Adresse : 12 rue de la savonnerie, Code Postal : 80000, Ville : Amiens, Pays : [vide]

Téléphone 1 : 0322456987, Téléphone 2 : [vide], Email : [vide]

Protection juridique :  Tutelle,  Curatelle,  Sauvegarde de justice,  Mineur, Prévenu :  Oui  Non  Autre, Directives anticipées écrites :  Oui  Non

Le patient a exprimé son souhait de non divulgation de sa présence

Informations complémentaires : [vide]

### 5.4.1 Sous-onglet Admission

Le sous-onglet **Admission** permet de recueillir les informations administratives du patient comme l'état civil ou encore des mesures de préventions particulières (tutelle, protection juridique, autorisation d'opérer pour les mineurs ...)

Admission | Correspondants | Sortie

Sexe :  M  F, Nom Patronimique : CREPIN, Nom Marital : LARDEUR, Prénom : Juliette, Poids (kg) : 56, Date d'admission : 01/08/2018

Date de naissance : 18/09/1972, Lieu de naissance : AMIENS, Situation familiale : Concubinage, IPP : 0945467, Taille : 175, IMC : 18,286, SC : 1,638

Provenance : [vide]

Numéro de SS : 280108056104792, Couverture Sociale :  Assuré(e) social(e),  Sans prise en charge,  Prise en charge 100%,  Patient non résident payant,  Mutuelle,  Autre

Adresse : 12 rue de la savonnerie, Code Postal : 80000, Ville : Amiens, Pays : [vide]

Téléphone 1 : 0322456987, Téléphone 2 : [vide], Email : [vide]

Protection juridique :  Tutelle,  Curatelle,  Sauvegarde de justice, Prévenu :  Oui  Non  Autre, Directives anticipées écrites :  Oui  Non

Informations complémentaires : [vide]

Le plus souvent, la plupart de ces informations proviennent du dossier patient informatisé et ne sont donc pas à compléter. Dans ce cas, ces informations ne sont pas modifiables. Dans le cas où un patient serait enregistré dans **DIANE** sans que l'identité patient ait été créée dans le dossier patient informatisé, il est possible de les compléter directement depuis cet onglet. Dans ce cas, lorsque l'identité patient aura été



créé dans le DPI, le logiciel vous proposera de fusionner les dossiers.

### 5.4.2 Sous-onglet Correspondants

Cet onglet permet de documenter toutes les informations connues concernant les correspondants du patient. Ces informations pourront être utilisées dans les comptes rendus afin d'adresser les courriers et comptes rendus d'hospitalisation.

Admission **Correspondants** Sortie

**Personne à prévenir**

Nom - Prénom :  Lien :  Téléphone fixe :  Téléphone mobile :  Téléphone professionnel :

Nom - Prénom :  Lien :  Téléphone fixe :  Téléphone mobile :  Téléphone professionnel :

**Personne de confiance**

Nom-Prénom :  Lien :  Téléphone fixe :  Téléphone mobile :  Téléphone professionnel :

Nom-Prénom :  Lien :  Téléphone fixe :  Téléphone mobile :  Téléphone professionnel :

**Correspondants médicaux**

**Correspondants**

**Médecins adresseurs**

**Médecins traitants** 1   
Docteur SERPETTE Caroline (Généraliste)

### 5.4.3 Sous-onglet Sortie

Ce sous-onglet permet de renseigner les modalités de sortie du patient comme le lieu de mutation, le mode de transport, etc...

Le champ **Date de la sortie de réa** ne peut pas être renseigné manuellement. Il se renseigne automatiquement lors de la clôture (ou du transfert) du dossier.

**RAPPEL** : la sortie du dossier se fait via le bouton **Sortie du patient** dans l'onglet **Navigation**. Le sous-onglet présenté ici permet simplement de renseigner certaines données lors de la sortie du patient et pas d'effectuer la sortie en elle-même.







Ce sous-onglet permet également la saisie manuelle de l'histoire de la maladie et de l'examen clinique d'admission.

Certaines de ces données (notamment les antécédents) peuvent provenir de dossiers antérieurs si le patient a déjà été suivi dans le logiciel **DIANE**.

Le plus souvent, la saisie dans ces champs est possible via des listes d'items accessibles directement dans chaque champ. Il est préférable d'utiliser les listes plutôt que de la saisie manuelle, cela facilitera les possibilités de requêtes et d'études cliniques.

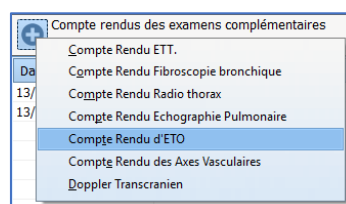
L'utilisation de ces champs est expliquée dans le chapitre « *Les différents modes de saisie dans DIANE* ».

Observation d'entrée Réa	Evolution	Synthèse Réa	Exams.Complémentaires	Engagement thérapeutique	Compte-rendu de sortie
<b>Motif d'admission</b> 1 <p>Détresse respiratoire aiguë hypoxémique</p>		<b>Histoire de la maladie</b> 3 <p>Patient pris en charge au domicile par le SAMU pour détresse respiratoire dans un contexte de pneumopathie traité par antibiothérapie depuis 72 h. A son entrée par sédaté / intubé / ventilé. Hémodynamique stable.</p>			
<b>Antécédents Médicaux</b> 2 <p>HyperTension Artérielle (HTA) essentielle 2016 Asthme dans les atcd</p>		<b>EXAMEN CLINIQUE A L'ADMISSION</b>			
<b>Antécédents Chirurgicaux</b> 1 <p>Genou Arthrolyse droite</p>		<b>Cardio-Vasculaire</b> 4 <p>Souffle carotidien droit hémodynamique instable TA= 10/5 Marbrures des genoux Auscultation Cardiaque Bruits du coeur assourdis</p>	<b>Ventilatoire</b> 3 <p>Râles bronchiques perçus à droite Râles bronchiques perçus Crépitants prédominants à droite Patient intubé FIO2 50% sat 95%</p>		
<b>Allergies médicamenteuses</b> <p>Hypersensibilité au paracétamol Eczéma </p>		<b>Neurologique</b> 1 <p>Patient sédaté</p>	<b>Digestif</b> 1 <p>Abdomen souple</p>		
<b>Habitus, Etat Général</b> 1 <p>Tabagisme Fume depuis 5 à 10 années</p>		<b>Complications antérieures</b>			
<b>Traitements habituels</b>		<b>CONCLUSION</b> <p>Epanchement pleural droit compressif : Pleurésie purulente ? Choc septique ?</p>			

## 5.5.2 Sous-onglet Examens Complémentaires

Le sous-onglet **Exams.Complémentaires** est un tableau permettant d'appeler différentes feuilles dont l'objectif est de renseigner les résultats des différents examens complémentaires effectués dans le service. Il est ainsi possible de renseigner les résultats d'une échographie trans thoracique ou encore d'une fibroscopie bronchique.

Pour appeler une feuille de saisie, cliquer sur l'icône située en haut à gauche du tableau puis sélectionner l'examen complémentaire souhaité à l'aide de la souris.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



Observation d'entrée Réa **Evolution** Synthèse Réa Exams.Complémentaires Engagement thérapeutique Compte-rendu de sortie

Evolution journalières

Historique

- 13/05/2018
  - 20:39:09 (Version courante)
  - 20:38:12
  - 14:07:50
- 12/05/2018
  - 19:12:44
  - 19:07:10

Patient normotensive.  
Hémocs et ECRU prélevés.

[Sur le plan respiratoire:](#)

Patient sédaté / ventilé. RASS-4 FIO2 50% sat 95%

[Résultats du Dernier gaz du Sang:](#)

pH	
PaO2	72.00mm de Hg
PcO2	44.00mmhg
HCO3	26.00mmol/l
excès de base	0.5mmol/l
FiO2	55%
lactates	13.10mmol/l

**Paul MEDECIN le 13/05/2018 à 14:01**

[Sur le plan infectieux:](#)

Leucocytes: 21.15 Giga/L  
Polynucléaires: 20.61 Giga/L  
Procalcitonine: 0.46 ng/mL

[Sur le plan rénal:](#)

Diurèse: 500cc /24h  
Urée: 5.5 mmol/L  
Créat: 68µmol/l

Modèles Diane

- Evol. jour.
- Admission
- Antécédents
- Balance Liqu.
- Dernier gaz du sang
- Derniers param.vitaux
- 1er gaz du sang

Ajouter des informations Avis spécialisé

\* **Éditeur de texte intégré** : pour les entrées textuelles longues et mises en forme (gras, italique, couleurs, et des modèles préconfigurés ...)

Le sous-onglet **Synthèse Réa** présente le même fonctionnement et permet d'élaborer une synthèse des évolutions journalières du patient.

Le sous-onglet **Compte rendu de sortie** présente le même fonctionnement et permet d'élaborer le compte rendu de sortie du patient. (Celui-ci pourra être imprimé depuis l'onglet **Navigation** et/ou directement exporté vers le dossier patient informatisé.

2 colonisations  
Détail au survol

\* Colonisation : BMR  
- Germe(s) : Bacilles Gram + : autres

\* Colonisation : BHR  
- Germe(s) : Candida : autres

L'entrée de patient n'est pas possible à partir de ce poste

### 5.5.4 Sous-onglet LATA / engagement thérapeutique

Ce sous-onglet comprend un/des tableau(x) permettant d'appeler des feuilles de saisie et de renseigner les informations concernant le niveau d'engagement thérapeutique par les équipes médicales.

Les données saisies seront visibles dans le tableau de synthèse afin de faciliter la visibilité des informations.



**Saisie avancée**

**RGDS LATA**

Saisi par : Diane SYSTEM Date d'occurrence : 16/07/2020 18:15:57

**Liste des enregistrements**

Nouveau  
16/07/2020 18:15:57

**ENGAGEMENT THERAPEUTIQUE**

Décision collégiale du : 16/07/2020

Niveau d'engagement  
Engagement maximal raisonné

Directives anticipées écrites

Intervenant extérieur consulté

Nom et fonction du/ des consultant(s):

**Médecins présents** 1

Réanimateurs  
MEDECIN Yves

**LE MEDECIN RESPONSABLE ASSURE:**

Avoir consulté l'équipe de soins concernant la décision et ses modalités

Avoir consulté le patient conscient et apte à consentir concernant la décision et ses modalités

Ne pas avoir consulté le patient car celui-ci était inconscient ou inapte à consentir

S'être assuré de l'existence potentielle de directives anticipées ou de souhait antérieurement exprimés par le patient

Avoir consulté la personne de confiance (si désignée) concernat la décision et ses modalités

Avoir consulté la personne référente et les proches concernant la décision et ses modalités

Assure avoir consigné les motifs de l'identité des intervenants

**TRAITEMENTS LIMITES OU ARRETES**

Message cardiaque externe en cas d'ACR  Oui  Non

Intubation quelque soit la situation  Oui  Non

Extubation  Oui  Non

Abstention ou ablation de la canule de trachéotomie quelle que soit la situation  Oui  Non

Limitation de la ventilation mécanique par limitation de la FiO2  Oui  Non

Limitation de la ventilation mécanique par limitation du mode ventilatoire  Oui  Non



## 5.6 MD Onglet Prescription

L'onglet **Prescription** permet à l'utilisateur ayant les droits applicatifs, de prescrire tout acte ou thérapeutique nécessaires au patient. La signature des prescriptions permet la génération du plan de soins.





L'onglet de prescription est composé de différentes zones appelées **Champs de prescriptions** (exemple : IV, per-os ...) permettant une meilleure lecture des prescriptions en cours.

**1 : Signature de prescription** : cette zone permet la validation de la prescription

**2 : Analyse de la prescription** : cette zone permet de signaler des alertes automatiques quant aux potentielles incompatibilités médicamenteuses, surdosages ou encore allergies.


**3 : Informations patient** : cette zone permet un retour de certaines informations sur le patient comme les antécédents ou les allergies.

**4 : Calculs du volume, des calories et de l'azote** : cette zone permet de visualiser le volume, le nombre de calories ainsi que la quantité d'azote estimées sur 24h, au sein de la prescription en cours.

**5 :**   cette zone située à gauche de chaque champ de prescription permet de prescrire les médicaments, soins ou surveillances souhaités. Le bouton  permet d'ouvrir la fenêtre de prescription et le bouton  donne un accès direct aux favoris de prescription.

**6 : Champ de prescription** : un champ de prescription est une zone qui regroupe plusieurs prescriptions du même type. Par exemple, le champ de prescription **Antibiotiques** servira à la prescription de tous les antibiotiques.

**7 : Etat de la prescription** : cette zone située à droite de chaque champ de prescription permet de renseigner son état par un système d'icônes.

**8 :**  L'œil est un indicateur d'information contextuelle. Cette zone permet d'obtenir des informations sur le patient au survol de la souris. Il est par exemple possible de voir directement les constantes ou encore les derniers résultats biologiques afin de faciliter la prescription.

**9 : Champ de recherche des favoris de prescription** : Cette zone permet de retrouver un favori de prescription pour le prescrire automatiquement dans le champ de prescription qui lui est associé. La recherche peut se faire à partir du libellé ou du nom commercial d'un des produits (produit principal ou diluant).



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Page : 209 / 386

## 5.6.1 La fenêtre de prescription

Un clic sur le signe « + » situé à droite d'un champ de prescription médicamenteuse permet l'ouverture de la fenêtre de prescription.

The screenshot shows a prescription window for 'Nicardipine chlorhydrate : 10 mg + Sodium chlorure 0,9 %: 40 ml en continu'. The interface includes the following elements:

- 1**: Molecule selection field containing 'NICARDIPINE \* SODIUM + +'
- 2**: 'Posologie par administration' section with a dosage of '10 mg /kg /m2' and a unit dropdown menu.
- 3**: 'Débit' section with a value of '0,42 mg /kg /m2 /h /min'.
- 4**: 'Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 10 mg'
- 5**: 'Planification' section with 'En continu' selected.
- 6**: 'Administration urgente' checkbox.
- 7**: 'Date/Heure de début' field set to '16:41 03/01/2023'.
- 8**: 'Date/Heure de début' field.
- 9**: 'Préciser une durée' section with 'Pendant 1 jour(s)' selected.
- 10**: Graphical timeline showing the administration period from 16:00 on 03-01-2023 to 16:00 on 04-01-2023.
- 11**: 'Remarques du pharmacien' field.
- 12**: 'Remarques du pharmacien' field.
- 13**: 'Commentaire' field.
- 14**: 'Condition' dropdown menu set to 'Rechercher...'
- 15**: 'Détails' section showing 'Produit principal: 10 MG (LABO AGUETTANT), SOL INJ' and 'Conc. 0,2 mg / ml'.
- 16**: 'Contenant et dilution' section with a volume of '50 ml'.
- 17**: 'Débit de la perfusion' field set to '2,08 ml/h'.
- 18**: 'Contenant volumique' dropdown menu set to 'Seringue 50 (50ml)'.
- 19**: 'Remplissage vasculaire' section.
- 20**: 'Posologie par administration' field.
- 21**: 'Posologie par jour' field.
- 22**: 'NICARDIPINE \* SODIUM + +' header.
- 23**: 'Lier à un événement' checkbox.

**1 Sélection de la molécule** : cette zone permet de sélectionner la molécule ainsi que sa forme galénique. (Ex : Nicardipine : ampoule de 10mg dans 10mL). Lors de l'écriture des premières lettres dans le champ de saisie, la liste des médicaments correspondants (provenant du livret thérapeutique de l'établissement et/ou de la banque de médicaments apparaît. Il suffit de choisir la molécule et la forme galénique souhaitée). Il est également possible de saisir un produit via l'un de ses codes UCD 7, UCD 13 ou CIP 13.

**2 Posologie par administration** : cette zone permet de choisir la quantité de médicament par administration. Il est possible de modifier l'unité (mg, gouttes, etc...) via le menu déroulant. L'adaptation de la posologie selon le poids, la surface corporelle ou la durée se fait en cliquant sur **kg**, **m<sup>2</sup>**, **h** ou **min**, à droite des champs de saisie.

**REMARQUE** : la modification de cette zone modifie automatiquement les zones de débit et de posologie par jour



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**3 Débit** : cette zone permet de modifier le débit renseigné en unité de la molécule (mg, g, gouttes ...). Dans le cas d'une perfusion à la seringue auto-pousseuse, le débit en ml/H (par exemple) se renseigne dans la zone **Débit de la perfusion (17)**.

**4 Durée d'administration** : cette zone permet de renseigner la durée sur laquelle le traitement doit être poursuivi. En choisissant « débit continu », cela signifie qu'il n'y a pas de coupures entre les différentes administrations.

**5 Planification** : cette zone permet de renseigner la fréquence d'administration d'un traitement (Ex : toutes les 8 heures, injection unique, ...).

**REMARQUE** : afin d'éviter des incohérences de prescription, lorsque « débit continu » est choisi dans la zone de durée d'administration, la zone de planification sera « en continu » par défaut.

**6 Administration urgente** : cette case à cocher permet de signifier dans le plan de soins, grâce à l'icône  que l'administration du traitement est urgente. La police du résumé de cette prescription sera en rouge.

**7 Heure non définie** : cette case à cocher permet de ne pas programmer d'heure de départ de l'administration du traitement. Dans le plan de soins, l'infirmier(e) pourra planifier lui-même l'heure de la première administration du traitement, ce qui déplacera automatiquement les prochaines administrations tout en conservant l'intervalle entre chaque. (Exemple : si une prescription de Lovenox 4000UI /24H est faite dans l'après-midi mais que l'habitude de service est que les injections soient faites à 19H, l'infirmier pourra modifier l'heure d'injection et les injections se caleront toutes le soir à 19H chaque jour). Cela permettra également de programmer des injections à H+6 après retour de bloc par exemple.

**8 Date/heure de début** : cette zone permet de programmer la date et l'heure du début de traitement

**9 Précisez une durée** : cette zone permet de préciser la durée du traitement (exemple : Clamoxyl 3g / jour **pendant 5 jours**). Il est également possible de programmer le jour auquel la prescription devra s'arrêter.

**10 Représentation graphique** : cette zone permet d'avoir un aperçu graphique de la fréquence d'administration du traitement prescrit. Une barre bleue continue représente une administration continue (comme une perfusion par exemple) et un traitement administré 3 fois par jour apparaîtra sous la forme de 3 traits bleus répartis toutes les 8 heures.

**11 Zone suppression et favoris** : l'icône « poubelle » permet de supprimer la prescription en cours de rédaction et ainsi de pouvoir recommencer à zéro.

L'icône étoile permet de créer un favori. Pour qu'une prescription devienne un favori privé (c'est-à-dire, uniquement visible pour l'utilisateur qui l'a créé), il suffit de cliquer sur cette icône puis de cliquer sur **Favoris privés**). Lorsque l'utilisateur a les droits, celui-ci peut créer un « favori public » qui sera disponible pour l'ensemble des prescripteurs.

**12 Remarques du pharmacien** : les prescriptions éditées dans **DIANE** sont contrôlées par le pharmacien. Celui-ci peut émettre des remarques qui sont visibles dans cette section. Leur attribuer un critère de gravité plus ou moins important par la présence d'une bille de couleur. Le commentaire sera visible dans la zone de résumé de prescription.

**13 Commentaire** : permet d'associer un commentaire à la prescription. Celui-ci sera visible dans le plan de soins.

**14 Condition** : permet d'associer une condition à une prescription. (Ex : si tension artérielle systolique > 16 mmHg)



**15 Détail** : cette zone permet de visualiser certains détails concernant le contenu d'une seringue ou d'une poche de perfusion (concentration de la molécule après dilution, volume perfusé ...)

**16 Représentation graphique d'une dilution** : cette zone offre une représentation graphique indiquant le volume de chacun des composants qui constituent la seringue.

**17 Débit de la perfusion** : cette zone permet de renseigner le débit en ml/h d'une dilution. La modification de ce champ modifie les champs de posologie par jour (21), posologie par administration (2) et de débit en mg/h (3).

**18 Contenant volumique** : cette zone permet de choisir le type de contenant pour une administration IV (seringue ou poche de perfusion) et son volume

**19 Onglet Diluant** : cet onglet permet d'associer plusieurs molécules à l'intérieur d'une même perfusion. Un onglet par molécule doit être ouvert. Ceci permet par exemple d'associer des ions dans une base.

**20 MAX** : ce champ permet de limiter la prescription à une dose maximale.

**21 Posologie par jour** : ce champ permet de renseigner la posologie par jour. Ce calcul se fait automatiquement en indiquant la posologie et la fréquence d'administration d'un traitement ou encore en renseignant la dose et le débit d'une perfusion.

**22 Informations d'historique du dossier (œil)** : Ce bouton permet d'afficher une zone qui affiche des informations sur le patient. Il est par exemple possible de voir directement les constantes ou encore les derniers résultats biologiques afin de faciliter la prescription.

**23 Lier à un événement** : ce champ permet de lier la prescription à un événement (entrée ou sortie de bloc, réveil ou réanimation).

## 5.6.2 Zone de prescription simplifiée

Pour les prescriptions de traitement per-os il est possible d'utiliser une fenêtre de prescription simplifiée. Son fonctionnement est décrit dans le chapitre *la prescription de traitement per-os* la prescription de traitement per-os

1 Sélection de la molécule

2 Planification



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



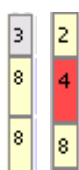
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Page : 212 / 386



- 3 Zone favoris
- 4 Icône poubelle
- 5 Icône crayon
- 6 Icône caducée
- 7 Zone validation / annulation de la prescription.
- 8 Durée du traitement
- 9 Posologie

### 5.6.3 Iconographie des champs de prescription



Cette case qui précède le texte de la ligne de prescription indique depuis combien de jours cette ligne de prescription est active.


Elle prend également une couleur orangée pour indiquer une interaction sur cette ligne de prescription (en posant le curseur de la souris dessus, les détails de l'interaction apparaissent).

Elle prend une couleur bleu-gris pour indiquer que cette saisie contient des unités non sécurisables car le dosage d'au moins un produit a été modifié ou n'a pas pu être récupéré depuis la base de médicament du fait de posologies incompatibles.

#### 5.6.3.1 Code visuel des prescriptions :

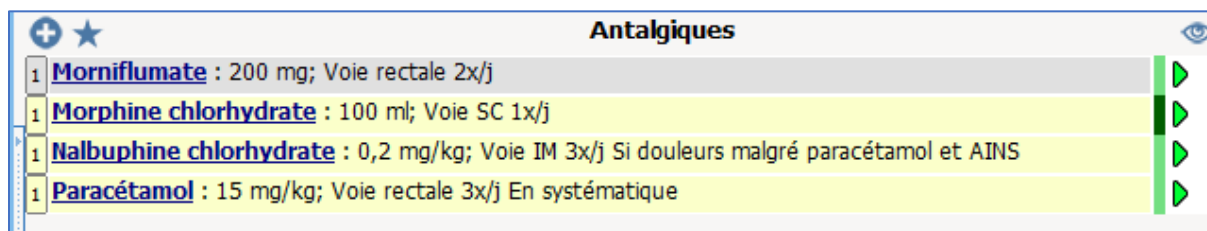
La couleur normale d'une prescription est **Bleu foncé** pour le produit principal, et noir pour les informations complémentaires. Le clic sur la ligne de résumé permet d'ouvrir la fenêtre d'édition de la prescription afin de la consulter ou de la modifier.

Lorsque la prescription est signée la barre rouge passe au vert



La barre vert foncé signale une prescription qui vient d'être modifiée.

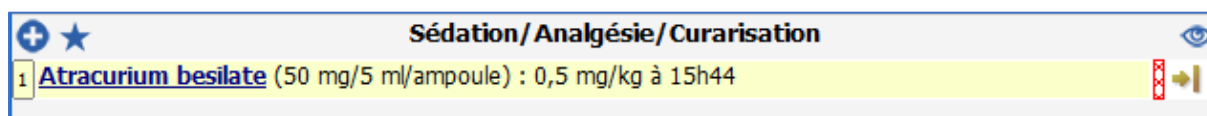La barre vert clair signale une prescription en cours.



Si la barre est rouge hachurée, cela indique que la prescription est impactée par un changement de poids et/ou de taille du patient réalisé depuis la dernière signature. Ce cas concerne uniquement les prescriptions avec une posologie exprimée en fonction du poids ou de la surface corporelle du patient. Par exemple, sur une prescription « en continue » cela modifie la quantité par jour à administrer.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Antalgiques**

- 1 **Morniflumate** : 200 mg; Voie rectale 2x/j
- 1 **Morphine chlorhydrate** : 100 ml; Voie SC 1x/j
- 1 **Nalbuphine chlorhydrate** : 0,2 mg/kg; Voie IM 3x/j Si douleurs malgré paracétamol et AINS
- 1 **Paracétamol** : 15 mg/kg; Voie rectale 3x/j En systématique
- 1 **Tramadol chlorhydrate** : 100 mg + **Diluant non précisé**: 50 ml; D=15min; Voie IV 1x/j

La ligne rose indique que cette ligne est une prescription demandée par le médecin et administrée par l'infirmier. Elle doit être validée par le médecin La posologie, dans ce cas, est en rouge.

**Amines**

- 1 **Noradrenaline bitartrate** : 8 mg (0,16 mg/ml) 1x/j en urgence

La ligne orange indique qu'il s'agit d'une prescription urgente.

**Antibiotiques**

- 1 **Amoxicilline** : 1 g + **Sodium chlorure 0,9 %** : 30 ml; D=30min 3x/j

La ligne indique qu'il s'agit d'une prescription d'antibiotique à compléter. Une fois complétée, la ligne apparaît en bleu.

**Antibiotiques**

- 1 **Amoxicilline** : 1 g + **Sodium chlorure 0,9 %**: 50 ml; D=30min 3x/j

### 5.6.3.2 Signification des icônes à droite des lignes de prescription :

- ▶ : Prescription en cours.
- ▶▶ : Prescription en cours sans date de fin programmée.
- ▶| : Fin programmée (bientôt à terme) – Fin programmée dans la journée. La prescription sera considérée comme terminée une fois la date et heure passée et ne sera pas conservée le jour suivant
- ▶|| : Pause programmée (bientôt en pause) – Pause programmée dans la journée. La prescription sera considérée en pause une fois la date et heure de fin passée et sera conservée les jours suivants tant qu'elle reste dans cet état.
- : Prescription terminée
- || : Prescription en pause
- ! : Arrêt urgent – A la différence d'un arrêt classique, un arrêt urgent signifie que lors de la signature du médecin, toutes les occurrences en état **A faire** seront retirées du plan de soins (y compris les occurrences antérieures à l'heure actuelle)
- !!! : Pause urgente – à la différence d'une pause classique, une pause urgente signifie que lors de la signature du médecin toutes les occurrences en état **A faire** seront retirées du plan de soins (y compris les occurrences antérieures à l'heure actuelle)
- ▶▶? : Prescription à valider. La prescription a une date antérieure à la date du jour et n'a pas encore été



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

validée ce jour par le médecin. Le clic sur le point d'interrogation permet de valider la ligne de prescription.

#### 5.6.4 Mise en pause et arrêt des prescriptions

En cliquant sur les icônes à droite des lignes de prescriptions ( ► ►► ), il est possible d'arrêter, de mettre en pause ou de relancer la ligne de prescription.

Arrêt urgent	Pause urgente			
Fin programmée	Pause programmée			
	11:28	26/08/2022		
<input checked="" type="checkbox"/> Ne pas tenir compte du "délai" du plan de soins				

La case à cocher **Ne pas tenir compte du « délai » du plan de soins** permet au médecin d'ignorer l'état du plan de soin. Si la case est cochée, le changement est appliqué à la date/heure indiquée par le médecin. Sinon, le changement est appliqué en tenant compte du retard ou de l'avance du plan de soin.

## 5.7 MD Exemples de prescriptions

### 5.7.1 Prescription de la surveillance clinique

Prescription de paramètres physiologiques à surveiller

Paramètre	Fréquence cardiaque à partir de l'ECG - Fc(ecg)	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Paramètre	PNI (Groupe) - PNI	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Paramètre	Fréquence respiratoire - Fr	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Paramètre	Saturation en oxygène du sang artériel - SpO2	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Paramètre	Glycémie capillaire - Glu(cap)	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Paramètre	Poids du patient - Poids	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Paramètre	T° Tympanique - T-Tymp	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		
Médicament	Diurèse	1 fois	-----	+
A partir du	25/10/2019 à 15h	Commentaire		

+ Surveiller un autre paramètre

✓ Valider ✗ Annuler

Pour la prescription de la surveillance des paramètres physiologiques, vous pouvez ajouter autant de données physiologiques que vous le souhaitez et en définir la fréquence de surveillance parmi les choix présents dans le menu déroulant.

**REMARQUE :** une fois prescrit, on ne peut pas (pour le moment) retirer un paramètre de la liste pour alléger la fenêtre. Choisissez la fréquence « nulle » pour ne pas afficher le paramètre en prescription.

### 5.7.2 La prescription médicamenteuse

#### 5.7.2.1 La prescription de traitements per os

Exemple : Prescription de Paracétamol 1g X 3 /jour pendant 3 jours.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

L'application permet l'utilisation d'une fenêtre de prescription simplifiée afin de faire une saisie rapide d'une prescription simple.

The screenshot shows a software window titled "Prescription de produit simplifiée". It features a search bar (1) containing "DAFALGAN CP EFF 500 MG (\*16)\*HOP PARACETAMOL 3400936256576". To the right is a dosage field (2) with "1000 mg". Below is a planning section (3, 4) with a checked "Planification" box, "1 fois par jour ou", "Pendant 5 jour(s)", and a comment field (5) labeled "Condition ou commentaire". At the bottom are icons for favorite (6), delete (8), edit (9), and medical symbol (10), and buttons for "OK" (11) and "Annuler".

(1) Recherche de médicaments : entrez les premières lettres du produit souhaité. Sélectionnez celui-ci parmi la liste proposée.

(2) Posologie : Indiquez la posologie retenue.

(3) et (4) Planification : Permet d'indiquer la fréquence d'administration ainsi que la durée du traitement. Ici 1 fois par jour pendant 5 jours.

(5) Condition ou commentaire : Permet la saisie d'un commentaire.

(6) Le clic sur cette étoile permet d'enregistrer la prescription comme étant un favori. Ce favori vous sera proposé dans le champ dans lequel il a été créé. Ici le champ **Per-Os**

(8) L'icône Poubelle : permet de supprimer la prescription en cours.

(9) L'icône Crayon : permet d'ouvrir la fenêtre de prescription habituelle, non simplifiée.

Les informations saisies depuis la fenêtre simplifiée sont ici représentées dans les encadrés rouges.

(10) Icône caducée : permet d'afficher la monographie du produit.

(11) Le bouton **OK** ou **Annuler** : permet de valider ou d'annuler la prescription en cours.

**REMARQUE** : la forme galénique est proposée automatiquement en fonction du médicament choisi dans la zone de choix de la molécule. Ainsi, si on choisit du paracétamol en comprimé, c'est forcément la forme galénique « comprimé » qui sera proposée dans cette zone.

Un clic sur le bouton **Crayon (9)** ouvre la fenêtre de prescription détaillée ci-dessous.

Paracetamol : 1000 mg 3x/j

Per-OS

**DAFALGAN \*** +

DAFALGAN CP EFF 500 MG (\*16)\*HOP PARACETAMOL  
3400936256576  
500 mg/comprimé

Ce produit n'est pas diluable

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Posologie par administration : 1000 mg /kg /m2 Max. [ ]

Posologie par jour : 3000 mg

Débit ▼

Ne pas remplacer/substituer

Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 3000 mg

Durée d'administration ▼

Voie orale  A la demande  Apporté par le patient

Planification ▲

3 fois par jour(s) Jours... Condition J1

Administration urgente Date/Heure de début 14:13 04/02/2022 Demain

Préciser une durée

Pendant 5 jour(s)  Jusque 14:13 09/02/2022

04-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 06-02-2022 06-02-2022 06-02-2022 06-02-2022 06-02-2022 07-02-2022 07-02-2022

18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00

Remarques du pharmacien [ ]

✓ Valider ✗ Annuler

### 5.7.2.2 La prescription d'une perfusion

Exemple : Prescription d'une perfusion de 1000 ml Glucosé à 5% en continu sans date de fin prévue.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Glucose 5 % : 1000 ml en continu

Perfusions

GLUCOSE \* +

GLUCOSE 5 % ECOFLAC INJ 500 ML (1)

25000 mg/500 ml/poche  
 base

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Posologie par administration: 1000 ml /kg /m2 Max. (2)

Posologie par jour: 1000 ml (6)

Débit: 13,89 goutte /m2 /h

Ne pas remplacer/substituer

Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 1000 ml

Durée d'administration: 24h (3)

Voie: intraveineuse (en perfusion) (4)

Planification: En continu (5)

Condition: J1

Commentaire:

10:29 04/02/2022

04-02-2022 05-02-2022 06-02-2022 07-02-2022

12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00

Remarques du pharmacien

✓ Valider ✗ Annuler

Tapez le nom du produit dans la zone de sélection du produit. Une liste de proposition s'ouvre. (1)

- Sélectionnez le produit correspondant à votre choix. Le dosage, l'unité et la voie d'administration se complètent automatiquement.
- Adaptez le dosage à votre convenance (2). Dans mon exemple, je choisis volontairement le *Glucosé 5% en 500 ml* afin de modifier le dosage.
- Renseignez la durée d'administration (3).
- Décocher la planification à 1 jour par défaut (5).
- Sélectionner le contenant volumique (6), un message vous indique alors que le produit va être automatiquement considéré comme une base.
- Cliquez sur valider (7). Votre prescription est alors en attente de signature.

Exemple 2 : *Perfusion Glucose 5% 1000ml /24h, à laquelle nous allons ajouter des ions et des vitamines, avec une durée d'administration de 2 jours.*



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Glucose 5 % : 1000 ml + Potassium chlorure 10 % : 1000 mg + Nicotinamide : 500 mg; D=24h 1x/j**

Perfusions

GLUCOSE\* POTASSIUM VIT +

1

GLUCOSE 5 % ECOFLAC INJ 500 ML  
25000 mg/500 ml/poche

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution 3  
49,26 mg/ml

Posologie par administration : 1000 ml /kg /m2 Max. Posologie par jour : 1000 ml

Débit : 41,67 ml /kg /m2 /h /min

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 1000 ml**

Durée d'administration : 24h (selected) 12h 8h 6h 4h 3h 2h 1h 30min Autre

Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie : intraveineuse (en perfusion)  A la demande  Apporté par le patient

Planification : 1 fois par jour(s) Jours... Condition J1

Administration urgente Date/Heure de début 10:29 04/02/2022 Demain

Préciser une durée  Pendant 2 jour(s)  Jusque 10:29 06/02/2022

04-02-2022 04-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 06-02-2022 06-02-2022

12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00

2

Remarques du pharmacien

Validé Annuler

- Cliquez sur le plus (1) situé juste à côté de **Glucose\***, cela vous ouvre une nouvelle fenêtre de sélection de produit, ajouter le produit recherché ici **Potassium** en indiquant le dosage souhaité.
- Répétez l'opération autant que nécessaire.

**REMARQUE :** le résumé dans le bandeau bleu en haut de la prescription vous permet de vérifier si la prescription correspond à vos attentes.

### 5.7.2.3 La prescription en seringue auto-pulsée

Exemple : *Prescription d'une seringue électrique de Noradrénaline concentration 1mg/ml en débit non précisé avec Objectif de Pam > à 65mmHg en Administration urgente.*



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



- Sélectionner le produit désiré en tapant son nom dans la zone de recherche de produit.
- Sélectionner le **Contenant volumique** (2). Ici, seringue de 50 ml. Le survol à la souris affiche le détail du contenu de la seringue.
- Lors de la sélection du contenant volumique :
  - Cocher la case **Débit non précisé** permettra à l’infirmier(e) de débiter l’administration à une dose qu’il (elle) jugera correspondre au besoin du patient.
  - Renseigner la **Concentration** désirée dans la (3) : le calcul de la quantité de produit principal, ainsi que la quantité de solvant se fera automatiquement. (Visibilité de la répartition dans la représentation du contenant volumique).
- Renseigner la fréquence ainsi que la durée d’administration désirée. (ici dans le cadre **Planification** : « en continu »).
- Le diluant
- Cocher la case **Administration urgente** (5), ainsi un pictogramme sera visible sur le plan de soins, marquant l’importance de l’administration.
- Remplir la zone **Condition** en y indiquant l’objectif recherché. L’utilisation d’une condition permet un affichage spécifique sur le plan de soins les occurrences seront hachurées, afin de bien indiquer que les administrations sont dépendantes d’un objectif ou d’une évaluation comme l’EVA.
- Cliquer sur **Valider**.

**REMARQUE** : ici dans la capture, le sodium de chlorure a été automatiquement noté comme « diluant ».

Exemple : Prescription d’Héparine en débit continu 500UI/kg/24h avec une heure de début d’administration non définie.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d’Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Heparine sodique : 500 UI/kg + Sodium chlorure 0,9 %: 41,5 ml; V=2 ml/h 1x/j**

Anticoagulants

HEPARINE \* SODIUM + +

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution

HEPARINE SODIQUE 25000 UI/5 ML

25000 UI/5 ml/flacon

Posologie par administration

500 UI /kg /m2

Posologie par jour

40800 UI

Soit 42,5 kUI

Débit

1700 UI

= 28,33 UI /min  
= 0,34 ml /h  
= 0,07 flacon /h  
= 0,33 UI /kg /min

Attention la durée est inférieure à la durée d'administration.  
La posologie ad est égale à "40800 UI".

Ne pas remplacer/substituer

Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 40800 UI

Durée d'administration

24h  12h  8h  6h  4h  3h  2h  1h  30min  Autre: 25:00

Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie intraveineuse

A la demande  Apporté par le patient

Contenant volumique

Seringue 50 (50ml)

Débit de la perfusion

2 ml/h

Débit non précisé

Détails

Produit principal  
HEPARINE SODIQUE 25000 UI/5 ML

Conc. 850 UI / ml

Dilution : 83 %

Volume total : 50 ml

Par jour  
1 Seringue 50 (50ml)  
Volume total : 48 ml

Planification

1 fois par jour(s)

Heure non définie (réinitialise le plan de soins)

Préciser une durée

Pendant 1 jour(s)  Jusque 14:31 05/02/2022

04-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022

14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00

Remarques du pharmacien

Validé Annuler

- Entrez les premières lettres du produit
- Sélectionnez le produit recherché. (Héparine) dans la liste des propositions.
- Dans la zone **Posologie par administration** saisissez le dosage voulu (1) ici 500 UI
- Modifiez l'unité à l'aide du menu déroulant, si l'unité par défaut ne correspond pas à vos attentes.
- Cliquez sur **/kg** (2). La quantité par jour se calcule alors automatiquement, elle est reprise sous la zone **Posologie par administration** (Zone encadrée en rouge)
- Cochez **Heure non définie** (4), le fait de cocher cette case va permettre à l'infirmier(e) de planifier l'heure de début d'administration exemple : H+6 après retour de bloc.

**REMARQUE :** le survol de la calculatrice (3) permet de voir nombre de calculs réalisés en fonction du dosage renseigné. Le double-clic sur l'une des valeurs affichées vous permet d'utiliser automatiquement cette valeur pour la prescription.

#### 5.7.2.4 La prescription de PSL

Exemple : Prescription de 3 culots globulaires



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Concentré érythrocytaire (cgr) : 1 culot(s); D=1h ttes les 2h

PSL

Concentré \* +

Concentré érythrocytaire (CGR)

Pas de dosage

Ce produit n'est pas diluable

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution ▼

Posologie par administration

1 culot(s) /kg /m2 Max.

Posologie par jour

3 culot(s)

Débit ▲

1 culot(s) /kg /h /min

La durée de planification est inférieure à une journée.  
La posologie par jour affichée est donc inférieure à celle d'une journée complète.

Prescription non sécurisable par la banque de médicaments

Durée d'administration ▲

○ 24h ○ 12h ○ 8h ○ 6h ○ 4h ○ 3h ○ 2h ○ 1h ○ 30min ○ Autre:

○ Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie IVL

A la demande  
 Apporté par le patient

Planification ▲

1 fois tous(tes) les 2 heure(s)

Condition J1

Commentaire

Administration urgente

Date/Heure de début 14:59 04/02/2022 Demain

Préciser une durée

Pendant 6 heures

Jusque 20:59 04/02/2022

04-02-2022 04-02-2022 04-02-2022 04-02-2022 04-02-2022 04-02-2022 04-02-2022

14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

Remarques du pharmacien

★

✓ Valider ✗ Annuler

Pour cette prescription, il est nécessaire de porter une attention toute particulière à la planification, afin que le plan de soins soit bien constitué de 3 occurrences distinctes.

- Entrer les premières lettres du produit.
- Sélectionner le produit sanguin à prescrire
- Renseigner 1 culot dans la zone **Posologie par administration (1)**, et indiquer l'unité **Culot**
- Sélectionner la **Durée d'administration (2)** celle-ci correspond à la durée sur laquelle on souhaite que le culot soit administré.
- Indiquer la **Voie** d'administration (dans le cas des produits sanguins labiles, la voie d'administration ne se renseigne pas automatiquement, il faut donc la saisir manuellement).
- Renseigner la planification (4). Ici, il est important d'indiquer une fréquence « Toutes les X heures » afin que soit pris en compte le délai souhaité entre chaque culot.
- Enfin, préciser une durée (5). Ici, 6 heures. Ainsi, en regardant la représentation graphique des administrations (aperçu du plan de soins), on constate bien que l'administration de chaque culot se fait bien sur 1 heure avec une latence d'une heure, et que seul 3 culots (occurrences) seront disponibles sur le plan de soins. De plus, si l'on regarde la zone **Posologie par jour**, il y a bien 3 culots



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

d'indiqués.

### 5.7.2.5 Isolement / précautions

Exemple : Mise ne place de précautions type « Gouttelettes ».

Afin de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités liés à ce type de prescription il faut impérativement utiliser le champ prévu à cet effet. A ce champ est rattaché une liste ainsi que les icônes d'informations qui s'affichent dans le bandeau supérieur de l'application, ainsi que sur la liste des patients présents de **DIANE**.

The screenshot shows a software interface for 'Isolement / Précautions'. At the top, there is a header bar with a plus sign and a star icon. Below this, the title 'Isolement / Précautions' is centered. The main content area has a blue header 'Goutelettes : en continu'. Underneath, there is a search field containing the text 'Goutelettes'. To the right of the search field, patient details are shown: 'Poids : 85 Kgs Taille : 180 cms'. Below the search field, there is a 'Planification' dropdown menu with a downward arrow, currently showing 'en continu à partir du 04/02 à 15h17'. At the bottom left of the main area, there are three icons: a star, a trash bin, and a pencil. At the bottom right, there are two buttons: 'Valider' with a green checkmark and 'Annuler' with a red X.

- Dans la zone de recherche (1), tapez les premières lettres afin de lancer la recherche.
- Sélectionnez l'élément correspondant dans la liste pré paramétrée. Seuls les éléments issus de cette liste permettent le déclenchement de l'alerte.
- Par défaut, la planification est « en continu » sans durée de fin. Vous pouvez toutefois la modifier en cliquant sur le ▼ afin d'accéder au menu déroulant.

### 5.7.2.6 Dilution obligatoire

Si la case **Dilution obligatoire** a été cochée en configuration, le libellé **Dilution obligatoire** est affiché en rouge dans la fenêtre de prescription.



**Acide zoledronique : 4 mg 1x/j**

Sédation/Analgésie/Curarisation

**ACIDE \*** +

ACIDE ZOLEDRONIQUE 4mg-5ml FL PERF-IV  
4 mg/5 ml/flacon Dilution obligatoire

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution 0,8 mg/ml

Posologie par administration 4 mg /kg /m2 Max. Posologie par jour 4 mg

Débit 0 microg /kg /h /m2 /min

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 4 mg**

Durée d'administration 24h 12h 8h 6h 4h 3h 2h 1h 30min Autre: :\_

Voie intraveineuse (en perfusion)  A la demande  Apporté par le patient

Planification 1 fois par jour(s)

Condition J1

Administration urgente Date/Heure de début 15:20 04/02/2022 Demain

Préciser une durée  Pendant 1 jour(s)  Jusque 15:20 05/02/2022

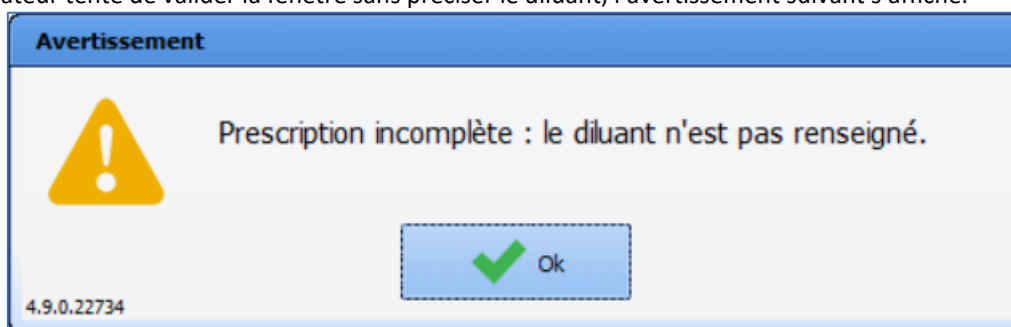
04-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022

16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00

Remarques du pharmacien

Validé Annuler

Si l'utilisateur tente de valider la fenêtre sans préciser le diluant, l'avertissement suivant s'affiche.



Lors du choix du contenant volumique, l'onglet **Produit +** est automatiquement généré.



**Acide zoledronique : 4 mg + : 500 ml 1x/j**

Sédation/Analgésie/Curarisation

**ACIDE \*** **Produit +** +

Aucun produit sélectionné

base

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution **7,92 µg/ml**

Contenant volumique

Poche à perfuser 500 (5)

Débit de la perfusion

goutte/min

Débit non précisé

Détails ▼

Durée d'administration ▲

24h  12h  8h  6h  4h  3h  2h  1h  30min  Autre:

Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie intraveineuse (en perfusion)  A la demande  Apporté par le patient

Planification ▲

1 fois par jour(s)

Administration urgente

Heure non définie (réinitialise le plan de soins)

Date/Heure de début 15:26 04/02/2022 Demain

Préciser une durée

Pendant 1 jour(s)  Jusque 15:26 05/02/2022

04-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022

16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00

Remarques du pharmacien

Condition J1

Commentaire

★ 🗑️ ✎

✓ Valider ✗ Annuler

Il faut ensuite saisir le diluant : il est uniquement possible de saisir un diluant parmi ceux qui ont été configurés. Le double-clic dans la zone de saisie affiche la liste des diluants configurés.

sd


NACL 0.9 % FLAC 500 ML ECOFLAC = CHLORURE DE SODIUM

GLUCOSE 5% PC 500 ml PERF ISOTONIQUE


Si un seul diluant a été configuré, il est automatiquement choisi quand l'onglet « diluant » est généré et cet onglet porte le nom du diluant.

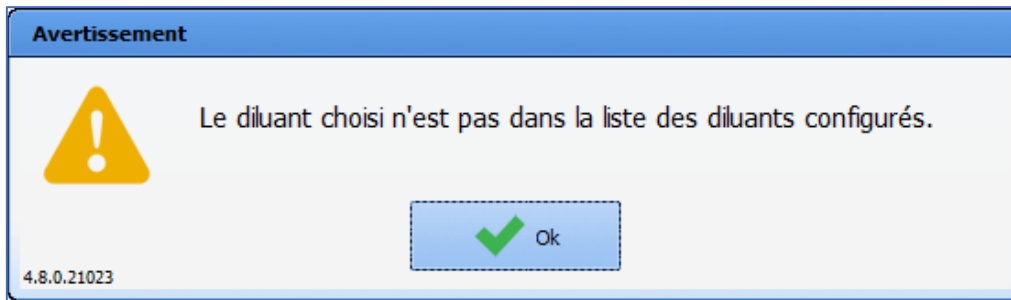Le diluant doit obligatoirement faire partie de la liste des diluants configurés pour que la prescription puisse être validée.





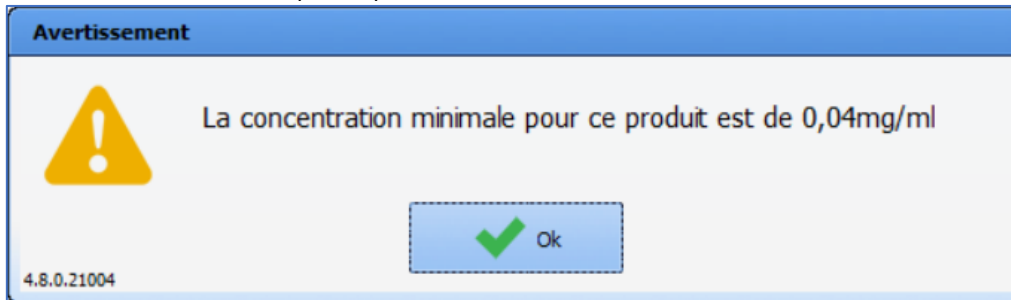Si une concentration minimale a été précisée en configuration, la prescription ne peut pas être validée tant que cette concentration minimale n'est pas respectée.



### 5.7.2.7 Cas particulier des titrations

Le champ **Protocole de titration** de l'onglet **Prescription** permet de gérer les protocoles de titration.



Les conditions d'administration peuvent être :

- Un score : la titration est déclenchée si la valeur du score est égale, supérieure ou inférieure à une valeur déterminée lors de la prescription (*par exemple si le score EVA est supérieur à 5*)

- Une donnée manuelle : la titration est déclenchée si la valeur du paramètre est égale, supérieure ou inférieure à une valeur déterminée lors de la prescription (*par exemple si la Fc est supérieure à 150*)

- Un score ET une donnée manuelle : la titration est déclenchée si la valeur du score et celle du paramètre respectent les conditions définies. Il faut veiller à ce que les 2 cases à cocher (Score et Donnée manuelle) soient cochées.

La préparation nécessite un produit principal et éventuellement un diluant (si le produit principal est configuré en dilution obligatoire, le protocole de titration ne pourra pas être validé tant que ce diluant n'est pas précisé).



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



Préparation

Produit principal  Posologie

Pas de dosage

Diluant  Posologie

Pas de dosage

Contenant volumique

La posologie peut être adaptée au poids du patient (pour les enfants), dans ce cas il faut cliquer sur le libellé

Posologies

/Kg

/Kg. Le libellé se colore alors en bleu

Posologies

/Kg

Voie

Commentaire :

Dose de charge

Dose de titration

Posologie max

Intervalle entre deux évaluations :  heures

Cet intervalle correspond à la période réfractaire entre deux administrations

La dose de charge (administrée sans condition) est optionnelle : elle n'est prise en compte que si la case est cochée.

La dose de titration correspond à la dose administrée à chaque fois que cela est requis par l'évaluation du patient.

La posologie max est la posologie maximale qui peut être administrée au patient : elle doit être au moins égale à la somme de la dose de charge et de la dose de titration. Elle est optionnelle et n'est prise en compte que si la case est cochée. Une fois la posologie max atteinte, le protocole de titration est interrompu.

Il est possible de préciser la voie d'administration et de saisir un commentaire.

L'intervalle entre deux évaluations est la période minimale à respecter entre 2 évaluations (si la case est décochée). Si la case est cochée (fonctionnement normal de la titration), cet intervalle est la période minimale à respecter entre 2 administrations (période réfractaire) : dans ce cas, les évaluations ne sont pas limitées (dans la limite d'une par minute). Cet intervalle peut s'exprimer en minutes ou en heures.

Il est possible de spécifier la date et l'heure de démarrage.

Démarrer le :

Remarques du pharmacien

Valider  Annuler

Comme pour les prescriptions, il est possible de créer un favori (public ou privé) à partir d'un protocole de titration.

### 5.7.2.8 Cas particulier des antibiotiques

Exemple : *Prescription d'Amoxicilline 1g matin-midi et soir à partir de demain 18 heures pendant 5 jours.*



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

L'application permet de rendre obligatoire le suivi et réévaluation de l'antibiothérapie.

**Amoxicilline sandoz cp disp 1g(\*14) (Ne pas remplacer ou substituer) : 1000 mg M,M,Soir**

Antibio./Anti-infectieux

**AMOXICILLINE \*** +

AMOXICILLINE SANDOZ CP DISP 1G(\*14) 1

1000 mg/comprimé

Ce produit n'est pas diluable

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution ▼

Posologie par administration: 1000 mg /kg /m2 Max.

Posologie par jour: 3000 mg

Débit: /kg /h /m2 /min

Ne pas remplacer/substituer

Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 3000 mg

Durée d'administration: 24h 12h 8h 6h 4h 3h 2h 1h 30min Autre: \_\_\_:\_\_\_

Voie: orale A la demande Apporté par le patient

Planification: M,M,Soir 4 Jours... Condition J1

Administration urgente

Date/Heure de début: 18:00 04/02/2022 5 6 5 6

Préciser une durée: Pendant 5 jour(s) Jusque 18:00 09/02/2022

18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1														1			1							
1000 mg														1000 mg			1000 mg							

Remarques du pharmacien

Compléter... 8

Validé Annuler

- Lancer la recherche du produit en tapant les premières lettres du produit dans la « zone produit » (1).
- Sélectionner l'antibiotique dans la liste proposée.
- Vérifier la posologie (2)
- Sélectionner la **Planification** « Matin, Midi, Soir » (l'application permet de renseigner des heures par défaut correspondant aux heures de distribution des traitements, dans l'exemple 8h/12h/18h). Il est important de noter que cette planification permet en cas de retard de ne pas décaler les administrations suivantes).
- Préciser la **Durée d'administration** (6) souhaitée, ici 5 jours
- Indiquer la **Date/heure de début** (5) en modifiant l'heure indiquée, et en cliquant sur le bouton **Demain** (N.B. par défaut, la date/heure indiquée est toujours l'instant T, il n'est donc nécessaire d'intervenir sur ce champ que lorsque vous souhaitez indiquer une heure précise de début d'administration).
- Cliquer sur le bouton **Compléter ...** (7) : celui-ci permet d'ouvrir une fenêtre contextuelle obligatoire (bloquant la signature de la prescription si elle n'est pas saisie), demandant de renseigner la méthode



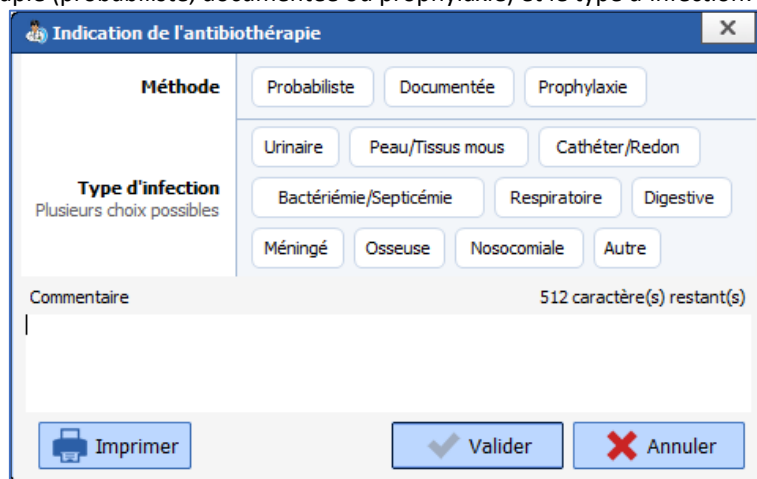
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

de l'antibiothérapie (probabiliste, documentée ou prophylaxie) et le type d'infection.



- Une fois complétée, cliquer sur **OK**, puis valider (8) la prescription.

(3) Le dosage retenu pour l'analyse de posologie de la BDM est toujours indiqué. Il est également possible d'indiquer un produit comme étant « Non substituable »

#### 5.7.2.9 Cas particulier des médicaments onéreux (liste LES)

Exemple : ACLOTINE 1000 UI-10 ml FL10 ml IV- Chy



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Antithrombine iii humaine : 1000 UI 1x/j**

IV

**ACLOTINE \*** +

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution ▲ 100 UI/ml

ACLOTINE 1000 UI-10 ml FL10 ml IV- Chy  
1000 UI/10 ml/flacon Dilution obligatoire

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Posologie par administration  UI /kg /m2 Max.  Posologie par jour  UI

Débit ▲  UI /kg /h /min  /m2 /min

**LES**

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 1000 UI**

Durée d'administration ▲  
 24h  12h  8h  6h  4h  3h  2h  1h  30min  Autre:  :   
 Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie   A la demande  Apporté par le patient

Planification ▲

fois par  jour(s)

Condition  **J1**

Commentaire

Administration urgente Date/Heure de début

Préciser une durée  
 Pendant  jour(s)  Jusque    !

03-02-2022 03-02-2022 04-02-2022 04-02-2022 04-02-2022

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00

Remarques du pharmacien

L'application permet, comme pour les antibiotiques, de rendre obligatoire la saisie de l'Indication nécessitant la mise en place du traitement.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Produit hors GHS : une indication est nécessaire pour valider la prescription**

Nom du produit prescrit : ACLOTINE 1000 UI-10 ml FL10 ml IV- Chy

**Veillez sélectionner l'indication correspondante à la prescription en cours :**

I000003: Déficits constitutionnels en antithrombine :- : Dans les traitements des accidents thrombo-emboliques, en association avec l'héparine, lorsque l'héparine, utilisée seule, est inefficace , - Dans la prévention des thromboses veineuses, en cas de situation à risque élevé (notamment lors d'une chirurgie ou d'une grossesse) lorsque le risque hémorragique ne permet pas d'utiliser des doses suffisantes d'héparine,

I000004: Déficits constitutionnels en antithrombine : Déficit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine, dans les CIVD graves, évolutives, notamment associées à un état septique

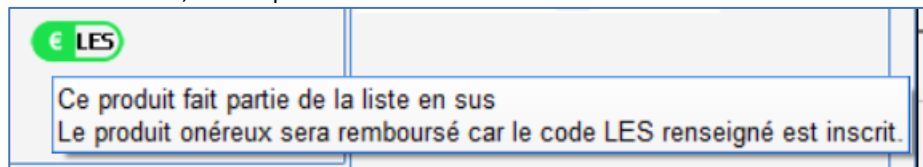
I999998: Indications faisant l'objet de recherches menées dans le cadre de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique

I999999: Prescription en dehors d'une indication prévue par l'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique


La saisie du commentaire est facultative :

Imprimer Code I000003 Inscription Inscrit OK Annuler


Une fois le formulaire saisi, l'icône passe en vert.



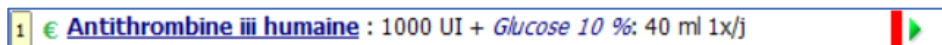La prescription d'un produit onéreux est matérialisée par la présence d'une icône sur la fenêtre de prescription.



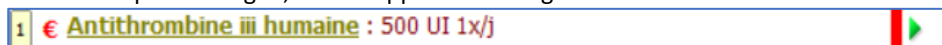Si le formulaire n'est pas renseigné, l'icône apparaît en rouge.



**Antithrombine iii humaine : 1000 UI; D=8h 3x/j**

IV

**ACLOTINE \*** +

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

contenant et dilution ▲ 100 UI/ml

ACLOTINE 1000 UI-10 ml FL10 ml IV- Chy  
1000 UI/10 ml/flacon Dilution obligatoire

Posologie par administration  UI /kg /m2 Max.  UI

Posologie par jour  UI

Débit ▲  UI /kg /h /min

Contenant volumique

Débit de la perfusion  ml/h  Débit non précisé

€ LES

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 2999,97 UI**

Durée d'administration ▲

24h  12h  8h  6h  4h  3h  2h  1h  30min  Autre:

Débit continu (durée et dilution non définies)

Voie   A la demande  Apporté par le patient

Planification ▲

fois par

Condition

Administration urgente Date/Heure de début

Préciser une durée  Pendant  jour(s)  Jusque    !

Heure non définie (réinitialise le plan de soins)

04-02-2022 05-02-2022 05-02-2022 05-02-2022

16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00

Remarques du pharmacien

- Sélectionnez le produit désiré.
- Indiquez les éléments nécessaires à son administration, posologie, durée d'administration....
- Cliquez sur le bouton **Compléter ...** une fenêtre contextuelle s'ouvre.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Produit hors GHS : une indication est nécessaire pour valider la prescription**

Nom du produit prescrit :

**Veillez sélectionner l'indication correspondante à la prescription en cours :**

I000003: Déficits constitutionnels en antithrombine :- : Dans les traitements des accidents thrombo-emboliques, en association avec l'héparine, lorsque l'héparine, utilisée seule, est inefficace , - Dans la prévention des thromboses veineuses, en cas de situation à risque élevé (notamment lors d'une chirurgie ou d'une grossesse) lorsque le risque hémorragique ne permet pas d'utiliser des doses suffisantes d'héparine,

I000004: Déficits constitutionnels en antithrombine : Déficit acquis sévère (< 60 %) en antithrombine, dans les CIVD graves, évolutives, notamment associées à un état septique

I999998: Indications faisant l'objet de recherches menées dans le cadre de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique




I999999: Prescription en dehors d'une indication prévue par l'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique

La saisie du commentaire est facultative :

Code:  Inscription:

- Sélectionnez l'indication correspondante. (Les indications proposées sont transmises par la banque des médicaments. Si aucune ne correspond, utilisez un code générique parmi les deux suivants :  
**I999998** : Spécialité faisant l'objet de recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 du Code de la santé publique.  
**I999999** : Indication est hors AMM mais médicalement justifiée conformément à l'article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique.  
L'utilisation d'un de ces deux codes rend obligatoire la saisie d'un commentaire.
- Cliquez sur le bouton **OK**, puis validez votre prescription.

#### Code couleurs du logo LES :

-  • Cela signifie que l'indication de ce médicament onéreux n'a pas été complétée : Cliquez sur le bouton **Compléter ...**
-  • Cela indique que vous avez correctement validé l'indication de ce médicament onéreux, mais que le statut de remboursement n'est pas connu.
-  • Cela indique que vous avez correctement validé l'indication de ce médicament onéreux et qu'il sera remboursé

#### 5.7.2.10 Cas particulier des patchs

La durée d'administration est limitée à 99h, ce qui permet l'administration de patchs.

**Durée d'administration** ▲

24h  12h  8h  6h  4h  3h  2h  1h  30min  Autre:

Débit continu (durée et dilution non définies)



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 5.7.3 Import depuis le traitement personnel

L'application permet de reprendre dans la prescription les molécules renseignées dans le champ **Traitements personnel du patient** de l'onglet **Médecin**.

Lorsque l'option est activée, les molécules viennent se positionner dans le champ de prescription **Import depuis le traitement personnel**.

Composant de saisie du traitement personnel du patient dans l'onglet **Médecin** :

**Zone 1** : Zone de saisie des produits : Cliquer sur la première ligne. Saisir les premières lettres du produit. Une liste de suggestion s'ouvre, sélectionner le produit à ajouter. Indiquer la posologie et la fréquence d'administration. (Ici *Plavix 75 mg 1 fois le matin*)

**Zone 2** : Zone **Conciliation** permet d'indiquer la gestion du traitement maintien, relais, ou arrêt.

Dans l'exemple ci-dessus, le Plavix est maintenu, les autres traitements sont indiqués comme arrêtés à l'instant T, ce qui permet de mettre en pause le traitement personnel du patient, et de ne le reprendre qu'au moment opportun de son hospitalisation.

Le clic sur le bouton **Valider** permet d'afficher une fenêtre s'ouvrant permettant de signer (grâce à un identifiant et un mot de passe) et de confirmer l'action d'envoyer la conciliation et/ou les prémédications dans la prescription.

**Zone 3** : **Copier la conciliation vers Diane prescription** : Cocher la case **Vers pres. Hospitalière** permet de transposer le traitement personnel dans l'onglet de prescription dans le champ **Import depuis le traitement personnel**. **Copier la prémédication vers Diane prescription** : Cocher la case **Vers pres. Hospitalière** permet de transposer les prémédications dans l'onglet de prescription dans le champ **Import depuis le traitement personnel**.

**Zone 4** : Cliquer sur le bouton **Signer** : lors de cette action, le traitement personnel est validé et envoyé dans l'onglet prescriptions si les cases correspondantes ont été cochées.

Composant **Import depuis le traitement personnel** dans l'onglet **Prescription** :







Le traitement personnel du patient est ainsi repris dans l'onglet de prescription. (Reprise du produit en DCI, de sa posologie et de fréquence d'administration).

Le marqueur rouge en bout de ligne (1) indique bien que le traitement est arrêté (il s'agit d'une pause et non d'un arrêt pour permettre la reprise du traitement ultérieurement).

Selon l'option activée, il sera possible soit :

- De reconduire le traitement en cliquant sur le marqueur rouge afin d'en modifier l'état.
- Ou de ressaisir la prescription dans le champ adapté de l'onglet de prescription. Dans cet exemple, le champ serait le champ **Per-os**.

### 5.7.4 La prescription par saisie libre (Alimentation, Imagerie...)

Les champs de prescription peuvent faire appel à une liste spécifique. Lorsque le champ est paramétré ainsi il offre la possibilité de saisir du texte libre.

Exemple : *Prescription de Kinésithérapie respiratoire 2 fois / jour pendant 5 jours.*

- Entrez la prescription ou consigne souhaitée (1).
- Renseignez la fréquence de réalisation (2). Ici 3 fois/ jour.
- Indiquez la durée à appliquer à cette prescription (3). Ici pendant 5 jours.
- Cliquez sur le bouton **Valider**.

### 5.7.5 La prescription par appel de saisie avancée (Kinésithérapie, Biologie/bactériologie, ECMO...)

Pour certaines prescriptions telles que la biologie, l'épuration extra-rénale... nécessitant d'apporter de nombreuses informations ; il est possible de faire appel à un formulaire intégré à la fenêtre de prescriptions.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Exemple : Prescription d'un bilan biologique à l'entrée du patient en réanimation à heure non définie.

**RGDS\_Examens de biologie : heure non précisée**

Biologie / Bactériologie. Poids : 78 Kgs Taille : 176 cms

**RGDS Examens de biologie Prescription**

Responsable :

**PRESCRIPTION D'EXAMENS DE BIOLOGIE**

**HEMATOLOGIE**

Groupe Rh, 1er déter  Plaquettes  Schizocytes

RAI  Carte de groupe URG  Recticulocytes

NFS

**BIOCHIMIE SANGUINE**

Iono sang  Calcium, Phosp., Mg  Triglycérides

Urée, créat  Albumine  Hb Glycosylée

Réserve alc.,Protidémie  cholestérol total, HDL  Haptoglobine

**HEMOSTASE**

TP, INR  Héparinémie  Ac anti PF4

TCA  Fact II, V, VII, X  Anti-Xa

Fibrinogène  Anti-thrombine III  Anti-Xa organar

D-Dimères  PDF

**ENZYMOLOGIE**

ASAT, ALAT  Troponine T  Myoglobine

CPK  Phos. alc, CGT  Lipase

LDH  Bili. tot, libre+conj

**PROTEINES SERIQUES**

CRP  NT pro-BNP  Ferritine, Coeff. sat

Procalcitonine  Electropho.protides  Folates, Vit. B12

Albumine  Fer sérique,  Immuno-électro. prot.

**HORMONOLOGIE**

TSHus  AGT, ATPO

T4 Libre  Test synactène T0/T60

Cortisol à 8h

**FACT. TUMORAUX** **IMMUNOLOGIE**

**Planification**

Unique  Heure non définie

Condition  J1

Commentaire

16-07-2020 16-07-2020 16-07-2020 16-07-2020 17-07-2020

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00

Valider  Annuler

A l'ouverture de la fenêtre de prescription la partie haute vous donne accès au formulaire de saisie.

- Cochez (1) les éléments du bilan biologique que vous souhaitez prescrire.
- Des boutons de valeurs par défaut peuvent être paramétrés (2). Ceux-ci permettent d'enregistrer des valeurs cochées par défaut. Ici dans cet exemple en venant cliquer sur le bouton (2), les éléments du bilan biologique se sont cochés automatiquement.
- Renseignez la planification (3). Ici le choix « unique » indique que le bilan prescrit est ponctuel et ne sera pas reconduit, celui-ci sera marqué comme arrêté automatiquement. (Cette planification en « unique » vous obligera à faire une nouvelle prescription si toutefois vous souhaiteriez réaliser à nouveau ce bilan.)
- Cochez la case **Heure non définie** (4) cela permettra à l'infirmier(e) de planifier l'heure de réalisation du bilan sanguin.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- Valider votre prescription en cliquant sur le bouton (5).

## 5.7.6 Prescription des paramètres ventilatoires

La prescription de Ventilation ou d'Oxygénothérapie se fait via une fenêtre dédiée, celle-ci s'adapte en fonction du mode de ventilation choisi.

La partie gauche de la fenêtre (encadrée en bleu) doit être saisie en tout premier lieu.

Cette zone permet le déploiement des différents champs de saisie en fonction du traitement, du mode de ventilation choisi.

Elle est composée de cinq parties :

- Zone 1 : **Traitement** : Permet de choisir entre **Ventilation** et **Oxygénothérapie**.
- Zone 2 : **Ventilation** : Permet de choisir entre une ventilation **Invasive** ou **Non-invasive**.
- Zone 3 : Permet de sélectionner le mode de ventilation **Barométrique**, **Volumétrique** ou **Autre**.
- Zone 4 : **Interface** : Permet d'indiquer l'interface choisie pour la ventilation ou l'oxygénothérapie.
- Zone 5 : **Mode** : Permet d'indiquer le mode ventilatoire.

**REMARQUES :** Dans les zones 1, 2 et 3 la sélection se fait en déplacement le curseur bleu de gauche à droite.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Les cases à fond rose sont à renseigner obligatoirement. Elles sont adaptées au mode ventilatoire.

Zone 6 : Permet la saisie du VT/PIT en ml/kg, lorsque vous renseignez celui-ci le calcul du VT se fait automatiquement.

Zone 7 : Cette zone permet de renseigner les objectifs de saturation attendus.

The screenshot shows the 'BIPAP-VACI, Masque naso-buccal : en continu' configuration window. It is divided into several sections:

- Traitement:** Includes 'Ventilation' and 'Oxygénothérapie' options.
- Ventilation:** Features 'Invasive' and 'Non invasive' modes, and 'Volumétrique', 'Barométrique', and 'Autre' sub-modes.
- Paramètres ventilatoires:** Contains fields for VT, VT/PIT, FIO2 (set to 40%), O2, FR, I/E, PEP (set to 3 cmH2O), PI, AI, NO, DV, and saturation objectives (96% to 98%).
- Interface:** A dropdown menu currently set to 'Masque naso-buccal'.
- Mode:** A dropdown menu set to 'BIPAP-VACI'.
- VNI alternée:** A section with checkboxes for 'Sevrage' and 'Utilisation raccord en T', and radio buttons for 'Fuite' (Non, Circuit, Masque).
- Mode CPAP:** Includes fields for CPAP mode, interface (set to 'Masque facial'), and rates (1 h/min, 6 h/min).
- Planification:** A section for scheduling, including 'En continu', 'Administration urgente', 'Date/Heure de début' (09:01 04/02/2022), and a timeline from 04-02-2022 to 07-02-2022.

Numbered callouts (1-5) point to specific elements: 1 (Interface dropdown), 2 (VNI alternée checkbox), 3 (Fuite radio button), 4 (Rate field), and 5 (Planification section).

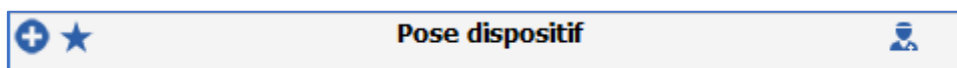
Selon le mode (1) choisi il est possible de prescrire une ventilation alternée (2) avec de la VNI par exemple. Il vous est alors possible d'indiquer deux interfaces différentes en (1) et en (3), et d'indiquer le rythme d'alternance souhaité (4).

Dans cette configuration la Planification (5) s'applique au mode de fond qui est déterminé dans la partie gauche de la fenêtre.

## 5.7.7 La prescription des dispositifs médicaux (pose et retrait)

### 5.7.7.1 Ajout d'un élément de soin via l'onglet de prescription

La prescription d'une pose se fait depuis le champ **Ajout de dispositif (élément de soins)** dans l'onglet **Prescription**.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Zone 1 :** Zone de saisie du dispositif : Zone permettant de renseigner l'insertion désirée.

- Cliquez dans la zone et taper les premières lettres. Une liste s'ouvre, proposant les dispositifs disponibles. (Un double-clic dans cette zone (1) vous ouvre la liste complète des dispositifs).
- Sélectionnez le dispositif souhaité. Ici KT Artériel.

**Zone 2 :** Bouton d'appel du formulaire de pose : Il vous est possible depuis la prescription de renseigner le formulaire initial permettant d'indiquer les détails concernant l'élément de soin.

Seul le formulaire est saisissable. (1), encadré en rouge.




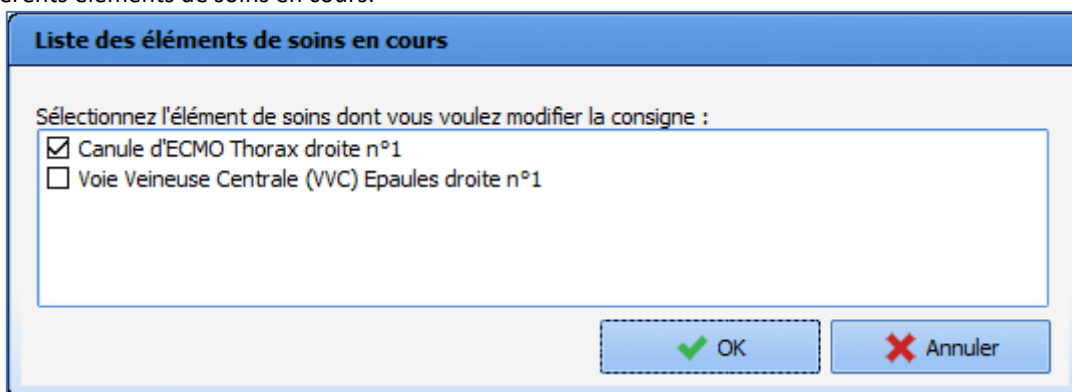
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)

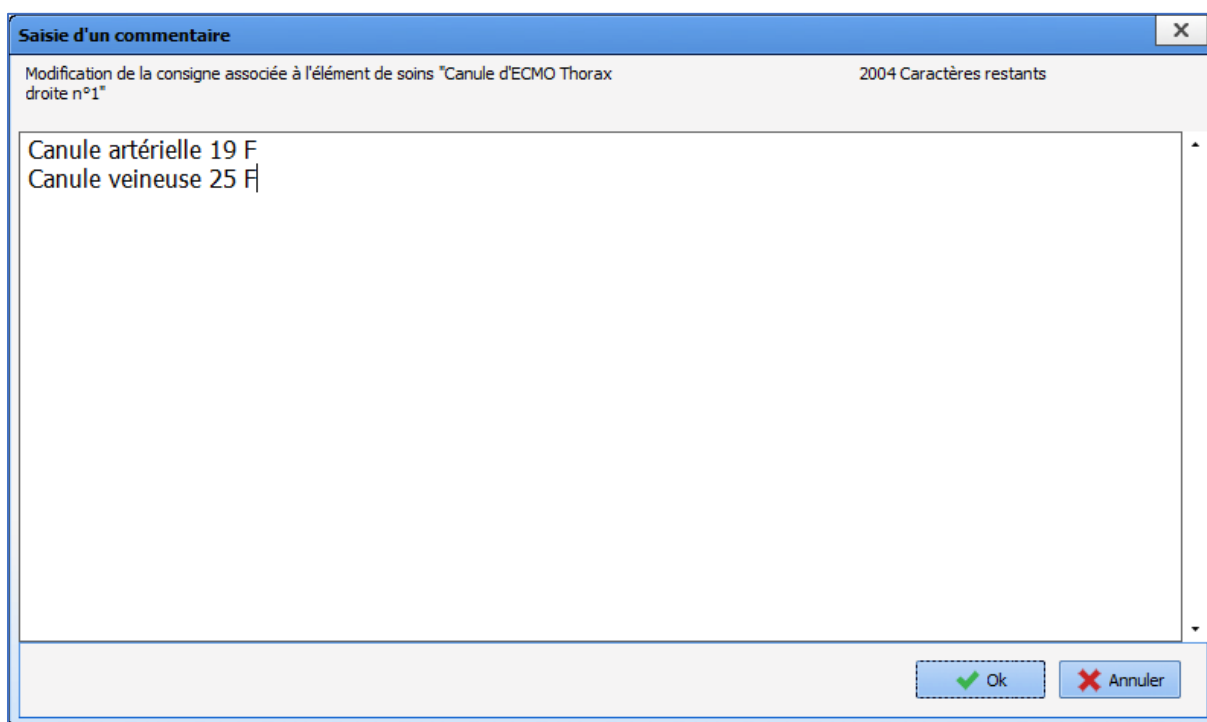


DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28


Il est possible de modifier la consigne en cliquant sur le bouton . Cela affiche une fenêtre listant les différents éléments de soins en cours.



La sélection de l'élément de soin à modifier ouvre une fenêtre avec une zone de saisie multiligne permettant de saisir la nouvelle consigne (à l'ouverture, la fenêtre affiche la consigne saisie précédemment).




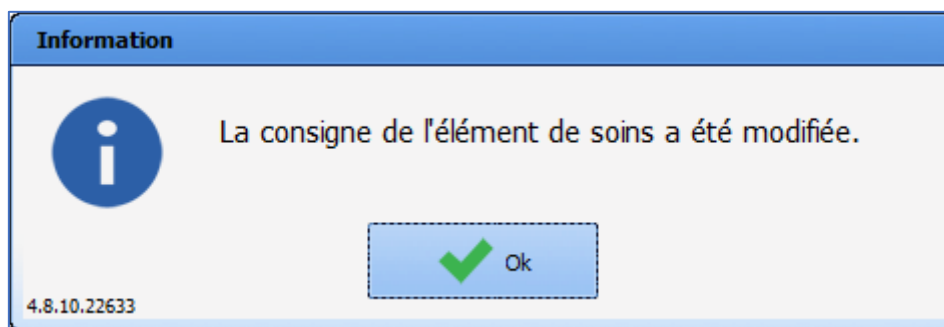Après avoir cliqué sur le bouton **Ok**, une fenêtre confirme que les modifications ont bien été prises en compte.



### 5.7.7.2 Retrait d'un élément de soin via l'onglet de prescription

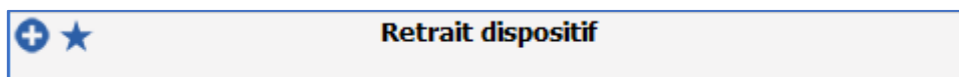
La prescription de l'ablation d'un dispositif se fait depuis le champ dédié **Retrait de dispositif (élément de soins)** de l'onglet **Prescription** .



La fenêtre permettant la prescription d'un retrait est identique à celle de pose. L'utilisation est la même.

- Saisissez dans la zone de recherche (1) le type de dispositif pour lequel vous souhaitez indiquer le retrait. Sélectionnez-le dans la liste des propositions.  
Ou double-cliquez dans la zone de recherche, seuls les éléments de soins possédant un formulaire de retrait vous seront proposés.
- Pré renseignez ou non le formulaire de retrait. (2)
- Indiquer la date / heure de retrait.
- Validez votre prescription en cliquant sur le bouton.

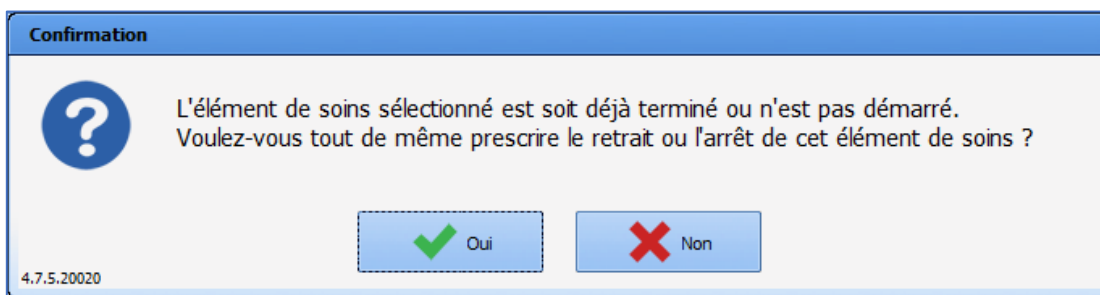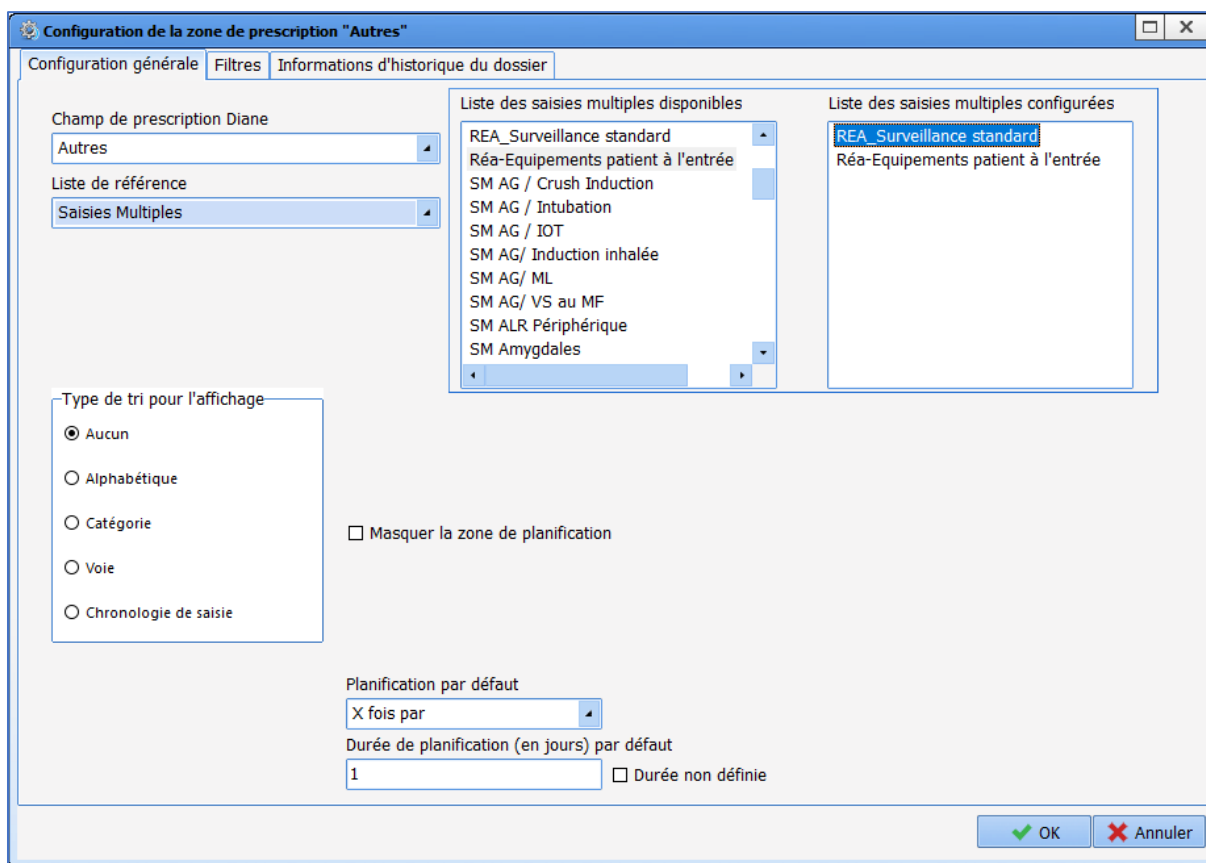
**REMARQUE** : Un avertissement s'affiche si le retrait prescrit renvoie à un élément de soins déjà terminé ou non démarré.




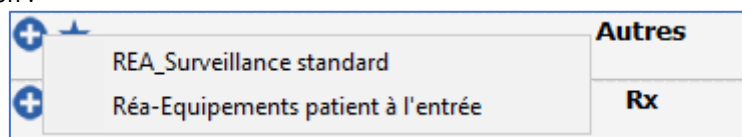
### 5.7.8 La prescription de saisies multiples

Il est possible de prescrire des saisies multiples avec un champ de prescription ayant pour liste de référence **Saisies multiples** :





Le clic sur le bouton  lié au champ de prescription propose la liste des saisies multiples configurées pour ce champ de prescription :



La sélection d'une saisie multiple permet, par le biais de la fenêtre de prescription classique, de planifier sa saisie :



**REA\_Surveillance standard : 2x/j**

Autres  
 REA\_Surveillance standard Poids : 80 Kgs Taille : 180 cms  
 Élément en lecture seule

Planification ▲

2 fois par jour(s) Jours... J1

Condition Rechercher...

Administration urgente Date/Heure de début 08:00 24/03/2022 Demain

Liez à un événement  
 Heure non définie (réinitialise le plan de soins)

Préciser une durée  
 Pendant 10 jour(s)  Jusque 08:00 03/04/2022

Commentaire

24-03-2022 25-03-2022 25-03-2022 26-03-2022 26-03-2022 27-03-2022

12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00

★ 🗑️ ✎️ Validater Annuler

Comme pour les autres champs de prescriptions, il est nécessaire de signer la prescription afin qu'elle se répercute dans le plan de soin.

### 5.7.9 Prescription liée à un événement

La date/heure d'une prescription peut être liée à un événement (entrée ou sortie de bloc, entrée ou sortie de réveil ou entrée ou sortie de réa). Il est possible d'indiquer une durée en heures/minutes et/ou en jours.



Per-OS

Produit \* +

Taille : 180 cms  
Poids : 80 Kgs

Rechercher...

Aucun produit sélectionné

Taille : 180 cms  
Poids : 80 Kgs

Planification ▲

1 fois par jour(s) Jours... ►

Condition Rechercher...

Lier à un événement: Après entrée bloc

Heure non définie (réinitialise le plan de soins)

Administration urgente Décalage de temps : : jour(s)

Préciser une durée

Pendant 1 jour(s)

Commentaire

La date/heure de début dépend d'un événement dont la date/heure n'est pas définie, la planification n'est pas visible

Remarques du pharmacien

★ 🗑️ ✎

✓ Valider ✗ Annuler

Dans le cas d'une prescription hospitalière, l'événement référence n'a pas encore eu lieu, la planification n'est donc pas affichée dans la fenêtre de prescription.

La date/heure de début dépend d'un événement dont la date/heure n'est pas définie, la planification n'est pas visible

Il est également possible de lier la durée aux mêmes événements :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Per-OS

Produit \* +

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Rechercher...

Aucun produit sélectionné

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Planification ▲

1 fois par jour(s)

Condition Rechercher...

Lier à un événement Après entrée réa

Heure non définie (réinitialise le plan de soins)

Administration urgente

Décalage de temps : : jour(s)

Début à 10h44

Préciser une durée

Pendant 1 jour(s)

Jusque 10:44 09/04/2022

08-04-2022 09-04-2022 09-04-2022

10:00 12:00 14:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Après entrée bloc  
Après sortie bloc  
Après entrée réveil  
Après sortie réveil  
Après entrée réa  
Après sortie réa

Remarques du pharmacien

★ 🗑️ ✎

✓ Valider ✗ Annuler

Si l'événement est modifié ou réalisé, un message informe de la mise à jour de la date dans la prescription :

**Visual**

**DIANE**<sup>BETA</sup>  
Une marque de BOW MEDICAL  
4.9.0.23101

**Visual**

Le plan de soins a été mis à jour pour prendre en compte la date et heure associée à "Passage au bloc".



2023-03-17

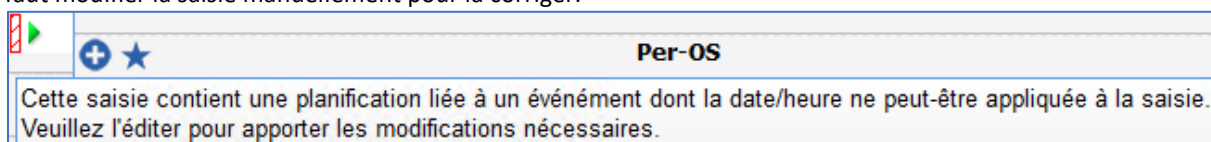
BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Si un événement du même type a déjà eu lieu, la prescription est liée à un événement futur. Par exemple, un dossier est repris en bloc après un passage en réveil : si une prescription est liée à l'entrée ou à la sortie de bloc, c'est la date/heure de reprise de bloc qui sera prise en compte et non la date/heure du premier passage en bloc.

Si, la date de fin de planification d'une prescription est antérieure à la date de début, le marqueur est alors hachuré et le conseil à la souris indique que la date/heure associée à l'événement n'a pu être appliquée et qu'il faut modifier la saisie manuellement pour la corriger.




### 5.7.10 Les favoris de prescription



Afin de faciliter la saisie des prescriptions, plusieurs raccourcis ont été pensés dans l'application.

- Les « favoris » : qui sont des prescriptions pré renseignées disponibles pour chaque champ.
- Les **Prescrire un protocole** : qui sont des protocoles permettant en un clic de renseigner un ensemble de prescriptions dans différents champs.
- Les **Remplacer la prescription actuelle** : qui permettent de remplacer les prescriptions en cours par un nouveau protocole.

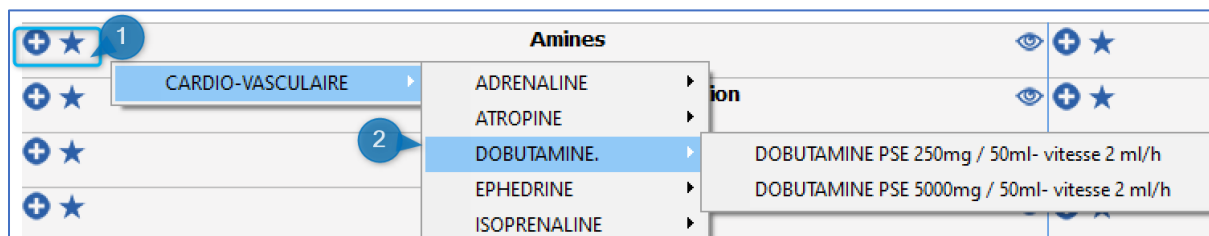
#### Utilisation d'un favori :

Les favoris sont paramétrés par champ de prescription. Ce qui permet de limiter la liste des suggestions.



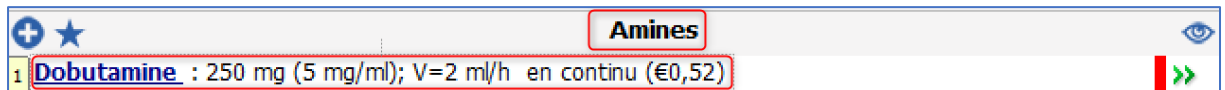- **Zone (1)** : Zone d'édition du favori : Editez le menu des favoris accessibles sur le champ. Pour cela deux possibilités :
  - Clic gauche sur l'étoile 
  - Clic droit sur le plus 
- **Zone (2)** : Le menu des favoris : la liste de favoris disponibles pour le champ s'ouvre. Ici, dans l'exemple, nous sommes positionnés sur le champ **Amines** je n'ai donc que des favoris appartenant au champ **Amines** qui me sont proposés.
- Au clic, sélectionnez le favori que vous souhaitez prescrire. Le favori est automatiquement renseigné dans le champ.







- Si vous souhaitez modifier la prescription générée par le favori, ou en contrôler le contenu : Cliquez sur la ligne du produit, vous ouvrirez ainsi la fenêtre de prescription.

**Notez** qu'il est possible par le biais d'un seul favori de prescrire plusieurs lignes de prescriptions dans le même champ.

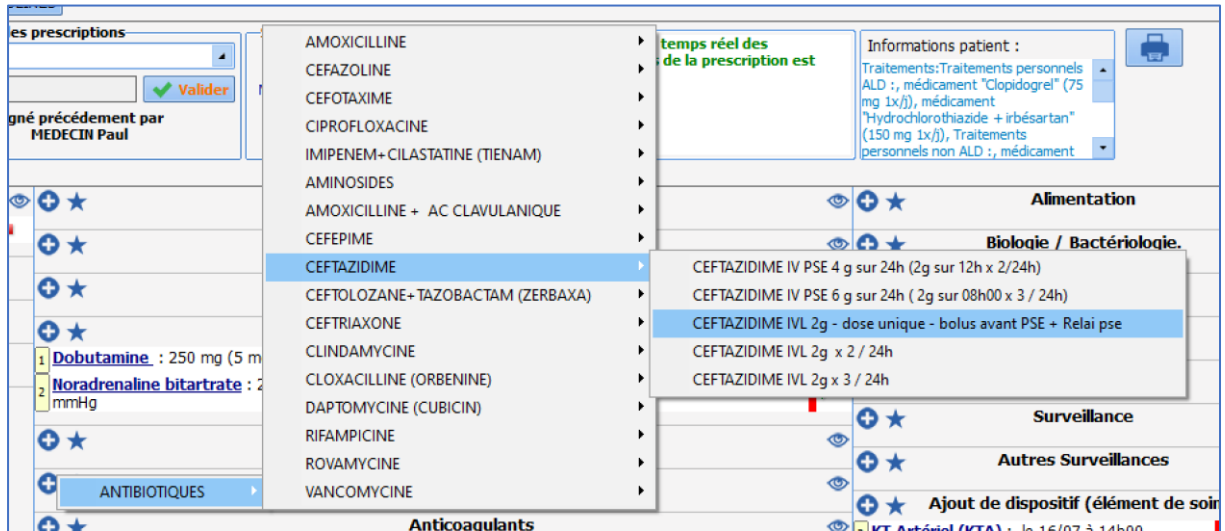Exemple : *Ceftazidime dose de charge puis relais PSE*



- Sélectionnez le favori. Ici CEFTAZIDIME IVL 2G -dose unique- avant PSE puis Relais PSE.
- Le favori se charge automatiquement en deux lignes distinctes de prescription.  
Une première reprenant la prescription de la dose de charge, celle-ci paramétrée en dose unique afin de ne pas être reconduite.  
La seconde intégrant le relais PSE, avec un début prévu avec un décalage de temps de 12 heures, qui sera donc disponible sur le plan de soins 12 heures plus tard afin que le relais soit respecté, et que l'administration ne soit pas en simultané.

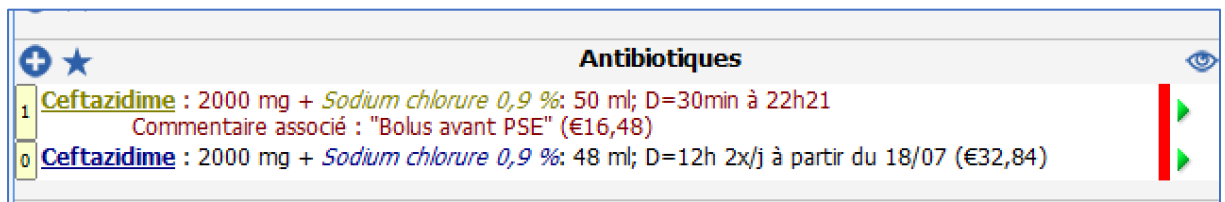

Les favoris publics sont soumis à l'approbation d'un référent possédant le droit de les approuver. Lorsqu'un favori n'est pas approuvé, un message s'affiche à l'écran pour l'indiquer. Les favoris privés ne sont pas concernés.




**DianeRea**

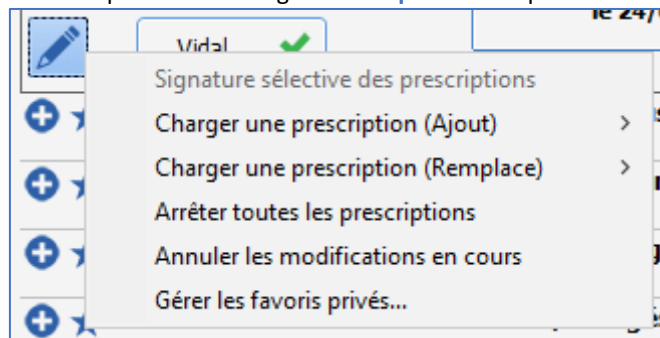
**DIANE**  
Une marque de BOW MEDICAL  
4.8.0

**DianeRea**


Attention, Paracetamol : 100 ml; D=15min 4x/j n'a pas été approuvé.

### 5.7.10.1 Gestion des favoris privés

L'utilisateur peut gérer ses favoris privés dans l'onglet **Prescription** en cliquant sur le bouton .



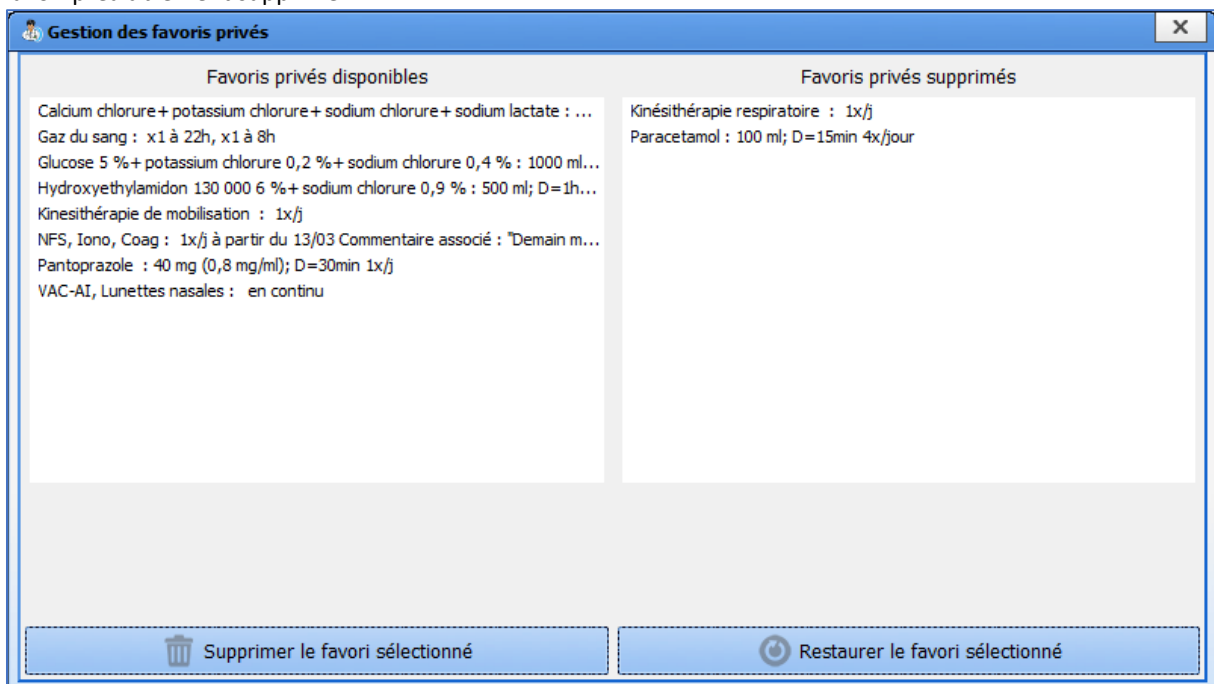La fenêtre Gestion des favoris privés permet de supprimer facilement des favoris privés, ou de restaurer un favori préalablement supprimé.



Lorsqu'un favori privé est sélectionné dans la liste, le nom du champ de prescription associé et le résumé sont affichés pour vérifier qu'il s'agit bien du favori privé que l'on souhaite supprimer ou restaurer.



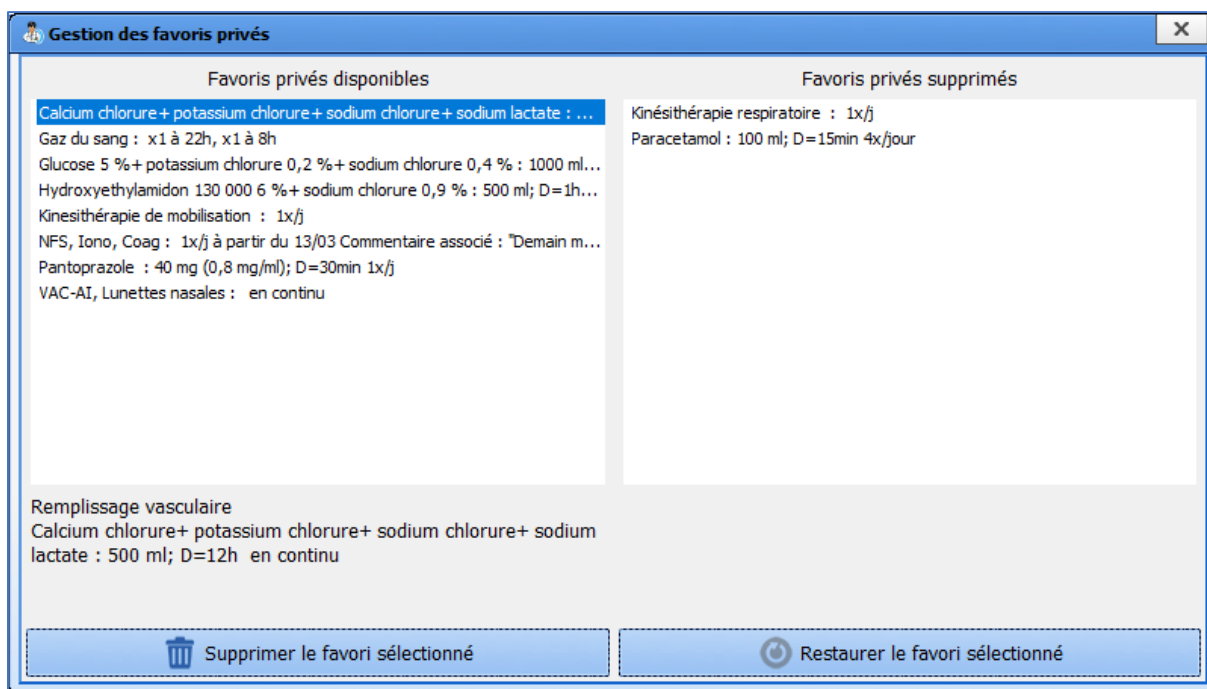
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28


Page : 250 / 386




### 5.7.11 Les protocoles de prescription

L'application permet également de prescrire des favoris de prescriptions dans plusieurs champs différents en un seul clic. Cette saisie s'effectue par le bouton  situé en haut à gauche de l'onglet de prescription.

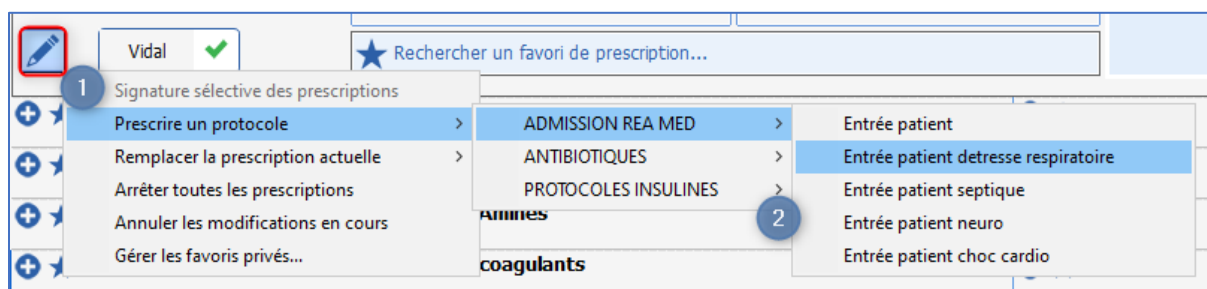**Prescrire un protocole** : cette option permet à l'aide de protocoles pré-enregistrés de saisir des favoris de prescriptions dans plusieurs champs de prescriptions à la fois.




Zone (1) : Bouton « crayon »  : zone permettant d'accéder au menu de prescription des protocoles.



- Cliquer sur le bouton crayon.
- Sélectionner l'option **Prescrire un protocole**, le menu de prescription des protocoles se déploie. (2)
- Cliquer sur le protocole que l'on souhaite prescrire.
- Une fenêtre répertoriant l'ensemble des champs de prescription du protocole s'affiche.

Protocole : Entrée patient detresse respiratoire

Ce qui est sélectionné ✓ sera prescrit

Sédation/Analgésie/Curarisation		
Midazolam : 50 mg (1 mg/ml) Voie IV ; V=3 ml/h	en continu à partir du 23/01 à 14h18 pdt 1 j	  
Cisatracurium : 100 mg (2 mg/ml) Voie IV ; V=6 ml/h Commentaire : TOF/ 4h , objectif 2-3/4	en continu à partir du 23/01 à 14h18 pdt 1 j	  
Sufentanil : 250 µg à 10 µg/h + Sodium chlorure 0,9 %: 45 ml Voie intraveineuse Commentaire : Selon score BPS	en continu à partir du 23/01 à 14h18 pdt 1 j	  
Paramètres ventilatoires		
PAC, Sonde d'intubation	en continu à partir du 23/01 à heure non précisée	  
Perfusions		
Ringer (labo b braun), sol pr perf, poche 500 ml : 500 ml Voie intraveineuse (en perfusion) Commentaire : Garde veine	en continu à partir du 23/01 à heure non précisée	  
Per-OS		
Esomeprazole : 40 mg Voie orale	1x/j à partir du 23/01 à 14h18	  
Alimentation entérale		
Fresubin 2kcal hp nutriment : à 42 ml/h Voie Voie gastro-entérale	en continu à partir du 23/01 à heure non précisée	  
Pose dispositif		
Voie Veineuse Périphérique (VVP)	heure non précisée le 23/01	  
Voie Veineuse Centrale (VVC)	heure non précisée le 23/01	  
KT Artériel (KTA)	heure non précisée le 23/01	  
Sonde Vésicale (SAD)	heure non précisée le 23/01	  
Sonde d'Intubation (S.I)	heure non précisée le 23/01	  

 Prescrire  Annuler

- Il est possible de modifier ou vérifier les favoris en cliquant sur le bouton .
- Il est possible de ne pas charger une ligne du protocole en cliquant sur le bouton .

Midazolam : 50 mg (1 mg/ml) Voie IV ; V=3 ml/h	en continu à partir du 23/01 à 14h18 pdt 1 j	  
---	--	---

Exemple : Prescrire un protocole / ADMISSION REA MED / Entrée patient détresse respiratoire.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sédation/Analgésie/Curarisation <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cisatracurium : 100 mg (2 mg/ml); V=6 ml/h en continu; Commentaire associé : "TOF/ 4h , objectif 2-3/4"</li> <li>2 Midazolam : 50 mg (1 mg/ml); V=3 ml/h en continu</li> <li>3 Sufentanil : 250 µg à 10 µg/h + Sodium chlorure 0,9 %; 45 ml en continu; Commentaire associé : "Selon score BPS"</li> </ul> </li> <li>★ Antalgiques/Analgésie</li> <li>★ Amines</li> <li>★ Anticoagulants</li> <li>★ Paramètres ventilatoires <ul style="list-style-type: none"> <li>1 PAC, Sonde d'intubation : en continu</li> </ul> </li> <li>★ Aérosols</li> <li>★ Protocole de titration</li> <li>★ Protocole Meynaar</li> <li>★ PSL</li> <li>★ Epuration Extra-Rénale</li> <li>★ E.C.M.O.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perfusion <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Ringer (labo b braun), sol pr perf, poche 500 ml : 500 ml en continu; Commentaire associé : "Garde veine"</li> </ul> </li> <li>★ Remplissage vasculaire</li> <li>★ Antibio./Anti-infectieux</li> <li>★ IV</li> <li>★ Per-OS <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Esomeprazole : 40 mg 1x/j</li> </ul> </li> <li>★ Alimentation entérale <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Fresubin 2kcal hp nutriment : à 42 ml/h en continu</li> </ul> </li> <li>★ Pose dispositif <ul style="list-style-type: none"> <li>8 KT Artériel (KTA) : heure non précisée</li> <li>1 Sonde d'Intubation (S.I) : heure non précisée</li> <li>1 Sonde naso gastrique (SNG) : à 17h33</li> <li>1 Sonde Vésicale (SAD) : heure non précisée</li> <li>1 Voie Veineuse Centrale (VVC) : heure non précisée</li> <li>1 Voie Veineuse Périphérique (VVP) : heure non précisée</li> </ul> </li> <li>★ Retrait dispositif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Isolement / Précautions</li> <li>★ Autres modes d'administration</li> <li>★ Biologie / Bactériologie. <ul style="list-style-type: none"> <li>4 REA - Bilan sanguin principal : 1x/j</li> </ul> </li> <li>★ Kinésithérapie</li> <li>★ Imagerie <ul style="list-style-type: none"> <li>6 ECG 12 Dérivations : 1x/j</li> <li>1 Radiographie de thorax : 1x/j</li> </ul> </li> <li>★ Bon Imagerie</li> <li>★ Consignes Particulières</li> <li>★ Surveillance</li> <li>★ Autres Surveillances <ul style="list-style-type: none"> <li>9 Rapport PAO2 FIO2 : 1x/j</li> <li>1 Surveillance simple : ttes les 3h</li> </ul> </li> </ul>
---	---	---

Dans cet exemple, l'appel du protocole a permis à la fois de prescrire

- Des thérapeutiques : dans le champ **Perfusions (3)**, dans le champ **Sédation / Analgésie/ Curarisation(2)**, dans le champ **Per-Os (5)**, dans le champ **Alimentation entérale (7)**.
- Des surveillances et consignes : dans le champ **Biologie / Bactériologie (4)**, dans le champ **Imagerie (6)**, **Autres surveillances (9)** et dans le champ **Consignes particulières (1)**.
- La ventilation du patient : dans le champ **Paramètres ventilatoires (1)**.
- La pose de dispositifs : dans le champ **Pose dispositif (8)**.

**Remplacer la prescription actuelle** : Cette option, comme son nom l'indique va venir « remplacer » les prescriptions en cours.

Les prescriptions actuelles passent alors à l'état arrêté, et ne seront donc plus actives sur le plan de soins dès l'instant où la prescription sera signée.

Exemple : dans l'exemple précédent, le protocole Entrée patient détresse respiratoire a été prescrit... Il est remplacé par le protocole Entrée patient (**Remplacer la prescription actuelle** / Protocoles / Entrée patient

Afficher la balance liquidienne | Entrée patient | Choc cardiologique | Detresse respiratoire | Patient cerebrolésé | Patient septique

Prescription en cours

Volume (/24h) : 22,15 ml/kg  
Calories (/24h) : - KCal (/kg=)  
Azote (/24h) : - g  
Prix estimé : €1,36

Signature des prescriptions par YES MDP Signé par MEDECIN Yves le 18/01/2023 à 09:44:06

Signature senior des prescriptions par YES MDP Signé par MEDECIN Yves le 18/01/2023 à 09:44:06

Rapport de la base de médicament : 1 IPC(s)  
Cliquez pour voir le rapport

Informations patient :

<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Sédation/Analgésie/Curarisation <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cisatracurium : 100 mg (2 mg/ml); V=6 ml/h en continu; Commentaire associé : "TOF/ 4h , objectif 2-3/4"</li> <li>2 Midazolam : 50 mg (1 mg/ml); V=3 ml/h en continu</li> <li>3 Sufentanil : 250 µg à 10 µg/h + Sodium chlorure 0,9 %; 45 ml en continu; Commentaire associé : "Selon score BPS"</li> </ul> </li> <li>★ Antalgiques/Analgésie</li> <li>★ Amines</li> <li>★ Anticoagulants</li> <li>★ Paramètres ventilatoires <ul style="list-style-type: none"> <li>1 PAC, Sonde d'intubation : en continu</li> </ul> </li> <li>★ Aérosols</li> <li>★ Protocole de titration</li> <li>★ Protocole Meynaar</li> <li>★ PSL</li> <li>★ Epuration Extra-Rénale</li> <li>★ E.C.M.O.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Perfusion <ul style="list-style-type: none"> <li>3 Ringer (labo b braun), sol pr perf, poche 500 ml : 500 ml en continu; Commentaire associé : "Garde veine"</li> </ul> </li> <li>★ Remplissage vasculaire</li> <li>★ Antibio./Anti-infectieux</li> <li>★ IV</li> <li>★ Per-OS <ul style="list-style-type: none"> <li>5 Esomeprazole : 40 mg 1x/j</li> </ul> </li> <li>★ Alimentation entérale <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Fresubin 2kcal hp nutriment : à 42 ml/h en continu</li> </ul> </li> <li>★ Pose dispositif <ul style="list-style-type: none"> <li>8 KT Artériel (KTA) : heure non précisée</li> <li>1 Sonde d'Intubation (S.I) : heure non précisée</li> <li>1 Sonde naso gastrique (SNG) : à 14h00</li> <li>1 Sonde Vésicale (SAD) : heure non précisée</li> <li>1 Voie Veineuse Centrale (VVC) : heure non précisée</li> <li>1 Voie Veineuse Périphérique (VVP) : heure non précisée</li> </ul> </li> <li>★ Retrait dispositif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Isolement / Précautions</li> <li>★ Autres modes d'administration</li> <li>★ Biologie / Bactériologie. <ul style="list-style-type: none"> <li>4 REA - Bilan sanguin principal : 1x/j</li> </ul> </li> <li>★ Kinésithérapie</li> <li>★ Imagerie <ul style="list-style-type: none"> <li>6 ECG 12 Dérivations : 1x/j</li> <li>1 Radiographie de thorax : 1x/j</li> </ul> </li> <li>★ Bon Imagerie</li> <li>★ Consignes Particulières</li> <li>★ Surveillance</li> <li>★ Autres Surveillances <ul style="list-style-type: none"> <li>9 Rapport PAO2 FIO2 : 1x/j</li> <li>1 Surveillance simple : ttes les 3h</li> </ul> </li> </ul>
---	---	---

Dans la capture ci-dessus, toutes les lignes de prescriptions sont en cours. Elles sont visibles sur le plan de soins. (Zone encadrée en rouge).



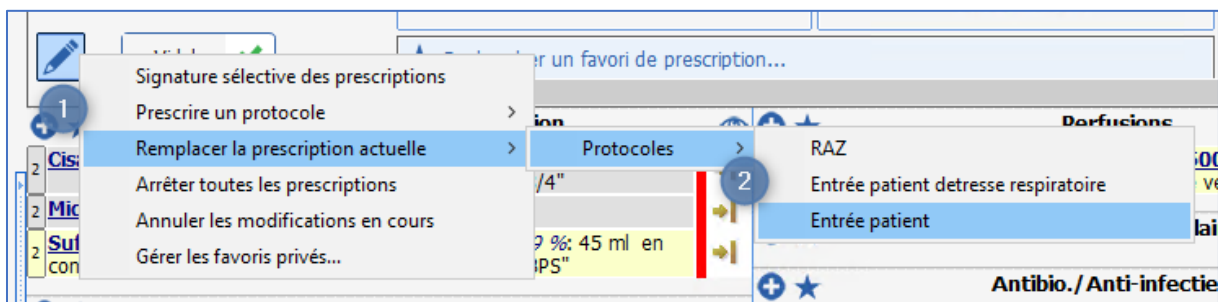
2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)






DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Nous allons maintenant **Remplacer la prescription actuelle** : Admission patient non intubé.



Zone (1) : Bouton « crayon »  : zone permettant d'accéder au menu de prescription des protocoles.

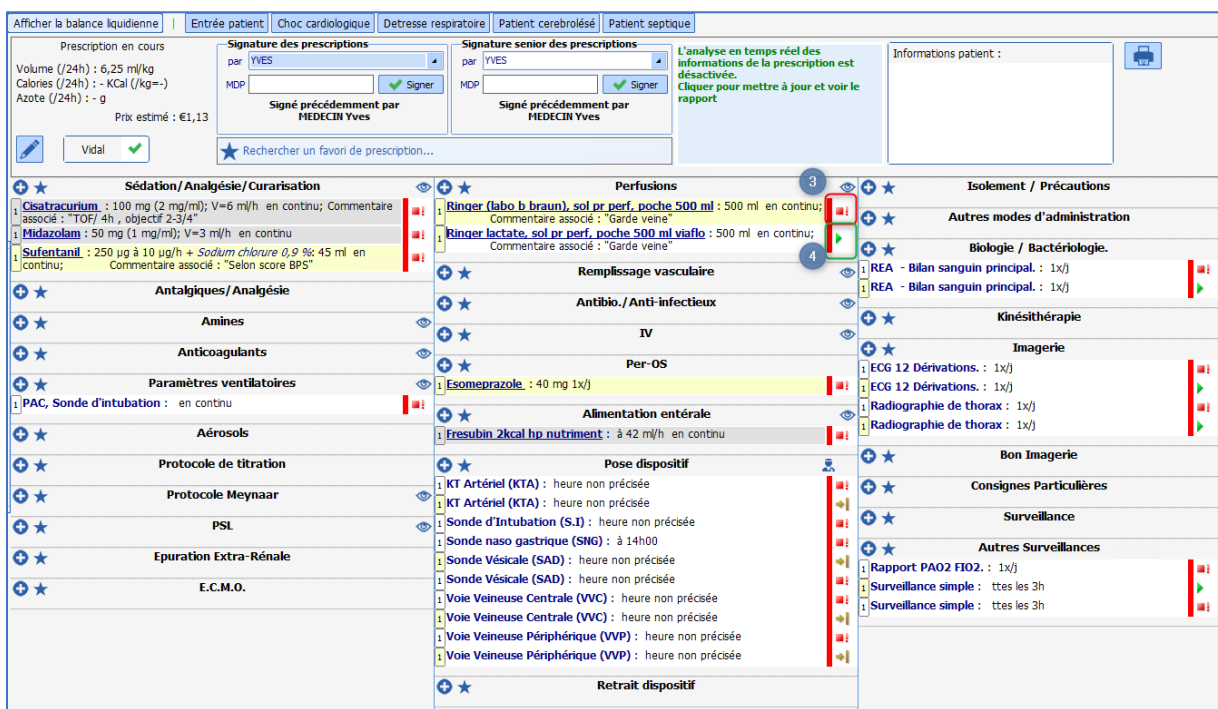- Cliquer sur le bouton crayon.
- Sélectionner l'option **Remplacer la prescription actuelle**, le menu des prescriptions (Remplace) se déploie. (2)
- Cliquer sur le protocole que l'on souhaite prescrire (**Entrée patient**).
- Une fenêtre répertoriant l'ensemble des champs de prescription du protocole s'affiche.
- Il est possible de modifier ou vérifier les favoris en cliquant sur le bouton .
- Il est possible de ne pas charger une ligne du protocole en cliquant sur le bouton .
- Les prescriptions en cours sont toutes marquées comme étant arrêtées. (3)
- Le protocole choisi se charge automatiquement. Il vient donc **Remplacer** les prescriptions précédentes. (4)



Le bouton crayon donne accès à d'autres options :

- **Arrêter toutes les prescriptions** : Permet d'arrêter immédiatement toutes les prescriptions en cours.



2023-03-17

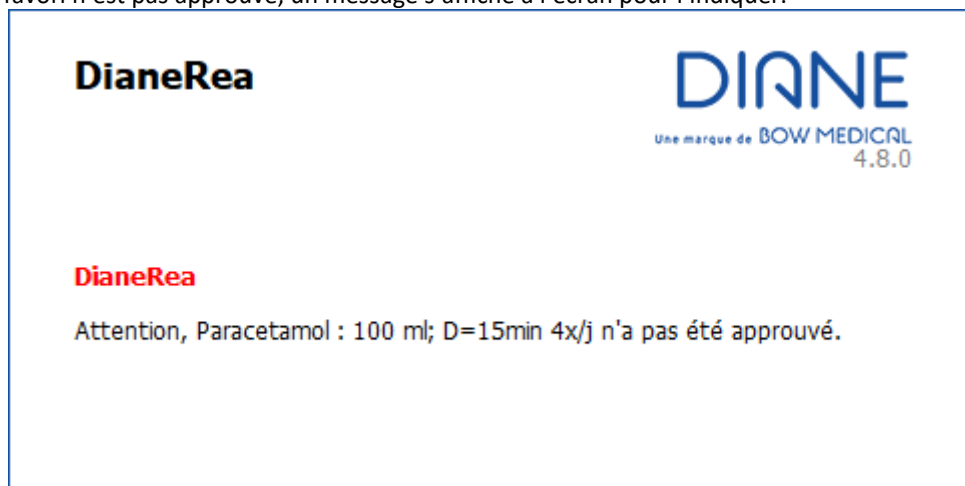
BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- **Annuler les modifications en cours** : permet d'effacer toutes les modifications faites depuis la dernière signature de prescription.


Les protocoles de prescriptions sont soumis à l'approbation d'un référent possédant le droit de les approuver. Lorsqu'un favori n'est pas approuvé, un message s'affiche à l'écran pour l'indiquer.



## 5.7.12 Validation et signature de la prescription

### 5.7.12.1 Signature de l'ensemble des prescriptions

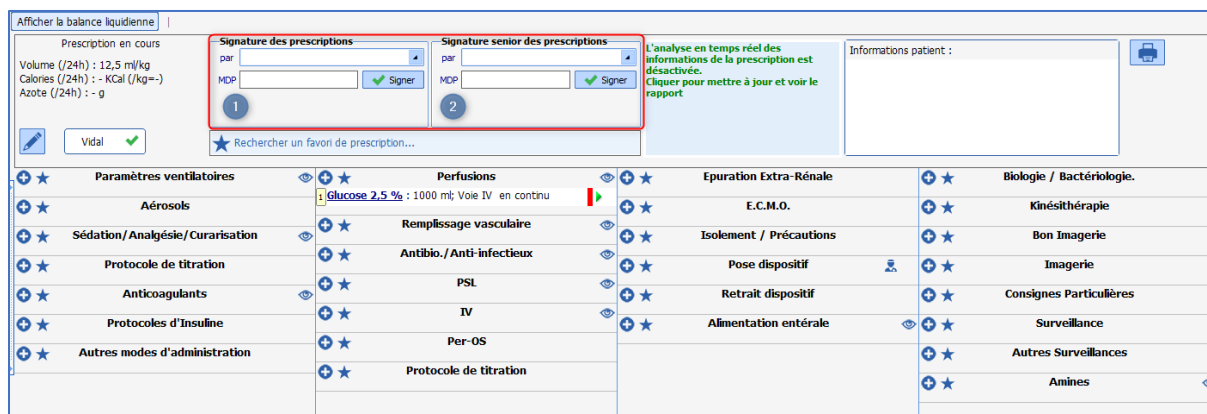Pour qu'une prescription soit effective et visible sur le plan de soins, il est **IMPERATIF** de la **SIGNER**. Pour cela, il faut renseigner le login et le mot de passe dans le composant de **Signature des prescriptions** qui est situé dans le bandeau de l'onglet de prescription.



Deux composants sont disponibles afin de permettre la signature (1) et la contre-signature du médecin sénior (2) dans le cadre de prescriptions réalisées par un interne en médecine.

Différentes options de droits sont possibles en ce qui concerne la prescription et la signature.

- **La prescription sans signature autorisée** : l'interne peut prescrire, toutefois le plan de soins ne sera généré qu'à la signature du sénior.
- **La prescription et signature autorisée** : l'interne peut prescrire et signer les prescriptions. Dans ce cas le plan de soins est généré. La contre-signature du sénior viendra elle attestée du contrôle des prescriptions.
- **La prescription et signature autorisée partiellement** : dans ce cas de figure, certaines lignes de prescriptions ne seront visibles sur le plan de soins qu'à la signature du médecin



2023-03-17

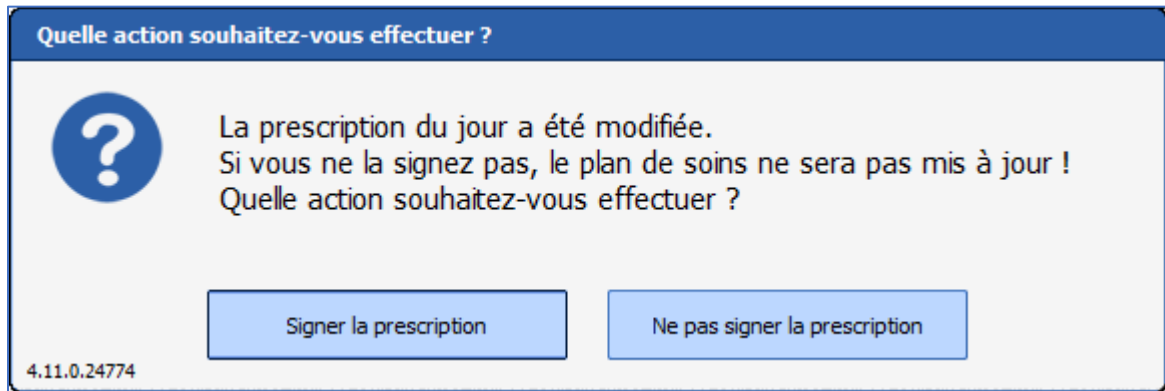
BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

sénior.  
Par exemple : les stupéfiants...

**REMARQUE** : Lorsqu'une prescription est en cours, elle s'enregistre automatiquement, mais ne génère le plan de soins qu'à la signature.  
Afin d'éviter l'oubli de signature, un message d'alerte peut être paramétré pour être affiché au changement d'onglet.




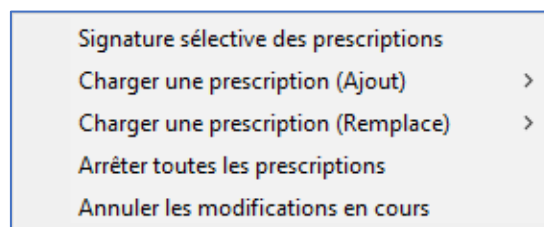
#### Raccourcis pour la signature des prescriptions

Touche du clavier	Action
F2	permet d'accéder directement au champ <b>par</b> (login) du composant <b>Signature des prescriptions</b>
F3	permet d'accéder directement au champs <b>MDP</b> (mot de passe) du composant <b>Signature des prescriptions</b> .
F4	permet d'accéder directement au champ <b>par</b> (login) du composant <b>Signature senior des prescriptions</b>
F5	permet d'accéder directement au champs <b>MDP</b> (mot de passe) du composant <b>Signature senior des prescriptions</b> .


#### 5.7.12.2 Signature sélective des prescriptions

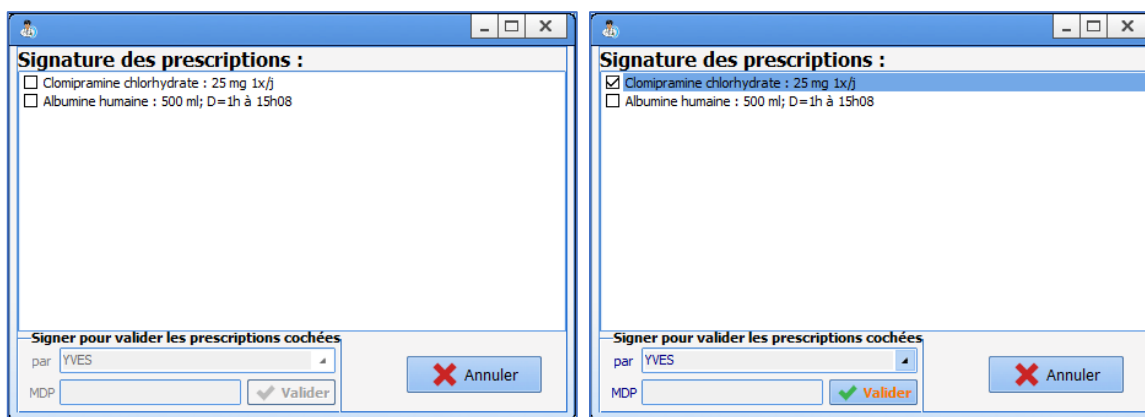**DIANE** permet de valider les prescriptions ligne par ligne. L'analyse de la prescription se fait alors en prenant en compte les médicaments dont la prescription a déjà été signée ainsi que ceux en cours de signature : les médicaments sélectionnés pour la signature sélective ne sont pas pris en compte.


Pour accéder à la signature sélective des prescriptions, il faut sur le bouton  de l'onglet **Prescription**. Le menu suivant s'affiche :



Le clic sur **Signature sélective des prescriptions** affiche le menu ci-dessous. Il suffit alors de cocher les cases des prescriptions à signer : dès qu'au moins une case est cochée, le médecin peut signer en utilisant son identifiant et son mot de passe.



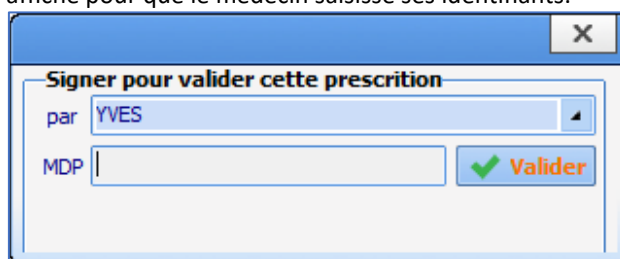Il est aussi possible de valider les prescriptions ligne par ligne par un clic droit sur une prescription non-signée : une fenêtre de signature s'affiche pour que le médecin saisisse ses identifiants.



### 5.7.13 Le rapport de la banque des médicaments

L'application **DIANE** est connectée via une API à la Banque des médicaments (Base Claude Bernard ou Vidal selon le choix de votre centre) et ce afin de sécuriser les prescriptions.

La bonne communication avec la base des médicaments est signifiée par la présence de l'icône sur la

prescription ( ou ) et sur l'onglet **Navigation** ( ou ).

Si toutefois cette icône était rouge , cela indique un problème de connexion il est alors nécessaire de contacter le service informatique de votre centre afin de rétablir la connexion.

Lors de la signature de la prescription, un rapport complet émis par la banque des médicaments s'ouvre, celui-ci nécessite une validation de votre part acquittant la prise de connaissance du rapport.



**Validation de la prescription**

Commentaire | ✓ Valider la prescription ✗ Annuler

Rapport de la base de médicament

**ANALYSE**

Synthèse

VIDAL focus (0)

✗ Posologie (1)

✗ Allergies (1)

✗ Contre-indications / Précautions d'emploi (2)

Interactions médicamenteuses (0)

Grossesse / Allaitement / Procréation (0)

● Effets indésirables (37)

Incompatibilités physico-chimiques (0)

⚠ Mises en garde (13)

Surveillances (0)

**VIDAL** **Analyse d'ordonnance**  
date : 30/07/2020  
Base VIDAL version 2020.5.3, données du 14/05/2020

**Alertes de sévérité maximale**

**Posologies erronées**

✗ CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes

**Allergies détectées**

✗ CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes

**Médicaments contre-indiqués**

✗ CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes

**Rappel du dossier**

Sexe masculin	0 ans (01/07/2020)	180 cm	80 kg
1 Allergie		0 Pathologies	

VIDAL Sécurisation 2020.5.3 [Instructions d'utilisation](#)

Lorsque vous avez cliqué sur le bouton **Valider la prescription**, la signature est alors effective et le plan de soins se génère.

Un résumé est toujours visible dans l'onglet **Prescription**, celui-ci vous indique la présence d'Allergies, d'Interactions...

Au survol de cet encart il vous est possible d'en visualiser le détail.

**Rapport de la base de médicament :**

**1 Alerte(s) allergie**

1 A 1 Alerte(s) allergie:

1 F -CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes:  
\* Hypersensibilité au paracétamol, risque d'allergie avec le médicament CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes

1 Alerte(s) posologie:

-CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes:  
\* Information sur la posologie pour CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes

1 Pathologie(s):

-CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes:  
\* Contre-indication absolue entre CODOLIPRANE 400 mg/20 mg cp séc adultes et Enfant de moins de 15 ans

Informations patient :

À tout moment, vous pouvez ré afficher le rapport complet en double cliquant sur la zone **Rapport de la base des médicaments**.

**Légende du code couleur :**

- Rouge :** Alertes allergies.
- Orange :** Alertes de posologies, interactions, contre-indications et pathologies.
- Noir :** Redondances et précautions d'emploi.



Un code couleur est également appliqué sur la ligne de prescription elle-même afin de retrouver facilement le ou les produits ayant déclenchés l'alerte.

La couleur de fond de la ligne prescription reflète le rapport d'analyse médicamenteuse :

- Indicateur interaction **orange** : produit en interaction avec un autre, interaction déconseillée.
- Indicateur interaction **rouge** : produit en interaction avec un autre, interaction contre-indiquée.
- **Mauve** : produit redondant avec un autre.
- **Jaune** : produit validé.
- **Gris** : produit non connu dans la banque de médicaments
- **Blanc** : ligne non prise en compte dans le rapport de la banque de médicaments.

## 5.7.14 Historique des prescriptions

L'application vous permet facilement de consulter les différents historiques liés à la prescription du patient.

### 1. Historique des prescriptions :

Permet de voir les différentes modifications apportées aux prescriptions durant le séjour.

- Cliquez sur les chevrons situés à gauche de l'onglet de prescription. **1**
- Ouverture de l'historique des signatures par ordre chronologique. **2**
- Sélectionnez la date heure que vous souhaitez consulter
- La prescription s'affiche alors telle qu'elle était.

Légende des icônes :



Prescription en cours (non signée)



Prescription passée (signée)



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



### 5.7.14.1 Historique médicamenteux du patient



Voir l'historique médicamenteux du patient 3 :

Permet de consulter les différentes prescriptions médicamenteuses faites au patient lors de ses différents séjours.

**Historique médicamenteux du patient**

Dossier du 25/04/2019 (Dossier en cours) Dossier du 15/04/2019

- Prescription de réanimation du 03/05/2019 15:19:44 validée par MEDECIN Paul
- Prescription de réanimation du 29/04/2019 11:09:01 validée par MEDECIN Paul
- Prescription de réanimation du 26/04/2019 11:54:15 validée par MEDECIN Paul
- Prescription de réanimation du 26/04/2019 11:26:42 validée par MEDECIN Paul
- Prescription de réanimation du 26/04/2019 11:25:35 validée par MEDECIN Paul
- Prescription de réanimation du 26/04/2019 10:21:24 validée par MEDECIN Paul
- Ordonnance du 25/04/2019 18:46:03 validée par MEDECIN Paul
- Prescription de réanimation du 25/04/2019 17:02:08 validée par MEDECIN Paul

- Amoxicilline + acide clavulanique : 1000 mg à 200 mg/h; Voie IV 1x/j
- Kétoprofène : 100 mg + Sodium chlorure 0,9%: 50 ml; D=1h; Voie IV 2x/j
- Morphine chlorhydrate : 100 ml; Voie SC 1x/j
- Paracétamol : 1000 mg; Voie orale 3x/j
- Smofkabiven e perf ptb986ml : 986 ml; Voie intraveineuse (en perfusion) 1x/j

Champ cible  
IV

+ Re-prescrire la/les ligne(s) cochée(s)



Voir l'historique des données complémentaires associées aux prescriptions du dossier

Permet d'éditer les informations complémentaires qui ont été saisies lors de la prescription d'antibiotiques et de produits appartenant à la liste en SUS (liste LES).

## 5.8 Validation pharmaceutique

L'application permet la gestion de la validation pharmaceutique. Afin de faciliter celle-ci l'ensemble du dossier est accessible en lecture.



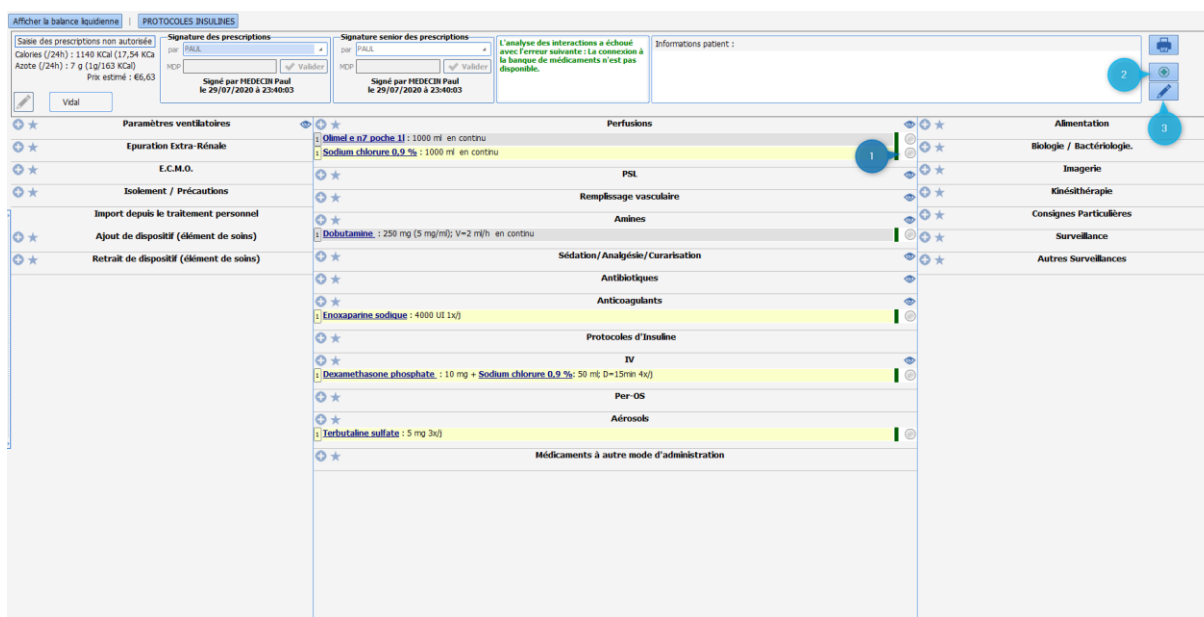
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28





Plusieurs options sont disponibles pour réaliser la validation pharmaceutique.

### 5.8.1 Validation ligne à ligne

- Cliquez sur la bille grise située en bout de ligne. La bille passe en vert. La ligne de prescription est alors validée.
- Si vous cliquez une seconde fois la fenêtre de prescription s'ouvre, il est alors possible d'ajouter un commentaire dans la ligne prévue à cet effet.
- La saisie d'un commentaire entraîne immédiatement le passage de la bille en orange.
- Si vous souhaitez accentuer ce commentaire, il vous est possible de passer la bille en rouge, en cliquant à nouveau dessus.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Veillez saisir l'état de validation et/ou le commentaire pharmacien**

Remplissage vasculaire

**VIALEBEX \* +** Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

VIALEBEX 4% SOL INJ 500ML  
20 g/500 ml/flacon  
 base

Posologie par administration : 500 ml /kg /m2 Max. Posologie par jour : 499,86 ml

Débit : 500 ml/h

La durée de planification est inférieure à une journée.  
La posologie par jour affichée peut-être inférieure à celle d'une journée complète.

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 499,86 ml**

Durée d'administration : 1h

Voie : Autre  A la demande  Apporté par le patient

Planification : à 16h47 le 04/04

Remarques du pharmacien : Attention fonction rénale un peu juste

Contenant et dilution : 40 mg/ml

Contenant volumique : Poche à perfuser 500 (5)


Débit de la perfusion : 166,67 goutte/min  Débit non précisé

1 2

✓ Valider ✗ Annuler


### 5.8.2 Validation globale de la prescription

Permet de valider en une fois l'ensemble des lignes de prescriptions.

- Cliquez sur l'icône  situé à droite de l'onglet 2.
- Si toutefois un commentaire est présent sur l'une des lignes celui-ci ne sera pas modifié et la ligne marquée d'une bille orange restera inchangée.

### 5.8.3 Commentaire global sur la prescription

Permet d'émettre un commentaire sur l'ensemble de la prescription.

- Cliquez sur l'icône  3
- Ajoutez votre commentaire.

## 5.9 MD Onglet Plan de soins

L'onglet **Plan de soins** permet de renseigner les différentes actions menées auprès du patient tout au long de la journée de réanimation. Il permet également l'affichage des différents paramètres physiologiques et biologiques recueillis.

Dans l'exemple ci-dessous, l'onglet **Plan de soins** est découpé en différents sous-onglets spécifiques :

**Paramètres** : qui reprend essentiellement les données physiologiques (manuelles ou remontées depuis les appareils connectés) du patient ainsi que le relevé des sorties de la balance liquidienne.

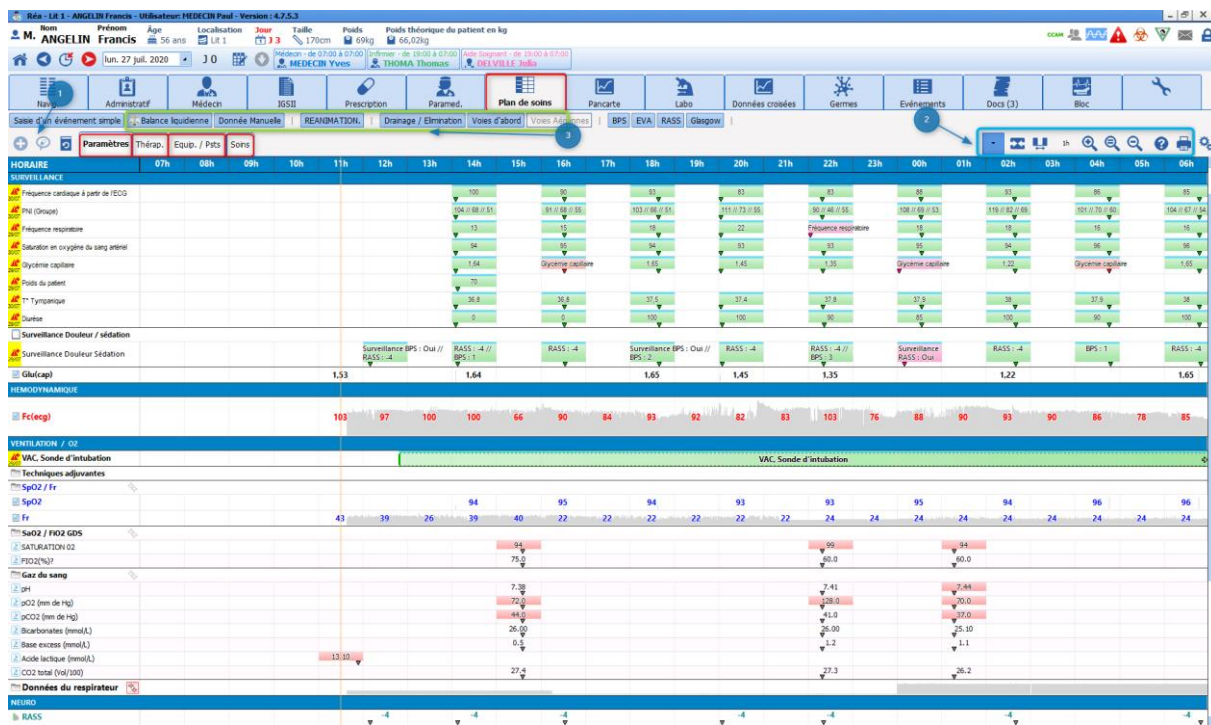
**Thérapeutique** : qui est alimenté par la prescription, celui-ci permet de renseigner les administrations.



**Equipements / pansements** : qui fait écho au Schéma corporel, qui permet de tracer les poses / surveillances retrait et soins effectués sur les différentes insertions du patient.














**Soins** : qui permet de tracer les différentes actions du rôle propre et des soins d'hygiène et de confort prodigués au patient.



















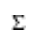





Le **Plan de soins** est par défaut paramétré pour un affichage sur 24 heures correspondant à votre journée de Réanimation, chaque colonne représente 1 heure.












## 5.9.1 Iconographie du plan de soins

### 5.9.1.1 Icônes visibles dans le plan de soin

-  Ligne issue d'une prescription
-  Ligne de planification infirmière
-  Ligne d'éléments de saisie. Permet de saisir des événements ponctuels
-  Ensemble de paramètres physiologiques
-  Paramètre physiologique
-  Ensemble de données de laboratoire
-  Donnée de laboratoire
-  Saisie avancée
-  Score
-  Champ de saisie avancée ou de score
-  Médicament
-  Schéma corporel
-  Événement

-  Chronomètre
-  Alarme
-  Prescription modifiée récemment. Au clic sur l'icône, l'heure de la signature de la prescription apparaît. L'icône apparaît pendant une durée paramétrable, par défaut 1 heure.
-  Administration urgente
-  Prescription arrêtée
-  Prescription arrêtée en urgence
-  Prescription mise en pause
-  Prescription mise en pause urgente
-  Dernière occurrence
-  Présence d'un commentaire
-  Élément lié à un appareil
-  Mise au propre du contenant volumique
-  Débit incohérent par rapport à la prescription
-  Administration d'un bolus
-  Continuité de la prescription précédente
-  Indique que les lignes d'affichage sont fusionnées. En cliquant sur cette icône vous pouvez déployer l'affichage sur plusieurs lignes.
-  Fusionner les lignes d'une catégorie en une seule
-  Affiche la somme des différentes saisies de la colonne
-  Fichier joint au résultat de laboratoire
-  Élément non disponible dans la configuration du poste
-  Groupe de ligne replié (double-clic pour déplier)
-  Affichage par voie
-  Affichage des saisies non configurées (par type)
-  Affichage des signatures

### 5.9.1.2 Icônes visibles dans la barre de menu (au-dessus du plan de soins)

-  : Affiche un menu permettant de saisir un évènement ponctuel à l'heure indiquée
-  : Effectuer une prescription orale
-  : Affiche une fenêtre de l'historique du dossier permettant la recherche par type de donnée et filtrage par date
-  : Permet de régler le niveau de « zoom » de l'affichage
-  : Changer la disposition des onglets
-  : Centre l'affichage sur le repère, dans ce mode c'est le plan de soins qui défile, le repère reste fixe
-  : Affiche une plage horaire personnalisée
-  : Affiche l'aide contextuelle du plan de soins. Ainsi que la légende du code couleur appliqué aux occurrences.
-  : Permet de réaliser une impression d'écran



: Ouvrir la fenêtre de configuration du plan de soins

### 5.9.1.3 Couleur des éléments du plan de prescription et du plan de soin

**Plan de prescriptions :**

Urgent Normal Au survol

**Éléments prescrits du plan de soin :**

A faire Action à réaliser Réalisé Non réalisé En Pause Non documenté

Durée de dépassement

Conditionnel / optionnel

**Éléments saisis présentant une durée :**

Terminé En cours

Ces différentes couleurs sont paramétrables.

**Au survol** correspond à la couleur de l'occurrence de plan de prescription correspondant à l'occurrence de plan de soin survolée par la souris.

Occurrence non-survolée : - Occurrence survolée :

Si l'occurrence du plan de prescription n'est pas visible à l'affichage (cas d'une administration en avance ou en retard par rapport à l'heure prescrite), l'heure prescrite est indiquée en début ou en fin de ligne.

Nicardipine chlorhydrate (8,893 mg) || Prescrit le 09/02 13:05

**A faire** signifie que l'administration n'est pas encore démarrée/réalisée et qu'elle n'est pas en retard (l'heure de début/réalisation prescrite n'est pas encore passée).

**Action à réaliser** signifie que qu'il y a une action en retard qui doit être réalisée : soit l'heure de début/réalisation prescrite est dépassée, soit l'heure d'arrêt prescrite est dépassée.

**Durée de dépassement** signifie l'heure d'arrêt prescrite a été dépassée.

Prescriptions		Etat	Début	Fin
100 mg >> 50 ml // 15min	Tramadol chlorhydrate : 100 mg + Diluant non précisé: 50 ml; D=15min 3x/fj	Prescrit : *208 ml/h	10h17	10h32
	Tramadol chlorhydrate : 100 mg + Diluant non précisé: 50 ml; D=15min 3x/fj	Démarré *207,96 ml/h	10h13	10h51

**Conditionnel / optionnel** indique que la prescription est conditionnelle : l'administration du produit est soumise au respect de la condition renseignée lors de la prescription par le médecin.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Prescriptions		Etat	Début	Fin	Prescripteur	Dernière modif. par	Voie	Condition	Infos Suppl.
Libellé	Adrenaline : 50 mg (1 mg/ml); V=libre en continu	Prescrit : *0 ml/h	10h27	le 11/02/2022 à 10h27	SYSTEM Diane		IV	Objectif PAM > 70 mmHg	
	Adrenaline : 50 mg (1 mg/ml); V=libre en continu	Démarré *5 ml/h	10h25	20h25	SYSTEM Diane	ANESTH Anna	IV	Objectif PAM > 70 mmHg	5 ml/h - 1 mg/ml (Seringue 50) DM : 5 mg/h [ 0,288 mg ]

## 5.9.2 Utilisation du plan de soins

Toutes les données du patient sont visualisables dans cet onglet. Vous pouvez également effectuer de nouvelles saisies sur les données que vous souhaitez.

Le **Plan de soins** permet de renseigner toutes actions réalisées auprès du patient. Différents modes de saisie sont disponibles.

Ceux-ci sont liés à la nature de la ligne : **Issue de la prescription**, d'une **Planification infirmière** ou d'un **Élément de saisie**.

### 5.9.2.1 Les éléments de saisie

Cette catégorie représente la quasi-totalité des lignes de l'onglet **Plan de soins**.

Ces lignes sont représentées par l'icône suivante dans l'entête



#### 5.9.2.1.1 Ajout d'un élément depuis le Diagrid.

Exemple : Réalisation d'un soin de bouche à 9 heures et 13 heures.

- Double clic sur l'entête de la ligne correspondante.
- Ouverture de la fenêtre de menu proposant les éléments disponibles.
- Sélectionnez l'item **Soin de bouche : bâtonnets**.
- Celui-ci vient se positionner automatiquement dans la colonne de l'heure courante. Ici 9h.
- Lorsque vous souhaitez renseigner un élément identique à une heure différente, il suffit de double



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

cliquer dans la colonne correspondante ici 13h, le soin se renseigne automatiquement.

HORAIRE	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h
☛ Modifications prescriptions							MEDECIN Pau	MEDECIN PCL	MEDECIN Paul			
☐ Poids							▼	▼	▼			
☐ Diurèse												
☐ UF des 24h												
<b>HYGIENE</b>												
☐ Isolement												
☐ Hygiène												
☐ Soins de bouche							Soins de bouche : batonnets			Soins de bouche : batonnets		
☐ Soins des yeux												

HORAIRE	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h
☛ Modifications prescriptions							MEDECIN Pau	MEDECIN PCL	MEDECIN Paul	
☐ Poids							▼	▼	▼	
☐ Diurèse										
☐ UF des 24h										
<b>HYGIENE</b>										
☐ Isolement										
☐ Hygiène										
☐ Soins de bouche							☑		☑	
☐ Soins des yeux										
☐ Soins de nez										
☐ Prévention d'escarres										
☐ Changement de matériel										
☐ Entretien environnement										
☐ Préparation pré-op										
<b>ELIMINATION</b>										

#### 5.9.2.1.2 Ajout d'un élément depuis un bouton de « saisie rapide » (2) ou depuis le bouton Effectuer une saisie (1)

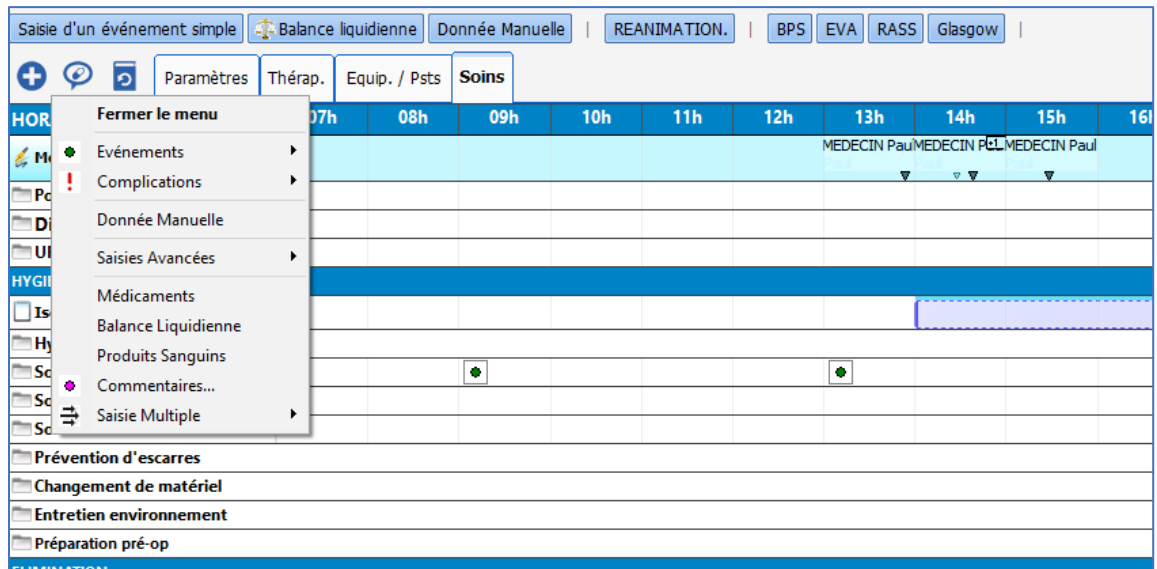
L'application permet l'utilisation de boutons de saisies rapides, ceux-ci permettent d'effectuer une saisie à l'heure courante sans être nécessairement positionné sur l'onglet affichant la donnée.

- Cliquez sur le bouton **REANIMATION** (2)
- Ouverture du menu
- Sélectionnez l'élément souhaité.
- L'action est alors renseignée dans le **Plan de soins** à l'heure courante.

De même, il vous est possible d'utiliser le bouton **Effectuer une saisie** situé en haut à gauche du **Plan de soins**. (1)

Celui-ci vous permet d'accéder à l'ensemble des éléments disponibles dans votre unité.






### 5.9.2.1.3 Ajouter un commentaire modifier ou supprimer un élément de saisie.

Il est possible de modifier une saisie réalisée. Pour cela :

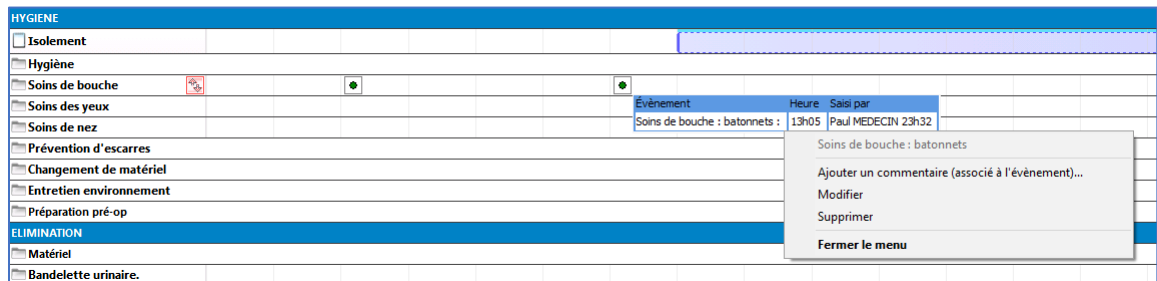
- Cliquez sur la saisie à modifier ou à supprimer.
- Ouverture de la fenêtre de détail.
- Clic droit sur la fenêtre de détail.
- Ouverture de la fenêtre d'option.
- Sélectionnez l'option choisie.



**Remarque :** Si vous souhaitez modifier l'heure de saisie, il suffit de glisser l'occurrence et de la déposer à l'heure voulue.

Pour supprimer l'occurrence vous pouvez également la glisser jusqu'à la zone d'entête.

## 5.9.2.2 Validation des Poses et Retrait des dispositifs

Lorsqu'une pose ou un retrait de Dispositif est prescrit, cette information apparaît dans le Plan de soins comme toutes les autres prescriptions. Celle-ci est précédé de l'icône .



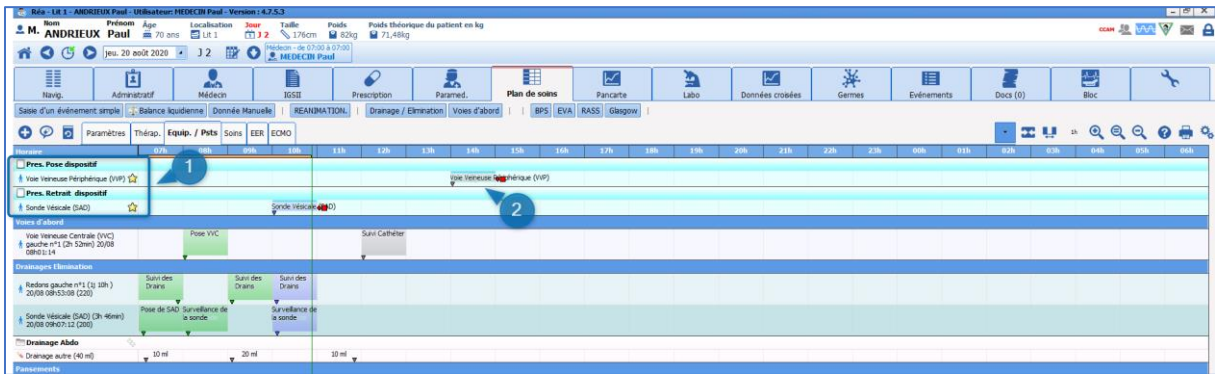
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28






- (1) Lignes de prescriptions spécifiques pour la Pose et le Retrait des dispositifs en lien avec les champs de prescription dédiés.
- (2) Occurrence permettant la validation de l'action réalisée.

La validation de ces prescriptions se fait uniquement depuis le Plan de soins.

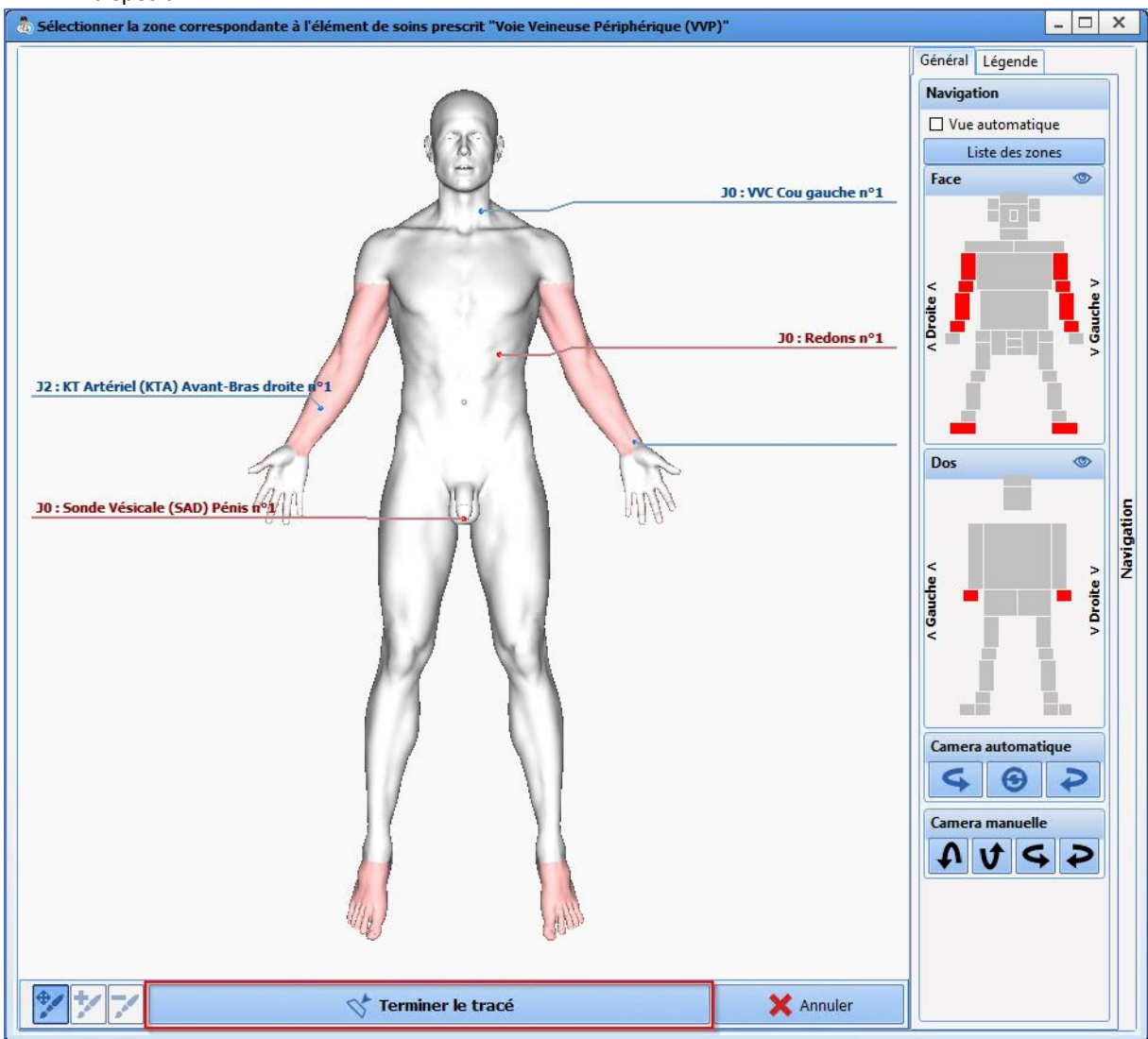- Cliquer sur l'occurrence afin de la marquer comme réalisée en cliquant sur la 1<sup>re</sup> icône.
- Au clic, ouverture de la fenêtre contextuelle du schéma permettant de venir pointer la localisation du dispositif.




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

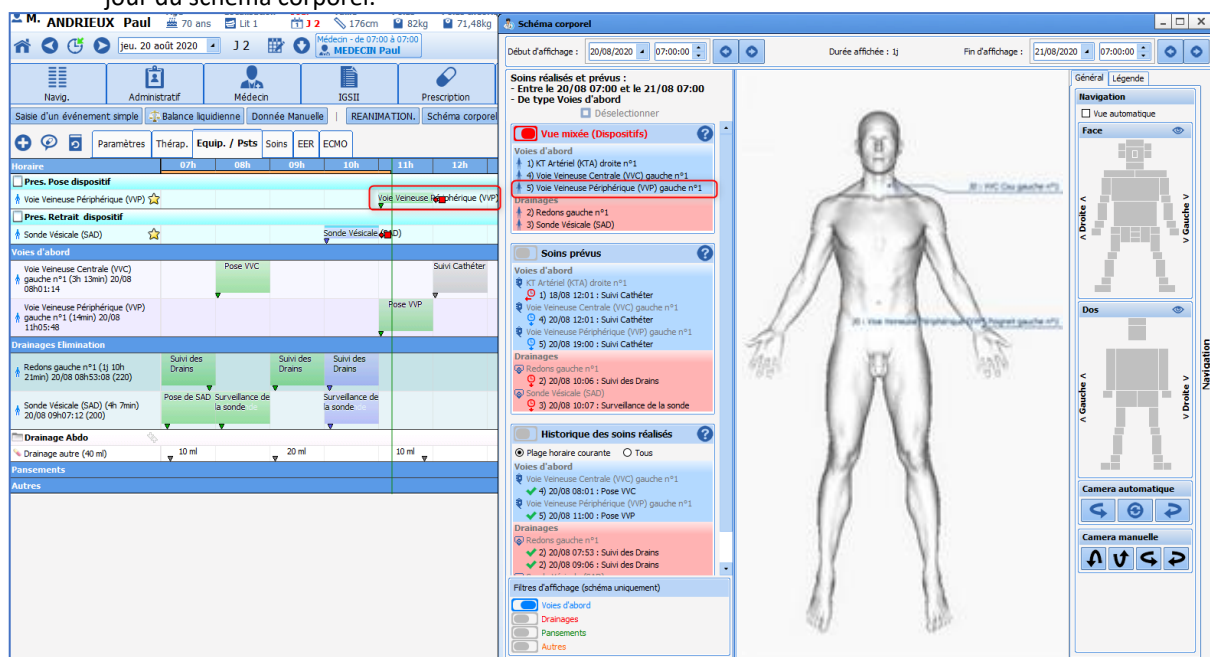
- Pointer la localisation
- Valider en cliquant sur le bouton « **Terminer le tracé** ».
- Puis saisir les informations relatives au dispositif comme vu dans le chapitre « Schéma corporel ».  
Si le médecin a pré-rempli des informations lors de sa prescription, celles-ci seront disponibles mais non-modifiables. Les autres informations quant à elles restent saisissables.
- La validation du formulaire initial renseigne l'occurrence comme réalisée, permettant ainsi la mise à jour du schéma corporel.



Lors de validation d'un Retrait de dispositif, la procédure est identique.

### 5.9.2.3 Éléments issus d'une Prescription

La prescription génère automatiquement les lignes de **Plan de soins** à chaque signature.

Ces lignes sont spécifiques et sont reconnaissables par la présence de l'icône  dans l'entête des intitulés. Celles-ci reprennent les différentes catégories présentes dans l'onglet de **Prescriptions**.

### 5.9.2.4 Indicateurs de modification ou de présence de nouvelles prescriptions.

A chaque nouvelle signature, un message s'affiche sur l'ensemble des onglets afin d'alerter sur les actions à mener.

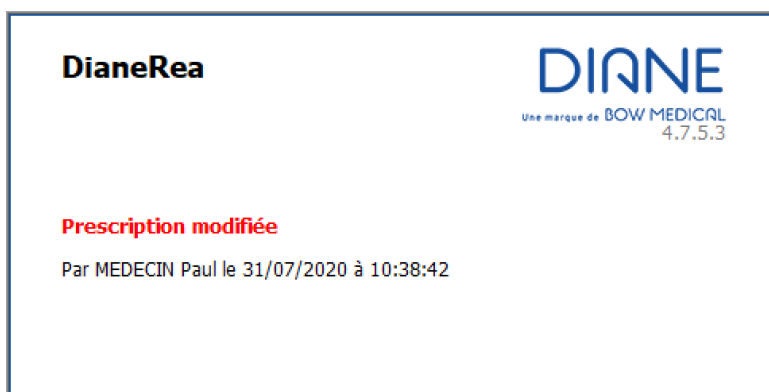


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



D'autres indicateurs permettent d'identifier la présence de nouvelles prescriptions, ou la modification d'une ligne en particulier.

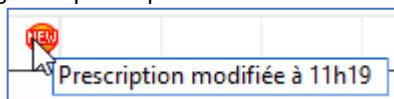- L'icône placée au côté de l'intitulé de la ligne de prescription **Dobutamine**



Le clic sur l'icône affiche l'heure de la modification

- La ligne de **Modification Prescription** située tout en haut du **Plan de soins** indique le signataire de la modification. Au clic, elle permet d'afficher un résumé des modifications qui ont été faites.

Modification Prescription		MEDECIN Paul	
Infection	Pneumonie	31/07/2020 10h28 MEDECIN Paul	
Isolément	Goutte		
SOLUTES ET TRAITEMENT			
Perfusions			
Smofkabiven e perf otb986ml	1000 ml // 8h		
Sodium chlorure 0,9 % (194.792 ml)	1000 ml // Continu // 1000 ml	Sodium chlorure 0,9 % : 1000 ml en continu	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bio_Bilan simple : 1x/j</li> <li>A jeun jusqu'à la reprise du transit : en continu</li> <li>Droloptan 1,25mg/2,5ml amp iv 10 : 1,25 mg à 14h00 Si nausées</li> <li>Calcium chlorure+ potassium chlorure+ sodium chlorure+ sodium lactate : 500 ml; D=15min à 10h33 en urgence</li> <li>Sodium chlorure 0,9 % : 1000 ml en continu (planification du plan de soins conservée)</li> </ul>

#### 5.9.2.4.1 Légende des icônes de validation des occurrences prescrites.

Sur le plan de soins, les occurrences sont représentées en fonction de leur durée d'administration.

Au-dessus de chacune d'elles, une fine ligne bleu clair représente le Plan de Prescription.

Celui-ci est la prescription telle qu'elle a été saisie par le médecin. Il a pour but de conserver la prescription de départ.

Lorsque l'administration est réalisée avec un décalage (en avance, en retard, ou replanifiée dans le temps), les deux lignes sont dissociées.


Les options de validation seront différentes en fonction du type des prescriptions concernées.


Voici les différentes icônes proposées ainsi, que leur signification.

	Libellé	Etat	Début	Prescripteur	Voie
	100 ml de Paracetamol 4x/j		14h44	MEDECIN Paul	IV
	100 ml de Paracetamol 4x/j	A Faire	14h44	MEDECIN Paul	IV


: indiquer l'occurrence comme réalisée

: indiquer l'occurrence comme réalisée avec saisie d'un commentaire (et modification de l'heure de réalisation)

 : indiquer l'occurrence comme non réalisé


 : affiche le détail de la prescription (ouvre l'éditeur)


500 ml // Continu							
Libellé	Etat	Début	Fin	Prescripteur	Voie		
 500 ml de Glucose 10 % en continu		14h56	le 26/10/2019 à 14h56	MEDECIN Paul	intraveineuse (en perfusion)		
  500 ml de Glucose 10 % en continu	A Faire	14h56	le 26/10/2019 à 14h56	MEDECIN Paul	intraveineuse (en perfusion)		





 : saisir la dilution


 : démarrer la perfusion


 : démarrer la perfusion avec saisie d'un commentaire (et modification de l'heure de réalisation).



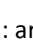



 : permet de changer le débit et/ou de mettre en pause

 : permet de démarrer à un autre débit à une date/heure précisée

Libellé	Etat	Début	Prescripteur	Dernière modif. par	Voie	Infos Suppl.
 100 ml de Paracetamol 4x/j		14h44	MEDECIN Paul		IV	
   100 ml de Paracetamol 4x/j	Réalisé	14h44	MEDECIN Paul	MEDECIN Paul	IV	100 ml - 10 mg/ml (Poche à perfuser 100) [ 1000 mg ]


 : « annule » l'occurrence (remet sur l'état **A faire**)

 : saisie d'un commentaire de réalisation de l'occurrence

Libellé	Etat	Début	Fin	Prescripteur	Dernière modif. par	Voie	Infos Suppl.
 50 mg de Midazolam (1 mg/ml) Dans 50 ml; V=3 ml/h en continu		14h31	le 26/10/2019 à 07h11	MEDECIN Paul		IV	
     50 mg de Midazolam (1 mg/ml) Dans 50 ml; V=3 ml/h en continu	Démarré	14h31	le 26/10/2019 à 07h11	MEDECIN Paul	MEDECIN Paul	IV	3 ml/h - 1 mg/ml (Seringue 50) DM : 3 mg/h [ 2,2 mg ]


 : arrêter la perfusion







 : arrêter la perfusion avec saisie d'un commentaire


 : mettre en pause l'administration

 : mettre en pause l'administration à une date/heure précisée

 : faire une mise au propre du contenant volumique

 : faire une mise au propre du contenant volumique à une date/heure précisée

Libellé	Etat	Début	Prescripteur	Voie	Condition
 100 ml de Paracetamol 4x/j		20h44	MEDECIN Paul	IV	Si EVA > 4
     100 ml de Paracetamol 4x/j	A Faire	20h44	MEDECIN Paul	IV	Si EVA > 4

 : indiquer l'occurrence comme non réalisée car la condition n'est pas remplie.



## 5.9.2.5 Exemples de validation des éléments prescrits

Petit rappel :

- (1) Icône indiquant que la ligne est issue d'une prescription. L'intitulé reprend celui du champ de prescription correspondant.
- (2) Icône indiquant une prescription pharmaceutique. L'intitulé est celui du produit prescrit.

### 5.9.2.5.1 Médicament prescrit en X par jour avec une condition

Exemple : Prescription de Paracétamol per-os 3 fois par jour si EVA > 4.

Libellé	Etat	Début	Prescripteur	Voie	Condition
Paracetamol : 1000 mg 3x/j	Réaliser	15h11	MEDECIN Paul	orale	Si EVA > 3
Paracetamol : 1000 mg 3x/j	A Faire	15h11	MEDECIN Paul	orale	Si EVA > 3

Réaliser  
Appuyer sur la touche Ctrl en cliquant pour réaliser l'action à l'heure prévue

- Clic sur la 1<sup>re</sup> icône : Réaliser : l'occurrence sera marquée comme validée à l'heure actuelle, représentée par la barre temporelle verte
- Clic sur la seconde icône : Réaliser (en modifiant date/heure ou en saisissant des informations complémentaires.)

Permet de renseigner l'heure de réalisation effective : Exemple : l'administration faite à 15h (heure prévue), mais non validée dans Diane, en cliquant sur le bouton Heure prévue (4), l'occurrence sera alors validée à 15h. (Possibilité également d'utiliser le curseur (1) ou l'horloge (2) pour indiquer l'heure précise.)

Ou d'indiquer des informations complémentaires exemple la dose effective administrée (3), ici 1 gélule de 500 mg et non 2.

Clic sur la 3<sup>e</sup> icône : la condition n'est pas remplie : Permet d'indiquer que l'administration n'est pas réalisée car la condition ici EVA > 3 n'est pas remplie.



2023-03-17

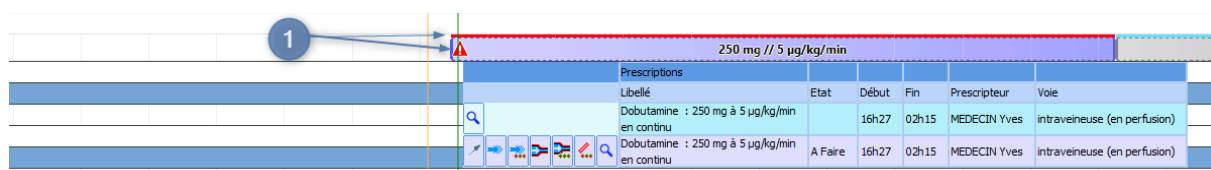
BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 5.9.2.5.2 Thérapeutique avec une durée d'administration.

Exemple : Dobutamine 5µg/kg/min en continu sans dilution précisée prescrit en urgence. (1) (indicateur du caractère urgent).



Prescriptions		Etat	Début	Fin	Prescripteur	Voie
Libellé	Dobutamine : 250 mg à 5 µg/kg/min en continu		16h27	02h15	MEDECIN Yves	intraveineuse (en perfusion)
	Dobutamine : 250 mg à 5 µg/kg/min en continu	A Faire	16h27	02h15	MEDECIN Yves	intraveineuse (en perfusion)

Afin que les occurrences du plan de soins soient représentatives de la vitesse d'administration et du rythme de changement de seringues, il est nécessaire avant de débiter l'administration de venir renseigner le contenant utilisé et donc la dilution appliquée.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- Clic sur la 1<sup>re</sup> icône : **Précision de la dilution** : Permet d'indiquer le contenant volumique utilisé. Ce qui calcule automatiquement la dilution du produit.

- Puis clic sur la seconde icône : **Démarrer** : afin de démarrer l'administration.

Quand cela est nécessaire, il est également possible de **Modifier la concentration du produit** (exemple : nécessité de doubler la concentration de Noradrénaline, afin de pouvoir diminuer la vitesse d'administration). Pour cela,

- Clic sur la 1<sup>re</sup> icône : **Précision de la dilution**
- Et indiquer la concentration du produit dans la zone (1).  
Il est possible de venir indiquer non pas la concentration, mais la quantité de produit principal présent dans la seringue.

Pour cela, cliquer sur les doubles flèches zone (2).



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



**Veillez préciser/confirmer la dilution de la prescription médecin**

Amines

**NORADRENALINE \*** Diluant +

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Diluant non précisé

Pas de dosage  
 diluant

Posologie par administration : 24 ml /kg /m2 Max. [ ]  
Posologie par jour : 24 ml

Débit : 1 ml/h

**Seule la quantité de produit diluant peut-être modifiée**

Prescription non sécurisable par la banque de médicaments

Durée d'administration : 24h

Voie : IV

A la demande  
 Apporté par le patient

contenant et dilution

Contenant volumique : Seringue 50 (50ml)

Débit de la perfusion : 2 ml/h

Détails

Produit principal : NORADRENALINE 2MG/ML REN AMF

Conc. : 1 mg / ml

Dilution : 50 %

Volume total : 48 ml

Par jour : 1 Seringue 50 (50ml)  
Volume total : 48 ml

Planification

En continu

Jours... [ ]

Condition : Objectif PAM > 65 mmHg

Administration urgente

Début à 09h32

Préciser une durée

En planification continue la date/heure réelle de la première occurrence n'est pas connue tant que le plan de soins n'est pas généré. Il est donc possible que les occurrences réelles du plan de soins soient décalées dans le temps par rapport à l'affichage en cours.

05-04-2022 06-04-2022 06-04-2022 07-04-2022 07-04-2022 08-04-2022

12:00 18:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 06:00

Remarques du pharmacien [ ]

✓ Valider ✗ Annuler

Sur les administrations longues (en continu), il est possible de :

- **Modifier le débit.** Cliquer sur la 3<sup>e</sup> icône : Changer le débit d'administration maintenant : Indiquer le débit souhaité Zone (3) puis valider.

Libellé	Etat	Début	Fin	Prescripteur	Dernière modif. par	Voie	Infos Suppl.
Dobutamine : 250 mg à 5 µg/kg/min en continu		11h50	21h59	MEDECIN Paul		intraveineuse (en perfusion)	
Dobutamine : 250 mg à 5 µg/kg/min en continu	Démarré	11h50	21h59	MEDECIN Paul	MEDECIN Paul	intraveineuse (en perfusion)	1,97 ml/h - 12,5 mg/ml DM : 24,6 mg/h [ 47 mg ]

Changer le débit de l'administration maintenant

1000 mg // (Si EVA > 3)

- **Arrêter une administration en cours :** Cliquer sur Terminer. (1<sup>re</sup> icône)
- **Mettre en pause une administration :** Cliquer sur Mettre en pause l'administration. (5<sup>e</sup> icône)



2023-03-17

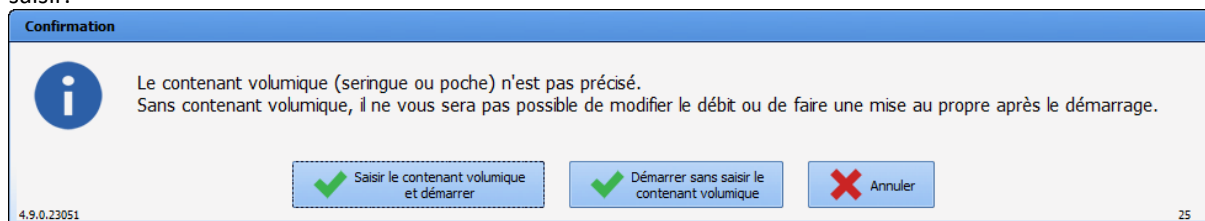
BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



Si le contenant volumique n'a pas été précisé à la prescription, un message de confirmation demande à l'utilisateur s'il souhaite saisir le contenant volumique avant de démarrer ou s'il souhaite démarrer sans le saisir.




Si le contenant volumique n'est pas précisé, il est impossible de modifier le débit ou de faire une mise au propre une fois le démarrage effectué dans **DIANE**. Le message s'affiche pendant 30 secondes : si aucun choix n'est fait durant ce laps de temps, l'occurrence n'est pas démarrée.

#### 5.9.2.5.3 Validation et planification d'une prescription en « heure non définie ».

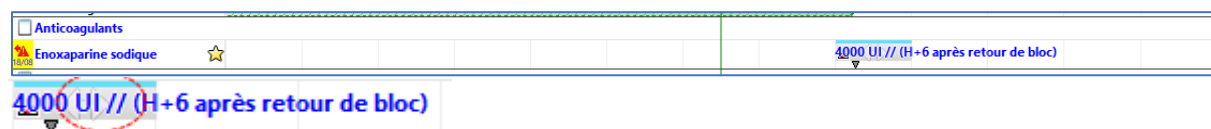
Lorsqu'une prescription est faite en **Heure non-définie** il est possible depuis le **Plan de soins** de planifier l'administration à l'heure désirée.

La validation de la première occurrence entraînera la planification de toutes les autres occurrences en tenant compte de l'heure d'administration et de l'écart requis entre chaque administration.

*Exemple : Enoxaparine 4000UI\_ 1 fois / jour \_ H6 après le retour de bloc.*



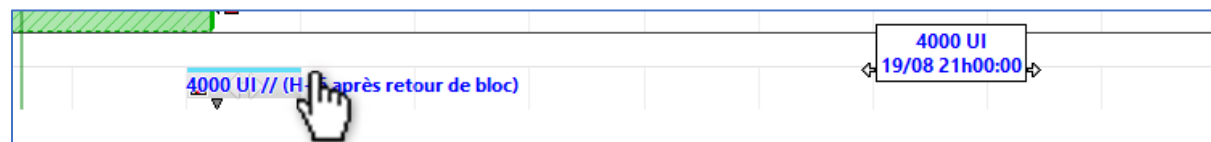Sur ce type d'occurrence, une double flèche blanche indique qu'il est possible de déplacer la cellule afin de la planifier. Pour cela, faites un clic sur l'occurrence, et faites un glisser-déposer à l'heure souhaitée. Ici, 21h00.



#### 5.9.2.5.4 Liaison avec un PSE

Les occurrences de plan de soins peuvent être associées à un appareil de type « pousse-seringue électrique » (PSE). Si un tel appareil est relié à **DIANE**, la fenêtre **Lien avec les appareils** s'affiche au démarrage de l'occurrence.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Lien avec les appareils** [X]

Association d'une occurrence du plan de soins à un appareil.

Sélectionnez l'appareil correspondant à l'occurrence :

[Déployer] [X] L'appareil à associer n'est pas visible

<input checked="" type="checkbox"/>	canal : 0	"BD" Pilote (SIM_PSE1_4)	/ Produit inconnu	9,00 ml/h
<input type="checkbox"/>	canal : 1	Master TCI (SIM_PSE2_4)	/ DIPRIVAN [10,00 mg/ml]	4,00 mg/ml

Nom du produit dans le plan de soins : DOBUTAMINE PAN 250 MG INJ FL

[✓] Associer cet appareil

[X] Annuler l'association

Après le clic sur le bouton **Valider ces associations**, un message de confirmation apparaît pour vérifier les informations du PSE (nom du produit, numéro de série et contenant).

**Confirmation**

Confirmez-vous la liaison sur appareil administrant le produit "Produit inconnu", canal = 1, n°série 015711/16593188X ? (Attention, cela appliquera automatiquement la dilution suivante : contenant 50 ml "BPF")

[?]

[✓] Oui [X] Non

4.8.0.21157

Si la dilution n'a pas été précisée lors de la prescription, une fiche de saisie/confirmation de dilution apparaît et permet de vérifier la dilution définitive.

**Veillez préciser/confirmer la dilution de la prescription médecin**

Amines

**NORADRENALINE \*** Diluant +

Taille : 180 cms  
Poids : 85 Kgs

Diluant non précisé

Pas de dosage  
 diluant

Posologie par administration : 46 ml /kg /m2 Max. [ ]  
Posologie par jour : 184 ml

Débit : 7,67 ml/h

**Seule la quantité de produit diluant peut-être modifiée**

Prescription non sécurisable par la banque de médicaments

Durée d'administration : 6h

Voie : IV

Planification : en continu à partir du 05/04 à 14h00

Remarques du pharmacien [ ]

[✓] Valider [X] Annuler

contenant et dilution

Contenant volumique : Seringue 50 (50ml)

Débit de la perfusion : 8,33 ml/h

Détails

Produit principal : NORADRENALINE 2MG/ML REN AMP  
Conc. : 0,16 mg / ml  
Dilution : 92 %  
Volume total : 50 ml

Par jour : 4 Seringue 50 (50ml)  
Volume total : 200 ml



Lors de la déconnexion d'un PSE, la fenêtre **Gestion PSE et TCI** s'affiche en premier plan pour signaler qu'une déconnexion a été détectée. Si le PSE est lié à une occurrence de plan de soins,

The screenshot shows the 'Gestion PSE et TCI' window with a red border around the main content area. At the top right, there are buttons for 'Déployer' and 'Fermer la fenêtre'. The main area displays information for 'SIM\_PSE1\_4':

- Port COM : 0 n° canal : 0
- Etat de la connexion : ■
- Etat de l'acquisition : ■
- Lié au plan de soin : ■
- Etat de l'appareil : ■

A syringe icon is shown with 'SIM' and 'contenant 50 ml'. The 'Perfusion' section shows: 'Produit : DOBUTAMINE PAN 250 MG', 'Concentration : 5,00 mg/ml', 'Débit actuel : 9,00 ml/h', and 'Mode : PSE Continue'. Below this, a warning message reads: 'Déconnexion détectée : si la perfusion est toujours en cours sur l'appareil alors vérifiez le câble de connexion. Sans communication avec l'appareil, la liaison à l'occurrence sera automatiquement interrompue au bout de 30 secondes.' There is a progress bar and an 'Arrêter' button. At the bottom, there is a status bar for 'Master TCI (SIM\_PSE2\_4) / DIPRIVAN [10,00 mg/ml] ... 2,00 mg/ml' and a button 'Cacher l'appareil sélectionné'.

Une fois la connexion rétablie, il est possible de reprendre le nom de produit, la concentration et le volume de la seringue en cliquant sur le bouton **Reprendre ces informations pour la perfusion en cours**.

The screenshot shows the 'Gestion PSE et TCI' window with a red border around the main content area. At the top right, there are buttons for 'Déployer' and 'Fermer la fenêtre'. The main area displays information for '015711/16593188X':

- Port COM : 3 n° canal : 1
- Etat de la connexion : ■
- Etat de l'acquisition : ■
- Lié au plan de soin : ■
- Etat de l'appareil : ■

A syringe icon is shown with 'Pilote Anesthésie/Anesthésie2 \*CE\*' and 'BPF' and 'contenant 50 ml'. The 'Perfusion' section shows: 'Produit : Produit inconnu', 'Concentration : --', 'Débit actuel : 10,00 ml/h', and 'Mode : PSE Continue'. Below this, there are buttons for 'Modifier' and 'Détails'. A section titled 'Informations de perfusion' contains input fields for 'Nom du produit' (NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PERF), 'Concentration' (0,16 mg/ml), and 'Volume seringue' (50 ml). To the right of this section are two buttons: 'Reprendre ces informations pour la perfusion en cours' (with a green checkmark) and 'Ne pas reprendre ces informations' (with a red X). At the bottom, there is a status bar and buttons for 'Désactiver la capture des données' (with a green checkmark) and 'Cacher le PSE/l'AIVOC sélectionné'.



Il est ensuite possible de rétablir la liaison entre l'occurrence et le PSE en cliquant sur le bouton **Rétablir la liaison et réintégrer le volume**.

Si du volume a été perfusé pendant la déconnexion, il est possible de réintégrer ce volume perfusé dans **DIANE** via la création d'un enregistrement « manuel » avec les date/heure de début/fin d'occurrence, la quantité de produit, le volume perfusé et le débit moyen calculé.

Cet enregistrement se retrouve dans l'onglet **Événements**.

Médicament	Voie	Numéro Serie	Poso	Unité	Concen	Unité C.	H.Occurrence	H.Fin	H.Saisie	Total	Unité T.	Bal. Liq.
NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PERF	PSE Conti...	015711/16593188X	10	ml/h	0,16	mg/ml	02/04 18:10:49	en cours	18:10:49	0,032	mg	+0,2 ml
NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PERF	PSE Conti...	015711/16593188X	10,485	ml/h	0,16	mg/ml	02/04 17:59:22	18:10:48	18:11:22	0,32	mg	+2 ml
NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PERF	PSE Conti...	015711/16593188X	10	ml/h	0,16	mg/ml	02/04 17:58:21	17:59:21	17:58:21	0,016	mg	+0,1 ml



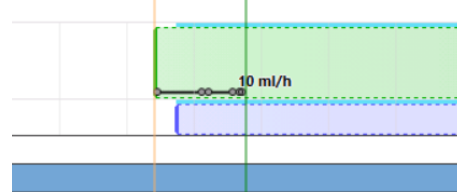
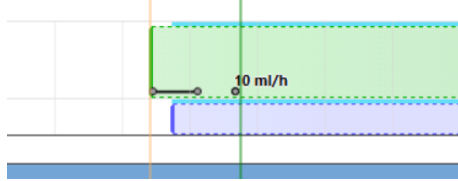
2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Cet enregistrement est également visible sur les occurrences de plan de soins.



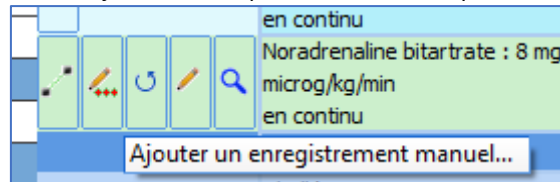Un enregistrement manuel peut être ajouté dans le plan de soins en cliquant sur ce bouton .



La fenêtre **Ajout d'un enregistrement manuel à une occurrence liée à un PSE** s'affiche. La liste des différents enregistrements associés à l'occurrence est visible.

**Ajout d'enregistrement manuel à une occurrence liée à un PSE** X

Nom du produit  Concentration  n° de série PSE

Liste des enregistrements associés à l'occurrence

Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [13,7 ml] (à 16h27 -> à 17h50)
Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [0,7 ml] (à 17h50 -> à 17h55)
Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [0,1 ml] (à 17h58 -> à 17h59)
Perfusion Avec durée (longue), Débit : 10,48 ml/h [2 ml] (à 17h59 -> à 18h10)
Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [3,1 ml] (à 18h10 -> à 18h30)

Volume à renseigner  ml

...ou débit  ml/h

Date/heure de début de l'enregistrement :

Date/heure fin de l'enregistrement

Les enregistrements récupérés par le PSE ne sont pas modifiables, seuls les enregistrement « manuels » tels que la réintégration automatique de volume sont modifiables ou supprimables.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Ajout d'enregistrement manuel à une occurrence liée à un PSE**

Nom du produit: NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PEF Concentration: 0,16 mg/ml n° de série PSE: 015711/16593188X

Liste des enregistrements associés à l'occurrence

- Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [13,7 ml] (à 16h27 -> à 17h50)
- Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [0,7 ml] (à 17h50 -> à 17h55)
- Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [0,1 ml] (à 17h58 -> à 17h59)
- Perfusion Avec durée (longue), Débit : 10,48 ml/h [2 ml] (à 17h59 -> à 18h10)**
- Perfusion PSE AUTO, Débit : 10 ml/h [3,1 ml] (à 18h10 -> à 18h30)

Volume à renseigner: 1,91 ml

...ou débit: 10 ml/h

Date/heure de début de l'enregistrement: 02/04/2021 17:59:22

Date/heure fin de l'enregistrement: 02/04/2021 18:10:48

Si les date/heure de début/fin de l'enregistrement chevauchent d'autres enregistrement, un message d'avertissement s'affiche.

Date/heure de début de l'enregistrement: 02/04/2021 16:59:22

Date/heure fin de l'enregistrement: 02/04/2021 18:10:48

**L'enregistrement débutant à 16h27 et terminant à 17h50 (posologie = 10 ml/h) est en conflit.**

Lors de la reconnexion du PSE, si la perfusion en cours sur l'appareil semble correspondre à une occurrence démarrée (l'utilisateur tente, par exemple, d'associer le PSE à une occurrence de plan de soins différente de l'occurrence initiale), **DIANE Réa** propose de rétablir le lien avec cette occurrence initiale grâce au bouton **Même perfusion**. S'il s'agit effectivement d'une nouvelle perfusion (ligne de plan de soins différente), le bouton **Nouvelle perfusion** permet de démarrer une nouvelle occurrence.

La perfusion en cours sur l'appareil semble correspondre à l'occurrence démarrée à 19h32 (produit "NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PERF").

4.8.0.21160

Si la prescription a été modifiée (changement de débit à appliquer immédiatement), **DIANE Réa** propose cette fois de rétablir le lien grâce au bouton **Occurrence prévue**, ce qui démarre une nouvelle occurrence avec le nouveau débit prescrit à la suite de l'occurrence initiale. S'il s'agit d'une nouvelle perfusion (ligne de plan de soins différente), le bouton **Nouvelle occurrence** permet de démarrer une nouvelle occurrence.

La perfusion en cours sur l'appareil semble correspondre à l'occurrence démarrée à 22h01 (produit "NORADRENALINE TARTRATE 8mg-4ml AMP 4ml IV-PERF").

4.8.0.21161




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




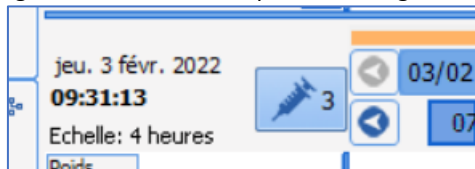
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



**Note :** La fenêtre **Gestion PSE et TCI** est accessible à partir de l'onglet **Plan de soins** avec le bouton .



La fenêtre **Gestion PSE et TCI** est également accessible à partir de l'onglet **Configuration** avec le bouton .








### 5.9.2.5.5 Cas particulier des paramètres ventilatoires

La fenêtre de validation des paramètres ventilatoires vous permet de renseigner les paramètres machines du patient sans pour autant modifier la prescription.

Cliquez sur l'icône **Réaliser** : cette action permet d'ouvrir la fenêtre de validation. Celle-ci reprend les informations de la prescription, afin de vous donner les indications.


Il vous est possible depuis cette fenêtre de renseigner directement la surveillance patiente et d'indiquer les données machine du patient.

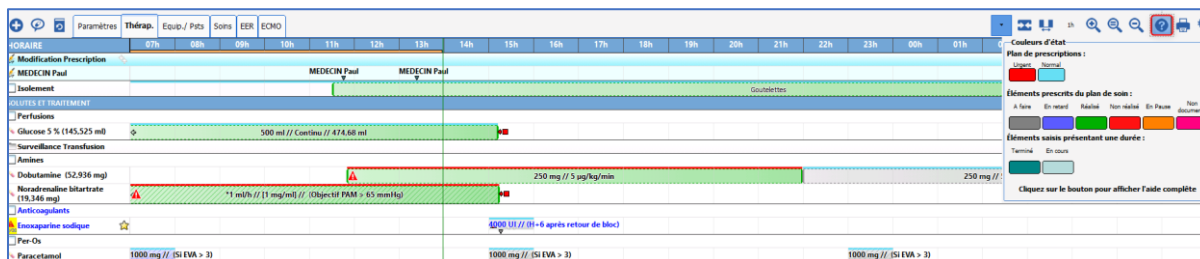
Le clic sur la dernière icône, permet d'afficher le contenu saisi lors de la validation.

VAC. Sonde d'intubation						
	Libellé	Etat	Début	Fin	Prescripteur	Dernière modif. par
	Mode : VAC Interface : Sonde d'intubation VT : 428,88mL ; PEP : 5cmH2O SaO2 de 96% à 98% en continu		le 18/08/2020 à 15h15	15h15	MEDECIN Paul	
    	Mode : VAC Interface : Sonde d'intubation FR : 15bpm ; VT : 428,88mL ; FIO2 : 40% PEP : 5cmH2O SaO2 de 96% à 98%	Réalisé	13h16	le 20/08/2020 à 13h16	MEDECIN Paul	MEDECIN Paul

Afficher les données saisies lors de la validation de l'occurrence

Lors de la validation des occurrences du Plan de soins, la couleur de fond de celles-ci se modifie indiquant ainsi son nouvel état.

Le code couleur est accessible au survol à la souris sur le  situé en haut à droite du Plan de soin.



### 5.9.2.5.6 Cas particulier des produits administrés en culots ou en poches

Si le culot est prescrit (via l'onglet **Prescription**), le volume associé est également demandé lors de la réalisation de l'occurrence dans le plan de soins.

**Saisie du volume**

Veuillez préciser le volume correspondant à 1 culot.

280 ml

N° de lot :  
67064893511

Veuillez renseigner le volume avant de valider.

Ok Annuler

Le champ **Commentaire** permet la saisie de la référence du culot.

Le commentaire apparaît dans le champ **Infos Suppl.** au clic sur l'occurrence.

Prescriptions						
	Libellé	Etat	Début	Prescripteur	Dernière modif. par	Infos Suppl.
	Concentré globulaire : 1 culot(s) 1x/j		16h15	SYSTEM Diane		
	Concentré globulaire : 1 culot(s) 1x/j	Réalisé	16h10	SYSTEM Diane	SYSTEM Diane	1 culot(s) - 180 ml/culot(s) [ 180 ml ] (Numéro 67064893511)

### 5.9.2.5.7 Saisie du volume pour les produits administrés en poche

En cas d'arrêt de l'administration de produits en poche avant l'heure prévue, une fenêtre indique le volume administré et le volume prescrit et donne la possibilité de corriger le volume administré.

**Confirmation**

Le volume de produit calculé (605ml) est différent du volume prescrit (1000ml)  
Souhaitez-vous corriger le volume administré ?

Oui Non

4.9.0.23276

Si l'utilisateur choisit **Oui**, il a la possibilité de saisir le volume réellement administré.



Dans le cas contraire, l'occurrence est renseignée avec le volume théorique administré.

**Volume prescrit** : Rappel du volume (en ml) prescrit (non modifiable).

**Volume calculé** : Rappel du volume (en ml) actuel administré (non modifiable).

**Autre volume** : Permet à l'utilisateur de saisir le volume de produit réellement administré. Le champ de saisie n'est pas visible si la case à cocher **Autre volume** n'est pas cochée.


Si l'utilisateur utilise le bouton **Terminer (en modifiant la date/heure ou en saisissant des informations complémentaires)**, l'heure d'occurrence de la fin de perfusion se saisit dans le champ **Perfusion terminée à**.

Après validation, le commentaire peut être saisi dans la fenêtre suivante :


**Attention** : Si depuis le plan de soins, il y a deux perfusions de type « poche » qui se suivent, lorsque l'utilisateur souhaite démarrer une perfusion « à faire » alors que la précédente est en cours, cela termine automatiquement la précédente, dans ce cas il n'est pas possible de renseigner le volume car le bouton d'action « fin de perfusion » n'a pas été explicitement utilisé. Pour renseigner le volume, il faut explicitement utiliser le bouton d'action de fin de perfusion.

#### 5.9.2.5.8 Cas des saisies multiples

Le renseignement depuis le plan de soin des saisies multiples prescrites est possible une fois la prescription signée.

Heure	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h																				
<b>Prescriptions</b>																												
<input type="radio"/> REA_Surveillance standard 																												
<input checked="" type="radio"/> REA_Surveillance standard <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Prescriptions</th> </tr> <tr> <th>Libellé</th> <th>Etat</th> <th>Début</th> <th colspan="2">Prescripteur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REA_Surveillance standard : 2x/j</td> <td></td> <td>08h00</td> <td colspan="2">SYSTEM Diane</td> </tr> <tr> <td>REA_Surveillance standard : 2x/j</td> <td>A Faire</td> <td>08h00</td> <td colspan="2">SYSTEM Diane</td> </tr> </tbody> </table>									Prescriptions					Libellé	Etat	Début	Prescripteur		REA_Surveillance standard : 2x/j		08h00	SYSTEM Diane		REA_Surveillance standard : 2x/j	A Faire	08h00	SYSTEM Diane	
Prescriptions																												
Libellé	Etat	Début	Prescripteur																									
REA_Surveillance standard : 2x/j		08h00	SYSTEM Diane																									
REA_Surveillance standard : 2x/j	A Faire	08h00	SYSTEM Diane																									

Le clic sur l'occurrence propose à l'utilisateur de :

- Réaliser l'occurrence  : Ouvre la saisie multiple prescrite

**REA\_Surveillance standard**

<input checked="" type="checkbox"/> Scores	EVA	Unique	<input type="text" value="17:03:00"/>	Heure actuelle
<input checked="" type="checkbox"/> Donnée Manuelle	T-Tymp	Unique	<input type="text" value="17:03:00"/>	Heure actuelle
<input type="checkbox"/> Vigilance	Indéterminé	Unique	<input type="text" value="17:03:00"/>	Heure actuelle
<input type="checkbox"/> Pupille droite	Indéterminé	Unique	<input type="text" value="17:03:00"/>	Heure actuelle
<input type="checkbox"/> Pupille gauche	Indéterminé	Unique	<input type="text" value="17:03:00"/>	Heure actuelle




Conserver cette saisie multiple

**17:03:37**  
**17:03:00** Touche Ctrl : décale l'horaire de l'item choisi et les suivants.

Le renseignement d'une saisie multiple prescrite n'offre pas la possibilité à l'utilisateur de saisir par la suite une autre saisie multiple parmi la liste des saisies multiples enchainées configurées (bouton **Ok et poursuivre après** non visible). Il n'est pas possible depuis la fenêtre d'annuler l'ajout de la saisie multiple dans le but de saisir une autre saisie multiple parmi les saisies multiples alternatives configurées (bouton **Annuler et choisir à la place** non visible).

Le fonctionnement de la case à cocher **Conserver cette saisie multiple** diffère de celui des saisies multiples ajoutées directement via une pancarte ou un bouton. Si la case est cochée, le clic sur le bouton **OK** ajoute les éléments cochés dans le dossier et conserve les valeurs des différents éléments pour l'occurrence suivante. La réalisation de l'occurrence suivante chargera automatiquement les valeurs de la saisie multiple enregistrée. L'heure de référence pour la saisie multiple est initialisée avec l'heure de réalisation de l'occurrence.

Il est possible à la suite de la réalisation de l'occurrence de saisir un commentaire via l'icône .

- Réaliser en modifiant la date et heure de réalisation  : Même fonctionnement que la réalisation de l'occurrence mais avec la possibilité de changer l'heure de saisie de la saisie multiple.
- Ne pas réaliser  : permet de renseigner l'occurrence comme non réalisée à la suite de la saisie d'un commentaire liée à l'occurrence.
- Visualiser la prescription  : Permet d'ouvrir la fenêtre de prescription en lecture seule.

### 5.9.3 Planification Infirmière

L'application permet également de faire des saisies de type « Planification », celles-ci permettent de



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)

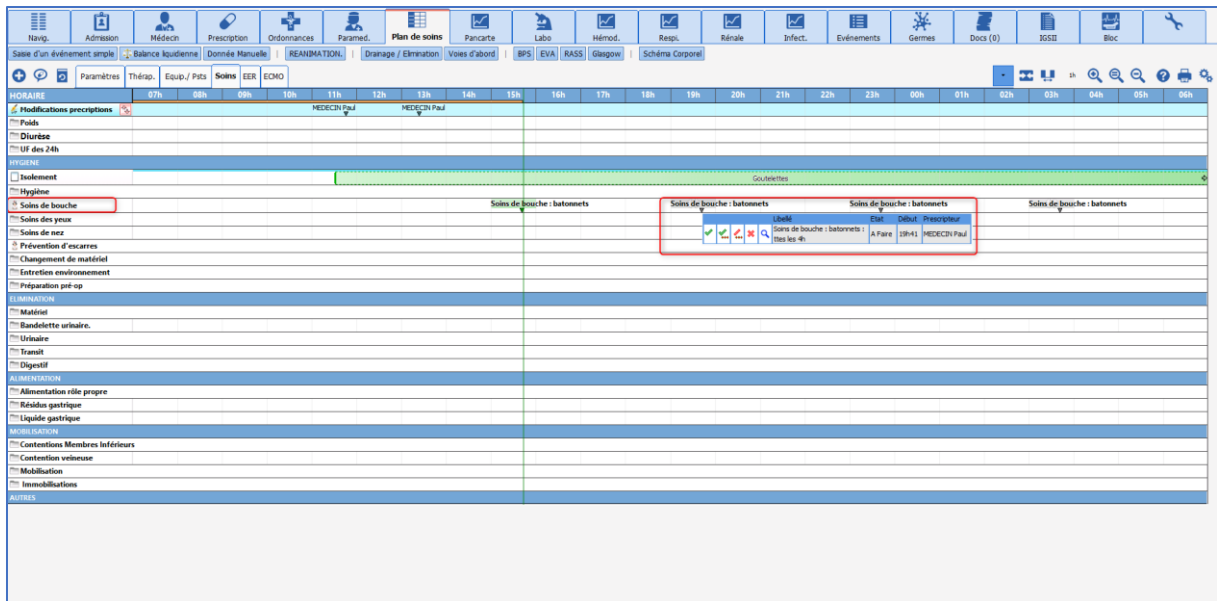


DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28


programmer des soins en série.

Ces éléments sont représentés sur le plan de soins par cette icône  dans la colonne des entêtes.

La validation de ces éléments suit la même procédure que la validation des éléments issus d'une prescription.



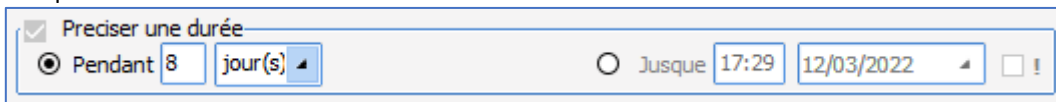Par défaut, la durée de planification est fixée à 8 jours. Cette durée est modifiable, mais il n'est pas possible de ne pas indiquer de durée.




## 5.9.4 Bilan des Entrées / Sorties

L'application permet de calculer facilement le Bilan des entrées / sorties.

Les « **Entrées** » sont calculées à partir des administrations renseignées depuis le plan de soins. (Y compris les quantités renseignées lors des dilutions de produits d'où l'importance de bien les indiquer avant de démarrer les administrations.)

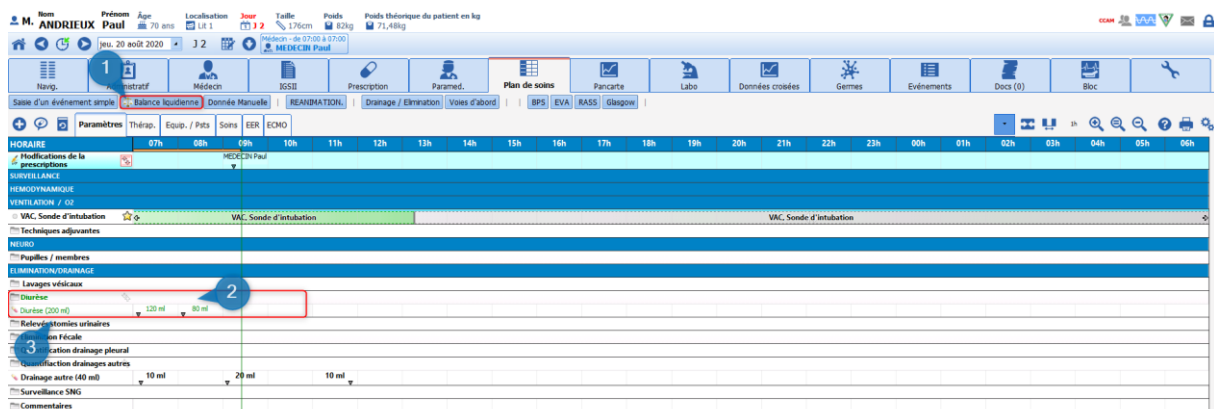Les « **Sorties** » sont issues des quantifications renseignées depuis le plan de soins.



- (1) Bouton permettant d'afficher la Balance Liquidienne.
- (2) Affichage de la quantité saisie lors du relevé.
- (3) Cumul journalier pour la même sortie, ce cumul est calculé sur la journée d'affichage, ici de 7h00 à



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 5.9.4.1 Quantifications des « Sorties » en l'absence d'utilisation du schéma corporel

Pour quantifier les « Sorties » deux modes de saisie sont disponibles :

- **Par niveau**, lors du relevé, il faut simplement indiquer le total présent dans le réceptacle.
  - \_ Double-cliquer sur l'item désiré dans la colonne des entêtes, ici **Drain autre**.
  - \_ Sélectionner le choix **Saisie par niveau** situé tout en haut de la liste.
  - \_ Ouverture de la fenêtre contextuelle permettant de renseigner la quantité.
  - \_ Puis valider.

Le cumul journalier est alors affiché dans la colonne d'entête, et la différence entre la précédente saisie et celle effectuée vient se renseigner dans la cellule de la plage horaire actuelle.

**N.B. :** tant qu'aucune remise à zéro n'est effectuée, le **Précédent niveau (3)** affiché dans la fenêtre contextuelle reprend le cumul depuis la 1<sup>re</sup> saisie.

The screenshot displays a software interface for medical data entry. A data grid is visible with columns for time (07h to 14h) and rows for various medical parameters. A context menu is open over the 'Drainage autre (40 ml)' row, showing a list of volume options from 0 ml to 290 ml. A dialog box titled 'Saisie de sortie par niveau (balance liquidienne)' is open, allowing for manual entry of the level. The dialog includes a text input field, a dropdown menu for the volume, a checkbox for 'Remise à zéro après la mesure', a comment field, and a 'Précédent niveau' field showing '220 ml à 09h06'. Three numbered callouts (1, 2, 3) highlight specific elements in the dialog box.

- (1) Zone permettant la saisie de la quantité en ml.
- (2) **Remise à zéro après la mesure** : en cochant cette case cela permet de reprendre la quantification à partir de zéro. (Lorsque l'on change de réceptacle, ou lorsqu'on le vide).
- (3) Indicateur du niveau précédent.

- **Par volume** :

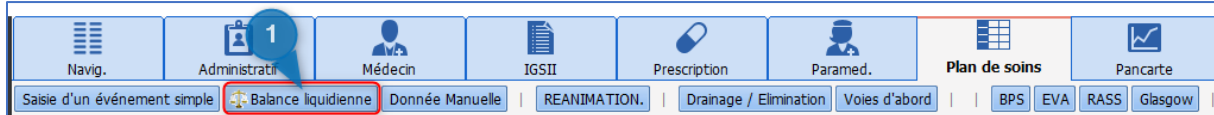
Cette méthode permet de venir renseigner la différence entre le relevé précédent et le relevé actuel.




- \_ Double-cliquer sur l'item désiré dans la colonne des entêtes, ici **Drain autre**.
- \_ Sélectionner la quantité désirée dans le menu affiché.
- \_ La saisie vient se renseigner automatiquement sur la plage horaire actuelle.

### 5.9.4.2 Consultation de la Balance Liquidienne globale :

L'affichage du bilan global des entrées / sorties du patient se fait à l'aide d'un bouton raccourci situé sous les onglets.



#### 5.9.4.2.1 Onglet Balance liquidienne

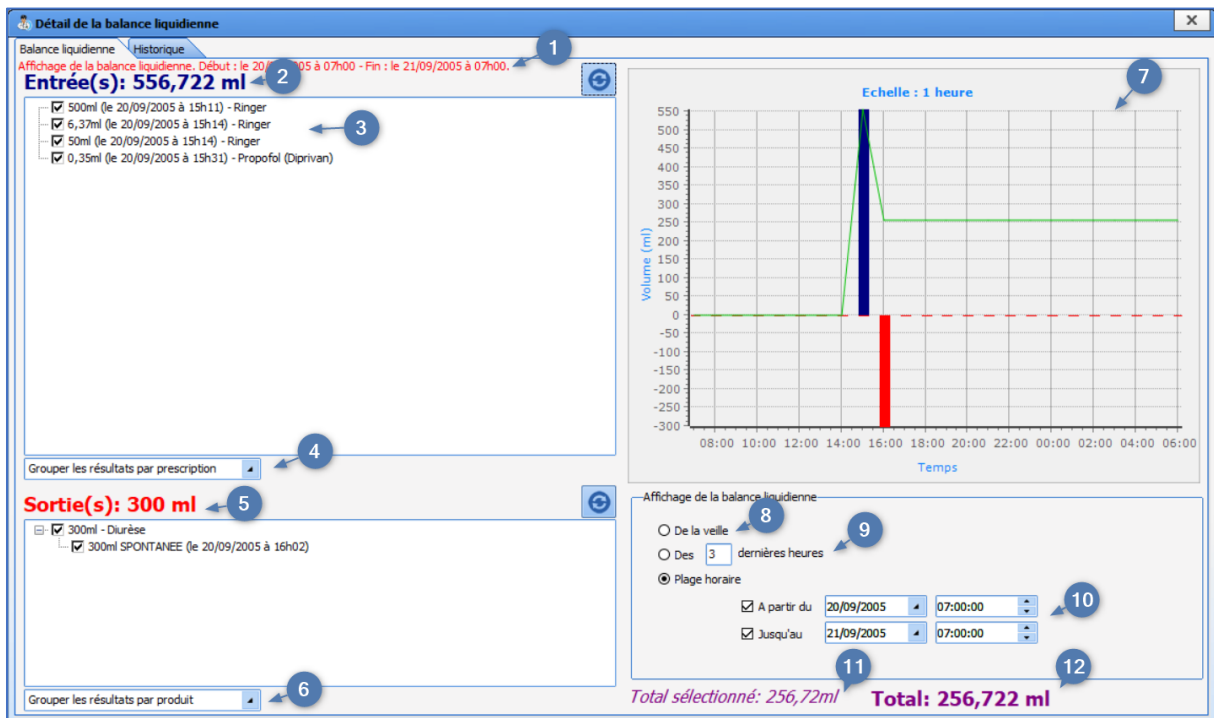


1. Rappel des bornes temporelles d'affichage de la balance liquidienne : **Affichage de la balance liquidienne du DD/MM HH:MM au DD/MM HH:MM.** (affiché en rouge).
2. Calcul du cumul en entrée.
3. Détail de chaque entrée de la balance liquidienne.
4. Liste déroulante permettant de regrouper les entrées par produit, par prescription ou par élément de soin.
5. Calcul du cumul en sortie.
6. Liste déroulante permettant de regrouper les sorties par produit, par prescription ou par élément de soin.
7. Affichage des entrées (en bleu) et des sorties (en rouge). La courbe verte correspond au calcul du bilan entrées / sorties.
8. Bouton radio **De la veille**. Cochée par défaut si la clé de paramétrage **ShowDayBeforeChecked** est activée, cette case permet d'afficher la balance de la veille.
9. Bouton radio **Des X dernières heures**. Permet de choisir d'afficher la balance liquidienne en fonction des X dernières heures. La valeur par défaut de X reprend la valeur de la clé de paramétrage **DefaultValueTimeFilter** (24 par défaut).



10. Bouton radio permettant de définir les bornes de la balance liquidienne à afficher à partir d'une date/heure de début ainsi qu'une date/heure de fin. Les dates sont initialisées par défaut avec le début et la fin de la journée de réanimation en cours. Case cochée par défaut si la clé de paramétrage **ShowDayBeforeChecked** n'est pas activée.
11. Calcul du bilan entrée / sortie du patient en fonction des éléments sélectionnés.
12. Calcul du bilan entrée / sortie du patient (sélectionnées ou non).

#### 5.9.4.2.2 Onglet Historique

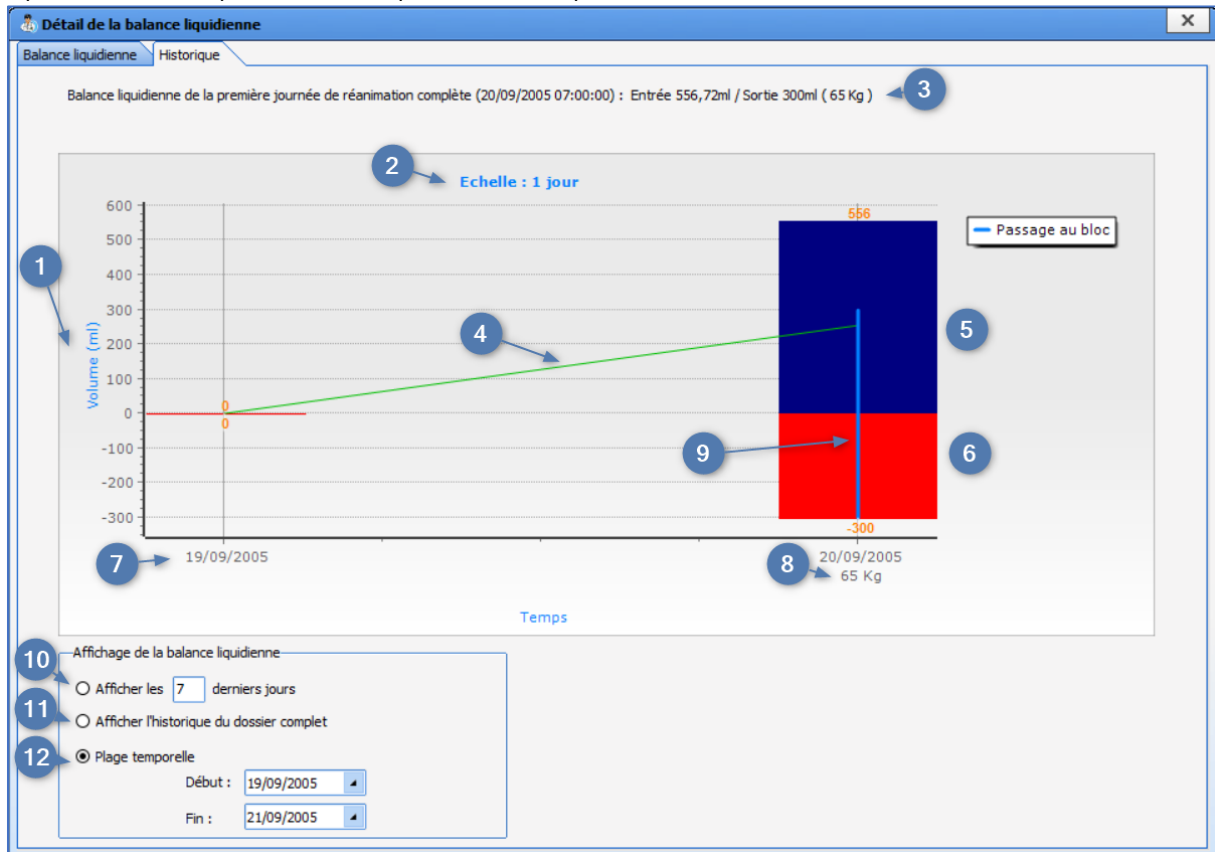Cet onglet s'affiche dans un contexte de réanimation et permet de visualiser l'historique de la balance liquidienne sur une période donnée pour un dossier patient.



Ce graphique permet l'affichage des entrées (en bleu) et des sorties (en rouge) en fonction du volume ainsi qu'un suivi du poids du patient dans le temps.

1. Echelle permettant de lire le volume en entrée et sortie de la balance liquidienne. Elle s'ajuste automatiquement en fonction du volume de la BL (fonctionnement identique à l'affichage de la balance liquidienne dans l'onglet balance liquidienne), l'unité est affichée entre parenthèses.
2. Echelle : durée représentée par chaque colonne. Le nombre de jours affichés s'adapte en fonction de la période d'affichage choisie par l'utilisateur (cf. 10, 11 et 12).
3. Affichage de la balance liquidienne de la première journée de réanimation complète. (Exemple : si la journée de réanimation commence à 7h00, et que le patient est arrivé à 5h00, la balance liquidienne de la journée commençant à 7h00 : les entrées et sorties entre 5h00 et 7h00 ne sont pas prises en compte)
4. La courbe verte n'a pas le même fonctionnement que celle présente dans l'onglet **Balance liquidienne** classique. Elle correspond, pour chaque jour, à la différence entre les entrées et sorties.
5. Affichage du volume en entrée de la balance liquidienne en fonction du jour. Le volume est affiché sur la représentation graphique.





6. Affichage du volume en sortie de la balance liquidienne en fonction du jour. Le volume est affiché sur la représentation graphique.
7. Date du jour affiché.
8. Poids du patient avec son unité (Poids du patient – Poids). Si plusieurs données sont saisies pour une seule journée, la valeur saisie en première est affichée.
9. Ligne bleue. Permet de visualiser le jour de passage au bloc opératoire du patient.
10. Bouton radio **Afficher les X derniers jours** : X est initialisé avec 7 comme valeur par défaut. Affiche la balance liquidienne des X derniers jours à partir de la date du jour. Cette case est cochée par défaut.
11. Bouton radio **Afficher l'historique du dossier complet**. Initialise la période d'affichage de la balance liquidienne avec J1= Jour de l'arrivée du patient jusqu'à la date du jour ou, pour un dossier clôturé, la date de clôture du dossier.
12. Bouton radio **Début : JJ/MM/AAAA Fin : JJ/MM/AAAA** : Bornes temporelles initialisées avec la date de la veille et la date du jour.

Il n'est pas possible de modifier l'échelle à l'aide de la souris comme sur le schéma présent dans l'onglet **Balance liquidienne**.

## 5.9.5 Historique du plan de soins

Le bouton Historique de Plan de soins permet de visualiser, de regrouper et d'analyser rapidement les données saisies et recueillies dans le Plan de soins.

Ses fonctions de recherches permettent d'isoler rapidement des données du dossier.

Mais aussi de les analyser grâce à sa fonction « Vue mixée ».

Ces données sont présentées sous forme de tableau qui sont imprimables ou exportables au format tableur ou PDF.



- (1) Bouton « Historique ».
- (2) Fenêtre contextuelle d'« Historique » du dossier.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

- (3) Sous-onglets donnant accès aux différents types de données disponibles.
- (4) Zone déployable permettant l'accès aux fonctions avancées du traitement des courbes.
- (5) Zone permettant la sélection d'une plage horaire personnalisable.
- (6) Zone de recherche textuelle.
- (7) Zone de sélection des éléments disponibles.
- (8) Bouton d'export et d'impression.

Heure d'occurrence	Nom	Plan de soin	Saisi par	Saisi à	Détail
2020/08/05 12:10	Surveillance Douleur Sédation	X	Céline BRETON	2020/08/05 13:28	Surveillance BPS : Oui   RASS : -4
2020/08/05 14:08	Surveillance Douleur Sédation	X	Céline BRETON	2020/08/05 14:08	RASS : -4   BPS : 1
2020/08/05 16:32	Surveillance Douleur Sédation	X	Carole BULLE	2020/08/05 16:33	RASS : -4
2020/08/05 20:05	Surveillance Douleur Sédation	X	Yves MEDECIN	2020/08/05 20:05	RASS : -4
2020/08/05 22:21	Surveillance Douleur Sédation	X	Thomas THOMA	2020/08/05 22:21	RASS : -4   BPS : 3
2020/08/06 02:40	Surveillance Douleur Sédation	X	Thomas THOMA	2020/08/06 02:41	RASS : -4
2020/08/06 06:49	Surveillance Douleur Sédation	X	Thomas THOMA	2020/08/06 06:49	RASS : -4
2020/08/06 08:40	Surveillance Douleur Sédation	X	Alice HUERRE	2020/08/06 08:40	RASS : -4   BPS : 1
2020/08/06 10:27	Surveillance Douleur Sédation	X	Alice HUERRE	2020/08/06 10:27	RASS : -4
2020/08/06 14:23	Surveillance Douleur Sédation	X	Alice HUERRE	2020/08/06 14:24	RASS : -4
2020/08/07 00:19	Surveillance Douleur Sédation	X	Laurent BESSAC	2020/08/07 00:19	RASS : -4
2020/08/07 06:31	Surveillance Douleur Sédation	X	Laurent BESSAC	2020/08/07 06:31	RASS : -3

- (1) Zone de recherche textuelle
- (2) Permet d'effectuer la recherche du mot clé sur l'ensemble des onglets sauf paramètres. Ici la recherche RASS, a permis d'afficher le rapport des différentes saisies qui ont été faites dans le dossier sur la durée du séjour.
- (3) Flèche directionnelle permettant de passer d'un résultat à l'autre.

### 5.9.6 Cas des administrations demandées par un médecin

Dans l'onglet **Plan de soins** et dans les pancartes de type 3, **DIANE** donne la possibilité d'effectuer une administration demandée par un médecin.

La saisie du médecin prescripteur est obligatoire.





**Paracetamol : 500 mg 1x/j**

Anticoagulants

**DAFALGAN \*** +

DAFALGAN CP EFF 500 MG (\*16)\*HOP PARACETAMOL  
3400936256576  
500 mg/comprimé

Ce produit n'est pas diluable

Posologie par administration: 500 mg /kg /m2 Max. [ ]

Posologie par jour: 500 mg

Débit: [ ] microg /kg /h /m2 /min

Ne pas remplacer/substituer

**Total par jour utilisé pour l'analyse de la BdM: 500 mg**

Durée d'administration: 24h 12h 8h 6h 4h 3h 2h 1h 30min  Autre: [ ]

Voie: orale  A la demande  Apporté par le patient

Planification: 1 fois par jour(s)

Date/Heure de début: 09:26 12/04/2021

Préciser une durée:  Pendant 1 jour(s)  Jusque 09:26 13/04/2021

Médecin prescripteur: MEDECIN Paul

Contenant et dilution: Contenant volumique, Débit de la perfusion: comprimé/h

Condition: [ ]

Commentaire: [ ]

12-04-2021 12-04-2021 13-04-2021 13-04-2021

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

Valider Annuler

La saisie apparaît dans le plan de soin avec une icône particulière.



Un clic affiche un menu permettant d'annuler cette saisie, en cas d'erreur de saisie, si elle n'a pas été validée par un médecin.

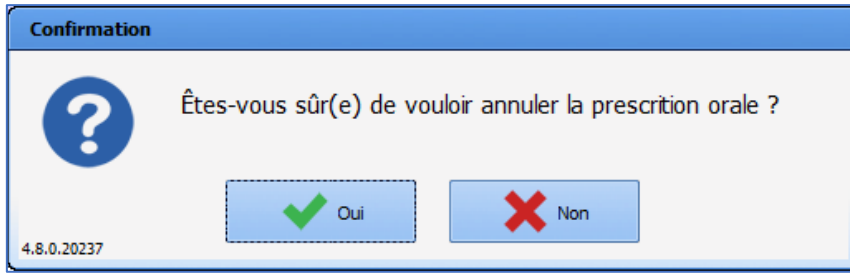
Libellé	Etat	Début	Prescripteur	Dernière modif. par	Voie	Infos Suppl.
Paracetamol : 500 mg 1x/j		12h04	MEDECIN Yves (Administration demandée oralement par le médecin)		orale	
Paracetamol : 500 mg	réalisé	12h04	MEDECIN Yves (Administration demandée oralement par le médecin)	SYSTEM Diane	orale	1 gélules - 500 mg/gélules [ 500 mg ]

Annuler la prescription orale


Paracetamol

Si l'utilisateur qui effectue l'annulation est différent de celui qui l'a saisie, un message de confirmation est affiché.





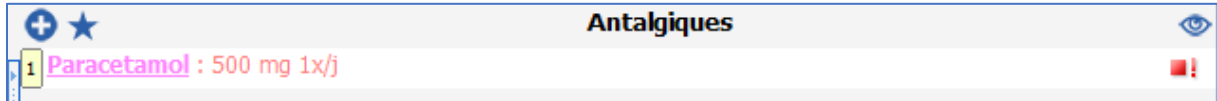
Dans l'onglet **Prescription**, la prescription apparaît en rose pâle et en arrêt urgent.



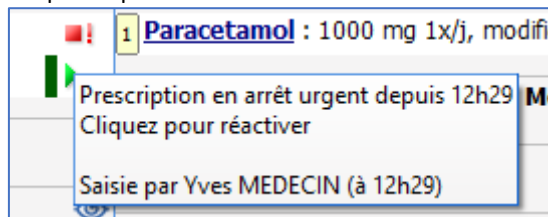Le médecin garde la possibilité de valider la prescription en ouvrant la prescription. Un message de confirmation précise que la prescription est en « arrêt en urgence ».





Il est aussi possible de réactiver la prescription.



### 5.9.7 Éléments de soins

Les prescriptions de pose et de retrait d'éléments de soins sont affichées sur des lignes de type **Plan de prescription et plan de soins**. Les différents formulaires des éléments de soins sont quant à eux affichés dans des lignes spécifiques aux éléments de soins.

Le clic sur une occurrence non-réalisée, propose d'ajouter l'élément de soin ou de renseigner le formulaire de suivi (bouton ) ou de le remplacer par un autre formulaire précédemment configuré pour l'élément de soin (bouton ). La réalisation de l'élément de soin depuis le plan de soins a le même fonctionnement que la réalisation depuis le schéma corporel. Le formulaire de suivi configuré s'ouvre avec la possibilité de planifier les formulaires suivants (cf. [Saisir le formulaire de pose du dispositif médical](#)).

Il est possible d'afficher l'élément de soin sous la forme d'un chronomètre :

Drainages	
Drain pleural péricardique Thorax droite n°1; 3h 80 ml	Drain pleural BL=30 ml Surveillance Drain Pleural
Chronomètres	
Drainages	
Drain pleural péricardique Thorax droite n°1 80 ml	3h

Le libellé du soin ne reprend pas la durée totale du soin, contrairement aux lignes d'éléments de soins classiques.



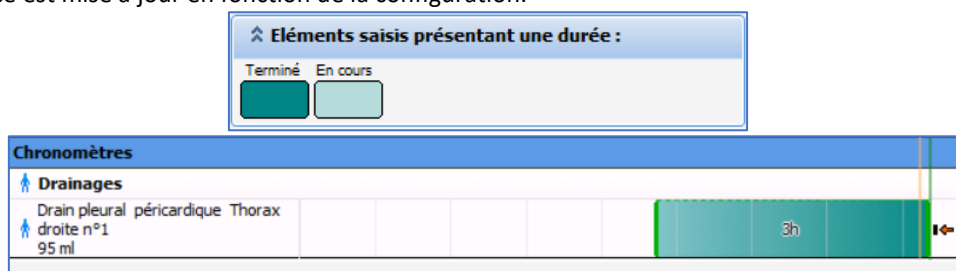
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Le retrait de l'élément de soin stoppe le chrono, la durée reste affichée sur l'occurrence et la couleur de l'occurrence est mise à jour en fonction de la configuration.




## 5.10 Plan de cueillette

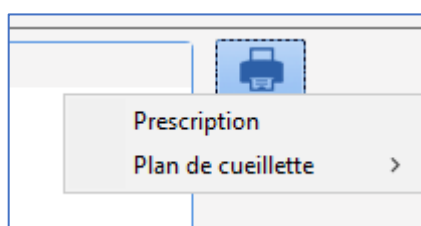Il est possible d'imprimer le plan de cueillette, à partir de l'onglet **Prescription** et à partir de l'onglet **Plan de soins**.




Onglet **Prescription**

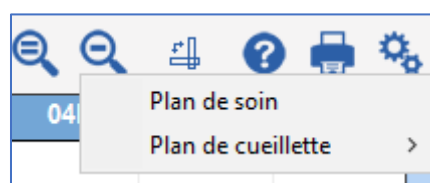

Onglet **Plan de soins**

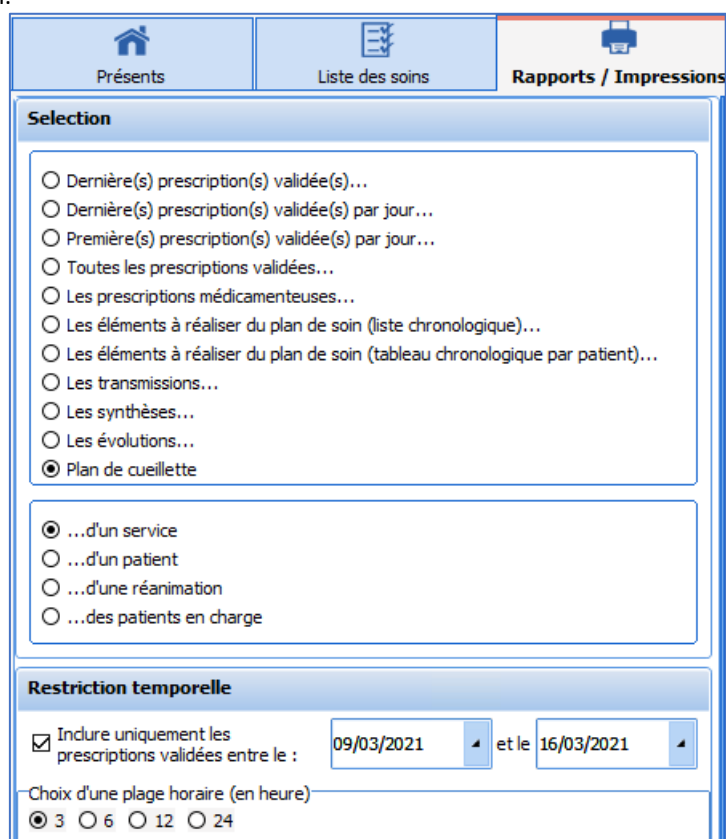L'impression du plan de cueillette peut également s'effectuer à partir de l'onglet **Rapports / Impressions** du portail de réanimation.



Le plan de cueillette peut être imprimé pour 4 plages horaires différentes.



2023-03-17



BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- 3 heures
- 6 heures
- 12 heures
- 24 heures

Seuls les produits ayant une posologie et dont le début est prévu dans l'intervalle de temps (3, 6, 12 ou 24h) à compter de l'heure actuelle sont prises en compte.

<b>ETABLISSEMENT</b> Mr <b>DUPOND Pierre</b> Date de naissance : 01/01/1970 Age : 51 ans / Poids : 84 kg (Le 16/03/2021 à 10h16) Localisation : Service de Réanimation > Réanimation > Chambre 1 Admission le 11/03/2021 à 16h49	<b>Service de Réanimation</b> Document édité par : MEDECIN Yves <div style="text-align: right;">           RPPS : 65432109876   </div>
<b>Plan de cueillette du mardi 16 mars 2021 10:18 au mercredi 17 mars 2021 10:18</b>	
Signée par MEDECIN Yves à 10h16	RPPS : 65432109876 
BIONOLYTE G 5 % 1000 ML POCHE FREEFLEX (*10) - DCI : ASS D ELECTROLYTES+GLUCOSE : <b>1000 ml</b> (1 poche/1000 ml), à administrer : 1 poche soit 1000 ml	
BIONOLYTE G5% FL 1000 MLKABIPAC (*10) : <b>2000 ml</b> (1 flacon/1000 ml), à administrer : 2 flacon soit 2000 ml	
Diluant non précisé : <b>85 ml</b> , à administrer : 85 ml	
INS HUMALOG 100 U/ml FL 10 ml SC : <b>1 flacon</b> (1000 UI/10 ml/flacon), à administrer : 50 UI soit 0,5 ml soit 0,05 flacon	
MIDAZOLAM 50mg-10ml AMP10ml PERF-IV IM : <b>1 ampoule</b> (50 mg/10 ml/ampoule), à administrer : 50 mg soit 10 ml soit 1 ampoule	
ONDANSETRON INTAS SOL 4MG/2ML(*10) *HOP : <b>3 ampoule</b> (4 mg/2 ml/ampoule), à administrer : 12 mg soit 6 ml soit 3 ampoule	
SODIUM CHLORURE 0,9% PC 50 ml PERF ISO TONIQUE : <b>3 poche</b> (450 mg/50 ml/poche), à administrer : 1350 mg soit 150 ml soit 3 poche	
SODIUM CHLORURE 0.9% 1000MLPOCHE FREEFLEX (*10) : <b>1 poche</b> (9000 mg/1000 ml/poche), à administrer : 445,5 mg soit 49,5 ml soit 0,05 poche	
SODIUM CHLORURE 0.9% 50MLPOCHE FREEFLEX (*60) : <b>1 poche</b> (450 mg/50 ml/poche), à administrer : 72 mg soit 8 ml soit 0,16 poche	
SUFENTA AMP INJ 250MCG/5ML(*10) SUFENTANIL 3400891536621 : <b>1 ampoule</b> (250 µg/5 ml/ampoule), à administrer : 250 µg soit 5 ml soit 1 ampoule	
VANCOMYCINE SANDOZ 1G (*1) : <b>2 flacon</b> (1000 mg/20 ml/flacon), à administrer : 2000 mg soit 40 ml soit 2 flacon	
Nombre de médicaments : 11	

A partir de l'onglet **Rapports / Impressions** du portail de réanimation, l'utilisateur peut, au choix, imprimer le plan de cueillette :

- d'un service



Portail de réanimation - Chambre 1 - BOW38 - HEDECIII Yves - Version : 4.8.0.21043

Présents Liste des soins **Rapports / Impressions**

**Selection**

- Dernière(s) prescription(s) validée(s)...
- Dernière(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Première(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Toutes les prescriptions validées...
- Les prescriptions médicamenteuses...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (liste chronologique)...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (tableau chronologique par patient)...
- Les transmissions...
- Les synthèses...
- Les évolutions...
- Plan de cueillette

...d'un service  
 ...d'un patient  
 ...d'une réanimation  
 ...des patients en charge

**Restriction temporelle**

Inclure uniquement les prescriptions validées entre le : 11/03/2021 et le 18/03/2021

Choix d'une plage horaire (en heure)  
 3  6  12  24

**Restriction géographique**

Inclure uniquement les patients présents

Sélectionner l'établissement

- ETABLISSEMENT
- Service Anesthésie
- Service Gyneco-Obstétrique
- Service de Réanimation

**Actualisation**

Actualisation automatique  Délai de mise à jour : 00:02:00

Afficher le rapport

**Impression du plan de cueillette du jeudi 18 mars 2021 11:19 au jeudi 18 mars 2021 17:18 du service Service de Réanimation (Patients présents uniquement)**

ATROPINE SULFATE 0,50mg-1ml AMP 1ml IV SC : **1 ampoule** (0,5 mg/ml/ampoule), à administrer : 0,5 mg soit 1 ml soit 1 ampoule

AUGMENTIN 1g+200mg FL IV-PERF : **1 flacon** (1000 mg/flacon), à administrer : 1000 mg soit 1 flacon

BIONOLYTE G 5 % 1000 ML POCHÉ FREEFLEX (\*10) - DCI : ASS D ELECTROLYTES+GLUCOSE : **1000 ml** (1 poche/1000 ml), à administrer : 1 poche soit 1000 ml

BURINEX 2 mg-4 ml AMP 4 ml IV-PERF : **10 ampoule** (2 mg/4 ml/ampoule), à administrer : 20 mg soit 40 ml soit 10 ampoule

Diluant non précisé : **635 ml**, à administrer : 635 ml

DOBUTAMINE PANPHARMA250MG/20ML (\*10) : **2 flacon** (250 mg/20 ml/flacon), à administrer : 500 mg soit 40 ml soit 2 flacon

GLUCAGEN 1 mg-ml FL 1 ml IM IV SC : **1 flacon** (1 mg/ml/flacon), à administrer : 1 mg soit 1 ml soit 1 flacon

GLUCOSE 10% PC 250 ml PERF-HYPERTONIQUE E : **1 poche** (25000 mg/250 ml/poche), à administrer : 25000 mg soit 250 ml soit 1 poche

GLUCOSE 10% PC 500 ml PERF HYPERTONIQUE E : **1 poche** (50000 mg/500 ml/poche), à administrer : 50000 mg soit 500 ml soit 1 poche

GLUCOSE 2,5% PC 1L PERF HYPOTONIQUE : **1 poche** (25000 mg/1000 ml/poche), à administrer : 25000 mg soit 1000 ml soit 1 poche

HEPARINE SODIQUE 25000 UI/5 ML : **2 flacon** (25000 UI/5 ml/flacon), à administrer : 50000 UI soit 10 ml soit 2 flacon

IPRATROPIUM 0,5mg-2ml UNIDOSE SOL INH : **1 récipient unidose** (0,5 mg/2 ml/récipient unidose), à administrer : 0,5 mg soit 2 ml soit 1 récipient unidose

KETOPROFENE 100MG/4ML SOL IV-PERFUSION MEDAC(\*10)CARTON 48 : **1 ampoule** (100 mg/4 ml/ampoule), à administrer : 100 mg soit 4 ml soit 1 ampoule

MIDAZOLAM 50mg-10ml AMP10ml PERF-IV IM : **1 ampoule** (50 mg/10 ml/ampoule), à administrer : 50 mg soit 10 ml soit 1 ampoule

MORPHINE 10 MG / 1 ML AMP INJ : **2 ampoule** (10 mg/ml/ampoule), à administrer : 20 mg soit 2 ml soit 2 ampoule

- d'un patient

Portail de réanimation - Chambre 1 - BOW38 - HEDECIII Yves - Version : 4.8.0.21043

Présents Liste des soins **Rapports / Impressions**

**Selection**

- Dernière(s) prescription(s) validée(s)...
- Dernière(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Première(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Toutes les prescriptions validées...
- Les prescriptions médicamenteuses...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (liste chronologique)...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (tableau chronologique par patient)...
- Les transmissions...
- Les synthèses...
- Les évolutions...
- Plan de cueillette

...d'un service  
 ...d'un patient  
 ...d'une réanimation  
 ...des patients en charge

**Restriction temporelle**

Inclure uniquement les prescriptions validées entre le : 11/03/2021 et le 18/03/2021

Choix d'une plage horaire (en heure)  
 3  6  12  24

**Actualisation**

Actualisation automatique  Délai de mise à jour : 00:02:00

Afficher le rapport

**Impression du plan de cueillette du jeudi 18 mars 2021 11:19 au jeudi 18 mars 2021 17:19 du patient CREPIN Juliette**

BIONOLYTE G 5 % 1000 ML POCHÉ FREEFLEX (\*10) - DCI : ASS D ELECTROLYTES+GLUCOSE : **1000 ml** (1 poche/1000 ml), à administrer : 1 poche soit 1000 ml

Diluant non précisé : **85 ml**, à administrer : 85 ml

GLUCOSE 10% PC 500 ml PERF HYPERTONIQUE E : **1 poche** (50000 mg/500 ml/poche), à administrer : 50000 mg soit 500 ml soit 1 poche

MIDAZOLAM 50mg-10ml AMP10ml PERF-IV IM : **1 ampoule** (50 mg/10 ml/ampoule), à administrer : 50 mg soit 10 ml soit 1 ampoule

SUFENTA AMP INJ 250MCG/SML(\*10) SUFENTANIL 3400891536621 : **1 ampoule** (250 µg/5 ml/ampoule), à administrer : 250 µg soit 5 ml soit 1 ampoule

- de la réanimation d'un patient

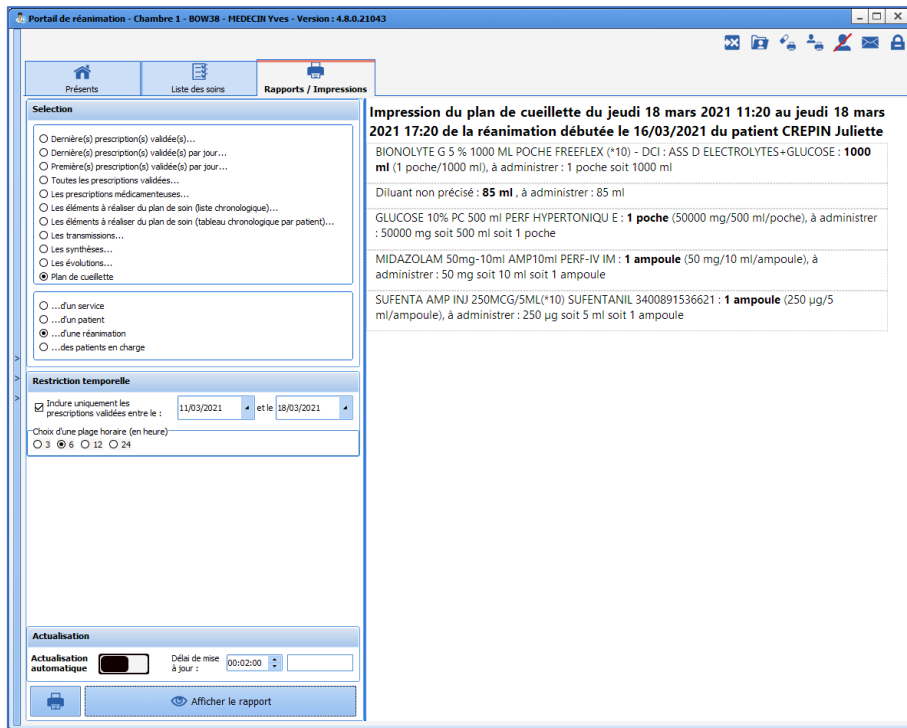


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



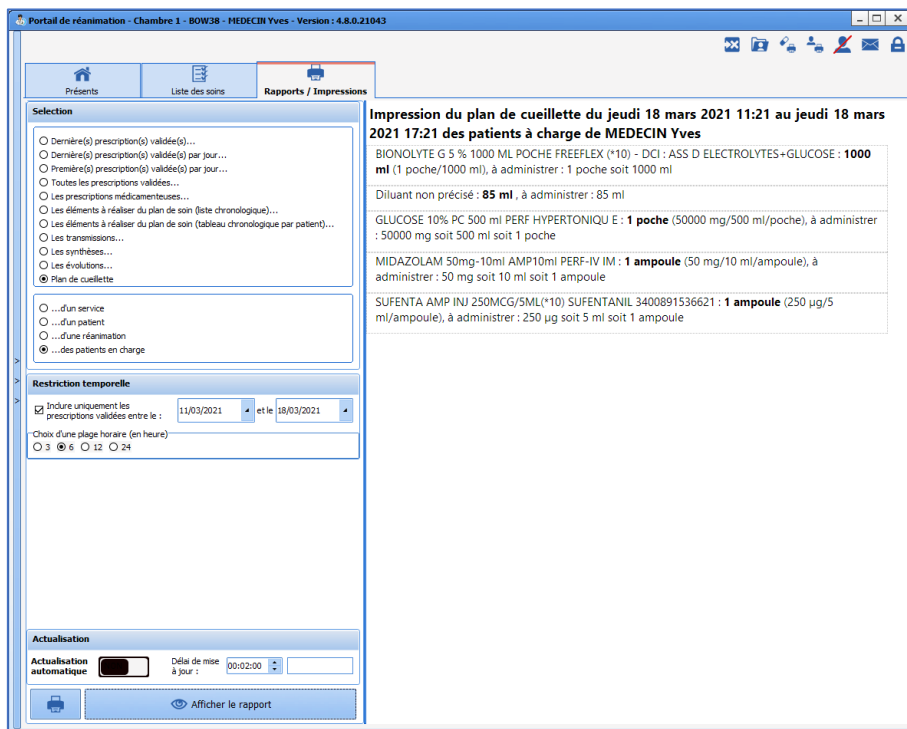- de tous les patients dont il a la charge



## 5.11 Impression des étiquettes médicamenteuses

L'impression des étiquettes destinées aux poches et aux seringues prescrites est possible à partir :

- de l'onglet **Prescription** au clic sur le bouton 

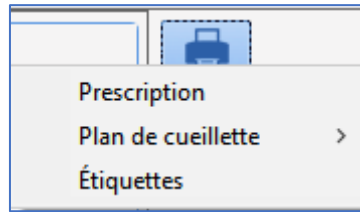


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



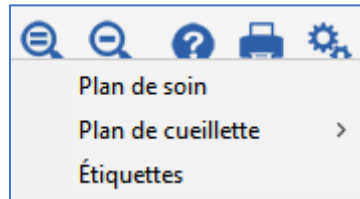
- de l'onglet **Plan de soins** au clic sur le bouton



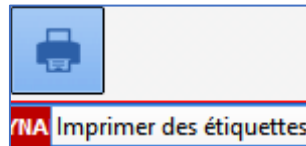- de la liste des tâches au clic sur le bouton **Imprimer des étiquettes** en bas à droite
- d'une pancarte 3 configurée pour afficher des lignes de plan de soin au clic sur le bouton en haut à gauche



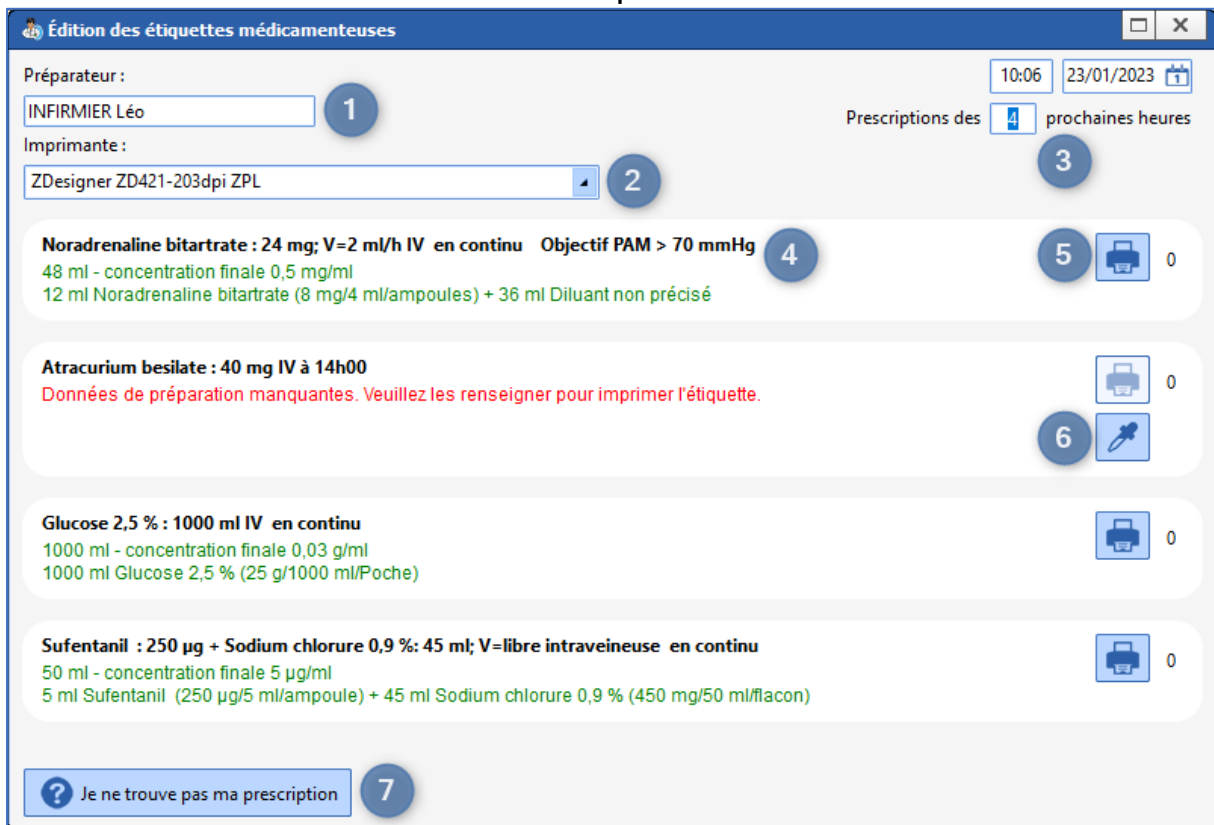Chacun de ces boutons affiche la fenêtre **Edition des étiquettes médicamenteuses** :



1. Choix du préparateur : par défaut, il s'agit de l'utilisateur courant. Il est possible de modifier en choisissant parmi les infirmiers, les IADE, les anesthésistes-réanimateurs ou les anesthésistes.
2. Choix de l'imprimante d'étiquettes.
3. Choix de la plage horaire des administrations à préparer (4h par défaut).



4. Informations concernant la prescription :
  - [DCI si existante, sinon Nom du médicament] : [Posologie prescrite] [Voie d'administration] [Fréquence d'administration] [Durée du traitement prescrit]
  - La liste des produits présents au sein du contenant volumique affichée en vert : [Volume total en ml] - concentration finale : [concentration finale du produit principal] Puis pour chaque produit, séparé par des "+" [Volume en ml] ml [description du produit].
5. Bouton d'impression de l'étiquette (le nombre à droite indique le nombre d'étiquettes imprimées)
6. Bouton « pipette » destiné à compléter les informations manquantes : affiche la fenêtre de prescription et encadre en rouge les informations manquantes.
7. Bouton permettant d'afficher les prescriptions sans notion de volume.

## 5.12 Impression des ordonnances d'antibiotiques et des indications de l'antibiothérapie

### 5.12.1 Ordonnances d'antibiotiques

Les prescriptions d'antibiotiques du jour ou des X derniers jours peuvent être imprimées à partir de l'onglet **Rapports / Impressions** de la liste des patients (**Portail de réanimation**).

The screenshot shows a web interface with four tabs: 'Présents', 'Liste des soins', 'Rapports / Impressions' (selected), and 'Rapports avancés'. The 'Rapports / Impressions' tab contains a 'Selection' section with the following options:

- Dernière(s) prescription(s) validée(s)...
- Dernière(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Première(s) prescription(s) validée(s) par jour...
- Toutes les prescriptions validées...
- Les prescriptions médicamenteuses...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (liste chronologique)...
- Les éléments à réaliser du plan de soin (tableau chronologique par patient)...
- Les transmissions...
- Les synthèses...
- Les évolutions...
- Plan de cueillette
- Ordonnances d'antibiotiques
- Indication de l'Antibiothérapie

Below the selection section, there are options for the scope of the report:

- ...d'un service
- ...d'un patient
- ...d'une réanimation
- ...des patients en charge

The 'Restriction temporelle' section includes:

- Aucune
- Inclure uniquement les prescriptions validées entre le :  et le
- Choix d'une plage horaire :  3h  6h  12h  24h
- Aujourd'hui
- dernier(s) jour(s)

Cela affiche, pour chaque patient, la liste des prescriptions d'antibiotiques, dans lesquelles sont précisées les indications de l'antibiothérapie.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



Impression	
<b>ETABLISSEMENT</b> Mme <b>LARDEUR CREPIN</b> Juliette Date de naissance : 18/09/1972 Age : 50 ans / Poids : 67 kg (Le 27/01/2023 à 12h10) Localisation : Pôle de Réanimation > Unité de Réanimation > Chambre 7 Admission le 03/01/2023 à 12h02	<b>Pôle de Réanimation</b> IPP : 0945467 Document édité par : Docteur SYSTEM Diane RPPS : 1238529614
<b>Impression des ordonnances d'antibiothérapie</b>	
<b>Evaluation(s)</b>	
<b>06/01/2023 - 17:33</b> <b>Amoxicilline+clavulanique acide 2 g+200 mg (labo sandoz), ad, pdr pr sol pr perf : 2000 mg   + Sodium chlorure 0.9% (labo fresenius), sol inj, flac pe 50 ml : 450 mg  </b> Voie intraveineuse (en perfusion) sur 30min 3 fois par jour à partir du 06/01 à 17h38   * Evaluation (Antibiotique)   Modification Aucune   Raison(s): "Autre"   * Informations initiales (Antibiotique)   Méthode Prophylaxie   Infection(s): "Osseuse"	
<b>Information(s) initiale(s)</b>	
<b>06/01/2023 - 17:33</b> * Evaluation (Antibiotique)   Modification Aucune   Raison(s): "Autre"   * Informations initiales (Antibiotique)   Méthode Prophylaxie   Infection(s): "Osseuse"	
<b>Information(s) initiale(s)</b>	
<b>09/01/2023 - 09:14</b> <b>Amoxicilline : 2 g   + Sodium chlorure 0,9 %: 100 ml  </b> Voie intraveineuse (en perfusion) sur 30min le 09/01 à 14h00, terminé depuis le 09/01 à 14h30   Commentaire associé : "Charge à passer en 30 min"   * Informations initiales (Antibiotique)   Méthode Documentée   Infection(s): "Bactériémie/Septicémie"	

### 5.12.1 Indications de l'antibiothérapie

Les indications de l'antibiothérapie peuvent être imprimées à partir de l'onglet **Rapports / Impressions** de la liste des patients (**Portail de réanimation**).

Présents	Liste des soins	Rapports / Impressions	Rapports avancés
<b>Selection</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Dernière(s) prescription(s) validée(s)...</li> <li><input type="radio"/> Dernière(s) prescription(s) validée(s) par jour...</li> <li><input type="radio"/> Première(s) prescription(s) validée(s) par jour...</li> <li><input type="radio"/> Toutes les prescriptions validées...</li> <li><input type="radio"/> Les prescriptions médicamenteuses...</li> <li><input checked="" type="radio"/> Les éléments à réaliser du plan de soin (liste chronologique)...</li> <li><input type="radio"/> Les éléments à réaliser du plan de soin (tableau chronologique par patient)...</li> <li><input type="radio"/> Les transmissions...</li> <li><input type="radio"/> Les synthèses...</li> <li><input type="radio"/> Les évolutions...</li> <li><input type="radio"/> Plan de cueillette</li> <li><input type="radio"/> Ordonnances d'antibiotiques</li> <li><input checked="" type="radio"/> Indication de l'Antibiothérapie</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> ...d'un service</li> <li><input type="radio"/> ...d'un patient</li> <li><input type="radio"/> ...d'une réanimation</li> <li><input type="radio"/> ...des patients en charge</li> </ul>			
<b>Restriction temporelle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> Aucune</li> <li><input type="radio"/> Inclure uniquement les prescriptions validées entre le : <input type="text" value="20/01/2023"/> et le <input type="text" value="27/01/2023"/></li> <li>Choix d'une plage horaire : <input checked="" type="radio"/> 3h <input type="radio"/> 6h <input type="radio"/> 12h <input type="radio"/> 24h</li> <li><input type="radio"/> Aujourd'hui</li> <li><input type="radio"/> <input type="text" value="7"/> dernier(s) jour(s)</li> </ul>			

Cela affiche la liste des prescriptions d'antibiotiques, dans lesquelles sont précisées les indications de



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

l'antibiothérapie.

**Madame CREPIN Juliette** (Né le 18/09/1972, 50 ans) (IPP : 0945467)

**Réanimation débutée le 03/01/2023 à 12:02 (Depuis 24 jour(s))**

Localisation : ETABLISSEMENT > Pôle de Réanimation > Unité de Réanimation > Chambre 7

---

**Prescription signée le 06/01/2023 à 17:33:29 par SYSTEM Diane** 1238529614

**Amoxicilline+clavulanique acide 2 g+200 mg (labo sandoz), ad, pdr pr sol pr perf : 2000 mg | + Sodium chlorure 0.9% (labo fresenius), sol inj, flac pe 50 ml : 450 mg | Voie intraveineuse (en perfusion) sur 30min 3 fois par jour à partir du 06/01 à 17h38 | \* Evaluation (Antibiotique) | Modification Aucune | Raison(s): "Autre" | \* Informations initiales (Antibiotique) | Méthode Prophylaxie | Infection(s): "Osseuse"**

---

**Prescription signée le 09/01/2023 à 09:17:22 par SYSTEM Diane** 1238529614

**Amoxicilline+clavulanique acide 2 g+200 mg (labo sandoz), ad, pdr pr sol pr perf : 2000 mg | + Sodium chlorure 0.9% (labo fresenius), sol inj, flac pe 50 ml : 450 mg | Voie intraveineuse (en perfusion) sur 30min 3 fois par jour, modifications à appliquer à partir du 09/01 à 14h00**

**Amoxicilline : 2 g | + Sodium chlorure 0,9 %: 100 ml | Voie intraveineuse (en perfusion) sur 30min le 09/01 à 14h00, terminé depuis le 09/01 à 14h30 | Commentaire associé : "Charge à passer en 30 min" | \* Informations initiales (Antibiotique) | Méthode Documentée | Infection(s): "Bactériémie/Septicémie"**

### 5.13 Onglet laboratoire / biologie

L'application permet d'intégrer directement les résultats des examens biologiques faits au patient. Ceux-ci sont affichés sous forme de grille dans un onglet spécifique **Labo**. Le PDF des résultats transmis par le laboratoire d'analyse est également disponible et visualisable dans son ensemble.

Dans l'exemple ci-dessous, cet onglet est divisé en sous-onglet permettant de scinder les différents résultats selon des catégories précises.

Cette présentation permet également de pouvoir afficher une synthèse des résultats du patient sur plusieurs jours, ici une semaine afin d'en faciliter l'analyse évolutive.

Horaires	05/08 17h	06/08 01h	06/08 07h	06/08 13h	07/08 07h
<b>Groupes RAI</b>					
2. K+ (mmol/L)	4.0 mmol/L	4.0 mmol/L	3.9 mmol/L	3.9 mmol/L	3.9 mmol/L
<b>Gas des sangs</b>					
1. P102(N2) (%)	60.0 %	60.0 %	7.41	7.41	70.0 %
1. pH	7.41	7.41	7.41	7.41	7.37
1. pO2 (mm de Hg)	120.0 mm de Hg	110.0 mm de Hg	110.0 mm de Hg	110.0 mm de Hg	110.0 mm de Hg
1. pCO2 (mm de Hg)	41.0 mm de Hg	33.0 mm de Hg	43.0 mm de Hg	43.0 mm de Hg	50.0 mm de Hg
1. SATURATION O2 (%)	99 %	94 %	98 %	99 %	86 %
1. CO2 total (vol/100)	27.3 vol/100	26.2 vol/100	27.3 vol/100	27.9 vol/100	29.4 vol/100
1. Bicarbonates (mmol/L)	26.00 mmol/L	25.35 mmol/L	26.00 mmol/L	26.60 mmol/L	27.60 mmol/L
1. Base excess (mmol/L)	1.2 mmol/L	1.1 mmol/L	1.2 mmol/L	1.9 mmol/L	-0.8 mmol/L
<b>Chimie sanguine</b>					
1. Na+ (mmol/L)	124 mmol/L	125 mmol/L	129 mmol/L	124 mmol/L	126 mmol/L
1. Sodium (mEq/L)			129 mEq/L		132 mEq/L
1. Potassium (mEq/L)			4.0 mEq/L		4.0 mEq/L
1. Réserve alcaline (mEq/L)			25 mEq/L		28 mEq/L
1. Protéides totaux (g/L)			48 g/L		52 g/L
1. Glycémie (mmol/L)			7.25 mmol/L		8.34 mmol/L
<b>Fonction rénale</b>					
1. Urée (mmol/L)			3.70 mmol/L		4.00 mmol/L
1. Créatinine (µmol/L)			47 µmol/L		38 µmol/L
<b>Marqueurs infectieux/Inflammatoires</b>					
1. Procalcitonine (ng/L)			103.1		121.4
<b>Hémogramme</b>					
1. Hémoglobine (g/dL)			14.3 g/dL		14.3 g/dL
1. Hématocrite (%)			40.9 %		42.3 %
1. LEUCOCYTES (Giga/L)			26.99 Giga/L		32.55 Giga/L
1. V.G.M. (f)			92 f		94 f
1. P. neutrophiles (Giga/L)			17.08 Giga/L		24.22 Giga/L
1. P. neutrophiles (%)			63.3 %		74.4 %
1. lymphocytes (Giga/L)			3.29 Giga/L		2.02 Giga/L
1. lymphocytes (%)			12.2 %		6.2 %
1. P. éosinophiles (%)			15.3 %		11.6 %
1. P. éosinophiles (Giga/L)			4.15 Giga/L		2.36 Giga/L
1. PLACQUETTES (Giga/L)			173 Giga/L		175 Giga/L
1. C.C.A.M.H. (g/dL)			35.0 g/dL		33.8 g/dL
1. HEMATIES (Tenat/L)			4.46 Tenat/L		4.51 Tenat/L
1. P. basophiles (%)			1.0 %		0.5 %
1. P. basophiles (Giga/L)			0.27 Giga/L		0.16 Giga/L

- (1) Sous-onglet permettant de naviguer à travers les différentes catégories.
- (2) Zone d'entêtes intégrant les libellés transmis par le laboratoire lui-même, ainsi que les unités.
- (3) Zone d'affichage sous forme de grille. Les résultats sont affichés par colonne.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

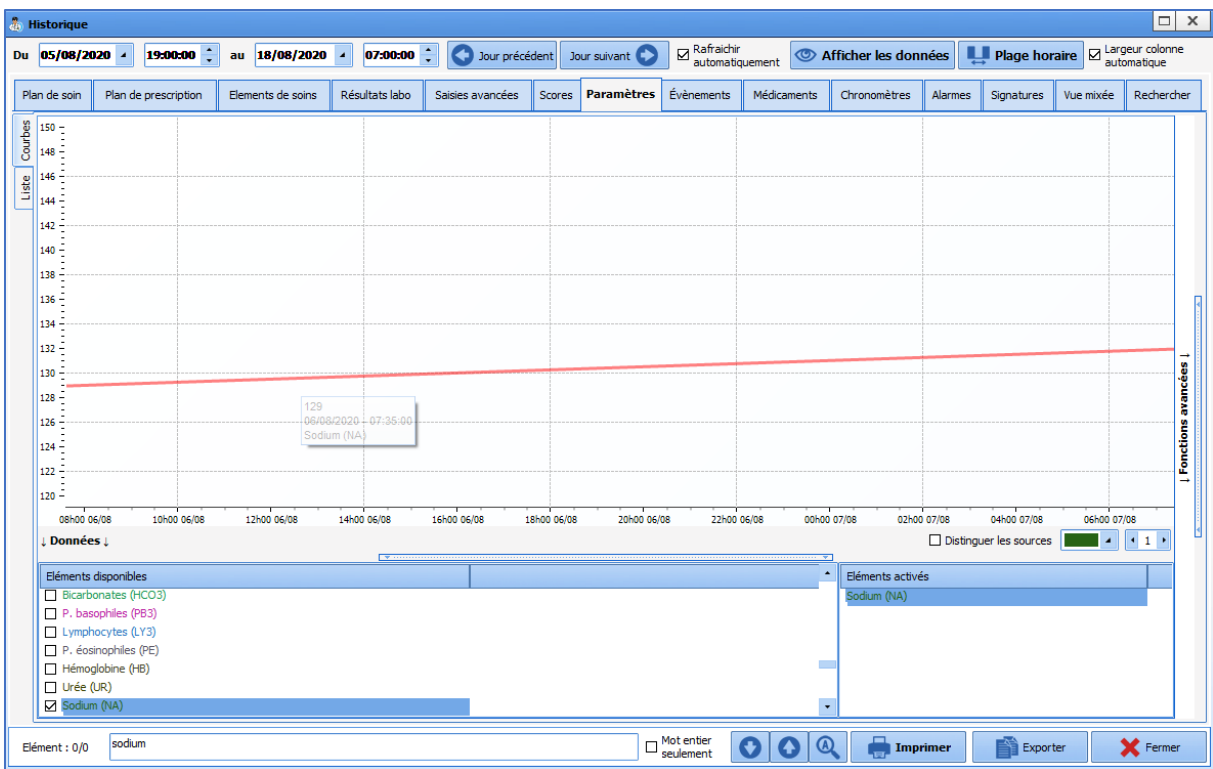
Lors de la transmission des résultats par le laboratoire, celui-ci nous envoie également les unités, les normes, les commentaires et les interprétations. Toutes ces informations sont reprises et affichées dans **Diane**.

Dans l'exemple ci-dessus les cellules en rouge indiquent que le résultat est en dehors des normes. Un clic sur la cellule permet d'afficher le détail de l'analyse.

Heur	Résultat	Valeur	Unité	Normales	Indicateur de normalité
22h19	Na+ (GNA)	124	mmol/L	132 à 146	Inférieur aux normales (L)

Il est possible d'afficher les résultats sous forme de courbe en exécutant un clic-droit sur l'analyse que vous souhaitez voir.

Na+ (mmol/L)	Sodium (mEq/L)	Potassium (mEq/L)
124 mmol/L		
125 mmol/L		



## 5.14 Onglet Paramédical

L'onglet **Paramed** permet de recueillir les différentes informations relatives aux patients en lien avec les métiers paramédicaux.

Cet onglet est divisé en sous-onglets qui sont décrits dans les chapitres suivants.

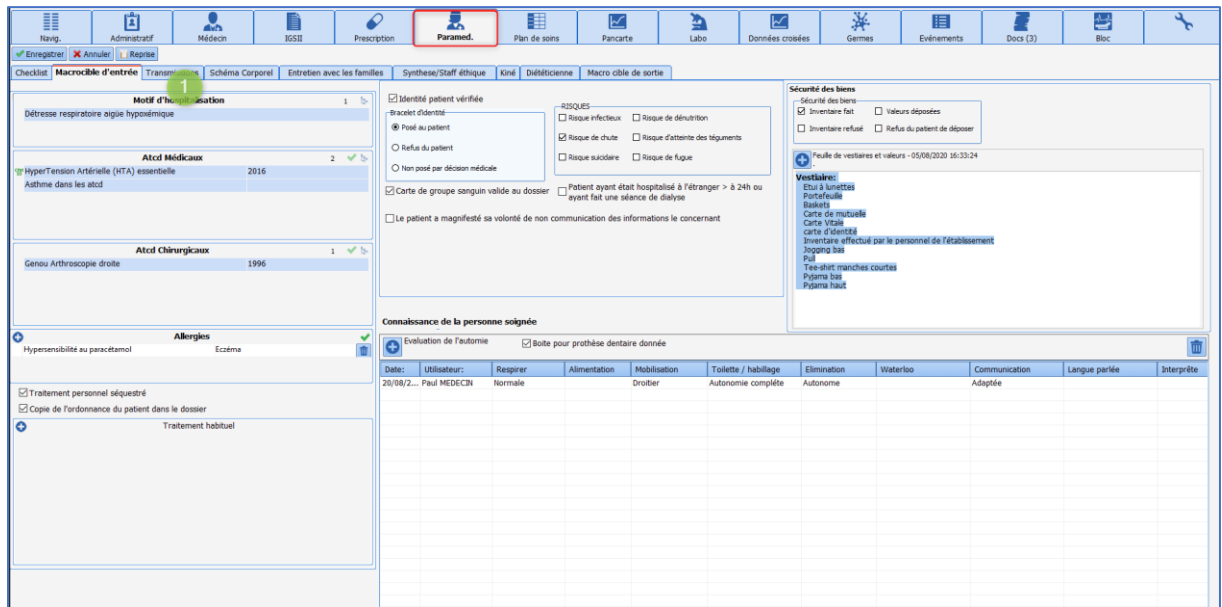


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



### 5.14.1 Sous-onglet Macro-cible d'entrée

Ce Sous-onglet reprend différentes informations telles que les antécédents, le traitement habituel... qui sont des informations recueillies par le médecin dans son observation d'entrée. Ces informations peuvent être en lecture seule, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas modifiables depuis cet onglet. Cela permet de prendre connaissance rapidement des informations sans devoir passer d'un onglet à l'autre tout en conservant un droit d'écriture restreint.

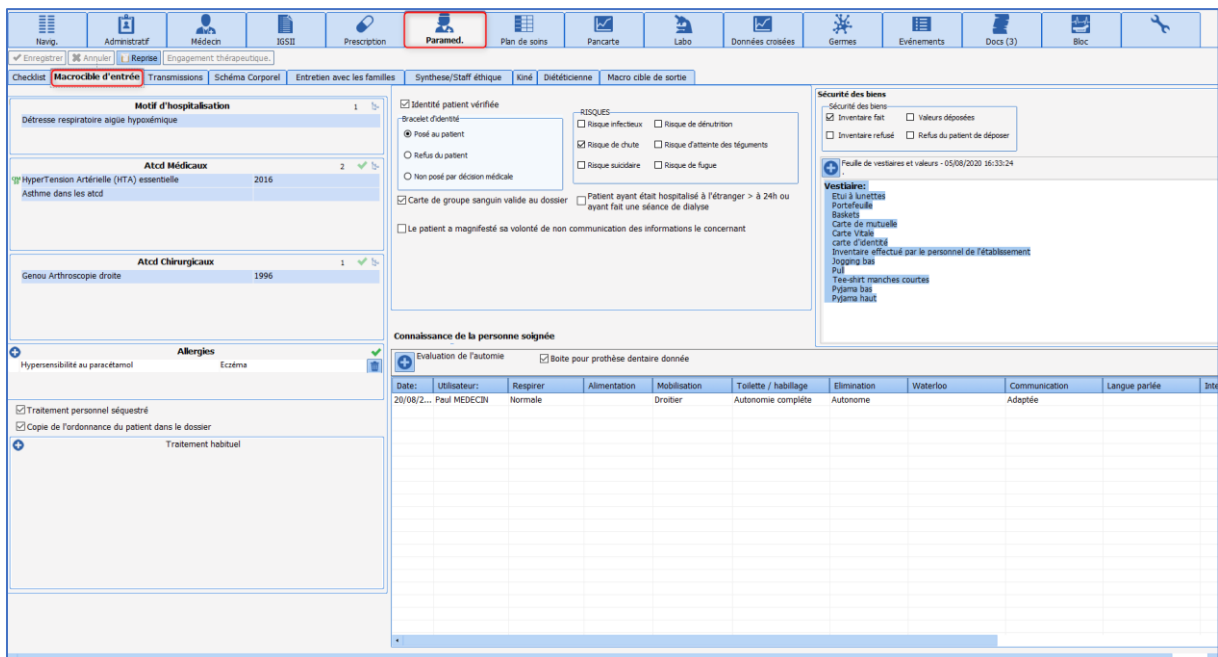D'autres informations sont également présentes sur cet onglet, celles-ci sont recueillies et renseignées par les paramédicaux. Exemple : la vérification de l'identité, la présence ou non de proches, l'évaluation de l'autonomie et des différents risques ...



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

## 5.14.2 Les transmissions ciblées

Un composant ici présent permet de saisir les transmissions en utilisant des cibles sur le modèle DAR (Données - Actions - Résultat)

Modifié le :	Par :	Cible	Données	Actions	Résultat
07/08/2020 06:37:27	BESSAC Laurent (Infirmier)	Nutrition	Nutrition entérale en cours Via avec la diet mise en place alimentation SNG dès que possible	Réévaluation demain	
06/08/2020 20:24:50	BESSAC Laurent (Infirmier)	Hémodynamique	Stable	Pas d'adaptation thérapeutique	
06/08/2020 20:22:59	BESSAC Laurent (Infirmier)	perturbation des échanges gazeux	Patient de retour de son scanner	Drain bien positionné Toujours peu productif Perle séroangéante++	Avis chirurgical demandé Réévaluation en staff demain
06/08/2020 18:15:36	HUERRE Alice (Infirmier)	perturbation des échanges gazeux	Drainage peu productif	Signalé au MAR Mobilisation	
06/08/2020 04:55:33	THOMA Thomas (Infirmier)	perturbation des échanges gazeux	Désaturation tirage ++	1) Pose d'un drain thoracique ddt ==> 900cc Compensation par 500cc de Ringer 2) Fibroscopie faite Pré-emptifs LA +anapath envoyé au labo	Drain tho ==> 200cc sur le reste de la nuit Sat 90%
06/08/2020 18:16:28	HUERRE Alice (Infirmier)	Elimination	Diurèse à 150 ml ce midi malgré amines et remplissage	Mobilisation de la sonde. BladderScan ==> 100cc Appel du MAR	pas de nette reprise
06/08/2020 12:42:02	HUERRE Alice (Infirmier)	Douleur	Patient sédaté	BPS 3 pas de changement de vitesse	
06/08/2020 12:40:06	HUERRE Alice (Infirmier)	Drainage	Mobilisation du drain thoracique	1) Radio de contrôle faite 2) Scanner thoracique prévu ce jour	
05/08/2020 19:17:49	BRETON Céline (Infirmier)	Neuro	Patient intubé / ventilé / sédaté sous hypnovel, sufentanil et tracrium	Surveillance pupillaire RAS	Score de RASS -4
05/08/2020 16:38:41	BILLE Carole (Aide soignant)	Elimination	Pose d'une sonde urinaire.	BU faites ECBU en cours	Urines concentrées

- (1) Bouton permettant l'ajout d'une transmission.
- (2) Option d'affichage des transmissions.
- (3) Historisation des transmissions depuis la cible, ou problème.
- (4) Marqueur d'importance de la cible.
- (5) Permet de venir modifier la transmission.
- (6) Permet de « clôturer » une cible. Lorsque le problème n'est plus d'actualité cela permet de n'afficher que les informations du jour. Celles-ci peuvent être ré affichées en cochant la case « Afficher les clôturées depuis plus de 24h »
- (7) Permet de supprimer une transmission. Action qui n'est possible que par l'utilisateur ayant saisi celle-ci.

### 5.14.2.1 Ajout d'une nouvelle transmission :

- Cliquez sur le bouton Ajouter une transmission (1)
- Ouverture de la fenêtre de saisie. Celle-ci se compose de quatre colonnes : cibles, données, actions, et résultat. Seule la première colonne fait appel à une liste préétablie qui n'est pas figée (2). Toutefois il reste possible de saisir manuellement les informations sans passer par la liste.
- Afin d'enregistrer la transmission il est impératif d'entrer des données dans les trois premières colonnes (cibles, données, actions).
- Enfin vous pouvez marquer la transmission comme « importante » en venant cocher la case (3).

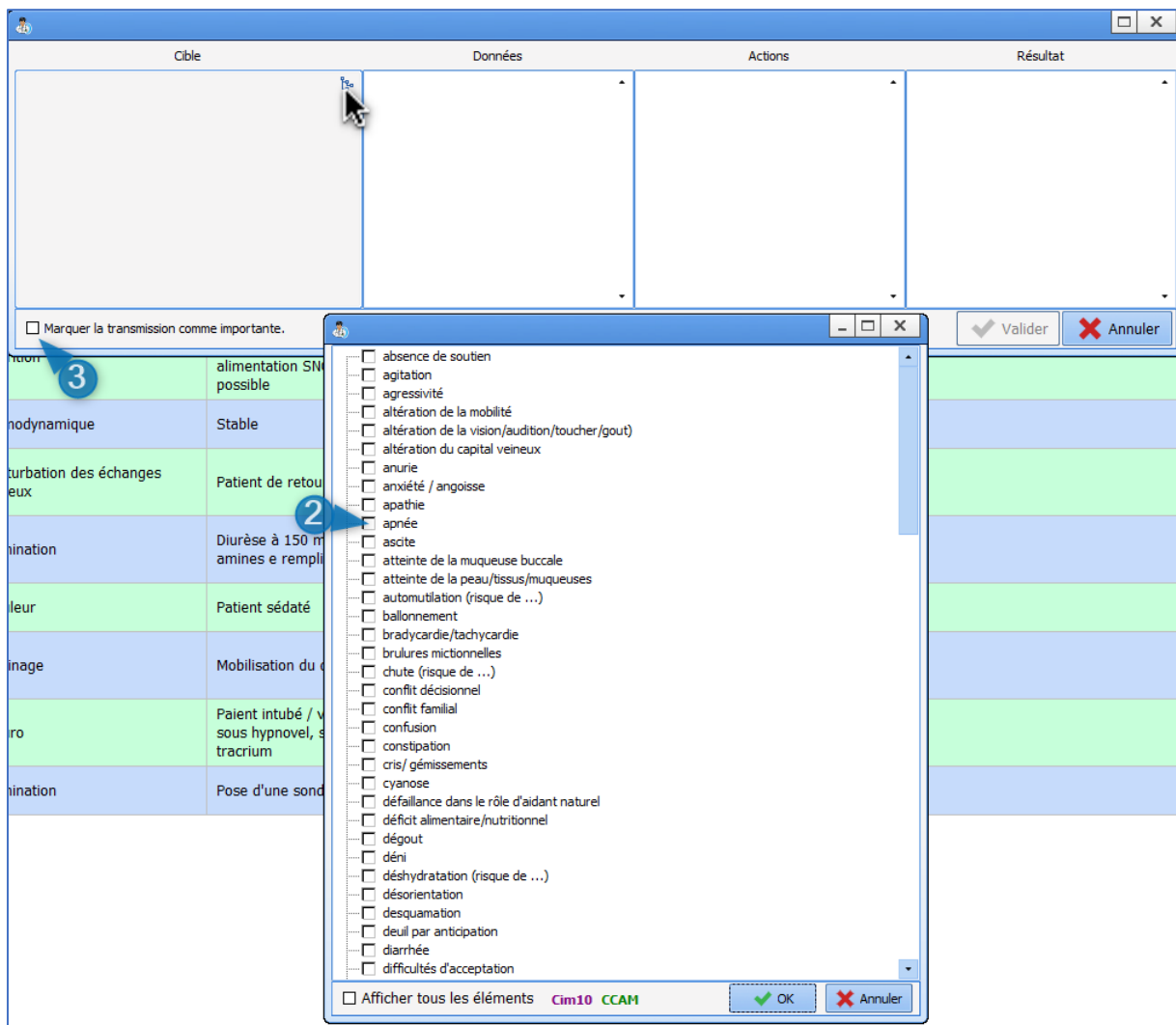


2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



### 5.14.2.2 Compléter une transmission, ou générée une transmission reprenant une cible déjà présente.

- Cliquer sur la cible à compléter.
- Ouverture de la fenêtre contextuelle avec les données précédentes saisies.

Il est possible de compléter les informations présentes ainsi que de supprimer les informations présentes afin d'en saisir de nouvelles. **Cette action ne supprimera en aucun cas le contenu original.**

## 5.15 Onglet Scores

DIANE REA est doté d'un onglet spécifique permettant la gestion du calcul de scores (IGS II, CRIB2, ...).

### 5.15.1 Saisie et validation du score IGS II

Les données extraites proviennent des différentes sources du dossier. Seules sont conservées les données issues des 24 premières heures d'hospitalisation ainsi la validation du score peut être faite a posteriori. La plus mauvaise donnée de ces 24 heures premières heures est retenue pour alimenter les champs.



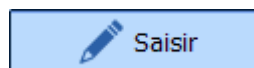
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

- A l'ouverture de l'onglet, cliquez sur le bouton **Saisir**.
- Cette action donne accès aux champs de saisies :



Administratif Médecin Prescription Paraméd. Plan de soins Evolution 7J Pancarte 12h Rénale Infect. Germes Labo **Scores**

SOFIA NIHSS Score de Lee STOP BANG questionnaire **STOP BANG Score** CORMACK EVS EVA

**IGSII**  
CRIB 2

Type d'admission: 1  
 Chirurgie programmée  Médecine  
 Chirurgie urgente

Age  
 inf à 40 ans  de 60 à 69 ans  de 75 à 79 ans  
 de 40 à 59 ans  de 70 à 74 ans  sup ou = à 80 ans

Température  
 < 39  >= 39

Urée sanguine: 3  
 < 10.0 mmol/L (ou < 0.6 g/l)  
 de 10.0 à 29.9 mmol/L (ou de 0.6 à 1.79 g/l)  
 >= 30 mmol/L (ou >= 1.8 g/l)

Natrémie  
 < 125 mEq/L  de 125 à 144 mEq/L  >= 145 mEq/L

Maladies chroniques: 2  
 Aucune  Cancer Métabasé  
 Hémopathie maligne  Sida

T.A. systolique: 5  
 < 70 mmHg  de 100 à 159 mmHg  
 de 70 à 99 mmHg  >= 200 mmHg

Leucocytes  
 < 1000 mm3  1000 à 19999  >= 20000 mm3

PaO2/FiO2 (mmHg): 4  
 < 100  >= 200  
 100-199  Patient non ventilé

HCO3 (mEq/l)  
 < 15  15-19  >= 20

Glasgow (pts)  
 < 6  de 9 à 10  de 14 à 15  
 de 6 à 8  de 11 à 13


Fréquence cardiaque  
 < 40 bpm  de 120 à 159 bpm  
 de 40 à 69 bpm  >= 160 bpm  
 de 70 à 119 bpm

Diurèse  
 < 0.5 L/24H  >= 1 L/24H  
 de 0.5 à 0.999 L/24H

Kaliémie (mEq/l)  
 < 3.0  3.0-4.9  >= 5.0

Bilirubine (umol/l) (ou si jaunisse (mg/l))  
 < 68.4 (ou < 40.0)  >= 102.6 (ou 60.0)  
 68.4-102.5 (ou 40.0-59.9)

Score IGS II (sans âge): **42** Score IGS II: **49** Risque décès (%): **43,75**

- (1) Et (2) sont des champs spécifiques communiquant directement avec les champs de saisie présents dans l'observation médicale d'entrée comme l'indique l'icône  située à droite du composant. Ceux-ci ne sont saisissables et modifiables que depuis l'onglet **Médecin**.
- (3) Exemple de champ renseigné par l'application depuis les données biologiques issues du dossier. Ici, la donnée retenue est la plus mauvaise donnée des 24 premières heures. Celle-ci est modifiable manuellement si celle-ci n'est pas représentative.
- (4) Les champs ayant un fond bleu comme ici PaO2/FiO2, indique que la donnée n'a pas pu être récupérée.
- (5) Bouton permettant d'afficher les données du dossier.

- Modifier les données si cela est nécessaire.
- Compléter les champs sur fond bleu.
- Le score se calcul automatiquement (zone encadrée de rouge).
- Valider en cliquant sur le bouton.
- Renseigner le mot de passe.
- La validation du score est alors effective : la date heure ainsi que le nom du responsable se renseignent automatiquement.





**IGSII**  
**CRIB 2**

Type d'admission  
 Chirurgie programmée  Médecine  
 Chirurgie urgente

Age  
 inf à 40 ans  de 60 à 69 ans  de 75 à 79 ans  
 de 40 à 59 ans  de 70 à 74 ans  sup ou = à 80 ans

Température  
 <39  >=39

Urée sanguine  
 < 10.0 mmol/L (ou < 0.6 g/L)  
 de 10.0 à 29.9 mmol/L (ou de 0.6 à 1.79 g/L)  
 >= 30 mmol/L (ou >= 1.8 g/L)

Natrémie  
 < 125 mEq/L  de 125 à 144 mEq/L  >=145 mEq/L

Maladies chroniques  
 Aucune  Cancer Métastasé  
 Hémopathie maligne  Sida

T.A.systolique  
 < 70 mmHg  de 100 à 199 mmHg  
 de 70 à 99 mmHg  >= 200 mmHg

Leucocytes  
 < 1000 mm3  1000 à 19999  >= 20000 mm3

PaO2/FiO2 (mmHg)  
 <100  >=200  
 100-199  Patient non ventilé

HCO3 (mEq/l)  
 <15  15-19  >=20

Glasgow (pts)  
 < 6  de 9 à 10  de 14 à 15  
 de 6 à 8  de 11 à 13

Fréquence cardiaque  
 < 40 bpm  de 120 à 159 bpm  
 de 40 à 69 bpm  >=160 bpm  
 de 70 à 119 bpm

Diurèse  
 < 0.5 L/24H  >= 1 L/24H  
 de 0.5 à 0.999 L/24H

Kaliémie (mEq/l)  
 <3.0  3.0-4.9  >=5.0

Billirubine (µmol/l) (ou si jaunisse (mg/l))  
 <68.4 (ou <40.0)  >=102.6 (ou 60.0)  
 68.4-102.5 (ou 40.0-59.9)

Score IGS II (sans l'âge):  Score IGS II :  Risque décès (%) :

Score IGS validé par MEDECIN Paul le 03/01/2023 à 12:12 (Arrivée du patient le 03/01/2023 à 12:02:00)

- Le bouton **Modifier** est alors disponible pour permettre de revenir sur la saisie si cela est nécessaire.

### 5.15.1 Saisie et validation du score CRIB II

Si aucun score n'a été saisi, la mention **Aucun enregistrement du score pour ce jour** s'affiche accompagnée du bouton .

**IGSII**  
**CRIB 2**

CRIB II (Clinical Risk Index for Babies)

Aucun enregistrement du score pour ce jour.

Le CRIB II se calcule à partir des données suivantes :

- Sexe du patient
- Durée de gestation (en semaines)
- Poids de naissance (en grammes)
- Température à l'admission (en °C)
- Base Excess (en mmol/L)



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28




CRIB II (Clinical Risk Index for Babies)

Sexe	Féminin Masculin
Gestation (semaines)	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Poids de naissance (g)	251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 à 1250 1251 à 1500 1501 à 1750 1751 à 2000 2001 à 2250 2251 à 2500 2501 à 2750 2751 à 3000
Température à l'admission (°C)	<= 29,6 29,7 à 31,2 31,3 à 32,8 32,9 à 34,4 34,5 à 36 36,1 à 37,5 37,6 à 39,1 39,2 à 40,7 >= 40,8
Base Excess (mmol/L)	<= -26 -26 à -23 -22 à -18 -17 à -13 -12 à -8 -7 à -3 -2 à 2 >= 3
Mortalité prédite (%)	
TOTAL	

L'enregistrement du score n'est possible que si tous les champs

**Information**

 Toutes les informations doivent être saisies pour pouvoir valider le score.

4.11.0.24753

Les données saisies sont sur fond bleu. Il est possible de les modifier, même si elles ont été récupérées dans le dossier du patient.

CRIB II (Clinical Risk Index for Babies)

Sexe	Féminin Masculin
Gestation (semaines)	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Poids de naissance (g)	251 à 500 501 à 750 751 à 1000 1001 à 1250 1251 à 1500 1501 à 1750 1751 à 2000 2001 à 2250 2251 à 2500 2501 à 2750 2751 à 3000
Température à l'admission (°C)	<= 29,6 29,7 à 31,2 31,3 à 32,8 32,9 à 34,4 34,5 à 36 36,1 à 37,5 37,6 à 39,1 39,2 à 40,7 >= 40,8
Base Excess (mmol/L)	<= -26 -26 à -23 -22 à -18 -17 à -13 -12 à -8 -7 à -3 -2 à 2 >= 3
Mortalité prédite (%)	12,2
TOTAL	10



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

CRIB II (Clinical Risk Index for Babies)

Sexe  Féminin  Masculin

Gestation (semaines)  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Poids de naissance (g)  251 à 500  501 à 750  751 à 1000  1001 à 1250  1251 à 1500  1501 à 1750  1751 à 2000  2001 à 2250  2251 à 2500

2501 à 2750  2751 à 3000

Température à l'admission (°C)  <= 29,6  29,7 à 31,2  31,3 à 32,8  32,9 à 34,4  34,5 à 36  36,1 à 37,5  37,6 à 39,1  39,2 à 40,7  >= 40,8

Base Excess (mmol/L)  <= -26  -26 à -23  -22 à -18  -17 à -13  -12 à -8  -7 à -3  -2 à 2  >= 3

Mortalité prédite (%) 12,2

TOTAL 10

Score validé par MEDECIN Paul le 03/01/2023 à 12:26



Dès lors qu'un score a été enregistré, l'historique est disponible. Le clic sur chaque ligne charge les valeurs saisies lors de l'enregistrement du score.

CRIB II (Clinical Risk Index for Babies)

03/01/2023 12:29

03/01/2023 12:26

Température

Le bouton  permet de récupérer la valeur du dossier si celle-ci a été modifiée manuellement a posteriori. Le survol du bouton  affiche l'historique des données saisies dans le dossier.

22  23  24  25

22 : saisi le 03/01 à 12:30

## 5.16 Onglets de données croisées : hémodynamique, respiratoire, rénal...

Un autre type d'onglet est disponible dans l'application, il permet un affichage mixé des différentes données du dossier.

Ces onglets sont dynamiques et permettent également de saisir des informations.

Ceux-ci ont pour intérêt de permettre une analyse plus fine de la clinique.

Dans l'exemple ci-dessous, les données affichées permettent de mettre en relation les différentes données en lien avec l'appareil respiratoire.

Cet affichage dynamique permet de visualiser rapidement les données sur une période plus ou moins longue



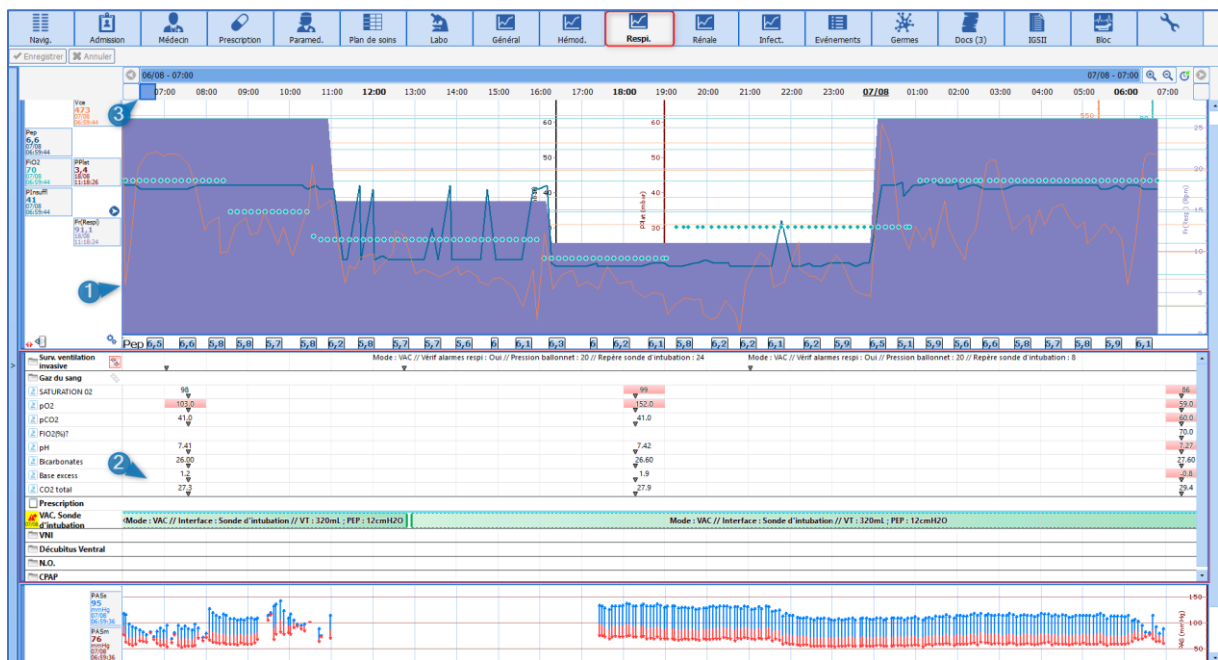
2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

simplement en glissant le curseur de temps situé en (3).



- (1) Zone de courbes permettant d'afficher les données récupérées depuis les appareils biomédicaux tels que le respirateur.  
Ces zones de courbes permettent également d'afficher des données telle que le poids, les résultats de biologie...
- (2) Zone d'affichage type **Diagrid** permettant de rendre les informations du **Plan de soins** mais aussi de les saisir.

### 5.16.1 Le journal des alarmes

On retrouve la liste des alarmes transmises par les équipements biomédicaux avec leurs heures de **Début** et de **Fin**. Plus de 500 alarmes, provenant des équipements biomédicaux reliés à **DIANE** via la liaison RS232, sont reconnues. Ces alarmes apparaissent dans l'ordre d'occurrence décroissant afin que la dernière alarme déclenchée soit toujours notée en haut du **Journal des alarmes**.

**REMARQUE :** Les alarmes ne peuvent pas être modifiées ni supprimées.

Vous avez la possibilité de faire apparaître les alarmes sous forme de 🔔 sur la ligne des marqueurs à l'aide du bouton spécifique **On/Off Alarmes** 🔔

### 5.17 Onglet Germes

Cet onglet permet le suivi du statut infectieux du patient.

Il est composé d'une zone supérieure paramétrable permettant de visualiser les différents résultats de bactériologie du patient ainsi que la durée de présence des différents dispositifs invasifs, afin de faciliter le suivi des infections nosocomiales.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

The screenshot displays the DIANE software interface for patient management. The top navigation bar includes various icons for navigation and data management. The main area is divided into several sections:

- Info patient / Résultats de bactériologie:** Shows patient details and a timeline of invasive devices (1).
- Résultats de bactériologie:** Displays laboratory results for hemoculture, respiratory samples, and other tests (2).
- Infections:** A table listing infection types, dates, germs, and treatments (3).
- Historique de localisation:** A section for tracking patient movements (4).

- (1) Durée de présence des dispositifs invasifs.
- (2) Résultats de bactériologie du patient.
- (3) Zone permettant de renseigner les différentes informations concernant les infections.
- (4) Visualisation des différents déplacements géographiques du patient au sein de l'application Diane afin de faciliter la traçabilité des patients contacts.

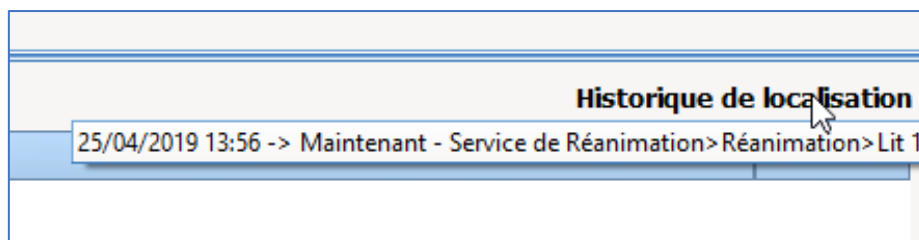Exemple salle 2 du bloc de cardiologie, chambre 6 de la Réanimation, chambre 3 de l'USC. Cette information est visible au survol de l'intitulé **Historique de localisation**.



### 5.17.1 Compléter/ Renseigner la présence d'une infection chez le patient.

- Cliquez sur le bouton **Ajouter** situé en bas à gauche de l'onglet.
- Ouverture de la fenêtre contextuelle permettant de compléter les informations.
- Renseigner différentes informations : type de germe, le type de colonisation, le germe présent ainsi que la résistance aux antibiotiques.
- Puis valider.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

**Détail de l'infection**

Type d'infection  
Pneumopathie

Début d'infection  
13/05/2020

Fin d'infection  
\_/\_/\_\_\_\_

Porteur à l'admission

Colonisation  
BMR

Détail



**Germes** 1  
Streptococcus pneumoniae (pneumocoque)

**Résistant aux antibiotiques** 1  
Méticilline

**Isolement / Précautions** 1  
Aérien

OK Annuler

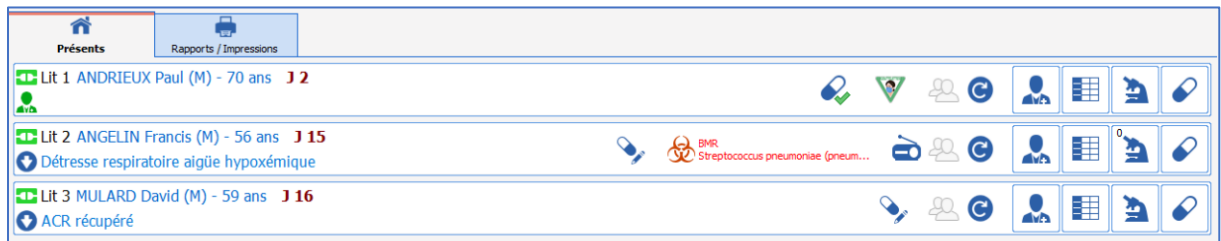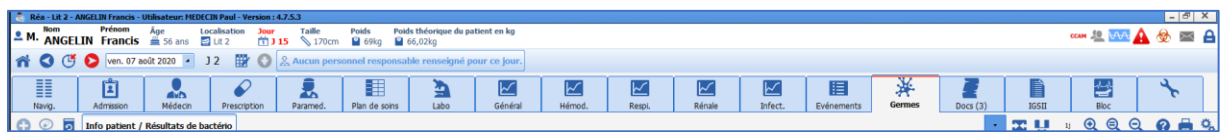Lorsqu'une colonisation de type BMR ou BHR est renseignée, un pictogramme  signalant la présence d'une infection devient visible sur le bandeau de l'application ainsi que sur le cockpit.



### 5.17.2 Infection COVID

- Cliquez sur le bouton **Ajouter** situé en bas à gauche de l'onglet.
- Ouverture de la fenêtre contextuelle permettant de compléter les informations.
- Renseigner **Coronavirus** dans **Type d'infection**



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Détail de l'infection**
✕

Type d'infection

Début d'infection

Fin d'infection

Porteur à l'admission

Colonisation

Détail


Germes

Résistant aux antibiotiques

Isolement / Précautions

Attention, la saisie de l'isolement dans cette zone n'est pas une prescription. Utilisez la zone de prescription correspondante pour prescrire un isolement.

✓ OK
✕ Annuler

L'icône  apparaît alors sur le portail et sur le bandeau du dossier du patient.

Lit n1 INS 653143 DURAND Emile M 68 ans 170 cm 80 Kg J 3

J 3













Informations supplémentaires

Réa - Lit n1 - DURAND Emile - Utilisateur: MEDECIN Yves - Version : 4.8.1.21268
⌵ ⌵ ⌵

Nom	Prénom	Âge	Localisation:	Jour	Taille	Poids initial	Poids	Poids théorique	CCAM	VAA	Alertes
M.	DURAND	Emile	Lit n1	J 3	170cm	80kg	80kg	66,02kg			 

## 5.18 Le schéma corporel

La saisie d'un élément de soins peut se faire directement à partir du sous-onglet **Schéma corporel** de l'onglet **Paramed**.

Les étapes à réaliser sont les suivantes :

- Choisir la zone d'application de l'élément de soin
- Choisir l'élément de soins,
- Remplir et le formulaire initial et planifier le formulaire suivant.

Il est possible d'associer à l'élément de soins :

- Un score,
- Une balance liquidienne,
- Des images.



2023-03-17

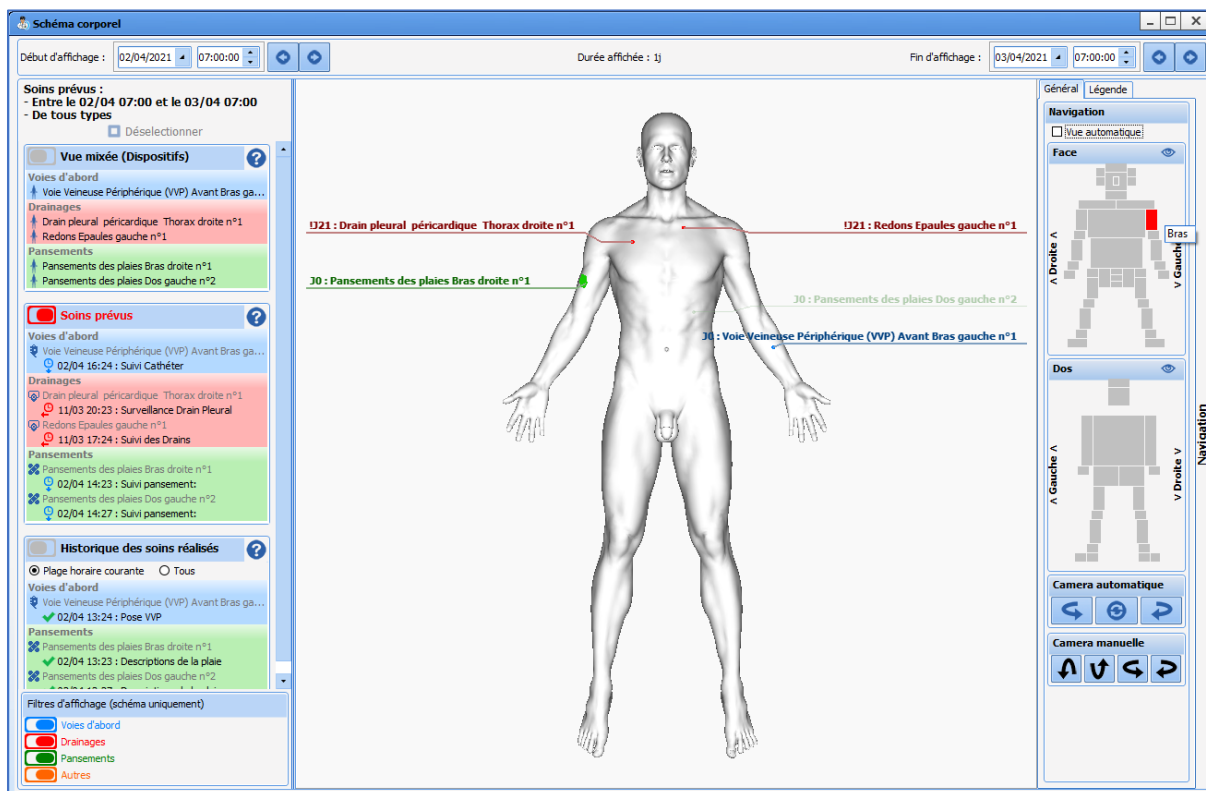
BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

## 5.18.1 Positionner un dispositif médical

Le **schéma corporel** vous permet de localiser les soins directement sur une représentation en 3D du patient. Le Schéma corporel est accessible dans chaque dossier patient depuis le sous onglet **Schéma corporel** ou depuis le bouton se trouvant dans l'onglet **Plan de soins**. Le clic sur celui-ci ouvre la fenêtre suivante :




2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



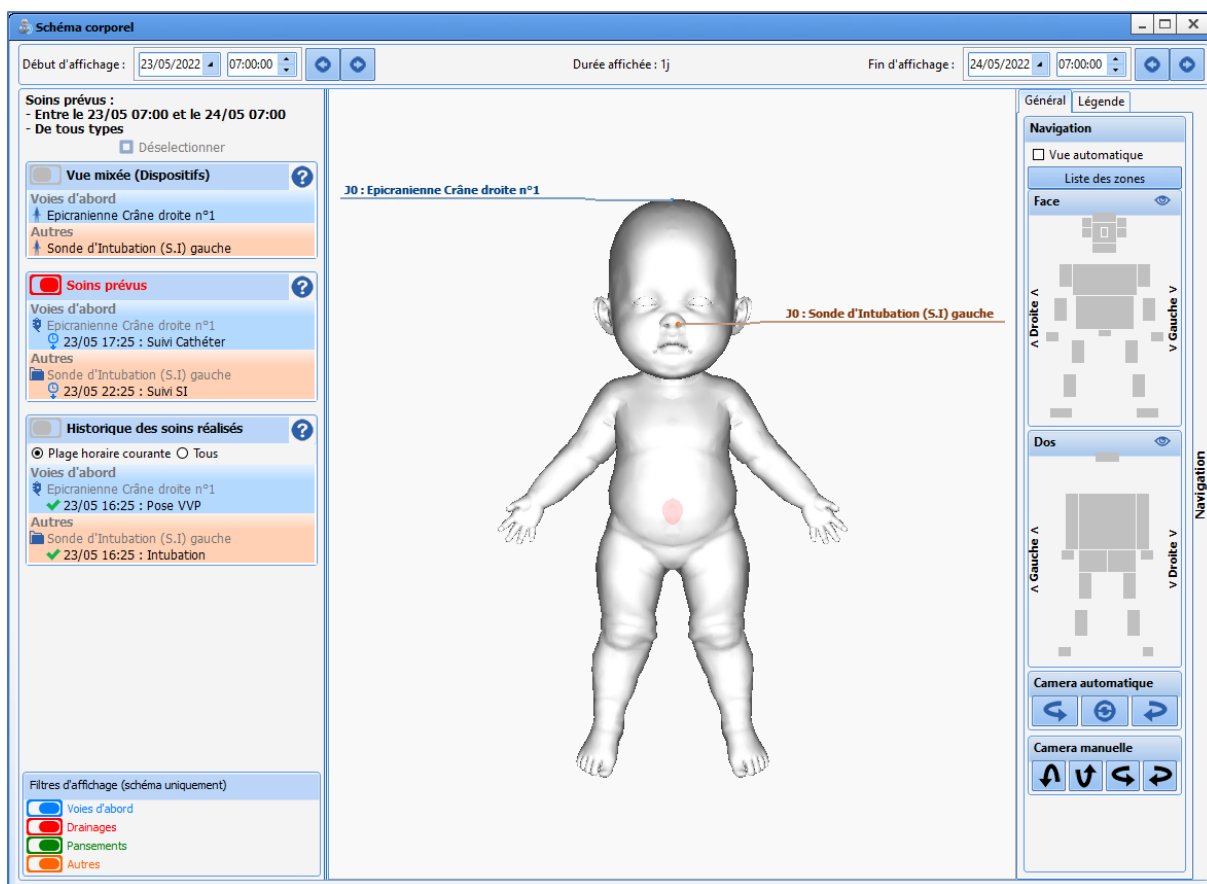
DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



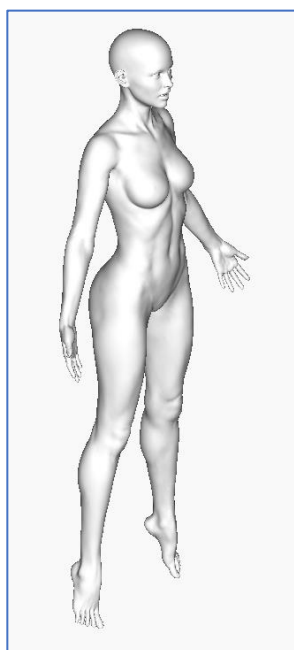La représentation 3D s'adapte au sexe du patient s'il a 3 ans ou plus au jour d'admission. Si le patient est âgé de moins de 3 ans, le schéma est celui du nourrisson, sans distinction de sexe. Si l'hospitalisation démarre avant les trois ans et se poursuit après l'anniversaire, le schéma restera au format nourrisson.



Femme

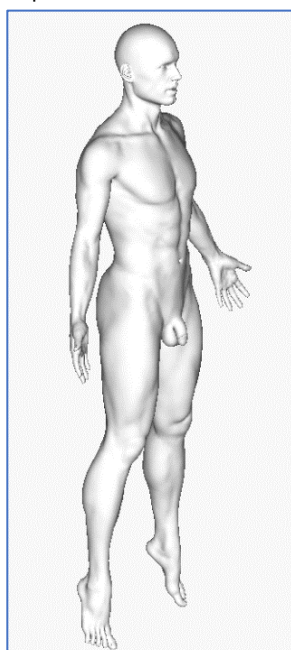

Homme



Nourrisson

La zone supérieure permet de définir la période des soins à afficher sur le schéma. La barre temporelle permet de limiter l'affichage des dispositifs et des soins prévus et à réaliser à une période comprise entre 2



2023-03-17

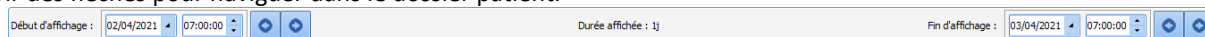
BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28




dates/heures (début d'affichage et fin d'affichage). Par défaut, les valeurs reprises sont celles sélectionnées dans le dossier du patient. Il est possible de saisir manuellement les dates dans les menus déroulants ou de se servir des flèches pour naviguer dans le dossier patient.



Sur la droite, l'onglet **Général** permet de manipuler le schéma. La case à cocher « Vue automatique » centre automatiquement le schéma sur la zone du soin sur lequel l'utilisateur a interagit.

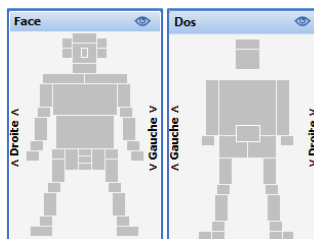Les cadres **Face** / **Dos** représentent de façon simplifiée le corps humain. Le clic sur chacune des zones centre automatiquement la caméra sur cette dernière. Le bouton  repositionne le schéma de dos ou de face. Les boutons **<Gauche>** et **<Droite>** permettent de faire tourner le schéma vers la gauche ou la droite.




Il est possible d'orienter de façon plus précise le schéma directement avec la souris ou à l'aide des caméras automatique et manuelle.

Il est également possible d'aller directement sur le zoom d'une zone en cliquant sur la zone correspondante à droite dans le volet de navigation.

Chaque zone rectangulaire grise est active et permet de zoomer sur la zone correspondante dans le schéma corporel.

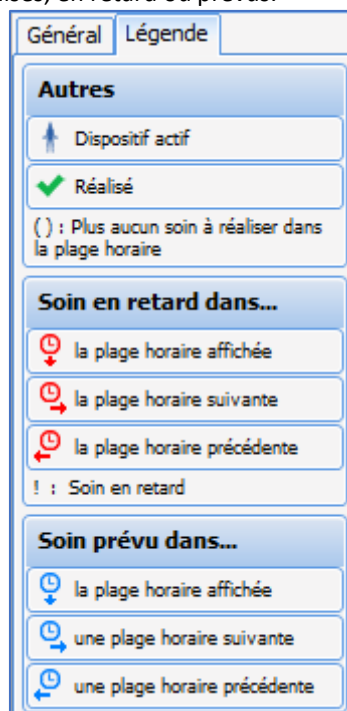L'onglet **Légende** affiche la légende des différents icônes qui permettent d'identifier, dans la colonne de gauche, les dispositifs actifs, les soins réalisés, en retard ou prévus.



La zone de gauche **Soins prévus** propose trois façons d'afficher les soins sur le schéma :

- **Vue mixée (Dispositifs)** : Affiche l'état du prochain soin prévu pour chaque dispositif. Lorsqu'il n'y a plus de soin prévu, affiche l'état du dernier soin réalisé par dispositif uniquement
- **Soins prévus** : Affiche uniquement les prochains soins prévus
- La vue **Historique des soins réalisés** liste les différents soins réalisés pour chaque dispositif. Cela inclut chaque modification de zone effectuée

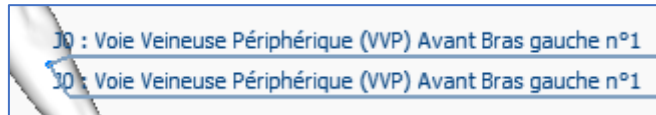


2023-03-17


BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



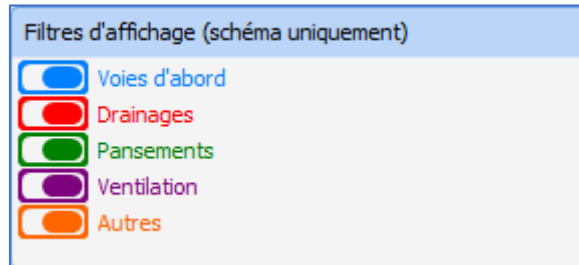
Pour alléger l'affichage (du schéma uniquement), il est possible de filtrer les différents type de dispositifs. Par exemple, la configuration suivante n'affichera que les éléments de soins de type **Voies d'abord** et **Drainages**.



Les différents éléments de soins sont identifiés par un libellé de la couleur de leur catégorie :


- En bleu pour les voies d'abord.
- En rouge pour les drainages.
- En vert pour les pansements.
- En violet pour la ventilation.
- En orange pour les autres.

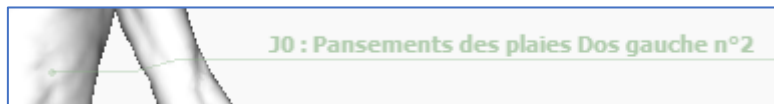Si un dispositif concerne une partie du corps non visible sur la représentation 3D, le libellé apparaît en transparence.



### 5.18.2 Choix du dispositif médical

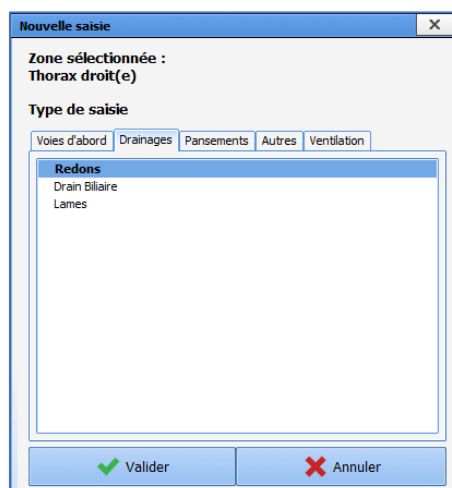Après avoir cliqué sur le schéma 3D, une fenêtre s'affiche avec les différents éléments de soins configurés pour la zone sélectionnée.




Les différents sous-onglets listent les éléments de soins configurés depuis l'outil de configuration. Le clic sur le bouton **Valider** ouvre automatiquement le formulaire de pose configuré.




### 5.18.3 Saisir le formulaire de pose du dispositif médical

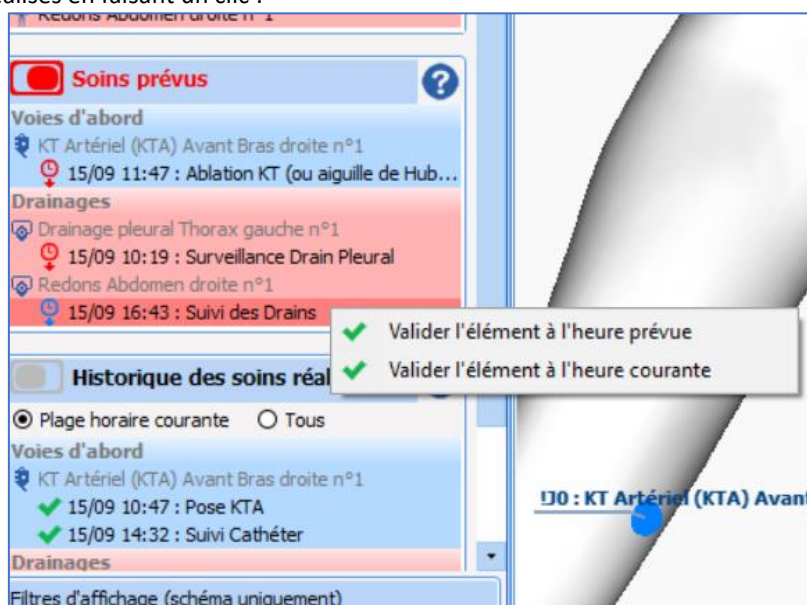Il est possible, directement depuis le schéma corporel, de valider les formulaires (suivi, retrait ou post-retrait) planifiés et non-réalisés en faisant un clic :



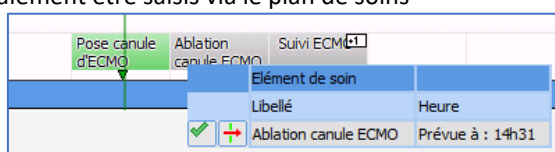Les formulaires peuvent également être saisis via le plan de soins



Les formulaires comportent les composants suivants :

Composant	Exemple
case à cocher	<input type="checkbox"/> Aspiration ok
champ de saisie multilignes	Détails: <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
champ de saisie simple	Type de cathéter: <input type="text"/>
groupe de boutons radio	Intubation <input type="radio"/> Sans fibroscope <input type="radio"/> Avec fibroscope



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

groupe de cases à cocher

Cathéter  
 perméable  fonctionnel

menu déroulant

Taille du KT:

24 G  
22 G  
20 G  
18 G  
16 G  
14 G

### Exemple de formulaire :

Redons

Date : 19/09/2022 Heure : 15:45:58  Synchroniser planifications

Redons

Drain Posé:

Fixation vérifiée

Consignes du chirurgien:

Commentaires:

COMMENTAIRES

modifier commentaire

BALANCE LIQUIDIENNE (SORTIES)

Entrez le niveau (à 15h45)

Drainage autre:  ml  Vidange après mesure

Commentaire associé à la saisie de BL :

SCORE ASSOCIÉ AU FORMULAIRE

EVA

Aucun enregistrement

IMAGES / PHOTOS ASSOCIÉES

Sélectionner l'image ou la photo à afficher

PLANIFICATION DE FORMULAIRES

Formulaire suivant (planification répétée)	Dans	Unité	Le
Suivi des Drains	2	<input checked="" type="radio"/> heure(s)	19/09/2022
Pansements des Drains	3	<input checked="" type="radio"/> jour(s)	22/09/2022

Ajouter une planification

Valider Annuler

Une fois les informations saisies, vous pouvez valider le formulaire en cliquant sur le bouton **Valider**.  
En haut de la fenêtre se trouve la zone permettant d'enregistrer l'heure de réalisation de l'élément de soin (Date et heure courante par défaut).  
Pour les formulaires répétés, il est possible de reprendre les informations saisies dans un précédent formulaire (si ce formulaire a déjà été saisi pour cet élément de soin) en dépliant le volet à la gauche du formulaire.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Page : 320 / 386

Le clic sur un des enregistrements charge le formulaire précédemment saisi et les boutons **Revenir au formulaire actuel** et **Reprendre les valeurs sélectionnées** apparaissent.

**Revenir au formulaire actuel** permet de retrouver les données du formulaire actuel. Ceci est utile pour visualiser ce qui a été saisi dans les formulaires précédents sans reprendre les valeurs de ces formulaires.

**Reprendre les valeurs sélectionnées** complète le formulaire avec les données du formulaire sélectionné.

Certains champs peuvent être configurés pour permettre de visualiser ce qui a été saisi lors de la pose. Dans ce cas, le champ est précédé de l'icône **i**. Le survol de l'icône affiche la valeur saisie lors de la réalisation du formulaire initial, c'est-à-dire à la pose du dispositif. Si aucune valeur n'a été saisie, le survol affiche ? comme valeur.

### 5.18.3.1 Associer un score

Si un score est associé à l'élément de soins, la saisie s'effectue lors de la réalisation des formulaires. Le clic sur le bouton affiche la fenêtre de saisie habituelle du score.



^ SCORE ASSOCIÉ AU FORMULAIRE

EVA

Aucun enregistrement

Saisir ou modifier score

Le score et l'heure de saisie s'affichent.

EVA

Saisi à 16h18

Douleur modérée

Saisir ou modifier score

### 5.18.3.2 Associer une balance liquidienne

#### 5.18.3.2.1 Saisie depuis le formulaire

Si une balance liquidienne est associée à un élément de soins, la saisie s'effectue lors de la réalisation des formulaires.

^ BALANCE LIQUIDIENNE (SORTIES)

Entrez le niveau (à 16h18)

Drainage autre  ml   Vidange après mesure

Commentaire associé à la saisie de BL :

La case à cocher **Vidange après mesure** permet de remettre le compteur à zéro. La balance liquidienne se saisie par niveau. Il n'est donc pas nécessaire de soustraire le niveau précédent au relevé actuel pour obtenir le bon compte. *Exemple* : si lors d'un premier relevé, le niveau d'un drain est à 50 ml puis à 70 ml lors d'un second relevé, Il suffit de renseigner 50 ml puis 70 ml dans les formulaires. L'application fera la soustraction dans la balance liquidienne et il sera comptabilisé une augmentation du niveau de 20 ml. Lors du changement de contenant, il faudra cocher la case **Vidange après mesure** afin de remettre le compte à zéro.

#### 5.18.3.2.2 Saisie depuis l'onglet Surveillance

La saisie de la balance liquidienne associée à un élément de soins est également possible à partir de l'onglet **Surveillance**.

Le clic droit sur la ligne correspondant à la balance liquidienne affiche le menu suivant :

Drainage autre

Fermer le menu

DRAIN AUTRE ▶

Autre posologie...

Supprimer

Redons n°1

Pour saisir une balance liquidienne associée à l'élément de soins, il faut cliquer sur le nom du dispositif médical associé (**Redons n°1** dans l'exemple ci-dessus). Cela affiche la fiche de saisie **BL** liée à l'élément de soins.



**BL**

Date : 26/09/2022    Heure : 16:38:40     Synchroniser planifications

**^ BALANCE LIQUIDIENNE (SORTIES)**

Entrez le niveau (à 16h38)

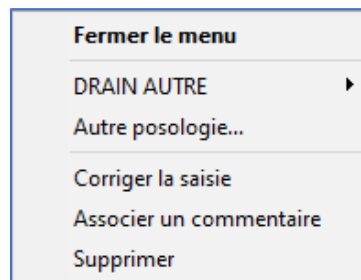
Drainage autre   ml     Vidange après mesure

Commentaire associé à la saisie de BL : Précédent niveau : 10 ml à 16h38

Il n'est pas possible d'effectuer une saisie antérieure à une saisie existante.

Il est possible de corriger ou de supprimer une saisie de balance liquidienne depuis l'onglet **Surveillance** grâce au clic droit :



Il n'est pas possible de corriger une saisie antérieure à une saisie existante.

### 5.18.3.3 Associer des images ou des photos

Il est possible d'associer une image ou une photo à un élément de soins.

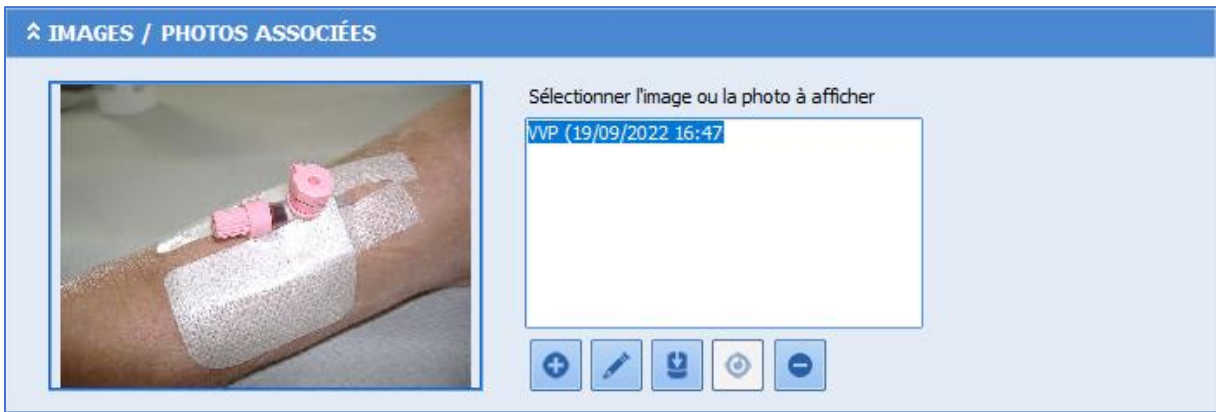
**^ IMAGES / PHOTOS ASSOCIÉES**



Sélectionner l'image ou la photo à afficher

+
✎
↓
⌂
-

Le bouton permet d'ajouter une image présente sur le poste utilisé. Si une image a été ajoutée à l'onglet **Documents**, elle est récupérable grâce au bouton : dans ce cas elle est supprimée de la liste des documents.





Il est possible de modifier l'image en cliquant sur le bouton . Le bouton  annule les modifications apportées. Seule l'image associée au formulaire en cours d'édition est modifiable : les images ajoutées dans un formulaire précédent ne sont pas modifiables.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



### 5.18.3.4 Choix et planification du formulaire suivant

Le formulaire suivant est sélectionnable, il est possible de choisir :

- un des formulaires de surveillance configurés,
- le formulaire de retrait (si configuré),
- Aucune planification (le soin est terminé).

Formulaire suivant (répété) :	Dans :	Unité	A :	Le
<input type="checkbox"/> Suivi Cathéter	3	<input type="radio"/> minute(s) <input checked="" type="radio"/> heure(s) <input type="radio"/> jour(s)	18:25:08	01/04/2021
<input type="checkbox"/> Pansement Voies veineuses et Artérielles	4	<input type="radio"/> minute(s) <input type="radio"/> heure(s) <input checked="" type="radio"/> jour(s)	15:25:08	05/04/2021

Deux modes de planification sont possibles pour le formulaire suivant :

- en choisissant un intervalle à partir du formulaire courant,
- en choisissant la date et l'heure.

Il est possible de planifier plusieurs formulaires, ou de supprimer certains formulaires configurés pour l'élément de soins. Il n'est pas possible de supprimer toutes les planifications : s'il ne faut plus planifier de formulaire, il faut choisir **Aucune planification**.

Dans le plan de soin, un clic dans la colonne d'en-tête permet au choix :

- de réaliser un soin planifié,
- d'ajouter un soin non planifié parmi les formulaires configurés. Si un score et/ou une balance liquidienne sont associés au dispositif, il est possible de ne saisir que le score ou la balance liquidienne,
- de retirer le dispositif.

Quelle action souhaitez-vous réaliser ?

Réaliser un soin planifié

Ajouter un soin non planifié

Saisir la balance liquidienne "Drainage autre"  
Saisir le score "EVA"  
Suivi des Drains  
Pansements des Drains

Retirer le dispositif (formulaire "Ablation Drain")

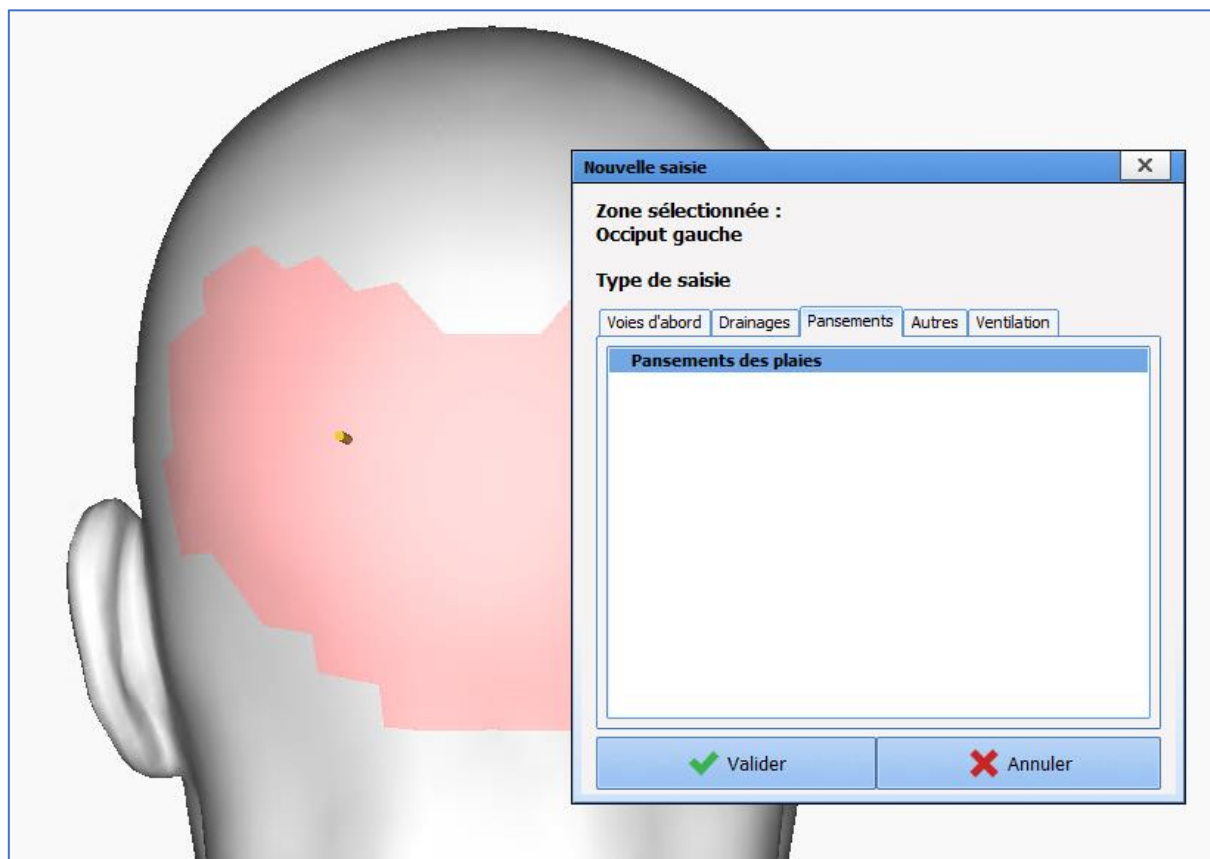
### 5.18.3.5 Exemple : pose d'un pansement

Lorsque vous cliquez à un endroit sur le modèle, une fenêtre de dispositif apparaît et affiche les éléments de soins configurés pour la zone correspondante.



Ces **éléments de soins** sont classés en quatre catégories :

- Voies d'abord,
- Drainages,
- **Pansements,**
- Ventilation,
- Autres.



Dans la suite de ce chapitre, nous allons voir la gestion d'un pansement depuis sa pose jusqu'à son retrait.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Descriptions de la plaie

Date : 06/10/2022 Heure : 14:58  Synchroniser planifications

**Descriptions de la plaie**

Type de plaie  
Autre type de plaie:  
Consignes du chirurgien:  
Description du pansement:  
Commentaires:

**COMMENTAIRES**

**IMAGES / PHOTOS ASSOCIÉES**

**PLANIFICATION DE FORMULAIRES**

Formulaire suivant :  
Suivi pansement:  
Planification répétée  
1ère prévue à 15h58

Début de planification 06/10/2022 à 14:58

Tou(te)s les 1 heure(s) jours : L M M J V S D

Les heures suivantes :  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

+ Ajouter une planification

Validier Annuler

Il y a deux choix :

**PLANIFICATION DE FORMULAIRES**

Formulaire suivant :

- Suivi pansement:
- Suivi pansement:
- Aucune planification

Planification répétée  
1ère prévue à 15h58

Début de planification 06/10/2022 à 14:58

Tou(te)s les 1 heure(s) jours : L M M J V S D

Les heures suivantes :  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Dans ce menu, le (ou les) formulaire(s) de surveillance planifié(s) ainsi que le formulaire de retrait (s'il est planifié). Les premiers sont les éventuelles surveillances puis vient le formulaire de retrait.

**REMARQUE :** l'option **Aucune planification** est la seule option systématiquement proposée. Les autres sont configurées par les référents.

Chacune des options possède sa configuration propre par défaut en ce qui concerne la planification



Formulaire suivant : Dernier pansement	Début de planification 06/10/2022 à 14:58
	Le 06/10/2022 à 15:58

L'enchaînement des formulaires de soin de surveillance se construit au fur et à mesure de la situation.

PLANIFICATION DE FORMULAIRES	
Formulaire suivant : Suivi pansement:  Planification répétée 1ère prévue à 15h36	Début de planification 07/10/2022 à 14:36  Tou(te)s les 1 heure(s) jours : L M M J V S D Les heures suivantes : 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Formulaire suivant : Pansement simple	Début de planification 07/10/2022 à 14:36  Le 07/10/2022 à 17:36
+ Ajouter une planification	

Dans cet exemple, à la réalisation du formulaire **Suivi pansement**, le formulaire **Pansement simple** est planifiable puisqu'il a été configuré pour être réalisé 3 heures après le formulaire **Suivi pansement**. Le formulaire **Suivi pansement** est à nouveau planifié puisqu'il a été configuré comme formulaire répété.

Une autre planification peut être ajoutée : le formulaire de retrait (formulaire **Dernier pansement** dans cet exemple) ou un autre formulaire de surveillance configuré (formulaire **Réfection de pansement complexe** dans cet exemple).



Formulaire suivant : Suivi pansement:	Début de planification 07/10/2022 à 14:36 Tou(te)s les 1 heure(s) jours : L M M J V S D Les heures suivantes : 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Formulaire suivant : Pansement simple	Début de planification 07/10/2022 à 14:36 Le 07/10/2022 à 17:36
Formulaire suivant : Dernier pansement Dernier pansement Suivi pansement: Pansement simple Refection de pansement complexe	Début de planification 07/10/2022 à 14:36 Le 07/10/2022 à 15:36

### 5.18.3.6 Exemple : retrait d'un pansement

Le retrait d'un dispositif peut s'effectuer de plusieurs manières :

- en prescrivant le retrait du dispositif via l'onglet **Prescription** et en réalisant l'occurrence associée dans le plan de soin,
- en réalisant un formulaire de retrait planifié,
- en faisant un clic gauche dans la colonne des intitulés dans le plan de soins et en réalisant l'action **Retirer le dispositif**

**Quelle action souhaitez-vous réaliser ?**

Réaliser un soin planifié  
 Ajouter un soin non planifié  
 Retirer le dispositif (formulaire "Dernier pansement")

- en cliquant sur le bouton  (**Retirer le dispositif**) d'un formulaire planifié

Descriptions de la plaie	Dernier pansement	Elément de soin	Heure
		Libellé	
		Suivi pansement:	Prévue à : 15h36
		Retirer le dispositif (formulaire "Dernier pansement")	

- en faisant un clic droit sur un soin prévu dans la fenêtre **Schéma corporel** puis **Retirer le dispositif**


- ✓ Valider l'élément à l'heure prévue
- ✓ Valider l'élément à l'heure courante
- ✗ Marquer comme non réalisé
- ↕ Retirer le dispositif (formulaire "Dernier pansement")

Après validation du retrait (et éventuellement du formulaire post-retrait), la colonne de gauche reprend la liste des dispositifs dans la vue mixée, le retrait ayant été effectué, il n'y a plus de soins prévus pour le dispositif.

The screenshot shows a medical software interface with the following components:

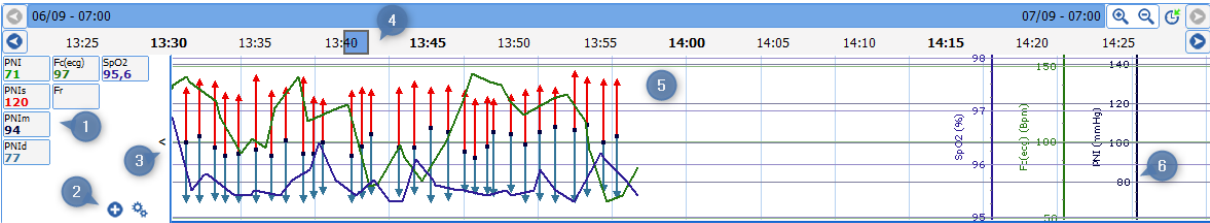
- Top Bar:** "Début d'affichage : 02/04/2021 07:00:00" and "Durée affichée : 1j".
- Left Panel (Soins réalisés):**
  - Summary: "- Entre le 02/04 07:00 et le 03/04 07:00 - De tous types".
  - Buttons: "Déselectionner", "Vue mixée (Dispositifs)", "Soins prévus", "Historique des soins réalisés".
  - Historique des soins réalisés:
    - Plage horaire courante (selected) / Tous
    - Pansements des plaies Avant Bras droite n°1
    - 02/04 09:22 : Descriptions de la plaie
    - 02/04 10:22 : Suivi pansement
    - 02/04 10:53 : Dernier pansement
- Right Panel (Pansements des plaies Avant Bras droite n°1):**
  - Localisation: Avant Bras (Côté droite)
  - Saisi le 02/04 à 09:22
  - Durée : 1h 30min (Terminé)
  - Détails: Pansement renforcé : Non
  - Retrait effectué le 02/04 à 10:53
- Body:** A 3D anatomical model of a human torso with a red arrow pointing to the right arm, indicating the location of the dressing.

### 5.19 L'écran de synthèse


L'écran de synthèse est un affichage personnalisable qui permet de visualiser l'ensemble des données importants du dossier d'un patient. Il est accessible dans le dossier du bandeau ou dans le portail grâce au bouton .

A l'ouverture de l'écran de synthèse, chaque zone configurée est initialisée avec les données du dossier. Si l'écran de synthèse comporte le composant **Conclusions de staff** ou **Prescription**, le bouton **Accès en écriture** est affiché. Le clic sur celui-ci permet d'éditer ces deux composants et ouvre le dossier patient sur l'onglet de prescription. Depuis le portail, le dossier est donc ouvert automatiquement.

#### 5.19.1 Données de surveillance



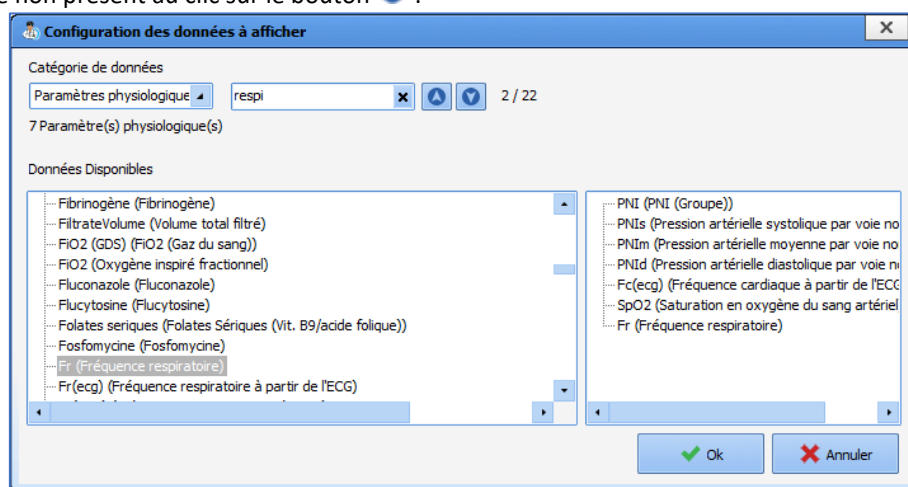Cette zone affiche les paramètres physiologiques comme dans la pancarte de surveillance **Bloc**. On retrouve en (1) la liste des paramètres par défaut configurés ainsi que la dernière valeur du dossier. Il est possible d'ajouter un paramètre non présent au clic sur le bouton **+** :




La colonne de gauche liste l'ensemble des données physiologiques. La colonne de droite liste les données présentes dans la bande. L'ajout d'un nouveau paramètre se fait à l'aide du glisser/déposer de la zone de gauche vers la zone de droite.

Comme dans une pancarte classique, le clic droit sur une donnée propose sa configuration avancée.

La zone d'affichage des paramètres peut être masquée au clic sur le bouton **<** du volet (3).

La zone (5) affiche les données reçues ainsi que les échelles associées (6) en tenant compte de la plage horaire affichée (4) et de la configuration de chacun des éléments. Par défaut, cette plage horaire correspond à celle configurée. Il est possible de la modifier à l'aide des boutons de loupes ( Zoom avant/ Zoom arrière). La navigation dans le dossier se fait à l'aide du carré bleu ( 13:40 ) présent sur la barre horaire, en le glissant de gauche à droite. Le clic sur l'horloge permet de revenir à l'heure actuelle.

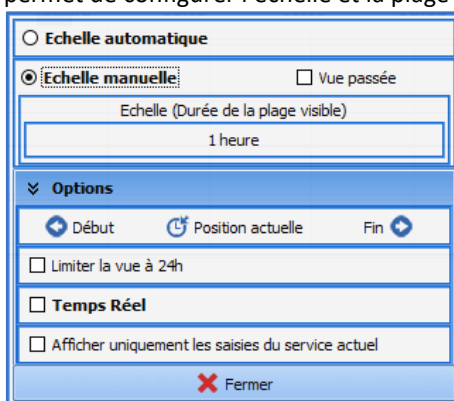Le double- clic sur la barre horaire permet de configurer l'échelle et la plage horaire affichée :



Cette fenêtre est initialisée avec les données configurées dans l'écran de synthèse.

## 5.19.2 Eléments importants

⤴ Eléments importants

**Evolution médicale Réa**  
**17/01:**  
- Patient sédaté / ventilé. RASS-4 FIO2 50% sat 95%

**Synthèse médicale Réa**  
- Examen cardio-vasculaire:- Souffle carotidien droit- hémodynamique instable TA= 10/5- Marbrures des genoux- Auscultation Cardiaque Bruits du coeur assourdis

Les données affichées correspondent aux données marquées comme importantes dans les composants de saisie configurés (documents de type Evolution médicale).

Pour chaque information présente, on retrouve la date de saisie ainsi que le nom du composant souligné en gras (si plusieurs documents ont été configurés pour alimenter les éléments importants).

Si plusieurs données ont été marquées comme importantes depuis un même document, les informations sont saisies les unes sous les autres et précédés d'un tiret -.

## 5.19.3 Visualisation des champs de données

⤵ Synthèse médicale

**Motif d'admission**  
- Détresse respiratoire aigüe hypoxémique

**Antécédents Médicaux**  
- Asthme, HyperTension Artérielle (HTA) essentielle 2016

**Antécédents Chirurgicaux**  
- Genou Arthroscopie droite 2016

**Allergies**  
- Hypersensibilité à l'amoxicilline

Ce composant est uniquement en lecture seule. Les données affichées sont celles configurées : elles sont affichées dans le même ordre que la liste en configuration.





## 5.19.4 Visualisation des résultats de laboratoire


❏ Résultats de laboratoire	
Acide lactique : 13.10mmol/L	30/09 12:27
ALBUMINE : 20g/L	30/09 12:27
Poids : 69Kg	01/10 14:22
Excès Base Artériel (GDS) : Aucun résultat	
Bicarbonates : 27.60mmol/L	02/10 07:21
Bilirubine conjuguée : 4.2µmol/L	30/09 12:27
Calcium : 1.99mmol/L	30/09 12:27
Créatinine : 39µmol/L	02/10 08:02
DDimères : 5.89µg/mL	30/09 12:27
FIO2(%)? : 70.0%	02/10 07:16
Glycémie : 8.34mmol/L	02/10 08:02
Hématies /mL : 90640/mL	30/09 15:40
Hématocrite : 42.3%	02/10 07:41
Hémoglobine : 14.3g/dL	02/10 07:41

Ce composant est en lecture seule.

La liste des données affichées correspond à celle configurée. Les éléments sont affichés dans l'ordre configuré.

Si une donnée possède plusieurs résultats, seul le dernier est affiché.

Si une donnée n'a pas de résultat, la mention **Aucun résultat** est affichée.

Le bouton  permet d'afficher l'ensemble des résultats du dossier du patient classés par date et déplaçables dans une fenêtre. Le fonctionnement est le même que le bouton **Importer par date** des composants de saisie d'évolution.

## 5.19.5 Balance liquidienne

Balance liquidienne des dernières 24H : 96 ml (Début : hier à 09h23 - Fin : aujourd'hui à 09h23)

L'affichage de la balance liquidienne est positionné en haut de l'écran de synthèse et prend toute la largeur.

Attention, contrairement aux autres composants, la balance liquidienne est mise à jour toutes les dix minutes.

Balance liquidienne des dernières 24H : 96 ml (Début : hier à 09h23 - Fin : aujourd'hui à 09h23)

Le survol du filtre d'affichage souligne le texte et permet de cliquer afin d'afficher la fenêtre de balance liquidienne.



## 5.19.6 Prescriptions en cours

Prescriptions en cours

Afficher les prescriptions terminées des 4 dernières heures

Amines  
**NORADRENALINE BITARTRATE 24 mg** : en continu IV pdt 1 j Objectif PAM > 70 mmHg  
Administration en attente de validation depuis le 17/01/23 à 16:25:00

Anticoagulants  
**ENOXAPARINE SODIQUE 4000 UI** : 1x/j sous-cutanée pdt 1 j  
Administration en attente de validation depuis le 17/01/23 à 16:25:00

Antibio./Anti-infectieux  
**CEFTRIAZONE 2000 mg** : 2x/j IV pdt 1 j  
Administration en attente de validation depuis le 17/01/23 à 16:25:00

Paramètres ventilatoires  
**Mode : VAC Interface : Sonde d'intubation FR : 20bpm ; VT : 400mL ; FiO2 : 35% PEP : 10cmH2O ; I/E : 1/2 Non défini(e) SaO2 de 92% à 98% en continu :**

Ce composant affiche en temps réel les prescriptions en cours. Les champs de prescriptions sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été configurés.

La case à cocher **Afficher les prescriptions réalisées des X dernières heures** et permet d'afficher dans les prescriptions en cours ainsi que les prescriptions réalisées dans les X dernières heures : seule la dernière occurrence est affichée, précédée de la mention « Dernière administration le... ». La zone de saisie permet de définir la période d'affichage des prescriptions réalisées (entre 0 et 72h).

L'affichage est classé par champ de prescription. Pour chaque champ, on retrouve la liste des administrations en cours ou réalisées dans les X dernières heures.

Amines

**NORADRENALINE BITARTRATE : 24 mg** en continu IV pdt 3 j Objectif PAM > 70 mmHg  
Administration en attente de validation depuis le 15/06/22 à 14:29:01

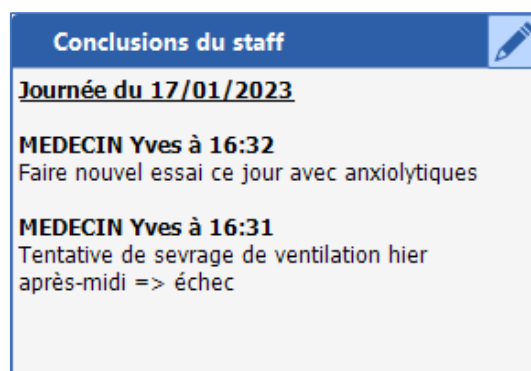
Titre du champ de prescription

Informations sur la prescription


Informations sur l'administration


Au sein d'un même champ de prescription, les prescriptions réalisées apparaissent en premier. Les autres prescriptions sont triées par ordre alphabétique.

## 5.19.7 Visualisation des conclusions du staff






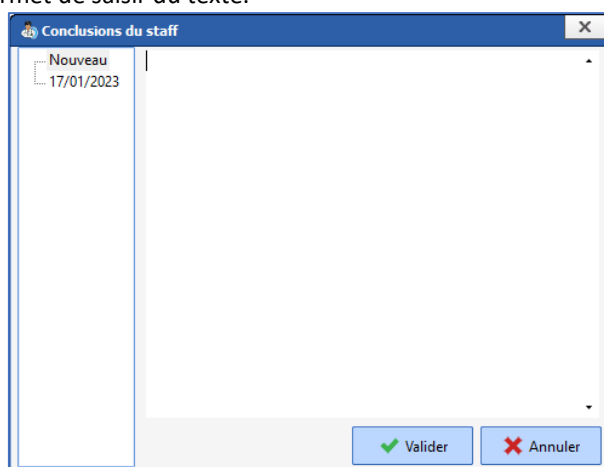Le composant **Conclusions du staff** affiche toutes les données saisies pour la journée en cours, c'est-à-dire depuis minuit. Si aucune donnée n'a été saisie pour la journée en cours, ce sont les dernières données saisies qui sont affichées.

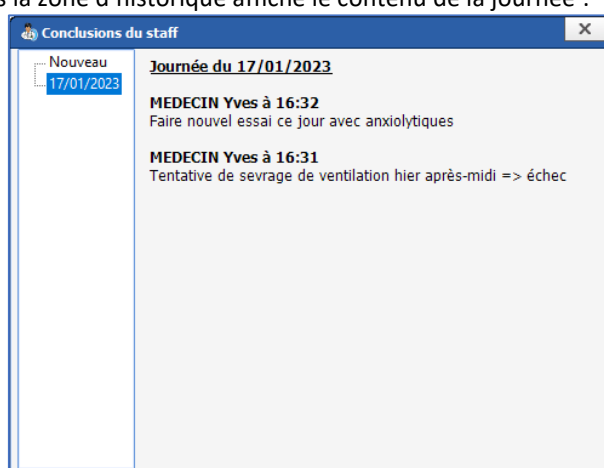Le clic sur le bouton  permet de saisir du texte.



Le clic sur une journée dans la zone d'historique affiche le contenu de la journée :




Si le composant est configuré en lecture seule, le bouton d'ajout des informations  est remplacé par le bouton d'affichage de l'historique . Dans ce cas, il n'est pas possible d'ajouter des informations.

**Conclusions du staff**
↻

**Journée du 17/01/2023**

**MEDECIN Yves à 16:32**  
Faire nouvel essai ce jour avec anxiolytiques

**MEDECIN Yves à 16:31**  
Tentative de sevrage de ventilation hier après-midi => échec

Les conclusions de staff sont disponibles à l'impression de la liste des patients présents depuis le portail : .

### 5.19.8 Visualisation des transmissions ciblées

⌵
**Transmissions ciblées**

**Elimination**  
D : Pose d'une sonde urinaire  
A : BU faites ECBU en cours  
R : Urines concentrées

**Hémodynamique**  
D : Stable  
A : Pas d'adaptation thérapeutique

**Neuro**  
D : Patient intubé / ventilé / sédaté sous hypnovel, sufenta et tracrium  
A : Surveillance pupillaire RAS  
R : Score de RASS -4

Ce composant affiche toutes les transmissions ciblées non clôturées éditées dans les dernières 24 ou 48 heures, selon le paramétrage. Si une transmission a été éditée plusieurs fois, seule la dernière version de celle-ci est affichée.

La cible est affichée en gras, les transmissions urgentes sont affichées en rouge.

La donnée est précédée de la lettre **D**, l'action de la lettre **A** et le résultat de la lettre **R**.

Si le résultat n'est pas renseigné, la ligne correspondante n'est pas affichée.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 5.19.9 Suivi des dispositifs

☯ Suivi des dispositifs

**Voie Veineuse Centrale (VVC)**(Durée : 2j 2min)  
Localisation : Epaules gauche  
Prochain Surveillance VVC le 17/01 à 20:53  
Prochain Changement de tubulures (avec lipides) le 18/01 à 16:53  
Prochain Changement de tubulures le 21/01 à 16:53  
Prochain Pansement Voies veineuses et Artérielles le 24/01 à 16:53

**KT de Dialyse (KTD)**(Durée : 39s)  
Localisation : Abdomen  
Prochain Suivi Cathéter le 17/01 à 22:54  
Prochain Ablation KT (ou aiguille de Huber) le 18/01 à 16:54

**Sonde de Blackmore**(Durée : 7j 6h 1min)  
Localisation : Face  
Prochain Suivi SNG le 17/01 à 17:54

Le composant affiche l'ensemble des dispositifs en cours dans le dossier du patient. Pour chaque dispositif, les formulaires programmés sont indiqués avec la date/heure de planification.

Le survol d'un formulaire programmé, pour lequel un précédent formulaire a déjà été renseigné dans le dossier, souligne la ligne et fait apparaître le détail du dernier formulaire renseigné :

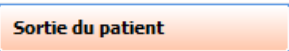
**Dernier suivi le 09/09 à 16:25**

Tubulures changées : Oui

KTD (Durée : 3min)

## 5.20 La sortie du patient

La sortie du patient se fait depuis le bouton **Sortie du patient** situé dans l'onglet **Navigation**.

En cliquant sur le bouton  situé en bas de la première colonne de l'onglet navigation, une fenêtre s'ouvre et permet de choisir de clôturer le dossier ou de transférer le patient. La clôture du dossier doit être choisie lorsque le dossier du patient ne sera plus suivi dans **DIANE** alors que le dossier doit être transféré si le suivi dans un autre service se fait toujours dans le logiciel **DIANE** même s'il s'agit d'un module différent.

Ex : lorsqu'un patient vient du bloc opératoire et que le bloc opératoire utilise **DIANE ANESTHESIE** : dans ce cas, le patient sera transféré en sortie de bloc opératoire. En fin d'hospitalisation, si le patient est transféré dans un service de médecine qui n'utilise pas **DIANE**, alors, le dossier devra être clôturé. Cependant, si le patient est hospitalisé dans un service (USC par exemple) qui utilise **DIANE**, alors, le patient devra être transféré.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Êtes-vous sûr(e) de vouloir fermer le dossier ?

### Fermer le dossier du patient Serge LARGILLIERE ?

Choisissez les actions à effectuer pour le dossier

Cloturer le dossier

Transférer : Réveil

Heure de sortie de réanimation  
17:00:00 31/07/2018

Imprimer le dossier

Lors de la sortie du patient, il est possible que des actions doivent être effectuées pour permettre la validation de la clôture du dossier ou de son transfert (checklists non remplies, prescription encore en cours...). **DIANE** demandera alors de valider les checklists et demandera si vous souhaitez maintenir les prescriptions en cours. Il est possible de les maintenir en cas de transfert de dossier. En cas de clôture, il est préférable de stopper toutes les prescriptions en cours.

**REMARQUE :** Une fois sorti, il sera possible de rouvrir le dossier du patient en cliquant sur **Reprendre la réanimation** dans la fenêtre de sélection d'intervention.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)

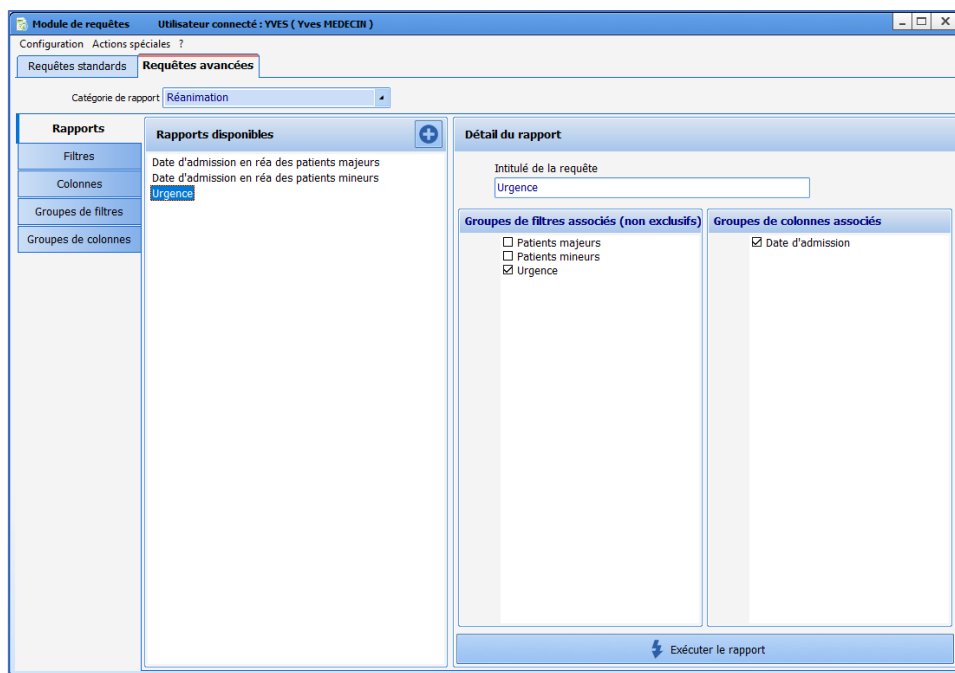


DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 6. REQUETES

L'outil de requêtes permet d'extraire de la base de données des informations dans le but d'effectuer des statistiques (temps d'occupation des blocs opératoires, durée moyenne et écart-type de séjour sur site...). Il existe 3 catégories de rapports (Anesthésie, Réanimation ou Obstétrique).

### 6.1 Présentation du module de requêtes




Le module de requêtes permet de générer des rapports. Pour chaque rapport, vous pouvez configurer les filtres de données et choisir les colonnes à afficher.


### 6.2 Création des filtres et des groupes de filtres

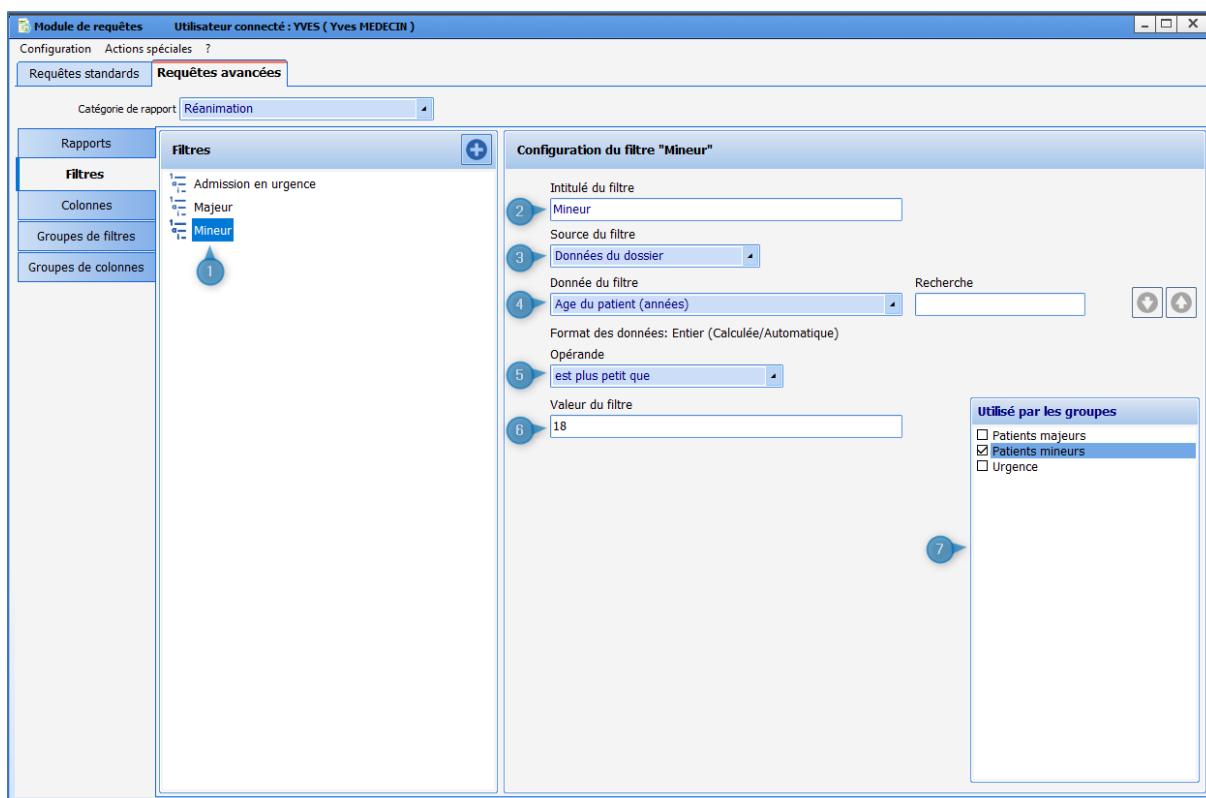Les filtres se configurent dans le sous-onglet **Filtres**.





1. Liste des filtres déjà configurés
2. Nom du filtre
3. Source des données filtrées
4. Donnée sur laquelle se base le filtre
5. Opérande : dépend du type de donnée (nombre, date ou texte)
6. Valeur à laquelle la donnée est éventuellement comparée : dépend de l'opérande et du type de données
7. Liste des groupes de filtres utilisant le filtre en cours de configuration : il est possible d'affecter le filtre à un groupe de filtres en cochant la case (ou de le retirer en décochant la case)

Pour créer un groupe de filtres, il faut cliquer sur le bouton , nommer le filtre et cocher les filtres affectés à ce groupe.




Un groupe de filtres permet de sélectionner les données qui passent l'ensemble des filtres du groupe. Par exemple, un groupe composé des filtres **Age≥20 ans** et **Age<30 ans** sélectionneront les patients âgés de 20 ans à 29 ans inclus.






## 6.3 Création des colonnes et des groupes de colonnes

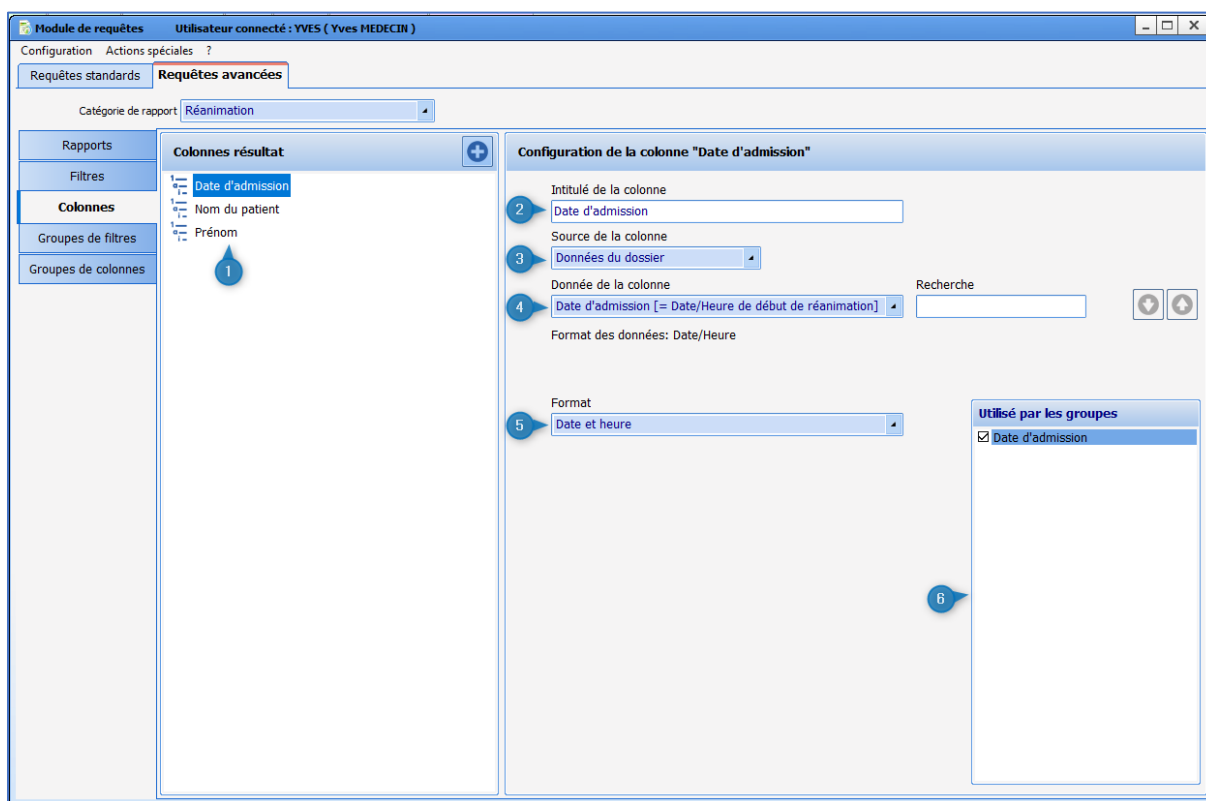Les colonnes se configurent dans le sous-onglet **Colonnes**.



1. Liste des colonnes déjà configurées
2. Nom de la colonne
3. Source des données utilisées : il est possible d'utiliser des données du dossiers, des chronomètres et des champs de saisies avancées ou de scores.
4. Donnée utilisée pour la colonne (pour les saisies avancées ou les scores, il faut également sélectionner le champ)
5. Format de la donnée (valable pour les données de type Date/Heure uniquement)
6. Liste des groupes de colonnes utilisant la colonne en cours de configuration : il est possible d'affecter la colonne à un groupe de colonnes en cochant la case (ou de la retirer en décochant la case)

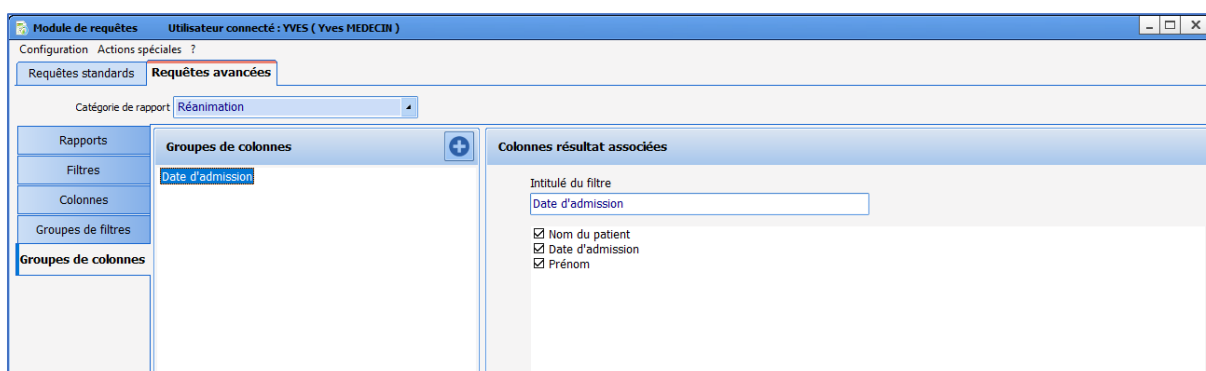

Un groupe de colonnes regroupe une ou plusieurs colonnes : les colonnes sont (dé)sélectionnées en les (dé)cochant dans la zone **Colonnes résultat associées**. Il est également possible de réorganiser les colonnes par un glissé-déposé dans la zone **Colonnes résultat associées**.




2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

## 6.4 Création des rapports

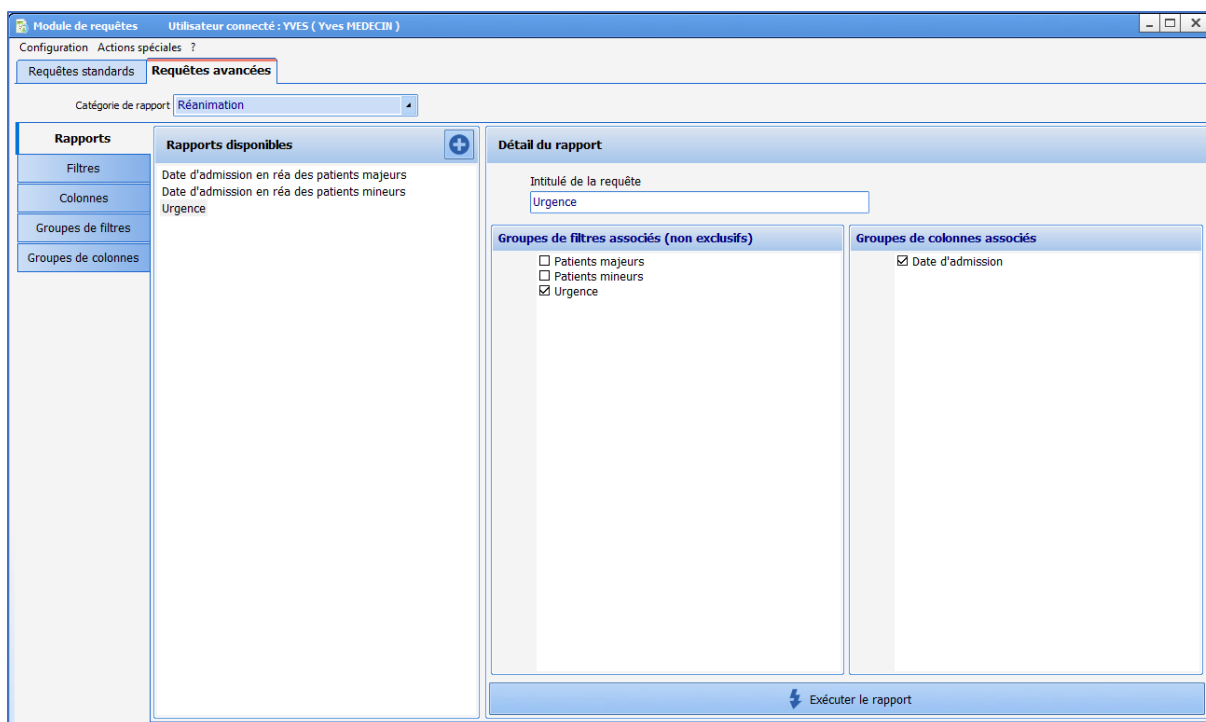

Un rapport affiche les données filtrées par un ou plusieurs groupes de filtres sous la forme d'un tableau dont les colonnes sont déterminées par le ou les groupes de colonnes.

Si plusieurs groupes de filtres sont sélectionnés, les données affichées seront celles qui passent au moins un des filtres. Par exemple, des groupes de filtres **Age<20 ans** et **Age>30 ans** sélectionneront les patients âgés de moins de 20 ans et ceux de plus de 30 ans.

Attention, si une colonne est présente dans plusieurs groupes de filtres, elle sera affichée autant de fois.

## 6.5 Exemple de rapport

Afficher les antécédents et la date de naissance des patients de 30 à 65 ans ayant un antécédent d'hypertension artérielle ou âgés de plus de 65 ans.

Créer les filtres **Antécédents HTA, 30 ans ou plus, Moins de 65 ans et 65 ans ou plus**



Intitulé du filtre  
Antécédent HTA

Source du filtre  
Données du dossier

Donnée du filtre  
Antécédents Médicaux / Atcd Médicaux [= Antécédents fam]

Format des données: Texte long

Opérande  
contient (non exclusif) les éléments...

Pas d'atcd médical  
 Atcd médical non connu  
 Sérodiagnostics  
 Cardio-vasculaires  
    HyperTension Artérielle (HTA)  
      essentielle  
      traitée  
      non traitée  
    Equilibre Tension Artérielle (TA)  
      labile  
      limite  
      sévère  
      maligne  
      gravidique  
      secondaire  
 Troubles du RYTHME et de la conduction

UTILISÉ PAR LES GROUPES  
 ATCD / motif d'hosp  
 Antécédents HTA plus de 30 ans et moins de 65 ans  
 Avant 2000  
 Motif d'hosp  
 Séniors

Intitulé du filtre  
Plus de 30 ans

Source du filtre  
Données du dossier

Donnée du filtre  
Age du patient (années)

Format des données: Entier (Calculée/Automatique)

Opérande  
est plus grand que ou égal à

Valeur du filtre  
30

Intitulé du filtre  
Moins de 65 ans

Source du filtre  
Données du dossier

Donnée du filtre  
Age du patient (années)

Format des données: Entier (Calculée/Automatique)

Opérande  
est plus petit que

Valeur du filtre  
65

Intitulé du filtre  
Plus de 65 ans

Source du filtre  
Données du dossier

Donnée du filtre  
Age du patient (années)

Format des données: Entier (Calculée/Automatique)

Opérande  
est plus grand que ou égal à

Valeur du filtre  
65

### Créer les groupes de filtres **Antécédents HTA 30 à 65 ans** et **Séniors**

Intitulé du groupe de filtres  
Antécédents HTA plus de 30 ans et moins de 65 ans

Antécédent  
 Antécédent HTA  
 Avant 2000  
 Intub  
 Moins de 65 ans  
 Motif d'hospitalisation  
 Plus de 30 ans  
 Plus de 65 ans

Intitulé du groupe de filtres  
Séniors

Antécédent  
 Antécédent HTA  
 Avant 2000  
 Intub  
 Moins de 65 ans  
 Motif d'hospitalisation  
 Plus de 30 ans  
 Plus de 65 ans

### Créer les colonnes **Nom**, **Prénom**, **Antécédents médicaux** et **Date naissance**

Intitulé de la colonne  
Nom

Source de la colonne  
Données du dossier

Donnée de la colonne  
Nom / Nom de naissance [= Nom de naissance du patient]

Format des données: Texte

Intitulé de la colonne  
Prénom

Source de la colonne  
Données du dossier

Donnée de la colonne  
Prénom [= Prénom du patient]

Format des données: Texte



Intitulé de la colonne	Antécédents médicaux
Source de la colonne	Données du dossier
Donnée de la colonne	Antécédents Médicaux / Atcd Médicaux [= Antécédents fam
Format des données:	Texte long

Intitulé de la colonne	Date de naissance
Source de la colonne	Données du dossier
Donnée de la colonne	Date de naissance [= Date de naissance du patient]
Format des données:	Date/Heure
Format	Format original

Créer le groupe de colonnes **Antécédents et date de naissance**

Intitulé du filtre	Antécédents et date de naissance
<input checked="" type="checkbox"/> Nom <input checked="" type="checkbox"/> Prénom <input checked="" type="checkbox"/> Antécédents médicaux <input checked="" type="checkbox"/> Date de naissance <input type="checkbox"/> Adresse <input type="checkbox"/> CORMACK <input type="checkbox"/> Durée d'intubation <input type="checkbox"/> IGSII <input type="checkbox"/> IMC <input type="checkbox"/> Motif d'hospitalisation	

Créer le rapport **Séniors et HTA**

Détail du rapport	
Intitulé de la requête Séniors et HTA	
<b>Groupes de filtres associés (non exclusifs)</b> <input type="checkbox"/> ATCD / motif d'hospi <input checked="" type="checkbox"/> Antécédents HTA plus de 30 ans et moins de 65 ans <input type="checkbox"/> Avant 2000 <input type="checkbox"/> Motif d'hospi <input checked="" type="checkbox"/> Séniors	<b>Groupes de colonnes associés</b> <input checked="" type="checkbox"/> Antécédents et date de naissance <input type="checkbox"/> IMC <input type="checkbox"/> Intub

Cliquer sur le bouton **Exécuter le rapport**

Le rapport s'affiche :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Séniors et HTA			
Dernière exécution: 07/08/2020 14:54:59, Nombre de résultats: 11, Filtres appliqués: Antécédents HTA plus de 30 ans et moins de 65 ans (Antécédent HTA, Plus de 30 ans, Moins de 65 ans),			
Nom	Prénom	Antécédents médicaux	Date de naissance
BARBIER	Jean-Paul	Cataracte   Ulcère Gastro-Duodéal (UGD) ancien cicatrisé   HyperTension Artérielle (HTA) maligne 2008	12/11/1948
MULARD	David	HyperTension Artérielle (HTA)   Arythmie Complète - Fibrillation Auriculaire (AC/FA)   Dyslipidémie	24/09/1960
CREPIN	Juliette	Cataracte   Ulcère Gastro-Duodéal (UGD) ancien cicatrisé   HyperTension Artérielle (HTA) maligne 2008	18/09/1972
BARBIER	Jean-Paul	Cataracte   Ulcère Gastro-Duodéal (UGD) ancien cicatrisé	12/11/1948
BARBIER	Jean-Paul	Cataracte	12/11/1948
DUVAL	Justine		01/01/1950
BOUCHAUD	Antoine	Cataracte   Ulcère Gastro-Duodéal (UGD) ancien cicatrisé   HyperTension Artérielle (HTA) maligne 2008	04/07/1988
ANDRIEUX	Paul		18/06/1950
GARNIER	Simone		01/01/1950
LARMINE	Elisa	Cataracte   Ulcère Gastro-Duodéal (UGD) ancien cicatrisé   HyperTension Artérielle (HTA) maligne 2008	23/01/1979
ANGELIN	Francis	HyperTension Artérielle (HTA) essentielle 2016   Asthme dans les atcd	24/02/1964

Rafraîchir les résultats Double-clic pour afficher le dossier correspondant Exporter vers Excel...

Il est possible d'exporter le rapport vers Excel et d'ouvrir les dossiers correspondant en double-cliquant sur la ligne du patient.



## 7. CCAM / CIM10

### 7.1 Lancement de l'application CCAMCIM10

Cette application permet de rechercher des dossiers pour saisir ou mettre à jour des codes CIM10 et CCAM. Il est possible de rechercher les dossiers des patients afin de récupérer les codes correspondants, les valider et les exporter. Il est également possible d'imprimer la liste des patients via le bouton dédié à droite de la fenêtre.

The screenshot shows the application window titled "Recherche de dossiers pour la saisie ou mise à jour des codes CIM10 et CCAM". The interface includes a search filter section on the left with radio buttons for "Type de dossier à rechercher" (Tous, Contenant aucun code CIM10 et CCAM, etc.). On the right, there are buttons for "Rechercher", "Stopper", "Afficher le formulaire CIM10 et CCAM", and "Générer les codes CCAM/CIM10". Below the filters is a table with columns: "Nom de naissance", "Nom usuel", "Prénom", "Né(e) le", "Date MAJ CPA", "Bloc prévu", "Date interv.", and "Etat du dossier". The table lists several patients, including ANDRE, ANDRIEUX, ANGUERRAN, ANTOINE, ARMAND, BAJARD, BIACHE, etc. At the bottom, it indicates "279 dossier(s) chargé(s) / 279 dossier(s) trouvé(s)".

### 7.2 Recherche des dossiers patient

This screenshot is similar to the previous one but shows a dropdown menu open for the "Dossiers réalisés entre 'Date min' et 'Date max'" filter. The dropdown lists various time-based filters: "Dossiers réalisés ce jour", "Dossiers réalisés cette semaine", "Dossiers réalisés ce mois", "Consultations du jour", "Consultations de la semaine", "Consultations du mois", "Consultations prévues entre 'Date min' et 'Date max'", and "Sortis de réanimation entre 'Date min' et 'Date max'". The table below shows patient records with columns for birth name, usual name, first name, birth date, update date, block, intervention date, and status.

Afin de rendre la fenêtre de recherche d'un dossier patient davantage compatible avec la réanimation, la



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

liste des requêtes de filtrage comporte une requête supplémentaire **Sortis entre « Date min » et « Date max »**.

Cette requête permet d'afficher les dossiers des patients qui sont sortis de réanimation entre les deux dates renseignées par l'utilisateur.

### 7.2.1 Types de dossiers à rechercher

Au niveau de la zone **Type de dossiers à rechercher**, on peut noter sept cas de figure différents :

Quand le filtre **Tous** est sélectionné (type sélectionné par défaut à l'ouverture de l'application), les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie (consultation préanesthésique et per opératoire et/ou post opératoire) contient ou non des codes CCAM et CIM10 qui ont été rattachés à la feuille d'anesthésie du patient.

Quand le filtre **Contenant aucun code CIM10 et CCAM** est sélectionné, les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie ne contient pas de codes rattachés à la feuille d'anesthésie. La colonne **Nombre de codes** n'affiche que les dossiers stipulant **CIM10 : 0, CCAM : 0**.

Quand le filtre **Contenant aucun code CIM10** est sélectionné, les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie ne contient pas de codes CIM10 rattachés à la feuille d'anesthésie. La colonne **Nombre de codes** affiche les dossiers stipulant **CIM10 : 0**.

Quand le filtre **Contenant aucun code CCAM** est sélectionné, les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie ne contient pas de codes CCAM rattachés à la feuille d'anesthésie. La colonne **Nombre de codes** affiche les dossiers stipulant **CCAM : 0**.

Quand le filtre **Contenant des codes CIM10** est sélectionné, les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie contient des codes CIM10 rattachés à la feuille d'anesthésie. La colonne **Nombre de codes** affiche les dossiers stipulant **CIM10 : 1 ou 2 ou...**

Quand le filtre **Contenant des codes CCAM** est sélectionné, les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie contient des codes CCAM rattachés à la feuille d'anesthésie. La colonne **Nombre de codes** affiche les dossiers stipulant **CCAM : 1 ou 2 ou...**

Quand le filtre **Contenant des codes CIM10 et CCAM** est sélectionné, les patients qui apparaissent dans la liste sont ceux dont le dossier complet d'anesthésie contient des codes rattachés à la feuille d'anesthésie. La colonne **Nombre de codes** n'affiche pas les dossiers stipulant **CIM10 : 0 et CCAM : 0**.

### 7.2.2 Filtres de sélection

À l'ouverture de l'application, la recherche est, par défaut, limitée au bloc opératoire dans lequel est configuré votre ordinateur. Vous pouvez délimiter la recherche à un bloc opératoire particulier. Il vous est également possible de ne pas limiter la recherche et d'afficher la totalité des blocs opératoires de votre centre hospitalier en décochant la case **Limiter la recherche sur le bloc suivant**.

À l'ouverture de l'application, la recherche est également, par défaut, limitée aux interventions réalisées le jour même. Vous pouvez délimiter la recherche à une période donnée comme aux **Interventions réalisées ce mois** ou aux **Consultations de la semaine...** Il vous est également possible de ne pas limiter la recherche et d'afficher la totalité des périodes en décochant la case **Limiter la recherche sur la période suivante**.

Le bouton **Lancer la recherche** vous permet de démarrer la recherche des patients en fonction des filtres que vous avez insérés. Le bouton **Stopper** permet d'arrêter la recherche en cours.

Par défaut, la case à cocher **Recherche automatique**, située à droite de la fenêtre, est cochée. Si cette case est décochée, il faut cliquer sur le bouton **Lancer la recherche** pour que les dossiers recherchés s'affichent.



Le bouton **Afficher le formulaire CIM10 et CCAM** vous permet quant à lui d'accéder au **Formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM**.

Il vous est également possible de trier la liste des patients affichés en cliquant sur les intitulés des colonnes de la fenêtre.

### 7.3 Formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM

Formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM
X

Nom de naissance : DUPONT	N° de séjour : <input type="text"/>	Lieu de réalisation : 920001001
Nom usuel :	CAC demandeur : <input type="text"/>	CAC réalisateur : 920001001
Prénom : Maurice	Date prévue : 15/05/2020	Entrée Réa : 15/05/2020
Date de naissance : 15/05/1970	<input type="checkbox"/> Réalisée	Sortie Réa : 15/05/2020
N° IPP :		
Motif : <input type="text" value="Anastomose colo-rectale"/>		

Codes CIM10
Codes CCAM

Code	Type	Mode	Extrait par	Le	Validé par	Le	Exporté par	Le
<input checked="" type="checkbox"/> Z83.3	NR	automatique	SYSTEM Diane	15/05/2020 14:05:12				
<input checked="" type="checkbox"/> Z82.6	NR	automatique	SYSTEM Diane	15/05/2020 14:05:13				
<input checked="" type="checkbox"/> Z82.2	NR	automatique	SYSTEM Diane	15/05/2020 14:05:13				
<input checked="" type="checkbox"/> R04.2	DAS (CMA)	automatique	SYSTEM Diane	15/05/2020 14:05:13				
<input checked="" type="checkbox"/> T75.3	NR	automatique	SYSTEM Diane	15/05/2020 14:05:13				
<input checked="" type="checkbox"/> T80.9/...	DAS	automatique	SYSTEM Diane	15/05/2020 14:05:13				

Afficher les codes inactifs

Choix impression  
 CCAM et CIM10

Imprimer avec les codes barre







boutons prévus à cet effet, sachant qu'il n'est pas possible de modifier un code qui aurait été inséré par un autre utilisateur.

**REMARQUE : Un simple survol à la souris de n'importe quel code CIM10 affiche une bulle d'information indiquant le Code CIM10, le Type CIM10, le Type de saisie, la Description (commentaire) et le Libellé officiel de l'élément qui a généré ce code (s'il existe).**

Les boutons **Ajouter un nouveau code** et **Modifier le code courant** affichent la fenêtre **Aide à la saisie d'un code CIM10**.

**Trois modes de saisie différents du Code International Médical sont possibles.**

#### ***Vous connaissez le code médical international de l'élément sélectionné***

Dans la zone **Saisie manuelle**, située en haut de la fenêtre **Aide à la saisie d'un code CIM10**, indiquez la lettre correspondant au **Chapitre**, le nombre correspondant à la **Catégorie** puis les chiffres correspondants à la **Sous-catégorie et sous-division**. Vous avez la possibilité d'insérer un **Commentaire associé**.

La zone **Saisie progressive** se complète au fur et à mesure que vous saisissez votre code. Cliquez ensuite sur le bouton **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Si le code CIM10 que vous avez inséré n'est pas connu, vous avez la possibilité d'éditer manuellement le Type, c'est-à-dire de noter si c'est un Diagnostic Principal, un Diagnostic Associé Significatif, un Diagnostic Associé Documentaire ou un Diagnostic Relié.

#### ***Vous connaissez les rubriques du code médical international de l'élément sélectionné***

Dans la zone **Saisie progressive**, située au milieu de la fenêtre **Aide à la saisie d'un code CIM10**, sélectionnez tour à tour, à l'aide des listes déroulantes, le **Chapitre**, la **Catégorie**, la **Sous-catégorie**, la **Sous-division** et si nécessaire l'**Extension** et l'**Extension 2**.

La zone **Saisie manuelle** se complète au fur et à mesure que vous saisissez les différentes rubriques de votre code CIM10. Cliquez ensuite sur le bouton **Enregistrer**.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### Vous recherchez le code médical international à l'aide de mot-clé

Dans la zone **Recherche de code par mot-clé**, située en bas de la fenêtre **Aide à la saisie d'un code CIM10**, indiquez les mots-clés correspondants à l'item que vous souhaitez codifier, sachant que vous pouvez considérer une expression complète comme mot-clé en la délimitant à l'aide des ". Indiquez, à l'aide de la liste déroulante, si vous souhaitez effectuer votre recherche sur **Tous les mots** ou seulement sur **Au moins un des mots** puis cliquez sur le bouton **Rechercher les codes CIM10 correspondants** ou sur la touche **Entrée** du clavier.

Tous les libellés possibles s'inscrivent dans la zone **Résultat(s)**. Il vous suffit de sélectionner celui qui vous intéresse, auquel cas les zones **Saisie manuelle** et **Saisie progressive** se complètent automatiquement en fonction du libellé sélectionné. Cliquez ensuite sur le bouton **Enregistrer**.

Les codes CIM10 peuvent avoir 3 statuts :

- Extrait : (Seules les colonnes **Extrait par** et **Le** sont renseignées).
- Validé : (Les colonnes **Validé par** et **Le** sont renseignées en plus de **Extrait par**).
- Exporté : ce nouveau statut est défini par les nouvelles colonnes **Exporté par** et **Le**. Celles-ci permettent de suivre l'envoi des données vers l'interface et se complètent une fois l'export des codes CIM10 réalisé. Ce statut est dans le tableau de consultation des codes CIM10.

## 7.3.2 Codes CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux)

Code	Mode	Praticien	Extrait par	Validé par	Le	Exporté par	Le
<input checked="" type="checkbox"/> LAQK0011 0	manuel	ANESTH Bignon	SYSTEM Diane	SYSTEM Diane	20/05/2020 15:57:55		

Un calendrier permet de sélectionner un jour et de lister les éventuels codes CCAM pour la date choisie. La couleur du jour du calendrier indique l'état des codes CCAM :

- **Rouge** = jour non scanné ou pas de codes pour ce jour,
- **Orange** = il y a des codes non validés pour ce jour,
- **Jaune** = il y a des codes non exportés pour ce jour,
- **Vert** = tous les codes ont été exportés pour ce jour.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

mai 2020

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20				

Aujourd'hui

rté par	Le
EM Diane	20/05/2020 17:00:

Rouge :  
- Jour non scanné ou sans code.

Orange :  
- Jour scanné et présence de codes non validés.

Jaune :  
- Jour scanné et présence de codes non exportés.

Vert :  
- Tous les codes du jour ont été exportés.

Le clic sur un jour dans le calendrier affiche les codes saisis ce jour-là. Il est uniquement possible de cliquer sur une date comprise entre la date de début de l'intervention et sa date de fin.

Les codes CCAM peuvent avoir 3 statuts :

- Extrait : (Seules les colonnes **Extrait par** et **Le** sont renseignées).
- Validé : (Les colonnes **Validé par** et **Le** sont renseignées en plus de **Extrait par**).
- Exporté : ce nouveau statut est défini par les nouvelles colonnes **Exporté par** et **Le**. Celles-ci permettent de suivre l'envoi des données vers l'interface et se complètent une fois l'export des codes CCAM réalisé. Ce statut est dans le tableau de consultation des codes CCAM.

### 7.3.3 Codes NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels)

Pour les codes NGAP, seul l'export est possible. L'ajout manuel et la désactivation des codes n'est pas réalisable.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM

Nom de naissance : POULIQUEN      N° de séjour : [ ]      Lieu de réalisation : 920001001  
 Nom usuel :      CAC demandeur : [ ]      CAC réalisateur : 920001001  
 Prénom : GEORGES      Date prévue :  
 Date de naissance : 24/01/1934       Réalisée  
 N° IPP : 000834      Score ASA : 3  
 Motif : [ ]

Codes CIM10    Codes CCAM    Codes NGAP

Code	Coefficient	Date	Praticien	Exporté le
<input checked="" type="checkbox"/> C	2	28/02/2023 ...	Paul MEDECIN	
<input checked="" type="checkbox"/> AMI	1,5	28/02/2023 ...	Paul MEDECIN	

Afficher les codes inactifs

Choix impression : CCAM et CIM10  
 Imprimer avec les codes barre

### 7.3.4 Export des données

Vous pouvez décocher la case à cocher située devant le numéro du code afin de ne pas le prendre en compte lors de l'export.

La case à cocher **Afficher les codes non activés** permet de faire ou ne pas faire apparaître dans le Formulaire de saisie les codes qui ont été décochés.

Une fois que vous avez validé les codes CIM10 et CCAM, vous allez pouvoir les exporter. Tant que l'intervention n'a pas eu lieu, le bouton permettant l'export est grisé. Ce bouton ne sera accessible que lors de l'arrivée du patient en salle de réveil.

**REMARQUE : La validation des codes est irréversible et rend toutes les modifications ultérieures impossibles. Une fois que les codes sont exportés, ils ne pourront plus être modifiés. De plus, ces codes ne peuvent être exportés qu'une fois l'intervention réalisée.**

**REMARQUE : Il est possible d'exporter et de valider de manière indépendante les codes CCAM des codes CIM10.**

### 7.3.5 Impression des codes

Vous pouvez imprimer les codes CCAM et CIM10, ensemble ou séparément, en décidant d'imprimer juste les codes ou également leur description et libellé officiel. Pour ce faire, sélectionnez à l'aide de la liste déroulante ce que vous souhaitez imprimer puis cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Lors de l'ajout automatique d'un code CCAM, si la date d'ajout est un jour férié ou un dimanche le modificateur « Actes en urgence dimanche ou jour férié » est ajouté automatiquement.



### 7.3.6 Codes CCAM automatiques

Un certain nombre de codes automatiques ont été créés dans **DIANE**.

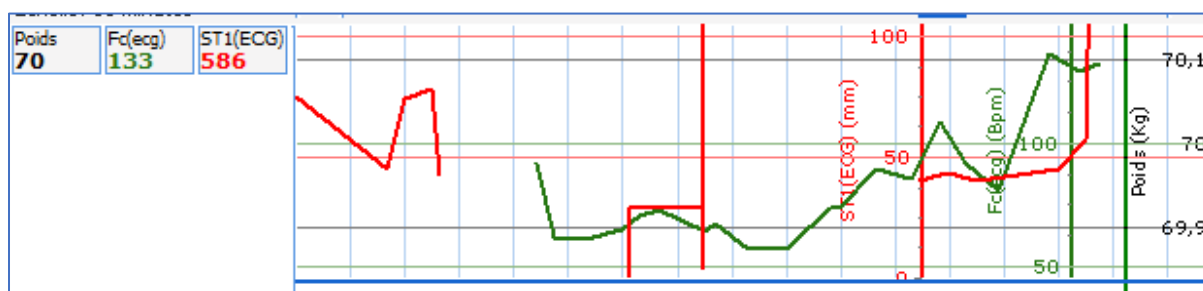
Code	Statut
<input checked="" type="checkbox"/> EQLF003	<input checked="" type="checkbox"/> GLLD009
<input checked="" type="checkbox"/> EQLF002	<input checked="" type="checkbox"/> GLJF010
<input checked="" type="checkbox"/> FELF004	<input checked="" type="checkbox"/> DEQP004
<input checked="" type="checkbox"/> EQMP001	<input checked="" type="checkbox"/> DEQP007
<input checked="" type="checkbox"/> EQMF003	<input checked="" type="checkbox"/> EQLF001
<input checked="" type="checkbox"/> FELF003	<input checked="" type="checkbox"/> GLQP004
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD006	<input type="checkbox"/> GLLD003
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD013	<input type="checkbox"/> GLLD019
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD002 (Plus actif)	<input type="checkbox"/> ABQP001
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD012	<input type="checkbox"/> EQLF005
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD015	<input type="checkbox"/> FELF011
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD008	<input type="checkbox"/> GLLD005
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD004	<input type="checkbox"/> GLLD011
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD007	<input type="checkbox"/> HSLF001

#### 7.3.6.1 ABQP001 : Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures

Ce code s'ajoute s'il y a une surveillance d'au-moins 15 minutes de la pression intracrânienne (paramètre physio Groupe PIC).

#### 7.3.6.2 DEQP004 : Scope/ télé-ecg continu/24h

Ce code s'ajoute dans le cas d'une surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la fréquence cardiaque et/ou du sous décalage ECG niveau 1. Les valeurs du paramètre FC(ecg) et/ ou du paramètre ST1(EG) doivent être reçus en continu (trou de valeur inférieur à 2 minutes) pendant au moins 5 minutes.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

<input checked="" type="checkbox"/>	DEQP004	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/>	DEQP007	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/>	Code : DEQP004 Mode : automatique Extrait par : SYSTEM Diane le : 26/02/2020 23:59:59 Valide par : le : Praticien : Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle) Description : scope/téléecg continu/24h			26/02/2020 23:59:59

### 7.3.6.3 DEQP007 : Scope/télé-ecg continu + surveillance pression artérielle +/-SaO2 non effractivess/24h

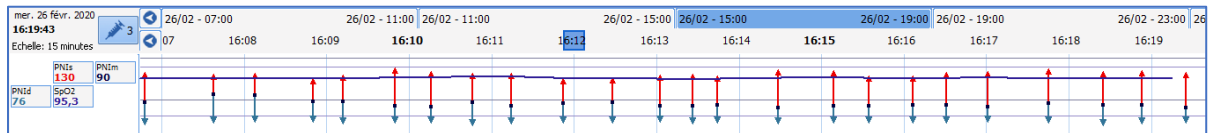Ce code s'ajoute dans le cas d'une surveillance continue de l'électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène. Les valeurs du paramètre Pression artérielle systolique par voie non invasive ou du paramètre Saturation en oxygène du sang artériel doivent être reçus en continu (trou de valeur inférieur à 2 minutes) pendant au moins 5 minutes.



Codes CIM10		Codes CCAM				
Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/>	DEQP004	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59		
<input checked="" type="checkbox"/>	DEQP007	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59		
<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY015	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59		
	Code : DEQP007 Mode : automatique Extrait par : SYSTEM Diane le : 26/02/2020 23:59:59 Valide par : le : Praticien : Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle) Description : scope/téléECG continu +surv. press art+/-SaO2 non effractivess/24h					

### 7.3.6.4 EQLF001 : Dobutamine /Dopamine continue w8Ug/kg/mn/Dopexamine sf période néonatale/24h

Ce code j'ajoute dans le cas d'une réalisation de prescription de type injection intraveineuse continue de Dobutamine ou de Dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [ $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ ], ou de Dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures -> code valable hors période néonatale (patient âgé de plus de 28j)

1 **Dobutamine 250mg/20ml panph fl 10** (250 mg/20 ml/flacons)  
: 250 mg à 4  $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$  en continu



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Codes CIM10		Codes CCAM				
Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/> EQLF0031 0	manuel	SYSTEM Diane	25/02/2020			
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD008	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> DEQP004	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> DEQP007	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> EQLF001	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> YYYY020	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			

Code : EQLF001  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 25/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : dobu/dopa continue <8µg/kg/mn/dopexamine sf période néonatale/24h

Ce code est incompatible avec le code EQLF003 : ce dernier ne sera pas ajouté si le code EQLF001 est présent.

### 7.3.6.5 EQLF002 : Perfusion remplissage débit > 50ml/kg/24h chez l'adulte

L'ajout du code se fait lors de la réalisation de prescriptions de type perfusion intraveineuse de produit de remplissage à un débit supérieur à 50 ml/kg :

- Ringer Lactate (ATC : B05BB01)
- Voluven (ATC : B05AA07)
- NaCl09 (ATC : B05XA03)

Le code ne s'ajoute qu'à partir du moment où le patient a reçu un volume de produit équivalent à 50ml par kilo en moins de 24 heures.

Perfusions	
1	<del>Adrenaline 1mg/ml ren ab 5ml 10 (5 mg/5 ml/ampoules) : à 20 µg/kg/min (1 mg/ml) en continu</del>
1	<del>Ringer lact bbraun ecoflac 1l 1 (1 poche/1000 ml) : à 2000 ml/kg/min en continu</del>
1	Voluven sol p perf (1 poche/500 ml) : à 60 ml/kg/h en continu

Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/> EQLF002	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> YYYY015	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			

Code : EQLF002  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 25/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : perf remplissage débit > 50ml/kg/24h chez adulte

### 7.3.6.6 EQLF003 : Acte ajouté automatique dobutamine /dopamine continue débit > 8µg/kg/min / adrénaline/Noradrén sf néonat /24

Il existe deux moyens d'ajouter ce code :

- Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min] en dehors de la période néonatale, par 24 heures -> code valable hors période néonatale (patient âgé de plus de 28j)





**Remplissage vasculaire**

1 **Dobutamine 250mg/20ml panph fl 10** (250 mg/20 ml/flacons) : 250 mg à 10 µg/kg/min (1,25 mg/ml) en continu

- Injection intraveineuse continue d'adrénaline ou de noradrénaline à débit supérieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min] en dehors de la période néonatale, par 24 heures -> code valable hors période néonatale (patient âgé de plus de 28j)

**Perfusions**

1 **Adrenaline 1mg/ml ren ab 5ml 10** (5 mg/5 ml/ampoules) : à 20 µg/kg/min (1 mg/ml) en continu

Le code s'ajoute **automatiquement** 5 min après le démarrage de la prescription.

Ce code est incompatible avec le code EQLF001 : ce dernier ne sera pas ajouté si le code EQLF003 est présent.

**Formulaire de saisie des codes CIM10 et CCAM**

Nom de naissance : NOM INCONNU  
 Nom usuel :  
 Prénom : 25/02/20 09:12  
 Date de naissance : 01/01/1970  
 N° IPP :  
 Afficher tous les séjours du patient  
 Praticien : SYSTEM Diane  
 Date : 25/02/2020  
 N° de séjour :  
 Lieu de réalisation :  
 Réalisation :   
 CAC demandeur :  
 CAC réalisateur :  
 Entrée Réa : 25/02/2020  
 Motif :

Navigation dans le dossier  
 mar. 25 fév.

CCAM

Attention ! Les données validées ne pourront plus être modifiées.  
 Note : Pour afficher des informations complémentaires associées à un code, survolez-le à l'aide de votre souris.

Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/> EQLF003	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> YYYY020	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			

Code : EQLF003  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 25/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : dobu/dopa continue débit > 8µg/kg/mn /adrénaline/N.Adren sf néonat /24h

### 7.3.6.7 FELF003 : Traitement coagulopathie / 24h (2 PSL diff.)

Ce code s'ajoute lors de la réalisation simultanée de minimum deux prescription de type intraveineuse parmi les produits sanguins suivants en continu sur 24 heures :

- Plasma frais congelé (Identifiant externe : PS\_PFC)
- Plaquettes / concentré plaquettaire (Identifiant externe : PS\_CP)
- Facteur anti hémophilique A ou B (Identifiant externe : PS\_FACT8 ou PS\_FACT9)
- Fibrinogène (Identifiant externe : PS\_FACT1)
- Antithrombine III pour suppléance de coagulopathie (Identifiant externe : PS\_ATHRB3)



Codes CIM10		Codes CCAM				
Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/> FELF003	automatique	SYSTEM Diane	27/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> YYYY015	automatique	SYSTEM Diane	27/02/2020 23:59:59			

Code : FELF003  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 27/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : traitem coagulopathie/24h (2PSL diff.)

Afficher les codes non activés
 Choix impression  
CCAM et CIM10

Prêt

<input type="checkbox"/> I.V.	Concentré plaquettaire (656 162 ml) ★	4200 mg >> 2000	4200 mg >
<input type="checkbox"/> I.V.	Concentré érythrocytaire (car) (208 308 ml) ★	1 >> 2000 ml // 3h	

### 7.3.6.8 FELF004 : Transfusion de Concentré Globulaire > ½ masse sanguine chez l'Adulte à 40ml/kg chez le Nouveau-Né de moins 24h

Ce code s'ajoute automatique si le patient a reçu une transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demi-masse sanguine chez l'adulte par kilogramme [ml/kg] ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures.

Les concentrés de globules rouges ont l'identifiant externe suivant : PS\_CGR

La demi-masse sanguine d'un adulte de sexe masculin est de 38 ml/kg, pour un adulte de sexe féminin elle est de 34ml/kg.

<input type="checkbox"/> I.V.	Concentré érythrocytaire (car) (5 8 l) ★	1500 ml // 30min
-------------------------------	--	------------------



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Codes CIM10		Codes CCAM				
Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/>	FELF004	automatique	SYSTEM Diane	28/02/2020 23:59:59		
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD002	automatique	SYSTEM Diane	28/02/2020 23:59:59		

Code : FELF004  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 28/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : transfu. CG > 1/2masse sang chez adulte/à 40ml/kg chez N-Né moins/24h

Afficher les codes non activés
 Choix impression  
CCAM et CIM10

Imprimer avec les codes barre

Prêt

### 7.3.6.9 GLLD004 : Ventilation. Trach + PEP>6 +/- FiO2 >60% + décubitus ventral alterné /24h

Ce code s'ajoute lors de la réalisation d'une prescription de type Ventilation mécanique par sonde d'intubation ou trachéotomie avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, avec technique de décubitus ventral alterné en continu sur 24 heures (Paramètre DV renseigné en heures ou en alternance d'heures).

Codes CIM10		Codes CCAM				
Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD008	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59		
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD004	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59		
<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY020	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59		

Liste des codes CCAM

L'ajout de ce code est forcément couplé avec le code GLLD008.

### 7.3.6.10 GLLD006 : Ventil. Spontanée sur sonde intub. Pdt sevrage 1ventil/24h

Ce code ne s'ajoute que lors de la réalisation d'une prescription de type Ventilation spontanée sur sonde d'intubation en mode **VS-AI-PEP** au cours du sevrage d'une ventilation mécanique (dans les paramètres la case à cocher **Sevrage** cochée), en continu sur 24 heures.

1 **VS-AI-PEP, Sonde d'intubation :** ▶  
 en continu

Mode : VS-AI-PEP  
 Interface : Sonde d'intubation  
 PEP : 48748cmH2O ; AI : 5417474cmH2O  
 Sevrage en continu à partir du 27/02 à 09h23, jusqu'à 09h23 demain



<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD006	automatique	SYSTEM Diane	27/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD013	automatique	SYSTEM Diane	27/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/>	G	Code : GLLD006		
<input checked="" type="checkbox"/>	Y	Mode : automatique		
		Extrait par : SYSTEM Diane		
		le : 27/02/2020 23:59:59		
		Valide par :		
		le :		
		Praticien :		
		Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)		
		Description : ventil. spontanée sur sonde intub. pdt sevrage 1ventil/24h		

### 7.3.6.11 GLLD007 : Ventil. A poumons séparés/24h

Code automatique qui s'ajoute lors de la réalisation d'une prescription de Ventilation mécanique avec un mode **Ventilation à poumons séparés** en continu sur 24 heures.

Ventilation à poumons séparés, Sonde d'intubation : en continu

Codes CIM10		Codes CCAM		
Code	Mode	Extrait par	le	
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD007	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY020	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59
		Code : GLLD007		
		Mode : automatique		
		Extrait par : SYSTEM Diane		
		le : 25/02/2020 23:59:59		
		Valide par :		
		le :		
		Praticien :		
		Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)		
		Description : ventil. à poumons séparés/24h		

### 7.3.6.12 GLLD008 : Ventilation Trach. +PEP sup. à 6+/- FiO2 sup. à 60%/24h

Ce code s'ajoute automatiquement lors de la réalisation d'une prescription de type Ventilation mécanique par sonde d'intubation ou Trachéotomie avec pression expiratoire positive [PEP] supérieure à 6 et/ou FiO2 supérieure à 60%, en continu sur 24 heures.

Paramètres ventilatoires	
1	VAC, Trachéotomie : en continu
1	VAC, Trachéotomie : en continu
	Mode : VAC
	Interface : Trachéotomie
	VT : 70mL ; FiO2 : 80% ; PEP : 8cmH2O en continu à partir du 25/02 à 11h34, jusqu'à 11h34 demain



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

Codes CIM10		Codes CCAM				
Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD008	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59		
<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY020	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59		

Code : GLLD008  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 25/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : ventil. trach. +PEP sup. à 6+/- FiO2 sup. à 60%/24h

Si ce code est présent, le code GLLD015 ne peut pas être ajouté.  
 Si le code GLLD015 est présent, il est remplacé par ce code.

### 7.3.6.13 GLLD009 : Ventil. Oscillations à hte fréquence/24h

Code automatique qui s'ajoute lors de la réalisation d'une prescription de Ventilation mécanique avec un mode **Oscillation à haute fréquence** en continu sur 24 heures.

1 **Oscillations à haute fréquence, Masque buccal** : en continu

Code	Mode	Extrait par	le
<input checked="" type="checkbox"/>	GLLD009	automatique	SYSTEM Diane
<input checked="" type="checkbox"/>	YYYY020	automatique	SYSTEM Diane

Code : GLLD009  
 Mode : automatique  
 Extrait par : SYSTEM Diane  
 le : 25/02/2020 23:59:59  
 Valide par :  
 le :  
 Praticien :  
 Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)  
 Description : ventil. oscillations à hte fréquence/24h

### 7.3.6.14 GLLD013 : ventilation spontanée sur trachéo pendant sevrage 1 ventil/24h

Ce code s'ajoute lors de la réalisation d'une prescription de type ventilation spontanée sur trachéotomie avec un mode **VS-AI-PEP** au cours du sevrage d'une ventilation mécanique (dans les paramètres la case à cocher **Sevrage** cochée), en continu sur 24 heures.

1 **VS-AI-PEP, Trachéotomie** : en continu

Mode : VS-AI-PEP  
 Interface : Trachéotomie  
 PEP : 5487548cmH2O ; AI : 7487548cmH2O  
 Sevrage en continu à partir du 27/02 à 09h07, pdt 1 j



Code	Mode	Extrait par	le
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD013	automatique	SYSTEM Diane	27/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD008	automatique	SYSTEM Diane	27/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/> Y	Code : GLLD013		2020 23:59:59
	Mode : automatique		
	Extrait par : SYSTEM Diane		
	le : 27/02/2020 23:59:59		
	Valide par :		
	le :		
	Praticien :		
	Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)		
	Description : ventil. spontanée sur trachéo pdt sevrage 1ventil/24h		

### 7.3.6.15 GLLD015 : Ventilation Trach. +PEP < 6 + FiO2 < 60%/24h

Ce code s'ajoute lors de la réalisation d'une prescription de type Ventilation Invasive par trachéotomie ou Sonde d'intubation à condition que le paramètres FiO2 soit inférieur à 60% et que le paramètre PEP soit inférieur ou égal à 6.

**Paramètres ventilatoires**

1 VAC, Trachéotomie : en continu

Mode : VAC  
Interface : Trachéotomie  
VT : 5mL ; FiO2 : 40% ; PEP : 4cmH2O en continu à partir du 25/02 à 11h27, jusqu'à 11h27 demain

Code	Mode	Extrait par	le	Valide par	le	Praticien
<input checked="" type="checkbox"/> GLLD015	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
<input checked="" type="checkbox"/> YYYY020	automatique	SYSTEM Diane	25/02/2020 23:59:59			
	Code : GLLD015					
	Mode : automatique					
	Extrait par : SYSTEM Diane					
	le : 25/02/2020 23:59:59					
	Valide par :					
	le :					
	Praticien :					
	Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle)					
	Description : ventil. trach. +PEP < 6+FiO2 < 60%/24h					

Ce code s'ajoute après 5 minutes.

Si ce code est présent, l'ajout du code GLLD008 le supprime.

Si le code GLLD008 est présent, ce code ne peut être ajouté.

### 7.3.6.16 GLLD019 : Ventilation barométrique ou volumétrique non effractive au masque facial pendant au moins 2 heures cumulées au cours des 12 heures, pour insuffisance respiratoire aigüe

Ce code s'ajoute dans le cas d'une ventilation volumétrique OU barométrique OU autre avec mode VAC ou VACI ET interface parmi les éléments suivants :

- Masque Haute concentration
- Masque Moyenne concentration
- Masque facial
- Masque venturi
- Masque buccal
- Masque naso-buccal

La planification doit être de type continue et être d'une durée supérieure ou égale à 4 heures sur 24h.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

### 7.3.6.17 GLQP004 : Scope/télé-ecg continu/24h

Ce code s'ajoute dans le cas d'une surveillance continue transcutanée de la Pression partielle d'O2 par voie transcutanée (= paO2 / Pression partielle d'O2 par voie transcutanée = pression partielle en O2 dans le sang artériel) ou de la Pression partielle de CO2 par voie transcutanée (= paCO2 / Pression partielle de CO2 par voie transcutanée = paCO2 : pression partielle en CO2 dans le sang artériel) pendant au moins 5 minutes consécutives (sans pause supérieure à 2 minutes) pour un nouveau-né (patient âgé de moins de 28j).



Code	Mode	Extrait par	le
<input checked="" type="checkbox"/> DEQP004	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/> DEQP007	automatique	SYSTEM Diane	26/02/2020 23:59:59
<input checked="" type="checkbox"/> Y	Code : DEQP004 Mode : automatique Extrait par : SYSTEM Diane le : 26/02/2020 23:59:59 Valide par : le : Praticien : Commentaire : Acte ajouté automatiquement (règle) Description : scope/téléecg continu/24h		26/02/2020 23:59:59

### 7.3.6.18 YYYY015 : Forfait de réanimation niveau A

Le forfait A est automatiquement ajouté si au moins un des codes suivants est présent : DEQP004, DEQP007, GLQP004, EQLF001, EQLF002, FELF003.

### 7.3.6.19 YYYY020 : Forfait de réanimation niveau B

Le forfait B est automatiquement ajouté si au moins un des codes suivants est présent : EQLF003, FELF004, EQMP001, EQMF003, GLLD006, GLLD013, GLLD002, GLLD012, GLLD015, GLLD008, GLLD004, GLLD007, GLLD009, GLJF010, JVJF002

## 7.4 Affectation du praticien (Codes CCAM)

L'affectation du praticien se fait toujours manuellement via la fenêtre de création/modification du code CCAM. Mais celle-ci peut être modifiée directement dans la colonne **Praticien** où l'on trouve une liste déroulante avec l'ensemble des praticiens par ordre alphabétique.





Codes CIM10		Codes CCAM						
Code	Mode	Praticien	Extrait par	Validé par	Le	Exporté par	Le	
<input checked="" type="checkbox"/> LAQK0061 0	manuel		SYSTEM Diane	MEDECIN Paul	26/05/2020 08:02:24	MEDECIN Paul	26/05/2020 08:02:28	
<input checked="" type="checkbox"/> LAQK0121 0	manuel		SYSTEM Diane	MEDECIN Paul	26/05/2020 08:55:04	MEDECIN Paul	26/05/2020 08:55:10	
<input checked="" type="checkbox"/> YYYY0601 0	manuel		SYSTEM Diane	MEDECIN Paul	26/05/2020 08:55:07	MEDECIN Paul	26/05/2020 08:55:10	
		ANESTH Anna						
		ANESTH Bignon						
		ANESTH Brami						
		ANESTH Bruchou						
		ANESTH Demo						
		ANESTH HAMANTS Sé						
		ANESTH Luc						

## 7.5 Impression des codes CCAM et CIM10

L'impression des codes CCAM et CIM10 se fait en mode paysage pour les six types d'impressions disponibles :

- CCAM et CIM10
- CCAM
- CIM10
- CCAM et CIM10 détaillées
- CCAM détaillées
- CIM10 détaillées

### Impression « normale » :

Nom de naissance : ANGUERRAN	Prénom : Charles	Numéro d'établissement :
Nom usuel :	Date naissance : 24/02/1976	Date d'admission : 18/03/2019 11:39
Numéro IPP : 69713	Numéro de séjour (NP) :	Date de sortie : 30/04/2019 16:02
CAC demandeur :	CAC réalisateur : 920001001	Type d'admission :
Lieu de réalisation : 920001001	Intervention réalisée : Non	IGS2 : N/R
Type de document: CODEPMSIS	Numéro de dossier Emed:	IGS2 sans l'âge : N/R
Intervention : (11/09/2017)		
	Date du document: 25/05/2020	Page n° 1 / 2

### Liste des codes CIM10 & CCAM rattachés au dossier du patient

Code CIM10	Type CIM10	Saisie	par	le	Validé par	le	Exporté par	le
I10/006	NR	automatique	MEDECIN Paul	20/03/2019	MEDECIN Paul	25/05/2020	MEDECIN Paul	25/05/2020
T88_4	NR	automatique	SYSTEM Diane	20/05/2020	MEDECIN Paul	25/05/2020	MEDECIN Paul	25/05/2020
Code CCAM	Saisie	par	le	Validé par	le	Exporté par	le	
Y Y Y Y 0 2 0	automatique	MEDECIN Paul	18/03/2019	SYSTEM Diane	20/05/2020	Non renseigné	N/R	
D E Q P 0 7	automatique	MEDECIN Paul	18/03/2019	SYSTEM Diane	20/05/2020	Non renseigné	N/R	

### Impression détaillée :



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)






DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



Nom de naissance : ANGUERRAN	Prénom : Charles	Numéro d'établissement :
Nom usuel :	Date naissance : 24/02/1976	Date d'admission : 18/03/2019 11:39
Numéro IPP : 69713	Numéro de séjour (NIP) :	Date de sortie : 30/04/2019 16:02
CAC demandeur :	CAC réalisateur : 920001001	Type d'admission :
Lieu de réalisation : 920001001	Intervention réalisée : Non	IGS2 : N/R
Type du document: CODEPMSI\$	Numéro de dossier Emed:	IGS2 sans l'âge : N/R
Intervention : (11/09/2017)		
Date du document: 25/05/2020		Page n° 1 / 3

Liste des codes CIM10 & CCAM rattachés au dossier du patient

Code CIM10	Type CIM10	Saisie	par	le	Validé par	le	Exporté par	le
I10.006	NR	automatique	MEDECIN Paul	20/03/2019	MEDECIN Paul	25/05/2020	MEDECIN Paul	25/05/2020
 Description = "HyperTension Artérielle (HTA) essentielle" Libellé officiel = "Hypertension essentielle (primitive)"								
T88.4	NR	automatique	SYSTEM Diane	20/05/2020	MEDECIN Paul	25/05/2020	MEDECIN Paul	25/05/2020
 Description = "Intubation difficile Début" Libellé officiel = "Echec ou difficulté d'intubation"								

Code CCAM	Saisie	par	le	Validé par	le	Exporté par	le
Y Y Y Y 0 2 0	automatique	MEDECIN Paul	18/03/2019	SYSTEM Diane	20/05/2020	Non renseigné	N/R
 Acte ajouté automatiquement (règle)							

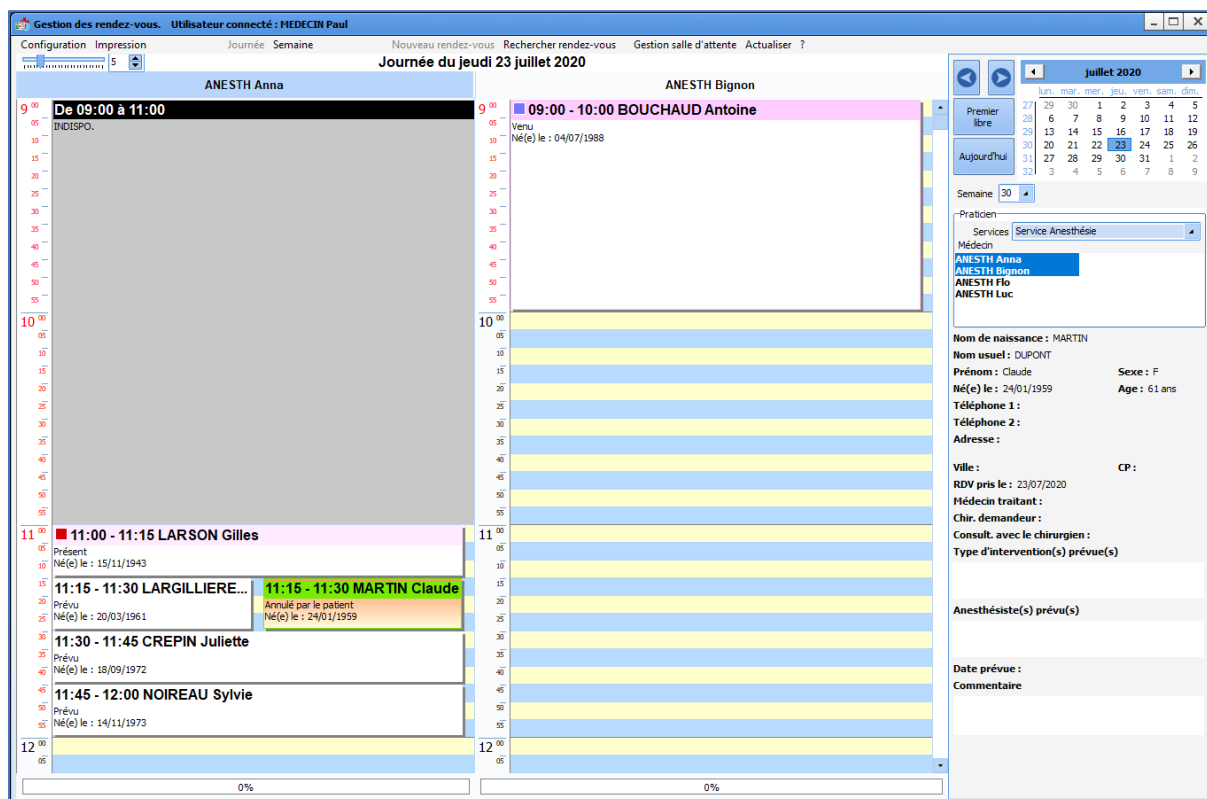


## 8. Gestion des rendez-vous


### 8.1 L'aspect général de l'application de Rendez-Vous

L'application **DIANE RENDEZ-VOUS** est composée de quatre zones :

- La zone **Calendrier**, située en haut à droite de l'application.
- La zone **Praticien**, située en dessous de la zone **Calendrier**.
- La zone **Informations sur le patient**, située en bas à droite de l'application.
- La zone **Planning** en partie centrale.



#### 8.1.1 Le bandeau supérieur du module de gestion des rendez-vous

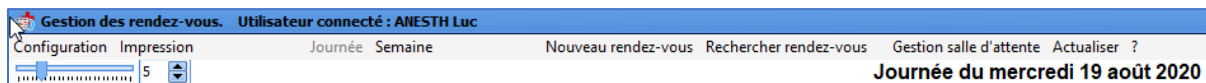

#### Menus

##### Configuration

Permet de configurer :

- la **Durée des Rendez-vous**
- les **Indisponibilités** des médecins (Cf. chapitre : « [Gestion des indisponibilités des médecins](#) »).
- les **Disponibilités** des médecins (Cf. chapitre : « [Gestion des disponibilités des médecins](#) »).
- l'**Affichage** des praticiens (**Anesthésistes** ou **Chirurgiens**).
- l'**Affichage** des **Polices**.

#### Rôles



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)




DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'<b>Affichage</b> des <b>Couleurs</b> de l'application (Cf. chapitre : « <a href="#">Gestion des couleurs d'affichage</a> »).</li> <li>- l'<b>Affichage</b> de l'<b>Heure de début</b> et de l'<b>Heure de fin</b> qui doit apparaître sur le planning (Cf. chapitre : « <a href="#">Heures de début et Heure de fin</a> »).</li> <li>- le changement de votre mot de passe.</li> </ul>
<b>Impression</b>	Permet d'imprimer les rendez-vous du(es) médecin(s) sélectionné(s) sur une ou plusieurs journée(s). Cf. chapitre : « <a href="#">Impressions des rendez-vous</a> ».
<b>Journée</b>	Affichage par jour
<b>Semaine</b>	Affichage par semaine
<b>Nouveau Rendez-vous</b>	Création d'un nouveau rendez-vous. Cf. chapitre : « <a href="#">Création d'un nouveau rendez-vous</a> » pour voir les différentes méthodes de création de rendez-vous.
<b>Rechercher Rendez-vous</b>	Permet de retrouver la date, l'heure, le nom du chirurgien demandeur et le motif du rendez-vous pour un patient donné. Cf. chapitre : « <a href="#">Recherche d'un rendez-vous</a> ».
<b>Gestion salle d'attente</b>	Permet au médecin de visualiser de son bureau les patients qui sont déjà en train de patienter dans la salle d'attente. Cf. chapitre : « <a href="#">Gestion de la salle d'attente</a> ».
<b>Actualiser</b>	Permet de rafraîchir l'affichage du planning afin de s'assurer d'avoir la dernière version. Vigilance à avoir lorsque plusieurs utilisateurs travaillent en même temps. Cette application s'actualise toutes les 5 minutes.
<b>?</b>	Permet d'accéder l'aide en ligne de l'application.

## 8.1.2 Les différentes zones

### 8.1.2.1 Zone Calendrier

Cette zone, située en haut à droite de l'application, permet de sélectionner la date à afficher sur le planning. A l'ouverture de l'application, la date sélectionnée est, par défaut, celle du jour.

Les deux boutons en forme de flèches , situés en haut à gauche de la zone **Calendrier**, permettent de faire défiler les jours ou les semaines selon le mode d'affichage.

Le bouton **Premier Libre** permet d'atteindre la première plage horaire disponible parmi tous les médecins sélectionnés du service lors de la programmation d'un nouveau rendez-vous.

Le bouton **Aujourd'hui** permet de repositionner la date affichée sur la date du jour.

Le numéro de la semaine est également indiqué dans cette zone et permet de rechercher la semaine désirée dans le calendrier.

### 8.1.2.2 Zone Praticien

Cette zone, située en dessous de la zone **Calendrier**, permet de sélectionner le(s) médecin(s) (anesthésiste(s) ou chirurgien(s)) à afficher sur le planning.

Sélectionnez le **Service** dans lequel travaille(nt) l'(es) anesthésiste(s) ou le(s) chirurgien(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez visualiser ou programmer des rendez-vous. A l'ouverture de l'application, le service est, par



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

défaut, préconfiguré comme étant celui où se trouve l'ordinateur. Il est possible de le modifier à l'aide de la liste déroulante prévue à cet effet. Ce choix sera conservé pour toutes les programmations de nouveaux rendez-vous au cours de la même session.

La liste affichée dans la zone **Médecin** est celle des anesthésistes ou des chirurgiens (selon le mode d'affichage choisi par le biais du menu **Configuration / Affichage**) qui sont configurés dans le service sélectionné.

Sélectionnez-le(s) médecin(s) à afficher sur le planning. Pour sélectionner plusieurs médecins et visualiser simultanément leur planning respectif, utilisez les touches de sélection multiple **Shift** et/ou **Ctrl**.

En mode d'affichage à la journée, il est possible de visualiser la journée de plusieurs médecins en même temps.

En mode d'affichage à la semaine, ce sera le planning d'un seul médecin qui sera visible.

**REMARQUE : La configuration des médecins dans leur service respectif s'effectue par l'administrateur de site.**

### 8.1.2.3 Zone Informations patient

Dans cette zone, située en bas à droite de l'application, toutes les informations du patient sélectionné dans le planning sont visibles.

Pour pouvoir modifier ou compléter certaines de ces informations, il faut sélectionner le nom du patient dans la zone **Planning** et cliquer sur le bouton **Détails / Modif** afin d'afficher la fenêtre des informations du patient ou faire un double clic sur le nom du patient.

La fenêtre ci-dessous s'affiche :

Informations Patient	
Nom de naissance	CREPIN
Nom usuel	LARDEUR
Prénom	Juliette
Sexe	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> F
Né(e) le	18/09/1972
Age	45 ans
Téléphone	0322456987
Adresse	12 rue de la savonnière
Ville	Amiens
Code postal	80000
Commentaires	
Marqueur	Olive

Médecin Traitant	
Nom médecin	DURAND
Prénom médecin	Jérôme
Téléphone1	0802014565
Adresse	58 rue du terrail
Ville	AMIENS
Code postal	80000


Intervention	
Demandeur	CASSIS Philippe
Date prévue	29/07/2018
Consult. le	23/07/2018
Date d'entrée	28/07/2018
<b>Type d'intervention(s) prévue(s)</b> 1	
Ablation du fil métallique	
<b>Anesthésiste(s) prévu(s)</b> 1	
ANESTH Luc	

La zone **Informations Patients** permet d'indiquer les informations administratives du patient à l'aide du clavier.

Il est possible de différencier les patients à l'aide d'un menu déroulant qui permet d'insérer un marqueur de couleur qui teinte le bandeau où est affiché le nom du patient. (Consultation pour des patients d'ambulatoire Versus patients qui seront hospitalisés ou encore par spécialité)







Le bouton  permet de visualiser l'historique des rendez-vous du patient sélectionné : Date, heure, état et motif.

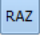


Médecin	Date RDV	Horaire	Demandeur	Etat	Motif	Date Interv.
ANESTH Anna	17/07/2020	12:30		Prévu		
ANESTH Anna	22/07/2020	10:30		Présent		
ANESTH Anna	23/07/2020	11:30		Prévu		

La zone **Médecin Traitant** permet de renseigner les informations du médecin traitant de ce patient. Après avoir complété cette zone, il est possible d'ajouter les références de ce médecin à la liste des médecins connus à l'aide du bouton . Il ne sera plus nécessaire de les renseigner manuellement.

Ultérieurement, un clic sur le bouton  affichera la liste des médecins connus. En tapant les premières lettres du nom du médecin avant de cliquer sur ce bouton, seuls les noms commençant par ces lettres apparaîtront.

Pour supprimer un médecin de cette liste, il faut faire un clic droit sur le nom puis sélectionner **Supprimer ce médecin**.

Le bouton  permet d'effacer toutes les informations qui ont pu être notées dans la zone **Médecin traitant**.

#### 8.1.2.4 Zone Planning

Cette zone permet de visualiser et de gérer le planning d'un ou plusieurs médecins. C'est dans cette zone que se fait la programmation de tous les rendez-vous.

Un survol à la souris sur un rendez-vous affiche une bulle d'information indiquant le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du patient, la tranche horaire prévue pour le rendez-vous, le motif et le nom du chirurgien demandeur du rendez-vous.

## 8.2 Création d'un nouveau rendez-vous

Pour créer un rendez-vous, il existe trois possibilités :

- Double cliquer sur la ligne correspondant à l'heure de début du rendez-vous.
- Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur la ligne correspondant à l'heure de début du rendez-vous.
- Cliquer sur la ligne correspondant à l'heure de début du rendez-vous, puis cliquer sur le menu **Nouveau rendez-vous**.

Par défaut, c'est un rendez-vous court qui sera sélectionné (si sa durée est configurée à 5 minutes), sinon ce sera le champ **Sélection : 5 mn** qui sera sélectionné.



Pour créer un rendez-vous d'une durée que vous définissez vous-même (à l'aide de la touche Shift du clavier ou du glisser-déposer de la souris), vous devez sélectionner la plage horaire qui correspond au rendez-vous que vous souhaitez insérer. Cliquez ensuite sur le menu **Nouveau rendez-vous**, la fenêtre **Durée du RDV** s'ouvre et la plage horaire que vous souhaitez est automatiquement renseignée. Il est possible de choisir une autre durée (Court, Moyen, Long, Sélection ou Autre). L'item **Autre** permet de définir la durée que vous souhaitez pour ce nouveau rendez-vous.

**REMARQUE** : la durée d'un rendez-vous saisie manuellement est automatiquement arrondie au multiple de 5 supérieur : par exemple, si vous indiquez 17 minutes, la durée retenue sera de 20 minutes.

### 8.3 Recherche d'un rendez-vous

Vous avez la possibilité de rechercher un rendez-vous par le biais du menu **Rechercher Rendez-vous** afin de pouvoir renseigner un patient qui aurait oublié la date et l'heure de son rendez-vous.

Cliquez sur le menu **Rechercher Rendez-vous**. La fenêtre **Sélection d'un patient** s'ouvre.

Validez cette fenêtre **Sélection d'un patient** en cliquant sur le bouton **Ouvrir le dossier** après avoir sélectionné votre patient dans la liste. La fenêtre **Recherche de rendez-vous** s'ouvre.

Vous disposez de diverses informations sur le patient (**Nom marital**, **Nom patronymique**, **Prénom**, **Date de naissance** et **Sexe**) ainsi que sur le(s) date(s), heure(s) et motif(s) des rendez-vous antérieurs du patient, le nom du chirurgien demandeur ainsi que l'état du rendez-vous, à savoir si le patient a un rendez-vous de prévu, s'il s'est présenté à son précédent rendez-vous, s'il l'a annulé, ou s'il ne s'est pas présenté au(x) rendez-vous précédent(s).

Lorsque vous cliquez sur une des lignes de rendez-vous de cette fenêtre, le planning situé en arrière-plan se place sur le rendez-vous concerné à la date et l'heure de celui-ci.

**REMARQUE** : pour revenir facilement aux rendez-vous du jour, cliquez sur le bouton **Aujourd'hui** situé dans la zone Calendrier.

### 8.4 Modification d'un rendez-vous

Vous avez la possibilité de modifier les données administratives du patient, de supprimer le rendez-vous, de le déplacer vers un autre jour ou une autre heure de la journée, de modifier sa durée, de l'annuler, ou de préciser si le patient est absent ou présent à son rendez-vous.


Sélectionnez le rendez-vous que vous souhaitez modifier. Lorsqu'un rendez-vous est sélectionné, il se teinte d'une couleur différente afin que vous sachiez sur quel rendez-vous vous travaillez.


Vous pouvez modifier les données administratives du patient en cliquant sur le bouton **Détails / Modif** situées en bas à gauche de l'application (Cf. chapitre : « [Zone Informations sur le patient](#) »).

Vous avez la possibilité de **Supprimer** ce rendez-vous en cliquant droit dessus ou à l'aide de la touche **Suppr** du clavier.



Si vous souhaitez modifier l'heure d'un rendez-vous dans une même journée, le repousser à un autre jour, voir le déplacer vers un autre médecin, deux possibilités s'offrent à vous :

- Cliquez droit sur le rendez-vous dont vous souhaitez modifier l'heure, la date ou le spécialiste puis sélectionnez **Couper**. **Coller** ensuite votre rendez-vous sur la nouvelle plage horaire choisie.
- Si ce changement est effectué sur la même semaine, vous pouvez déplacer le rendez-vous en le sélectionnant et en le cliquant-glissant vers l'heure désirée à l'aide du curseur .

Pour modifier la durée du rendez-vous, vous devez sélectionner le rendez-vous concerné sur le planning et le rétrécir ou l'agrandir en plaçant votre curseur à l'une des deux extrémités. Votre curseur doit avoir la forme : .

Lorsque vous cliquez droit sur un rendez-vous, un menu permet de réaliser un certain nombre d'actions :

- **Démarrer la consultation** d'anesthésie du patient afin que les secrétaires puissent éventuellement commencer à compléter quelques-uns des champs de la consultation comme la taille et le poids du patient, les antécédents...
- **Couper** le rendez-vous afin de le déplacer pour le coller ailleurs (à une autre heure, sur une autre journée ou un autre médecin).
- **Supprimer** le rendez-vous.
- Remettre la couleur d'affichage d'origine du rendez-vous à l'aide du menu **Patient prévu** (couleur blanche) alors qu'il avait été déclaré comme étant absent, présent, annulé...
- Annuler le rendez-vous du patient sans l'effacer en cliquant sur le menu **Patient annulé** et en indiquant si c'est annulé par le patient ou par le médecin.
- Signaler au médecin le fait que le patient n'est pas encore arrivé alors que l'heure de son rendez-vous est dépassée (**Patient absent**) ou que le patient est là (**Patient présent**).
- Signaler le fait que le patient n'est pas venu à son rendez-vous sans prévenir (**Patient non venu**) ou que le patient est bien venu à sa consultation (**Patient venu**).

Si vous utilisez le module de consultation, ces couleurs se modifieront automatiquement dès le lendemain du jour du rendez-vous si le médecin a ou non ouvert le dossier du patient le jour du rendez-vous.

Si vous ne disposez pas du module de Consultation, vous avez la possibilité d'indiquer manuellement à l'aide de ce menu si le patient est venu ou non à son rendez-vous.

C'est particulièrement utile de renseigner cette information car cela permet lorsque le patient rappellera pour prendre un nouveau rendez-vous, d'être plus ou moins conciliant pour la date du rendez-vous.

- Le menu **Annuler** permet de refermer ce menu.

## 8.5 Gestion des disponibilités des médecins

Les disponibilités des anesthésistes et des chirurgiens de votre centre peuvent être configurées à l'aide du menu **Configuration / Disponibilités**.

Sélectionnez les **Médecins** - Utilisez les touches **Shift** et **Ctrl** pour la sélection multiple - pour lesquels vous souhaitez renseigner les mêmes disponibilités après avoir sélectionné le **Service** dans lequel ils pratiquent.

Placez-vous sur la semaine qui vous intéresse à l'aide de la liste déroulante **Configuration des disponibilités des médecins**. La semaine affichée débutera le jour sélectionné sur le calendrier.

Au niveau de la **Grille de disponibilité**, vous pouvez directement cocher les cases de disponibilité pour la semaine en face des horaires qui correspondent au temps de consultation des médecins sélectionnés.

**REMARQUE** : Les horaires affichés dans la Grille de disponibilité correspondent aux heures de début et de fin qui ont été déterminées lors de la configuration de l'application RDV.

Il vous est également possible d'appliquer des règles configurables pour déterminer les heures et jours de disponibilités des médecins. En effet, sur la droite de la fenêtre, choisissez une date à partir de laquelle vous allez insérer les disponibilités. Indiquez ensuite l'**Incrément** - chaque semaine, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines ... - si vous le souhaitez, ainsi que le **Jour de la semaine** concerné. Enregistrez les



disponibilités en cliquant sur le bouton **Ajouter la règle** après avoir indiqué les heures de début et de fin de disponibilité.

Le bouton **Supprimer la règle** permet de supprimer une règle de disponibilité complète.

**REMARQUE :** Lorsque les médecins sont disponibles, leur zone de planning se présente sous une couleur différente par rapport aux médecins qui n'ont pas été déterminés comme disponibles.

## 8.6 Gestion des indisponibilités des médecins

Les congés ou absences des anesthésistes et des chirurgiens de votre centre peuvent être gérés à l'aide du menu **Configuration / Indisponibilités**.

Sélectionnez le(s) **Médecin(s)** - Utilisez les touches **Shift** et **Ctrl** pour la sélection multiple - pour le(s)quel(s) vous souhaitez renseigner les mêmes indisponibilités après avoir sélectionné le **Service** dans lequel il(s) pratique(nt).

Indiquez la **Durée de l'indisponibilité**, à savoir si ce sera **La journée** complète, une **Demi-journée** (matin ou après-midi) ou une **Plage horaire** spéciale.

Sélectionnez ensuite la(es) journée(s) qui vous intéresse(nt) au niveau des calendriers, présents en bas de la fenêtre **Indisponibilités** (Utilisez la touche **Shift** pour la sélection



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28



multiple ou cliquez-glissez la souris pour surligner les dates qui correspondent aux absences du(es) médecin(s) sélectionné(s).

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** lorsque vous avez renseigné tous les éléments expliqués ci-dessus.

**REMARQUE :** Vous ne pouvez sélectionner que 31 jours consécutifs au niveau des calendriers.

## 8.7 Gestion des couleurs d’affichage

Toutes les couleurs d’affichage utilisées dans l’application **Gestion des rendez-vous** sont modifiables à l’aide du menu **Configuration / Affichage / Couleurs**.

Un clic sur l’élément dont vous souhaitez modifier la couleur affiche la palette de **Couleurs Windows** dans laquelle vous allez pouvoir déterminer les couleurs souhaitées.

### Éléments

### Rôles

#### **Patient prévu**

Lorsqu’un **Nouveau rendez-vous** est programmé, celui-ci se teinte en blanc (couleur d’origine). Reportez-vous au chapitre « [Création d’un nouveau rendez-vous](#) » pour savoir comment créer un nouveau rendez-vous.

#### **Patient venu** **Patient non venu**

Si le patient s’est présenté à son rendez-vous, le médecin a ouvert son dossier dans l’application **Consultation** le jour du rendez-vous. Dès le lendemain, la couleur du rendez-vous se teindra en rose (couleur d’origine) pour que vous sachiez quels sont les patients qui sont venus à leur consultation.

Si le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous, le médecin n’a pas ouvert son dossier dans l’application **Consultation** le jour du dit rendez-vous. Dès le lendemain, la couleur du rendez-vous se teindra en rouge (couleur d’origine) pour que vous sachiez quels sont les patients qui ne sont pas venus à leur consultation.

**REMARQUE :** Si vous n’avez pas l’application Consultation, vous pouvez indiquer vous-même si le patient est venu ou non en cliquant droit sur le rendez-vous du patient dans la zone du planning et en sélectionnant Patient venu ou Patient non venu.

#### **Sélection RDV**

Lorsque vous sélectionnez un rendez-vous dans la zone du planning, celui-ci se teinte en orange (couleur d’origine).

#### **Patient annulé**

Si le patient ou le médecin souhaite annuler son rendez-vous et non pas le reporter, cliquez droit sur le rendez-vous du patient dans la zone du planning et sélectionnez **Patient annulé**. Celui-ci se teinte en vert vif (couleur d’origine).

#### **Patient présent**

Si le patient est arrivé et qu’il patiente en salle d’attente, la secrétaire peut le



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d’Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

<b>Patient absent</b>	<p>signaler à l'écran en cliquant droit sur le rendez-vous du patient dans la zone du planning et en sélectionnant <b>Patient présent</b>. Celui-ci se teindra alors en rose pâle (couleur d'origine), ce qui permet à l'anesthésiste ou au chirurgien qui consulte de savoir si le patient est prêt à être reçu.</p> <p>Si le patient n'est pas arrivé alors que l'heure du rendez-vous est passée, la secrétaire peut le signaler à l'écran en cliquant droit sur le rendez-vous du patient dans la zone du planning et en sélectionnant <b>Patient absent</b>. Celui-ci se teindra alors en vert pâle (couleur d'origine).</p>
<b>Entête RDV</b>	<p>Lorsqu'un nouveau rendez-vous est programmé, l'en-tête de celui-ci est bleu par défaut (couleur d'origine). Vous avez la possibilité de modifier cette couleur à partir de la fenêtre <b>Informations sur le patient</b> (Voir le chapitre « <a href="#">Zone Informations sur le patient</a> »), notamment pour différencier vos patients : ce marqueur peut vous aider à identifier les patients dont le rendez-vous est purement anesthésique (couleur de base bleu) des patients dont le rendez-vous est cardiologique par exemple...</p>
<b>Indisponibilité</b>	<p>Lorsqu'un anesthésiste ou un chirurgien est absent ou en congé, il est possible de le signaler en sélectionnant dans le menu <b>Configuration / Indisponibilités</b> (Voir le chapitre « <a href="#">Gestion des indisponibilités des médecins</a> »). Toute page d'indisponibilité sera teintée en gris (couleur d'origine) au niveau du planning.</p>
<b>Sélection ligne</b>	<p>Lorsque vous sélectionnez une ligne du planning, la couleur bleu foncé (couleur d'origine) surligne l'échelle des temps, située sur la gauche de l'application.</p>
<b>Ligne paire</b> <b>Ligne impaire</b>	<p>Ce sont les couleurs des lignes présentes dans la zone du planning. Bleu et jaune pâle sont les couleurs d'origine.</p>

**REMARQUE :** le bouton **Restaurer les valeurs d'origine** permet de remettre les couleurs d'origine en place.

**REMARQUE :** sur la droite de cette fenêtre, vous pouvez configurer la couleur des disponibilités des médecins. Ceci permet éventuellement de gérer le planning des médecins en fonction de l'activité.

## 8.8 Heures de début et Heures de fin

Vous avez la possibilité d'indiquer la première et la dernière heure à afficher sur le planning à l'aide du menu **Configuration / Affichage / Heure de début** ou **Heure de fin**.

La valeur que vous notez doit être une valeur entière et non une valeur à virgule.

## 8.9 Impressions des rendez-vous

Ce menu permet d'imprimer les rendez-vous du(es) médecin(s) sélectionné(s) sur une ou plusieurs journée(s), selon ce que vous sélectionnez dans la fenêtre **Impression**.

Sélectionnez les **Médecins** - à l'aide des touches **Shift** ou **Ctrl** pour la sélection multiple - pour lesquels vous souhaitez imprimer les rendez-vous après avoir sélectionné le **Service** dans lequel ils pratiquent.

Sélectionnez ensuite les journées qui vous intéressent au niveau du calendrier. Cliquez-glissez la souris pour surligner les dates à imprimer.

**REMARQUE :** Vous ne pouvez sélectionner que 31 jours consécutifs au niveau des calendriers.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

**Impression**

Choix Impression

Rendez-vous

Interventions

Plage horaire

Matin

Après-midi

Journée

Service Anesthésie

**Listes des médecins**

ANESTH Anna

ANESTH Bignon

ANESTH Luc

Export csv Imprimer Annuler

juillet 2018

	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
26	25	26	27	28	29	30	1
27	2	3	4	5	6	7	8
28	9	10	11	12	13	14	15
29	16	17	18	19	20	21	22
30	23	24	25	26	27	28	29
31	30	31	1	2	3	4	5

Aujourd'hui : 26/07/2018

Il est possible d'imprimer les rendez-vous en sélectionnant **Rendez-vous** dans la zone **Choix Impression**. Si vous sélectionnez **Interventions**, ce sont les interventions prévues pour le jour sélectionné qui s'imprimeront.

Après avoir cliqué sur le bouton **OK** de cette fenêtre, une fenêtre de **Prévisualisation d'impression** s'ouvre. Voir le chapitre « *Impression de la consultation* » pour savoir comment fonctionnent les boutons de cette fenêtre.

Sur la fiche informatisée journalière, vous retrouvez toutes les informations concernant les rendez-vous d'un médecin donné (Horaire, Nom, Prénom, Date de naissance, Téléphone, Date de prise du rendez-vous, Nom du chirurgien demandeur, Motif du rendez-vous et éventuellement des commentaires).

## 8.10 Gestion de la salle d'attente

Lorsque vous renseignez les patients qui sont présents ou absents à l'aide du clic droit de la souris, le médecin pourra visualiser très facilement de son bureau les patients qui sont déjà en train d'attendre en salle d'attente à l'aide du menu **Gestion salle d'attente**.

Cela peut lui permettre éventuellement de faire passer un patient avant un autre en fonction du temps d'attente et de retard de chacun.

La consultation d'anesthésie du patient peut être lancée directement à partir de cette fenêtre.

**Visualisation de la salle d'attente**

**Liste d'attente des Rendez-vous** 15:07

Médecin	Nom de naissance	Nom usuel	Prénom	Sexe	Heure du RDV	Heure d'arrivée	Temps d'attente
ANESTH Anna	LARSON		Gilles	M	11:00	15:06	Patient en retard (04:06)
ANESTH Anna	DEBAS	LARCOMTE	ALEXANDRA	F	11:15	15:06	Patient en retard (03:51)
ANESTH Anna	LARGILLIERE		Serge	M	11:15	15:06	Patient en retard (03:51)
ANESTH Anna	DUMONT	DESTOMBES	MARIE CLAIRE	F	11:30	15:06	Patient en retard (03:36)

Fermer



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28

## 9. DIANE COMPTA

### 9.1 Lancement de l'application DIANE COMPTA

Pour lancer l'application **DIANE COMPTA**, sélectionnez **DiaCompta** dans le menu **Démarrer/Programmes/Diane**, ou double-cliquez sur l'icône du même nom, placée sur le **Bureau** de Windows. Si le raccourci n'a pas été créé, vous trouverez l'exécutable original en suivant le chemin **C:\Program Files\Diane\DiaCompta.exe**.

**REMARQUE** : Au démarrage de l'application, un message d'information vous indique le délai depuis lequel la caisse n'a pas été remise à zéro. Vous avez la possibilité de la remettre à 0 en cliquant sur le bouton **RAZ**.

L'application **Comptabilité** est composée de trois grandes zones qui sont : la zone **Honoraires**, la zone **Paiements** et la zone diverse.

Nom patient	Date acte	Ass.	Acte	Fact.	Intitulé	Commentaire
MULARD David	24/04/2019		40	40	Consulta...	
LARGILLIERE Serge	07/04/2019	M...	50	50	Consulta...	
DUPONT Maurice	15/05/2020		48	48	Consulta...	
CREPIN Juliette	28/11/2019	M...	48	48	Consulta...	
CREPIN Juliette	23/06/2008	M...	23	23	Consulta...	
CREPIN Juliette	02/04/2019	M...	33	33	Consulta...	
ANGELIN Francis	24/04/2019		50	50	Consulta...	

Nom patient	Date paiement	Montant payé	Type paiement	Montant prévu
CREPIN Juliette	18/05/2020 ...	48	Chèque	48
MULARD David	18/05/2020 ...	40	Carte	40
ANGELIN Fran...	18/05/2020 ...	50	CMU	50
DUPONT Mau...	18/05/2020 ...	48	Espèce	48
LARGILLIERE ...	18/05/2020 ...	50	Chèque	50

Totaux des paiements	
Carte	40
Chèque	98
Virement	0
Espèces	48
Prélèvements	0
Autres(CMU, AT...)	50
<b>Total</b>	<b>236</b>

### 9.2 Zone Honoraires

Dans cette zone, vous pouvez voir apparaître tous les patients qui ont été facturés par le biais de **DIANE**, que ce soit directement dans l'application **Consultation** (Cf. chapitre : « **Onglet Comptabilité** ») ou dans l'application **DIANE COMPTA**. Dans la **liste des honoraires**, vous retrouvez le nom des patients, la date de l'acte, le type d'assuré (mutuelle, tiers-payant, autre...), le barème de l'acte, le montant facturé, l'intitulé de l'acte et éventuellement un commentaire.

Vous pouvez effectuer une **recherche par nom de patient**, **par intitulé de l'acte** (consultation, dépassement d'honoraire ou les deux) ou par le **choix de la date** de l'acte.

Le bouton **Patients en attente d'honoraire** indique la liste des patients pour lesquels aucun honoraire n'a été rattaché. Si vous sélectionnez l'un des patients, vous allez pouvoir lui attribuer un honoraire par le biais



de la fenêtre **Descriptif honoraire** (Cf. chapitre : « *Ajout d'un honoraire* »).  
Voici le code des couleurs utilisé dans l'application :

Légende des couleurs	
Texte	Honoraire non payé
Texte	Honoraire payé
Texte	Honoraire non payant
Texte	Honoraire payé partiellement
Texte	Honoraire supprimé

Vous retrouvez la légende de ces couleurs par le biais du bouton **Légende** situé dans le bas de l'application **DIANE COMPTA**.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des noms des patients dans la colonne de gauche (**Liste des honoraires**), vous avez la possibilité de modifier cet honoraire, de payer cet honoraire pour les patients qui n'ont pas encore réglés, de le supprimer, de générer un courrier de relance pour les patients qui n'ont pas encore réglés ou de saisir les codes **CCAM**.

### 9.3 Zone Paiements

Dans cette zone, vous pouvez voir apparaître tous les paiements des patients qui ont été effectués par le biais de **DIANE**, que ce soit directement dans l'application **Consultation** ou dans l'application **DIANE COMPTA**. Dans la **Liste des paiements**, vous retrouvez le nom des patients, la date du paiement, le montant payé et le type de paiement.

Vous pouvez effectuer une **Recherche par nom de patient** ou par le **Choix de la date** du paiement.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'un des noms des patients dans la colonne de droite (**Liste des paiements**), vous avez la possibilité de modifier ce paiement, supprimer ce paiement ou de saisir la CCAM.

### 9.4 Zone située en bas de l'application

Vous retrouvez ici une zone **Sélection de l'emplacement** qui va vous permettre éventuellement d'indiquer l'emplacement sur lequel vous souhaitez effectuer votre recherche d'honoraires : un service, un bloc, une salle, voire un utilisateur donné. Les boutons situés en bas de cette zone permettent d'afficher ou non les anesthésistes, les chirurgiens et les infirmiers dans l'arborescence. Par défaut, seuls les anesthésistes sont visibles dans l'arborescence.

Sur la droite de cette zone **Sélection de l'emplacement** se situent 5 cases à cocher qui vous permettent également de poser des filtres. Vous pourrez masquer les actes gratuits, les payés, les impayés, les éléments supprimés ou les codes **CCAM** renseignés en fonction des honoraires que vous souhaitez afficher dans le tableau **Liste des honoraires**. Vous pouvez configurer **DIANE COMPTA** pour que certaines de ces cases soient pré cochées. Par défaut, la case **Masquer les supprimés** est cochée.

Le bouton **Ajouter un honoraire** ouvre la fenêtre **Sélection d'un patient** afin de vous permettre de sélectionner le patient pour lequel vous souhaitez ajouter un honoraire (Cf. chapitre : « *Sélection du patient* »). Une fois que vous avez sélectionné votre patient, une fenêtre d'information vous propose de rattacher cet honoraire à un dossier de consultation. Si vous répondez oui, la dernière consultation du patient choisi sera affichée. Si vous répondez non, vous pourrez ajouter un honoraire et le paiement associé par le biais de la fenêtre **Descriptif honoraire**. (Cf. chapitre : « *Ajout d'un honoraire* »).

Le bouton **Courriers de relance** permet d'éditer un courrier préconfiguré de relance. Pour ce faire, vous



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

devez sélectionner dans la zone **Liste des honoraires** le ou les patients pour lesquels vous souhaitez éditer un courrier de relance et cliquer sur ce bouton.

Le bouton **Légende** ouvre la fenêtre **Légende des couleurs** qui reprend les différentes couleurs visibles dans la **Liste des honoraires**.

Le bouton **Impressions** vous permet d'imprimer les honoraires, les paiements, les honoraires en attente ou la caisse. (Cf. chapitre : « **Impression** »).

Dans la zone **État actuel de la caisse**, vous visualisez tous les paiements qui ont été effectués par les patients avec leur mode de paiement. Vous avez la possibilité de remettre la caisse à 0 euros quand vous le souhaitez en cliquant sur le bouton **RAZ**.

Vous visualisez sur la droite de l'écran une zone **Totaux des paiements** qui reprend tous les paiements par type des patients indiqués dans la zone sur le dessus (**Paiements**)

## 9.5 Ajout d'un honoraire

Lorsque le médecin a vu le patient en consultation d'anesthésie, la secrétaire va pouvoir, de son bureau, indiquer le paiement et le rattacher au dossier de consultation par le biais du bouton **Patients en attente d'honoraire**.

Si le patient n'a pas été enregistré dans **DIANE** au préalable et/ou n'est pas passé en consultation d'anesthésie avec le logiciel **DIANE**, il est possible de créer ce patient (ou d'en rechercher un existant dans la base de données) par le biais du bouton **Ajouter un honoraire** (Cf. chapitre : « **Sélection du patient** » pour savoir comment créer ou rechercher un patient).

IPP :	Nom de naissance	Nom usuel	Prénom	Date nai...	S...	Adresse
DIA 0945467	CREPIN	LARDEUR	Juliette	18/09/1...	F	12 rue de la sav...

Une fois le patient choisi, la question du rattachement vous est demandée

Information

Souhaitez-vous rattacher cet honoraire à un dossier de consultation ?

Si vous répondez "Oui", la dernière consultation du patient choisi sera affichée  
Si vous répondez "Non", vous pourrez ajouter un honoraire et le paiement associé

Oui Non Annuler

4.7.5.19859

Si vous avez répondu **Oui**, la question de la consultation sur laquelle rattacher l'honoraire se pose.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

Page : 378 / 386

**Sélection de la consultation à rattacher**

Veillez choisir la consultation à laquelle rattacher l'honoraire créé pour ce patient :

Date consult	Age	Taille	Poids	Intervention
03/04/2019	46	175	56	Dilatation coronarienne avec pose ...
24/06/2008	35	175	68	Septorhinoplastie
29/11/2019	47	175	65	Endoscopie digestive Echoendosco...

OK Annuler

**Patient**

Nom de naissance : CREPIN  
 Nom usuel : LARDEUR  
 Prénom : Juliette  
 Sexe :  M  F

**Intitulé de l'acte** 1  
 Consultation

Date de l'acte : 02/04/2019  
 Emplacement de l'acte : Réanimation : Lit 1  
 Médecin de l'acte : ANESTH Luc

TVA : 0  
 Mutuelle : [ ]  
 Médecin traitant : [ ]

**Barème de l'acte**

Gratuit  40 euros  
 23 euros  48 euros  
 28 euros  50 euros  
 33 euros  Autre [ ]

**Type d'assuré** 1  
 Mutuelle

**Justification**

**Montant à facturer**

Gratuit  40 euros  
 12 euros  48 euros  
 23 euros  50 euros  
 28 euros  Autre [ ]  
 33 euros

Commentaire

Code CCAM	Intitulé de l'intervention	Date de saisie

**Paiement** Remboursement

Moyen de paiement : Carte Bleue  
 Emplacement pour le paiement : Réanimation : Lit 1

Montant prévu : 45  
 Date prévue de paiement : 18/05/2019

Nom du payeur : LARDEUR Juliette  
 Montant du paiement : 45  
 Date du paiement : 18/05/2019  
 Heure du paiement : 08:03

Références de la carte : 12345678

**Intitulé du paiement** 1  
 Consultation

Affichage multi-honoraire

OK Annuler

Dans cette fenêtre, vous retrouvez une zone **Patient** contenant les données administratives du patient et les informations relatives à l'acte. Si le médecin a complété l'onglet **Comptabilité** lors de la consultation d'anesthésie, toute la zone située dans la moitié haute du document (**Intitulé de l'acte**, **Date**, **Médecin**, **Barème**, **Emplacement**, **Type d'assuré** et **Montant à facturer**) est déjà complétée.

Vous devez indiquer le moyen de paiement du patient sans oublier d'indiquer le montant effectivement payé et la date.

En bas de cette fenêtre, la secrétaire pourra venir compléter a posteriori le remboursement de cet acte quand il est effectif.





**REMARQUE :** Le barème de l'acte, le **type** d'assuré et le **montant** à facturer sont entièrement configurables par les administrateurs de site. Si une de ces zones est modifiée, il faudra reporter la même modification dans l'application **Consultation**.

## 9.6 Impression

**Critères d'impression**

**Modèle :**  
Imprimer les paiements

Liste des paiements et totaux par type de paiement

Choix de la date  
 Aujourd'hui  Semaine  Année  Hier  Mois  Entre 2 dates

01/01/2019  
31/12/2019

Moyen de paiement  
Carte Bleue

Sélection de l'emplacement  
ETABLISSEMENT  
Service Anesthésie  
Bloc opératoire  
Consultation

Valider Annuler

En cliquant sur le bouton **Impressions**, vous avez la possibilité d'imprimer la liste des honoraires et le total des barèmes, la liste des paiements et les totaux par type de paiement, la liste des honoraires non payés ou payés partiellement ou l'état actuel de la caisse.

Dans le document d'impression, vous retrouvez systématiquement :

- le nom patronymique du patient,
- le Prénom,
- la Date de naissance,
- la Date de l'acte,
- le type d'assuré,
- le montant de l'acte,
- le montant facturé pour l'acte,
- l'intitulé,
- le commentaire éventuel.

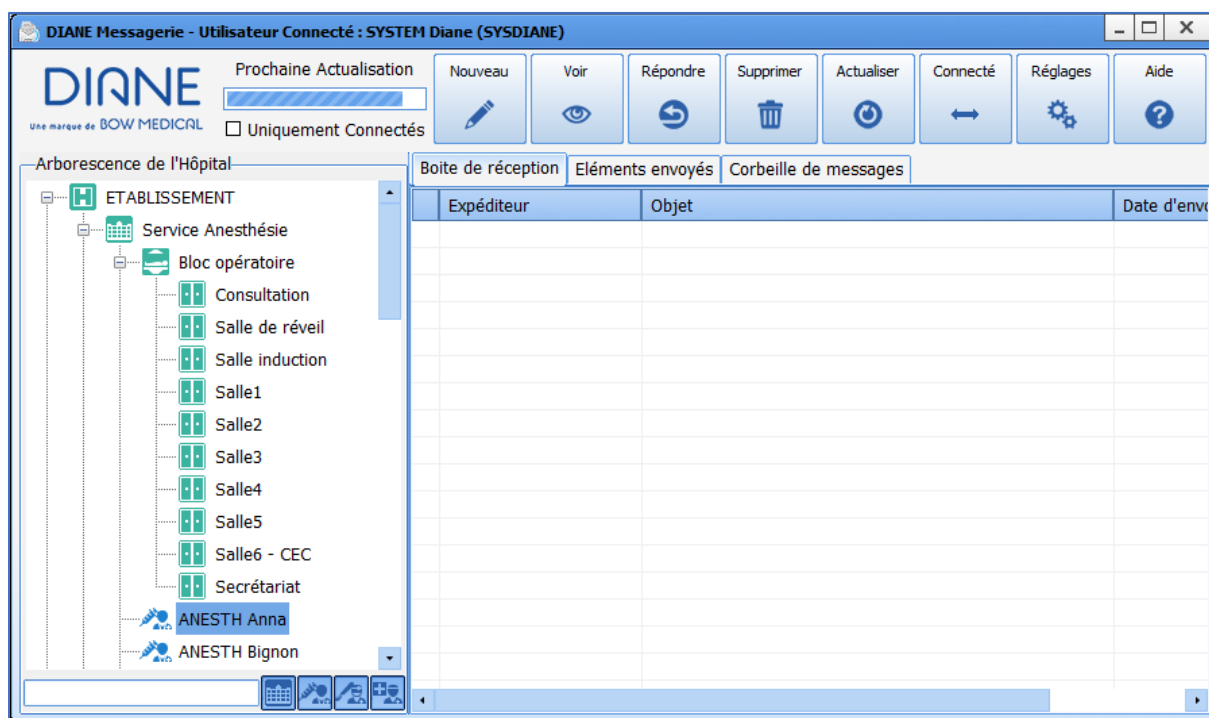
Selon l'impression que vous souhaitez, vous pouvez aussi y trouver le moyen de paiement et le montant payé.






## 10. DIANE MESSAGERIE

Pour lancer l'application **DIANE MESSAGERIE**, sélectionner **DIAMESSAGERIE** dans le menu **Démarrer/Programmes/Diane**, ou double-cliquer sur l'icône du même nom, placée sur le bureau de Windows. Si le raccourci de cette application n'a pas été créé, l'exécutable original se trouve en suivant le chemin **C:\Program Files\Diane\DiaMessagerie.exe**.

Cette application permet d'envoyer et de recevoir des messages via le logiciel **DIANE**.



### Les boutons de la messagerie

Boutons	Rôles
	Permet d'écrire un message à destination des personnes et/ou lieux sélectionnés. Ce bouton ouvre la fenêtre de <b>nouveau message pour...</b> Cf. chapitre : « <i>Envoi de messages</i> ».
	Permet de lire le message sélectionné dans la <b>Boîte de réception</b> . Pour ouvrir un message, vous avez également la possibilité de double-cliquer sur le message à ouvrir, ou de cliquer dessus à l'aide du bouton droit de la souris. Si vous ouvrez un message dans l'onglet <b>Corbeille de messages</b> , vous allez le réintégrer à la <b>Boîte de réception</b> .
	Permet de répondre au message sélectionné dans la <b>Boîte de réception</b> . Pour répondre à un message, vous avez également la possibilité de cliquer sur le message auquel vous souhaitez apporter une réponse à l'aide du bouton droit de la souris.



Permet de supprimer un message de la **Boîte de réception** et de le mettre dans la **Corbeille de messages**. Pour supprimer un message, vous avez également la possibilité de cliquer sur le message à supprimer à l'aide du bouton droit de la souris. En cliquant droit, vous avez d'ailleurs la possibilité de supprimer tous les messages présents dans la **Boîte de réception**. De plus, si vous supprimer les messages directement à partir de l'onglet **Corbeille de messages**, que ce soit par le biais du bouton ou du clic droit de la souris, vous allez les supprimer de façon définitive.



Permet d'actualiser l'affichage des messages dans la **Boîte de réception**. Quoi qu'il en soit, une actualisation est faite de façon automatique toutes les minutes (configuration par défaut).



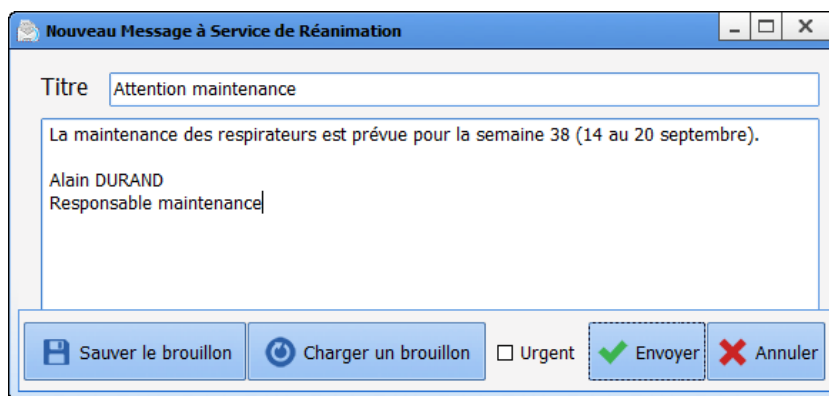
Permet de passer du mode **En ligne** au mode **Hors ligne** afin d'être visible ou non des autres postes connectés au service de messagerie.



Permet de configurer un certain nombre de paramètres au niveau de l'application, notamment au niveau des couleurs et de l'affichage situé sur la gauche de l'application. Cf. chapitre : « [Configuration de la messagerie](#) »

## 10.1 Envoi de messages

Avant d'envoyer un message, vous devez au préalable sélectionner un ou plusieurs destinataires (salle ou personnel). Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**. Une fenêtre s'ouvre afin de vous permettre de taper votre message.




Le bouton **Sauver le Brouillon** vous permet de créer d'avance des messages génériques afin de les enregistrer. Vous devez taper votre message puis cliquer sur ce bouton pour le sauvegarder. Le bouton **Charger un brouillon** vous permet de récupérer tous les brouillons que vous avez pu enregistrer. Dans la **Liste des Brouillons**, vous retrouvez tous les objets des messages les uns en dessous des autres. Sélectionnez celui que vous souhaitez envoyer et cliquez sur le bouton **OK** pour valider. Vous pouvez aussi double cliquer sur le titre du brouillon que vous souhaitez envoyer. De plus, dans cette fenêtre, vous avez aussi la possibilité de **Supprimer** des brouillons que vous n'utilisez plus. La case à cocher **Urgent** permet d'insérer un critère d'importance (!) et de colorer le message en rouge afin que les personnes le recevant sachent tout de suite que c'est un message à caractère urgent.

**REMARQUE :** Lorsque vous lisez ou répondez à un message, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités que lors de la création d'un nouveau message.

## 10.2 Configuration de la messagerie

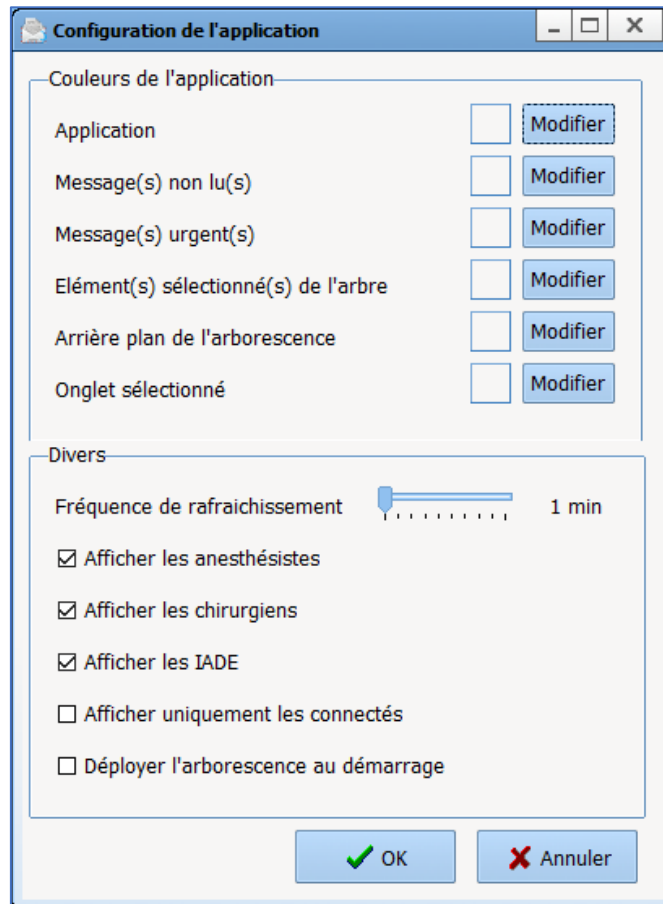Par le biais du bouton **Réglages**, vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres au niveau de l'application, notamment au niveau des couleurs et de l'affichage situé sur la gauche de l'application.



Si vous souhaitez modifier l'une des couleurs disponibles dans cette application, il vous suffit de cliquer sur le bouton **Modifier présent** à côté de chaque couleur modifiable (Application, Messages non lus, Messages urgents, Éléments sélectionnés de l'arbre, Arrière-plan de l'arborescence, Onglet sélectionné).

Vous pouvez également modifier la fréquence de rafraîchissement. Par défaut l'application se rafraîchit d'elle-même toutes les minutes. Vous pouvez modifier cette fréquence jusqu'à 10 minutes.

Vous pouvez également décider des catégories d'utilisateurs que vous souhaitez afficher à l'écran. Par défaut, les anesthésistes, chirurgiens et IADE sont affichés. Si vous cochez **Afficher uniquement les connectés**, seuls les utilisateurs connectés seront affichés dans l'arborescence. Vous avez aussi la possibilité de déployer l'arborescence au démarrage en cochant la case à cocher correspondante.



## 11. Lexique

---

APO : Administration prophylactique d'oxytocine  
ATCD : Antécédent(s)  
BDM : Base de médicaments  
BHR : Bactérie hautement résistante  
BMI : Body mass index  
BMR : Bactérie multi-résistante  
BSA : Body surface area  
BU : Bandelette urinaire  
CAT : Conduite à tenir  
CO : Contraceptif oral  
CPA : Consultation préanesthésique  
CR : Compte rendu  
CRAT : Centre de Référence des Agents Tératogènes  
CRO : Compte rendu opératoire  
DCI : Dénomination commune internationale  
DDG : Date de début de grossesse  
DDR : Date des dernières règles  
DIU : Dispositif intra-utérin  
DM : Dispositif médical  
DOO : Durée d'ouverture de l'œuf  
DPI : Dossier patient informatisé  
DV : Décubitus ventral  
ECG : Electrocardiogramme  
EPP : Entretien prénatal précoce  
EVA : Echelle visuelle analogique  
Fc : Fréquence cardiaque  
FC : Fausse couche  
FCS : Fausse couche spontanée  
FCT : Fausse couche tardive  
FOSO : Feuille d'ouverture de salle d'opération  
GEU : Grossesse extra-utérine  
HPP : Hémorragie du post partum  
HTA : Hypertension artérielle  
IADE : Infirmier(ère) anesthésiste diplômé(e) d'Etat  
IMG : Interruption médicale de grossesse  
INBP : Infection néonatale bactérienne précoce  
IV : Intra veineux  
IVG : Interruption volontaire de grossesse  
J : Jour  
KT : Cathéter  
LCC : Longueur crânio-caudale  
MAP : Menace d'accouchement prématuré  
MAR : Médecin anesthésiste-réanimateur  
MFIU : Mort fœtale in utero  
NONR : Normo Oscillant Normo Réactif  
PC : Périmètre crânien  
PDE : Poche des eaux  
PNP : Préparation à la naissance et à la parentalité  
PO : Administration préventive d'oxytocine  
PSE : Pousse seringue électrique



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)







DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28

RAI : Recherche d'agglutinines irrégulières  
 RAPDE : Rupture artificielle de la poche des eaux  
 RAS : Rien à signaler  
 RSPDE : Rupture spontanée de la poche des eaux  
 SA : Semaines d'aménorrhée  
 SAP : Seringue auto pulsée  
 SDN : Salle de naissance  
 SF : Sage-femme  
 SIH : Système d'information hospitalier  
 TTT : Traitement  
 TV : Toucher vaginal  
 USC : Unité de soins continus  
 VS-AI-PEP : ventilation spontanée avec aide inspiratoire et pression expiratoire positive

## 12. Définitions des pictogrammes

---

Symbole	Nom du symbole	Signification du symbole
	Médical Device (dispositif médical)	Indique que le produit est un dispositif médical.
	Fabricant Date de fabrication	Désigne le fabricant du dispositif médical et la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.
	Marquage CE	Le marquage CE indique qu'un produit est conforme aux réglementations applicables de l'Union européenne.
	Consulter le manuel	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi pour utiliser le produit.



2023-03-17

BOW MEDICAL SAS  
 43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
 Tél : +33 3 60 03 24 68  
 Fax : +33 9 72 29 34 87  
 Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
 Version **DIANE** : 4.11  
 Version du dispositif médical : 3.28



BOW MEDICAL S.A.S  
43 Avenue d'Italie 80090 AMIENS  
**2023-03-17**



Le Moteur de prescription **DIANE** est un dispositif médical de classe I selon la directive 93/42 et le règlement européen 2017/745



L'utilisateur doit lire attentivement toutes les instructions afin de garantir la bonne utilisation du dispositif médical.

**La formation au dispositif médical DIANE est fortement recommandée.**

Dernière révision : 2023-03-17



**2023-03-17**

BOW MEDICAL SAS  
43, Avenue d'Italie 80090 Amiens  
Tél : +33 3 60 03 24 68  
Fax : +33 9 72 29 34 87  
Courriel : [contact@bowmedical.com](mailto:contact@bowmedical.com)



DEV-EN-034 Manuel utilisateur **DIANE**  
Version **DIANE** : 4.11  
Version du dispositif médical : 3.28