

# DIANE

A BOW MEDICAL brand

BM-DEV-EN-017 - Release note

Version 4.14.1

OS Supportés : Win10, Win11, WinServer2016, WinServer2019, WinServer2022. Vidal API Mini.: 2020.5.3  
Vidal API Rec.: 2024.11.00 BCB API Mini.: 20180702



## **EVOLUTIONS**

### **Circuit du médicament**

**DIA-46624**

#### **Affichage en tableau structuré**

Pour une meilleure lisibilité, le plan de cueillette s'affiche maintenant sous forme de **tableau clair et hiérarchisé**.

Les colonnes incluent :

- Libellé du produit
- ID Livret
- Code GEF (colonne prévue pour une future intégration)
- Nombre d'administrations sur la période sélectionnée
- Quantité à prévoir (en unités de conditionnement)

#### **Filtrage global et semi-global du plan de cueillette**

Deux modes de génération du plan sont désormais disponibles :

- **Global** : une vue regroupée par produit, utile pour les préparations centralisées
- **Semi-global** : une vue triée par patient, facilitant le suivi individualisé.
- Le filtrage peut se faire selon plusieurs critères : un patient unique, une unité de soin, ou tous les patients à charge d'un utilisateur.
- La période du plan reste personnalisable (date de début / fin).

#### **Export CSV du plan de cueillette**

Il est désormais possible de **générer un fichier CSV** à partir du plan de cueillette, directement depuis l'onglet **Rapport/Impression du Portail**.

Ce fichier, structuré pour une lecture optimale dans un tableur, inclut :

- Une en-tête avec les informations générales
- Le détail par patient (dans le cas d'un plan semi-global) ou par produit (global)
- Les quantités nécessaires calculées en unités de conditionnement
- Un nom de fichier généré automatiquement en fonction du périmètre sélectionné (service ou patient)

## **DIA-57862 - (Associé au dispositif médical)**

### **Nouveauté – Import du livret thérapeutique : continuité des favoris et rapport amélioré**

Afin de faciliter la mise à jour des livrets thérapeutiques et de garantir la continuité des protocoles de soins, l'import du livret évolue.

1. Nouvel affichage du rapport d'import
2. Ajout d'un second rapport type liste de travail, vous permettant d'agir sur les favoris

Lorsqu'un livret est mis à jour, certains produits de vos favoris peuvent devenir invalides (références modifiées, marché expiré, etc.).

Désormais, le système **propose automatiquement des correspondances** entre les anciens et les nouveaux produits, afin de **préserver vos favoris et protocoles** sans interruption.

Ces correspondances sont visibles dans le **rapport d'import**.

L'algorithme recherche les équivalents selon plusieurs critères (UCD, DCI, CIP forme, dosage...).

Vous pouvez valider la substitution ou la modifier si besoin.

Un **rapport dédié** est accessible depuis l'outil de configuration.

Il permet :

d'**identifier rapidement** les produits devenus invalides après import du livret,

de **valider ou ajuster** les substitutions proposées,

de **réapprouver** les favoris mis à jour (si vous disposez du droit associé).

Le rapport s'affiche sous forme de tableau lisible, avec :

les produits invalidés,

les propositions de remplacement,

l'état de validation (automatique ou manuelle),

l'auteur et la date de ré approbation si applicable.




| Favoris impactés                                                                                                                                                     |     | Rapport d'import du livret thérapeutique                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Libellé du produit                                                                                                                                                   |     | Résumé des modifications                                                                                                        | Informations techniques |
| ⊕ Vidal 07/08/2025 16:58<br>✖ Vidal 07/08/2025 16:31<br>✔ Vidal 07/08/2025 16:30<br>✔ Vidal 07/08/2025 16:01<br>✔ Vidal 07/08/2025 15:57<br>✖ Vidal 07/08/2025 15:56 |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACARBOSE (GLUCOR) 50 mg comprimé non sécable                                                                                                                       | NON | ACARBOSE (GLUCOR) 50 mg comprimé Ⓢ non sécable Ⓢ écrasable ▶ ACARBOSE (GLUCOR) 50 mg comprimé non sécable écrasable             |                         |
| ⊕ ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé                                                                                                                                  | NON | ACIDE FOLIQUE (SPECTAPOLDINE) 0,4 mg comprimé Ⓢ non sécable Ⓢ écrasable ▶ ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé                     |                         |
| ⊕ VACCIN ACT-HB* 10 µg seringue 0,5 ml                                                                                                                               | NON | VACCIN ACT-HB* 10 µg seringue 0,5 ml (Haemophilus) poudre et solvant pour solution injectable ▶ VACCIN ACT-HB* 10 µg seringu... |                         |
| ⊕ ACTISKENAN 5MG GELU                                                                                                                                                | NON | MORPHINE LIBERATION IMMEDIATE (ACTISKENAN) 5 mg gélule ▶ ACTISKENAN 5MG GELU                                                    |                         |
| ⊕ HYDROCORTISONE UP3 100MG F+H+HYDROCORTI                                                                                                                            | NON | HYDROCORTISONE UP3 100MG F+A ▶ HYDROCORTISONE UP3 100MG F+H+HYDROCORTISONE UP3 100MG F+A                                        |                         |
| ⊕ ROVAMYCINE 1,5Mg UI INJ FL                                                                                                                                         | NON | SPIRAMYCINE 1,5 M <sub>UI</sub> (ROVAMYCINE), LYOPHELISAT PR SOL INJ ▶ ROVAMYCINE 1,5Mg UI INJ FL                               |                         |
| ⊕ ACARBOSE ARROW 100 mg comprimé sécable                                                                                                                             |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACEBUTOLOL BIOGRAN 200 mg comprimé pelliculé                                                                                                                       |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACETONE flacon 1 litre Réf. 1002180                                                                                                                                |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACTIVIR 5% crème                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACIDE CLODRONIQUE SEL DISODIQUE (CLASTEON)                                                                                                                         |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg comprimé                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACIDE TRANEXAMIQUE ARROW 1g/10ml, solution t                                                                                                                       |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACIDE ZOLEDRONIQUE ARROW 4mg/75 ml                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ ACIDE ZOLEDRONIQUE SO2 5 mg/100 ml solution p                                                                                                                      |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ COLIPRANE 500 mg comprimé orodispersible                                                                                                                           |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ DORITAMINE PAN 250MG INJ FL                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ FLUCONAZOLE ZEN 10MG/ML BUI F                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ FORMECYT 2G IV FL 100ML                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ GLUCOSE 5% BAX CPX 100ML                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ HEPARINE CHOAY 25000 IU FL 5ML                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ INSULINE ASPART SAN100U F 100ML                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ MEDAZOLAM PAN 1MG/ML AMP 5ML                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ NICARDIPPINE ARW 10MG INJ 10ML                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ PANTOFRASOLE BIGA 40MG CPR                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ VENTOLINE 0,5MG/5ML INJ AMP                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ SODIUM CHLORURE 0,9% (LABO BAXTER), SOL IN                                                                                                                         |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊕ POTASSIUM 20% LAV AB 10ML                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊗ ACARBOSE (GLUCOR) 100 mg comprimé Ⓢ non sécable                                                                                                                    |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊗ ACEBUTOLOL (SECTRAL) 200 mg comprimé Ⓢ pelliculé                                                                                                                   |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊗ ACETONE flacon 1 litre Réf. 1002180                                                                                                                                |     |                                                                                                                                 |                         |
| ⊗ ACCIOLOYR (DOVRAN) 5% σÅ me tube 10 g                                                                                                                              |     |                                                                                                                                 |                         |

## Aucun paramétrage nécessaire

### DIA-57875

Un champ de "**Recherche spécifique**" est ajouté dans la section **Favoris** de l'outil de Configuration Diane. Son but : rechercher un produit au travers des différents favoris et protocoles même si le nom du produit n'est pas disponible dans le libellé.

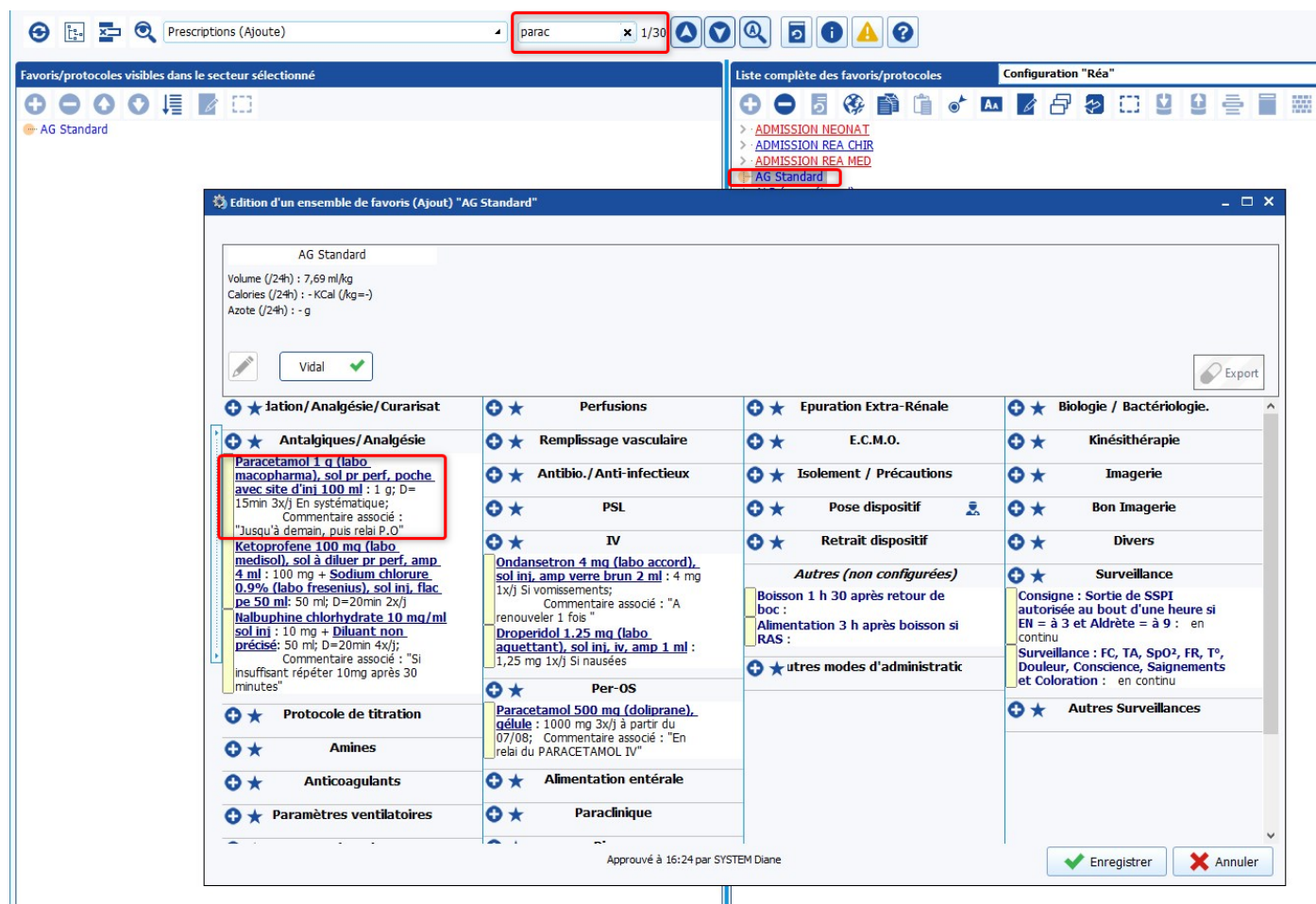


The screenshot displays the BOW MEDICAL software interface. At the top, there is a search bar labeled "Prescriptions (Ajouter)" with the text "parac" entered. Below this, the "Favoris/protocoles visibles dans le secteur sélectionné" section shows a list of medical protocols. The "AG Standard" protocol is highlighted. The "Liste complète des favoris/protocoles" section on the right shows a list of protocols including "ADMISSION NEONAT", "ADMISSION REA CHIR", "ADMISSION REA MED", and "AG Standard". The "Edition d'un ensemble de favoris (Ajout) 'AG Standard'" window is open, showing a table of medical protocols. The table has four columns: "Jation/Analgesie/Curarisat", "Perfusions", "Epuracion Extra-Rénale", and "Biologie / Bactériologie". The "Jation/Analgesie/Curarisat" column contains a list of protocols, including "Paracetamol 1 g (labo. macopharma), sol pr perf. poche avec site d'ini 100 ml : 1 g; D= 15min 3x/j En systématique; Commentaire associé : 'Jusqu'à demain, puis relai P.O'". The "Perfusions" column contains a list of protocols, including "Ondansetron 4 mg (labo accord), sol inj. amp verre brun 2 ml : 4 mg 1x/j Si vomissements; Commentaire associé : 'A renouveler 1 fois'". The "Epuracion Extra-Rénale" column contains a list of protocols, including "E.C.M.O.", "Isolement / Précautions", "Pose dispositif", "Retrait dispositif", and "Autres (non configurées)". The "Biologie / Bactériologie" column contains a list of protocols, including "Kinésithérapie", "Imagerie", "Bon Imagerie", "Divers", "Surveillance", and "Autres Surveillances". The "Paracetamol 1 g (labo. macopharma), sol pr perf. poche avec site d'ini 100 ml : 1 g; D= 15min 3x/j En systématique; Commentaire associé : 'Jusqu'à demain, puis relai P.O'" protocol is highlighted in the "Jation/Analgesie/Curarisat" column. The "AG Standard" protocol is also highlighted in the "Liste complète des favoris/protocoles" section. The "Edition d'un ensemble de favoris (Ajout) 'AG Standard'" window is open, showing a table of medical protocols. The table has four columns: "Jation/Analgesie/Curarisat", "Perfusions", "Epuracion Extra-Rénale", and "Biologie / Bactériologie". The "Jation/Analgesie/Curarisat" column contains a list of protocols, including "Paracetamol 1 g (labo. macopharma), sol pr perf. poche avec site d'ini 100 ml : 1 g; D= 15min 3x/j En systématique; Commentaire associé : 'Jusqu'à demain, puis relai P.O'". The "Perfusions" column contains a list of protocols, including "Ondansetron 4 mg (labo accord), sol inj. amp verre brun 2 ml : 4 mg 1x/j Si vomissements; Commentaire associé : 'A renouveler 1 fois'". The "Epuracion Extra-Rénale" column contains a list of protocols, including "E.C.M.O.", "Isolement / Précautions", "Pose dispositif", "Retrait dispositif", and "Autres (non configurées)". The "Biologie / Bactériologie" column contains a list of protocols, including "Kinésithérapie", "Imagerie", "Bon Imagerie", "Divers", "Surveillance", and "Autres Surveillances". The "Paracetamol 1 g (labo. macopharma), sol pr perf. poche avec site d'ini 100 ml : 1 g; D= 15min 3x/j En systématique; Commentaire associé : 'Jusqu'à demain, puis relai P.O'" protocol is highlighted in the "Jation/Analgesie/Curarisat" column. The "AG Standard" protocol is also highlighted in the "Liste complète des favoris/protocoles" section.

Paramétrage:

Le champ de recherche sera disponible dès la mise à jour de l'application.

Des options vous permettent cependant d'ajuster les filtres de recherche. Ces options sont disponibles via le bouton "loupe".

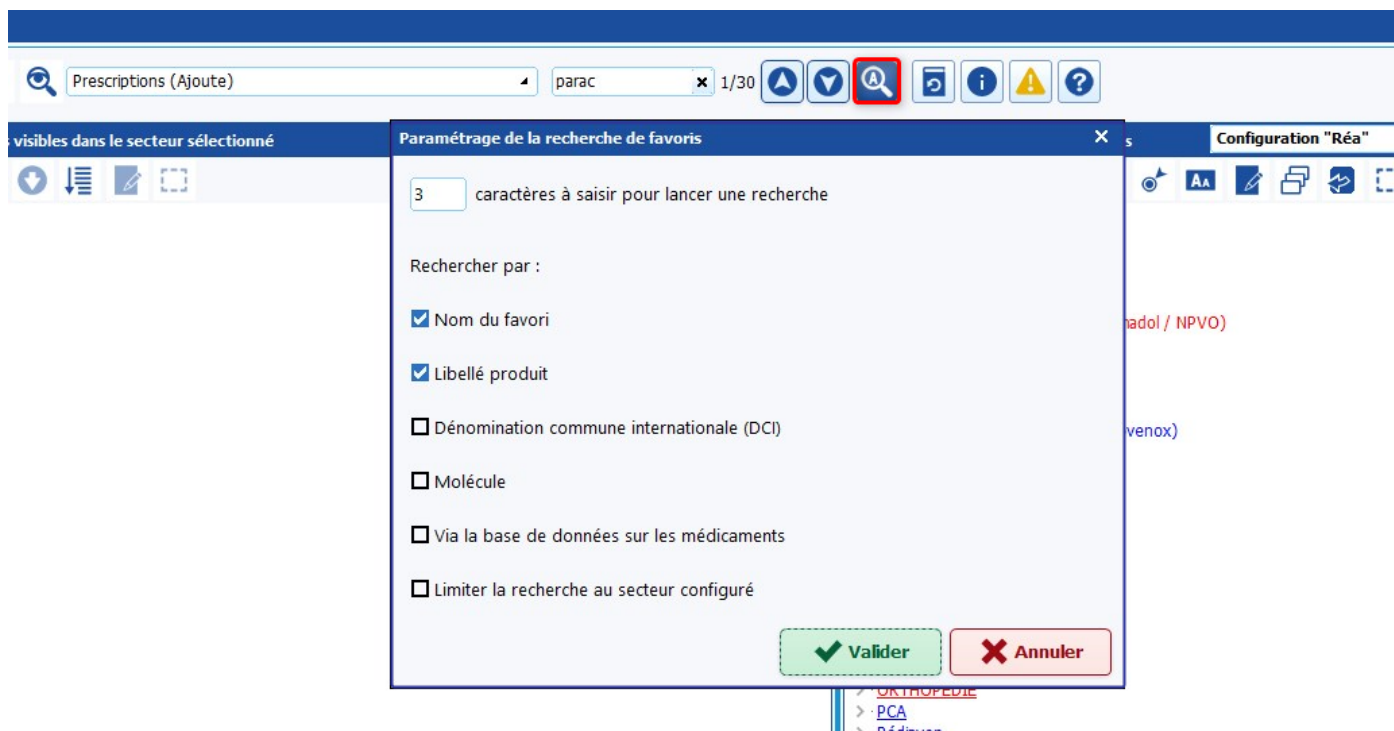

**DIA-58345**

**Afin de garantir un circuit d’approbation plus fiable, en particulier lors de la vérification des favoris impactés par un nouveau livret thérapeutique.**

Le fonctionnement du bouton "**Enregistrer**" a été clarifié lors de la création ou modification d’un favori d’administration directe.

### Création d’un favori

Le bouton "**Enregistrer**" est actif dès que les informations saisies sont valides.

Si vous avez les droits d’approbation, le favori sera **automatiquement approuvé** à l’enregistrement.

### Modification d’un favori

Si le favori est déjà approuvé, vous voyez désormais **le nom de la personne** et la **date/heure de l'approbation**.

Deux cas possibles :

Si vous **n'avez pas** le droit d'approuver : le bouton reste "**Enregistrer**" → cela **retire l'approbation** en cours et enregistre vos modifications.

Si vous **avez** le droit d'approuver : le bouton devient "**Enregistrer et approuver**" → cela met à jour le favori et **renouvelle l'approbation** à votre nom.

Paramétrage associé à "Dobu + Nacl => ts les 2 substitués"

**Composition (non modifiable car présence d'au moins une posologie)**

Produit principal  
DOBUTAMINE PAN 250MG INJ FL 250 mg

Produit additionnel ☒ Diluant  
SODIUM CHLORURE 0.9% (LABO FRESENIUS), SOL INJ, FLAC PE 500 ML 30 ml

Concentration finale du produit principal : 5 mg/ml

**Type et voie d'administration**

Type d'administration  
Injection directe Injection lente Injection pédiatrique  
AIVOC Débit contrôlé **Débit contrôlé ciblé**

Voie d'administration  
intraveineuse (en perfusion)

**Génération de posologies**

µg /kg /h Première valeur : 1  
/m2 /min Dernière valeur :  
de DOBUTAMINE Incrémentation :  
**Générer la posologie**

☐ Saisir un commentaire associé ☐ Ne pas prendre en compte pour la balance liquidienne

Dernière modification à 15:33 par DESBOIS Zoé

**Enregistrer** **Annuler**

**Posologie(s) générée(s)**

intraveineuse (en perfusion) (PSE ciblé) 5 mg/ml  
intraveineuse (en perfusion) (PSE) 5 mg/ml

Associer à un bouton

**Paramétrage:** aucun paramétrage nécessaire.

## CODAGE DES ACTES



## DIA-56265

Afin de **faciliter la cotation exhaustive** et de **réduire les oublis**. Nous avons ajoutés un certains nombres d'automatismes dans la détection des codes.

- **GLLD017: « Oxygénothérapie avec surveillance continue de l'oxymétrie, en dehors de la ventilation mécanique, par 24 heures ».**

L'acte **GLLD017** est automatiquement proposé lorsque les éléments suivants sont présents et validés dans le dossier patient :

**Prescription ventilatoire** via la fenêtre spécifique comportant :

**Traitement** : *Oxygénothérapie*

**Interface** : au moins une des interfaces suivantes :

Canule par oxygénothérapie à haut débit

Lunettes nasales

Masque à haute concentration

Masque à moyenne concentration

Masque facial

Sonde nasale

**Mode** : *Oxygénothérapie conventionnelle*

**Validation de l'occurrence associée** dans le **Plan de soins**

**Surveillance continue de l'oxygénothérapie** pendant au moins 5 minutes, sans interruption (trou de valeur < 2 min), de la **Saturation en oxygène du sang artériel (SpO2)**.

- **GELD005 "Nébulisation d'agent thérapeutique à destination bronchique (aérosol) avec surveillance de la SpO<sub>2</sub> et de la fréquence cardiaque pendant au moins 2 heures" .**

L'acte **GELD005** est automatiquement proposé lorsque les conditions suivantes sont réunies dans le dossier patient :

**Prescription médicamenteuse** d'au moins un produit appartenant à la **classe ATC R03** (*médicaments pour les troubles obstructifs des voies respiratoires*),

Ce produit doit être prescrit avec une **voie d'administration** :

*Endo-trachéobronchique*

ou *Inhalée*

**Validation de l'occurrence correspondante** dans le **Plan de soins**

- **FELF003: « Administration intraveineuse simultanée de deux des produits sanguins suivants : plasma frais congelé, plaquettes, facteur anti-hémophilique, fibrinogène, antithrombine III pour suppléance de coagulopathie »**

L'acte **FELF003** est proposé automatiquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies sur une période de 24 heures :

**Prescription et administration d'au moins deux produits sanguins** parmi la liste suivante :

**Plasma frais congelé** (Identifiant externe : PS\_PFC)

**Plaquettes / Concentré plaquettaire** (PS\_CP)

**Facteur anti-hémophilique A ou B** (PS\_FACT8, PS\_FACT9)

**Fibrinogène** (PS\_FACT1)

**Antithrombine III** (PS\_ATHRB3)

Les produits doivent être **correctement identifiés** dans le système, via l'**ajout d'un identifiant externe** :

Soit dans la **liste des produits sanguins**,

Soit dans le **livret thérapeutique**.

- **HSLD002 “Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures”.**

L'acte **HSLD003** est proposé automatiquement lorsque les conditions suivantes sont respectées:

le patient doit être âgé de plus de 28 jours

la posologie doit être ciblée **[Kcal/kg/jour]** , l'**unité Kcal ou équivalent** est nécessaire. La posologie doit être **supérieure à 35 Kcal/Kg/jour**.

l'administration doit être validée et terminée.

Les produits doivent être **correctement identifiés**

Produits prescrits dans le champ de prescription "Alimentation entérale".

**OU** Présence de l'identifiant externe : **ALIM\_ENTERAL** associé aux différents produits disponibles:

Soit dans la liste "Médicaments Diane"

**Soit** dans la liste des produits du "Livret thérapeutique".

- **HSLF001 “Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures”**

L'acte **HSLF001** est proposé automatiquement lorsque les conditions suivantes sont respectées:

le patient doit être âgé de plus de 28 jours

la posologie doit être ciblée [**Kcal/kg/jour**] , l'unité **Kcal ou équivalent** est nécessaire. La posologie doit être **supérieure à 35 Kcal/Kg/jour**.

l' administration doit être validée et terminée.

Les produits doivent être **correctement identifiés**

Produits prescrits dans le **champ de prescription** "Alimentation entérale" ou "Alimentation parentérale".

Produits appartenant à la **classe ATC B05BA "Solutions pour nutritons parentérale"**.

**OU** Présence de l'identifiant externe : **ALIM\_ENTERAL** ou **ALIM\_PARENT** associé aux différents produits disponibles:

Soit dans la liste "Médicaments Diane"

**Soit** dans la liste des produits du "Livret thérapeutique".

- **HSLF002 "Alimentation parentérale, avec un apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures"**

L'acte **HSLF002** est proposé automatiquement lorsque les conditions suivantes sont respectées:

le patient doit être âgé de plus de 28 jours

la posologie doit être ciblée [**Kcal/kg/jour**] , l'unité **Kcal ou équivalent** est nécessaire. La posologie doit être **comprise entre 20 à 35 Kcal/Kg/jour**.

l' administration doit être validée et terminée.

Les produits doivent être **correctement identifiés**

Produits prescrits dans le **champ de prescription** "Alimentation parentérale".

Produits appartenant à la **classe ATC B05BA "Solutions pour nutritons parentérale"**.

**OU** Présence de l'identifiant externe : **ALIM\_PARENT** associé aux différents produits disponibles:

Soit dans la liste "Médicaments Diane"

**Soit** dans la liste des produits du "Livret thérapeutique".

- **HSLF003 "Alimentation parentérale, avec un apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures"**

L'acte **HSLF002** est proposé automatiquement lorsque les conditions suivantes sont respectées:

le patient doit être âgé de plus de 28 jours

la posologie doit être ciblée [**Kcal/kg/jour**] , l'unité **Kcal ou équivalent** est nécessaire. La posologie doit être **supérieure à 35 Kcal/Kg/jour**.

l' administration doit être validée et terminée.

Les produits doivent être **correctement identifiés**

Produits prescrits dans le **champ de prescription** "Alimentation parentérale".

Produits appartenant à la **classe ATC B05BA "Solutions pour nutritons parentérale"**.

**OU** Présence de l'identifiant externe : **ALIM\_PARENT** associé aux différents produits disponibles:

Soit dans la liste "Médicaments Diane"

**Soit** dans la liste des produits du "Livret thérapeutique".

- **FELF004 "Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demi-masse sanguine chez l'adulte par kilogramme [ml/kg] ou à 40 millilitres par kilogramme [ml/kg] chez le nouveau-né en moins de 24 heures".**

L'acte **FELF004** est proposé automatiquement lorsque les conditions suivantes sont respectées:

la posologie doit être ciblée **[ml/kg]** . La posologie doit être **supérieure à demi-masse sanguine**.

La demi-masse sanguine de référence étant chez l'adulte de sexe masculin est de 38 ml/kg, pour un adulte de sexe féminin elle est de 34ml/kg.

Les Concentrés Globulaires doivent être identifiés via **l'identifiant externe : PS\_CGR**

L'ajout du code **FELF004** **supprime** le code **FELF0011**.

## Echanges des données entre un DPI et Diane Réa

### **DIA-58611 - (Associé au dispositif médical)**

Lors du démarrage d'une réanimation, les informations suivantes sont automatiquement récupérées depuis le DPI EMED et intégrées dans Diane Réanimation : Taille Poids Antécédents médicaux Antécédents chirurgicaux Antécédents allergiques Grossesse (oui/non) Allaitement (oui/non) Date des dernières règles

### **DIA-58619**

Dans le cadre des échanges entre EMED et Diane Réa, il est possible d'identifier un patient transféré en réanimation depuis EMED. Lors de sa sélection, ce patient apparaît dans Diane dans la liste des patients attendus en réanimation.

### **DIA-58624 - (Associé au dispositif médical)**

Appel contextuel permettant d'accéder au DPI EMED

### **DIA-58629**



À la fin d'un séjour en réanimation, certains éléments sont automatiquement exportés vers EMED depuis Diane Réa:

- Le compte rendu de séjour (incluant le traitement personnel + les prescriptions faites en réa + le plan de soin)
- Les données physiopathologiques, si elles ont été modifiées pendant le séjour

Ces exports doivent se déclencher lors de la clôture du dossier marquant la fin de la prise en charge par la réanimation.

### **DIA-58770 - (Associé au dispositif médical)**

Si un patient est admis en réanimation sans IPP, puis que l'IPP est ajouté par la suite, et qu'un dossier EMED correspond à cet IPP, alors les données du DPI EMED sont automatiquement intégrées dans le dossier de réanimation.

### **DIA-59180**

Dans le cadre de l'échange de données entre Diane Réanimation et EMED, les prescriptions du patient sont automatiquement suspendues dans EMED dès son admission en réanimation.

## **GESTION DES CONSOMMABLES**

### **DIA-52987 - (Associé au dispositif médical)**

**Nous avons posé les fondations : les référentiels de l'établissement sont désormais intégrés et interrogeables. L'ouverture vers les référentiels nationaux viendra compléter cette évolution très prochainement.**

L'utilisation d'un référentiel type consommable permet de renseigner précisément le type de dispositifs sa taille, sa référence, son numéro de lot ...

Un nouveau type de champ de recherche est paramétrable au sein de l'application: dans les formulaires d'éléments de soins, dans les saisies multiples et il est également possible de paramétrer un bouton dédié.

Pose KT avec référentiel
Date : 01/08/2025 Heure : 11:11 ☒ Synchroniser planifications

Pose KT avec référentiel

Clindimed

sonde

| label                                        | code    |
|----------------------------------------------|---------|
| ORL HEMOSTASE MECANIQUE PAR SONDE BALLONNET  | S60KA01 |
| SONDE BALLONNET STALENDOSCOPIE               | S60GA04 |
| SONDE CRYO-INDENTATION                       | S50EC03 |
| SONDE PHACOEMULSIFICATEUR                    | S50AD02 |
| CANULE/SONDE NASALE VENTILATION NON INVASIVE | R60AA08 |
| SONDE ECHANGE SONDE INTUBATION               | R59BA04 |
| SONDE A OXYGENE SANS TAMPON                  | R55AA03 |
| SONDE A OXYGENE TAMPON FIXE                  | R55AA02 |
| SONDE A OXYGENE TAMPON AMOVIBLE              | R55AA01 |
| SONDE A OXYGENE                              | R55AA   |

Page 1/15 | 1-11/144

COMMENTAIRES

CONSOMMABLES

CANULE ARTERIELLE

CATHETER PERIPHERIQUE INTRA-ARTERIEL SANS AILETTE

IMAGES / PHOTOS ASSOCIEES

PLANIFICATION DE FORMULAIRES

Formulaire suivant :  
Suivi KT PIC:

Début de planification 01/08/2025 à 11:11

La date/heure de début de planification est antérieure à la date/heure courante.  
Planification répétée  
1ère prévue à 20:00

Tou(te)s les jours : L M M J V S D

Les heures suivantes :

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ajouter une planification

Reprendre les dernières valeurs

Enregistrer

Annuler

Paramétrage:  
le paramétrage est décrit dans un ticket spécifique.

## DIA-53058

Une nouvelle section intitulée “**Référentiels**” est désormais disponible dans l’outil de configuration de l’application.

Elle vous permet de définir des **champs de recherche personnalisés** pour interroger les référentiels disponibles, qu’ils soient **locaux** ou **nationaux** (dans une phase ultérieure).

Il est possible de créer **plusieurs champs de recherche pour un même référentiel**, afin d’adapter finement les usages aux besoins métiers.


Une fois configurés, ces champs de recherche peuvent être intégrés dans différents contextes :

**Formulaires d’éléments de soins**

**Fenêtres de saisie multiple**

**Fenêtres dédiées**, accessibles via **boutons configurables**

Cette évolution marque la **première phase** de notre intégration des référentiels, avec une ouverture progressive vers les référentiels nationaux dans une prochaine version.

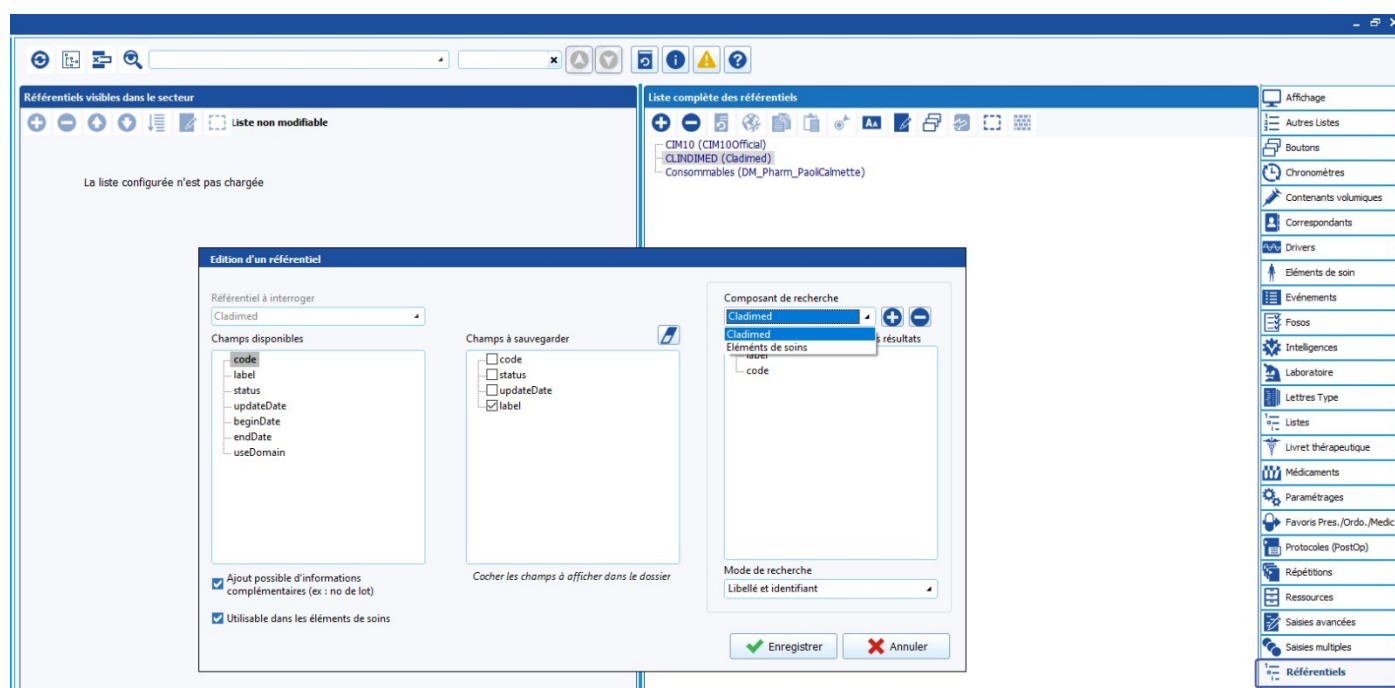


## MEDICAMENTS ANESTHESIE

### DIA-55564

Pour renforcer la sécurité de l’administration médicamenteuse, les **médicaments identifiés comme “à risque”** sont désormais **signalés visuellement** dans les interfaces d’anesthésie.

### Signalement en saisie d'administration directe


Dans la fenêtre de saisie des Administrations directes, ainsi que dans l'outil de création de favoris, une **icône “Médicament à risque”** est affichée dans la zone de sélection du produit si le médicament sélectionné est concerné.

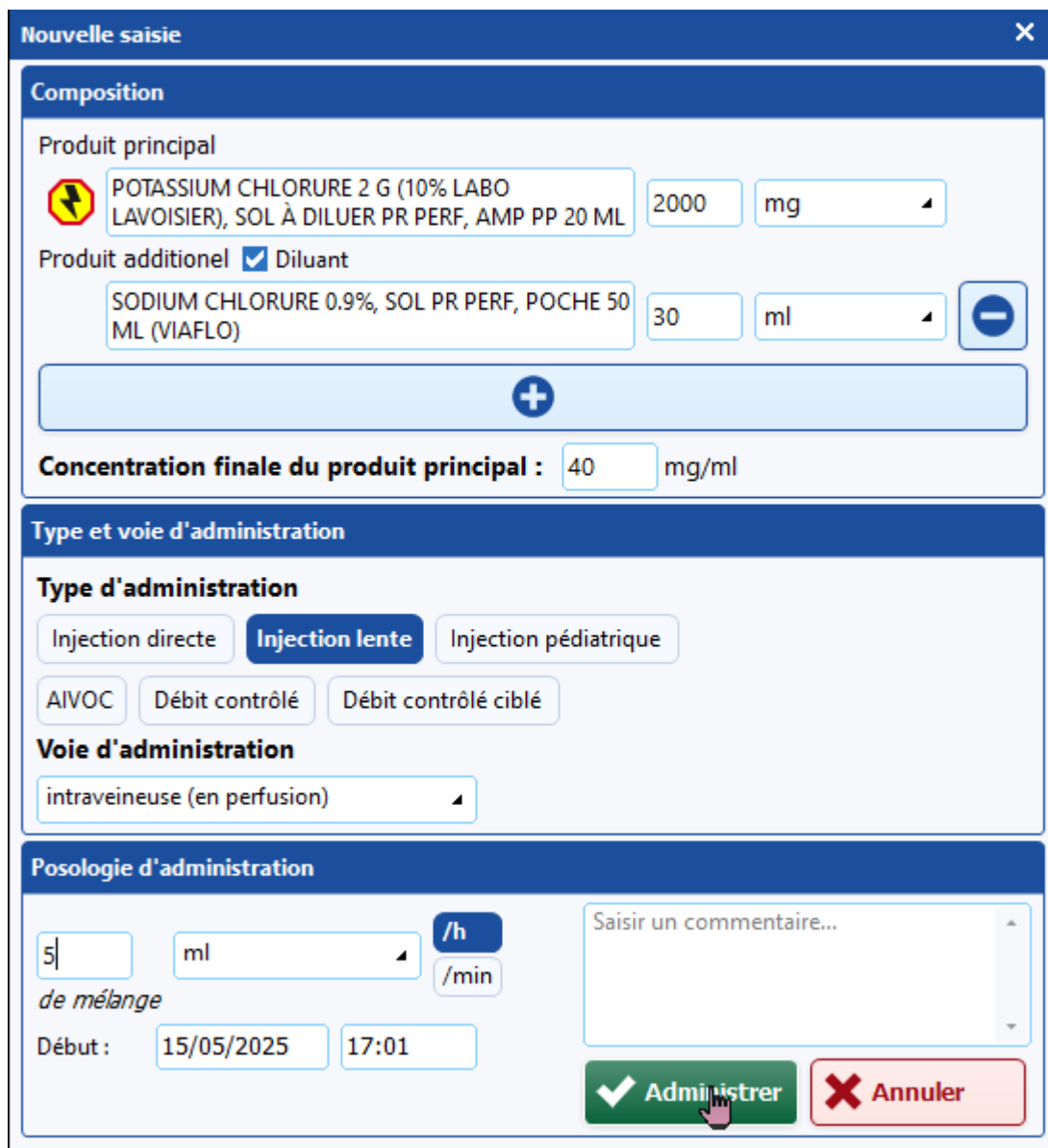

Le **survol de l'icône** affiche un message d'alerte : “Médicament à risque”.

### Signalement dans la grille Diane

Dans la **grille d'affichage améliorée des Administrations directes (grille Diane)**, une nouvelle colonne est affichée **juste après l'en-tête**. Elle contient une icône spécifique pour chaque ligne correspondant à une administration de médicament à risque.

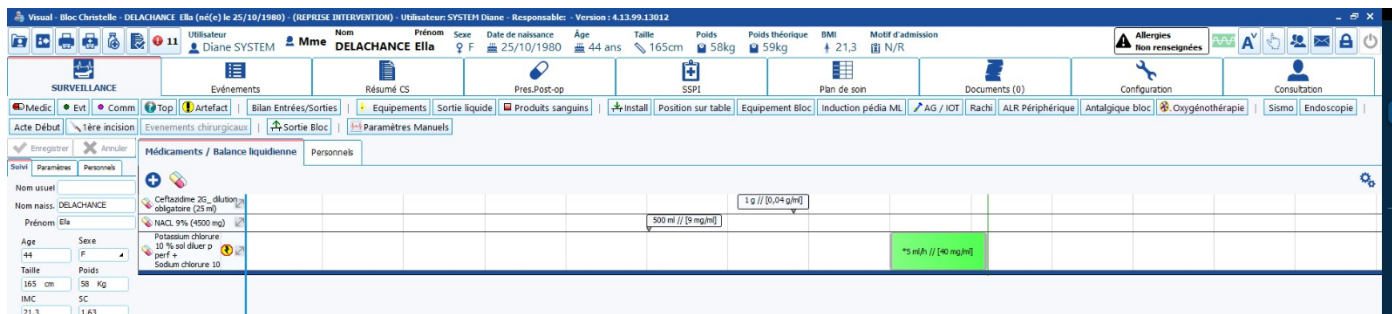

Visual: Bloc Chrestelle - DELACHANCE Ella (née le 25/10/1980) - (REPRISE INTERVENTION) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Responsable - Version : 4.13.99.13012

Utilisateur: Diane SYSTEM Mme DELACHANCE Ella Sexe: F Date de naissance: 25/10/1980 Age: 44 ans Taille: 165cm Poids: 58kg Poids théorique: 59kg BMI: 21.3 Motif d'admission: N/R

Alérgies: Non renseignées

SURVEILLANCE: Evénements, Résumé CS, Pres.Post-op, SSPI, Plan de soin, Documents (0), Configuration, Consultation


Acte Début, 1ère incision, Evénements chirurgicaux, Sortie Bloc, Paramètres Manuels

Médicaments / Balance liquidienne

| Nom usuel                                                      | Posologie          | Unité | Quantité | Unité | Quantité |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------|-------|----------|
| Ceftriaxone 2G, dilution obligatoire (25 mg)                   | 1 g // 0,04 g/h    |       |          |       |          |
| NACL 9% (4500 mg)                                              | 500 ml // 5 mg/ml  |       |          |       |          |
| Potassium chlorure 10 % sol diluer p perf + Sodium chlorure 10 | 15 m/h // 140 mg/h |       |          |       |          |

## Signalement dans l'arborescence

Lors de la sélection d'un médicament dans l'arborescence (niveaux 3 ou 4), une **icône d'avertissement** est également affichée à côté du libellé des produits concernés.

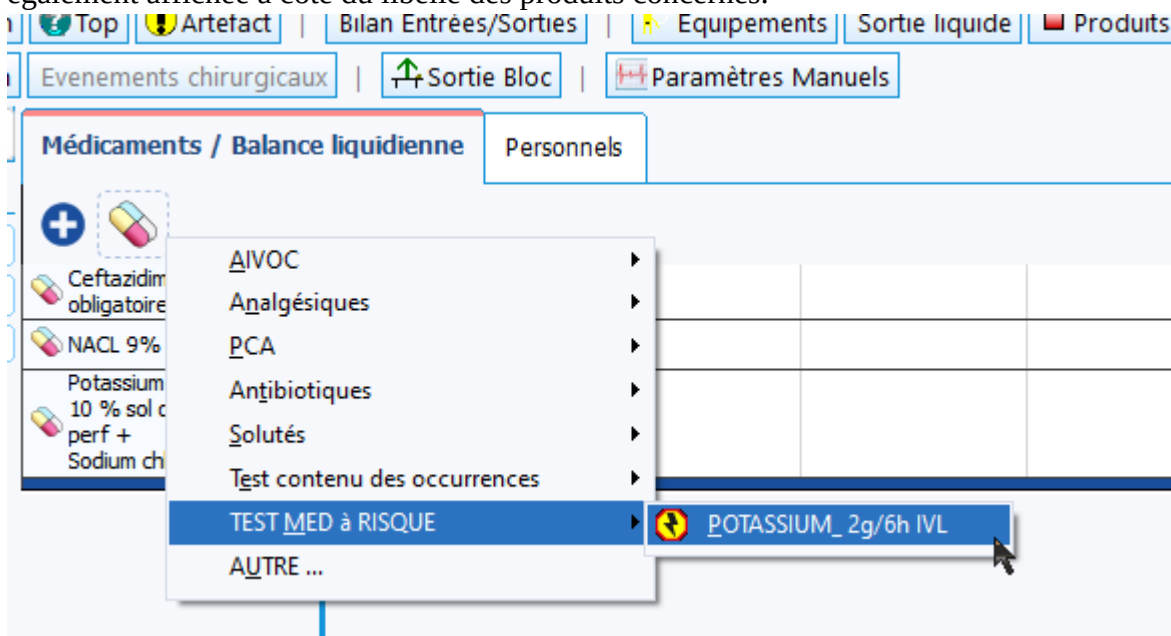

Top, Artefact, Bilan Entrées/Sorties, Equipements, Sortie liquide, Produits

Evenements chirurgicaux, Sortie Bloc, Paramètres Manuels

Médicaments / Balance liquidienne Personnels

- + Ceftriaxone 2G, dilution obligatoire (25 mg)
- NACL 9%
- Potassium chlorure 10 % sol diluer p perf + Sodium chlorure 10

TEST MED à RISQUE

POTASSIUM\_2g/6h IVL

Paramétrage à prévoir:

Pour que l'alerte visuelle s'affiche, les médicaments doivent au préalable être **marqués comme "à risque"** dans le livret thérapeutique. Cette indication se configure **manuellement dans la fenêtre d'édition du produit**.

**Edition d'un élément du livret thérapeutique**

|                                                             |                        |                 |                               |                                                    |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ID Livret<br>6256                                           | ID Diane<br>19645      | Quantité<br>    | Unités(Code)<br>57/60/119     | Unité(UCD)<br>ampoule                              | Quantité d'azote par contenant<br>0                                              |
| CIP<br>9333186                                              | CIP13<br>3400893331866 | Prix<br>0       | Voies(Code)<br>33             | Voies<br>intraveineuse (en perfusion)              | Voir la monographie                                                              |
| UCD<br>9333186                                              | UCD13<br>3400893331866 | CIS<br>63662572 | DCI(Code)<br>1171             | DCI<br>POTASSIUM CHLORURE 10 %                     | Base de médicament configurée : Vidal                                            |
| Nom<br>POTASSIUM 10% LAV AP20ML                             |                        |                 | ATC(Code)<br>B05XA01          | ATC<br>POTASSIUM CHLORURE                          | Base de médicament de l'élément : Vidal                                          |
| Libellé<br>POTASSIUM CHLORURE 2 G (10% LABO LAVOISIER), SOL |                        |                 | Famille(Code)<br>28           | Famille<br>Anesthésie - Réanimation                | Ré-importer depuis la BdM                                                        |
| Dosage<br>2000 mg/20 ml/ampoule                             |                        |                 | Forme(Code)<br>453            | Forme<br>solution à diluer pour perfusi            | Quantité Max. (/J/Kg)<br>Quantité Max. (/J)                                      |
| Dilution<br>Aucun paramétrage                               |                        |                 | Catégorie<br>Aucune catégorie | Libellé de prescription<br>POTASSIUM CHLORURE 10 % | Valeur létale (/J/Kg)<br>Valeur létale (/J)                                      |
| Commentaires pour prescripteurs                             | Commentaires pour IDEs |                 | Codes LES                     |                                                    | Poids patient (utilisé pour le calcul des valeurs maximales et létales)<br>70 Kg |
|                                                             |                        |                 | Référence de pharmacie        |                                                    | <input type="checkbox"/> Marquer le produit comme base                           |
|                                                             |                        |                 |                               |                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Médicament à risque</b>                   |
| Recherche de médicament<br>Rechercher...                    | CIP trouvés            |                 |                               |                                                    | Couleur du médicament<br>                                                        |

OK Annuler

**DIA-55628**


## Ajout simplifié d'une posologie non prévue dans le favori initial

Il est désormais possible de tracer plus facilement une administration médicamenteuse **dont la posologie n'était pas prévue initialement**.

un **raccourci** permet d'accéder à une nouvelle option : **"Autre posologie"**.

Cette option ouvre un formulaire simplifié dans lequel la **posologie peut être renseignée librement**, sans avoir à ressaisir les informations du produit ni de sa concentration.



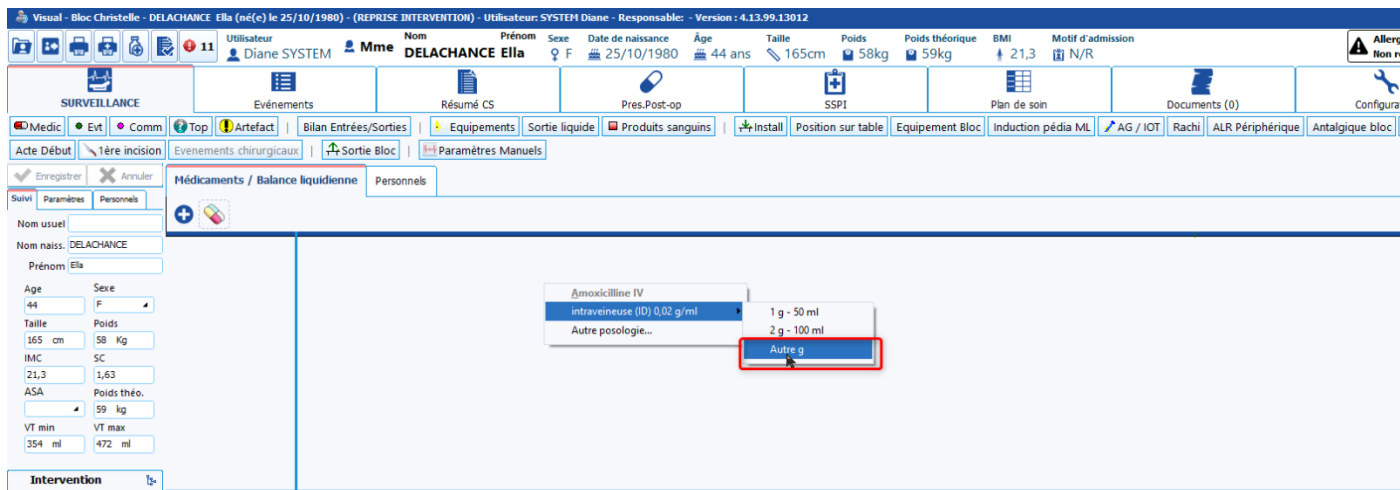

Visual - Bloc Christelle - DELACHANCE Ella (né(e) le 25/10/1980) - (REPRISE INTERVENTION) - Utilisateur: SYSTEM Diane - Responsable: - Version: 4.13.99.13012

Utilisateur: Diane SYSTEM Mme Nom: DELACHANCE Ella Prénom: Sexe: F Date de naissance: 25/10/1980 Âge: 44 ans Taille: 165cm Poids: 58kg Poids théorique: 59kg BMI: 21,3 Motif d'admission: N/R

SURVEILLANCE Événements Résumé CS Pres.Post-op SSP1 Plan de soin Documents (0) Configurat

Acte Début 1ère incision Événements chirurgicaux Sortie Bloc Paramètres Manuels

Médicaments / Balance liquidienne Personnels

Nom usuel: Nom naiss. DELACHANCE Prénom Ella

Age: 44 Sexe: F Taille: 165 cm Poids: 58 Kg IMC: 21,3 SC: 1,63 ASA: 59 Poids théo.: 59 kg VT min: 354 ml VT max: 472 ml

Intervention

Amoxicilline IV  
intraveineuse (ID) 0,02 g/ml 1 g - 50 ml  
Autre posologie... 2 g - 100 ml  
Autre g

Paramétrage à prévoir: aucun

**DIA-57639**

## Administrations directes : améliorations ergonomiques pour une saisie plus rapide

Plusieurs évolutions ont été apportées à l'interface des **Administrations directes**, afin de **fluidifier la saisie** et **gagner en cohérence** avec les autres modules.

### Un ordre de saisie harmonisé

Les menus de saisie des posologies adoptent désormais **le même ordre que ceux des Médicaments Diane**, pour une meilleure cohérence entre les interfaces.

### Accès rapide au menu de saisie depuis le détail d'une administration

Un **bouton d'accès rapide** a été ajouté dans le détail des administrations. Un simple clic permet d'ouvrir directement le menu de saisie associé, sans navigation supplémentaire.

### Accès direct aux Administrations directes

Un **nouveau bouton spécifique** permet d'accéder directement à la fenêtre des Administrations directes : Disponible dans l'**affichage amélioré** des administrations

Également accessible depuis le **Plan de soins**

Et **paramétrable** dans la section "Spécifique" : il peut ainsi être affiché dans **n'importe quel onglet**, selon les préférences utilisateurs ou les besoins métier.

## No epic

### **DIA-47146 - (Associé au dispositif médical)**

Ajout de nouveaux paramètres physiologiques pour le driver "Rad-97" (Masimo).

### **DIA-47755**

Gestion des modes ventilatoires pour les drivers utilisant le protocole "HL7".

### **DIA-52811**

### **Amélioration de l'affichage des prescriptions en réanimation**

Dans le cadre de l'amélioration de la lisibilité des documents imprimés en réanimation, deux évolutions ont été apportées :

#### **Modification du tag PRESCR\_REA\_MEDIC\_SAISIE\_RUNNING**

Ce tag d'impression a été ajusté pour améliorer la lisibilité des informations.

Les informations sont désormais présentées selon le format suivant :

Médicament : Dose Unité ; Débit Prescrit ; Fréquence ; Durée ; Débuté le [date] ; Fin prévue le [date]

#### **Exemple :**

*Paracetamol 500mg cpr : 500mg ; M,M,Soir ; pendant 5 jour(s) ; débuté le 03/12 ; fin prévue le 08/12.*

#### **Création du tag PRESCR\_REA\_MEDIC\_SAISIE\_RUNNING\_LIAISON**

Ce nouveau tag, destiné à la lettre de liaison, propose un niveau de détail supplémentaire.

Les informations sont affichées selon le format suivant :

Médicament : Dose Unité ; Débit + Diluant ; Fréquence ; Durée ; Débuté le [date] ; Fin prévue le [date] ; Dernière administration le [date heure] ; Prochaine administration le [date heure] ;  
Commentaire

#### **Exemple :**

*Paracetamol 500mg cpr : 500mg ; M,M,Soir ; pendant 5 jour(s) ; débuté le 03/12 ; fin prévue le 08/12 ; Dernière administration le 03/12 à 13h ; Prochaine administration le 03/12 à 19h ; Pour douleur.*

*Pour les deux tags, l'affichage des traitements est trié par catégorie de prescription, en respectant les catégories paramétrées dans l'onglet Prescription.*

## DIA-53869

Ajout du driver pour le moniteur hémodynamique non invasif Lidco / CNAP (Masimo).

## DIA-54913

## Personnalisation temporaire de l'affichage des médicaments administrés en anesthésie et réanimation

Une nouvelle option permet aux utilisateurs de **personnaliser l'affichage des médicaments administrés** directement depuis la grille de visualisation en anesthésie ou en réanimation.

Un **bouton engrenage** (identique à celui utilisé dans le plan de soins) est désormais affiché en haut à droite de la grille. Un simple clic sur ce bouton ouvre la **fenêtre de configuration** initialisée avec les paramètres par défaut de l'établissement.


### Personnalisation à la volée

L'utilisateur peut alors sélectionner les colonnes et données qu'il souhaite afficher.

Les **modifications sont appliquées immédiatement** à la grille sans nécessiter de redémarrage.

### Comportement au redémarrage

Ces ajustements sont **temporaires** : ils sont **enregistrés localement** sur le poste en cours, mais **ne sont pas conservés** après la fermeture de l'application.

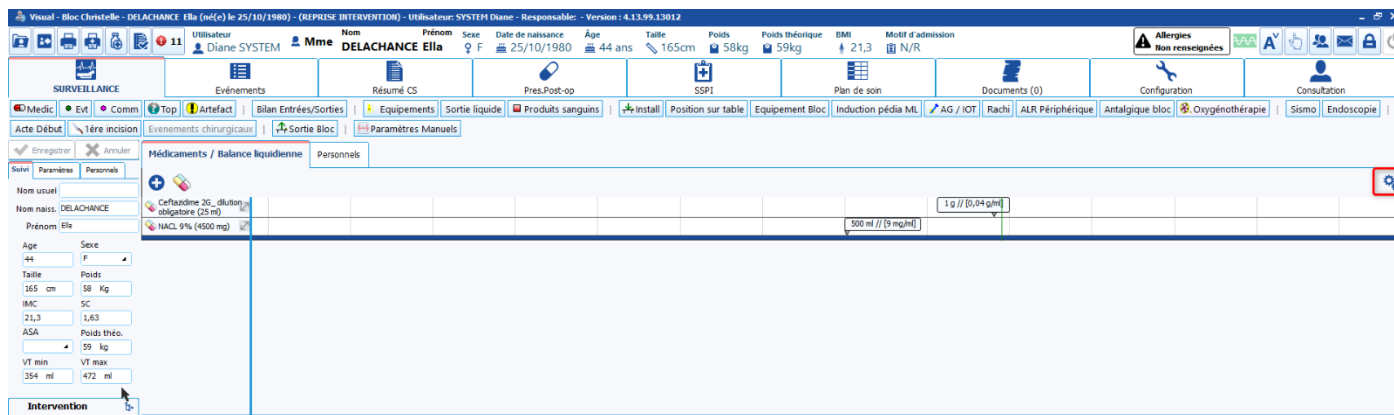

**Paramétrage à prévoir:** aucun

## DIA-58094

## Reprise du dernier onglet dans la Configuration application

Désormais, lorsque vous relancez l'application, le module **Configuration application** se rouvre directement sur **l'onglet et le sous-onglet** que vous utilisiez avant la relance.

Exemple : si vous travaillez dans le paramétrage d'affichage de la configuration Réanimation, que vous relancez Diane pour vérifier le résultat, puis que vous retournez dans la **Configuration**, vous êtes automatiquement repositionné sur le même onglet de travail.

Cette évolution vous évite de devoir naviguer à nouveau dans les menus et facilite vos ajustements successifs.

#### **DIA-60486**

Ajout du driver pour le respirateur Monnal Teo (Taema/Air Liquide).

#### **DIA-60494**

Un lien permettant d'accéder aux différents distributeurs de Diane est disponible depuis l'étiquette "A propos" du portail Diane.



Paramétrage: Aucun paramétrage nécessaire

## NOUVELLE FENETRE PRESCRIPTION

### **DIA-58388 - (Associé au dispositif médical)**

Le bouton de suppression d'un favori est désormais disponible depuis la fenêtre de prescription guidée.

Paramétrage: aucun paramétrage nécessaire.

## OPTIMISATION DES DEPLOIEMENTS

**DIA-58102**

### **Amélioration de la lisibilité des composants conditionnels**

Pour faciliter le paramétrage et le suivi des "contexte à jour" les dépendances sont identifiées dans la liste des composants

les **composants déclencheurs** (ceux dont le choix impacte l'affichage d'autres champs), sont désormais affichés **en gras**.

et les **composants conditionnels** (ceux qui sont affichés uniquement en fonction d'un autre composant), sont affichés *en italique*.

#### **Détail dans le panneau latéral:**

Lorsqu'un **composant déclencheur** est sélectionné le panneau latéral "Propriétés" affiche : le détail des *composants conditionnels* contrôlés par le contexte

Lorsqu'un *composant conditionnel* est sélectionné le panneau latéral "Propriétés" affiche : **composants déclencheur** dont il dépend.



Configuration de l'affichage du module Réanimation : CRIS\_REA OFFICIELLE\_Diagrid - Version : 4.14.99.13189

**Configuration en cours**

Administratif Médecin Prescription Ordonnances Paramed. Plan de soins Evolution 7J Ancarte génér. Pancarte 12h Neurologie Hémodynamique Ventilatoire Rénale Infect. Germes

Enregistrer Annuler Reprise Générer un modèle

Admission Correspondants **Sortie**

Date sortie de réa : 01/01/2020 Destination: 1 2) Patient décédé

7) Mutation vers un autre établissement de soins

☐ famille prévenue

☐ Informations données au malade

☐ Informations données au secrétariat

☐ Déséquipement sur PM+bactério du matériel sur PM

☐ Transmissions ciblées

☐ Dossier transfusionnel complet dans le DMU donner seulement la carte de groupe

☐ Dossier radio dans le DMU

☐ Courrier de sortie+Prescription et feuille d'administration du jour

☐ Feuille équipement pst

☐ Macro-cible de sortie

**Liste des composants**

Composants avec support de tabulation

- Date sortie de réa (0)
- Destination: (1)**
- Patient décédé (2)**
- Date et heure du décès (3)
- REQUISITION (4)
- Mutation dans un autre service de l'établissement (5)
- Retour au domicile (6)
- Mutation vers un autre établissement de soins (7)
- Décès (8)
- Décès (9)
- Formalités administratives (10)
- Autopsie (11)
- Obstacle légale (12)

Composants sans support de tabulation

- \* Si obstacle légale signé par le médecin
- NE PLUS RIEN TOUCHER, laisser tel quel
- \* Si autopsie: déséquiper + bactério du matériel
- En cas de décès :
- Faire la toilette mortuaire
- Pas de caption

Propriétés

Ouvrir la fenêtre de configuration

Libellé

Destination:

Position X: 165 Position Y: 30

Largeur: 190 Hauteur: 24

Contexte

Contrôle les composants suivants :

- Mutation dans un autre service de l'établissement
- Retour au domicile
- Mutation vers un autre établissement de soins

Afficher l'ordre de tabulation


Paramétrage: aucun paramétrage nécessaire

## Optimisation et sécurisation du mode "Dégradé" (Sauvegarde)

### **DIA-60071 - (Associé au dispositif médical)**

Le " Mode dégradé " peut maintenant être paramétré pour l'ensemble des modules Diane. Celui-ci peut prendre en charge l'intégralité des documents.

Une nouvelle option est disponible dans le paramétrage des lettres types.  
Ainsi que dans le paramétrage des exports

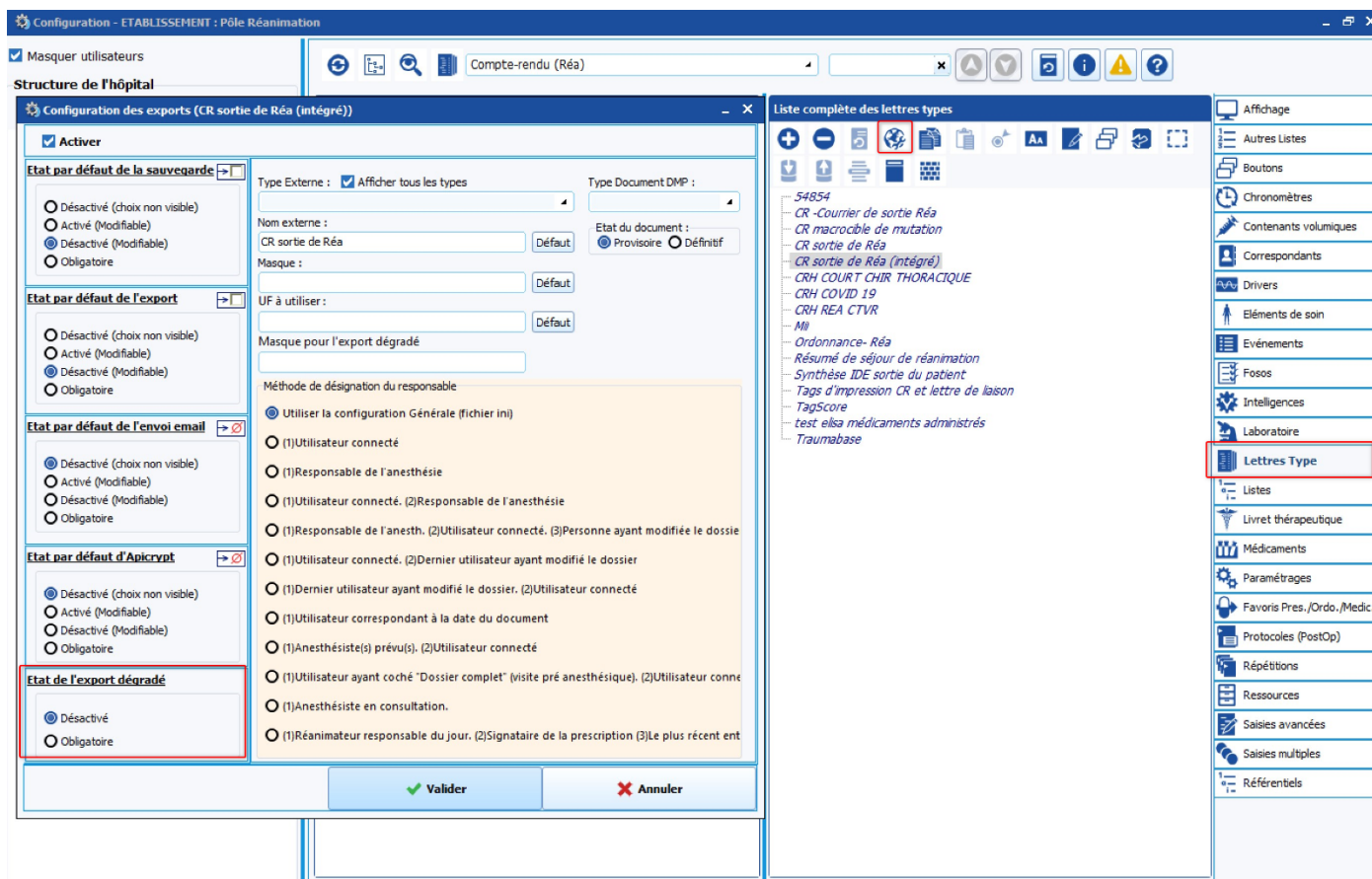

## OUTIL DE FUSION

### **DIA-60169**

Les fusions de dossiers contenant des Eléments de soins ( Schéma corporel) est supporté par le module.

### **DIA-60176**

Les fusions de dossiers contenant des enregistrements d' Administrations directes est supporté par le module.

### **DIA-60182**

Les fusions de dossiers contenant des enregistrements de prescriptions est supporté par le module.


## PN13

## DIA-48755 - (Associé au dispositif médical)

L'**export manuel de la prescription en PN13** est une nouvelle option possible. Vous pouvez ainsi exporter la prescription vers le logiciel tiers, au moment le plus opportun pour vous.

Un bouton est disponible depuis l'onglet de prescription, celui est corrélé au droit de signature de la prescription.

L'état (l'aspect) du bouton change si l'export a été ou non effectué. Le survol permet de voir qui a réalisé l'export ainsi que la date / heure de réalisation.

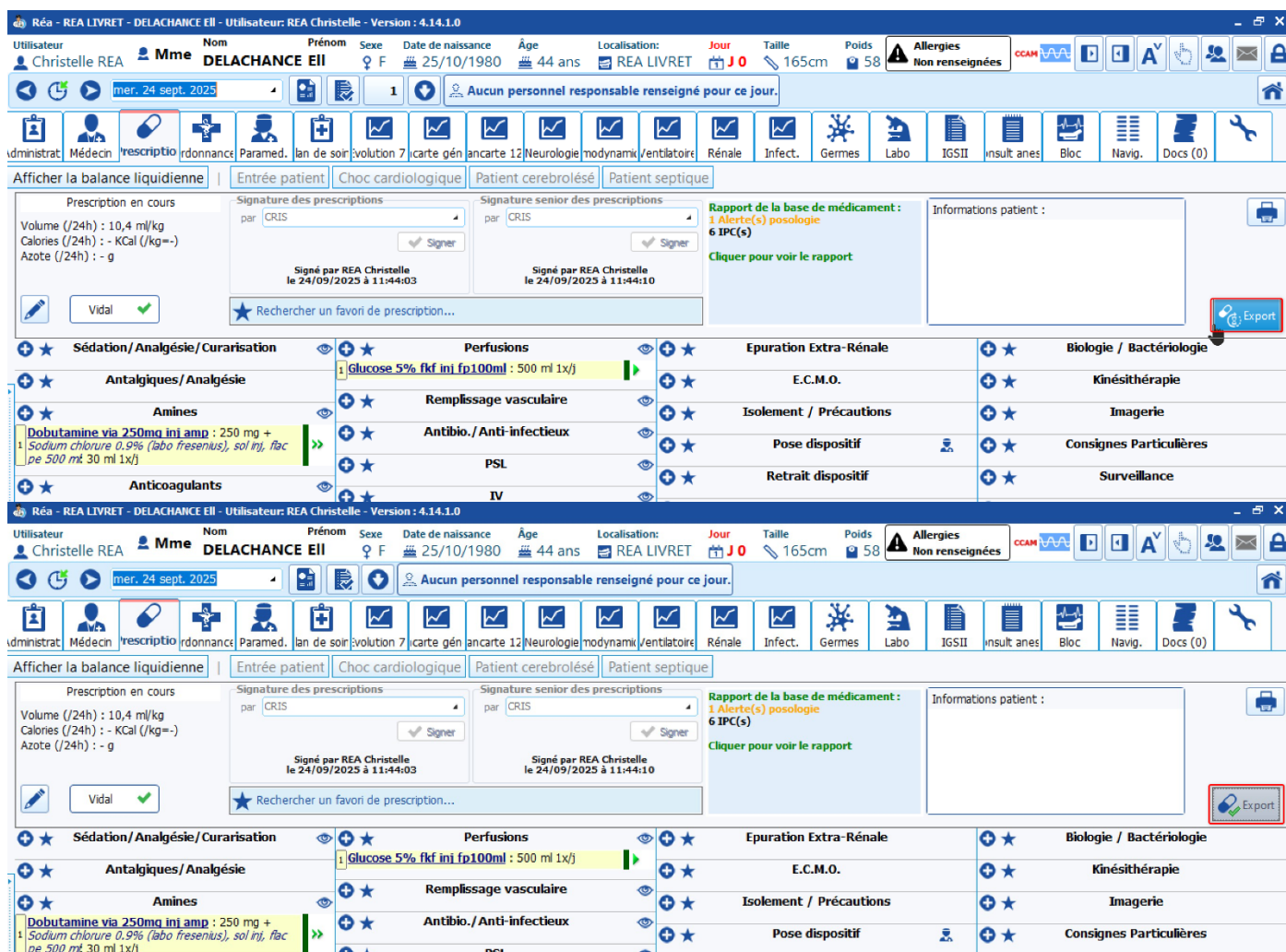

The screenshot shows the BOW MEDICAL software interface for a patient named Mme DELACHANCE EII. The interface includes a header with patient information, a navigation bar with various medical icons, and a main area displaying a prescription form. The prescription form has several sections: 'Prescription en cours' (Prescription in progress), 'Signature des prescriptions' (Signature of prescriptions), and 'Rapport de la base de médicament' (Report of the drug base). A red box highlights the 'Export' button in the bottom right corner of the prescription form.

N.B. Un avertissement est présent sur la fenetre de clôture si aucun export n'a été effectué.

## Paramétrage:

Le mode d'export manuel est activable depuis la clé de paramétrage :

Export ==> PN13==> " Moment ou exporter la prescription" ( ExportPN13Moment)

## REFERENTIELS

### **DIA-58597**

Création d'un composant dédié pour la recherche des éléments appartenant à un référentiel.  
Celui permet une recherche par code, par libellé et par scan d'un code barre.

## REQUETE

### **DIA-58893**

Numéro d'intervention  
Numéro de dossier Diane  
Numéro de patient => IPP  
Numéro de séjour  
Date / Heure intervention  
Type d'anesthésie  
Anesthésiste  
Opération : description de l'opération => intitulé de chirurgie

### **DIA-59452**

La requête permet de connaître le nombre de patients présent sur une période et une instance géographique

### **DIA-59906**

requête permettant d'extraire le total des produits nécessaires aux prescriptions pour chaque patient. La restriction géographique et temporelle existante est utilisable.

Les données présentes sont :

**Nom**

**Prénom**

**Produit**

**ID Livret**

**Total Administration**  
**Unité Administration**  
**Total Conditionnement**  
**Unités Conditionnement**

## DIA-60080

Une nouvelle requête a été développée incluant les paramètres suivants :

Nombre d'anesthésies par an

Détail du nombre d'anesthésie par site

Détail du nombre d'anesthésie par score ASA Détail nombre AG vs AG + ALR ou AL vs ALR ou AL sans AG

Durée d'anesthésie

Nombre de consultations d'anesthésie

Nombre de consultations d'anesthésie par score ASA

## sujets sur l'usage


## DIA-58429

### Affichage d'informations complémentaires dans le bandeau patient

Les **informations contextuelles complémentaires** peuvent être affichées dans le bandeau patient (ex. antécédents, précautions, etc.).

**Fonctionnement** : Lorsqu'au moins une donnée est disponible pour le patient, un **icône**  s'affiche dans le bandeau. Le **survol de cet indicateur** permet d'accéder au détail via une infobulle.

Le choix des informations affichées est paramétrable.

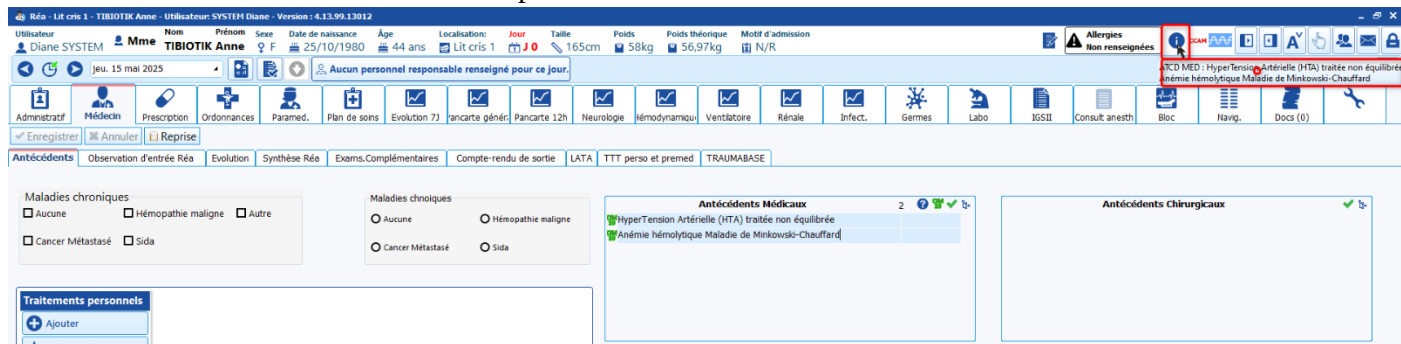

The screenshot displays the DIA-58429 software interface. At the top, there's a header bar with patient information: 'Rég - Lit cris 1 - TIBIOTIK Anne - Utilisateur: SYSTEM Diane - Version : 4.13.99.13012'. Below this, a navigation bar includes tabs like 'Administratif', 'Médecin', 'Prescription', 'Ordonnances', 'Paraméd.', 'Plan de soins', 'Evolution 7J', 'Ancarté génér.', 'Pancarte 12h', 'Neurologie', 'Hémodynamique', 'Ventilatoire', 'Rénale', 'Infect.', 'Germes', 'Labo', 'IGSII', 'Consult anesth', 'Bloc', 'Navig.', and 'Docs (0)'. The main area is divided into sections for 'Antécédents' (Medical History), 'Observation d'entrée Réa', 'Evolution', 'Synthèse Réa', 'Exams.Complémentaires', 'Compte-rendu de sortie', 'LATA', 'TTT perso et premed', and 'TRAUMABASE'. The 'Antécédents' section is expanded, showing 'Maladies chroniques' (Chronic Diseases) with options for 'Aucune', 'Hémodopathie maligne', 'Autre', 'Cancer Métastasé', and 'Sida'. It also lists 'Antécédents Médicaux' (Medical History) with entries like 'Hypertension Artérielle (HTA) traitée non équilibrée' and 'Anémie hémolytique Maladie de Minkowski-Chauffard'. A 'Traitements personnels' (Personal Treatments) section is also visible.



### **Paramétrage à prévoir:**

Paramétrage ==> DianeRea==> clé ini: DisplayedPatInfosBanner "Données du patient à surveiller dans le Bandeau".

## **V2 connecteur Diane Consult / Diane Op**

### **DIA-52400**

Gestion du type de réaction allergie et intolérance dans le contexte du lien entre Diane Consult et Diane Op

### **DIA-56751**

Amélioration de la gestion de l'état dentaire dans le contexte des échanges entre Diane Consult et Diane Op

### **DIA-58151**

Dans le contexte des échanges entre Diane Consult et Diane Op, la transmission des données de consultation peut désormais passer préalablement par un module intermédiaire Diane (induction, SSPI,...) tout en assurant la continuité des informations vers le bloc opératoire après le transfert